

Registro ANVISA nº 80083650078 – Revisão 02

Luiz Guilherme Sartori & Cia Ltda. – EPP CNPJ: 04.861.623/0001-00
Avenida Brasil, nº. 13500 – Ajapi - Rio Claro/SP - Resp. Téc.: Sérgio R.A.de Oliveira CREA/SP: 5070105936

Visando a praticidade e a facilidade de ter acesso às informações contidas nas Instruções de Uso de nossos produtos, a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores em acordo com a IN nº 4/2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no site:

http://www.sartori.ind.br/instrucao_uso

Importante: Verifique a versão da Instrução de Uso indicado no rótulo do produto, juntamente com o nº do registro e clique em "Baixar" no documento desejado para iniciar a transferência do arquivo. Para obter a Instrução de Uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone +55 (19) 3538-1910 ou pelo e-mail info@sartori.ind.br.

Instrução de Uso

Lâminas de Shaver II

Registro ANVISA nº 80083650078 - Revisão 02

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Nome Técnico: Instrumentos Cirúrgicos

Nome Comercial: Lâminas de Shaver II

Matéria Prima: Aço Inox/ABS/PC

Produto Estéril

Método de Esterilização: Óxido de Etileno - ETO

Validade: 5 anos da data de fabricação

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO



Os modelos comerciais que compõem a família das Lâminas de Shaver II são disponibilizados para comercialização embalados unitariamente e esterilizados por Óxido de Etileno - ETO.

Os produtos são embalados em embalagem **única** tipo Blister (embalagem primária), e acondicionados em embalagem externa de papel duro (embalagem secundária).

Na superfície da embalagem secundária contém rótulo com informações que identificam o produto, como código, descrição, número de lote, número do registro do produto na ANVISA etc.



Na superfície da embalagem também apresenta as seguintes informações: Instrução de Uso disponível em http://www.sartori.ind.br/instrucao_uso. Reg. ANVISA: 80083650078 - Revisão: 01. Para obter a versão impressa, contatar: Fone: +55 19 3538-1910 - info@sartori.ind.br. Informações que estão em conformidade com a Instrução Normativa nº 4 de 15 de junho de 2012, que estabelece regras para disponibilização de Instruções de Uso em formato não impresso de produtos para saúde.



A seguir constam imagens ilustrativas das possíveis montagens das Lâminas de Shaver II.

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,2X130MM		
	5861142-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,2X190MM		
	5861142-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,2X240MM		
	5861142-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,2X300MM		
	5861145-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,5X130MM		
	5861145-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,5X190MM		
	5861145-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,5X240MM		
	5861145-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,5X300MM		
	5861148-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,8X130MM		
	5861148-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,8X190MM		
	5861148-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,8X240MM		
	5861148-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,8X300MM		
	5861155-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.5,5X130MM		
	5861155-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.5,5X190MM		
	5861155-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.5,5X240MM		
	5861155-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.5,5X300MM		
5861165-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861165-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.6,5X130MM			
5861165-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.6,5X190MM			
5861165-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.6,5X240MM			
5861165-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.6,5X300MM			

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CMA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,2X130MM		
	5861142-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,2X190MM		
	5861142-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,2X240MM		
	5861142-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,2X300MM		
	5861145-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,5X130MM		
	5861145-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,5X190MM		
	5861145-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,5X240MM		
	5861145-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,5X300MM		
	5861148-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,8X130MM		
	5861148-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,8X190MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861148-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,8X240MM	4,5mm	
	5861148-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,8X300MM		
	5861155-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.5,5X90MM		
	5861155-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.5,5X130MM		
	5861155-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.5,5X190MM		
	5861155-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.5,5X240MM		
	5861155-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.5,5X300MM		
	5861165-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861165-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.6,5X130MM		
	5861165-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.6,5X190MM		
	5861165-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.6,5X240MM		
	5861165-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO INC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,2X130MM		
	5861142-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,2X190MM		
	5861142-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,2X240MM		
	5861142-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,2X300MM		
	5861145-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,5X130MM		
	5861145-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,5X190MM		
	5861145-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,5X240MM		
	5861145-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,5X300MM		
	5861148-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,8X130MM		
	5861148-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,8X190MM		
	5861148-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,8X240MM		
	5861148-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,8X300MM		
	5861155-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.5,5X130MM		
	5861155-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.5,5X190MM		
	5861155-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.5,5X240MM		
	5861155-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.5,5X300MM		
	5861165-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
5861165-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.6,5X130MM			
5861165-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.6,5X190MM			
5861165-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.6,5X240MM			
5861165-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.6,5X300MM			
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.				



Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,2X130MM		
	5861142-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,2X190MM		
	5861142-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,2X240MM		
	5861142-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,2X300MM		
	5861145-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,5X130MM		
	5861145-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,5X190MM		



Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861145-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,5X240MM		
	5861145-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,5X300MM		
	5861148-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,8X90MM		
	5861148-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,8X130MM		
	5861148-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,8X190MM		
	5861148-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,8X240MM	3,8mm	
	5861148-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,8X300MM		
	5861155-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.5,5X90MM		
	5861155-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.5,5X130MM		
	5861155-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.5,5X190MM		
	5861155-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.5,5X240MM	4,5mm	
	5861155-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.5,5X300MM		
	5861165-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.6,5X90MM		
	5861165-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.6,5X130MM		
	5861165-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.6,5X190MM		
	5861165-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.6,5X240MM	5,5mm	
	5861165-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.6,5X300MM		

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC II SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.



Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,2X130MM		
	5861142-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,2X190MM		
	5861142-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,2X240MM		
	5861142-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,2X300MM		
	5861145-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,5X130MM		
	5861145-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,5X190MM		
	5861145-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,5X240MM		
	5861145-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,5X300MM		
	5861148-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,8X130MM		
	5861148-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,8X190MM		
	5861148-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,8X240MM		
	5861148-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,8X300MM		
	5861155-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.5,5X130MM		
	5861155-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.5,5X190MM		
	5861155-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.5,5X240MM		
	5861155-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.5,5X300MM		
	5861165-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861165-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.6,5X130MM		
	5861165-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.6,5X190MM		
	5861165-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.6,5X240MM		
	5861165-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.6,5X300MM		

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO API SÃO INDICADAS PARA RECECÇÃO AGRESSIVA DE MENISCO, DESBRIDAMENTO ARTICULAR, E RESSECÇÃO ÓSSEA.				

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861142-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,2X130MM		
	5861142-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,2X190MM		
	5861142-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,2X240MM		
	5861142-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,2X300MM		
	5861145-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,5X130MM		
	5861145-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,5X190MM		
	5861145-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,5X240MM		
	5861145-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,5X300MM		
	5861148-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,8X130MM		
	5861148-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,8X190MM		
	5861148-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,8X240MM		
	5861148-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,8X300MM		
	5861155-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.5,5X130MM		
	5861155-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.5,5X190MM		
	5861155-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.5,5X240MM		
	5861155-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.5,5X300MM		
5861165-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861165-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.6,5X130MM			
5861165-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.6,5X190MM			
5861165-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.6,5X240MM			
5861165-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.6,5X300MM			
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO APC SÃO INDICADAS PARA TODOS OS DESBRIDAMENTOS GERAIS DE TECIDOS MOLES, ESPECIALMENTE MENISCECTOMIA E CONDROPLASTIA.				

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861142-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,2X130MM		
	5861142-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,2X190MM		
	5861142-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,2X240MM		
	5861142-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,2X300MM		
	5861145-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,5X130MM		
	5861145-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,5X190MM		
	5861145-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,5X240MM		
	5861145-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,5X300MM		
	5861148-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,8X130MM		
	5861148-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,8X190MM		
	5861148-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,8X240MM		
	5861148-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,8X300MM		
	5861155-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.5,5X130MM		
	5861155-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.5,5X190MM		
	5861155-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.5,5X240MM		
	5861155-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.5,5X300MM		
5861165-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861165-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.6,5X130MM			
5861165-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.6,5X190MM			
5861165-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.6,5X240MM			

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861165-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CM SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO DE MENISCO E DESBRIDAMENTO ARTICULAR				

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861142-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,2X130MM		
	5861142-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,2X190MM		
	5861142-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,2X240MM		
	5861142-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,2X300MM		
	5861145-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,5X130MM		
	5861145-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,5X190MM		
	5861145-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,5X240MM		
	5861145-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,5X300MM		
	5861148-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,8X130MM		
	5861148-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,8X190MM		
	5861148-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,8X240MM		
	5861148-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,8X300MM		
	5861155-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.5,5X130MM		
	5861155-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.5,5X190MM		
	5861155-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.5,5X240MM		
	5861155-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.5,5X300MM		
5861165-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861165-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.6,5X130MM			
5861165-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.6,5X190MM			
5861165-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.6,5X240MM			
5861165-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.6,5X300MM			
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861142-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,2X130MM		
	5861142-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,2X190MM		
	5861142-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,2X240MM		
	5861142-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,2X300MM		

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861145-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,5X130MM		
	5861145-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,5X190MM		
	5861145-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,5X240MM		
	5861145-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,5X300MM		
	5861148-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,8X130MM		
	5861148-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,8X190MM		
	5861148-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,8X240MM		
	5861148-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,8X300MM		
	5861155-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.5,5X130MM		
	5861155-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.5,5X190MM		
	5861155-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.5,5X240MM		
	5861155-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.5,5X300MM		
	5861165-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861165-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.6,5X130MM		
	5861165-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.6,5X190MM		
	5861165-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.6,5X240MM		
	5861165-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.6,5X300MM		

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861142-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861142-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861142-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861142-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861145-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861145-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861145-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861145-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861148-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861148-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,8X190MM		

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861148-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861148-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861155-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861155-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861155-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861155-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.5,5X300MM		
	5861165-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.6,5X90MM		
	5861165-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.6,5X130MM		
	5861165-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.6,5X190MM		
	5861165-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.6,5X240MM		
	5861165-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861142-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,2X130MM		
	5861142-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,2X190MM		
	5861142-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,2X240MM		
	5861142-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,2X300MM		
	5861145-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,5X130MM		
	5861145-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,5X190MM		
	5861145-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,5X240MM		
	5861145-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,5X300MM		
	5861148-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,8X130MM		
	5861148-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,8X190MM		
	5861148-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,8X240MM		
	5861148-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,8X300MM		
	5861155-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.5,5X130MM		
	5861155-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.5,5X190MM		
	5861155-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.5,5X240MM		
	5861155-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.5,5X300MM		
5861165-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861165-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.6,5X130MM			
5861165-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.6,5X190MM			
5861165-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.6,5X240MM			
5861165-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.6,5X300MM			
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861142-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,2X130MM		

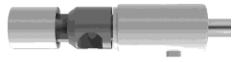

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861142-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,2X190MM		
	5861142-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,2X240MM		
	5861142-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,2X300MM		
	5861145-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,5X130MM		
	5861145-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,5X190MM		
	5861145-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,5X240MM		
	5861145-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,5X300MM		
	5861148-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,8X130MM		
	5861148-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,8X190MM		
	5861148-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,8X240MM		
	5861148-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,8X300MM		
	5861155-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.5,5X130MM		
	5861155-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.5,5X190MM		
	5861155-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.5,5X240MM		
	5861155-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.5,5X300MM		
	5861165-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861165-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.6,5X130MM		
	5861165-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.6,5X190MM		
	5861165-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.6,5X240MM		
	5861165-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.6,5X300MM		

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861142-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861142-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861142-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861142-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861145-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861145-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861145-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861145-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861148-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm	



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861148-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861148-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861148-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861148-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861155-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861155-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861155-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861155-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.5,5X300MM	5,5mm	
	5861165-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.6,5X90MM		
	5861165-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.6,5X130MM		
	5861165-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.6,5X190MM		
	5861165-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.6,5X240MM	5,5mm	
	5861165-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.6,5X300MM		

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861142-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,2X130MM		
	5861142-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,2X190MM		
	5861142-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,2X240MM		
	5861142-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,2X300MM	3,5mm	
	5861145-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,5X90MM		
	5861145-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,5X130MM		
	5861145-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,5X190MM		
	5861145-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,5X240MM	3,8mm	
	5861145-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,5X300MM		
	5861148-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,8X90MM		
	5861148-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,8X130MM		
	5861148-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,8X190MM	4,5mm	
	5861148-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,8X240MM		
	5861148-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,8X300MM		
	5861155-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.5,5X90MM		
	5861155-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.5,5X130MM		
	5861155-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.5,5X190MM		
	5861155-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.5,5X240MM		
	5861155-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.5,5X300MM	5,5mm	
5861165-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.6,5X90MM			
5861165-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.6,5X130MM			
5861165-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.6,5X190MM			
5861165-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.6,5X240MM	5,5mm		
5861165-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.6,5X300MM			

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861142-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	

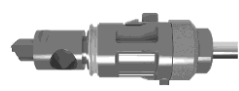

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861142-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861142-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861142-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861142-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861145-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861145-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861145-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861145-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861148-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861148-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861148-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861148-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861155-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861155-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861155-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861155-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.5,5X300MM		
	5861165-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
5861165-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.6,5X130MM			
5861165-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.6,5X190MM			
5861165-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.6,5X240MM			
5861165-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.6,5X300MM			

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

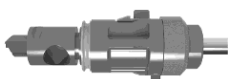

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861142-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,2X130MM		
	5861142-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,2X190MM		
	5861142-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,2X240MM		
	5861142-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,2X300MM		
	5861145-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,5X130MM		
	5861145-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,5X190MM		
	5861145-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,5X240MM		
	5861145-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,5X300MM		
	5861148-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,8X130MM		
	5861148-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,8X190MM		
	5861148-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,8X240MM		
	5861148-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,8X300MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861155-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.5,5X130MM		
	5861155-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.5,5X190MM		
	5861155-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.5,5X240MM		
	5861155-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.5,5X300MM		
	5861165-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861165-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.6,5X130MM		
	5861165-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.6,5X190MM		
	5861165-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.6,5X240MM		
	5861165-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.6,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,2X130MM		
	5861242-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,2X190MM		
	5861242-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,2X240MM		
	5861242-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,2X300MM		
	5861245-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,5X130MM		
	5861245-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,5X190MM		
	5861245-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,5X240MM		
	5861245-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,5X300MM		
	5861248-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,8X130MM		
	5861248-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,8X190MM		
	5861248-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,8X240MM		
	5861248-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,8X300MM		
	5861255-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.5,5X130MM		
	5861255-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.5,5X190MM		
	5861255-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.5,5X240MM		
	5861255-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.5,5X300MM		
5861265-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861265-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.6,5X130MM			
5861265-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.6,5X190MM			
5861265-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.6,5X240MM			
5861265-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.6,5X300MM			



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CMA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,2X130MM		
	5861242-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,2X190MM		
	5861242-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,2X240MM		
	5861242-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,2X300MM	3,5mm	
	5861245-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,5X90MM		
	5861245-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,5X130MM		
	5861245-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,5X190MM		
	5861245-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,5X240MM	3,8mm	
	5861245-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,5X300MM		
	5861248-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,8X90MM		
	5861248-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,8X130MM		
	5861248-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,8X190MM	4,5mm	
	5861248-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,8X240MM		
	5861248-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,8X300MM		
	5861255-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.5,5X90MM		
	5861255-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.5,5X130MM	5,5mm	
	5861255-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.5,5X190MM		
5861255-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.5,5X240MM			
5861255-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.5,5X300MM			
5861265-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861265-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.6,5X130MM			
5861265-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.6,5X190MM			
5861265-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.6,5X240MM			
	5861265-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.6,5X300MM		


INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO INC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,2X130MM		
	5861242-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,2X190MM		
	5861242-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,2X240MM		
	5861242-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,2X300MM	3,5mm	
	5861245-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,5X90MM		
	5861245-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,5X130MM		
	5861245-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,5X190MM		
	5861245-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,5X240MM	3,8mm	
	5861245-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,5X300MM		
	5861248-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,8X90MM		
	5861248-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,8X130MM		
	5861248-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,8X190MM	4,5mm	
	5861248-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,8X240MM		
	5861248-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,8X300MM		
	5861255-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.5,5X90MM		
	5861255-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.5,5X130MM	5,5mm	
	5861255-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.5,5X190MM		
5861255-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.5,5X240MM			
5861255-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.5,5X300MM			
5861265-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861265-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.6,5X130MM			
5861265-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.6,5X190MM			
5861265-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.6,5X240MM			
	5861265-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.6,5X300MM		

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.



Engate	Código	Descrição	ØInterno	Ponta
	5861242-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,2X130MM		
	5861242-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,2X190MM		
	5861242-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,2X240MM		
	5861242-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,2X300MM		
	5861245-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,5X130MM		
	5861245-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,5X190MM		
	5861245-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,5X240MM		
	5861245-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,5X300MM		
	5861248-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,8X130MM		
	5861248-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,8X190MM		
	5861248-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,8X240MM		
	5861248-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,8X300MM		
	5861255-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.5,5X130MM		
	5861255-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.5,5X190MM		
	5861255-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.5,5X240MM		
	5861255-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.5,5X300MM		
5861265-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861265-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.6,5X130MM			
5861265-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.6,5X190MM			
5861265-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.6,5X240MM			
5861265-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.6,5X300MM			

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC II SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.



Engate	Código	Descrição	ØInterno	Ponta
	5861242-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,2X130MM		
	5861242-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,2X190MM		
	5861242-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,2X240MM		
	5861242-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,2X300MM		
	5861245-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,5X130MM		
	5861245-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,5X190MM		
	5861245-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,5X240MM		
	5861245-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,5X300MM		



Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861248-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,8X130MM		
	5861248-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,8X190MM		
	5861248-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,8X240MM		
	5861248-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,8X300MM		
	5861255-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.5,5X130MM		
	5861255-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.5,5X190MM		
	5861255-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.5,5X240MM		
	5861255-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.5,5X300MM		
	5861265-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861265-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.6,5X130MM		
	5861265-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.6,5X190MM		
	5861265-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.6,5X240MM		
	5861265-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.6,5X300MM		

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO API SÃO INDICADAS PARA RECECÇÃO AGRESSIVA DE MENISCO, DESBRIDAMENTO ARTICULAR, E RESSECÇÃO ÓSSEA.

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,2X130MM		
	5861242-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,2X190MM		
	5861242-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,2X240MM		
	5861242-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,2X300MM		
	5861245-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,5X130MM		
	5861245-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,5X190MM		
	5861245-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,5X240MM		
	5861245-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,5X300MM		
	5861248-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,8X130MM		
	5861248-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,8X190MM		
	5861248-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,8X240MM		
	5861248-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,8X300MM		
	5861255-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.5,5X130MM		
	5861255-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.5,5X190MM		
	5861255-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.5,5X240MM		
	5861255-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.5,5X300MM		
	5861265-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861265-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.6,5X130MM		
	5861265-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.6,5X190MM		
	5861265-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.6,5X240MM		
	5861265-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.6,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO APC SÃO INDICADAS PARA TODOS OS DESBRIDAMENTOS GERAIS DE TECIDOS MOLES, ESPECIALMENTE MENISCECTOMIA E CONDROPLASTIA.

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861242-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,2X130MM		
	5861242-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,2X190MM		
	5861242-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,2X240MM		
	5861242-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,2X300MM		
	5861245-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,5X130MM		
	5861245-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,5X190MM		
	5861245-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,5X240MM		
	5861245-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,5X300MM		
	5861248-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,8X130MM		
	5861248-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,8X190MM		
	5861248-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,8X240MM		
	5861248-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,8X300MM		
	5861255-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.5,5X130MM		
	5861255-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.5,5X190MM		
	5861255-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.5,5X240MM		
	5861255-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.5,5X300MM		
5861265-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861265-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.6,5X130MM			
5861265-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.6,5X190MM			
5861265-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.6,5X240MM			
5861265-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.6,5X300MM			
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CM SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO DE MENISCO E DESBRIDAMENTO ARTICULAR				

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861242-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,2X130MM		
	5861242-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,2X190MM		
	5861242-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,2X240MM		
	5861242-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,2X300MM		
	5861245-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,5X130MM		
	5861245-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,5X190MM		
	5861245-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,5X240MM		
	5861245-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,5X300MM		
	5861248-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,8X130MM		
	5861248-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,8X190MM		
	5861248-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,8X240MM		
	5861248-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,8X300MM		
	5861255-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.5,5X130MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861255-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.5,5X190MM	5,5mm	
	5861255-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.5,5X240MM		
	5861255-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.5,5X300MM		
	5861265-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.6,5X90MM		
	5861265-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.6,5X130MM		
	5861265-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.6,5X190MM		
	5861265-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.6,5X240MM		
	5861265-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.6,5X300MM		

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.



Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,2X130MM		
	5861242-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,2X190MM		
	5861242-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,2X240MM		
	5861242-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,2X300MM		
	5861245-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,5X130MM		
	5861245-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,5X190MM		
	5861245-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,5X240MM		
	5861245-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,5X300MM		
	5861248-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,8X130MM		
	5861248-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,8X190MM		
	5861248-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,8X240MM		
	5861248-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,8X300MM		
	5861255-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.5,5X130MM		
	5861255-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.5,5X190MM		
	5861255-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.5,5X240MM		
	5861255-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.5,5X300MM		
5861265-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861265-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.6,5X130MM			
5861265-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.6,5X190MM			
5861265-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.6,5X240MM			
5861265-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.6,5X300MM			

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861242-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861242-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861242-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861245-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861245-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861245-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861245-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861248-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,8X130MM		

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861248-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861248-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861248-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861255-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861255-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861255-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861255-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.5,5X300MM		
	5861265-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.6,5X90MM		
	5861265-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.6,5X130MM		
	5861265-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.6,5X190MM		
	5861265-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.6,5X240MM		
	5861265-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.6,5X300MM		

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861242-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,2X130MM		
	5861242-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,2X190MM		
	5861242-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,2X240MM		
	5861242-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,2X300MM		
	5861245-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,5X130MM		
	5861245-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,5X190MM		
	5861245-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,5X240MM		
	5861245-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,5X300MM		
	5861248-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,8X130MM		
	5861248-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,8X190MM		
	5861248-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,8X240MM		
	5861248-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,8X300MM		
	5861255-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.5,5X130MM		
	5861255-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.5,5X190MM		
	5861255-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.5,5X240MM		
	5861255-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.5,5X300MM		
	5861265-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861265-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.6,5X130MM		
	5861265-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.6,5X190MM		
	5861265-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.6,5X240MM		
	5861265-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.6,5X300MM		

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861242-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4,2X130MM		
	5861242-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4,2X190MM		
	5861242-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4,2X240MM		
	5861242-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4,2X300MM		
	5861245-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4,5X130MM		



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861245-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4,5X190MM		
	5861245-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4,5X240MM		
	5861245-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4,5X300MM		
	5861248-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4,8X130MM		
	5861248-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4,8X190MM		
	5861248-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4,8X240MM		
	5861248-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4,8X300MM		
	5861255-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.5,5X130MM		
	5861255-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.5,5X190MM		
	5861255-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.5,5X240MM		
	5861255-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.5,5X300MM		
	5861265-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861265-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.6,5X130MM		
	5861265-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.6,5X190MM		
	5861265-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.6,5X240MM		
	5861265-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.6,5X300MM		

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta	
	5861242-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm		
	5861242-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,2X130MM			
	5861242-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,2X190MM			
	5861242-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,2X240MM			
	5861242-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,2X300MM			
	5861245-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm		
	5861245-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,5X130MM			
	5861245-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,5X190MM			
	5861245-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,5X240MM			
	5861245-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,5X300MM			
	5861248-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm		
	5861248-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,8X130MM			
	5861248-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,8X190MM			
	5861248-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,8X240MM			
	5861248-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,8X300MM			

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861255-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861255-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861255-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861255-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.5,5X300MM		
	5861265-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861265-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.6,5X130MM		
	5861265-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.6,5X190MM		
	5861265-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.6,5X240MM		
	5861265-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.6,5X300MM		

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861242-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,2X130MM		
	5861242-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,2X190MM		
	5861242-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,2X240MM		
	5861242-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,2X300MM		
	5861245-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,5X130MM		
	5861245-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,5X190MM		
	5861245-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,5X240MM		
	5861245-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,5X300MM		
	5861248-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,8X130MM		
	5861248-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,8X190MM		
	5861248-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,8X240MM		
	5861248-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,8X300MM		
	5861255-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.5,5X130MM		
	5861255-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.5,5X190MM		
	5861255-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.5,5X240MM		
	5861255-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.5,5X300MM		
5861265-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861265-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.6,5X130MM			
5861265-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.6,5X190MM			
5861265-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.6,5X240MM			
5861265-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.6,5X300MM			

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861242-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861242-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861242-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861242-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,2X300MM		



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861245-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861245-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861245-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861245-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861248-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861248-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861248-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861248-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861255-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861255-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861255-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861255-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.5,5X300MM		
	5861265-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861265-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.6,5X130MM		
	5861265-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.6,5X190MM		
	5861265-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.6,5X240MM		
	5861265-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.6,5X300MM		

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861242-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,2X130MM		
	5861242-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,2X190MM		
	5861242-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,2X240MM		
	5861242-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,2X300MM		
	5861245-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,5X130MM		
	5861245-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,5X190MM		
	5861245-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,5X240MM		
	5861245-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,5X300MM		
	5861248-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,8X130MM		
	5861248-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,8X190MM		
	5861248-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,8X240MM		
	5861248-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,8X300MM		
5861255-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.5,5X90MM	4,5mm		
5861255-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.5,5X130MM			
5861255-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.5,5X190MM			
5861255-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.5,5X240MM			
5861255-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.5,5X300MM			
5861265-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861265-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.6,5X130MM			



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861265-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.6,5X190MM		
	5861265-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.6,5X240MM		
	5861265-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861342-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,2X130MM		
	5861342-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,2X190MM		
	5861342-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,2X240MM		
	5861342-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,2X300MM	3,5mm	
	5861345-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,5X90MM		
	5861345-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,5X130MM		
	5861345-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,5X190MM		
	5861345-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,5X240MM	3,8mm	
	5861345-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,5X300MM		
	5861348-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,8X90MM		
	5861348-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,8X130MM		
	5861348-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,8X190MM	4,5mm	
	5861348-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,8X240MM		
	5861348-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,8X300MM		
	5861355-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.5,5X90MM		
	5861355-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.5,5X130MM		
	5861355-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.5,5X190MM		
	5861355-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.5,5X240MM		
	5861355-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.5,5X300MM	5,5mm	
5861365-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.6,5X90MM			
5861365-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.6,5X130MM			
5861365-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.6,5X190MM			
5861365-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.6,5X240MM	5,5mm		
5861365-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.6,5X300MM			
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CMA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.				

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861342-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,2X130MM		
	5861342-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,2X190MM		
	5861342-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,2X240MM		
	5861342-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,2X300MM		
	5861345-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,5X130MM		
	5861345-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,5X190MM		
	5861345-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,5X240MM		
	5861345-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,5X300MM	3,8mm	
	5861348-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,8X90MM		
	5861348-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,8X130MM		
	5861348-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,8X190MM		
	5861348-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,8X240MM		
	5861348-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,8X300MM	4,5mm	
	5861355-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.5,5X90MM		
	5861355-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.5,5X130MM		
	5861355-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.5,5X190MM		
	5861355-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.5,5X240MM		
	5861355-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.5,5X300MM	5,5mm	
5861365-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.6,5X90MM			

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861365-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.6,5X130MM		
	5861365-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.6,5X190MM		
	5861365-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.6,5X240MM		
	5861365-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO INC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.				

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861342-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,2X130MM		
	5861342-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,2X190MM		
	5861342-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,2X240MM		
	5861342-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,2X300MM		
	5861345-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,5X130MM		
	5861345-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,5X190MM		
	5861345-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,5X240MM		
	5861345-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,5X300MM		
	5861348-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,8X130MM		
	5861348-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,8X190MM		
	5861348-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,8X240MM		
	5861348-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,8X300MM		
	5861355-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.5,5X130MM		
	5861355-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.5,5X190MM		
	5861355-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.5,5X240MM		
	5861355-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.5,5X300MM		
5861365-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861365-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.6,5X130MM			
5861365-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.6,5X190MM			
5861365-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.6,5X240MM			
5861365-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.6,5X300MM			
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.				

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861342-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,2X130MM		
	5861342-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,2X190MM		
	5861342-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,2X240MM		
	5861342-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,2X300MM		
	5861345-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,5X130MM		
	5861345-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,5X190MM		
	5861345-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,5X240MM		
	5861345-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,5X300MM		
	5861348-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,8X130MM		

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861348-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,8X190MM		
	5861348-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,8X240MM		
	5861348-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,8X300MM		
	5861355-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.5,5X130MM		
	5861355-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.5,5X190MM		
	5861355-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.5,5X240MM		
	5861355-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.5,5X300MM		
	5861365-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.6,5X90MM		
	5861365-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.6,5X130MM		
	5861365-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.6,5X190MM		
	5861365-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.6,5X240MM		
	5861365-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.6,5X300MM		

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC II SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861342-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,2X130MM		
	5861342-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,2X190MM		
	5861342-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,2X240MM		
	5861342-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,2X300MM		
	5861345-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,5X130MM		
	5861345-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,5X190MM		
	5861345-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,5X240MM		
	5861345-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,5X300MM		
	5861348-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,8X130MM		
	5861348-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,8X190MM		
	5861348-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,8X240MM		
	5861348-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,8X300MM		
	5861355-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.5,5X130MM		
	5861355-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.5,5X190MM		
	5861355-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.5,5X240MM		
	5861355-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.5,5X300MM		
	5861365-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861365-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.6,5X130MM		
	5861365-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.6,5X190MM		
	5861365-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.6,5X240MM		
	5861365-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.6,5X300MM		

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO API SÃO INDICADAS PARA RECECÇÃO AGRESSIVA DE MENISCO, DESBRIDAMENTO ARTICULAR, E RESSECÇÃO ÓSSEA.

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861342-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,2X130MM		
	5861342-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,2X190MM		



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861342-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,2X240MM		
	5861342-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,2X300MM		
	5861345-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,5X130MM		
	5861345-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,5X190MM		
	5861345-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,5X240MM		
	5861345-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,5X300MM		
	5861348-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,8X90MM		3,8mm
	5861348-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,8X130MM		
	5861348-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,8X190MM		
	5861348-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,8X240MM		
	5861348-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,8X300MM		
	5861355-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.5,5X130MM		
	5861355-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.5,5X190MM		
	5861355-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.5,5X240MM		
	5861355-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.5,5X300MM		
	5861365-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.6,5X90MM		5,5mm
	5861365-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.6,5X130MM		
	5861365-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.6,5X190MM		
	5861365-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.6,5X240MM		
	5861365-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO APC SÃO INDICADAS PARA TODOS OS DESBRIDAMENTOS GERAIS DE TECIDOS MOLES, ESPECIALMENTE MENISCECTOMIA E CONDRÓPLASTIA.				

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861342-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,2X130MM		
	5861342-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,2X190MM		
	5861342-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,2X240MM		
	5861342-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,2X300MM		
	5861345-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,5X130MM		
	5861345-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,5X190MM		
	5861345-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,5X240MM		
	5861345-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,5X300MM		
	5861348-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,8X90MM		3,8mm
	5861348-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,8X130MM		
	5861348-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,8X190MM		
	5861348-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,8X240MM		
	5861348-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,8X300MM		
	5861355-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.5,5X130MM		
	5861355-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.5,5X190MM		
	5861355-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.5,5X240MM		
	5861355-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.5,5X300MM		
	5861365-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.6,5X90MM		5,5mm
	5861365-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.6,5X130MM		
	5861365-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.6,5X190MM		
	5861365-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.6,5X240MM		
	5861365-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CM SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO DE MENISCO E DESBRIDAMENTO ARTICULAR				



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861342-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,2X130MM		

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861342-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,2X190MM		
	5861342-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,2X240MM		
	5861342-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,2X300MM		
	5861345-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,5X130MM		
	5861345-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,5X190MM		
	5861345-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,5X240MM		
	5861345-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,5X300MM		
	5861348-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,8X90MM		
	5861348-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,8X130MM	3,8mm	
	5861348-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,8X190MM		
	5861348-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,8X240MM		
	5861348-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,8X300MM		
	5861355-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.5,5X90MM		
	5861355-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.5,5X130MM		
	5861355-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.5,5X190MM	4,5mm	
	5861355-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.5,5X240MM		
	5861355-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.5,5X300MM		
5861365-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861365-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.6,5X130MM			
5861365-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.6,5X190MM			
5861365-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.6,5X240MM			
5861365-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.6,5X300MM			



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861342-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,2X130MM		
	5861342-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,2X190MM		
	5861342-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,2X240MM		
	5861342-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,2X300MM		
	5861345-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,5X130MM		
	5861345-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,5X190MM		
	5861345-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,5X240MM		
	5861345-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,5X300MM		
	5861348-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,8X130MM		
	5861348-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,8X190MM		
	5861348-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,8X240MM		
	5861348-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,8X300MM		
	5861355-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.5,5X130MM		
	5861355-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.5,5X190MM		
5861355-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.5,5X240MM			



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861355-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.5,5X300MM	5,5mm	
	5861365-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.6,5X90MM		
	5861365-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.6,5X130MM		
	5861365-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.6,5X190MM		
	5861365-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.6,5X240MM		
	5861365-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861342-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861342-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861342-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861342-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861345-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861345-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861345-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861345-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861348-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861348-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861348-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861348-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861355-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861355-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861355-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861355-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.5,5X300MM		
	5861365-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861365-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.6,5X130MM		
	5861365-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.6,5X190MM		
	5861365-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.6,5X240MM		
	5861365-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861342-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861342-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,2X130MM		
	5861342-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,2X190MM		
	5861342-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,2X240MM		
	5861342-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,2X300MM		
	5861345-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,5X130MM		
	5861345-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,5X190MM		
	5861345-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,5X240MM		
	5861345-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,5X300MM	3,8mm	
	5861348-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,8X90MM		
	5861348-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,8X130MM		
	5861348-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,8X190MM		
	5861348-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,8X240MM	4,5mm	
	5861348-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,8X300MM		
	5861355-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.5,5X90MM		
	5861355-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.5,5X130MM		
	5861355-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.5,5X190MM	5,5mm	
	5861355-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.5,5X240MM		
	5861355-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.5,5X300MM		
	5861365-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.6,5X90MM		
5861365-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.6,5X130MM			
5861365-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.6,5X190MM			
5861365-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.6,5X240MM			
5861365-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.6,5X300MM			

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861342-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,2X130MM		
	5861342-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,2X190MM		
	5861342-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,2X240MM		
	5861342-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,2X300MM	3,5mm	
	5861345-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,5X90MM		
	5861345-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,5X130MM		
	5861345-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,5X190MM		
	5861345-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,5X240MM	3,8mm	
	5861345-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,5X300MM		
	5861348-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,8X90MM		
	5861348-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,8X130MM		
	5861348-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,8X190MM	4,5mm	
	5861348-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,8X240MM		
	5861348-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,8X300MM		
	5861355-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.5,5X90MM		
	5861355-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.5,5X130MM		
	5861355-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.5,5X190MM		
	5861355-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.5,5X240MM		
	5861355-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.5,5X300MM		
5861365-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.6,5X90MM			



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861365-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.6,5X130MM		
	5861365-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.6,5X190MM		
	5861365-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.6,5X240MM		
	5861365-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861342-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861342-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861342-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861342-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861345-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861345-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861345-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861345-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861348-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861348-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861348-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861348-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861355-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861355-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861355-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861355-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.5,5X300MM		
5861365-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861365-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.6,5X130MM			
5861365-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.6,5X190MM			
5861365-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.6,5X240MM			
5861365-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.6,5X300MM			
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861342-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,2X130MM		
	5861342-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,2X190MM		



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861342-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,2X240MM		
	5861342-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,2X300MM		
	5861345-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,5X90MM		
	5861345-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,5X130MM	3,5mm	
	5861345-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,5X190MM		
	5861345-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,5X240MM		
	5861345-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,5X300MM		
	5861348-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,8X90MM		
	5861348-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,8X130MM	3,8mm	
	5861348-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,8X190MM		
	5861348-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,8X240MM		
	5861348-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,8X300MM		
	5861355-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.5,5X90MM		
	5861355-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.5,5X130MM	4,5mm	
	5861355-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.5,5X190MM		
	5861355-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.5,5X240MM		
	5861355-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.5,5X300MM		
	5861365-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.6,5X90MM		
	5861365-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.6,5X130MM	5,5mm	
	5861365-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.6,5X190MM		
	5861365-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.6,5X240MM		
	5861365-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.6,5X300MM		
	5861365-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.6,5X300MM		

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861342-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861342-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861342-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861342-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861345-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861345-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861345-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861345-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861348-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861348-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861348-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861348-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,8X300MM		
5861355-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm		
5861355-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.5,5X130MM			
5861355-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.5,5X190MM			
5861355-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.5,5X240MM			
5861355-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.5,5X240MM			

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861355-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.5,5X300MM	5,5mm	
	5861365-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.6,5X90MM		
	5861365-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.6,5X130MM		
	5861365-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.6,5X190MM		
	5861365-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.6,5X240MM		
	5861365-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.6,5X300MM		

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861342-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,2X130MM		
	5861342-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,2X190MM		
	5861342-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,2X240MM		
	5861342-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,2X300MM		
	5861345-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,5X130MM		
	5861345-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,5X190MM		
	5861345-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,5X240MM		
	5861345-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,5X300MM		
	5861348-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,8X130MM		
	5861348-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,8X190MM		
	5861348-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,8X240MM		
	5861348-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,8X300MM		
	5861355-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.5,5X130MM		
	5861355-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.5,5X190MM		
	5861355-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.5,5X240MM		
	5861355-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.5,5X300MM		
5861365-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861365-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.6,5X130MM			
5861365-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.6,5X190MM			
5861365-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.6,5X240MM			
5861365-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.6,5X300MM			

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861442-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,2X130MM		
	5861442-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,2X190MM		
	5861442-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,2X240MM		
	5861442-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,2X300MM		
	5861445-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,5X130MM		
	5861445-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,5X190MM		
	5861445-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,5X240MM		

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861445-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,5X300MM	3,8mm	
	5861448-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,8X90MM		
	5861448-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,8X130MM		
	5861448-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,8X190MM		
	5861448-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,8X240MM		
	5861448-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,8X300MM		
	5861455-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.5,5X130MM		
	5861455-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.5,5X190MM		
	5861455-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.5,5X240MM		
	5861455-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.5,5X300MM		
	5861465-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861465-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.6,5X130MM		
	5861465-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.6,5X190MM		
	5861465-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.6,5X240MM		
	5861465-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.6,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CMA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861442-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,2X130MM		
	5861442-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,2X190MM		
	5861442-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,2X240MM		
	5861442-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,2X300MM		
	5861445-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,5X130MM		
	5861445-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,5X190MM		
	5861445-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,5X240MM		
	5861445-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,5X300MM		
	5861448-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,8X130MM		
	5861448-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,8X190MM		
	5861448-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,8X240MM		
	5861448-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,8X300MM		
	5861455-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.5,5X130MM		
	5861455-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.5,5X190MM		
	5861455-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.5,5X240MM		
	5861455-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.5,5X300MM		
	5861465-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861465-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.6,5X130MM		
	5861465-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.6,5X190MM		
	5861465-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.6,5X240MM		
	5861465-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.6,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO INC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.


Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861442-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,2X130MM		
	5861442-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,2X190MM		
	5861442-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,2X240MM		
	5861442-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,2X300MM		
	5861445-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,5X130MM		
	5861445-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,5X190MM		
	5861445-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,5X240MM		
	5861445-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,5X300MM		
	5861448-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,8X130MM		
	5861448-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,8X190MM		
	5861448-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,8X240MM		
	5861448-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,8X300MM		
	5861455-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.5,5X130MM		
	5861455-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.5,5X190MM		
5861455-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.5,5X240MM			
5861455-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.5,5X300MM			
5861465-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861465-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.6,5X130MM			
5861465-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.6,5X190MM			
5861465-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.6,5X240MM			
5861465-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.6,5X300MM			

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861442-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,2X130MM		
	5861442-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,2X190MM		
	5861442-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,2X240MM		
	5861442-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,2X300MM		
	5861445-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,5X130MM		
	5861445-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,5X190MM		
	5861445-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,5X240MM		
	5861445-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,5X300MM		
	5861448-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,8X130MM		
	5861448-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,8X190MM		
	5861448-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,8X240MM		
	5861448-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,8X300MM		
	5861455-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.5,5X130MM		
	5861455-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.5,5X190MM		
5861455-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.5,5X240MM			

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861455-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.5,5X300MM	5,5mm	
	5861465-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.6,5X90MM		
	5861465-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.6,5X130MM		
	5861465-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.6,5X190MM		
	5861465-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.6,5X240MM		
	5861465-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC II SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.				

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861442-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,2X130MM		
	5861442-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,2X190MM		
	5861442-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,2X240MM		
	5861442-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,2X300MM		
	5861445-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,5X130MM		
	5861445-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,5X190MM		
	5861445-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,5X240MM		
	5861445-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,5X300MM		
	5861448-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,8X130MM		
	5861448-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,8X190MM		
	5861448-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,8X240MM		
	5861448-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,8X300MM		
	5861455-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.5,5X130MM		
	5861455-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.5,5X190MM		
	5861455-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.5,5X240MM		
	5861455-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.5,5X300MM		
5861465-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861465-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.6,5X130MM			
5861465-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.6,5X190MM			
5861465-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.6,5X240MM			
5861465-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.6,5X300MM			
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO API SÃO INDICADAS PARA RECECÇÃO AGRESSIVA DE MENISCO, DESBRIDAMENTO ARTICULAR, E RESSECÇÃO ÓSSEA.				

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861442-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,2X130MM		
	5861442-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,2X190MM		
	5861442-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,2X240MM		
	5861442-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,2X300MM		
	5861445-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,5X130MM		
	5861445-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,5X190MM		
	5861445-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,5X240MM		
	5861445-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,5X300MM		
	5861448-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,8X130MM		
	5861448-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,8X190MM		
	5861448-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,8X240MM		
	5861448-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,8X300MM		

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta	
	5861448-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,8X300MM			
	5861455-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.5,5X90MM	4,5mm		
	5861455-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.5,5X130MM			
	5861455-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.5,5X190MM			
	5861455-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.5,5X240MM			
	5861455-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.5,5X300MM			
	5861465-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.6,5X90MM			5,5mm
	5861465-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.6,5X130MM			
	5861465-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.6,5X190MM			
	5861465-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.6,5X240MM			
	5861465-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.6,5X300MM			
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO APC SÃO INDICADAS PARA TODOS OS DESBRIDAMENTOS GERAIS DE TECIDOS MOLES, ESPECIALMENTE MENISCECTOMIA E CONDROPLASTIA.					

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861442-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,2X130MM		
	5861442-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,2X190MM		
	5861442-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,2X240MM		
	5861442-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,2X300MM		
	5861445-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,5X130MM		
	5861445-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,5X190MM		
	5861445-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,5X240MM		
	5861445-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,5X300MM		
	5861448-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,8X130MM		
	5861448-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,8X190MM		
	5861448-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,8X240MM		
	5861448-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,8X300MM		
	5861455-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.5,5X130MM		
	5861455-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.5,5X190MM		
	5861455-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.5,5X240MM		
	5861455-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.5,5X300MM		
	5861465-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
5861465-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.6,5X130MM			
5861465-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.6,5X190MM			
5861465-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.6,5X240MM			
5861465-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.6,5X300MM			
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CM SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO DE MENISCO E DESBRIDAMENTO ARTICULAR				

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861442-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,2X130MM		
	5861442-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,2X190MM		
	5861442-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,2X240MM		
	5861442-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,2X300MM		
	5861445-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,5X130MM		
	5861445-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,5X190MM		
	5861445-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,5X240MM		
	5861445-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,5X300MM		
	5861448-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,8X130MM		



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861448-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,8X190MM		
	5861448-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,8X240MM		
	5861448-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,8X300MM		
	5861455-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.5,5X130MM		
	5861455-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.5,5X190MM		
	5861455-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.5,5X240MM		
	5861455-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.5,5X300MM		
	5861465-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861465-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.6,5X130MM		
	5861465-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.6,5X190MM		
	5861465-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.6,5X240MM		
	5861465-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.6,5X300MM		

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861442-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,2X130MM		
	5861442-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,2X190MM		
	5861442-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,2X240MM		
	5861442-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,2X300MM		
	5861445-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,5X130MM		
	5861445-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,5X190MM		
	5861445-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,5X240MM		
	5861445-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,5X300MM		
	5861448-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,8X130MM		
	5861448-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,8X190MM		
	5861448-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,8X240MM		
	5861448-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,8X300MM		
	5861455-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.5,5X130MM		
	5861455-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.5,5X190MM		
	5861455-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.5,5X240MM		
	5861455-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.5,5X300MM		
	5861465-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861465-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.6,5X130MM		
	5861465-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.6,5X190MM		
	5861465-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.6,5X240MM		
	5861465-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.6,5X300MM		





Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861442-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861442-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861442-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861442-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861445-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861445-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861445-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861445-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861448-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861448-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861448-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861448-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861455-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861455-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861455-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861455-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.5,5X300MM		
5861465-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861465-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.6,5X130MM			
5861465-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.6,5X190MM			
5861465-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.6,5X240MM			
5861465-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.6,5X300MM			
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				



Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861442-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,2X130MM		
	5861442-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,2X190MM		
	5861442-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,2X240MM		
	5861442-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,2X300MM	3,5mm	
	5861445-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,5X90MM		
	5861445-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,5X130MM		
	5861445-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,5X190MM		
	5861445-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,5X240MM		
	5861445-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,5X300MM	3,8mm	
	5861448-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,8X90MM		
	5861448-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,8X130MM		
	5861448-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,8X130MM		

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta	
	5861448-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,8X190MM	4,5mm		
	5861448-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,8X240MM			
	5861448-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,8X300MM			
	5861455-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.5,5X90MM			
	5861455-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.5,5X130MM			
	5861455-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.5,5X190MM			
	5861455-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.5,5X240MM			
	5861455-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.5,5X300MM			
	5861465-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.6,5X90MM			5,5mm
	5861465-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.6,5X130MM			
	5861465-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.6,5X190MM			
	5861465-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.6,5X240MM			
	5861465-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.6,5X300MM			



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861442-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,2X130MM		
	5861442-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,2X190MM		
	5861442-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,2X240MM		
	5861442-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,2X300MM		
	5861445-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,5X130MM		
	5861445-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,5X190MM		
	5861445-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,5X240MM		
	5861445-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,5X300MM		
	5861448-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,8X130MM		
	5861448-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,8X190MM		
	5861448-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,8X240MM		
	5861448-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,8X300MM		
	5861455-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.5,5X130MM		
	5861455-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.5,5X190MM		
	5861455-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.5,5X240MM		
	5861455-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.5,5X300MM		
	5861465-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861465-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.6,5X130MM		
	5861465-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.6,5X190MM		
	5861465-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.6,5X240MM		
	5861465-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.6,5X300MM		



INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.


Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861442-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861442-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861442-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861442-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861445-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861445-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861445-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861445-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861448-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861448-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861448-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861448-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861455-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861455-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861455-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861455-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.5,5X300MM		
5861465-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861465-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.6,5X130MM			
5861465-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.6,5X190MM			
5861465-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.6,5X240MM			
5861465-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.6,5X300MM			

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861442-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,2X130MM		
	5861442-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,2X190MM		
	5861442-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,2X240MM		
	5861442-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,2X300MM		
	5861445-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,5X130MM		
	5861445-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,5X190MM		
	5861445-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,5X240MM		
	5861445-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,5X300MM		
	5861448-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,8X130MM		
	5861448-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,8X190MM		
	5861448-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,8X240MM		
	5861448-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,8X300MM		
5861455-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.5,5X90MM	4,5mm		

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861455-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.5,5X130MM	5,5mm	
	5861455-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.5,5X190MM		
	5861455-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.5,5X240MM		
	5861455-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.5,5X300MM		
	5861465-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.6,5X90MM		
	5861465-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.6,5X130MM		
	5861465-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.6,5X190MM		
	5861465-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.6,5X240MM		
	5861465-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS				

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861442-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861442-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861442-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861442-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861445-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861445-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861445-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861445-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861448-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861448-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861448-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861448-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861455-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861455-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861455-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861455-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.5,5X300MM		
5861465-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
5861465-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.6,5X130MM			
5861465-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.6,5X190MM			
5861465-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.6,5X240MM			
5861465-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.6,5X300MM			
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861442-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,2X130MM		

Engate	Código	Descrição	Øinterno	Ponta
	5861442-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,2X190MM		
	5861442-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,2X240MM		
	5861442-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,2X300MM		
	5861445-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,5X90MM		
	5861445-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,5X130MM	3,5mm	
	5861445-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,5X190MM		
	5861445-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,5X240MM		
	5861445-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,5X300MM		
	5861448-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,8X130MM		
	5861448-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,8X190MM		
	5861448-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,8X240MM		
	5861448-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,8X300MM	4,5mm	
	5861455-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.5,5X90MM		
	5861455-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.5,5X130MM		
	5861455-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.5,5X190MM		
	5861455-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.5,5X240MM	5,5mm	
	5861455-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.5,5X300MM		
	5861465-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.6,5X90MM		
	5861465-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.6,5X130MM		
5861465-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.6,5X190MM			
5861465-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.6,5X240MM			
5861465-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.6,5X300MM			

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

IDENTIFICAÇÃO DAS LEGENDAS

CMA = Ponta de Corte de Menisco Agressivo	BO-12 = Ponta Broca Oval 12AF
INC = Ponta Corte Incisivo	BO-SP = Ponta Broca Oval sem Proteção
RPC = Ponta Ressector de Perfil Completo	BR-6 = Ponta Broca Esférica 6AF
API = Ponta Corte Completo Incisivo	BR-12 = Ponta Broca Esférica 12AF
APC = Ponta Agressiva de Perfil Completo	BR-SP = Ponta Broca Esférica sem Proteção
RPC II = Ressector de Perfil Completo II	BC = Ponta Broca Cônica
CM = Ponta de Corte de Menisco	BC-SP = Ponta Broca Cônica sem Proteção
BO-6 = Ponta Broca Oval 6AF	BA = Ponta Broca Afiada

INDICAÇÃO E FINALIDADE

As Lâminas de Shaver II são indicadas para cirurgias artroscópicas para ressecção de tecidos moles, ressecção de ossos, e meniscectomia.

A finalidade das lâminas é ser utilizadas para perfuração, sinovectomia ou corte, raspagem intra-articular e uniformização de tecido ósseo e cartilaginoso.

CONTRAINDICAÇÕES

Não se aplica

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO/MECANISMO DE AÇÃO

As Lâminas de Shaver II são compostas por duas cânulas: Cânula Guia (externa) e Cânula de Sucção e Corte (interna), posicionadas coaxialmente.

Cada cânula possui em sua extremidade partes poliméricas que servem de engate para conexão com a peça de mão (Shaver).

As Lâminas de Shaver II são compatíveis com peças de mão (Shaver) da ConMed Linvatec, Smith&Nephew Dyonics, Razek e Stryker Fórmula. Desta forma, as lâminas devidamente conectadas, passam a desenvolver os movimentos de rotação para início de desempenho.

A cânula externa não apresenta movimento e a cânula interna apresenta movimento rotatório. Esse movimento rotatório promove a ação de corte desejada ao entrar em contato com o tecido.

As cânulas possuem uma abertura frontal com borda lisa, dentada ou outra geometria, permitindo diversos tipos de corte e a sucção dos tecidos através da parte canulada.

MODO DE USO DO PRODUTO

O produto é projetado para ser utilizado exclusivamente em procedimentos artroscópicos conduzidos por médicos especialistas neste tipo de intervenção.

Após a retirada da embalagem, o produto é conectado pelo seu engate traseiro a uma peça de mão compatível, e de escolha do médico especialista.

O cirurgião controla a direção e velocidade de rotação das lâminas, bem como a duração e intensidade do contato, de acordo com sua experiência, tipo de tecido e outros parâmetros para obter o efeito desejado.

As Lâmina de Shaver II com diâmetro interno maior que 3mm são passíveis de reprocessamento, entretanto a empresa recomenda o uso único.

As lâminas devem ser descartadas em locais apropriados, de forma a evitar a contaminação do meio ambiente e demais indivíduos. Recomenda-se a adoção dos regulamentos legais locais para descarte de produtos potencialmente contaminantes (RDC 222 de 2018 - Resíduo Hospitalar).

COMPOSIÇÃO

O tubo das cânulas, uma externa e uma interna, são fabricados com Aço Inoxidável AISI 304, as pontas são fabricadas com Aço Inoxidável XM-16, e o engate traseiro é fabricado com polímeros termoplásticos (ABS/PC), e cumprem com as seguintes normas:

- NBR 13911 - Instrumental cirúrgico - Material metálico - Especificações para aços inoxidáveis conformados;
- ASTM F899 - *Standard Specification for Wrought Stainless Steels for Surgical Instruments.*

ESTERILIZAÇÃO

As Lâminas de Shaver II são esterilizadas por Óxido de Etileno – ETO.

Validade: 5 anos da data de fabricação.

Produto passível de reprocessamento. Entretanto a Empresa recomenda o Uso Único.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local seco e fresco, protegido do calor excessivo e da luz do sol direta.

Recomendamos estocar o produto em temperaturas entre 5°C a 40°C.

Mantenha o produto distante de objetos cortantes ou pontiagudos.

O produto não deve ser armazenado diretamente ao chão, recomendamos o uso de prateleiras com 20 cm de distância do piso. Evitar empilhar mais do que 10 caixas.

TRANSPORTE

O produto deve ser transportado e acondicionado sempre protegido contra todo tipo de umidade, sujeira e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas.

O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação.

O produto deve ser transportado de forma que sua embalagem permaneça intacta até o momento do uso.

Evitar colocar peso sobre as caixas, deformando as embalagens.

MANUSEIO DO PRODUTO

As lâminas são fornecidas estéreis.

A embalagem deve ser aberta apenas no momento do uso, em ambiente cirúrgico e manipulada com luvas, evitando o contato com outros materiais.

Caso a embalagem esteja danificada ou violada, não utilizar o produto e efetuar descarte de acordo com as normas hospitalares.

O produto é de uso único e não deve ser reutilizado, devendo ser descartado após o uso.

ADVERTÊNCIAS

- Produto estéril.

- As Lâmina de Shaver II com diâmetro interno maior que 3mm são passíveis de reprocessamento, entretanto a empresa recomenda o uso único.

- Verificar a integridade da embalagem antes do uso. Não utilizar caso a embalagem esteja aberta,

danificada ou violada, ou om prazo de validade vencido.

- O produto deve estar íntegro para sua utilização, portanto recomendamos a análise do produto e caso apresente qualquer tipo de alteração como marcas de esforço mecânico, torto ou qualquer alteração visível, o mesmo deve ser descartado imediatamente.

- Testar o produto antes da sua utilização no paciente. Em caso de som ou vibração excessiva, ou aquecimento, não utilize o produto.

- Utilizar somente com irrigação do local de uso e sucção para o adequado arrefecimento da lâmina e evitar o travamento por acúmulo de material extraído do interior da lâmina.

- A carga lateral excessiva não melhora o corte e pode originar um aumento do desgaste da lâmina e até mesmo o travamento durante o uso.

- Não aplique ou exerça força de alavanca nas lâminas.

- Em caso de vibração ou som excessivo, aquecimento e/ou travamento durante o uso, interrompa imediatamente o procedimento e troque o produto. A continuidade do uso do produto travado pode deixar resquícios de metal na cavidade.

- O produto só deve ser utilizado por médicos cirurgiões qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis e, principalmente, da importância de se manter um ambiente totalmente estéril nas salas de cirurgia, onde o cuidado e precaução com cada detalhe são fundamentais para que não haja riscos de contaminação.

PRECAUÇÕES

- Antes de utilizar o produto, o cirurgião deve ler atentamente as instruções de uso que o auxiliarão no uso correto e seguro, além de proteger contra possíveis riscos. Alertamos que é necessário observar a correlação entre a versão da Instrução de Uso disponível no site, ou impressa, com a versão indicada no rótulo do produto.

- Teste primeiramente a lâmina fora do paciente, nos modos e velocidades de trabalho.

- Não permita que a lâmina entre em contato com outros instrumentos durante o uso.

- Evitar utilizar por mais de 1 minuto seguido para evitar o aquecimento excessivo da lâmina.

- Utilizar nas velocidades e direções indicados ou na menor velocidade possível para obter o efeito desejado, diminuindo a possibilidade de falhas.

- Não toque a área de movimento da lâmina com outros instrumentos, utensílios, tecidos e ou partes do corpo. Se isso ocorrer, poderá resultar em quebra, fratura ou dano da lâmina ou do equipamento e dano ao operador.

EFEITOS ADVERSOS

Não se aplica.

RECLAMAÇÃO E ATENDIMENTO AO CLIENTE

Todo cliente ou usuário desse dispositivo médico que tiver dúvidas ou queira maiores esclarecimentos sobre os serviços e/ou produtos oferecidos, poderá entrar em contato com a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores através dos dados para contato contido nas instruções de uso (disponível no site: www.sartori.ind.br/instrucao_uso) e rótulos da embalagem do produto.

Para o envio dos instrumentais ao fabricante para análise, o produto deve estar limpo e estéril. Devem ser utilizadas embalagens que mantenham a integridade física do mesmo. A embalagem deve conter todas as informações necessárias para a identificação do produto, bem como as condições de manuseio, tais como métodos de limpeza e desinfecção utilizados, bem como descrição e número do lote.

FABRICADO POR:

LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA - EPP.

Avenida Brasil, n.º 13500 - Distrito de Ajapi - Rio Claro - SP

CEP: 13508-000 Tel.: (19) 3538-1910

CNPJ: 04.861.623/0001-00 Indústria Brasileira

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: (19) 3538-1910

e-mail: info@sartori.ind.br

Registro ANVISA nº: 80083650078

Responsável Técnico: Sérgio R.A.de Oliveira

CREA/SP: 5070105936

Revisão 02 01/2023