

Luiz Guilherme Sartori & Cia Ltda. - CNPJ: 04.861.623/0001-00

Avenida Brasil, nº. 13500 – Ajapi - Rio Claro/SP - Resp. Téc.: Sérgio R.A.de Oliveira CREA/SP: 5070105936

Visando a praticidade e a facilidade de ter acesso às informações contidas nas Instruções de Uso de nossos produtos, a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores em acordo com a RDC 751/2022 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no site:

http://www.sartori.ind.br/instrucao_uso

Importante: Verifique a versão da Instrução de Uso indicado no rótulo do produto, juntamente com o nº do registro e clique em "Baixar" no documento desejado para iniciar a transferência do arquivo. Para obter a Instrução de Uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone +55 (19) 3538-1910 ou pelo e-mail info@sartori.ind.br.

Instrução de Uso

Lâminas de Shaver II

Registro ANVISA nº 80083650078 - Revisão 03

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Nome Técnico: Instrumentos Cirúrgicos

Nome Comercial: Lâminas de Shaver II

Matéria Prima: Aço Inox/ABS/PC

Produto Estéril

Método de Esterilização: Óxido de Etileno - ETO

Validade: 5 anos da data de fabricação

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Os modelos comerciais que compõem a família das Lâminas de Shaver II são disponibilizados para comercialização embalados unitariamente e esterilizados por Óxido de Etileno - ETO.

Os produtos são embalados em embalagem única tipo Blister (embalagem primária), e acondicionados em embalagem externa de papel duro (embalagem secundária).

Na superfície da embalagem secundária contém rótulo com informações que identificam o produto, como código, descrição, número de lote, número do registro do produto na ANVISA etc.

Na superfície da embalagem também apresenta as seguintes informações: Instrução de Uso disponível em http://www.sartori.ind.br/instrucao_uso. Reg. ANVISA: 80083650078 - Revisão: XX. Para obter a versão impressa, contatar: Fone: +55 19 3538-1910 - info@sartori.ind.br. Informações que estão em conformidade com a RDC 751/2022, que estabelece regras para disponibilização de Instruções de Uso em formato não impresso de produtos para saúde.

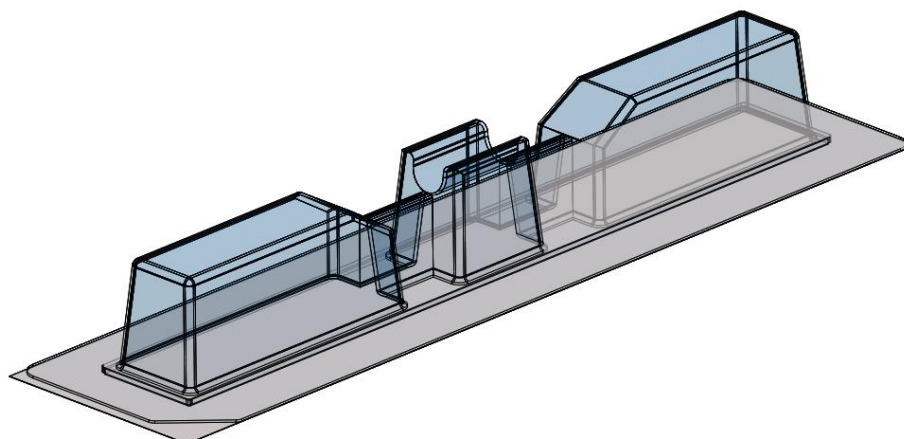


Imagem ilustrativa do conjunto blister (embalagem primária)



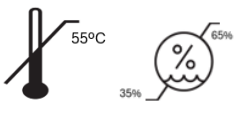
Imagem ilustrativa da embalagem secundária

 Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA CNPJ: 04.861.623/0001-00		MD			
Avenida Brasil, 13.500, Bairro Ajapi, Rio Claro SP CEP 13508-500 Resp.Téc.: Sérgio R.A. Oliveira CREA/SP: 5070105936					
REF	5861155-112	LOT 20813S	QTD 1	15/05/2029	15/05/24
LAMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 Ø5,5X130MM					
Nome Comercial: LAMINAS DE SHAVER II Nome Técnico: INSTRUMENTOS CIRURGICOS Material: ACO INOX / ABS/PC					
Atenção: Instrução de uso disponível em http://sartori.ind.br/instrucao_uso Reg. Anvisa: 80083650078 I.U. Revisão: XX Para obter a versão impressa sem custo de emissão e envio, contatar +55 19 3538-1910 - info@sartori.ind.br					
PRODUTO DE USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR					
PRODUTO ESTÉRIL - ETO					
Consultar a Instrução de Uso para maiores informações sobre condições de armazenamento, precauções, instruções e indicações de legendas					
				5861155-112  (01)07909700199126 UDI (17)290515 (10)20813S	

Imagem ilustrativa do rótulo do produto

SIGNIFICADO DA LEGENDA DOS SÍMBOLOS GRÁFICOS CONTIDOS NA ROTULAGEM DO PRODUTO MÉDICO:

As simbologias apresentadas nos rótulos dos dispositivos médicos estão ilustradas abaixo e seguem denominações em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 15223-1.

	Número de catálogo (código do produto embalado)
	Quantidade do produto embalado
	Código de remessa (número de lote do produto embalado)
	Data de Fabricação
	Usar até a data (validade)
	Esterilizado com Óxido de Etileno
	Não Reusar
	Armazenar em temperatura não superior à 55°C e umidade entre 35% e 65% UR
	Consultar Instruções de uso ou consultar instruções eletrônicas de uso
	Fabricante
	Não usar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de uso
	Proteger de luz solar
	Manter seco

	Frágil, manusear com cuidado
	Dispositivo médico
	Identificador único do dispositivo

ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os produtos são acompanhados de um Alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso no site do fabricante, além das informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso.

ALERTA DE INSTRUÇÕES DE USO

Conforme Resolução RDC 751 de 15.09.2022, que estabelece requisitos para disponibilização de Instrução de Uso em formato não impresso de dispositivos médicos, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.

As Instruções de Uso estão disponíveis em:
https://sartori.ind.br/instrucao_uso

Para a visualização dos arquivos utilize o software Adobe Acrobat Reader.

As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do número de Registro/ Notificação ANVISA e respectivo nome comercial (descrição do registro).

Todas as Instruções de Uso possuem o Nº do Registro/Notificação ANVISA e a revisão na primeira página do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso, informada no rótulo do produto.

Para Instrução de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar sem custo adicional (inclusive de envio), por meio do telefone +55 19 3538-1910 ou do e-mail: info@sartori.ind.br.

(FSQ 095.07.01)

RASTREABILIDADE

A rastreabilidade das Lâminas de Shaver II é realizada por meio das informações apresentadas nas etiquetas de rastreabilidade, nas quais estão disponíveis informações a respeito do fabricante, nome e modelo comercial do produto, número de lote, código do produto e o número de registro Anvisa, possibilitando traçar o caminho reverso até a fabricação do produto. Desse modo é possível verificar a matéria-prima, seus fornecedores e informações sobre os controles de qualidade realizados do início ao fim do processo de fabricação.

Na embalagem dos modelos comerciais são fornecidas 5 unidades de etiqueta de rastreabilidade e sua fixação é obrigatória no prontuário Clínico, no documento a ser entregue ao paciente, e na documentação fiscal que gera a cobrança.

Modelo de etiqueta de rastreabilidade das Lâminas de Shaver II

Luiz Guilherme Sartori & Cia Ltda
Lote: 20814S
Código: 5861129-011
Reg.Anvisa: 80083650079
LAMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA
DIAM.2,9X90MM

Matéria-prima:
ACO INOX / ABS/PC
(01)07909700194619(17)290515(10)20814S

Fab.: 15/05/2024
Val.: 15/05/2029

II. A seguir constam imagens ilustrativas das possíveis montagens das Lâminas de Shaver

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,2X130MM		
	5861142-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,2X190MM		
	5861142-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,2X240MM		
	5861142-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,2X300MM		
	5861145-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,5X130MM		
	5861145-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,5X190MM		
	5861145-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,5X240MM		
	5861145-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,5X300MM		
	5861148-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,8X130MM		
	5861148-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,8X190MM		
	5861148-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,8X240MM		
	5861148-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.4,8X300MM		
	5861155-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.5,5X130MM		
	5861155-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.5,5X190MM		
	5861155-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.5,5X240MM		
	5861155-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.5,5X300MM		
	5861165-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861165-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.6,5X130MM		
	5861165-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.6,5X190MM		
	5861165-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.6,5X240MM		
	5861165-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CMA DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CMA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,2X130MM		
	5861142-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,2X190MM		
	5861142-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,2X240MM		
	5861142-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,2X300MM		
	5861145-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,5X130MM		
	5861145-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,5X190MM		
	5861145-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,5X240MM		
	5861145-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,5X300MM		
	5861148-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,8X130MM		
	5861148-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,8X190MM		
	5861148-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,8X240MM		
	5861148-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.4,8X300MM		
	5861155-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.5,5X130MM		
	5861155-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.5,5X190MM		
	5861155-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.5,5X240MM		
	5861155-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.5,5X300MM		
	5861165-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861165-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.6,5X130MM		
	5861165-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.6,5X190MM		
	5861165-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.6,5X240MM		
	5861165-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV INC DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO INC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,2X130MM		
	5861142-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,2X190MM		
	5861142-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,2X240MM		
	5861142-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,2X300MM		
	5861145-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,5X130MM		
	5861145-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,5X190MM		
	5861145-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,5X240MM		
	5861145-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,5X300MM		
	5861148-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,8X130MM		
	5861148-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,8X190MM		
	5861148-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,8X240MM		
	5861148-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.4,8X300MM		
	5861155-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.5,5X130MM		
	5861155-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.5,5X190MM		
	5861155-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.5,5X240MM		
	5861155-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.5,5X300MM		
	5861165-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861165-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.6,5X130MM		
	5861165-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.6,5X190MM		
	5861165-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.6,5X240MM		
	5861165-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,2X130MM		
	5861142-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,2X190MM		
	5861142-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,2X240MM		
	5861142-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,2X300MM		
	5861145-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,5X130MM		
	5861145-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,5X190MM		
	5861145-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,5X240MM		
	5861145-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,5X300MM		
	5861148-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,8X130MM		
	5861148-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,8X190MM		
	5861148-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,8X240MM		
	5861148-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.4,8X300MM		
	5861155-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.5,5X130MM		
	5861155-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.5,5X190MM		
	5861155-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.5,5X240MM		
	5861155-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.5,5X300MM		
	5861165-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861165-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.6,5X130MM		
	5861165-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.6,5X190MM		
	5861165-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.6,5X240MM		
	5861165-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV RPC II DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC II SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,2X130MM		
	5861142-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,2X190MM		
	5861142-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,2X240MM		
	5861142-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,2X300MM		
	5861145-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,5X130MM		
	5861145-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,5X190MM		
	5861145-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,5X240MM		
	5861145-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,5X300MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861148-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,8X130MM		
	5861148-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,8X190MM		
	5861148-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,8X240MM		
	5861148-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.4,8X300MM		
	5861155-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.5,5X130MM		
	5861155-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.5,5X190MM		
	5861155-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.5,5X240MM		
	5861155-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.5,5X300MM		
	5861165-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861165-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.6,5X130MM		
	5861165-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.6,5X190MM		
	5861165-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.6,5X240MM		
	5861165-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV API DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO API SÃO INDICADAS PARA RECECÇÃO AGRESSIVA DE MENISCO, DESBRIDAMENTO ARTICULAR, E RESSECÇÃO ÓSSEA.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,2X130MM		
	5861142-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,2X190MM		
	5861142-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,2X240MM		
	5861142-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,2X300MM		
	5861145-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,5X130MM		
	5861145-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,5X190MM		
	5861145-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,5X240MM		
	5861145-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,5X300MM		
	5861148-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,8X130MM		
	5861148-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,8X190MM		
	5861148-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,8X240MM		
	5861148-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.4,8X300MM		
	5861155-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.5,5X130MM		
	5861155-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.5,5X190MM		
	5861155-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.5,5X240MM		
	5861155-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.5,5X300MM		
	5861165-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861165-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.6,5X130MM		
	5861165-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.6,5X190MM		
	5861165-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.6,5X240MM		
	5861165-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV APC DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO APC SÃO INDICADAS PARA TODOS OS DESBRIDAMENTOS GERAIS DE TECIDOS MOLES, ESPECIALMENTE MENISCECTOMIA E CONDROPLASTIA.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,2X130MM		
	5861142-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,2X190MM		
	5861142-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,2X240MM		
	5861142-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,2X300MM		
	5861145-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,5X130MM		
	5861145-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,5X190MM		
	5861145-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,5X240MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861145-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,5X300MM	3,8mm	
	5861148-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,8X90MM		
	5861148-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,8X130MM		
	5861148-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,8X190MM		
	5861148-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,8X240MM		
	5861148-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.4,8X300MM	4,5mm	
	5861155-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.5,5X90MM		
	5861155-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.5,5X130MM		
	5861155-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.5,5X190MM		
	5861155-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.5,5X240MM		
	5861155-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.5,5X300MM	5,5mm	
	5861165-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.6,5X90MM		
	5861165-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.6,5X130MM		
	5861165-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.6,5X190MM		
	5861165-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.6,5X240MM		
	5861165-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV CM DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CM SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO DE MENISCO E DESBRIDAMENTO ARTICULAR				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,2X130MM		
	5861142-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,2X190MM		
	5861142-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,2X240MM		
	5861142-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,2X300MM		
	5861145-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,5X130MM		
	5861145-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,5X190MM		
	5861145-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,5X240MM		
	5861145-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,5X300MM		
	5861148-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,8X130MM		
	5861148-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,8X190MM		
	5861148-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,8X240MM		
	5861148-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.4,8X300MM		
	5861155-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.5,5X130MM		
	5861155-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.5,5X190MM		
	5861155-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.5,5X240MM		
	5861155-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.5,5X300MM		
	5861165-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861165-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.6,5X130MM		
	5861165-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.6,5X190MM		
	5861165-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.6,5X240MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861165-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-6 DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,2X130MM		
	5861142-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,2X190MM		
	5861142-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,2X240MM		
	5861142-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,2X300MM		
	5861145-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,5X130MM		
	5861145-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,5X190MM		
	5861145-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,5X240MM		
	5861145-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,5X300MM		
	5861148-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,8X130MM		
	5861148-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,8X190MM		
	5861148-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,8X240MM		
	5861148-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.4,8X300MM		
	5861155-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.5,5X130MM		
	5861155-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.5,5X190MM		
	5861155-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.5,5X240MM		
	5861155-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.5,5X300MM		
	5861165-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861165-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.6,5X130MM		
	5861165-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.6,5X190MM		
	5861165-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.6,5X240MM		
	5861165-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-12 DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861142-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,2X190MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861142-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861145-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861145-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861145-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861145-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861148-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861148-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861148-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861148-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861155-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861155-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861155-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861155-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.5,5X300MM		
	5861165-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861165-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.6,5X130MM		
	5861165-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.6,5X190MM		
	5861165-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.6,5X240MM		
	5861165-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BO-SP DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,2X130MM		
	5861142-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,2X190MM		
	5861142-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,2X240MM		
	5861142-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,2X300MM		
	5861145-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,5X130MM		
	5861145-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,5X190MM		
	5861145-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,5X240MM		
	5861145-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,5X300MM		
	5861148-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,8X130MM		
	5861148-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,8X190MM		
	5861148-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,8X240MM		
	5861148-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.4,8X300MM		
	5861155-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.5,5X130MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861155-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.5,5X190MM		
	5861155-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.5,5X240MM		
	5861155-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.5,5X300MM		
	5861165-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861165-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.6,5X130MM		
	5861165-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.6,5X190MM		
	5861165-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.6,5X240MM		
	5861165-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-6 DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,2X130MM		
	5861142-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,2X190MM		
	5861142-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,2X240MM		
	5861142-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,2X300MM		
	5861145-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,5X130MM		
	5861145-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,5X190MM		
	5861145-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,5X240MM		
	5861145-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,5X300MM		
	5861148-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,8X130MM		
	5861148-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,8X190MM		
	5861148-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,8X240MM		
	5861148-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.4,8X300MM		
	5861155-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.5,5X130MM		
	5861155-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.5,5X190MM		
	5861155-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.5,5X240MM		
	5861155-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.5,5X300MM		
	5861165-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861165-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.6,5X130MM		
	5861165-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.6,5X190MM		
	5861165-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.6,5X240MM		
	5861165-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-12 DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861142-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861142-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861142-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861145-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861145-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861145-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861145-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861148-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861148-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861148-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861148-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861155-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861155-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861155-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861155-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.5,5X300MM		
	5861165-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861165-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.6,5X130MM		
	5861165-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.6,5X190MM		
	5861165-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.6,5X240MM		
	5861165-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BR-SP DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,2X130MM		
	5861142-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,2X190MM		
	5861142-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,2X240MM		
	5861142-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,2X300MM		
	5861145-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,5X130MM		
	5861145-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,5X190MM		
	5861145-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,5X240MM		
	5861145-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,5X300MM		
	5861148-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,8X130MM		
	5861148-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,8X190MM		
	5861148-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,8X240MM		
	5861148-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.4,8X300MM		
5861155-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.5,5X90MM	4,5mm		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861155-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.5,5X130MM		
	5861155-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.5,5X190MM		
	5861155-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.5,5X240MM		
	5861155-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.5,5X300MM		
	5861165-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861165-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.6,5X130MM		
	5861165-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.6,5X190MM		
	5861165-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.6,5X240MM		
	5861165-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861142-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861142-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861142-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861145-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861145-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861145-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861145-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861148-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861148-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861148-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861148-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861155-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861155-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861155-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861155-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.5,5X300MM		
	5861165-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861165-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.6,5X130MM		
	5861165-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.6,5X190MM		
	5861165-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.6,5X240MM		
	5861165-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BC-SP DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861142-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861142-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,2X130MM		
	5861142-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,2X190MM		
	5861142-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,2X240MM		
	5861142-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,2X300MM		
	5861145-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861145-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,5X130MM		
	5861145-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,5X190MM		
	5861145-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,5X240MM		
	5861145-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,5X300MM		
	5861148-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861148-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,8X130MM		
	5861148-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,8X190MM		
	5861148-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,8X240MM		
	5861148-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.4,8X300MM		
	5861155-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861155-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.5,5X130MM		
	5861155-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.5,5X190MM		
	5861155-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.5,5X240MM		
	5861155-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.5,5X300MM		
	5861165-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861165-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.6,5X130MM		
	5861165-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.6,5X190MM		
	5861165-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.6,5X240MM		
	5861165-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI LNV BA DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,2X130MM		
	5861242-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,2X190MM		
	5861242-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,2X240MM		
	5861242-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,2X300MM		
	5861245-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,5X130MM		
	5861245-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,5X190MM		
	5861245-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,5X240MM		
	5861245-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,5X300MM		
	5861248-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,8X130MM		
	5861248-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,8X190MM		
	5861248-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,8X240MM		
	5861248-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.4,8X300MM		
	5861255-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.5,5X130MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861255-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.5,5X190MM	5,5mm	
	5861255-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.5,5X240MM		
	5861255-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.5,5X300MM		
	5861265-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861265-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.6,5X130MM		
	5861265-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.6,5X190MM		
	5861265-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.6,5X240MM		
	5861265-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CMA DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CMA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,2X130MM		
	5861242-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,2X190MM		
	5861242-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,2X240MM		
	5861242-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,2X300MM		
	5861245-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,5X130MM		
	5861245-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,5X190MM		
	5861245-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,5X240MM		
	5861245-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,5X300MM		
	5861248-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,8X130MM		
	5861248-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,8X190MM		
	5861248-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,8X240MM		
	5861248-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.4,8X300MM		
	5861255-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.5,5X130MM		
	5861255-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.5,5X190MM		
	5861255-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.5,5X240MM		
	5861255-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.5,5X300MM		
	5861265-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861265-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.6,5X130MM		
	5861265-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.6,5X190MM		
	5861265-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.6,5X240MM		
	5861265-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND INC DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO INC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,2X130MM		
	5861242-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,2X190MM		
	5861242-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,2X240MM		
	5861242-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,2X300MM		
	5861245-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,5X130MM		
	5861245-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,5X190MM		
	5861245-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,5X240MM		
	5861245-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,5X300MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861248-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,8X130MM		
	5861248-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,8X190MM		
	5861248-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,8X240MM		
	5861248-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.4,8X300MM		
	5861255-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.5,5X130MM		
	5861255-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.5,5X190MM		
	5861255-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.5,5X240MM		
	5861255-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.5,5X300MM		
	5861265-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861265-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.6,5X130MM		
	5861265-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.6,5X190MM		
	5861265-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.6,5X240MM		
	5861265-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,2X130MM		
	5861242-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,2X190MM		
	5861242-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,2X240MM		
	5861242-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,2X300MM		
	5861245-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,5X130MM		
	5861245-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,5X190MM		
	5861245-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,5X240MM		
	5861245-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,5X300MM		
	5861248-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,8X130MM		
	5861248-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,8X190MM		
	5861248-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,8X240MM		
	5861248-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.4,8X300MM		
	5861255-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.5,5X130MM		
	5861255-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.5,5X190MM		
	5861255-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.5,5X240MM		
	5861255-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.5,5X300MM		
	5861265-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861265-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.6,5X130MM		
	5861265-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.6,5X190MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861265-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.6,5X240MM		
	5861265-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND RPC II DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC II SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,2X130MM		
	5861242-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,2X190MM		
	5861242-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,2X240MM		
	5861242-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,2X300MM		
	5861245-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,5X130MM		
	5861245-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,5X190MM		
	5861245-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,5X240MM		
	5861245-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,5X300MM		
	5861248-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,8X130MM		
	5861248-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,8X190MM		
	5861248-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,8X240MM		
	5861248-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.4,8X300MM		
	5861255-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.5,5X130MM		
	5861255-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.5,5X190MM		
	5861255-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.5,5X240MM		
	5861255-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.5,5X300MM		
	5861265-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861265-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.6,5X130MM		
	5861265-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.6,5X190MM		
	5861265-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.6,5X240MM		
	5861265-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND API DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO API SÃO INDICADAS PARA RECECÇÃO AGRESSIVA DE MENISCO, DESBRIDAMENTO ARTICULAR E RESSECÇÃO ÓSSEA				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,2X130MM		
	5861242-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,2X190MM		
	5861242-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,2X240MM		
	5861242-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,2X300MM		
	5861245-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,5X130MM		
	5861245-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,5X190MM		
	5861245-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,5X240MM		
	5861245-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,5X300MM		
	5861248-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,8X130MM		
	5861248-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,8X190MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861248-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,8X240MM		
	5861248-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.4,8X300MM		
	5861255-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.5,5X130MM		
	5861255-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.5,5X190MM		
	5861255-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.5,5X240MM		
	5861255-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.5,5X300MM		
	5861265-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861265-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.6,5X130MM		
	5861265-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.6,5X190MM		
	5861265-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.6,5X240MM		
	5861265-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND APC DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO APC SÃO INDICADAS PARA TODOS OS DESBRIDAMENTOS GERAIS DE TECIDOS MOLES, ESPECIALMENTE MENISCECTOMIA E CONDRÓPLASTIA.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,2X130MM		
	5861242-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,2X190MM		
	5861242-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,2X240MM		
	5861242-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,2X300MM		
	5861245-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,5X130MM		
	5861245-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,5X190MM		
	5861245-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,5X240MM		
	5861245-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,5X300MM		
	5861248-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,8X130MM		
	5861248-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,8X190MM		
	5861248-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,8X240MM		
	5861248-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.4,8X300MM		
	5861255-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.5,5X130MM		
	5861255-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.5,5X190MM		
	5861255-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.5,5X240MM		
	5861255-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.5,5X300MM		
	5861265-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861265-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.6,5X130MM		
	5861265-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.6,5X190MM		
	5861265-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.6,5X240MM		
	5861265-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND CM DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CM SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO DE MENISCO E DESBRIDAMENTO ARTICULAR				

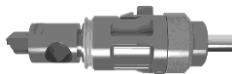
Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,2X130MM		
	5861242-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,2X190MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,2X240MM		
	5861242-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,2X300MM		
	5861245-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,5X130MM		
	5861245-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,5X190MM		
	5861245-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,5X240MM		
	5861245-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,5X300MM		
	5861248-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,8X130MM		
	5861248-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,8X190MM		
	5861248-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,8X240MM		
	5861248-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.4,8X300MM		
	5861255-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.5,5X130MM		
	5861255-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.5,5X190MM		
	5861255-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.5,5X240MM		
	5861255-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.5,5X300MM		
	5861265-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861265-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.6,5X130MM		
	5861265-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.6,5X190MM		
	5861265-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.6,5X240MM		
	5861265-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-6 DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,2X130MM		
	5861242-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,2X190MM		
	5861242-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,2X240MM		
	5861242-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,2X300MM		
	5861245-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,5X130MM		
	5861245-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,5X190MM		
	5861245-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,5X240MM		
	5861245-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,5X300MM		
	5861248-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,8X130MM		
	5861248-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,8X190MM		
	5861248-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,8X240MM		
	5861248-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.4,8X300MM		
	5861255-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.5,5X130MM		
	5861255-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.5,5X190MM		
	5861255-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.5,5X240MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861255-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.5,5X300MM	5,5mm	
	5861265-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.6,5X90MM		
	5861265-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.6,5X130MM		
	5861265-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.6,5X190MM		
	5861265-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.6,5X240MM		
	5861265-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-12 DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861242-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861242-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861242-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861245-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861245-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861245-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861245-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861248-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861248-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861248-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861248-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861255-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861255-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861255-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861255-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.5,5X300MM		
	5861265-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861265-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.6,5X130MM		
	5861265-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.6,5X190MM		
	5861265-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.6,5X240MM		
	5861265-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BO-SP DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,2X130MM		
	5861242-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,2X190MM		
	5861242-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,2X240MM		
	5861242-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,2X300MM		
	5861245-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,5X130MM		
	5861245-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,5X190MM		
	5861245-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,5X240MM		
	5861245-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,5X300MM		
	5861248-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,8X130MM		
	5861248-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,8X190MM		
	5861248-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,8X240MM		
	5861248-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.4,8X300MM		
5861255-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.5,5X90MM	4,5mm		
5861255-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.5,5X130MM			
5861255-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.5,5X190MM			
5861255-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.5,5X240MM			

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861255-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.5,5X300MM	5,5mm	
	5861265-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.6,5X90MM		
	5861265-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.6,5X130MM		
	5861265-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.6,5X190MM		
	5861265-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.6,5X240MM		
	5861265-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-6 DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4.2X90MM	3,2mm	
	5861242-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4.2X130MM		
	5861242-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4.2X190MM		
	5861242-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4.2X240MM		
	5861242-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4.2X300MM		
	5861245-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4.5X90MM	3,5mm	
	5861245-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4.5X130MM		
	5861245-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4.5X190MM		
	5861245-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4.5X240MM		
	5861245-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4.5X300MM		
	5861248-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4.8X90MM	3,8mm	
	5861248-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4.8X130MM		
	5861248-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4.8X190MM		
	5861248-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4.8X240MM		
	5861248-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.4.8X300MM		
	5861255-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.5.5X90MM	4,5mm	
	5861255-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.5.5X130MM		
	5861255-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.5.5X190MM		
	5861255-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.5.5X240MM		
	5861255-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.5.5X300MM		
	5861265-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.6.5X90MM	5,5mm	
	5861265-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.6.5X130MM		
	5861265-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.6.5X190MM		
	5861265-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.6.5X240MM		
	5861265-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-12 DIAM.6.5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

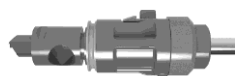
Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,2X130MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861242-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861242-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861245-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861245-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861245-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861245-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861248-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861248-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861248-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861248-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861255-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861255-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861255-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861255-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.5,5X300MM		
	5861265-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861265-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.6,5X130MM		
	5861265-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.6,5X190MM		
	5861265-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.6,5X240MM		
	5861265-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BR-SP DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,2X130MM		
	5861242-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,2X190MM		
	5861242-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,2X240MM		
	5861242-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,2X300MM		
	5861245-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,5X130MM		
	5861245-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,5X190MM		
	5861245-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,5X240MM		
	5861245-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,5X300MM		
	5861248-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,8X130MM		
	5861248-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,8X190MM		
	5861248-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,8X240MM		
	5861248-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.4,8X300MM		
	5861255-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.5,5X130MM		
	5861255-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.5,5X190MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861255-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.5,5X240MM		
	5861255-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.5,5X300MM		
	5861265-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861265-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.6,5X130MM		
	5861265-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.6,5X190MM		
	5861265-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.6,5X240MM		
	5861265-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861242-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861242-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861242-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861245-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861245-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861245-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861245-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861248-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861248-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861248-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861248-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861255-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861255-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861255-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861255-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.5,5X300MM		
	5861265-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861265-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.6,5X130MM		
	5861265-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.6,5X190MM		
	5861265-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.6,5X240MM		
	5861265-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BC-SP DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861242-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861242-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,2X130MM		
	5861242-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,2X190MM		
	5861242-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,2X240MM		
	5861242-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,2X300MM		
	5861245-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861245-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,5X130MM		
	5861245-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,5X190MM		
	5861245-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,5X240MM		
	5861245-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,5X300MM		
	5861248-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861248-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,8X130MM		
	5861248-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,8X190MM		
	5861248-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,8X240MM		
	5861248-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.4,8X300MM		
	5861255-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861255-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.5,5X130MM		
	5861255-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.5,5X190MM		
	5861255-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.5,5X240MM		
	5861255-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.5,5X300MM		
	5861265-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861265-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.6,5X130MM		
	5861265-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.6,5X190MM		
	5861265-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.6,5X240MM		
	5861265-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI SND BA DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861342-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,2X130MM		
	5861342-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,2X190MM		
	5861342-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,2X240MM		
	5861342-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,2X300MM		
	5861345-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,5X130MM		
	5861345-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,5X190MM		
	5861345-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,5X240MM		
	5861345-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,5X300MM		
	5861348-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,8X130MM		
	5861348-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,8X190MM		
	5861348-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,8X240MM		
	5861348-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.4,8X300MM		
	5861355-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.5,5X130MM		
	5861355-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.5,5X190MM		
	5861355-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.5,5X240MM		
	5861355-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.5,5X300MM		
	5861365-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861365-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.6,5X130MM		
	5861365-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.6,5X190MM		
	5861365-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.6,5X240MM		
	5861365-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CMA DIAM.6,5X300MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CMA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.				

Engate	Código		Descrição	Ø interno	Ponta
	5861342-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,2X90MM	3,2mm		
	5861342-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,2X130MM			
	5861342-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,2X190MM			
	5861342-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,2X240MM			
	5861342-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,2X300MM			
	5861345-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,5X90MM	3,5mm		
	5861345-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,5X130MM			
	5861345-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,5X190MM			
	5861345-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,5X240MM			
	5861345-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,5X300MM			
	5861348-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,8X90MM	3,8mm		
	5861348-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,8X130MM			
	5861348-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,8X190MM			
	5861348-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,8X240MM			
	5861348-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.4,8X300MM			
	5861355-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.5,5X90MM	4,5mm		
	5861355-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.5,5X130MM			
	5861355-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.5,5X190MM			
	5861355-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.5,5X240MM			
	5861355-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.5,5X300MM			
	5861365-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
	5861365-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.6,5X130MM			
	5861365-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.6,5X190MM			
	5861365-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.6,5X240MM			
	5861365-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR INC DIAM.6,5X300MM			
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO INC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.					

Engate	Código		Descrição	Ø interno	Ponta
	5861342-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,2X90MM	3,2mm		
	5861342-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,2X130MM			
	5861342-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,2X190MM			
	5861342-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,2X240MM			
	5861342-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,2X300MM			
	5861345-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,5X90MM	3,5mm		
	5861345-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,5X130MM			
	5861345-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,5X190MM			
	5861345-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,5X240MM			
	5861345-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,5X300MM			
	5861348-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,8X90MM	3,8mm		
	5861348-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,8X130MM			
	5861348-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,8X190MM			
	5861348-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,8X240MM			
	5861348-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.4,8X300MM			
	5861355-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.5,5X90MM	4,5mm		
	5861355-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.5,5X130MM			
	5861355-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.5,5X190MM			
	5861355-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.5,5X240MM			
	5861355-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.5,5X300MM			
	5861365-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.6,5X90MM	5,5mm		
	5861365-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.6,5X130MM			
	5861365-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.6,5X190MM			

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861365-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.6,5X240MM		
	5861365-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECÇÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861342-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,2X130MM		
	5861342-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,2X190MM		
	5861342-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,2X240MM		
	5861342-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,2X300MM		
	5861345-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,5X130MM		
	5861345-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,5X190MM		
	5861345-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,5X240MM		
	5861345-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,5X300MM		
	5861348-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,8X130MM		
	5861348-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,8X190MM		
	5861348-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,8X240MM		
	5861348-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.4,8X300MM		
	5861355-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.5,5X130MM		
	5861355-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.5,5X190MM		
	5861355-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.5,5X240MM		
	5861355-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.5,5X300MM		
	5861365-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861365-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.6,5X130MM		
	5861365-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.6,5X190MM		
	5861365-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.6,5X240MM		
	5861365-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR RPC II DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC II SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECCÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861342-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,2X130MM		
	5861342-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,2X190MM		
	5861342-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,2X240MM		
	5861342-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,2X300MM		
	5861345-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,5X130MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861345-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,5X190MM		
	5861345-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,5X240MM		
	5861345-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,5X300MM		
	5861348-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,8X130MM		
	5861348-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,8X190MM		
	5861348-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,8X240MM		
	5861348-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.4,8X300MM		
	5861355-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.5,5X130MM		
	5861355-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.5,5X190MM		
	5861355-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.5,5X240MM		
	5861355-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.5,5X300MM		
	5861365-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861365-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.6,5X130MM		
	5861365-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.6,5X190MM		
	5861365-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.6,5X240MM		
	5861365-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR API DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO API SÃO INDICADAS PARA RECECÇÃO AGRESSIVA DE MENISCO, DESBRIDAMENTO ARTICULAR, E RESSECÇÃO ÓSSEA.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861342-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,2X130MM		
	5861342-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,2X190MM		
	5861342-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,2X240MM		
	5861342-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,2X300MM		
	5861345-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,5X130MM		
	5861345-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,5X190MM		
	5861345-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,5X240MM		
	5861345-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,5X300MM		
	5861348-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,8X130MM		
	5861348-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,8X190MM		
	5861348-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,8X240MM		
	5861348-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.4,8X300MM		
	5861355-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.5,5X130MM		
	5861355-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.5,5X190MM		
	5861355-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.5,5X240MM		
	5861355-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.5,5X300MM		
	5861365-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861365-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.6,5X130MM		
	5861365-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.6,5X190MM		
	5861365-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.6,5X240MM		
	5861365-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR APC DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO APC SÃO INDICADAS PARA TODOS OS DESBRIDAMENTOS GERAIS DE TECIDOS MOLES, ESPECIALMENTE MENISCECTOMIA E CONDROPLASTIA.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861342-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,2X130MM		
	5861342-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,2X190MM		
	5861342-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,2X240MM		
	5861342-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,2X300MM		
	5861345-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,5X90MM	3,5mm	

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861345-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,5X130MM		
	5861345-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,5X190MM		
	5861345-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,5X240MM		
	5861345-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,5X300MM		
	5861348-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,8X130MM		
	5861348-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,8X190MM		
	5861348-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,8X240MM		
	5861348-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.4,8X300MM		
	5861355-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.5,5X130MM		
	5861355-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.5,5X190MM		
	5861355-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.5,5X240MM		
	5861355-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.5,5X300MM		
	5861365-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861365-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.6,5X130MM		
	5861365-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.6,5X190MM		
	5861365-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.6,5X240MM		
	5861365-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR CM DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CM SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO DE MENISCO E DESBRIDAMENTO ARTICULAR				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861342-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,2X130MM		
	5861342-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,2X190MM		
	5861342-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,2X240MM		
	5861342-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,2X300MM		
	5861345-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,5X130MM		
	5861345-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,5X190MM		
	5861345-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,5X240MM		
	5861345-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,5X300MM		
	5861348-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,8X130MM		
	5861348-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,8X190MM		
	5861348-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,8X240MM		
	5861348-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.4,8X300MM		
	5861355-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.5,5X130MM		
	5861355-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.5,5X190MM		
	5861355-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.5,5X240MM		
	5861355-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.5,5X300MM		
	5861365-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861365-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.6,5X130MM		
	5861365-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.6,5X190MM		
	5861365-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.6,5X240MM		
	5861365-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-6 DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861342-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,2X130MM		
	5861342-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,2X190MM		
	5861342-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,2X240MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861342-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,2X300MM		
	5861345-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,5X130MM		
	5861345-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,5X190MM		
	5861345-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,5X240MM		
	5861345-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,5X300MM		
	5861348-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,8X90MM		
	5861348-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,8X130MM		
	5861348-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,8X190MM		
	5861348-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,8X240MM		
	5861348-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.4,8X300MM		
	5861355-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.5,5X130MM		
	5861355-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.5,5X190MM		
	5861355-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.5,5X240MM		
	5861355-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.5,5X300MM		
	5861365-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.6,5X90MM		
	5861365-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.6,5X130MM		
	5861365-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.6,5X190MM		
	5861365-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.6,5X240MM		
	5861365-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-12 DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861342-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861342-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861342-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861342-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861345-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861345-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861345-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861345-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861348-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861348-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861348-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,8X240MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861348-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861355-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861355-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861355-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861355-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.5,5X300MM		
	5861365-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.6,5X90MM		
	5861365-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.6,5X130MM		
	5861365-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.6,5X190MM		
	5861365-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.6,5X240MM		
	5861365-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BO-SP DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861342-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,2X130MM		
	5861342-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,2X190MM		
	5861342-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,2X240MM		
	5861342-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,2X300MM		
	5861345-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,5X130MM		
	5861345-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,5X190MM		
	5861345-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,5X240MM		
	5861345-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,5X300MM		
	5861348-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,8X130MM		
	5861348-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,8X190MM		
	5861348-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,8X240MM		
	5861348-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.4,8X300MM		
	5861355-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.5,5X130MM		
	5861355-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.5,5X190MM		
	5861355-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.5,5X240MM		
	5861355-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.5,5X300MM		
	5861365-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861365-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.6,5X130MM		
	5861365-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.6,5X190MM		
	5861365-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.6,5X240MM		
	5861365-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-6 DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861342-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,2X130MM		
	5861342-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,2X190MM		
	5861342-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,2X240MM		
	5861342-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,2X300MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861345-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,5X130MM		
	5861345-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,5X190MM		
	5861345-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,5X240MM		
	5861345-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,5X300MM		
	5861348-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,8X130MM		
	5861348-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,8X190MM		
	5861348-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,8X240MM		
	5861348-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.4,8X300MM		
	5861355-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.5,5X130MM		
	5861355-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.5,5X190MM		
	5861355-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.5,5X240MM		
	5861355-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.5,5X300MM		
	5861365-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861365-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.6,5X130MM		
	5861365-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.6,5X190MM		
	5861365-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.6,5X240MM		
	5861365-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-12 DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861342-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861342-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861342-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861342-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861345-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861345-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861345-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861345-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861348-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861348-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861348-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861348-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.4,8X300MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861355-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861355-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861355-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861355-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.5,5X300MM		
	5861365-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861365-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.6,5X130MM		
	5861365-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.6,5X190MM		
	5861365-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.6,5X240MM		
	5861365-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BR-SP DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861342-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,2X130MM		
	5861342-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,2X190MM		
	5861342-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,2X240MM		
	5861342-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,2X300MM		
	5861345-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,5X130MM		
	5861345-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,5X190MM		
	5861345-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,5X240MM		
	5861345-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,5X300MM		
	5861348-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,8X130MM		
	5861348-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,8X190MM		
	5861348-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,8X240MM		
	5861348-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.4,8X300MM		
	5861355-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.5,5X130MM		
	5861355-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.5,5X190MM		
	5861355-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.5,5X240MM		
	5861355-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.5,5X300MM		
	5861365-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861365-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.6,5X130MM		
	5861365-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.6,5X190MM		
	5861365-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.6,5X240MM		
	5861365-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861342-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861342-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861342-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861342-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861345-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,5X130MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861345-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861345-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861345-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861348-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861348-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861348-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861348-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861355-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861355-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861355-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861355-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.5,5X300MM		
	5861365-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861365-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.6,5X130MM		
	5861365-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.6,5X190MM		
	5861365-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.6,5X240MM		
	5861365-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BC-SP DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861342-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861342-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,2X130MM		
	5861342-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,2X190MM		
	5861342-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,2X240MM		
	5861342-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,2X300MM		
	5861345-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861345-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,5X130MM		
	5861345-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,5X190MM		
	5861345-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,5X240MM		
	5861345-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,5X300MM		
	5861348-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861348-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,8X130MM		
	5861348-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,8X190MM		
	5861348-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,8X240MM		
	5861348-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.4,8X300MM		
	5861355-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861355-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.5,5X130MM		
	5861355-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.5,5X190MM		
	5861355-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.5,5X240MM		
	5861355-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.5,5X300MM		
	5861365-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861365-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.6,5X130MM		
	5861365-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.6,5X190MM		
	5861365-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.6,5X240MM		
	5861365-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI STR BA DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861442-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,2X130MM		
	5861442-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,2X190MM		
	5861442-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,2X240MM		
	5861442-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,2X300MM		
	5861445-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,5X130MM		
	5861445-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,5X190MM		
	5861445-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,5X240MM		
	5861445-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,5X300MM		
	5861448-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,8X130MM		
	5861448-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,8X190MM		
	5861448-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,8X240MM		
	5861448-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.4,8X300MM		
	5861455-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.5,5X130MM		
	5861455-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.5,5X190MM		
	5861455-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.5,5X240MM		
	5861455-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.5,5X300MM		
	5861465-011	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861465-012	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.6,5X130MM		
	5861465-013	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.6,5X190MM		
	5861465-014	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.6,5X240MM		
	5861465-015	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CMA DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CMA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861442-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,2X130MM		
	5861442-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,2X190MM		
	5861442-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,2X240MM		
	5861442-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,2X300MM		
	5861445-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,5X130MM		
	5861445-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,5X190MM		
	5861445-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,5X240MM		
	5861445-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,5X300MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861448-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,8X130MM		
	5861448-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,8X190MM		
	5861448-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,8X240MM		
	5861448-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.4,8X300MM		
	5861455-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.5,5X130MM		
	5861455-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.5,5X190MM		
	5861455-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.5,5X240MM		
	5861455-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.5,5X300MM		
	5861465-021	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861465-022	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.6,5X130MM		
	5861465-023	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.6,5X190MM		
	5861465-024	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.6,5X240MM		
	5861465-025	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK INC DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO INC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO AGRESSIVA DE TECIDO MOLE E CARTILAGEM.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861442-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,2X130MM		
	5861442-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,2X190MM		
	5861442-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,2X240MM		
	5861442-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,2X300MM		
	5861445-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,5X130MM		
	5861445-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,5X190MM		
	5861445-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,5X240MM		
	5861445-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,5X300MM		
	5861448-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,8X130MM		
	5861448-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,8X190MM		
	5861448-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,8X240MM		
	5861448-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.4,8X300MM		
	5861455-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.5,5X130MM		
	5861455-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.5,5X190MM		
	5861455-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.5,5X240MM		
	5861455-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.5,5X300MM		
	5861465-031	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861465-032	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.6,5X130MM		
	5861465-033	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.6,5X190MM		
	5861465-034	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.6,5X240MM		
	5861465-035	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECCÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861442-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,2X130MM		
	5861442-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,2X190MM		
	5861442-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,2X240MM		
	5861442-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,2X300MM		
	5861445-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,5X90MM	3,5mm	

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861445-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,5X130MM		
	5861445-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,5X190MM		
	5861445-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,5X240MM		
	5861445-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,5X300MM		
	5861448-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,8X130MM		
	5861448-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,8X190MM		
	5861448-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,8X240MM		
	5861448-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.4,8X300MM		
	5861455-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.5,5X130MM		
	5861455-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.5,5X190MM		
	5861455-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.5,5X240MM		
	5861455-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.5,5X300MM		
	5861465-041	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861465-042	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.6,5X130MM		
	5861465-043	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.6,5X190MM		
	5861465-044	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.6,5X240MM		
	5861465-045	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK RPC II DIAM.6,5X300MM		
	INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO RPC II SÃO INDICADAS PARA TODAS AS APLICAÇÕES GERAIS DE DESBRIDAMENTO, INCLUINDO RESSECCÃO DE TECIDO MOLE, CARTILAGENS E OSSOS.			

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861442-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,2X130MM		
	5861442-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,2X190MM		
	5861442-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,2X240MM		
	5861442-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,2X300MM		
	5861445-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,5X130MM		
	5861445-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,5X190MM		
	5861445-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,5X240MM		
	5861445-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,5X300MM		
	5861448-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,8X130MM		
	5861448-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,8X190MM		
	5861448-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,8X240MM		
	5861448-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.4,8X300MM		
	5861455-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.5,5X130MM		
	5861455-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.5,5X190MM		
	5861455-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.5,5X240MM		
	5861455-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.5,5X300MM		
	5861465-051	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861465-052	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.6,5X130MM		
	5861465-053	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.6,5X190MM		
	5861465-054	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.6,5X240MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861465-055	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK API DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO API SÃO INDICADAS PARA RESECÇÃO AGRESSIVA DE MENISCO, DESBRIDAMENTO ARTICULAR, E RESSECÇÃO ÓSSEA.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861442-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,2X130MM		
	5861442-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,2X190MM		
	5861442-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,2X240MM		
	5861442-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,2X300MM		
	5861445-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,5X130MM		
	5861445-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,5X190MM		
	5861445-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,5X240MM		
	5861445-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,5X300MM		
	5861448-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,8X130MM		
	5861448-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,8X190MM		
	5861448-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,8X240MM		
	5861448-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.4,8X300MM		
	5861455-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.5,5X130MM		
	5861455-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.5,5X190MM		
	5861455-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.5,5X240MM		
	5861455-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.5,5X300MM		
	5861465-061	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861465-062	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.6,5X130MM		
	5861465-063	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.6,5X190MM		
	5861465-064	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.6,5X240MM		
	5861465-065	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK APC DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO APC SÃO INDICADAS PARA TODOS OS DESBRIDAMENTOS GERAIS DE TECIDOS MOLES, ESPECIALMENTE MENISCECTOMIA E CONDROPLASTIA.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861442-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,2X130MM		
	5861442-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,2X190MM		
	5861442-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,2X240MM		
	5861442-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,2X300MM		
	5861445-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,5X130MM		
	5861445-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,5X190MM		
	5861445-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,5X240MM		
	5861445-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,5X300MM		
	5861448-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,8X130MM		
	5861448-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,8X190MM		
	5861448-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,8X240MM		
	5861448-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.4,8X300MM		
	5861455-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.5,5X130MM		
	5861455-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.5,5X190MM		
	5861455-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.5,5X240MM		
	5861455-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.5,5X300MM		
	5861465-071	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861465-072	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.6,5X130MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861465-073	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.6,5X190MM		
	5861465-074	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.6,5X240MM		
	5861465-075	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK CM DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO CM SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO DE MENISCO E DESBRIDAMENTO ARTICULAR				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861442-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,2X130MM		
	5861442-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,2X190MM		
	5861442-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,2X240MM		
	5861442-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,2X300MM		
	5861445-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,5X130MM		
	5861445-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,5X190MM		
	5861445-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,5X240MM		
	5861445-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,5X300MM		
	5861448-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,8X130MM		
	5861448-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,8X190MM		
	5861448-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,8X240MM		
	5861448-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.4,8X300MM		
	5861455-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.5,5X130MM		
	5861455-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.5,5X190MM		
	5861455-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.5,5X240MM		
	5861455-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.5,5X300MM		
	5861465-081	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861465-082	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.6,5X130MM		
	5861465-083	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.6,5X190MM		
	5861465-084	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.6,5X240MM		
	5861465-085	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-6 DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861442-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,2X130MM		
	5861442-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,2X190MM		
	5861442-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,2X240MM		
	5861442-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,2X300MM		
	5861445-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,5X130MM		
	5861445-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,5X190MM		
	5861445-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,5X240MM		
	5861445-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,5X300MM		
	5861448-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,8X130MM		
	5861448-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,8X190MM		
	5861448-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,8X240MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861448-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.4,8X300MM		
	5861455-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.5,5X90MM		
	5861455-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.5,5X130MM		
	5861455-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.5,5X190MM		
	5861455-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.5,5X240MM		
	5861455-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.5,5X300MM		
	5861465-091	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.6,5X90MM		
	5861465-092	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.6,5X130MM		
	5861465-093	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.6,5X190MM		
	5861465-094	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.6,5X240MM		
	5861465-095	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-12 DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861442-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,2X90MM		
	5861442-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861442-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861442-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861442-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861445-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,5X90MM		
	5861445-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861445-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861445-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861445-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861448-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,8X90MM		
	5861448-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861448-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861448-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861448-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861455-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.5,5X90MM		
	5861455-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861455-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861455-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861455-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.5,5X300MM		
	5861465-101	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.6,5X90MM		
	5861465-102	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.6,5X130MM		
	5861465-103	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.6,5X190MM		
	5861465-104	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.6,5X240MM		



Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861465-105	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BO-SP DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BO-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861442-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,2X130MM		
	5861442-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,2X190MM		
	5861442-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,2X240MM		
	5861442-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,2X300MM		
	5861445-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,5X130MM		
	5861445-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,5X190MM		
	5861445-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,5X240MM		
	5861445-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,5X300MM		
	5861448-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,8X130MM		
	5861448-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,8X190MM		
	5861448-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,8X240MM		
	5861448-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.4,8X300MM		
	5861455-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.5,5X130MM		
	5861455-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.5,5X190MM		
	5861455-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.5,5X240MM		
	5861455-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.5,5X300MM		
	5861465-111	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861465-112	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.6,5X130MM		
	5861465-113	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.6,5X190MM		
	5861465-114	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.6,5X240MM		
	5861465-115	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-6 DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-6 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861442-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,2X130MM		
	5861442-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,2X190MM		
	5861442-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,2X240MM		
	5861442-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,2X300MM		
	5861445-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,5X130MM		
	5861445-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,5X190MM		
	5861445-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,5X240MM		
	5861445-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,5X300MM		
	5861448-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,8X130MM		
	5861448-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,8X190MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861448-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,8X240MM		
	5861448-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.4,8X300MM		
	5861455-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.5,5X90MM		
	5861455-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.5,5X130MM		
	5861455-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.5,5X190MM		
	5861455-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.5,5X240MM		
	5861455-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.5,5X300MM		
	5861465-121	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.6,5X90MM		
	5861465-122	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.6,5X130MM		
	5861465-123	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.6,5X190MM		
	5861465-124	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.6,5X240MM		
	5861465-125	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-12 DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-12 SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861442-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,2X90MM		
	5861442-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861442-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861442-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861442-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861445-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,5X90MM		
	5861445-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861445-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861445-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861445-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,5X300MM		
	5861448-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,8X90MM		
	5861448-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861448-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861448-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861448-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861455-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.5,5X90MM		
	5861455-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861455-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861455-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861455-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.5,5X300MM		
	5861465-131	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.6,5X90MM		
	5861465-132	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.6,5X130MM		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861465-133	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.6,5X190MM		
	5861465-134	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.6,5X240MM		
	5861465-135	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BR-SP DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BR-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861442-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,2X130MM		
	5861442-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,2X190MM		
	5861442-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,2X240MM		
	5861442-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,2X300MM		
	5861445-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,5X130MM		
	5861445-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,5X190MM		
	5861445-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,5X240MM		
	5861445-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,5X300MM		
	5861448-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,8X130MM		
	5861448-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,8X190MM		
	5861448-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,8X240MM		
	5861448-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.4,8X300MM		
	5861455-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.5,5X130MM		
	5861455-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.5,5X190MM		
	5861455-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.5,5X240MM		
	5861455-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.5,5X300MM		
	5861465-141	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861465-142	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.6,5X130MM		
	5861465-143	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.6,5X190MM		
	5861465-144	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.6,5X240MM		
	5861465-145	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS				

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861442-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,2X130MM		
	5861442-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,2X190MM		
	5861442-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,2X240MM		
	5861442-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,2X300MM		
	5861445-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,5X130MM		
	5861445-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,5X190MM		
	5861445-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,5X240MM		
	5861445-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,5X300MM		
5861448-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,8X90MM	3,8mm		

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861448-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,8X130MM		
	5861448-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,8X190MM		
	5861448-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,8X240MM		
	5861448-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.4,8X300MM		
	5861455-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.5,5X130MM		
	5861455-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.5,5X190MM		
	5861455-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.5,5X240MM		
	5861455-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.5,5X300MM		
	5861465-151	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861465-152	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.6,5X130MM		
	5861465-153	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.6,5X190MM		
	5861465-154	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.6,5X240MM		
	5861465-155	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BC-SP DIAM.6,5X300MM		
	INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BC-SP SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.			

Engate	Código	Descrição	Ø interno	Ponta
	5861442-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,2X90MM	3,2mm	
	5861442-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,2X130MM		
	5861442-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,2X190MM		
	5861442-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,2X240MM		
	5861442-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,2X300MM		
	5861445-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,5X90MM	3,5mm	
	5861445-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,5X130MM		
	5861445-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,5X190MM		
	5861445-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,5X240MM		
	5861445-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,5X300MM		
	5861448-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,8X90MM	3,8mm	
	5861448-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,8X130MM		
	5861448-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,8X190MM		
	5861448-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,8X240MM		
	5861448-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.4,8X300MM		
	5861455-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.5,5X90MM	4,5mm	
	5861455-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.5,5X130MM		
	5861455-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.5,5X190MM		
	5861455-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.5,5X240MM		
	5861455-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.5,5X300MM		
	5861465-161	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.6,5X90MM	5,5mm	
	5861465-162	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.6,5X130MM		
	5861465-163	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.6,5X190MM		
	5861465-164	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.6,5X240MM		
	5861465-165	LÂMINAS DE SHAVER SARTORI RZK BA DIAM.6,5X300MM		
INDICAÇÃO: LÂMINAS COM PONTAS TIPO BA SÃO INDICADAS PARA RESSECÇÃO ÓSSEA E DE CARTILAGENS.				

IDENTIFICAÇÃO DAS LEGENDAS	
CMA = Ponta de Corte de Menisco Agressivo	BO-12 = Ponta Broca Oval 12AF
INC = Ponta Corte Incisivo	BO-SP = Ponta Broca Oval sem Proteção
RPC = Ponta Ressector de Perfil Completo	BR-6 = Ponta Broca Esférica 6AF
API = Ponta Corte Completo Incisivo	BR-12 = Ponta Broca Esférica 12AF
APC = Ponta Agressiva de Perfil Completo	BR-SP = Ponta Broca Esférica sem Proteção
RPC II = Ressector de Perfil Completo II	BC = Ponta Broca Cônica
CM = Ponta de Corte de Menisco	BC-SP = Ponta Broca Cônica sem Proteção
BO-6 = Ponta Broca Oval 6AF	BA = Ponta Broca Afiada

INDICAÇÃO E FINALIDADE

As Lâminas de Shaver II são indicadas para cirurgias artroscópicas para ressecção de tecidos moles, ressecção de ossos, e meniscectomia.

A finalidade das lâminas é ser utilizadas para perfuração, sinovectomia ou corte, raspagem intra-articular e uniformização de tecido ósseo e cartilaginoso.

CONTRAINDICAÇÕES

Não se aplica

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO/MECANISMO DE AÇÃO

As Lâminas de Shaver II são compostas por duas cânulas: Cânula Guia (externa) e Cânula de Sucção e Corte (interna), posicionadas coaxialmente.

Cada cânula possui em sua extremidade partes poliméricas que servem de engate para conexão com a peça de mão (Shaver).

As Lâminas de Shaver II são compatíveis com peças de mão (Shaver) da ConMed Linvatec, Smith&Nephew Dyonics, Razek e Stryker Fórmula. Desta forma, as lâminas devidamente conectadas, passam a desenvolver os movimentos de rotação para início de desempenho.

A cânula externa não apresenta movimento e a cânula interna apresenta movimento rotatório. Esse movimento rotatório promove a ação de corte desejada ao entrar em contato com o tecido.

As cânulas possuem uma abertura frontal com borda lisa, dentada ou outra geometria, permitindo diversos tipos de corte e a sucção dos tecidos através da parte canulada.

MODO DE USO DO PRODUTO

O produto é projetado para ser utilizado exclusivamente em procedimentos artroscópicos conduzidos por médicos especialistas neste tipo de intervenção.

Após a retirada da embalagem, o produto é conectado pelo seu engate traseiro a uma peça de mão compatível, e de escolha do médico especialista.

O cirurgião controla a direção e velocidade de rotação das lâminas, bem como a duração e intensidade do contato, de acordo com sua experiência, tipo de tecido e outros parâmetros para obter o efeito desejado.

As Lâmina de Shaver II com diâmetro interno maior que 3mm são passíveis de reprocessamento, entretanto a empresa recomenda o uso único.

As lâminas devem ser descartadas em locais apropriados, de forma a evitar a contaminação do meio ambiente e demais indivíduos. Recomenda-se a adoção dos

regulamentos legais locais para descarte de produtos potencialmente contaminantes (RDC 222 de 2018 - Resíduo Hospitalar).

COMPOSIÇÃO

O tubo das cânulas, uma externa e uma interna, são fabricados com Aço Inoxidável AISI 304, as pontas são fabricadas com Aço Inoxidável XM-16, e o engate traseiro é fabricado com polímeros termoplásticos (ABS/PC), e cumprem com as seguintes normas:

- NBR 13911 - Instrumental cirúrgico - Material metálico - Especificações para aços inoxidáveis conformados;
- ASTM F899 - *Standard Specification for Wrought Stainless Steels for Surgical Instruments*.

ESTERILIZAÇÃO

As Lâminas de Shaver II são esterilizadas por Óxido de Etileno – ETO.

Validade: 5 anos da data de fabricação.

Produto passível de reprocessamento. Entretanto a Empresa recomenda o Uso Único.

NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS

Na ocorrência de qualquer evento adverso ou a necessidade de registrar queixa técnica, a SARTORI e a Anvisa devem ser notificadas por meio dos seguintes canais:

SARTORI: <https://sartori.ind.br>

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) através do telefone +55 (19) 3538-1910 ou pelo e-mail: info@sartori.ind.br

Sistema NOTIVISA (Anvisa): www.gov.br/anvisa

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local seco e fresco, protegido do calor excessivo e da luz do sol direta.

Recomendamos estocar o produto em temperaturas entre 5°C a 40°C.

Mantenha o produto distante de objetos cortantes ou pontiagudos.

O produto não deve ser armazenado diretamente ao chão, recomendamos o uso de prateleiras com 20 cm de distância do piso. Evitar empilhar mais do que 10 caixas.

TRANSPORTE

O produto deve ser transportado e acondicionado sempre protegido contra todo tipo de umidade, sujeira e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas.

O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação.

O produto deve ser transportado de forma que sua embalagem permaneça intacta até o momento do uso.

Evitar colocar peso sobre as caixas, deformando as embalagens.

MANUSEIO DO PRODUTO

As lâminas são fornecidas estéreis.

A embalagem deve ser aberta apenas no momento do uso, em ambiente cirúrgico e manipulada com luvas, evitando o contato com outros materiais.

Caso a embalagem esteja danificada ou violada, não utilizar o produto e efetuar descarte de acordo com as normas hospitalares.

O produto é de uso único e não deve ser reutilizado, devendo ser descartado após o uso.

ADVERTÊNCIAS

- Produto estéril.
- As Lâmina de Shaver II com diâmetro interno maior que 3mm são passíveis de reprocessamento, entretanto a empresa recomenda o uso único.
- Verificar a integridade da embalagem antes do uso. Não utilizar caso a embalagem esteja aberta, danificada ou violada, ou om prazo de validade vencido.
- O produto deve estar íntegro para sua utilização, portanto recomendamos a análise do produto e caso apresente qualquer tipo de alteração como marcas de esforço mecânico, torto ou qualquer alteração visível, o mesmo deve ser descartado imediatamente.
- Testar o produto antes da sua utilização no paciente. Em caso de som ou vibração excessiva, ou aquecimento, não utilize o produto.
- Utilizar somente com irrigação do local de uso e sucção para o adequado arrefecimento da lâmina e evitar o travamento por acúmulo de material extraído do interior da lâmina.
- A carga lateral excessiva não melhora o corte e pode originar um aumento do desgaste da lâmina e até mesmo o travamento durante o uso.
- Não aplique ou exerça força de alavanca nas lâminas.
- Em caso de vibração ou som excessivo, aquecimento e/ou travamento durante o uso, interrompa imediatamente o procedimento e troque o produto. A continuidade do uso do produto travado pode deixar resquícios de metal na cavidade.
- O produto só deve ser utilizado por médicos cirurgiões qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis e, principalmente, da importância de se manter um ambiente totalmente estéril nas salas de cirurgia, onde o cuidado e precaução com cada detalhe são fundamentais para que não haja riscos de contaminação.

PRECAUÇÕES

- Antes de utilizar o produto, o cirurgião deve ler atentamente as instruções de uso que o auxiliarão no uso correto e seguro, além de proteger contra possíveis riscos. Alertamos que é necessário observar a correlação entre a versão da Instrução de Uso disponível no site, ou impressa, com a versão indicada no rótulo do produto.
- Teste primeiramente a lâmina fora do paciente, nos modos e velocidades de trabalho.
- Não permita que a lâmina entre em contato com outros instrumentos durante o uso.
- Evitar utilizar por mais de 1 minuto seguido para evitar o aquecimento excessivo da lâmina.
- Utilizar nas velocidades e direções indicados ou na menor velocidade possível para obter o efeito desejado, diminuindo a possibilidade de falhas.
- Não toque a área de movimento da lâmina com outros instrumentos, utensílios, tecidos e ou partes do corpo. Se isso ocorrer, poderá resultar em quebra, fratura ou dano da lâmina ou do equipamento e dano ao operador.

EFEITOS ADVERSOS

Não se aplica.

RECLAMAÇÃO E ATENDIMENTO AO CLIENTE

Todo cliente ou usuário desse dispositivo médico que tiver dúvidas ou queira maiores esclarecimentos sobre os serviços e/ou produtos oferecidos, poderá entrar em contato com a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores através dos dados para contato contido nas instruções de uso (disponível no site: www.sartori.ind.br/instrucao_uso) e rótulos da embalagem do produto.

Para o envio dos instrumentais ao fabricante para análise, o produto deve estar limpo e estéril. Devem ser utilizadas embalagens que mantenham a integridade física do mesmo. A embalagem deve conter todas as informações necessárias para a identificação do produto, bem como as condições de manuseio, tais como métodos de limpeza e desinfecção utilizados, bem como descrição e número do lote.

FABRICANTE/DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA.

Avenida Brasil, n.º 13500 - Distrito de Ajapi - Rio Claro - SP

CEP: 13508-500 Tel.: (19) 3538-1910

CNPJ: 04.861.623/0001-00 Indústria Brasileira

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: (19) 3538-1910

e-mail: info@sartori.ind.br

Registro ANVISA nº: 80083650078

Responsável Técnico: Sérgio R.A.de Oliveira

CREA/SP: 5070105936

Revisão 03 07/2025