

Registro ANVISA nº 80083650064 – Revisão 03

Luiz Guilherme Sartori & Cia Ltda. – CNPJ: 04.861.623/0001-00

Avenida Brasil, nº. 13500 – Ajapi – Rio Claro/SP – Resp. Téc.: Sérgio R.A.de Oliveira CREA/SP: 5070105936

Visando a praticidade e a facilidade de ter acesso às informações contidas nas Instruções de Uso de nossos produtos, a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores em acordo com a RDC 751/2022 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no site: http://www.sartori.ind.br/instrucao_uso

Importante: Verifique a versão da Instrução de Uso indicado no rótulo do produto, juntamente com o nº do registro e clique em "Baixar" no documento desejado para iniciar a transferência do arquivo.

Para obter a Instrução de Uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone +55 (19) 3538-1910 ou pelo e-mail info@sartori.ind.br

Instrução de Uso

Elemento de Fixação Óssea Não Estéril

Registro ANVISA nº 80083650064 - Revisão 03

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Nome Técnico: Pino e fio rígidos não absorvíveis

Nome Comercial: Elemento de Fixação Óssea Não Estéril

Matéria Prima: Aço Inoxidável F138 conforme norma ASTM F138

Produto Não Estéril

Método Indicado para Esterilização: Esterilização por calor úmido (autoclave)

Validade: Indeterminada

PRODUTO MÉDICO DE USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os modelos comerciais que compõem a família do Elemento de Fixação Óssea Não Estéril são definidos como dispositivos de fixação, classificados como produto médico implantável, invasivo cirurgicamente para uso em longo prazo.

O Elemento de Fixação Óssea Não Estéril também é considerado como pino transcutâneo parcialmente rosqueado, denominado como elemento de ancoragem para o sistema de fixação externa, também conhecido como pino liso, pino rosqueado, pino de Shanz etc.

O mecanismo de ação do pino no osso é: estabilizar, restringir ou controlar o movimento dos fragmentos ósseos, auxiliar na redução de fraturas, corrigir ou controlar o alinhamento, promover estabilidade à região afetada, e proporcionar uma colocação segura em relação às estruturas adjacentes.

As aplicações clínicas típicas dos pinos são: tratamento de fratura, estabilização, alongamento e transporte ósseo. Pode ser utilizado em ossos médios e longos das extremidades do corpo humano.

O design e o uso desses dispositivos médicos de fixação óssea fundamentam-se no entendimento da consolidação óssea e das cargas e forças às quais o implante está sujeito.

Durante o processo de inserção, os pinos são submetidos às forças de torção e ao carregamento de flexão pela resistência da montagem em torno de eixos paralelos aos pinos.

A parte rosqueada do pino é implantada no osso do paciente, enquanto a parte lisa é fixada nos Fixadores Externos (componentes ancilares).

O Pino foi desenvolvido para suportar as cargas mais críticas, sendo estas de flexão e torção. Desta forma, auxilia na estabilidade estrutural e na transmissão ou alívio de cargas mecânicas sobre os ossos afetados.

O design dos pinos foi projetado para aplicação nas diferentes estruturas dos ossos médios e longos das extremidades do corpo humano. Seus diâmetros de rosca cilíndrica variam entre Ø 4.0 e 4.5mm e as roscas cônicas variam entre Ø 2.5-2.0, 3.0-2,5, 3.5-3.0, 4.0-3.3, 4.5-3.5, 5.0-4.0, 6.0-5.0 e 6.0-5.6mm.

O tamanho e a forma da estrutura óssea a ser tratada, deve ser correspondente ao diâmetro do implante a ser selecionado, como sugerido na tabela a seguir:

Produto	Estrutura Óssea	Produto	Estrutura Óssea
Pino Ósseo Ø3,0 Rosca Ø2,5-2,0mm Pino Ósseo Ø3,0 Rosca Ø3,0-2,5mm	Mão e Punho	Pino Ósseo Ø5,0 Rosca Ø4,5-3,5mm Pino Ósseo Ø5,0 Rosca Ø5,0-4,0mm Pino Ósseo Ø6,0 Rosca Ø4,5-3,5mm Pino Ósseo Ø6,0 Rosca Ø5,0-4,0mm	Tíbia, Tarso e Calâneo
Pino Ósseo Ø3,0 Rosca Ø4,0mm Pino Ósseo Ø4,0 Rosca Ø3,0-2,5mm Pino Ósseo Ø4,0 Rosca Ø3,5-3,0mm	Antebraço	Pino Ósseo Ø5,0 Rosca Ø4,5-3,5mm Pino Ósseo Ø5,0 Rosca Ø5,0-4,0mm Pino Ósseo Ø6,0 Rosca Ø4,5-3,5mm Pino Ósseo Ø6,0 Rosca Ø5,0-4,0mm Pino Ósseo Ø6,0 Rosca Ø6,0-5,0mm Pino Ósseo Ø6,0 Rosca Ø6,0-5,6mm	Fêmur, Quadril e Acetábulo
Pino Ósseo Ø4,0 Rosca Ø3,5-3,0mm Pino Ósseo Ø4,0 Rosca Ø4,0-3,3mm Pino Ósseo Ø5,0 Rosca Ø3,5-3,0mm Pino Ósseo Ø6,0 Rosca Ø3,5-3,0mm	Úmero		
Pino Ósseo Ø3,0 Rosca Ø4,0mm Pino Ósseo Ø4,0 Rosca Ø5,5mm	Calcâneo		

O critério de seleção do tipo e tamanho do pino e também dos fixadores externos (componentes ancilares e não integrantes deste produto) a serem utilizados vai depender do tipo e local da fratura, do estado do osso e do tratamento a ser feito. Estas condições são de responsabilidade do médico que avalia o paciente e decide quais materiais deverão ser utilizados.

A seguir, descrição das características específicas dos modelos comerciais:

Pino Ósseo Ø3,0Xxxx, rosca Ø4,0Xxx, N/Estéril								
Pino Ósseo Ø4,0Xxxx, rosca Ø5,5Xxx, N/Estéril								
								
Imagem ilustrativa								
comprimento total	Ø parte lisa	comprimento parte lisa	Ø rosca	comprimento da rosca	tipo de engate	tipo de ponta	utilizar broca	outros

Variam de 250 a 400mm	Ø 3,0mm	Variam de 170 a 380mm	Ø 4,0mm	Variam de 20 a 80mm	Triangular	Trocar	Ø 3,2mm	Não Calibrado
					Facetado	Trocar		
					Triangular	Baionet a		
					Facetado	Baionet a		
Variam de 250 a 400mm	Ø 4,0mm	Variam de 170 a 380mm	Ø 5,5mm	Variam de 20 a 80mm	Triangular	Trocar	Ø 4,0mm	Não Calibrado
					Facetado	Trocar		
					Triangular	Baionet a		
					Facetado	Baionet a		

Pino ósseo Ø3,0Xxxx, rosca Ø2,5-2,0Xxx, N/Estéril

Pino ósseo Ø3,0Xxxx, rosca Ø3,0-2,5Xxx, N/Estéril

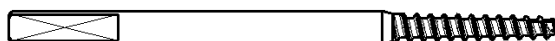


Imagem ilustrativa

comprimento total	Ø parte lisa	comprimento parte lisa	Ø rosca cônica	comprimento da rosca	tipo de engate	tipo de ponta	utilizar broca	outros
Variam de 50 a 120mm	Ø 3,0mm	Variam de 30 a 85mm	Ø2,5-Ø2,0mm	Variam de 15 a 40mm	Triangular	Romba	Ø 1,5mm	Não Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		
Variam de 50 a 150mm	Ø 3,0mm	Variam de 30 a 110mm	Ø3,0-2,5mm	Variam de 15 a 50mm	Triangular	Romba	Ø 1,8mm	Não Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		

Pino ósseo Ø3,0Xxxx, rosca Ø2,5-2,0Xxx Calibrado, N/Estéril

Pino ósseo Ø3,0Xxxx, rosca Ø3,0-2,5Xxx Calibrado, N/Estéril

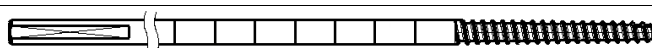


Imagem ilustrativa

comprimento total	Ø parte lisa	comprimento parte lisa	Ø rosca cônica	comprimento da rosca	tipo de engate	tipo de ponta	utilizar broca	outros
100 e 120mm					Triangular	Romba	Ø 1,5mm	Calibrado

	Ø 3,0mm	Variam de 60 a 85mm	Ø2,5- Ø2,0mm	Variam de 25 a 40mm	Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		
100, 120 e 150mm	Ø 3,0mm	Variam de 60 a 110mm	Ø3,0- 2,5mm	Variam de 25 a 50mm	Triangular	Romba	Ø 1,8mm	Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		

Pino ósseo Ø4,0Xxxx, rosca Ø3,0-2,5Xxx, N/Estéril

Pino ósseo Ø4,0Xxxx, rosca Ø3,5-3,0Xxx, N/Estéril

Pino ósseo Ø4,0Xxxx, rosca Ø4,0-3,3Xxx, N/Estéril

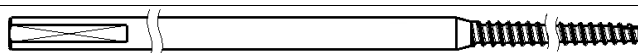


Imagem ilustrativa

comprimento total	Ø parte lisa	comprimento parte lisa	Ø rosca cônica	comprimento da rosca	tipo de engate	tipo de ponta	utilizar broca	outros
Variam de 50 a 150mm	Ø 4,0mm	Variam de 30 a 110mm	Ø3,0- Ø2,5mm	Variam de 20 a 50mm	Triangular	Romba	Ø 1,8mm	Não Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		
Variam de 50 a 180mm	Ø 4,0mm	Variam de 30 a 140mm	Ø3,5- 3,0mm	Variam de 20 a 50mm	Triangular	Romba	Ø 2,0mm	Não Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		
Variam de 50 a 180mm	Ø 4,0mm	Variam de 30 a 140mm	Ø4,0- 3,3mm	Variam de 20 a 50mm	Triangular	Romba	Ø 2,5mm	Não Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		

Pino ósseo Ø4,0Xxxx, rosca Ø3,0-2,5Xxx Calibrado, N/Estéril

Pino ósseo Ø4,0Xxxx, rosca Ø3,5-3,0Xxx Calibrado, N/Estéril

Pino ósseo Ø4,0Xxxx, rosca Ø4,0-3,3Xxx Calibrado, N/Estéril

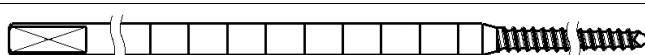


Imagem ilustrativa

comprimento total	Ø parte lisa	comprimento parte lisa	Ø rosca cônica	comprimento da rosca	tipo de engate	tipo de ponta	utilizar broca	outros
100, 120 e 150mm	Ø 4,0mm	Variam de 60 a 110mm	Ø3,0-Ø2,5mm	Variam de 30 a 50mm	Triangular	Romba	Ø 1,8mm	Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		

Pino ósseo Ø4,0Xxxx, rosca Ø3,0-2,5Xxx Calibrado, N/Estéril

Pino ósseo Ø4,0Xxxx, rosca Ø3,5-3,0Xxx Calibrado, N/Estéril

Pino ósseo Ø4,0Xxxx, rosca Ø4,0-3,3Xxx Calibrado, N/Estéril

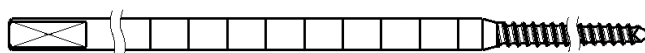


Imagem ilustrativa

comprimento total	Ø parte lisa	comprimento parte lisa	Ø rosca cônica	comprimento da rosca	tipo de engate	tipo de ponta	utilizar broca	outros
150 e 180mm	Ø 4,0mm	Variam de 100 a 140mm	Ø3,5-3,0mm	Variam de 20 a 50mm	Triangular	Romba	Ø 2,0mm	Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		
150 e 180mm	Ø 4,0mm	Variam de 100 a 140mm	Ø4,0-3,3mm	Variam de 20 a 50mm	Triangular	Romba	Ø 2,5mm	Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		

Pino ósseo Ø5,0Xxxx, rosca Ø3,5-3,0Xxx, N/Estéril / Pino ósseo Ø5,0Xxxx, rosca Ø4,5-3,5Xxx, N/Estéril

e Pino ósseo Ø5,0Xxxx, rosca Ø5,0-4,0Xxx, N/Estéril

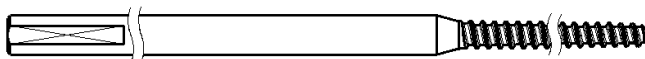


Imagem ilustrativa

comprimento total	Ø parte lisa	comprimento parte lisa	Ø rosca cônica	comprimento da rosca	tipo de engate	tipo de ponta	utilizar broca	outros
Variam de 50 a 180mm	Ø 5,0mm	Variam de 30 a 140mm	Ø3,5-Ø3,0mm	Variam de 20 a 50mm	Triangular	Romba	Ø 2,0mm	Não Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		

					Facetado	Trocar		
Variam de 70 a 220mm	Ø 5,0mm	Variam de 40 a 170mm	Ø4,5-3,5mm	Variam de 20 a 80mm	Triangular	Romba	Ø 2,5mm	Não Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		
					Triangular	Baionet a		
					Facetado	Baionet a		
Variam de 90 a 250mm	Ø 5,0mm	Variam de 60 a 200mm	Ø5,0-4,0mm	Variam de 20 a 80mm	Triangular	Romba	Ø 2,7mm	Não Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		
					Triangular	Baionet a		
					Facetado	Baionet a		

Pino ósseo Ø5,0Xxxx, rosca Ø3,5-3,0Xxx Calibrado, N/Estéril

Pino ósseo Ø5,0Xxxx, rosca Ø4,5-3,5Xxx Calibrado, N/Estéril

Pino ósseo Ø5,0Xxxx, rosca Ø5,0-4,0Xxx Calibrado, N/Estéril

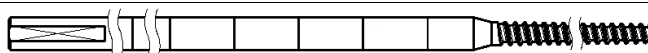


Imagem ilustrativa

comprimento total	Ø parte lisa	comprimento parte lisa	Ø rosca cônica	comprimento da rosca	tipo de engate	tipo de ponta	utilizar broca	outros
150 e 180mm	Ø 5,0mm	Variam de 100 a 140mm	Ø3,5-Ø3,0mm	Variam de 20 a 50mm	Triangular	Romba	Ø 2,0mm	Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		
Variam de 150 e 220mm	Ø 5,0mm	Variam de 90 a 170mm	Ø4,5-3,5mm	Variam de 20 a 80mm	Triangular	Romba	Ø 2,5mm	Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		
					Triangular	Baioneta		
					Facetado	Baioneta		

Variam de 150 e 250mm	Ø 5,0mm	Variam de 90 a 200mm	Ø5,0-4,0mm	Variam de 20 a 80mm	Triangular	Romba	Ø 2,7mm	Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		
					Triangular	Baioneta		
					Facetado	Baioneta		

Pino ósseo Ø6,0Xxxx, rosca Ø3,5-3,0Xxx, N/Estéril

Pino ósseo Ø6,0Xxxx, rosca Ø4,5-3,5Xxx, N/Estéril

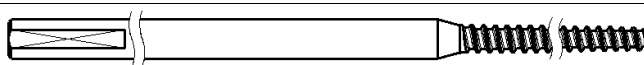


Imagem ilustrativa

comprimento total	Ø parte lisa	comprimento parte lisa	Ø rosca cônica	comprimento da rosca	tipo de engate	tipo de ponta	utilizar broca	outros
Variam de 50 a 180mm	Ø 6,0mm	Variam de 30 a 140mm	Ø3,5-Ø3,0mm	Variam de 20 a 60mm	Triangular	Romba	Ø 2,0mm	Não Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		
Variam de 70 a 220mm	Ø 6,0mm	Variam de 40 a 170mm	Ø4,5-3,5mm	Variam de 20 a 80mm	Triangular	Romba	Ø 2,5mm	Não Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		
					Triangular	Baioneta		
					Facetado	Baioneta		

Pino ósseo Ø6,0Xxxx, rosca Ø5,0-4,0Xxx, N/Estéril

Pino ósseo Ø6,0Xxxx, rosca Ø6,0-5,0Xxx, N/Estéril

Pino ósseo Ø6,0Xxxx, rosca Ø6,0-5,6Xxx, N/Estéril

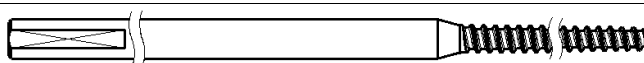


Imagem ilustrativa

comprimento total	Ø parte lisa	comprimento parte lisa	Ø rosca cônica	comprimento da rosca	tipo de engate	tipo de ponta	utilizar broca	outros
Variam de 90 a 250mm	Ø 6,0mm	Variam de 60 a 200mm	Ø5,0-4,0mm	Variam de 20 a 80mm	Triangular	Romba	Ø 2,7mm	Não Calibrado
					Facetado	Romba		

					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		
					Triangular	Baioneta		
					Facetado	Baioneta		
Variam de 90 a 250mm	Ø 6,0mm	Variam de 60 a 200mm	Ø6,0-5,0mm	Variam de 20 a 80mm	Triangular	Romba	Ø 3,8mm	Não Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		
					Triangular	Baioneta		
					Facetado	Baioneta		
Variam de 90 a 250mm	Ø 6,0mm	Variam de 60 a 200mm	Ø6,0-5,6mm	Variam de 20 a 80mm	Triangular	Romba	Ø 4,0mm	Não Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		
					Triangular	Baioneta		
					Facetado	Baioneta		

Pino ósseo Ø6,0Xxxx, rosca Ø3,5-3,0Xxx Calibrado, N/Estéril

Pino ósseo Ø6,0Xxxx, rosca Ø4,5-3,5Xxx Calibrado, N/Estéril

Pino ósseo Ø6,0Xxxx, rosca Ø5,0-4,0Xxx Calibrado, N/Estéril

Pino ósseo Ø6,0Xxxx, rosca Ø6,0-5,0Xxx Calibrado, N/Estéril

Pino ósseo Ø6,0Xxxx, rosca Ø6,0-5,6Xxx Calibrado, N/Estéril

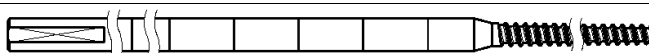


Imagem ilustrativa

comprimento total	Ø parte lisa	comprimento parte lisa	Ø rosca cônica	comprimento da rosca	tipo de engate	tipo de ponta	utilizar broca	outros
150 e 180mm	Ø 6,0mm	Variam de 90 a 140mm	Ø3,5-Ø3,0mm	Variam de 20 a 60mm	Triangular	Romba	Ø 2,0mm	Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		
Variam de 150 e 220mm	Ø 6,0mm	Variam de 90 a 170mm	Ø4,5-3,5mm	Variam de 20 a 80mm	Triangular	Romba	Ø 2,5mm	Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		

					Triangular	Baioneta		
					Facetado	Baioneta		

Pino ósseo Ø6,0Xxxx, rosca Ø3,5-3,0Xxx Calibrado, N/Estéril

Pino ósseo Ø6,0Xxxx, rosca Ø4,5-3,5Xxx Calibrado, N/Estéril

Pino ósseo Ø6,0Xxxx, rosca Ø5,0-4,0Xxx Calibrado, N/Estéril

Pino ósseo Ø6,0Xxxx, rosca Ø6,0-5,0Xxx Calibrado, N/Estéril

Pino ósseo Ø6,0Xxxx, rosca Ø6,0-5,6Xxx Calibrado, N/Estéril

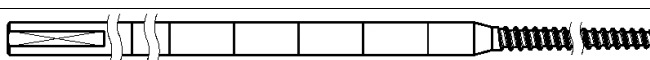


Imagem ilustrativa

comprimento total	Ø parte lisa	comprimento parte lisa	Ø rosca cônica	comprimento da rosca	tipo de engate	tipo de ponta	utilizar broca	outros
Variam de 150 e 250mm	Ø 6,0mm	Variam de 90 a 200mm	Ø5,0-4,0mm	Variam de 20 a 80mm	Triangular	Romba	Ø 2,7mm	Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		
					Triangular	Baioneta		
					Facetado	Baioneta		
Variam de 150 e 250mm	Ø 6,0mm	Variam de 90 a 200mm	Ø6,0-5,0mm	Variam de 20 a 80mm	Triangular	Romba	Ø 3,8mm	Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		
					Triangular	Baioneta		
					Facetado	Baioneta		
Variam de 150 e 250mm	Ø 6,0mm	Variam de 90 a 200mm	Ø6,0-5,6mm	Variam de 20 a 80mm	Triangular	Romba	Ø 4,0mm	Calibrado
					Facetado	Romba		
					Triangular	Trocar		
					Facetado	Trocar		
					Triangular	Baioneta		
					Facetado	Baioneta		

LEGENDA		
T = Triangular e Romba	F = Facetado e Romba	TT = Triangular e Trocar
 ENGATE TRIANGULAR  PONTA ROMBA	 ENGATE FACETADO  PONTA ROMBA	 ENGATE TRIANGULAR  PONTA TROCAR
FT = Facetado e Trocar	TB = Triangular e Baioneta	FB = Facetado e Baioneta
 ENGATE FACETADO  PONTA TROCAR	 ENGATE TRIANGULAR  PONTA BAIONETA	 ENGATE FACETADO  PONTA BAIONETA

COMPONENTES ANCILARES

Para que o Elemento de Fixação Óssea Não Estéril tenha o desempenho pretendido de uso, deve ser utilizado com Fixadores Externos (componentes ancilares e não integrantes deste produto), considerados como classe de risco I e não integrantes deste produto, devendo ser adquiridos separadamente e possuem cadastro próprio na ANVISA.

É importante o cirurgião consultar a Instrução de Uso dos Fixadores Externos para correta utilização do conjunto.

COMPATIBILIDADE DIMENSIONAL

Os modelos comerciais que compõem a família do Elemento de Fixação Óssea Não Estéril foram projetados para conexão compatível com os Fixadores Externos (componentes ancilares e não integrantes deste produto) apresentados a seguir:

Fixador Externo Linear MS01 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 8 Pinos Ósseos Ø 5,0mm	Fixador Externo Linear MS02 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 4 Pinos Ósseos Ø 4,0mm	Fixador Externo Linear Tipo "Preston" Adulto MS03 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 8 Pinos Ósseos Ø 5,0mm
Fixador Externo Linear Tipo "Preston" Infantil MS04 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 6 Pinos Ósseos Ø 4,0mm	Fixador Externo Linear Tipo "Preston" Tubular MS05 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 6 Pinos Ósseos Ø 5,0mm	Fixador Externo Linear Tipo "Preston" Tubular MS06 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 8 Pinos Ósseos Ø 5,0mm
Fixador Externo Articulado Tipo "Wagner" Adulto MS07	Fixador Externo Articulado Tipo "Wagner" Infantil MS08	Fixador Externo Articulado em "T" Adulto MS09

Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 4 Pinos Ósseos Ø 4,0mm	Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 4 Pinos Ósseos Ø 6,0mm	Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 8 Pinos Ósseos Ø 5,0mm
Fixador Externo Articulado em "T" Infantil MS10 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 8 Pinos Ósseos Ø 4,0mm	Fixador Externo Articulado Adulto MS11 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 8 Pinos Ósseos Ø 5,0mm	Fixador Externo Articulado Infantil MS12 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 8 Pinos Ósseos Ø 4,0mm
Fixador Externo Articulado Adulto MS13 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 6 Pinos Ósseos Ø 6,0mm	Fixador Externo Articulado Infantil MS14 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 6 Pinos Ósseos Ø 4,0mm	Fixador Externo Articulado Adulto em "T" MS15 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 6 Pinos Ósseos Ø 6,0mm
Fixador Externo Articulado Adulto em Arco "T" MS15 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 8 Pinos Ósseos Ø 6,0mm	Fixador Externo Articulado Infantil em "T" MS16 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 6 Pinos Ósseos Ø 4,0mm	Fixador Externo Articulado Infantil em Arco "T" MS16 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 8 Pinos Ósseos Ø 4,0mm
Fixador Externo Articulado Adulto MS17TI Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 6 Pinos Ósseos Ø 6,0mm	Fixador Externo Articulado Infantil MS18TI Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 6 Pinos Ósseos Ø 4,0mm	Fixador Externo Articulado Adulto em "T" MS19TI Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 6 Pinos Ósseos Ø 6,0mm
Fixador Externo Articulado Adulto em Arco "T" MS19TI Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 6 Pinos Ósseos Ø 6,0mm	Fixador Externo Articulado Infantil em "T" MS20TI Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 6 Pinos Ósseos Ø 4,0mm	Fixador Externo Articulado Infantil em Arco "T" MS20TI Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 8 Pinos Ósseos Ø 4,0mm
Fixador Externo Articulado em "T" MS21 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 8 Pinos Ósseos Ø 6,0mm	Fixador Externo Articulado em "T" MS22 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 8 Pinos Ósseos Ø 6,0mm	Fixador Externo Articulado MS23 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 6 Pinos Ósseos Ø 6,0mm
Fixador Externo Articulado MS24 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com	Fixador Externo MS25 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com	Fixador Externo Articulado MS26 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com

6 Pinos Ósseos Ø 6,0mm	6 Pinos Ósseos Ø 5,0mm	4 Pinos Ósseos Ø 4,0mm
Fixador Externo Articulado MS29 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 9 Pinos Ósseos Ø 5,0mm	Fixador Externo Articulado MS30 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 9 Pinos Ósseos Ø 5,0mm	Fixador Externo Articulado MS31 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 9 Pinos Ósseos Ø 5,0mm
Fixador Externo Articulado MS32 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 9 Pinos Ósseos Ø 5,0mm	Fixador Externo Articulado MS33 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 4 Pinos Ósseos Ø 4,0mm	Fixador Externo Triangular Calandruccio MS34 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 6 Pinos Ósseos Ø 5,0mm

Sistema de Fixação Óssea Sartori – Linefix Falange T 100 Sistema de Fixação Óssea Sartori – Linefix Falange T 150 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 8 Pinos Ósseos Ø 3,0mm	Sistema de Fixação Óssea Sartori – Linefix Tíbia T 250 Sistema de Fixação Óssea Sartori – Linefix Tíbia/Fêmur T 300 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 8 Pinos Ósseos Ø 5,0mm	Sistema de Fixação Óssea Sartori – Linefix Fêmur T 350 Sistema de Fixação Óssea Sartori – Linefix Fêmur/Bacia T 400 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 8 Pinos Ósseos Ø 5,0mm
Sistema de Fixação Óssea Sartori – Linefix Punho Alumínio T 150 Sistema de Fixação Óssea Sartori – Linefix Punho Alumínio T 200 Sistema de Fixação Óssea Sartori – Linefix Punho Inox T 150 Sistema de Fixação Óssea Sartori – Linefix Punho Inox T 200 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 8 Pinos Ósseos Ø 3,0mm	Sistema de Fixação Óssea Sartori – Linefix Rádio/Úmero T 150 Sistema de Fixação Óssea Sartori – Linefix Rádio/Úmero T 170 Sistema de Fixação Óssea Sartori – Linefix Rádio/Úmero T 200 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 8 Pinos Ósseos Ø 3,0mm	Sistema de Fixação Óssea Sartori – Colles 160 Sistema de Fixação Óssea Sartori – Colles 180 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 6 Pinos Ósseos Ø 3,0mm
Sistema de Fixação Óssea Sartori – Linefix Úmero T 200 Registro ANVISA nº 80083650031 deve ser utilizado com 8 Pinos Ósseos Ø 5,0mm	Fixador Externo II Registro ANVISA nº 80083650033 deve ser utilizado com 4 Pinos Ósseos Ø 6,0mm	Fixador Externo III Registro ANVISA nº 80083650034 deve ser utilizado com 1 Pino Ósseo Ø 4,0mm 4 Pinos Ósseos Ø 6,0mm

CARGA SUPORTADA

Os pinos permitem uma movimentação precoce do paciente, mas não possui o desempenho do osso normal e não suporta carregamento mecânico maior que aquele determinado pelo cirurgião, enquanto não ocorrer à consolidação óssea completa, portanto pode quebrar, deformar ou soltar, em decorrência de carregamento excessivo ou precoce, se não aquela indicada pelo médico responsável.

COMPOSIÇÃO

A matéria-prima utilizada é o Aço Inoxidável ASTM F138 devido às suas propriedades que os torna material ideal para a produção de dispositivos médicos implantáveis, conhecida pela sua excelente biocompatibilidade, resistência à corrosão em ambiente biológico e resistência mecânica, comprovada por um vasto histórico, amplamente descrito na literatura mundial.

O Aço Inoxidável F138 cumpre com os requisitos especificados pela norma ASTM F138 - Standard Specification for Wrought 18Chromium 14Nickel 2.5Molybdenum Stainless Steel Bar and Wire for Surgical Implants (UNS S31673), caracterizado como material com propriedades mecânica e metalúrgica favoráveis para esse fim.

A matéria-prima utilizada na fabricação dos implantes é analisada em laboratórios terceirizados para verificar a conformidade dos materiais com a norma ASTM F138, específica para esse tipo de material.

INDICAÇÃO

O Elemento de Fixação Óssea Não Estéril é indicado para o tratamento de fratura, estabilização, alongamento e transporte ósseo, e pode ser utilizado em ossos médios e longos das extremidades do corpo humano.

CONTRAINDICAÇÃO

As contraindicações relativas são:

- Pacientes clinicamente comprometidos com doenças metabólicas como diabetes, alergias, e hemorragia, sendo que essas doenças podem afetar a cicatrização de feridas e comprometer a estabilidade da fixação e a vida útil do implante;
- Pacientes dependentes de drogas (entorpecentes, alcoólicas ou fumo) devem ser tratadas com cuidado especial;
- Pacientes com doenças cardíacas ou pulmonares podem apresentar problemas com a anestesia geral. Estes pacientes devem ser tratados sob cuidados especiais, tanto na anestesia geral ou local;
- Pacientes com doenças psiquiátricas e neurológicas (por exemplo, epilepsia), que não querem ou estão impossibilitados de se submeter a um procedimento cirúrgico e/ou seguir as instruções pós-operatórias devido às condições que apresentam (mental ou física);
- Pacientes com infecções ativas gerais ou específicas que possam levar a complicações com a fixação;
- Pacientes com doença degenerativa avançada (por ex. osteoporose) que também possam comprometer a estabilidade da fixação;
- Pacientes que se submeteram a tratamentos médicos que levam à deterioração progressiva dos ossos (por exemplo, terapias com corticóides).

EFEITOS ADVERSOS

Os modelos comerciais que compõem a família do Elemento de Fixação Óssea Não Estéril são fabricados com Aço Inoxidável F138. Material reconhecido de uso biomédico, e cumpre com os requisitos especificados pela norma quanto aos requisitos físico-químicos, mecânicos e microestruturais, o qual é utilizado como critério para assegurar a pureza do produto e seu desempenho biomecânico, caracterizando como aceitável para ser implantado no corpo humano.

No entanto, experiências clínicas mostram que nenhum material para implante cirúrgico mostra ser completamente livre de reações adversas no corpo humano, e que um nível aceitável de resposta biológica pode ser esperado quando o material é usado em aplicações apropriadas.

Todo procedimento cirúrgico apresenta riscos e possibilidades de complicações, sendo que alguns riscos comuns são as infecções, hemorragias, reações alérgicas medicamentosas e riscos anestésicos, entre outros. Podem ser ainda associadas à implantação do produto, as seguintes complicações e efeitos adversos:

- Riscos de lesões neurais;
- Infecção no local do pino;
- Afrouxamento ou quebra do implante;
- Osteomelite;
- Não-união (pseudartrose);
- Consolidação viciosa;
- Trombose venosa profunda;
- Rigidez das articulações adjacentes;
- Dores, desconfortos ou sensações anormais devido ao produto;
- Problemas de compatibilidade e reações alérgicas.

FORMA DE APRESENTAÇÃO

Os modelos comerciais que compõem a família de Elemento de Fixação Óssea Não Estéril são disponibilizados para comercialização embalados unitariamente na condição de produto não estéril, em embalagem plástica de polietileno. Os pinos recebem um envelope de papel rígido em sua ponta, para proteção do operador e do produto.

Dentro da embalagem segue cinco vias da etiqueta de rastreabilidade e um alerta de instrução de uso e sobre a embalagem é impresso um rótulo, contendo as informações necessárias para a identificação do produto, conforme imagens a seguir:



Imagem ilustrativa da embalagem plástica

		Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA CNPJ: 04.861.623/0001-00 Avenida Brasil, 13.500, Bairro Ajapi, Rio Claro SP CEP 13508-500 Resp.Téc. Sérgio R.A. Oliveira CREA/SP: 5070105936						
REF	0211032-080	LOT	0166325	QTD	1	INDETERMINADA		15/05/24
PINO OSSEO Ø3,0X250, ROSCA Ø4,0X80 TT, N/ESTERIL								
Nome Comercial: ELEMENTO DE FIXACAO OSSEA NAO ESTERIL Nome Técnico: PINO E FIO RIGIDOS NAO ABSORVIVEIS Material: ACO INOX F138								
Atenção: Instrução de uso disponível em http://sartori.ind.br/instrucao_uso Reg. Anvisa: 80083650064 I.U. Revisão: XX Para obter a versão impressa sem custo de emissão e envio, contatar +55 19 3538-1910 - info@sartori.ind.br								
PRODUTO DE USO ÚNICO - PROIBIDO REPROCESSAR PRODUTO NÃO ESTÉRIL - ESTERILIZAR ANTES DO USO Consultar a Instrução de Uso para maiores informações sobre condições de armazenamento, precauções, instruções e indicações de legendas								
						0211032-080 		
						(01)07909700110480 (11)240515 (10)0166325  		
								

Imagem ilustrativa do rótulo do produto

Os modelos comerciais da família do Elemento de Fixação Óssea Não Estéril são disponibilizados para comercialização nas seguintes dimensões:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211150-010 - Pino Ósseo Ø1,5X50/10, N/Estéril;
0211150-012 - Pino Ósseo Ø1,5X50/12, N/Estéril;
0211150-015 - Pino Ósseo Ø1,5X50/15, N/Estéril;
0211150-018 - Pino Ósseo Ø1,5X50/18, N/Estéril;
0211150-020 - Pino Ósseo Ø1,5X50/20, N/Estéril;
0211150-110 - Pino Ósseo Ø1,5X55/10, N/Estéril;
0211150-112 - Pino Ósseo Ø1,5X55/12, N/Estéril;
0211150-115 - Pino Ósseo Ø1,5X55/15, N/Estéril;
0211150-118 - Pino Ósseo Ø1,5X55/18, N/Estéril;
0211150-120 - Pino Ósseo Ø1,5X55/20, N/Estéril;
0211150-210 - Pino Ósseo Ø1,5X60/10, N/Estéril;
0211150-212 - Pino Ósseo Ø1,5X60/12, N/Estéril;
0211150-215 - Pino Ósseo Ø1,5X60/15, N/Estéril;
0211150-218 - Pino Ósseo Ø1,5X60/18, N/Estéril;
0211150-220 - Pino Ósseo Ø1,5X60/20, N/Estéril;
0211150-225 - Pino Ósseo Ø1,5X60/25, N/Estéril;
0211150-315 - Pino Ósseo Ø1,5X65/15, N/Estéril;
0211150-318 - Pino Ósseo Ø1,5X65/18, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211150-320 - Pino Ósseo Ø1,5X65/20, N/Estéril;
0211150-325 - Pino Ósseo Ø1,5X65/25, N/Estéril;
0211150-330 - Pino Ósseo Ø1,5X65/30, N/Estéril;
0211150-415 - Pino Ósseo Ø1,5X70/15, N/Estéril;
0211150-418 - Pino Ósseo Ø1,5X70/18, N/Estéril;
0211150-420 - Pino Ósseo Ø1,5X70/20, N/Estéril;
0211150-425 - Pino Ósseo Ø1,5X70/25, N/Estéril;
0211150-430 - Pino Ósseo Ø1,5X70/30, N/Estéril;
0211150-520 - Pino Ósseo Ø1,5X80/20, N/Estéril;
0211150-525 - Pino Ósseo Ø1,5X80/25, N/Estéril;
0211150-530 - Pino Ósseo Ø1,5X80/30, N/Estéril;
0211150-620 - Pino Ósseo Ø1,5X100/20, N/Estéril;
0211150-625 - Pino Ósseo Ø1,5X100/25, N/Estéril;
0211150-630 - Pino Ósseo Ø1,5X100/30, N/Estéril;
0211200-015 - Pino Ósseo Ø2,0X50/15, N/Estéril;
0211200-018 - Pino Ósseo Ø2,0X50/18, N/Estéril;
0211200-020 - Pino Ósseo Ø2,0X50/20, N/Estéril;
0211200-115 - Pino Ósseo Ø2,0X55/15, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211200-118 - Pino Ósseo Ø2,0X55/18, N/Estéril;
0211200-120 - Pino Ósseo Ø2,0X55/20, N/Estéril;
0211200-215 - Pino Ósseo Ø2,0X60/15, N/Estéril;
0211200-218 - Pino Ósseo Ø2,0X60/18, N/Estéril;
0211200-220 - Pino Ósseo Ø2,0X60/20, N/Estéril;
0211200-225 - Pino Ósseo Ø2,0X60/25, N/Estéril;
0211200-315 - Pino Ósseo Ø2,0X65/15, N/Estéril;
0211200-318 - Pino Ósseo Ø2,0X65/18, N/Estéril;
0211200-320 - Pino Ósseo Ø2,0X65/20, N/Estéril;
0211200-325 - Pino Ósseo Ø2,0X65/25, N/Estéril;
0211200-330 - Pino Ósseo Ø2,0X65/30, N/Estéril;
0211200-415 - Pino Ósseo Ø2,0X70/15, N/Estéril;
0211200-418 - Pino Ósseo Ø2,0X70/18, N/Estéril;
0211200-420 - Pino Ósseo Ø2,0X70/20, N/Estéril;
0211200-425 - Pino Ósseo Ø2,0X70/25, N/Estéril;
0211200-430 - Pino Ósseo Ø2,0X70/30, N/Estéril;
0211200-520 - Pino Ósseo Ø2,0X80/20, N/Estéril;
0211200-525 - Pino Ósseo Ø2,0X80/25, N/Estéril;
0211200-530 - Pino Ósseo Ø2,0X80/30, N/Estéril;
0211200-535 - Pino Ósseo Ø2,0X80/35, N/Estéril;
0211200-620 - Pino Ósseo Ø2,0X100/20, N/Estéril;
0211200-625 - Pino Ósseo Ø2,0X100/25, N/Estéril;
0211200-630 - Pino Ósseo Ø2,0X100/30, N/Estéril;
0211200-635 - Pino Ósseo Ø2,0X100/35, N/Estéril;
0211200-640 - Pino Ósseo Ø2,0X100/40, N/Estéril;
0211200-730 - Pino Ósseo Ø2,0X120/30, N/Estéril;
0211200-735 - Pino Ósseo Ø2,0X120/35, N/Estéril;
0211200-740 - Pino Ósseo Ø2,0X120/40, N/Estéril;
0211250-015 - Pino Ósseo Ø2,5X50/15 LT, N/Estéril;
0211250-018 - Pino Ósseo Ø2,5X50/18 LT, N/Estéril;
0211250-020 - Pino Ósseo Ø2,5X50/20 LT, N/Estéril;
0211250-115 - Pino Ósseo Ø2,5X55/15 LT, N/Estéril;
0211250-118 - Pino Ósseo Ø2,5X55/18 LT, N/Estéril;
0211250-120 - Pino Ósseo Ø2,5X55/20 LT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211250-215 - Pino Ósseo Ø2,5X60/15 LT, N/Estéril;
0211250-218 - Pino Ósseo Ø2,5X60/18 LT, N/Estéril;
0211250-220 - Pino Ósseo Ø2,5X60/20 LT, N/Estéril;
0211250-225 - Pino Ósseo Ø2,5X60/25 LT, N/Estéril;
0211250-315 - Pino Ósseo Ø2,5X65/15 LT, N/Estéril;
0211250-318 - Pino Ósseo Ø2,5X65/18 LT, N/Estéril;
0211250-320 - Pino Ósseo Ø2,5X65/20 LT, N/Estéril;
0211250-325 - Pino Ósseo Ø2,5X65/25 LT, N/Estéril;
0211250-330 - Pino Ósseo Ø2,5X65/30 LT, N/Estéril;
0211250-415 - Pino Ósseo Ø2,5X70/15 LT, N/Estéril;
0211250-418 - Pino Ósseo Ø2,5X70/18 LT, N/Estéril;
0211250-420 - Pino Ósseo Ø2,5X70/20 LT, N/Estéril;
0211250-425 - Pino Ósseo Ø2,5X70/25 LT, N/Estéril;
0211250-430 - Pino Ósseo Ø2,5X70/30 LT, N/Estéril;
0211250-520 - Pino Ósseo Ø2,5X80/20 LT, N/Estéril;
0211250-525 - Pino Ósseo Ø2,5X80/25 LT, N/Estéril;
0211250-530 - Pino Ósseo Ø2,5X80/30 LT, N/Estéril;
0211250-535 - Pino Ósseo Ø2,5X80/35 LT, N/Estéril;
0211250-625 - Pino Ósseo Ø2,5X100/25 LT, N/Estéril;
0211250-630 - Pino Ósseo Ø2,5X100/30 LT, N/Estéril;
0211250-635 - Pino Ósseo Ø2,5X100/35 LT, N/Estéril;
0211250-640 - Pino Ósseo Ø2,5X100/40 LT, N/Estéril;
0211250-730 - Pino Ósseo Ø2,5X120/30 LT, N/Estéril;
0211250-735 - Pino Ósseo Ø2,5X120/35 LT, N/Estéril;
0211250-740 - Pino Ósseo Ø2,5X120/40 LT, N/Estéril;
0211251-015 - Pino Ósseo Ø2,5X50/15 TT, N/Estéril;
0211251-018 - Pino Ósseo Ø2,5X50/18 TT, N/Estéril;
0211251-020 - Pino Ósseo Ø2,5X50/20 TT, N/Estéril;
0211251-115 - Pino Ósseo Ø2,5X55/15 TT, N/Estéril;
0211251-118 - Pino Ósseo Ø2,5X55/18 TT, N/Estéril;
0211251-120 - Pino Ósseo Ø2,5X55/20 TT, N/Estéril;
0211251-215 - Pino Ósseo Ø2,5X60/15 TT, N/Estéril;
0211251-218 - Pino Ósseo Ø2,5X60/18 TT, N/Estéril;
0211251-220 - Pino Ósseo Ø2,5X60/20 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211251-225 - Pino Ósseo Ø2,5X60/25 TT, N/Estéril;
0211251-315 - Pino Ósseo Ø2,5X65/15 TT, N/Estéril;
0211251-318 - Pino Ósseo Ø2,5X65/18 TT, N/Estéril;
0211251-320 - Pino Ósseo Ø2,5X65/20 TT, N/Estéril;
0211251-325 - Pino Ósseo Ø2,5X65/25 TT, N/Estéril;
0211251-330 - Pino Ósseo Ø2,5X65/30 TT, N/Estéril;
0211251-415 - Pino Ósseo Ø2,5X70/15 TT, N/Estéril;
0211251-418 - Pino Ósseo Ø2,5X70/18 TT, N/Estéril;
0211251-420 - Pino Ósseo Ø2,5X70/20 TT, N/Estéril;
0211251-425 - Pino Ósseo Ø2,5X70/25 TT, N/Estéril;
0211251-430 - Pino Ósseo Ø2,5X70/30 TT, N/Estéril;
0211251-520 - Pino Ósseo Ø2,5X80/20 TT, N/Estéril;
0211251-525 - Pino Ósseo Ø2,5X80/25 TT, N/Estéril;
0211251-530 - Pino Ósseo Ø2,5X80/30 TT, N/Estéril;
0211251-535 - Pino Ósseo Ø2,5X80/35 TT, N/Estéril;
0211251-625 - Pino Ósseo Ø2,5X100/25 TT, N/Estéril;
0211251-630 - Pino Ósseo Ø2,5X100/30 TT, N/Estéril;
0211251-635 - Pino Ósseo Ø2,5X100/35 TT, N/Estéril;
0211251-640 - Pino Ósseo Ø2,5X100/40 TT, N/Estéril;
0211251-730 - Pino Ósseo Ø2,5X120/30 TT, N/Estéril;
0211251-735 - Pino Ósseo Ø2,5X120/35 TT, N/Estéril;
0211251-740 - Pino Ósseo Ø2,5X120/40 TT, N/Estéril;
0211260-625 - Pino Ósseo Ø2,5X100/25 LT, Calibrado, N/Estéril;
0211260-630 - Pino Ósseo Ø2,5X100/30 LT, Calibrado, N/Estéril;
0211260-635 - Pino Ósseo Ø2,5X100/35 LT, Calibrado, N/Estéril;
0211260-640 - Pino Ósseo Ø2,5X100/40 LT, Calibrado, N/Estéril;
0211260-730 - Pino Ósseo Ø2,5X120/30 LT, Calibrado, N/Estéril;
0211260-735 - Pino Ósseo Ø2,5X120/35 LT, Calibrado, N/Estéril;
0211260-740 - Pino Ósseo Ø2,5X120/40 LT, Calibrado, N/Estéril;
0211261-625 - Pino Ósseo Ø2,5X100/25 TT, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211261-630 - Pino Ósseo Ø2,5X100/30 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211261-635 - Pino Ósseo Ø2,5X100/35 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211261-640 - Pino Ósseo Ø2,5X100/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211261-730 - Pino Ósseo Ø2,5X120/30 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211261-735 - Pino Ósseo Ø2,5X120/35 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211261-740 - Pino Ósseo Ø2,5X120/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211300-015 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø2,5-2,0x15 T, N/Estéril;
0211300-018 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø2,5-2,0x18 T, N/Estéril;
0211300-020 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø2,5-2,0x20 T, N/Estéril;
0211300-115 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø2,5-2,0x15 T, N/Estéril;
0211300-118 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø2,5-2,0x18 T, N/Estéril;
0211300-120 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø2,5-2,0x20 T, N/Estéril;
0211300-125 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø2,5-2,0x25 T, N/Estéril;
0211300-215 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø2,5-2,0x15 T, N/Estéril;
0211300-218 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø2,5-2,0x18 T, N/Estéril;
0211300-220 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø2,5-2,0x20 T, N/Estéril;
0211300-225 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø2,5-2,0x25 T, N/Estéril;
0211300-230 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø2,5-2,0x30 T, N/Estéril;
0211300-325 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø2,5-2,0x25 T, N/Estéril;
0211300-330 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø2,5-2,0x30 T, N/Estéril;
0211300-335 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø2,5-2,0x35 T, N/Estéril;
0211300-425 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x25 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211300-430 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x30 T, N/Estéril;
0211300-435 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x35 T, N/Estéril;
0211300-440 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x40 T, N/Estéril;
0211300-535 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø2,5-2,0x35 T, N/Estéril;
0211300-540 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø2,5-2,0x40 T, N/Estéril;
0211301-015 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø2,5-2,0x15 F, N/Estéril;
0211301-018 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø2,5-2,0x18 F, N/Estéril;
0211301-020 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø2,5-2,0x20 F, N/Estéril;
0211301-115 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø2,5-2,0x15 F, N/Estéril;
0211301-118 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø2,5-2,0x18 F, N/Estéril;
0211301-120 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø2,5-2,0x20 F, N/Estéril;
0211301-125 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø2,5-2,0x25 F, N/Estéril;
0211301-215 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø2,5-2,0x15 F, N/Estéril;
0211301-218 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø2,5-2,0x18 F, N/Estéril;
0211301-220 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø2,5-2,0x20 F, N/Estéril;
0211301-225 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø2,5-2,0x25 F, N/Estéril;
0211301-230 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø2,5-2,0x30 F, N/Estéril;
0211301-325 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø2,5-2,0x25 F, N/Estéril;
0211301-330 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø2,5-2,0x30 F, N/Estéril;
0211301-335 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø2,5-2,0x35 F, N/Estéril;
0211301-425 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x25 F, N/Estéril;
0211301-430 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x30 F, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211301-435 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x35 F, N/Estéril;
0211301-440 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x40 F, N/Estéril;
0211301-535 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø2,5-2,0x35 F, N/Estéril;
0211301-540 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø2,5-2,0x40 F, N/Estéril;
0211302-015 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø2,5-2,0x15 TT, N/Estéril;
0211302-018 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø2,5-2,0x18 TT, N/Estéril;
0211302-020 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø2,5-2,0x20 TT, N/Estéril;
0211302-115 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø2,5-2,0x15 TT, N/Estéril;
0211302-118 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø2,5-2,0x18 TT, N/Estéril;
0211302-120 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø2,5-2,0x20 TT, N/Estéril;
0211302-125 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø2,5-2,0x25 TT, N/Estéril;
0211302-215 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø2,5-2,0x15 TT, N/Estéril;
0211302-218 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø2,5-2,0x18 TT, N/Estéril;
0211302-220 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø2,5-2,0x20 TT, N/Estéril;
0211302-225 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø2,5-2,0x25 TT, N/Estéril;
0211302-230 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø2,5-2,0x30 TT, N/Estéril;
0211302-325 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø2,5-2,0x25 TT, N/Estéril;
0211302-330 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø2,5-2,0x30 TT, N/Estéril;
0211302-335 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø2,5-2,0x35 TT, N/Estéril;
0211302-425 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x25 TT, N/Estéril;
0211302-430 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x30 TT, N/Estéril;
0211302-435 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x35 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211302-440 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x40 TT, N/Estéril;
0211302-535 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø2,5-2,0x35 TT, N/Estéril;
0211302-540 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø2,5-2,0x40 TT, N/Estéril;
0211303-015 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø2,5-2,0x15 FT, N/Estéril;
0211303-018 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø2,5-2,0x18 FT, N/Estéril;
0211303-020 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø2,5-2,0x20 FT, N/Estéril;
0211303-115 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø2,5-2,0x15 FT, N/Estéril;
0211303-118 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø2,5-2,0x18 FT, N/Estéril;
0211303-120 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø2,5-2,0x20 FT, N/Estéril;
0211303-125 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø2,5-2,0x25 FT, N/Estéril;
0211303-215 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø2,5-2,0x15 FT, N/Estéril;
0211303-218 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø2,5-2,0x18 FT, N/Estéril;
0211303-220 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø2,5-2,0x20 FT, N/Estéril;
0211303-225 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø2,5-2,0x25 FT, N/Estéril;
0211303-230 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø2,5-2,0x30 FT, N/Estéril;
0211303-325 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø2,5-2,0x25 FT, N/Estéril;
0211303-330 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø2,5-2,0x30 FT, N/Estéril;
0211303-335 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø2,5-2,0x35 FT, N/Estéril;
0211303-425 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x25 FT, N/Estéril;
0211303-430 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x30 FT, N/Estéril;
0211303-435 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x35 FT, N/Estéril;
0211303-440 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x40 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211303-535 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø2,5-2,0x35 FT, N/Estéril;
0211303-540 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø2,5-2,0x40 FT, N/Estéril;
0211310-425 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x25 T, Calibrado, N/Est.;
0211310-430 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x30 T, Calibrado, N/Est.;
0211310-435 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x35 T, Calibrado, N/Est.;
0211310-440 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x40 T, Calibrado, N/Est.;
0211310-535 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø2,5-2,0x35 T, Calibrado, N/Est.;
0211310-540 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø2,5-2,0x40 T, Calibrado, N/Est.;
0211311-425 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x25 F, Calibrado, N/Est.;
0211311-430 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x30 F, Calibrado, N/Est.;
0211311-435 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x35 F, Calibrado, N/Est.;
0211311-440 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x40 F, Calibrado, N/Est.;
0211311-535 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø2,5-2,0x35 F, Calibrado, N/Est.;
0211311-540 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø2,5-2,0x40 F, Calibrado, N/Est.;
0211312-425 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x25 TT, Calibrado, N/Est.;
0211312-430 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211312-435 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211312-440 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211312-535 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø2,5-2,0x35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211312-540 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø2,5-2,0x40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211313-425 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x25 FT, Calibrado, N/Est.;
0211313-430 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x30 FT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211313-435 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211313-440 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø2,5-2,0x40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211313-535 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø2,5-2,0x35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211313-540 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø2,5-2,0x40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211320-015 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø3,0-2,5x15 T, N/Estéril;
0211320-018 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø3,0-2,5x18 T, N/Estéril;
0211320-020 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø3,0-2,5x20 T, N/Estéril;
0211320-115 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x15 T, N/Estéril;
0211320-118 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x18 T, N/Estéril;
0211320-120 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x20 T, N/Estéril;
0211320-125 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x25 T, N/Estéril;
0211320-215 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x15 T, N/Estéril;
0211320-218 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x18 T, N/Estéril;
0211320-220 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x20 T, N/Estéril;
0211320-225 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x25 T, N/Estéril;
0211320-230 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x30 T, N/Estéril;
0211320-325 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x25 T, N/Estéril;
0211320-330 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x30 T, N/Estéril;
0211320-335 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x35 T, N/Estéril;
0211320-425 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x25 T, N/Estéril;
0211320-430 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x30 T, N/Estéril;
0211320-435 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x35 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211320-440 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x40 T, N/Estéril;
0211320-535 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x35 T, N/Estéril;
0211320-540 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x40 T, N/Estéril;
0211320-545 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x45 T, N/Estéril;
0211320-640 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x40 T, N/Estéril;
0211320-645 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x45 T, N/Estéril;
0211320-650 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x50 T, N/Estéril;
0211321-015 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø3,0-2,5x15 F, N/Estéril;
0211321-018 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø3,0-2,5x18 F, N/Estéril;
0211321-020 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø3,0-2,5x20 F, N/Estéril;
0211321-115 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x15 F, N/Estéril;
0211321-118 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x18 F, N/Estéril;
0211321-120 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x20 F, N/Estéril;
0211321-125 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x25 F, N/Estéril;
0211321-215 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x15 F, N/Estéril;
0211321-218 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x18 F, N/Estéril;
0211321-220 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x20 F, N/Estéril;
0211321-225 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x25 F, N/Estéril;
0211321-230 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x30 F, N/Estéril;
0211321-325 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x25 F, N/Estéril;
0211321-330 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x30 F, N/Estéril;
0211321-335 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x35 F, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211321-425 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x25 F, N/Estéril;
0211321-430 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x30 F, N/Estéril;
0211321-435 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x35 F, N/Estéril;
0211321-440 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x40 F, N/Estéril;
0211321-535 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x35 F, N/Estéril;
0211321-540 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x40 F, N/Estéril;
0211321-545 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x45 F, N/Estéril;
0211321-640 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x40 F, N/Estéril;
0211321-645 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x45 F, N/Estéril;
0211321-650 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x50 F, N/Estéril;
0211322-015 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø3,0-2,5x15 TT, N/Estéril;
0211322-018 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø3,0-2,5x18 TT, N/Estéril;
0211322-020 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø3,0-2,5x20 TT, N/Estéril;
0211322-115 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x15 TT, N/Estéril;
0211322-118 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x18 TT, N/Estéril;
0211322-120 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x20 TT, N/Estéril;
0211322-125 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x25 TT, N/Estéril;
0211322-215 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x15 TT, N/Estéril;
0211322-218 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x18 TT, N/Estéril;
0211322-220 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x20 TT, N/Estéril;
0211322-225 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x25 TT, N/Estéril;
0211322-230 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x30 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211322-325 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x25 TT, N/Estéril;
0211322-330 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x30 TT, N/Estéril;
0211322-335 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x35 TT, N/Estéril;
0211322-425 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x25 TT, N/Estéril;
0211322-430 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x30 TT, N/Estéril;
0211322-435 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x35 TT, N/Estéril;
0211322-440 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x40 TT, N/Estéril;
0211322-535 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x35 TT, N/Estéril;
0211322-540 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x40 TT, N/Estéril;
0211322-545 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x45 TT, N/Estéril;
0211322-640 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x40 TT, N/Estéril;
0211322-645 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x45 TT, N/Estéril;
0211322-650 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x50 TT, N/Estéril;
0211323-015 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø3,0-2,5x15 FT, N/Estéril;
0211323-018 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø3,0-2,5x18 FT, N/Estéril;
0211323-020 - Pino Ósseo Ø3,0X50, Rosca Ø3,0-2,5x20 FT, N/Estéril;
0211323-115 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x15 FT, N/Estéril;
0211323-118 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x18 FT, N/Estéril;
0211323-120 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x20 FT, N/Estéril;
0211323-125 - Pino Ósseo Ø3,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x25 FT, N/Estéril;
0211323-215 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x15 FT, N/Estéril;
0211323-218 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x18 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211323-220 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x20 FT, N/Estéril;
0211323-225 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x25 FT, N/Estéril;
0211323-230 - Pino Ósseo Ø3,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x30 FT, N/Estéril;
0211323-325 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x25 FT, N/Estéril;
0211323-330 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x30 FT, N/Estéril;
0211323-335 - Pino Ósseo Ø3,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x35 FT, N/Estéril;
0211323-425 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x25 FT, N/Estéril;
0211323-430 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x30 FT, N/Estéril;
0211323-435 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x35 FT, N/Estéril;
0211323-440 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x40 FT, N/Estéril;
0211323-535 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x35 FT, N/Estéril;
0211323-540 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x40 FT, N/Estéril;
0211323-545 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x45 FT, N/Estéril;
0211323-640 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x40 FT, N/Estéril;
0211323-645 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x45 FT, N/Estéril;
0211323-650 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x50 FT, N/Estéril;
0211330-425 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x25 T, Calibrado, N/Est.;
0211330-430 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x30 T, Calibrado, N/Est.;
0211330-435 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x35 T, Calibrado, N/Est.;
0211330-440 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x40 T, Calibrado, N/Est.;
0211330-535 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x35 T, Calibrado, N/Est.;
0211330-540 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x40 T, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211330-545 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x45 T, Calibrado, N/Est.;
0211330-640 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x40 T, Calibrado, N/Est.;
0211330-645 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x45 T, Calibrado, N/Est.;
0211330-650 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x50 T, Calibrado, N/Est.;
0211331-425 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x25 F, Calibrado, N/Est.;
0211331-430 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x30 F, Calibrado, N/Est.;
0211331-435 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x35 F, Calibrado, N/Est.;
0211331-440 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x40 F, Calibrado, N/Est.;
0211331-535 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x35 F, Calibrado, N/Est.;
0211331-540 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x40 F, Calibrado, N/Est.;
0211331-545 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x45 F, Calibrado, N/Est.;
0211331-640 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x40 F, Calibrado, N/Est.;
0211331-645 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x45 F, Calibrado, N/Est.;
0211331-650 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x50 F, Calibrado, N/Est.;
0211332-425 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x25 TT, Calibrado, N/Est.;
0211332-430 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211332-435 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211332-440 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211332-535 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211332-540 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211332-545 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x45 TT, Calibrado, N/Est.;
0211332-640 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x40 TT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211332-645 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x45 TT, Calibrado, N/Est.;
0211332-650 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211333-425 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x25 FT, Calibrado, N/Est.;
0211333-430 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211333-435 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211333-440 - Pino Ósseo Ø3,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211333-535 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211333-540 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211333-545 - Pino Ósseo Ø3,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x45 FT, Calibrado, N/Est.;
0211333-640 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211333-645 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x45 FT, Calibrado, N/Est.;
0211333-650 - Pino Ósseo Ø3,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211340-015 - Pino Ósseo Ø3,0X50/15 TT, N/Estéril;
0211340-018 - Pino Ósseo Ø3,0X50/18 TT, N/Estéril;
0211340-020 - Pino Ósseo Ø3,0X50/20 TT, N/Estéril;
0211340-115 - Pino Ósseo Ø3,0X60/15 TT, N/Estéril;
0211340-118 - Pino Ósseo Ø3,0X60/18 TT, N/Estéril;
0211340-120 - Pino Ósseo Ø3,0X60/20 TT, N/Estéril;
0211340-125 - Pino Ósseo Ø3,0X60/25 TT, N/Estéril;
0211340-215 - Pino Ósseo Ø3,0X70/15 TT, N/Estéril;
0211340-218 - Pino Ósseo Ø3,0X70/18 TT, N/Estéril;
0211340-220 - Pino Ósseo Ø3,0X70/20 TT, N/Estéril;
0211340-225 - Pino Ósseo Ø3,0X70/25 TT, N/Estéril;
0211340-230 - Pino Ósseo Ø3,0X70/30 TT, N/Estéril;
0211340-325 - Pino Ósseo Ø3,0X80/25 TT, N/Estéril;
0211340-330 - Pino Ósseo Ø3,0X80/30 TT, N/Estéril;
0211340-335 - Pino Ósseo Ø3,0X80/35 TT, N/Estéril;
0211340-425 - Pino Ósseo Ø3,0X100/25 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211340-430 - Pino Ósseo Ø3,0X100/30 TT, N/Estéril;
0211340-435 - Pino Ósseo Ø3,0X100/35 TT, N/Estéril;
0211340-440 - Pino Ósseo Ø3,0X100/40 TT, N/Estéril;
0211340-535 - Pino Ósseo Ø3,0X120/35 TT, N/Estéril;
0211340-540 - Pino Ósseo Ø3,0X120/40 TT, N/Estéril;
0211340-545 - Pino Ósseo Ø3,0X120/45 TT, N/Estéril;
0211340-640 - Pino Ósseo Ø3,0X150/40 TT, N/Estéril;
0211340-645 - Pino Ósseo Ø3,0X150/45 TT, N/Estéril;
0211340-650 - Pino Ósseo Ø3,0X150/50 TT, N/Estéril;
0211341-015 - Pino Ósseo Ø3,0X50/15 FT, N/Estéril;
0211341-018 - Pino Ósseo Ø3,0X50/18 FT, N/Estéril;
0211341-020 - Pino Ósseo Ø3,0X50/20 FT, N/Estéril;
0211341-115 - Pino Ósseo Ø3,0X60/15 FT, N/Estéril;
0211341-118 - Pino Ósseo Ø3,0X60/18 FT, N/Estéril;
0211341-120 - Pino Ósseo Ø3,0X60/20 FT, N/Estéril;
0211341-125 - Pino Ósseo Ø3,0X60/25 FT, N/Estéril;
0211341-215 - Pino Ósseo Ø3,0X70/15 FT, N/Estéril;
0211341-218 - Pino Ósseo Ø3,0X70/18 FT, N/Estéril;
0211341-220 - Pino Ósseo Ø3,0X70/20 FT, N/Estéril;
0211341-225 - Pino Ósseo Ø3,0X70/25 FT, N/Estéril;
0211341-230 - Pino Ósseo Ø3,0X70/30 FT, N/Estéril;
0211341-325 - Pino Ósseo Ø3,0X80/25 FT, N/Estéril;
0211341-330 - Pino Ósseo Ø3,0X80/30 FT, N/Estéril;
0211341-335 - Pino Ósseo Ø3,0X80/35 FT, N/Estéril;
0211341-425 - Pino Ósseo Ø3,0X100/25 FT, N/Estéril;
0211341-430 - Pino Ósseo Ø3,0X100/30 FT, N/Estéril;
0211341-435 - Pino Ósseo Ø3,0X100/35 FT, N/Estéril;
0211341-440 - Pino Ósseo Ø3,0X100/40 FT, N/Estéril;
0211341-535 - Pino Ósseo Ø3,0X120/35 FT, N/Estéril;
0211341-540 - Pino Ósseo Ø3,0X120/40 FT, N/Estéril;
0211341-545 - Pino Ósseo Ø3,0X120/45 FT, N/Estéril;
0211341-640 - Pino Ósseo Ø3,0X150/40 FT, N/Estéril;
0211341-645 - Pino Ósseo Ø3,0X150/45 FT, N/Estéril;
0211341-650 - Pino Ósseo Ø3,0X150/50 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211350-425 - Pino Ósseo Ø3,0X100/25 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211350-430 - Pino Ósseo Ø3,0X100/30 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211350-435 - Pino Ósseo Ø3,0X100/35 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211350-440 - Pino Ósseo Ø3,0X100/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211350-535 - Pino Ósseo Ø3,0X120/35 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211350-540 - Pino Ósseo Ø3,0X120/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211350-545 - Pino Ósseo Ø3,0X120/45 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211350-640 - Pino Ósseo Ø3,0X150/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211350-645 - Pino Ósseo Ø3,0X150/45 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211350-650 - Pino Ósseo Ø3,0X150/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211351-425 - Pino Ósseo Ø3,0X100/25 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211351-430 - Pino Ósseo Ø3,0X100/30 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211351-435 - Pino Ósseo Ø3,0X100/35 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211351-440 - Pino Ósseo Ø3,0X100/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211351-535 - Pino Ósseo Ø3,0X120/35 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211351-540 - Pino Ósseo Ø3,0X120/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211351-545 - Pino Ósseo Ø3,0X120/45 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211351-640 - Pino Ósseo Ø3,0X150/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211351-645 - Pino Ósseo Ø3,0X150/45 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211351-650 - Pino Ósseo Ø3,0X150/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211400-020 - Pino Ósseo Ø4,0X50, Rosca Ø3,0-2,5x20 T, N/Estéril;
0211400-120 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x20 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211400-125 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x25 T, N/Estéril;
0211400-320 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x20 T, N/Estéril;
0211400-325 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x25 T, N/Estéril;
0211400-330 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x30 T, N/Estéril;
0211400-425 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x25 T, N/Estéril;
0211400-430 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x30 T, N/Estéril;
0211400-435 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x35 T, N/Estéril;
0211400-530 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x30 T, N/Estéril;
0211400-535 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x35 T, N/Estéril;
0211400-540 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x40 T, N/Estéril;
0211400-635 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x35 T, N/Estéril;
0211400-640 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x40 T, N/Estéril;
0211400-645 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x45 T, N/Estéril;
0211400-740 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x40 T, N/Estéril;
0211400-745 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x45 T, N/Estéril;
0211400-750 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x50 T, N/Estéril;
0211401-020 - Pino Ósseo Ø4,0X50, Rosca Ø3,0-2,5x20 F, N/Estéril;
0211401-120 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x20 F, N/Estéril;
0211401-125 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x25 F, N/Estéril;
0211401-320 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x20 F, N/Estéril;
0211401-325 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x25 F, N/Estéril;
0211401-330 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x30 F, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211401-425 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x25 F, N/Estéril;
0211401-430 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x30 F, N/Estéril;
0211401-435 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x35 F, N/Estéril;
0211401-530 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x30 F, N/Estéril;
0211401-535 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x35 F, N/Estéril;
0211401-540 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x40 F, N/Estéril;
0211401-635 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x35 F, N/Estéril;
0211401-640 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x40 F, N/Estéril;
0211401-645 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x45 F, N/Estéril;
0211401-740 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x40 F, N/Estéril;
0211401-745 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x45 F, N/Estéril;
0211401-750 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x50 F, N/Estéril;
0211402-020 - Pino Ósseo Ø4,0X50, Rosca Ø3,0-2,5x20 TT, N/Estéril;
0211402-120 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x20 TT, N/Estéril;
0211402-125 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x25 TT, N/Estéril;
0211402-320 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x20 TT, N/Estéril;
0211402-325 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x25 TT, N/Estéril;
0211402-330 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x30 TT, N/Estéril;
0211402-425 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x25 TT, N/Estéril;
0211402-430 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x30 TT, N/Estéril;
0211402-435 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x35 TT, N/Estéril;
0211402-530 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x30 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211402-535 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x35 TT, N/Estéril;
0211402-540 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x40 TT, N/Estéril;
0211402-635 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x35 TT, N/Estéril;
0211402-640 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x40 TT, N/Estéril;
0211402-645 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x45 TT, N/Estéril;
0211402-740 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x40 TT, N/Estéril;
0211402-745 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x45 TT, N/Estéril;
0211402-750 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x50 TT, N/Estéril;
0211403-020 - Pino Ósseo Ø4,0X50, Rosca Ø3,0-2,5x20 FT, N/Estéril;
0211403-120 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x20 FT, N/Estéril;
0211403-125 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø3,0-2,5x25 FT, N/Estéril;
0211403-320 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x20 FT, N/Estéril;
0211403-325 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x25 FT, N/Estéril;
0211403-330 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,0-2,5x30 FT, N/Estéril;
0211403-425 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x25 FT, N/Estéril;
0211403-430 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x30 FT, N/Estéril;
0211403-435 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,0-2,5x35 FT, N/Estéril;
0211403-530 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x30 FT, N/Estéril;
0211403-535 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x35 FT, N/Estéril;
0211403-540 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x40 FT, N/Estéril;
0211403-635 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x35 FT, N/Estéril;
0211403-640 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x40 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211403-645 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x45 FT, N/Estéril;
0211403-740 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x40 FT, N/Estéril;
0211403-745 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x45 FT, N/Estéril;
0211403-750 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x50 FT, N/Estéril;
0211410-530 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x30 T, Calibrado, N/Est.;
0211410-535 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x35 T, Calibrado, N/Est.;
0211410-540 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x40 T, Calibrado, N/Est.;
0211410-635 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x35 T, Calibrado, N/Est.;
0211410-640 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x40 T, Calibrado, N/Est.;
0211410-645 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x45 T, Calibrado, N/Est.;
0211410-740 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x40 T, Calibrado, N/Est.;
0211410-745 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x45 T, Calibrado, N/Est.;
0211410-750 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x50 T, Calibrado, N/Est.;
0211411-530 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x30 F, Calibrado, N/Est.;
0211411-535 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x35 F, Calibrado, N/Est.;
0211411-540 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x40 F, Calibrado, N/Est.;
0211411-635 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x35 F, Calibrado, N/Est.;
0211411-640 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x40 F, Calibrado, N/Est.;
0211411-645 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x45 F, Calibrado, N/Est.;
0211411-740 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x40 F, Calibrado, N/Est.;
0211411-745 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x45 F, Calibrado, N/Est.;
0211411-750 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x50 F, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211412-530 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211412-535 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211412-540 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211412-635 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211412-640 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211412-645 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x45 TT, Calibrado, N/Est.;
0211412-740 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211412-745 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x45 TT, Calibrado, N/Est.;
0211412-750 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211413-530 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211413-535 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211413-540 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,0-2,5x40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211413-635 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211413-640 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211413-645 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,0-2,5x45 FT, Calibrado, N/Est.;
0211413-740 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211413-745 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x45 FT, Calibrado, N/Est.;
0211413-750 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,0-2,5x50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211420-020 - Pino Ósseo Ø4,0X50, Rosca Ø3,5-3,0x20 T, N/Estéril;
0211420-120 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø3,5-3,0x20 T, N/Estéril;
0211420-125 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø3,5-3,0x25 T, N/Estéril;
0211420-220 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,5-3,0x20 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211420-225 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,5-3,0x25 T, N/Estéril;
0211420-230 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,5-3,0x30 T, N/Estéril;
0211420-320 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,5-3,0x20 T, N/Estéril;
0211420-325 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,5-3,0x25 T, N/Estéril;
0211420-330 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,5-3,0x30 T, N/Estéril;
0211420-335 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,5-3,0x35 T, N/Estéril;
0211420-430 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,5-3,0x30 T, N/Estéril;
0211420-435 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,5-3,0x35 T, N/Estéril;
0211420-440 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,5-3,0x40 T, N/Estéril;
0211420-530 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,5-3,0x30 T, N/Estéril;
0211420-535 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,5-3,0x35 T, N/Estéril;
0211420-540 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,5-3,0x40 T, N/Estéril;
0211420-545 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,5-3,0x45 T, N/Estéril;
0211420-550 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,5-3,0x50 T, N/Estéril;
0211420-620 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x20 T, N/Estéril;
0211420-625 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x25 T, N/Estéril;
0211420-630 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x30 T, N/Estéril;
0211420-635 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x35 T, N/Estéril;
0211420-640 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x40 T, N/Estéril;
0211420-645 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x45 T, N/Estéril;
0211420-650 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x50 T, N/Estéril;
0211420-740 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x40 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211420-745 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x45 T, N/Estéril;
0211420-750 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x50 T, N/Estéril;
0211421-020 - Pino Ósseo Ø4,0X50, Rosca Ø3,5-3,0x20 F, N/Estéril;
0211421-120 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø3,5-3,0x20 F, N/Estéril;
0211421-125 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø3,5-3,0x25 F, N/Estéril;
0211421-220 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,5-3,0x20 F, N/Estéril;
0211421-225 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,5-3,0x25 F, N/Estéril;
0211421-230 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,5-3,0x30 F, N/Estéril;
0211421-320 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,5-3,0x20 F, N/Estéril;
0211421-325 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,5-3,0x25 F, N/Estéril;
0211421-330 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,5-3,0x30 F, N/Estéril;
0211421-335 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,5-3,0x35 F, N/Estéril;
0211421-430 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,5-3,0x30 F, N/Estéril;
0211421-435 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,5-3,0x35 F, N/Estéril;
0211421-440 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,5-3,0x40 F, N/Estéril;
0211421-530 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,5-3,0x30 F, N/Estéril;
0211421-535 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,5-3,0x35 F, N/Estéril;
0211421-540 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,5-3,0x40 F, N/Estéril;
0211421-545 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,5-3,0x45 F, N/Estéril;
0211421-550 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,5-3,0x50 F, N/Estéril;
0211421-620 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x20 F, N/Estéril;
0211421-625 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x25 F, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211421-630 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x30 F, N/Estéril;
0211421-635 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x35 F, N/Estéril;
0211421-640 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x40 F, N/Estéril;
0211421-645 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x45 F, N/Estéril;
0211421-650 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x50 F, N/Estéril;
0211421-740 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x40 F, N/Estéril;
0211421-745 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x45 F, N/Estéril;
0211421-750 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x50 F, N/Estéril;
0211422-020 - Pino Ósseo Ø4,0X50, Rosca Ø3,5-3,0x20 TT, N/Estéril;
0211422-120 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø3,5-3,0x20 TT, N/Estéril;
0211422-125 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø3,5-3,0x25 TT, N/Estéril;
0211422-220 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,5-3,0x20 TT, N/Estéril;
0211422-225 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,5-3,0x25 TT, N/Estéril;
0211422-230 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,5-3,0x30 TT, N/Estéril;
0211422-320 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,5-3,0x20 TT, N/Estéril;
0211422-325 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,5-3,0x25 TT, N/Estéril;
0211422-330 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,5-3,0x30 TT, N/Estéril;
0211422-335 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,5-3,0x35 TT, N/Estéril;
0211422-430 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,5-3,0x30 TT, N/Estéril;
0211422-435 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,5-3,0x35 TT, N/Estéril;
0211422-440 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,5-3,0x40 TT, N/Estéril;
0211422-530 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,5-3,0x30 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211422-535 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,5-3,0x35 TT, N/Estéril;
0211422-540 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,5-3,0x40 TT, N/Estéril;
0211422-545 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,5-3,0x45 TT, N/Estéril;
0211422-550 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,5-3,0x50 TT, N/Estéril;
0211422-620 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x20 TT, N/Estéril;
0211422-625 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x25 TT, N/Estéril;
0211422-630 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x30 TT, N/Estéril;
0211422-635 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x35 TT, N/Estéril;
0211422-640 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x40 TT, N/Estéril;
0211422-645 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x45 TT, N/Estéril;
0211422-650 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x50 TT, N/Estéril;
0211422-740 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x40 TT, N/Estéril;
0211422-745 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x45 TT, N/Estéril;
0211422-750 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x50 TT, N/Estéril;
0211423-020 - Pino Ósseo Ø4,0X50, Rosca Ø3,5-3,0x20 FT, N/Estéril;
0211423-120 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø3,5-3,0x20 FT, N/Estéril;
0211423-125 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø3,5-3,0x25 FT, N/Estéril;
0211423-220 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,5-3,0x20 FT, N/Estéril;
0211423-225 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,5-3,0x25 FT, N/Estéril;
0211423-230 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø3,5-3,0x30 FT, N/Estéril;
0211423-320 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,5-3,0x20 FT, N/Estéril;
0211423-325 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,5-3,0x25 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211423-330 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,5-3,0x30 FT, N/Estéril;
0211423-335 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø3,5-3,0x35 FT, N/Estéril;
0211423-430 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,5-3,0x30 FT, N/Estéril;
0211423-435 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,5-3,0x35 FT, N/Estéril;
0211423-440 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø3,5-3,0x40 FT, N/Estéril;
0211423-530 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,5-3,0x30 FT, N/Estéril;
0211423-535 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,5-3,0x35 FT, N/Estéril;
0211423-540 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,5-3,0x40 FT, N/Estéril;
0211423-545 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,5-3,0x45 FT, N/Estéril;
0211423-550 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø3,5-3,0x50 FT, N/Estéril;
0211423-620 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x20 FT, N/Estéril;
0211423-625 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x25 FT, N/Estéril;
0211423-630 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x30 FT, N/Estéril;
0211423-635 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x35 FT, N/Estéril;
0211423-640 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x40 FT, N/Estéril;
0211423-645 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x45 FT, N/Estéril;
0211423-650 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x50 FT, N/Estéril;
0211423-740 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x40 FT, N/Estéril;
0211423-745 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x45 FT, N/Estéril;
0211423-750 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x50 FT, N/Estéril;
0211430-620 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x20 T, Calibrado, N/Est.;
0211430-625 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x25 T, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211430-630 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x30 T, Calibrado, N/Est.;
0211430-635 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x35 T, Calibrado, N/Est.;
0211430-640 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x40 T, Calibrado, N/Est.;
0211430-645 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x45 T, Calibrado, N/Est.;
0211430-650 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x50 T, Calibrado, N/Est.;
0211430-740 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x40 T, Calibrado, N/Est.;
0211430-745 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x45 T, Calibrado, N/Est.;
0211430-750 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x50 T, Calibrado, N/Est.;
0211431-620 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x20 F, Calibrado, N/Est.;
0211431-625 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x25 F, Calibrado, N/Est.;
0211431-630 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x30 F, Calibrado, N/Est.;
0211431-635 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x35 F, Calibrado, N/Est.;
0211431-640 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x40 F, Calibrado, N/Est.;
0211431-645 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x45 F, Calibrado, N/Est.;
0211431-650 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x50 F, Calibrado, N/Est.;
0211431-740 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x40 F, Calibrado, N/Est.;
0211431-745 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x45 F, Calibrado, N/Est.;
0211431-750 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x50 F, Calibrado, N/Est.;
0211432-620 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x20 TT, Calibrado, N/Est.;
0211432-625 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x25 TT, Calibrado, N/Est.;
0211432-630 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211432-635 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x35 TT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211432-640 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211432-645 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x45 TT, Calibrado, N/Est.;
0211432-650 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211432-740 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211432-745 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x45 TT, Calibrado, N/Est.;
0211432-750 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211433-620 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x20 FT, Calibrado, N/Est.;
0211433-625 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x25 FT, Calibrado, N/Est.;
0211433-630 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211433-635 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211433-640 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211433-645 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x45 FT, Calibrado, N/Est.;
0211433-650 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø3,5-3,0x50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211433-740 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211433-745 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x45 FT, Calibrado, N/Est.;
0211433-750 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø3,5-3,0x50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211440-020 - Pino Ósseo Ø4,0X50, Rosca Ø4,0-3,3x20 T, N/Estéril;
0211440-120 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø4,0-3,3x20 T, N/Estéril;
0211440-125 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø4,0-3,3x25 T, N/Estéril;
0211440-220 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø4,0-3,3x20 T, N/Estéril;
0211440-225 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø4,0-3,3x25 T, N/Estéril;
0211440-230 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø4,0-3,3x30 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211440-320 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø4,0-3,3x20 T, N/Estéril;
0211440-325 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø4,0-3,3x25 T, N/Estéril;
0211440-330 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø4,0-3,3x30 T, N/Estéril;
0211440-335 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø4,0-3,3x35 T, N/Estéril;
0211440-430 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø4,0-3,3x30 T, N/Estéril;
0211440-435 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø4,0-3,3x35 T, N/Estéril;
0211440-440 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø4,0-3,3x40 T, N/Estéril;
0211440-530 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø4,0-3,3x30 T, N/Estéril;
0211440-535 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø4,0-3,3x35 T, N/Estéril;
0211440-540 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø4,0-3,3x40 T, N/Estéril;
0211440-545 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø4,0-3,3x45 T, N/Estéril;
0211440-550 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø4,0-3,3x50 T, N/Estéril;
0211440-620 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x20 T, N/Estéril;
0211440-625 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x25 T, N/Estéril;
0211440-630 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x30 T, N/Estéril;
0211440-635 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x35 T, N/Estéril;
0211440-640 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x40 T, N/Estéril;
0211440-645 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x45 T, N/Estéril;
0211440-650 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x50 T, N/Estéril;
0211440-740 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x40 T, N/Estéril;
0211440-745 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x45 T, N/Estéril;
0211440-750 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x50 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211441-020 - Pino Ósseo Ø4,0X50, Rosca Ø4,0-3,3x20 F, N/Estéril;
0211441-120 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø4,0-3,3x20 F, N/Estéril;
0211441-125 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø4,0-3,3x25 F, N/Estéril;
0211441-220 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø4,0-3,3x20 F, N/Estéril;
0211441-225 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø4,0-3,3x25 F, N/Estéril;
0211441-230 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø4,0-3,3x30 F, N/Estéril;
0211441-320 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø4,0-3,3x20 F, N/Estéril;
0211441-325 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø4,0-3,3x25 F, N/Estéril;
0211441-330 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø4,0-3,3x30 F, N/Estéril;
0211441-335 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø4,0-3,3x35 F, N/Estéril;
0211441-430 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø4,0-3,3x30 F, N/Estéril;
0211441-435 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø4,0-3,3x35 F, N/Estéril;
0211441-440 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø4,0-3,3x40 F, N/Estéril;
0211441-530 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø4,0-3,3x30 F, N/Estéril;
0211441-535 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø4,0-3,3x35 F, N/Estéril;
0211441-540 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø4,0-3,3x40 F, N/Estéril;
0211441-545 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø4,0-3,3x45 F, N/Estéril;
0211441-550 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø4,0-3,3x50 F, N/Estéril;
0211441-620 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x20 F, N/Estéril;
0211441-625 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x25 F, N/Estéril;
0211441-630 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x30 F, N/Estéril;
0211441-635 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x35 F, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211441-640 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x40 F, N/Estéril;
0211441-645 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x45 F, N/Estéril;
0211441-650 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x50 F, N/Estéril;
0211441-740 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x40 F, N/Estéril;
0211441-745 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x45 F, N/Estéril;
0211441-750 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x50 F, N/Estéril;
0211442-020 - Pino Ósseo Ø4,0X50, Rosca Ø4,0-3,3x20 TT, N/Estéril;
0211442-120 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø4,0-3,3x20 TT, N/Estéril;
0211442-125 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø4,0-3,3x25 TT, N/Estéril;
0211442-220 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø4,0-3,3x20 TT, N/Estéril;
0211442-225 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø4,0-3,3x25 TT, N/Estéril;
0211442-230 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø4,0-3,3x30 TT, N/Estéril;
0211442-320 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø4,0-3,3x20 TT, N/Estéril;
0211442-325 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø4,0-3,3x25 TT, N/Estéril;
0211442-330 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø4,0-3,3x30 TT, N/Estéril;
0211442-335 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø4,0-3,3x35 TT, N/Estéril;
0211442-430 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø4,0-3,3x30 TT, N/Estéril;
0211442-435 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø4,0-3,3x35 TT, N/Estéril;
0211442-440 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø4,0-3,3x40 TT, N/Estéril;
0211442-530 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø4,0-3,3x30 TT, N/Estéril;
0211442-535 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø4,0-3,3x35 TT, N/Estéril;
0211442-540 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø4,0-3,3x40 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211442-545 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø4,0-3,3x45 TT, N/Estéril;
0211442-550 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø4,0-3,3x50 TT, N/Estéril;
0211442-620 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x20 TT, N/Estéril;
0211442-625 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x25 TT, N/Estéril;
0211442-630 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x30 TT, N/Estéril;
0211442-635 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x35 TT, N/Estéril;
0211442-640 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x40 TT, N/Estéril;
0211442-645 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x45 TT, N/Estéril;
0211442-650 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x50 TT, N/Estéril;
0211442-740 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x40 TT, N/Estéril;
0211442-745 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x45 TT, N/Estéril;
0211442-750 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x50 TT, N/Estéril;
0211443-020 - Pino Ósseo Ø4,0X50, Rosca Ø4,0-3,3x20 FT, N/Estéril;
0211443-120 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø4,0-3,3x20 FT, N/Estéril;
0211443-125 - Pino Ósseo Ø4,0X60, Rosca Ø4,0-3,3x25 FT, N/Estéril;
0211443-220 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø4,0-3,3x20 FT, N/Estéril;
0211443-225 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø4,0-3,3x25 FT, N/Estéril;
0211443-230 - Pino Ósseo Ø4,0X70, Rosca Ø4,0-3,3x30 FT, N/Estéril;
0211443-320 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø4,0-3,3x20 FT, N/Estéril;
0211443-325 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø4,0-3,3x25 FT, N/Estéril;
0211443-330 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø4,0-3,3x30 FT, N/Estéril;
0211443-335 - Pino Ósseo Ø4,0X80, Rosca Ø4,0-3,3x35 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211443-430 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø4,0-3,3x30 FT, N/Estéril;
0211443-435 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø4,0-3,3x35 FT, N/Estéril;
0211443-440 - Pino Ósseo Ø4,0X100, Rosca Ø4,0-3,3x40 FT, N/Estéril;
0211443-530 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø4,0-3,3x30 FT, N/Estéril;
0211443-535 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø4,0-3,3x35 FT, N/Estéril;
0211443-540 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø4,0-3,3x40 FT, N/Estéril;
0211443-545 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø4,0-3,3x45 FT, N/Estéril;
0211443-550 - Pino Ósseo Ø4,0X120, Rosca Ø4,0-3,3x50 FT, N/Estéril;
0211443-620 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x20 FT, N/Estéril;
0211443-625 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x25 FT, N/Estéril;
0211443-630 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x30 FT, N/Estéril;
0211443-635 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x35 FT, N/Estéril;
0211443-640 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x40 FT, N/Estéril;
0211443-645 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x45 FT, N/Estéril;
0211443-650 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x50 FT, N/Estéril;
0211443-740 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x40 FT, N/Estéril;
0211443-745 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x45 FT, N/Estéril;
0211443-750 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x50 FT, N/Estéril;
0211450-620 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x20 T, Calibrado, N/Est.;
0211450-625 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x25 T, Calibrado, N/Est.;
0211450-630 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x30 T, Calibrado, N/Est.;
0211450-635 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x35 T, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211450-640 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x40 T, Calibrado, N/Est.;
0211450-645 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x45 T, Calibrado, N/Est.;
0211450-650 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x50 T, Calibrado, N/Est.;
0211450-740 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x40 T, Calibrado, N/Est.;
0211450-745 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x45 T, Calibrado, N/Est.;
0211450-750 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x50 T, Calibrado, N/Est.;
0211451-620 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x20 F, Calibrado, N/Est.;
0211451-625 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x25 F, Calibrado, N/Est.;
0211451-630 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x30 F, Calibrado, N/Est.;
0211451-635 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x35 F, Calibrado, N/Est.;
0211451-640 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x40 F, Calibrado, N/Est.;
0211451-645 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x45 F, Calibrado, N/Est.;
0211451-650 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x50 F, Calibrado, N/Est.;
0211451-740 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x40 F, Calibrado, N/Est.;
0211451-745 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x45 F, Calibrado, N/Est.;
0211451-750 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x50 F, Calibrado, N/Est.;
0211452-620 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x20 TT, Calibrado, N/Est.;
0211452-625 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x25 TT, Calibrado, N/Est.;
0211452-630 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211452-635 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211452-640 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211452-645 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x45 TT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211452-650 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211452-740 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211452-745 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x45 TT, Calibrado, N/Est.;
0211452-750 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211453-620 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x20 FT, Calibrado, N/Est.;
0211453-625 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x25 FT, Calibrado, N/Est.;
0211453-630 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211453-635 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211453-640 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211453-645 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x45 FT, Calibrado, N/Est.;
0211453-650 - Pino Ósseo Ø4,0X150, Rosca Ø4,0-3,3x50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211453-740 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211453-745 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x45 FT, Calibrado, N/Est.;
0211453-750 - Pino Ósseo Ø4,0X180, Rosca Ø4,0-3,3x50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211460-020 - Pino Ósseo Ø4,0X50/20 TT, N/Estéril;
0211460-120 - Pino Ósseo Ø4,0X60/20 TT, N/Estéril;
0211460-125 - Pino Ósseo Ø4,0X60/25 TT, N/Estéril;
0211460-220 - Pino Ósseo Ø4,0X70/20 TT, N/Estéril;
0211460-225 - Pino Ósseo Ø4,0X70/25 TT, N/Estéril;
0211460-230 - Pino Ósseo Ø4,0X70/30 TT, N/Estéril;
0211460-320 - Pino Ósseo Ø4,0X80/20 TT, N/Estéril;
0211460-325 - Pino Ósseo Ø4,0X80/25 TT, N/Estéril;
0211460-330 - Pino Ósseo Ø4,0X80/30 TT, N/Estéril;
0211460-335 - Pino Ósseo Ø4,0X80/35 TT, N/Estéril;
0211460-430 - Pino Ósseo Ø4,0X100/30 TT, N/Estéril;
0211460-435 - Pino Ósseo Ø4,0X100/35 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211460-440 - Pino Ósseo Ø4,0X100/40 TT, N/Estéril;
0211460-530 - Pino Ósseo Ø4,0X120/30 TT, N/Estéril;
0211460-535 - Pino Ósseo Ø4,0X120/35 TT, N/Estéril;
0211460-540 - Pino Ósseo Ø4,0X120/40 TT, N/Estéril;
0211460-545 - Pino Ósseo Ø4,0X120/45 TT, N/Estéril;
0211460-550 - Pino Ósseo Ø4,0X120/50 TT, N/Estéril;
0211460-620 - Pino Ósseo Ø4,0X150/20 TT, N/Estéril;
0211460-625 - Pino Ósseo Ø4,0X150/25 TT, N/Estéril;
0211460-630 - Pino Ósseo Ø4,0X150/30 TT, N/Estéril;
0211460-635 - Pino Ósseo Ø4,0X150/35 TT, N/Estéril;
0211460-640 - Pino Ósseo Ø4,0X150/40 TT, N/Estéril;
0211460-645 - Pino Ósseo Ø4,0X150/45 TT, N/Estéril;
0211460-650 - Pino Ósseo Ø4,0X150/50 TT, N/Estéril;
0211460-740 - Pino Ósseo Ø4,0X180/40 TT, N/Estéril;
0211460-745 - Pino Ósseo Ø4,0X180/45 TT, N/Estéril;
0211460-750 - Pino Ósseo Ø4,0X180/50 TT, N/Estéril;
0211460-840 - Pino Ósseo Ø4,0X200/40 TT, N/Estéril;
0211460-845 - Pino Ósseo Ø4,0X200/45 TT, N/Estéril;
0211460-850 - Pino Ósseo Ø4,0X200/50 TT, N/Estéril;
0211461-020 - Pino Ósseo Ø4,0X50/20 FT, N/Estéril;
0211461-120 - Pino Ósseo Ø4,0X60/20 FT, N/Estéril;
0211461-125 - Pino Ósseo Ø4,0X60/25 FT, N/Estéril;
0211461-220 - Pino Ósseo Ø4,0X70/20 FT, N/Estéril;
0211461-225 - Pino Ósseo Ø4,0X70/25 FT, N/Estéril;
0211461-230 - Pino Ósseo Ø4,0X70/30 FT, N/Estéril;
0211461-320 - Pino Ósseo Ø4,0X80/20 FT, N/Estéril;
0211461-325 - Pino Ósseo Ø4,0X80/25 FT, N/Estéril;
0211461-330 - Pino Ósseo Ø4,0X80/30 FT, N/Estéril;
0211461-335 - Pino Ósseo Ø4,0X80/35 FT, N/Estéril;
0211461-430 - Pino Ósseo Ø4,0X100/30 FT, N/Estéril;
0211461-435 - Pino Ósseo Ø4,0X100/35 FT, N/Estéril;
0211461-440 - Pino Ósseo Ø4,0X100/40 FT, N/Estéril;
0211461-530 - Pino Ósseo Ø4,0X120/30 FT, N/Estéril;
0211461-535 - Pino Ósseo Ø4,0X120/35 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211461-540 - Pino Ósseo Ø4,0X120/40 FT, N/Estéril;
0211461-545 - Pino Ósseo Ø4,0X120/45 FT, N/Estéril;
0211461-550 - Pino Ósseo Ø4,0X120/50 FT, N/Estéril;
0211461-620 - Pino Ósseo Ø4,0X150/20 FT, N/Estéril;
0211461-625 - Pino Ósseo Ø4,0X150/25 FT, N/Estéril;
0211461-630 - Pino Ósseo Ø4,0X150/30 FT, N/Estéril;
0211461-635 - Pino Ósseo Ø4,0X150/35 FT, N/Estéril;
0211461-640 - Pino Ósseo Ø4,0X150/40 FT, N/Estéril;
0211461-645 - Pino Ósseo Ø4,0X150/45 FT, N/Estéril;
0211461-650 - Pino Ósseo Ø4,0X150/50 FT, N/Estéril;
0211461-740 - Pino Ósseo Ø4,0X180/40 FT, N/Estéril;
0211461-745 - Pino Ósseo Ø4,0X180/45 FT, N/Estéril;
0211461-750 - Pino Ósseo Ø4,0X180/50 FT, N/Estéril;
0211461-840 - Pino Ósseo Ø4,0X200/40 FT, N/Estéril;
0211461-845 - Pino Ósseo Ø4,0X200/45 FT, N/Estéril;
0211461-850 - Pino Ósseo Ø4,0X200/50 FT, N/Estéril;
0211465-620 - Pino Ósseo Ø4,0X150/20 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211465-625 - Pino Ósseo Ø4,0X150/25 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211465-630 - Pino Ósseo Ø4,0X150/30 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211465-635 - Pino Ósseo Ø4,0X150/35 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211465-640 - Pino Ósseo Ø4,0X150/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211465-645 - Pino Ósseo Ø4,0X150/45 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211465-650 - Pino Ósseo Ø4,0X150/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211465-740 - Pino Ósseo Ø4,0X180/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211465-745 - Pino Ósseo Ø4,0X180/45 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211465-750 - Pino Ósseo Ø4,0X180/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211465-840 - Pino Ósseo Ø4,0X200/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211465-845 - Pino Ósseo Ø4,0X200/45 TT, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211465-850 - Pino Ósseo Ø4,0X200/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211466-620 - Pino Ósseo Ø4,0X150/20 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211466-625 - Pino Ósseo Ø4,0X150/25 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211466-630 - Pino Ósseo Ø4,0X150/30 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211466-635 - Pino Ósseo Ø4,0X150/35 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211466-640 - Pino Ósseo Ø4,0X150/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211466-645 - Pino Ósseo Ø4,0X150/45 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211466-650 - Pino Ósseo Ø4,0X150/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211466-740 - Pino Ósseo Ø4,0X180/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211466-745 - Pino Ósseo Ø4,0X180/45 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211466-750 - Pino Ósseo Ø4,0X180/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211466-840 - Pino Ósseo Ø4,0X200/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211466-845 - Pino Ósseo Ø4,0X200/45 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211466-850 - Pino Ósseo Ø4,0X200/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211470-000 - Pino Ósseo Ø4,5X90/30 TT, N/Estéril;
0211470-003 - Pino Ósseo Ø4,5X100/30 TT, N/Estéril;
0211470-004 - Pino Ósseo Ø4,5X100/40 TT, N/Estéril;
0211470-030 - Pino Ósseo Ø4,5X110/30 TT, N/Estéril;
0211470-040 - Pino Ósseo Ø4,5X110/40 TT, N/Estéril;
0211470-130 - Pino Ósseo Ø4,5X120/30 TT, N/Estéril;
0211470-140 - Pino Ósseo Ø4,5X120/40 TT, N/Estéril;
0211470-150 - Pino Ósseo Ø4,5X120/50 TT, N/Estéril;
0211470-230 - Pino Ósseo Ø4,5X130/30 TT, N/Estéril;
0211470-240 - Pino Ósseo Ø4,5X130/40 TT, N/Estéril;
0211470-250 - Pino Ósseo Ø4,5X130/50 TT, N/Estéril;
0211470-330 - Pino Ósseo Ø4,5X150/30 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211470-340 - Pino Ósseo Ø4,5X150/40 TT, N/Estéril;
0211470-350 - Pino Ósseo Ø4,5X150/50 TT, N/Estéril;
0211470-360 - Pino Ósseo Ø4,5X150/60 TT, N/Estéril;
0211470-440 - Pino Ósseo Ø4,5X160/40 TT, N/Estéril;
0211470-450 - Pino Ósseo Ø4,5X160/50 TT, N/Estéril;
0211470-460 - Pino Ósseo Ø4,5X160/60 TT, N/Estéril;
0211470-540 - Pino Ósseo Ø4,5X170/40 TT, N/Estéril;
0211470-550 - Pino Ósseo Ø4,5X170/50 TT, N/Estéril;
0211470-560 - Pino Ósseo Ø4,5X170/60 TT, N/Estéril;
0211470-570 - Pino Ósseo Ø4,5X170/70 TT, N/Estéril;
0211470-640 - Pino Ósseo Ø4,5X180/40 TT, N/Estéril;
0211470-650 - Pino Ósseo Ø4,5X180/50 TT, N/Estéril;
0211470-660 - Pino Ósseo Ø4,5X180/60 TT, N/Estéril;
0211470-670 - Pino Ósseo Ø4,5X180/70 TT, N/Estéril;
0211470-680 - Pino Ósseo Ø4,5X180/80 TT, N/Estéril;
0211470-750 - Pino Ósseo Ø4,5X200/50 TT, N/Estéril;
0211470-760 - Pino Ósseo Ø4,5X200/60 TT, N/Estéril;
0211470-770 - Pino Ósseo Ø4,5X200/70 TT, N/Estéril;
0211470-780 - Pino Ósseo Ø4,5X200/80 TT, N/Estéril;
0211470-850 - Pino Ósseo Ø4,5X220/50 TT, N/Estéril;
0211470-860 - Pino Ósseo Ø4,5X220/60 TT, N/Estéril;
0211470-870 - Pino Ósseo Ø4,5X220/70 TT, N/Estéril;
0211470-880 - Pino Ósseo Ø4,5X220/80 TT, N/Estéril;
0211470-950 - Pino Ósseo Ø4,5X250/50 TT, N/Estéril;
0211470-960 - Pino Ósseo Ø4,5X250/60 TT, N/Estéril;
0211470-970 - Pino Ósseo Ø4,5X250/70 TT, N/Estéril;
0211470-980 - Pino Ósseo Ø4,5X250/80 TT, N/Estéril;
0211471-000 - Pino Ósseo Ø4,5X90/30 FT, N/Estéril;
0211471-003 - Pino Ósseo Ø4,5X100/30 FT, N/Estéril;
0211471-004 - Pino Ósseo Ø4,5X100/40 FT, N/Estéril;
0211471-030 - Pino Ósseo Ø4,5X110/30 FT, N/Estéril;
0211471-040 - Pino Ósseo Ø4,5X110/40 FT, N/Estéril;
0211471-130 - Pino Ósseo Ø4,5X120/30 FT, N/Estéril;
0211471-140 - Pino Ósseo Ø4,5X120/40 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211471-150 - Pino Ósseo Ø4,5X120/50 FT, N/Estéril;
0211471-230 - Pino Ósseo Ø4,5X130/30 FT, N/Estéril;
0211471-240 - Pino Ósseo Ø4,5X130/40 FT, N/Estéril;
0211471-250 - Pino Ósseo Ø4,5X130/50 FT, N/Estéril;
0211471-330 - Pino Ósseo Ø4,5X150/30 FT, N/Estéril;
0211471-340 - Pino Ósseo Ø4,5X150/40 FT, N/Estéril;
0211471-350 - Pino Ósseo Ø4,5X150/50 FT, N/Estéril;
0211471-360 - Pino Ósseo Ø4,5X150/60 FT, N/Estéril;
0211471-440 - Pino Ósseo Ø4,5X160/40 FT, N/Estéril;
0211471-450 - Pino Ósseo Ø4,5X160/50 FT, N/Estéril;
0211471-460 - Pino Ósseo Ø4,5X160/60 FT, N/Estéril;
0211471-540 - Pino Ósseo Ø4,5X170/40 FT, N/Estéril;
0211471-550 - Pino Ósseo Ø4,5X170/50 FT, N/Estéril;
0211471-560 - Pino Ósseo Ø4,5X170/60 FT, N/Estéril;
0211471-570 - Pino Ósseo Ø4,5X170/70 FT, N/Estéril;
0211471-640 - Pino Ósseo Ø4,5X180/40 FT, N/Estéril;
0211471-650 - Pino Ósseo Ø4,5X180/50 FT, N/Estéril;
0211471-660 - Pino Ósseo Ø4,5X180/60 FT, N/Estéril;
0211471-670 - Pino Ósseo Ø4,5X180/70 FT, N/Estéril;
0211471-680 - Pino Ósseo Ø4,5X180/80 FT, N/Estéril;
0211471-750 - Pino Ósseo Ø4,5X200/50 FT, N/Estéril;
0211471-760 - Pino Ósseo Ø4,5X200/60 FT, N/Estéril;
0211471-770 - Pino Ósseo Ø4,5X200/70 FT, N/Estéril;
0211471-780 - Pino Ósseo Ø4,5X200/80 FT, N/Estéril;
0211471-850 - Pino Ósseo Ø4,5X220/50 FT, N/Estéril;
0211471-860 - Pino Ósseo Ø4,5X220/60 FT, N/Estéril;
0211471-870 - Pino Ósseo Ø4,5X220/70 FT, N/Estéril;
0211471-880 - Pino Ósseo Ø4,5X220/80 FT, N/Estéril;
0211471-950 - Pino Ósseo Ø4,5X250/50 FT, N/Estéril;
0211471-960 - Pino Ósseo Ø4,5X250/60 FT, N/Estéril;
0211471-970 - Pino Ósseo Ø4,5X250/70 FT, N/Estéril;
0211471-980 - Pino Ósseo Ø4,5X250/80 FT, N/Estéril;
0211472-000 - Pino Ósseo Ø4,5X90/30 TB, N/Estéril;
0211472-003 - Pino Ósseo Ø4,5X100/30 TB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211472-004 - Pino Ósseo Ø4,5X100/40 TB, N/Estéril;
0211472-030 - Pino Ósseo Ø4,5X110/30 TB, N/Estéril;
0211472-040 - Pino Ósseo Ø4,5X110/40 TB, N/Estéril;
0211472-130 - Pino Ósseo Ø4,5X120/30 TB, N/Estéril;
0211472-140 - Pino Ósseo Ø4,5X120/40 TB, N/Estéril;
0211472-150 - Pino Ósseo Ø4,5X120/50 TB, N/Estéril;
0211472-230 - Pino Ósseo Ø4,5X130/30 TB, N/Estéril;
0211472-240 - Pino Ósseo Ø4,5X130/40 TB, N/Estéril;
0211472-250 - Pino Ósseo Ø4,5X130/50 TB, N/Estéril;
0211472-330 - Pino Ósseo Ø4,5X150/30 TB, N/Estéril;
0211472-340 - Pino Ósseo Ø4,5X150/40 TB, N/Estéril;
0211472-350 - Pino Ósseo Ø4,5X150/50 TB, N/Estéril;
0211472-360 - Pino Ósseo Ø4,5X150/60 TB, N/Estéril;
0211472-440 - Pino Ósseo Ø4,5X160/40 TB, N/Estéril;
0211472-450 - Pino Ósseo Ø4,5X160/50 TB, N/Estéril;
0211472-460 - Pino Ósseo Ø4,5X160/60 TB, N/Estéril;
0211472-540 - Pino Ósseo Ø4,5X170/40 TB, N/Estéril;
0211472-550 - Pino Ósseo Ø4,5X170/50 TB, N/Estéril;
0211472-560 - Pino Ósseo Ø4,5X170/60 TB, N/Estéril;
0211472-570 - Pino Ósseo Ø4,5X170/70 TB, N/Estéril;
0211472-640 - Pino Ósseo Ø4,5X180/40 TB, N/Estéril;
0211472-650 - Pino Ósseo Ø4,5X180/50 TB, N/Estéril;
0211472-660 - Pino Ósseo Ø4,5X180/60 TB, N/Estéril;
0211472-670 - Pino Ósseo Ø4,5X180/70 TB, N/Estéril;
0211472-680 - Pino Ósseo Ø4,5X180/80 TB, N/Estéril;
0211472-750 - Pino Ósseo Ø4,5X200/50 TB, N/Estéril;
0211472-760 - Pino Ósseo Ø4,5X200/60 TB, N/Estéril;
0211472-770 - Pino Ósseo Ø4,5X200/70 TB, N/Estéril;
0211472-780 - Pino Ósseo Ø4,5X200/80 TB, N/Estéril;
0211472-850 - Pino Ósseo Ø4,5X220/50 TB, N/Estéril;
0211472-860 - Pino Ósseo Ø4,5X220/60 TB, N/Estéril;
0211472-870 - Pino Ósseo Ø4,5X220/70 TB, N/Estéril;
0211472-880 - Pino Ósseo Ø4,5X220/80 TB, N/Estéril;
0211472-950 - Pino Ósseo Ø4,5X250/50 TB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211472-960 - Pino Ósseo Ø4,5X250/60 TB, N/Estéril;
0211472-970 - Pino Ósseo Ø4,5X250/70 TB, N/Estéril;
0211472-980 - Pino Ósseo Ø4,5X250/80 TB, N/Estéril;
0211473-000 - Pino Ósseo Ø4,5X90/30 FB, N/Estéril;
0211473-003 - Pino Ósseo Ø4,5X100/30 FB, N/Estéril;
0211473-004 - Pino Ósseo Ø4,5X100/40 FB, N/Estéril;
0211473-030 - Pino Ósseo Ø4,5X110/30 FB, N/Estéril;
0211473-040 - Pino Ósseo Ø4,5X110/40 FB, N/Estéril;
0211473-130 - Pino Ósseo Ø4,5X120/30 FB, N/Estéril;
0211473-140 - Pino Ósseo Ø4,5X120/40 FB, N/Estéril;
0211473-150 - Pino Ósseo Ø4,5X120/50 FB, N/Estéril;
0211473-230 - Pino Ósseo Ø4,5X130/30 FB, N/Estéril;
0211473-240 - Pino Ósseo Ø4,5X130/40 FB, N/Estéril;
0211473-250 - Pino Ósseo Ø4,5X130/50 FB, N/Estéril;
0211473-330 - Pino Ósseo Ø4,5X150/30 FB, N/Estéril;
0211473-340 - Pino Ósseo Ø4,5X150/40 FB, N/Estéril;
0211473-350 - Pino Ósseo Ø4,5X150/50 FB, N/Estéril;
0211473-360 - Pino Ósseo Ø4,5X150/60 FB, N/Estéril;
0211473-440 - Pino Ósseo Ø4,5X160/40 FB, N/Estéril;
0211473-450 - Pino Ósseo Ø4,5X160/50 FB, N/Estéril;
0211473-460 - Pino Ósseo Ø4,5X160/60 FB, N/Estéril;
0211473-540 - Pino Ósseo Ø4,5X170/40 FB, N/Estéril;
0211473-550 - Pino Ósseo Ø4,5X170/50 FB, N/Estéril;
0211473-560 - Pino Ósseo Ø4,5X170/60 FB, N/Estéril;
0211473-570 - Pino Ósseo Ø4,5X170/70 FB, N/Estéril;
0211473-640 - Pino Ósseo Ø4,5X180/40 FB, N/Estéril;
0211473-650 - Pino Ósseo Ø4,5X180/50 FB, N/Estéril;
0211473-660 - Pino Ósseo Ø4,5X180/60 FB, N/Estéril;
0211473-670 - Pino Ósseo Ø4,5X180/70 FB, N/Estéril;
0211473-680 - Pino Ósseo Ø4,5X180/80 FB, N/Estéril;
0211473-750 - Pino Ósseo Ø4,5X200/50 FB, N/Estéril;
0211473-760 - Pino Ósseo Ø4,5X200/60 FB, N/Estéril;
0211473-770 - Pino Ósseo Ø4,5X200/70 FB, N/Estéril;
0211473-780 - Pino Ósseo Ø4,5X200/80 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211473-850 - Pino Ósseo Ø4,5X220/50 FB, N/Estéril;
0211473-860 - Pino Ósseo Ø4,5X220/60 FB, N/Estéril;
0211473-870 - Pino Ósseo Ø4,5X220/70 FB, N/Estéril;
0211473-880 - Pino Ósseo Ø4,5X220/80 FB, N/Estéril;
0211473-950 - Pino Ósseo Ø4,5X250/50 FB, N/Estéril;
0211473-960 - Pino Ósseo Ø4,5X250/60 FB, N/Estéril;
0211473-970 - Pino Ósseo Ø4,5X250/70 FB, N/Estéril;
0211473-980 - Pino Ósseo Ø4,5X250/80 FB, N/Estéril;
0211475-330 - Pino Ósseo Ø4,5X150/30 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-340 - Pino Ósseo Ø4,5X150/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-350 - Pino Ósseo Ø4,5X150/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-360 - Pino Ósseo Ø4,5X150/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-440 - Pino Ósseo Ø4,5X160/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-450 - Pino Ósseo Ø4,5X160/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-460 - Pino Ósseo Ø4,5X160/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-540 - Pino Ósseo Ø4,5X170/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-550 - Pino Ósseo Ø4,5X170/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-560 - Pino Ósseo Ø4,5X170/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-570 - Pino Ósseo Ø4,5X170/70 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-640 - Pino Ósseo Ø4,5X180/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-650 - Pino Ósseo Ø4,5X180/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-660 - Pino Ósseo Ø4,5X180/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-670 - Pino Ósseo Ø4,5X180/70 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-680 - Pino Ósseo Ø4,5X180/80 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-750 - Pino Ósseo Ø4,5X200/50 TT, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211475-760 - Pino Ósseo Ø4,5X200/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-770 - Pino Ósseo Ø4,5X200/70 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-780 - Pino Ósseo Ø4,5X200/80 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-850 - Pino Ósseo Ø4,5X220/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-860 - Pino Ósseo Ø4,5X220/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-870 - Pino Ósseo Ø4,5X220/70 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-880 - Pino Ósseo Ø4,5X220/80 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-950 - Pino Ósseo Ø4,5X250/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-960 - Pino Ósseo Ø4,5X250/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-970 - Pino Ósseo Ø4,5X250/70 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211475-980 - Pino Ósseo Ø4,5X250/80 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-330 - Pino Ósseo Ø4,5X150/30 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-340 - Pino Ósseo Ø4,5X150/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-350 - Pino Ósseo Ø4,5X150/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-360 - Pino Ósseo Ø4,5X150/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-440 - Pino Ósseo Ø4,5X160/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-450 - Pino Ósseo Ø4,5X160/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-460 - Pino Ósseo Ø4,5X160/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-540 - Pino Ósseo Ø4,5X170/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-550 - Pino Ósseo Ø4,5X170/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-560 - Pino Ósseo Ø4,5X170/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-570 - Pino Ósseo Ø4,5X170/70 FT, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211476-640 - Pino Ósseo Ø4,5X180/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-650 - Pino Ósseo Ø4,5X180/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-660 - Pino Ósseo Ø4,5X180/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-670 - Pino Ósseo Ø4,5X180/70 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-680 - Pino Ósseo Ø4,5X180/80 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-750 - Pino Ósseo Ø4,5X200/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-760 - Pino Ósseo Ø4,5X200/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-770 - Pino Ósseo Ø4,5X200/70 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-780 - Pino Ósseo Ø4,5X200/80 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-850 - Pino Ósseo Ø4,5X220/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-860 - Pino Ósseo Ø4,5X220/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-870 - Pino Ósseo Ø4,5X220/70 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-880 - Pino Ósseo Ø4,5X220/80 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-950 - Pino Ósseo Ø4,5X250/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-960 - Pino Ósseo Ø4,5X250/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-970 - Pino Ósseo Ø4,5X250/70 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211476-980 - Pino Ósseo Ø4,5X250/80 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211477-330 - Pino Ósseo Ø4,5X150/30 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-340 - Pino Ósseo Ø4,5X150/40 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-350 - Pino Ósseo Ø4,5X150/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-360 - Pino Ósseo Ø4,5X150/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-440 - Pino Ósseo Ø4,5X160/40 TB, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211477-450 - Pino Ósseo Ø4,5X160/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-460 - Pino Ósseo Ø4,5X160/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-540 - Pino Ósseo Ø4,5X170/40 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-550 - Pino Ósseo Ø4,5X170/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-560 - Pino Ósseo Ø4,5X170/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-570 - Pino Ósseo Ø4,5X170/70 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-640 - Pino Ósseo Ø4,5X180/40 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-650 - Pino Ósseo Ø4,5X180/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-660 - Pino Ósseo Ø4,5X180/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-670 - Pino Ósseo Ø4,5X180/70 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-680 - Pino Ósseo Ø4,5X180/80 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-750 - Pino Ósseo Ø4,5X200/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-760 - Pino Ósseo Ø4,5X200/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-770 - Pino Ósseo Ø4,5X200/70 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-780 - Pino Ósseo Ø4,5X200/80 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-850 - Pino Ósseo Ø4,5X220/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-860 - Pino Ósseo Ø4,5X220/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-870 - Pino Ósseo Ø4,5X220/70 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-880 - Pino Ósseo Ø4,5X220/80 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-950 - Pino Ósseo Ø4,5X250/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-960 - Pino Ósseo Ø4,5X250/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211477-970 - Pino Ósseo Ø4,5X250/70 TB, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211477-980 - Pino Ósseo Ø4,5X250/80 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-330 - Pino Ósseo Ø4,5X150/30 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-340 - Pino Ósseo Ø4,5X150/40 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-350 - Pino Ósseo Ø4,5X150/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-360 - Pino Ósseo Ø4,5X150/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-440 - Pino Ósseo Ø4,5X160/40 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-450 - Pino Ósseo Ø4,5X160/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-460 - Pino Ósseo Ø4,5X160/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-540 - Pino Ósseo Ø4,5X170/40 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-550 - Pino Ósseo Ø4,5X170/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-560 - Pino Ósseo Ø4,5X170/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-570 - Pino Ósseo Ø4,5X170/70 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-640 - Pino Ósseo Ø4,5X180/40 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-650 - Pino Ósseo Ø4,5X180/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-660 - Pino Ósseo Ø4,5X180/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-670 - Pino Ósseo Ø4,5X180/70 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-680 - Pino Ósseo Ø4,5X180/80 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-750 - Pino Ósseo Ø4,5X200/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-760 - Pino Ósseo Ø4,5X200/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-770 - Pino Ósseo Ø4,5X200/70 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-780 - Pino Ósseo Ø4,5X200/80 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-850 - Pino Ósseo Ø4,5X220/50 FB, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211478-860 - Pino Ósseo Ø4,5X220/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-870 - Pino Ósseo Ø4,5X220/70 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-880 - Pino Ósseo Ø4,5X220/80 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-950 - Pino Ósseo Ø4,5X250/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-960 - Pino Ósseo Ø4,5X250/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-970 - Pino Ósseo Ø4,5X250/70 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211478-980 - Pino Ósseo Ø4,5X250/80 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211480-000 - Pino Ósseo Ø4,8X90/30 TT, N/Estéril;
0211480-003 - Pino Ósseo Ø4,8X100/30 TT, N/Estéril;
0211480-004 - Pino Ósseo Ø4,8X100/40 TT, N/Estéril;
0211480-030 - Pino Ósseo Ø4,8X110/30 TT, N/Estéril;
0211480-040 - Pino Ósseo Ø4,8X110/40 TT, N/Estéril;
0211480-130 - Pino Ósseo Ø4,8X120/30 TT, N/Estéril;
0211480-140 - Pino Ósseo Ø4,8X120/40 TT, N/Estéril;
0211480-150 - Pino Ósseo Ø4,8X120/50 TT, N/Estéril;
0211480-230 - Pino Ósseo Ø4,8X130/30 TT, N/Estéril;
0211480-240 - Pino Ósseo Ø4,8X130/40 TT, N/Estéril;
0211480-250 - Pino Ósseo Ø4,8X130/50 TT, N/Estéril;
0211480-330 - Pino Ósseo Ø4,8X150/30 TT, N/Estéril;
0211480-340 - Pino Ósseo Ø4,8X150/40 TT, N/Estéril;
0211480-350 - Pino Ósseo Ø4,8X150/50 TT, N/Estéril;
0211480-360 - Pino Ósseo Ø4,8X150/60 TT, N/Estéril;
0211480-440 - Pino Ósseo Ø4,8X160/40 TT, N/Estéril;
0211480-450 - Pino Ósseo Ø4,8X160/50 TT, N/Estéril;
0211480-460 - Pino Ósseo Ø4,8X160/60 TT, N/Estéril;
0211480-540 - Pino Ósseo Ø4,8X170/40 TT, N/Estéril;
0211480-550 - Pino Ósseo Ø4,8X170/50 TT, N/Estéril;
0211480-560 - Pino Ósseo Ø4,8X170/60 TT, N/Estéril;
0211480-570 - Pino Ósseo Ø4,8X170/70 TT, N/Estéril;
0211480-640 - Pino Ósseo Ø4,8X180/40 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211480-650 - Pino Ósseo Ø4,8X180/50 TT, N/Estéril;
0211480-660 - Pino Ósseo Ø4,8X180/60 TT, N/Estéril;
0211480-670 - Pino Ósseo Ø4,8X180/70 TT, N/Estéril;
0211480-680 - Pino Ósseo Ø4,8X180/80 TT, N/Estéril;
0211480-750 - Pino Ósseo Ø4,8X200/50 TT, N/Estéril;
0211480-760 - Pino Ósseo Ø4,8X200/60 TT, N/Estéril;
0211480-770 - Pino Ósseo Ø4,8X200/70 TT, N/Estéril;
0211480-780 - Pino Ósseo Ø4,8X200/80 TT, N/Estéril;
0211480-850 - Pino Ósseo Ø4,8X220/50 TT, N/Estéril;
0211480-860 - Pino Ósseo Ø4,8X220/60 TT, N/Estéril;
0211480-870 - Pino Ósseo Ø4,8X220/70 TT, N/Estéril;
0211480-880 - Pino Ósseo Ø4,8X220/80 TT, N/Estéril;
0211480-950 - Pino Ósseo Ø4,8X250/50 TT, N/Estéril;
0211480-960 - Pino Ósseo Ø4,8X250/60 TT, N/Estéril;
0211480-970 - Pino Ósseo Ø4,8X250/70 TT, N/Estéril;
0211480-980 - Pino Ósseo Ø4,8X250/80 TT, N/Estéril;
0211481-000 - Pino Ósseo Ø4,8X90/30 FT, N/Estéril;
0211481-003 - Pino Ósseo Ø4,8X100/30 FT, N/Estéril;
0211481-004 - Pino Ósseo Ø4,8X100/40 FT, N/Estéril;
0211481-030 - Pino Ósseo Ø4,8X110/30 FT, N/Estéril;
0211481-040 - Pino Ósseo Ø4,8X110/40 FT, N/Estéril;
0211481-130 - Pino Ósseo Ø4,8X120/30 FT, N/Estéril;
0211481-140 - Pino Ósseo Ø4,8X120/40 FT, N/Estéril;
0211481-150 - Pino Ósseo Ø4,8X120/50 FT, N/Estéril;
0211481-230 - Pino Ósseo Ø4,8X130/30 FT, N/Estéril;
0211481-240 - Pino Ósseo Ø4,8X130/40 FT, N/Estéril;
0211481-250 - Pino Ósseo Ø4,8X130/50 FT, N/Estéril;
0211481-330 - Pino Ósseo Ø4,8X150/30 FT, N/Estéril;
0211481-340 - Pino Ósseo Ø4,8X150/40 FT, N/Estéril;
0211481-350 - Pino Ósseo Ø4,8X150/50 FT, N/Estéril;
0211481-360 - Pino Ósseo Ø4,8X150/60 FT, N/Estéril;
0211481-440 - Pino Ósseo Ø4,8X160/40 FT, N/Estéril;
0211481-450 - Pino Ósseo Ø4,8X160/50 FT, N/Estéril;
0211481-460 - Pino Ósseo Ø4,8X160/60 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211481-540 - Pino Ósseo Ø4,8X170/40 FT, N/Estéril;
0211481-550 - Pino Ósseo Ø4,8X170/50 FT, N/Estéril;
0211481-560 - Pino Ósseo Ø4,8X170/60 FT, N/Estéril;
0211481-570 - Pino Ósseo Ø4,8X170/70 FT, N/Estéril;
0211481-640 - Pino Ósseo Ø4,8X180/40 FT, N/Estéril;
0211481-650 - Pino Ósseo Ø4,8X180/50 FT, N/Estéril;
0211481-660 - Pino Ósseo Ø4,8X180/60 FT, N/Estéril;
0211481-670 - Pino Ósseo Ø4,8X180/70 FT, N/Estéril;
0211481-680 - Pino Ósseo Ø4,8X180/80 FT, N/Estéril;
0211481-750 - Pino Ósseo Ø4,8X200/50 FT, N/Estéril;
0211481-760 - Pino Ósseo Ø4,8X200/60 FT, N/Estéril;
0211481-770 - Pino Ósseo Ø4,8X200/70 FT, N/Estéril;
0211481-780 - Pino Ósseo Ø4,8X200/80 FT, N/Estéril;
0211481-850 - Pino Ósseo Ø4,8X220/50 FT, N/Estéril;
0211481-860 - Pino Ósseo Ø4,8X220/60 FT, N/Estéril;
0211481-870 - Pino Ósseo Ø4,8X220/70 FT, N/Estéril;
0211481-880 - Pino Ósseo Ø4,8X220/80 FT, N/Estéril;
0211481-950 - Pino Ósseo Ø4,8X250/50 FT, N/Estéril;
0211481-960 - Pino Ósseo Ø4,8X250/60 FT, N/Estéril;
0211481-970 - Pino Ósseo Ø4,8X250/70 FT, N/Estéril;
0211481-980 - Pino Ósseo Ø4,8X250/80 FT, N/Estéril;
0211482-000 - Pino Ósseo Ø4,8X90/30 TB, N/Estéril;
0211482-003 - Pino Ósseo Ø4,8X100/30 TB, N/Estéril;
0211482-004 - Pino Ósseo Ø4,8X100/40 TB, N/Estéril;
0211482-030 - Pino Ósseo Ø4,8X110/30 TB, N/Estéril;
0211482-040 - Pino Ósseo Ø4,8X110/40 TB, N/Estéril;
0211482-130 - Pino Ósseo Ø4,8X120/30 TB, N/Estéril;
0211482-140 - Pino Ósseo Ø4,8X120/40 TB, N/Estéril;
0211482-150 - Pino Ósseo Ø4,8X120/50 TB, N/Estéril;
0211482-230 - Pino Ósseo Ø4,8X130/30 TB, N/Estéril;
0211482-240 - Pino Ósseo Ø4,8X130/40 TB, N/Estéril;
0211482-250 - Pino Ósseo Ø4,8X130/50 TB, N/Estéril;
0211482-330 - Pino Ósseo Ø4,8X150/30 TB, N/Estéril;
0211482-340 - Pino Ósseo Ø4,8X150/40 TB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211482-350 - Pino Ósseo Ø4,8X150/50 TB, N/Estéril;
0211482-360 - Pino Ósseo Ø4,8X150/60 TB, N/Estéril;
0211482-440 - Pino Ósseo Ø4,8X160/40 TB, N/Estéril;
0211482-450 - Pino Ósseo Ø4,8X160/50 TB, N/Estéril;
0211482-460 - Pino Ósseo Ø4,8X160/60 TB, N/Estéril;
0211482-540 - Pino Ósseo Ø4,8X170/40 TB, N/Estéril;
0211482-550 - Pino Ósseo Ø4,8X170/50 TB, N/Estéril;
0211482-560 - Pino Ósseo Ø4,8X170/60 TB, N/Estéril;
0211482-570 - Pino Ósseo Ø4,8X170/70 TB, N/Estéril;
0211482-640 - Pino Ósseo Ø4,8X180/40 TB, N/Estéril;
0211482-650 - Pino Ósseo Ø4,8X180/50 TB, N/Estéril;
0211482-660 - Pino Ósseo Ø4,8X180/60 TB, N/Estéril;
0211482-670 - Pino Ósseo Ø4,8X180/70 TB, N/Estéril;
0211482-680 - Pino Ósseo Ø4,8X180/80 TB, N/Estéril;
0211482-750 - Pino Ósseo Ø4,8X200/50 TB, N/Estéril;
0211482-760 - Pino Ósseo Ø4,8X200/60 TB, N/Estéril;
0211482-770 - Pino Ósseo Ø4,8X200/70 TB, N/Estéril;
0211482-780 - Pino Ósseo Ø4,8X200/80 TB, N/Estéril;
0211482-850 - Pino Ósseo Ø4,8X220/50 TB, N/Estéril;
0211482-860 - Pino Ósseo Ø4,8X220/60 TB, N/Estéril;
0211482-870 - Pino Ósseo Ø4,8X220/70 TB, N/Estéril;
0211482-880 - Pino Ósseo Ø4,8X220/80 TB, N/Estéril;
0211482-950 - Pino Ósseo Ø4,8X250/50 TB, N/Estéril;
0211482-960 - Pino Ósseo Ø4,8X250/60 TB, N/Estéril;
0211482-970 - Pino Ósseo Ø4,8X250/70 TB, N/Estéril;
0211482-980 - Pino Ósseo Ø4,8X250/80 TB, N/Estéril;
0211483-000 - Pino Ósseo Ø4,8X90/30 FB, N/Estéril;
0211483-003 - Pino Ósseo Ø4,8X100/30 FB, N/Estéril;
0211483-004 - Pino Ósseo Ø4,8X100/40 FB, N/Estéril;
0211483-030 - Pino Ósseo Ø4,8X110/30 FB, N/Estéril;
0211483-040 - Pino Ósseo Ø4,8X110/40 FB, N/Estéril;
0211483-130 - Pino Ósseo Ø4,8X120/30 FB, N/Estéril;
0211483-140 - Pino Ósseo Ø4,8X120/40 FB, N/Estéril;
0211483-150 - Pino Ósseo Ø4,8X120/50 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211483-230 - Pino Ósseo Ø4,8X130/30 FB, N/Estéril;
0211483-240 - Pino Ósseo Ø4,8X130/40 FB, N/Estéril;
0211483-250 - Pino Ósseo Ø4,8X130/50 FB, N/Estéril;
0211483-330 - Pino Ósseo Ø4,8X150/30 FB, N/Estéril;
0211483-340 - Pino Ósseo Ø4,8X150/40 FB, N/Estéril;
0211483-350 - Pino Ósseo Ø4,8X150/50 FB, N/Estéril;
0211483-360 - Pino Ósseo Ø4,8X150/60 FB, N/Estéril;
0211483-440 - Pino Ósseo Ø4,8X160/40 FB, N/Estéril;
0211483-450 - Pino Ósseo Ø4,8X160/50 FB, N/Estéril;
0211483-460 - Pino Ósseo Ø4,8X160/60 FB, N/Estéril;
0211483-540 - Pino Ósseo Ø4,8X170/40 FB, N/Estéril;
0211483-550 - Pino Ósseo Ø4,8X170/50 FB, N/Estéril;
0211483-560 - Pino Ósseo Ø4,8X170/60 FB, N/Estéril;
0211483-570 - Pino Ósseo Ø4,8X170/70 FB, N/Estéril;
0211483-640 - Pino Ósseo Ø4,8X180/40 FB, N/Estéril;
0211483-650 - Pino Ósseo Ø4,8X180/50 FB, N/Estéril;
0211483-660 - Pino Ósseo Ø4,8X180/60 FB, N/Estéril;
0211483-670 - Pino Ósseo Ø4,8X180/70 FB, N/Estéril;
0211483-680 - Pino Ósseo Ø4,8X180/80 FB, N/Estéril;
0211483-750 - Pino Ósseo Ø4,8X200/50 FB, N/Estéril;
0211483-760 - Pino Ósseo Ø4,8X200/60 FB, N/Estéril;
0211483-770 - Pino Ósseo Ø4,8X200/70 FB, N/Estéril;
0211483-780 - Pino Ósseo Ø4,8X200/80 FB, N/Estéril;
0211483-850 - Pino Ósseo Ø4,8X220/50 FB, N/Estéril;
0211483-860 - Pino Ósseo Ø4,8X220/60 FB, N/Estéril;
0211483-870 - Pino Ósseo Ø4,8X220/70 FB, N/Estéril;
0211483-880 - Pino Ósseo Ø4,8X220/80 FB, N/Estéril;
0211483-950 - Pino Ósseo Ø4,8X250/50 FB, N/Estéril;
0211483-960 - Pino Ósseo Ø4,8X250/60 FB, N/Estéril;
0211483-970 - Pino Ósseo Ø4,8X250/70 FB, N/Estéril;
0211483-980 - Pino Ósseo Ø4,8X250/80 FB, N/Estéril;
0211485-330 - Pino Ósseo Ø4,8X150/30 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-340 - Pino Ósseo Ø4,8X150/40 TT, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211485-350 - Pino Ósseo Ø4,8X150/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-360 - Pino Ósseo Ø4,8X150/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-440 - Pino Ósseo Ø4,8X160/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-450 - Pino Ósseo Ø4,8X160/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-460 - Pino Ósseo Ø4,8X160/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-540 - Pino Ósseo Ø4,8X170/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-550 - Pino Ósseo Ø4,8X170/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-560 - Pino Ósseo Ø4,8X170/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-570 - Pino Ósseo Ø4,8X170/70 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-640 - Pino Ósseo Ø4,8X180/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-650 - Pino Ósseo Ø4,8X180/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-660 - Pino Ósseo Ø4,8X180/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-670 - Pino Ósseo Ø4,8X180/70 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-680 - Pino Ósseo Ø4,8X180/80 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-750 - Pino Ósseo Ø4,8X200/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-760 - Pino Ósseo Ø4,8X200/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-770 - Pino Ósseo Ø4,8X200/70 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-780 - Pino Ósseo Ø4,8X200/80 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-850 - Pino Ósseo Ø4,8X220/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-860 - Pino Ósseo Ø4,8X220/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-870 - Pino Ósseo Ø4,8X220/70 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-880 - Pino Ósseo Ø4,8X220/80 TT, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211485-950 - Pino Ósseo Ø4,8X250/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-960 - Pino Ósseo Ø4,8X250/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-970 - Pino Ósseo Ø4,8X250/70 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211485-980 - Pino Ósseo Ø4,8X250/80 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-330 - Pino Ósseo Ø4,8X150/30 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-340 - Pino Ósseo Ø4,8X150/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-350 - Pino Ósseo Ø4,8X150/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-360 - Pino Ósseo Ø4,8X150/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-440 - Pino Ósseo Ø4,8X160/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-450 - Pino Ósseo Ø4,8X160/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-460 - Pino Ósseo Ø4,8X160/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-540 - Pino Ósseo Ø4,8X170/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-550 - Pino Ósseo Ø4,8X170/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-560 - Pino Ósseo Ø4,8X170/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-570 - Pino Ósseo Ø4,8X170/70 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-640 - Pino Ósseo Ø4,8X180/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-650 - Pino Ósseo Ø4,8X180/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-660 - Pino Ósseo Ø4,8X180/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-670 - Pino Ósseo Ø4,8X180/70 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-680 - Pino Ósseo Ø4,8X180/80 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-750 - Pino Ósseo Ø4,8X200/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-760 - Pino Ósseo Ø4,8X200/60 FT, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211486-770 - Pino Ósseo Ø4,8X200/70 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-780 - Pino Ósseo Ø4,8X200/80 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-850 - Pino Ósseo Ø4,8X220/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-860 - Pino Ósseo Ø4,8X220/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-870 - Pino Ósseo Ø4,8X220/70 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-880 - Pino Ósseo Ø4,8X220/80 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-950 - Pino Ósseo Ø4,8X250/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-960 - Pino Ósseo Ø4,8X250/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-970 - Pino Ósseo Ø4,8X250/70 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211486-980 - Pino Ósseo Ø4,8X250/80 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211487-330 - Pino Ósseo Ø4,8X150/30 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-340 - Pino Ósseo Ø4,8X150/40 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-350 - Pino Ósseo Ø4,8X150/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-360 - Pino Ósseo Ø4,8X150/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-440 - Pino Ósseo Ø4,8X160/40 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-450 - Pino Ósseo Ø4,8X160/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-460 - Pino Ósseo Ø4,8X160/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-540 - Pino Ósseo Ø4,8X170/40 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-550 - Pino Ósseo Ø4,8X170/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-560 - Pino Ósseo Ø4,8X170/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-570 - Pino Ósseo Ø4,8X170/70 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-640 - Pino Ósseo Ø4,8X180/40 TB, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211487-650 - Pino Ósseo Ø4,8X180/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-660 - Pino Ósseo Ø4,8X180/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-670 - Pino Ósseo Ø4,8X180/70 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-680 - Pino Ósseo Ø4,8X180/80 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-750 - Pino Ósseo Ø4,8X200/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-760 - Pino Ósseo Ø4,8X200/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-770 - Pino Ósseo Ø4,8X200/70 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-780 - Pino Ósseo Ø4,8X200/80 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-850 - Pino Ósseo Ø4,8X220/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-860 - Pino Ósseo Ø4,8X220/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-870 - Pino Ósseo Ø4,8X220/70 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-880 - Pino Ósseo Ø4,8X220/80 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-950 - Pino Ósseo Ø4,8X250/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-960 - Pino Ósseo Ø4,8X250/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-970 - Pino Ósseo Ø4,8X250/70 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211487-980 - Pino Ósseo Ø4,8X250/80 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-330 - Pino Ósseo Ø4,8X150/30 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-340 - Pino Ósseo Ø4,8X150/40 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-350 - Pino Ósseo Ø4,8X150/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-360 - Pino Ósseo Ø4,8X150/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-440 - Pino Ósseo Ø4,8X160/40 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-450 - Pino Ósseo Ø4,8X160/50 FB, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211488-460 - Pino Ósseo Ø4,8X160/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-540 - Pino Ósseo Ø4,8X170/40 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-550 - Pino Ósseo Ø4,8X170/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-560 - Pino Ósseo Ø4,8X170/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-570 - Pino Ósseo Ø4,8X170/70 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-640 - Pino Ósseo Ø4,8X180/40 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-650 - Pino Ósseo Ø4,8X180/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-660 - Pino Ósseo Ø4,8X180/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-670 - Pino Ósseo Ø4,8X180/70 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-680 - Pino Ósseo Ø4,8X180/80 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-750 - Pino Ósseo Ø4,8X200/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-760 - Pino Ósseo Ø4,8X200/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-770 - Pino Ósseo Ø4,8X200/70 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-780 - Pino Ósseo Ø4,8X200/80 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-850 - Pino Ósseo Ø4,8X220/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-860 - Pino Ósseo Ø4,8X220/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-870 - Pino Ósseo Ø4,8X220/70 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-880 - Pino Ósseo Ø4,8X220/80 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-950 - Pino Ósseo Ø4,8X250/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-960 - Pino Ósseo Ø4,8X250/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-970 - Pino Ósseo Ø4,8X250/70 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211488-980 - Pino Ósseo Ø4,8X250/80 FB, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211500-020 - Pino Ósseo Ø5,0X50, Rosca Ø3,5-3,0X20 T, N/Estéril;
0211500-120 - Pino Ósseo Ø5,0X60, Rosca Ø3,5-3,0X20 T, N/Estéril;
0211500-125 - Pino Ósseo Ø5,0X60, Rosca Ø3,5-3,0X25 T, N/Estéril;
0211500-220 - Pino Ósseo Ø5,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X20 T, N/Estéril;
0211500-225 - Pino Ósseo Ø5,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X25 T, N/Estéril;
0211500-230 - Pino Ósseo Ø5,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X30 T, N/Estéril;
0211500-320 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X20 T, N/Estéril;
0211500-325 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X25 T, N/Estéril;
0211500-330 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X30 T, N/Estéril;
0211500-335 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X35 T, N/Estéril;
0211500-430 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X30 T, N/Estéril;
0211500-435 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X35 T, N/Estéril;
0211500-440 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X40 T, N/Estéril;
0211500-530 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X30 T, N/Estéril;
0211500-535 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X35 T, N/Estéril;
0211500-540 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X40 T, N/Estéril;
0211500-545 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X45 T, N/Estéril;
0211500-550 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X50 T, N/Estéril;
0211500-620 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X20 T, N/Estéril;
0211500-625 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X25 T, N/Estéril;
0211500-630 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X30 T, N/Estéril;
0211500-635 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X35 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211500-640 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X40 T, N/Estéril;
0211500-645 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X45 T, N/Estéril;
0211500-650 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X50 T, N/Estéril;
0211500-740 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X40 T, N/Estéril;
0211500-745 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X45 T, N/Estéril;
0211500-750 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X50 T, N/Estéril;
0211501-020 - Pino Ósseo Ø5,0X50, Rosca Ø3,5-3,0X20 F, N/Estéril;
0211501-120 - Pino Ósseo Ø5,0X60, Rosca Ø3,5-3,0X20 F, N/Estéril;
0211501-125 - Pino Ósseo Ø5,0X60, Rosca Ø3,5-3,0X25 F, N/Estéril;
0211501-220 - Pino Ósseo Ø5,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X20 F, N/Estéril;
0211501-225 - Pino Ósseo Ø5,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X25 F, N/Estéril;
0211501-230 - Pino Ósseo Ø5,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X30 F, N/Estéril;
0211501-320 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X20 F, N/Estéril;
0211501-325 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X25 F, N/Estéril;
0211501-330 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X30 F, N/Estéril;
0211501-335 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X35 F, N/Estéril;
0211501-430 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X30 F, N/Estéril;
0211501-435 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X35 F, N/Estéril;
0211501-440 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X40 F, N/Estéril;
0211501-530 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X30 F, N/Estéril;
0211501-535 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X35 F, N/Estéril;
0211501-540 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X40 F, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211501-545 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X45 F, N/Estéril;
0211501-550 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X50 F, N/Estéril;
0211501-620 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X20 F, N/Estéril;
0211501-625 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X25 F, N/Estéril;
0211501-630 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X30 F, N/Estéril;
0211501-635 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X35 F, N/Estéril;
0211501-640 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X40 F, N/Estéril;
0211501-645 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X45 F, N/Estéril;
0211501-650 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X50 F, N/Estéril;
0211501-740 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X40 F, N/Estéril;
0211501-745 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X45 F, N/Estéril;
0211501-750 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X50 F, N/Estéril;
0211502-020 - Pino Ósseo Ø5,0X50, Rosca Ø3,5-3,0X20 TT, N/Estéril;
0211502-120 - Pino Ósseo Ø5,0X60, Rosca Ø3,5-3,0X20 TT, N/Estéril;
0211502-125 - Pino Ósseo Ø5,0X60, Rosca Ø3,5-3,0X25 TT, N/Estéril;
0211502-220 - Pino Ósseo Ø5,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X20 TT, N/Estéril;
0211502-225 - Pino Ósseo Ø5,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X25 TT, N/Estéril;
0211502-230 - Pino Ósseo Ø5,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X30 TT, N/Estéril;
0211502-320 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X20 TT, N/Estéril;
0211502-325 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X25 TT, N/Estéril;
0211502-330 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X30 TT, N/Estéril;
0211502-335 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X35 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211502-430 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X30 TT, N/Estéril;
0211502-435 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X35 TT, N/Estéril;
0211502-440 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X40 TT, N/Estéril;
0211502-530 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X30 TT, N/Estéril;
0211502-535 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X35 TT, N/Estéril;
0211502-540 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X40 TT, N/Estéril;
0211502-545 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X45 TT, N/Estéril;
0211502-550 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X50 TT, N/Estéril;
0211502-620 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X20 TT, N/Estéril;
0211502-625 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X25 TT, N/Estéril;
0211502-630 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X30 TT, N/Estéril;
0211502-635 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X35 TT, N/Estéril;
0211502-640 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X40 TT, N/Estéril;
0211502-645 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X45 TT, N/Estéril;
0211502-650 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X50 TT, N/Estéril;
0211502-740 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X40 TT, N/Estéril;
0211502-745 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X45 TT, N/Estéril;
0211502-750 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X50 TT, N/Estéril;
0211503-020 - Pino Ósseo Ø5,0X50, Rosca Ø3,5-3,0X20 FT, N/Estéril;
0211503-120 - Pino Ósseo Ø5,0X60, Rosca Ø3,5-3,0X20 FT, N/Estéril;
0211503-125 - Pino Ósseo Ø5,0X60, Rosca Ø3,5-3,0X25 FT, N/Estéril;
0211503-220 - Pino Ósseo Ø5,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X20 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211503-225 - Pino Ósseo Ø5,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X25 FT, N/Estéril;
0211503-230 - Pino Ósseo Ø5,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X30 FT, N/Estéril;
0211503-320 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X20 FT, N/Estéril;
0211503-325 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X25 FT, N/Estéril;
0211503-330 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X30 FT, N/Estéril;
0211503-335 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X35 FT, N/Estéril;
0211503-430 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X30 FT, N/Estéril;
0211503-435 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X35 FT, N/Estéril;
0211503-440 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X40 FT, N/Estéril;
0211503-530 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X30 FT, N/Estéril;
0211503-535 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X35 FT, N/Estéril;
0211503-540 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X40 FT, N/Estéril;
0211503-545 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X45 FT, N/Estéril;
0211503-550 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X50 FT, N/Estéril;
0211503-620 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X20 FT, N/Estéril;
0211503-625 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X25 FT, N/Estéril;
0211503-630 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X30 FT, N/Estéril;
0211503-635 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X35 FT, N/Estéril;
0211503-640 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X40 FT, N/Estéril;
0211503-645 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X45 FT, N/Estéril;
0211503-650 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X50 FT, N/Estéril;
0211503-740 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X40 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211503-745 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X45 FT, N/Estéril;
0211503-750 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X50 FT, N/Estéril;
0211510-620 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X20 T, Calibrado, N/Est.;
0211510-625 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X25 T, Calibrado, N/Est.;
0211510-630 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X30 T, Calibrado, N/Est.;
0211510-635 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X35 T, Calibrado, N/Est.;
0211510-640 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211510-645 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X45 T, Calibrado, N/Est.;
0211510-650 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211510-740 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211510-745 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X45 T, Calibrado, N/Est.;
0211510-750 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211511-620 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X20 F, Calibrado, N/Est.;
0211511-625 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X25 F, Calibrado, N/Est.;
0211511-630 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X30 F, Calibrado, N/Est.;
0211511-635 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X35 F, Calibrado, N/Est.;
0211511-640 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211511-645 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X45 F, Calibrado, N/Est.;
0211511-650 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211511-740 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211511-745 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X45 F, Calibrado, N/Est.;
0211511-750 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X50 F, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211512-620 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X20 TT, Calibrado, N/Est.;
0211512-625 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X25 TT, Calibrado, N/Est.;
0211512-630 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211512-635 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211512-640 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211512-645 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X45 TT, Calibrado, N/Est.;
0211512-650 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211512-740 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211512-745 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X45 TT, Calibrado, N/Est.;
0211512-750 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211513-620 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X20 FT, Calibrado, N/Est.;
0211513-625 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X25 FT, Calibrado, N/Est.;
0211513-630 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211513-635 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211513-640 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211513-645 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X45 FT, Calibrado, N/Est.;
0211513-650 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211513-740 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211513-745 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X45 FT, Calibrado, N/Est.;
0211513-750 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211520-003 - Pino Ósseo Ø5,0X70, Rosca Ø4,5-3,5X30 T, N/Estéril;
0211520-030 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X30 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211520-040 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, N/Estéril;
0211520-130 - Pino Ósseo Ø5,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X30 T, N/Estéril;
0211520-140 - Pino Ósseo Ø5,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, N/Estéril;
0211520-240 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, N/Estéril;
0211520-250 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, N/Estéril;
0211520-340 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, N/Estéril;
0211520-350 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, N/Estéril;
0211520-420 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 T, N/Estéril;
0211520-425 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 T, N/Estéril;
0211520-430 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 T, N/Estéril;
0211520-435 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 T, N/Estéril;
0211520-440 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, N/Estéril;
0211520-450 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, N/Estéril;
0211520-460 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, N/Estéril;
0211520-540 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, N/Estéril;
0211520-550 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, N/Estéril;
0211520-560 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, N/Estéril;
0211520-640 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, N/Estéril;
0211520-650 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, N/Estéril;
0211520-660 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, N/Estéril;
0211520-670 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 T, N/Estéril;
0211520-740 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211520-750 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, N/Estéril;
0211520-760 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, N/Estéril;
0211520-770 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 T, N/Estéril;
0211520-780 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 T, N/Estéril;
0211520-850 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, N/Estéril;
0211520-860 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, N/Estéril;
0211520-870 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 T, N/Estéril;
0211520-880 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 T, N/Estéril;
0211520-950 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, N/Estéril;
0211520-960 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, N/Estéril;
0211520-970 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 T, N/Estéril;
0211520-980 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 T, N/Estéril;
0211521-003 - Pino Ósseo Ø5,0X70, Rosca Ø4,5-3,5X30 F, N/Estéril;
0211521-030 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X30 F, N/Estéril;
0211521-040 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, N/Estéril;
0211521-130 - Pino Ósseo Ø5,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X30 F, N/Estéril;
0211521-140 - Pino Ósseo Ø5,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, N/Estéril;
0211521-240 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, N/Estéril;
0211521-250 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, N/Estéril;
0211521-340 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, N/Estéril;
0211521-350 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, N/Estéril;
0211521-420 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 F, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211521-425 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 F, N/Estéril;
0211521-430 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 F, N/Estéril;
0211521-435 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 F, N/Estéril;
0211521-440 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, N/Estéril;
0211521-450 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, N/Estéril;
0211521-460 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, N/Estéril;
0211521-540 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, N/Estéril;
0211521-550 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, N/Estéril;
0211521-560 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, N/Estéril;
0211521-640 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, N/Estéril;
0211521-650 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, N/Estéril;
0211521-660 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, N/Estéril;
0211521-670 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 F, N/Estéril;
0211521-740 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, N/Estéril;
0211521-750 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, N/Estéril;
0211521-760 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, N/Estéril;
0211521-770 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 F, N/Estéril;
0211521-780 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 F, N/Estéril;
0211521-850 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, N/Estéril;
0211521-860 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, N/Estéril;
0211521-870 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 F, N/Estéril;
0211521-880 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 F, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211521-950 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, N/Estéril;
0211521-960 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, N/Estéril;
0211521-970 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 F, N/Estéril;
0211521-980 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 F, N/Estéril;
0211522-003 - Pino Ósseo Ø5,0X70, Rosca Ø4,5-3,5X30 TT, N/Estéril;
0211522-030 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X30 TT, N/Estéril;
0211522-040 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, N/Estéril;
0211522-130 - Pino Ósseo Ø5,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X30 TT, N/Estéril;
0211522-140 - Pino Ósseo Ø5,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, N/Estéril;
0211522-240 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, N/Estéril;
0211522-250 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, N/Estéril;
0211522-340 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, N/Estéril;
0211522-350 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, N/Estéril;
0211522-420 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 TT, N/Estéril;
0211522-425 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 TT, N/Estéril;
0211522-430 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 TT, N/Estéril;
0211522-435 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 TT, N/Estéril;
0211522-440 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, N/Estéril;
0211522-450 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, N/Estéril;
0211522-460 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, N/Estéril;
0211522-540 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, N/Estéril;
0211522-550 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211522-560 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, N/Estéril;
0211522-640 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, N/Estéril;
0211522-650 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, N/Estéril;
0211522-660 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, N/Estéril;
0211522-670 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 TT, N/Estéril;
0211522-740 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, N/Estéril;
0211522-750 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, N/Estéril;
0211522-760 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, N/Estéril;
0211522-770 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 TT, N/Estéril;
0211522-780 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 TT, N/Estéril;
0211522-850 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, N/Estéril;
0211522-860 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, N/Estéril;
0211522-870 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 TT, N/Estéril;
0211522-880 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 TT, N/Estéril;
0211522-950 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, N/Estéril;
0211522-960 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, N/Estéril;
0211522-970 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 TT, N/Estéril;
0211522-980 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 TT, N/Estéril;
0211523-003 - Pino Ósseo Ø5,0X70, Rosca Ø4,5-3,5X30 FT, N/Estéril;
0211523-030 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X30 FT, N/Estéril;
0211523-040 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, N/Estéril;
0211523-130 - Pino Ósseo Ø5,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X30 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211523-140 - Pino Ósseo Ø5,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, N/Estéril;
0211523-240 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, N/Estéril;
0211523-250 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, N/Estéril;
0211523-340 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, N/Estéril;
0211523-350 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, N/Estéril;
0211523-420 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 FT, N/Estéril;
0211523-425 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 FT, N/Estéril;
0211523-430 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 FT, N/Estéril;
0211523-435 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 FT, N/Estéril;
0211523-440 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, N/Estéril;
0211523-450 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, N/Estéril;
0211523-460 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, N/Estéril;
0211523-540 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, N/Estéril;
0211523-550 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, N/Estéril;
0211523-560 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, N/Estéril;
0211523-640 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, N/Estéril;
0211523-650 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, N/Estéril;
0211523-660 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, N/Estéril;
0211523-670 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 FT, N/Estéril;
0211523-740 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, N/Estéril;
0211523-750 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, N/Estéril;
0211523-760 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211523-770 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 FT, N/Estéril;
0211523-780 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 FT, N/Estéril;
0211523-850 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, N/Estéril;
0211523-860 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, N/Estéril;
0211523-870 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 FT, N/Estéril;
0211523-880 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 FT, N/Estéril;
0211523-950 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, N/Estéril;
0211523-960 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, N/Estéril;
0211523-970 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 FT, N/Estéril;
0211523-980 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 FT, N/Estéril;
0211524-003 - Pino Ósseo Ø5,0X70, Rosca Ø4,5-3,5X30 TB, N/Estéril;
0211524-030 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X30 TB, N/Estéril;
0211524-040 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, N/Estéril;
0211524-130 - Pino Ósseo Ø5,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X30 TB, N/Estéril;
0211524-140 - Pino Ósseo Ø5,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, N/Estéril;
0211524-240 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, N/Estéril;
0211524-250 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, N/Estéril;
0211524-340 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, N/Estéril;
0211524-350 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, N/Estéril;
0211524-420 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 TB, N/Estéril;
0211524-425 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 TB, N/Estéril;
0211524-430 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 TB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211524-435 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 TB, N/Estéril;
0211524-440 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, N/Estéril;
0211524-450 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, N/Estéril;
0211524-460 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, N/Estéril;
0211524-540 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, N/Estéril;
0211524-550 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, N/Estéril;
0211524-560 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, N/Estéril;
0211524-640 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, N/Estéril;
0211524-650 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, N/Estéril;
0211524-660 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, N/Estéril;
0211524-670 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 TB, N/Estéril;
0211524-740 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, N/Estéril;
0211524-750 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, N/Estéril;
0211524-760 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, N/Estéril;
0211524-770 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 TB, N/Estéril;
0211524-780 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 TB, N/Estéril;
0211524-850 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, N/Estéril;
0211524-860 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, N/Estéril;
0211524-870 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 TB, N/Estéril;
0211524-880 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 TB, N/Estéril;
0211524-950 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, N/Estéril;
0211524-960 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211524-970 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 TB, N/Estéril;
0211524-980 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 TB, N/Estéril;
0211525-003 - Pino Ósseo Ø5,0X70, Rosca Ø4,5-3,5X30 FB, N/Estéril;
0211525-030 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X30 FB, N/Estéril;
0211525-040 - Pino Ósseo Ø5,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, N/Estéril;
0211525-130 - Pino Ósseo Ø5,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X30 FB, N/Estéril;
0211525-140 - Pino Ósseo Ø5,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, N/Estéril;
0211525-240 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, N/Estéril;
0211525-250 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, N/Estéril;
0211525-340 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, N/Estéril;
0211525-350 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, N/Estéril;
0211525-420 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 FB, N/Estéril;
0211525-425 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 FB, N/Estéril;
0211525-430 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 FB, N/Estéril;
0211525-435 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 FB, N/Estéril;
0211525-440 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, N/Estéril;
0211525-450 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, N/Estéril;
0211525-460 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, N/Estéril;
0211525-540 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, N/Estéril;
0211525-550 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, N/Estéril;
0211525-560 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, N/Estéril;
0211525-640 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211525-650 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, N/Estéril;
0211525-660 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, N/Estéril;
0211525-670 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 FB, N/Estéril;
0211525-740 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, N/Estéril;
0211525-750 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, N/Estéril;
0211525-760 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, N/Estéril;
0211525-770 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 FB, N/Estéril;
0211525-780 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 FB, N/Estéril;
0211525-850 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, N/Estéril;
0211525-860 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, N/Estéril;
0211525-870 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 FB, N/Estéril;
0211525-880 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 FB, N/Estéril;
0211525-950 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, N/Estéril;
0211525-960 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, N/Estéril;
0211525-970 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 FB, N/Estéril;
0211525-980 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 FB, N/Estéril;
0211530-420 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-425 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-430 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-435 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-440 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-450 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211530-460 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-540 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-550 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-560 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-640 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-650 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-660 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-670 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-740 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-750 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-760 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-770 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-780 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-850 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-860 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-870 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-880 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-950 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-960 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-970 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211530-980 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211531-420 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 F, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211531-425 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-430 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-435 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-440 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-450 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-460 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-540 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-550 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-560 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-640 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-650 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-660 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-670 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-740 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-750 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-760 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-770 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-780 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-850 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-860 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-870 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-880 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 F, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211531-950 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-960 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-970 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211531-980 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211532-420 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-425 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-430 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-435 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-440 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-450 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-460 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-540 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-550 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-560 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-640 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-650 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-660 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-670 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-740 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-750 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-760 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-770 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 TT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211532-780 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-850 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-860 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-870 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-880 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-950 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-960 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-970 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211532-980 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211533-420 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-425 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-430 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-435 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-440 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-450 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-460 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-540 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-550 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-560 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-640 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-650 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-660 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211533-670 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-740 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-750 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-760 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-770 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-780 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-850 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-860 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-870 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-880 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-950 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-960 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-970 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211533-980 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211534-420 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-425 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-430 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-435 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-440 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-450 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-460 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-540 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211534-550 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-560 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-640 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-650 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-660 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-670 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-740 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-750 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-760 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-770 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-780 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-850 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-860 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-870 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-880 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-950 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-960 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-970 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211534-980 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211535-420 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-425 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-430 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 FB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211535-435 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-440 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-450 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-460 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-540 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-550 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-560 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-640 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-650 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-660 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-670 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-740 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-750 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-760 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-770 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-780 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-850 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-860 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-870 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-880 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-950 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-960 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211535-970 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211535-980 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 FB, Calibrado, N/Est.;
0211540-000 - Pino Ósseo Ø5,0X90, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, N/Estéril;
0211540-003 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, N/Estéril;
0211540-004 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, N/Estéril;
0211540-103 - Pino Ósseo Ø5,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, N/Estéril;
0211540-104 - Pino Ósseo Ø5,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, N/Estéril;
0211540-130 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, N/Estéril;
0211540-140 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, N/Estéril;
0211540-150 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, N/Estéril;
0211540-230 - Pino Ósseo Ø5,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, N/Estéril;
0211540-240 - Pino Ósseo Ø5,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, N/Estéril;
0211540-250 - Pino Ósseo Ø5,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, N/Estéril;
0211540-330 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, N/Estéril;
0211540-340 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, N/Estéril;
0211540-350 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, N/Estéril;
0211540-360 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, N/Estéril;
0211540-440 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, N/Estéril;
0211540-450 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, N/Estéril;
0211540-460 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, N/Estéril;
0211540-540 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, N/Estéril;
0211540-550 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211540-560 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, N/Estéril;
0211540-570 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 T, N/Estéril;
0211540-620 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X20 T, N/Estéril;
0211540-625 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X25 T, N/Estéril;
0211540-630 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, N/Estéril;
0211540-635 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X35 T, N/Estéril;
0211540-640 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, N/Estéril;
0211540-650 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, N/Estéril;
0211540-660 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, N/Estéril;
0211540-670 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 T, N/Estéril;
0211540-680 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 T, N/Estéril;
0211540-720 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 T, N/Estéril;
0211540-725 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 T, N/Estéril;
0211540-730 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, N/Estéril;
0211540-735 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 T, N/Estéril;
0211540-740 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, N/Estéril;
0211540-750 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, N/Estéril;
0211540-760 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, N/Estéril;
0211540-770 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 T, N/Estéril;
0211540-780 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 T, N/Estéril;
0211540-820 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 T, N/Estéril;
0211540-825 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211540-830 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, N/Estéril;
0211540-835 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 T, N/Estéril;
0211540-840 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, N/Estéril;
0211540-850 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, N/Estéril;
0211540-860 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, N/Estéril;
0211540-870 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 T, N/Estéril;
0211540-880 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 T, N/Estéril;
0211540-950 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, N/Estéril;
0211540-960 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, N/Estéril;
0211540-970 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 T, N/Estéril;
0211540-980 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 T, N/Estéril;
0211541-000 - Pino Ósseo Ø5,0X90, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, N/Estéril;
0211541-003 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, N/Estéril;
0211541-004 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, N/Estéril;
0211541-103 - Pino Ósseo Ø5,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, N/Estéril;
0211541-104 - Pino Ósseo Ø5,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, N/Estéril;
0211541-130 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, N/Estéril;
0211541-140 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, N/Estéril;
0211541-150 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, N/Estéril;
0211541-230 - Pino Ósseo Ø5,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, N/Estéril;
0211541-240 - Pino Ósseo Ø5,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, N/Estéril;
0211541-250 - Pino Ósseo Ø5,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211541-330 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, N/Estéril;
0211541-340 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, N/Estéril;
0211541-350 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, N/Estéril;
0211541-360 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, N/Estéril;
0211541-440 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, N/Estéril;
0211541-450 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, N/Estéril;
0211541-460 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, N/Estéril;
0211541-540 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, N/Estéril;
0211541-550 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, N/Estéril;
0211541-560 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, N/Estéril;
0211541-570 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 F, N/Estéril;
0211541-620 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X20 F, N/Estéril;
0211541-625 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X25 F, N/Estéril;
0211541-630 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, N/Estéril;
0211541-635 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X35 F, N/Estéril;
0211541-640 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, N/Estéril;
0211541-650 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, N/Estéril;
0211541-660 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, N/Estéril;
0211541-670 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 F, N/Estéril;
0211541-680 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 F, N/Estéril;
0211541-720 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 F, N/Estéril;
0211541-725 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 F, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211541-730 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, N/Estéril;
0211541-735 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 F, N/Estéril;
0211541-740 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, N/Estéril;
0211541-750 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, N/Estéril;
0211541-760 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, N/Estéril;
0211541-770 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 F, N/Estéril;
0211541-780 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 F, N/Estéril;
0211541-820 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 F, N/Estéril;
0211541-825 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 F, N/Estéril;
0211541-830 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, N/Estéril;
0211541-835 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 F, N/Estéril;
0211541-840 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, N/Estéril;
0211541-850 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, N/Estéril;
0211541-860 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, N/Estéril;
0211541-870 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 F, N/Estéril;
0211541-880 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 F, N/Estéril;
0211541-950 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, N/Estéril;
0211541-960 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, N/Estéril;
0211541-970 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 F, N/Estéril;
0211541-980 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 F, N/Estéril;
0211542-000 - Pino Ósseo Ø5,0X90, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, N/Estéril;
0211542-003 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211542-004 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, N/Estéril;
0211542-103 - Pino Ósseo Ø5,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, N/Estéril;
0211542-104 - Pino Ósseo Ø5,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, N/Estéril;
0211542-130 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, N/Estéril;
0211542-140 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, N/Estéril;
0211542-150 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, N/Estéril;
0211542-230 - Pino Ósseo Ø5,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, N/Estéril;
0211542-240 - Pino Ósseo Ø5,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, N/Estéril;
0211542-250 - Pino Ósseo Ø5,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, N/Estéril;
0211542-330 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, N/Estéril;
0211542-340 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, N/Estéril;
0211542-350 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, N/Estéril;
0211542-360 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, N/Estéril;
0211542-440 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, N/Estéril;
0211542-450 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, N/Estéril;
0211542-460 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, N/Estéril;
0211542-540 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, N/Estéril;
0211542-550 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, N/Estéril;
0211542-560 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, N/Estéril;
0211542-570 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 TT, N/Estéril;
0211542-620 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X20 TT, N/Estéril;
0211542-625 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X25 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211542-630 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, N/Estéril;
0211542-635 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X35 TT, N/Estéril;
0211542-640 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, N/Estéril;
0211542-650 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, N/Estéril;
0211542-660 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, N/Estéril;
0211542-670 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 TT, N/Estéril;
0211542-680 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 TT, N/Estéril;
0211542-720 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 TT, N/Estéril;
0211542-725 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 TT, N/Estéril;
0211542-730 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, N/Estéril;
0211542-735 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 TT, N/Estéril;
0211542-740 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, N/Estéril;
0211542-750 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, N/Estéril;
0211542-760 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, N/Estéril;
0211542-770 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 TT, N/Estéril;
0211542-780 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 TT, N/Estéril;
0211542-820 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 TT, N/Estéril;
0211542-825 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 TT, N/Estéril;
0211542-830 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, N/Estéril;
0211542-835 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 TT, N/Estéril;
0211542-840 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, N/Estéril;
0211542-850 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211542-860 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, N/Estéril;
0211542-870 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 TT, N/Estéril;
0211542-880 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 TT, N/Estéril;
0211542-950 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, N/Estéril;
0211542-960 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, N/Estéril;
0211542-970 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 TT, N/Estéril;
0211542-980 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 TT, N/Estéril;
0211543-000 - Pino Ósseo Ø5,0X90, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, N/Estéril;
0211543-003 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, N/Estéril;
0211543-004 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, N/Estéril;
0211543-103 - Pino Ósseo Ø5,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, N/Estéril;
0211543-104 - Pino Ósseo Ø5,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, N/Estéril;
0211543-130 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, N/Estéril;
0211543-140 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, N/Estéril;
0211543-150 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, N/Estéril;
0211543-230 - Pino Ósseo Ø5,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, N/Estéril;
0211543-240 - Pino Ósseo Ø5,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, N/Estéril;
0211543-250 - Pino Ósseo Ø5,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, N/Estéril;
0211543-330 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, N/Estéril;
0211543-340 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, N/Estéril;
0211543-350 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, N/Estéril;
0211543-360 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211543-440 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, N/Estéril;
0211543-450 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, N/Estéril;
0211543-460 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, N/Estéril;
0211543-540 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, N/Estéril;
0211543-550 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, N/Estéril;
0211543-560 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, N/Estéril;
0211543-570 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 FT, N/Estéril;
0211543-620 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X20 FT, N/Estéril;
0211543-625 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X25 FT, N/Estéril;
0211543-630 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, N/Estéril;
0211543-635 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X35 FT, N/Estéril;
0211543-640 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, N/Estéril;
0211543-650 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, N/Estéril;
0211543-660 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, N/Estéril;
0211543-670 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 FT, N/Estéril;
0211543-680 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 FT, N/Estéril;
0211543-720 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 FT, N/Estéril;
0211543-725 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 FT, N/Estéril;
0211543-730 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, N/Estéril;
0211543-735 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 FT, N/Estéril;
0211543-740 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, N/Estéril;
0211543-750 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211543-760 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, N/Estéril;
0211543-770 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 FT, N/Estéril;
0211543-780 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 FT, N/Estéril;
0211543-820 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 FT, N/Estéril;
0211543-825 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 FT, N/Estéril;
0211543-830 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, N/Estéril;
0211543-835 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 FT, N/Estéril;
0211543-840 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, N/Estéril;
0211543-850 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, N/Estéril;
0211543-860 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, N/Estéril;
0211543-870 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 FT, N/Estéril;
0211543-880 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 FT, N/Estéril;
0211543-950 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, N/Estéril;
0211543-960 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, N/Estéril;
0211543-970 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 FT, N/Estéril;
0211543-980 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 FT, N/Estéril;
0211544-000 - Pino Ósseo Ø5,0X90, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, N/Estéril;
0211544-003 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, N/Estéril;
0211544-004 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, N/Estéril;
0211544-103 - Pino Ósseo Ø5,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, N/Estéril;
0211544-104 - Pino Ósseo Ø5,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, N/Estéril;
0211544-130 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211544-140 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, N/Estéril;
0211544-150 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, N/Estéril;
0211544-230 - Pino Ósseo Ø5,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, N/Estéril;
0211544-240 - Pino Ósseo Ø5,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, N/Estéril;
0211544-250 - Pino Ósseo Ø5,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, N/Estéril;
0211544-330 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, N/Estéril;
0211544-340 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, N/Estéril;
0211544-350 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, N/Estéril;
0211544-360 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, N/Estéril;
0211544-440 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, N/Estéril;
0211544-450 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, N/Estéril;
0211544-460 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, N/Estéril;
0211544-540 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, N/Estéril;
0211544-550 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, N/Estéril;
0211544-560 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, N/Estéril;
0211544-570 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 TB, N/Estéril;
0211544-620 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X20 TB, N/Estéril;
0211544-625 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X25 TB, N/Estéril;
0211544-630 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, N/Estéril;
0211544-635 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X35 TB, N/Estéril;
0211544-640 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, N/Estéril;
0211544-650 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211544-660 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, N/Estéril;
0211544-670 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 TB, N/Estéril;
0211544-680 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 TB, N/Estéril;
0211544-720 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 TB, N/Estéril;
0211544-725 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 TB, N/Estéril;
0211544-730 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, N/Estéril;
0211544-735 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 TB, N/Estéril;
0211544-740 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, N/Estéril;
0211544-750 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, N/Estéril;
0211544-760 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, N/Estéril;
0211544-770 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 TB, N/Estéril;
0211544-780 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 TB, N/Estéril;
0211544-820 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 TB, N/Estéril;
0211544-825 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 TB, N/Estéril;
0211544-830 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, N/Estéril;
0211544-835 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 TB, N/Estéril;
0211544-840 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, N/Estéril;
0211544-850 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, N/Estéril;
0211544-860 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, N/Estéril;
0211544-870 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 TB, N/Estéril;
0211544-880 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 TB, N/Estéril;
0211544-950 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211544-960 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, N/Estéril;
0211544-970 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 TB, N/Estéril;
0211544-980 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 TB, N/Estéril;
0211545-000 - Pino Ósseo Ø5,0X90, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, N/Estéril;
0211545-003 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, N/Estéril;
0211545-004 - Pino Ósseo Ø5,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, N/Estéril;
0211545-103 - Pino Ósseo Ø5,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, N/Estéril;
0211545-104 - Pino Ósseo Ø5,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, N/Estéril;
0211545-130 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, N/Estéril;
0211545-140 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, N/Estéril;
0211545-150 - Pino Ósseo Ø5,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, N/Estéril;
0211545-230 - Pino Ósseo Ø5,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, N/Estéril;
0211545-240 - Pino Ósseo Ø5,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, N/Estéril;
0211545-250 - Pino Ósseo Ø5,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, N/Estéril;
0211545-330 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, N/Estéril;
0211545-340 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, N/Estéril;
0211545-350 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, N/Estéril;
0211545-360 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, N/Estéril;
0211545-440 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, N/Estéril;
0211545-450 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, N/Estéril;
0211545-460 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, N/Estéril;
0211545-540 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211545-550 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, N/Estéril;
0211545-560 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, N/Estéril;
0211545-570 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 FB, N/Estéril;
0211545-620 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X20 FB, N/Estéril;
0211545-625 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X25 FB, N/Estéril;
0211545-630 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, N/Estéril;
0211545-635 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X35 FB, N/Estéril;
0211545-640 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, N/Estéril;
0211545-650 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, N/Estéril;
0211545-660 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, N/Estéril;
0211545-670 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 FB, N/Estéril;
0211545-680 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 FB, N/Estéril;
0211545-720 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 FB, N/Estéril;
0211545-725 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 FB, N/Estéril;
0211545-730 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, N/Estéril;
0211545-735 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 FB, N/Estéril;
0211545-740 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, N/Estéril;
0211545-750 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, N/Estéril;
0211545-760 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, N/Estéril;
0211545-770 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 FB, N/Estéril;
0211545-780 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 FB, N/Estéril;
0211545-820 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211545-825 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 FB, N/Estéril;
0211545-830 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, N/Estéril;
0211545-835 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 FB, N/Estéril;
0211545-840 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, N/Estéril;
0211545-850 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, N/Estéril;
0211545-860 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, N/Estéril;
0211545-870 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 FB, N/Estéril;
0211545-880 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 FB, N/Estéril;
0211545-950 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, N/Estéril;
0211545-960 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, N/Estéril;
0211545-970 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 FB, N/Estéril;
0211545-980 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 FB, N/Estéril;
0211550-330 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-340 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-350 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-360 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-440 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-450 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-460 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-540 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-550 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-560 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211550-570 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-620 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X20 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-625 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X25 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-630 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-635 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X35 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-640 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-650 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-660 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-670 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-680 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-720 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-725 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-730 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-735 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-740 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-750 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-760 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-770 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-780 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-820 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-825 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-830 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211550-835 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-840 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-850 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-860 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-870 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-880 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-950 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-960 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-970 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211550-980 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211551-330 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-340 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-350 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-360 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-440 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-450 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-460 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-540 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-550 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-560 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-570 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-620 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X20 F, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211551-625 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X25 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-630 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-635 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X35 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-640 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-650 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-660 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-670 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-680 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-720 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-725 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-730 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-735 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-740 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-750 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-760 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-770 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-780 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-820 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-825 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-830 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-835 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-840 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211551-850 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-860 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-870 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-880 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-950 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-960 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-970 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211551-980 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211552-330 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-340 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-350 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-360 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-440 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-450 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-460 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-540 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-550 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-560 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-570 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-620 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X20 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-625 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X25 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-630 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211552-635 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-640 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-650 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-660 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-670 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-680 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-720 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-725 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-730 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-735 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-740 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-750 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-760 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-770 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-780 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-820 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-825 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-830 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-835 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-840 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-850 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-860 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211552-870 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-880 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-950 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-960 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-970 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211552-980 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211553-330 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-340 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-350 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-360 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-440 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-450 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-460 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-540 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-550 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-560 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-570 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-620 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X20 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-625 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X25 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-630 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-635 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-640 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211553-650 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-660 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-670 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-680 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-720 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-725 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-730 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-735 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-740 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-750 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-760 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-770 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-780 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-820 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-825 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-830 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-835 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-840 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-850 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-860 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-870 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-880 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 FT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211553-950 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-960 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-970 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211553-980 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211554-330 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-340 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-350 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-360 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-440 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-450 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-460 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-540 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-550 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-560 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-570 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-620 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X20 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-625 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X25 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-630 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-635 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X35 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-640 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-650 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-660 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211554-670 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-680 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-720 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-725 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-730 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-735 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-740 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-750 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-760 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-770 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-780 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-820 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-825 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-830 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-835 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-840 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-850 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-860 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-870 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-880 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-950 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-960 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211554-970 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211554-980 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211555-330 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-340 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-350 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-360 - Pino Ósseo Ø5,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-440 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-450 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-460 - Pino Ósseo Ø5,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-540 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-550 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-560 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-570 - Pino Ósseo Ø5,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-620 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X20 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-625 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X25 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-630 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-635 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X35 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-640 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-650 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-660 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-670 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-680 - Pino Ósseo Ø5,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 FB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211555-720 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-725 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-730 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-735 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-740 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-750 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-760 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-770 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-780 - Pino Ósseo Ø5,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-820 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-825 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-830 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-835 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-840 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-850 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-860 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-870 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-880 - Pino Ósseo Ø5,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-950 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-960 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-970 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211555-980 - Pino Ósseo Ø5,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 FB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211560-000 - Pino Ósseo Ø5,0X90/30 TT, N/Estéril;
0211560-003 - Pino Ósseo Ø5,0X100/30 TT, N/Estéril;
0211560-004 - Pino Ósseo Ø5,0X100/40 TT, N/Estéril;
0211560-030 - Pino Ósseo Ø5,0X110/30 TT, N/Estéril;
0211560-040 - Pino Ósseo Ø5,0X110/40 TT, N/Estéril;
0211560-130 - Pino Ósseo Ø5,0X120/30 TT, N/Estéril;
0211560-140 - Pino Ósseo Ø5,0X120/40 TT, N/Estéril;
0211560-150 - Pino Ósseo Ø5,0X120/50 TT, N/Estéril;
0211560-230 - Pino Ósseo Ø5,0X130/30 TT, N/Estéril;
0211560-240 - Pino Ósseo Ø5,0X130/40 TT, N/Estéril;
0211560-250 - Pino Ósseo Ø5,0X130/50 TT, N/Estéril;
0211560-330 - Pino Ósseo Ø5,0X150/30 TT, N/Estéril;
0211560-340 - Pino Ósseo Ø5,0X150/40 TT, N/Estéril;
0211560-350 - Pino Ósseo Ø5,0X150/50 TT, N/Estéril;
0211560-360 - Pino Ósseo Ø5,0X150/60 TT, N/Estéril;
0211560-440 - Pino Ósseo Ø5,0X160/40 TT, N/Estéril;
0211560-450 - Pino Ósseo Ø5,0X160/50 TT, N/Estéril;
0211560-460 - Pino Ósseo Ø5,0X160/60 TT, N/Estéril;
0211560-540 - Pino Ósseo Ø5,0X170/40 TT, N/Estéril;
0211560-550 - Pino Ósseo Ø5,0X170/50 TT, N/Estéril;
0211560-560 - Pino Ósseo Ø5,0X170/60 TT, N/Estéril;
0211560-570 - Pino Ósseo Ø5,0X170/70 TT, N/Estéril;
0211560-640 - Pino Ósseo Ø5,0X180/40 TT, N/Estéril;
0211560-650 - Pino Ósseo Ø5,0X180/50 TT, N/Estéril;
0211560-660 - Pino Ósseo Ø5,0X180/60 TT, N/Estéril;
0211560-670 - Pino Ósseo Ø5,0X180/70 TT, N/Estéril;
0211560-680 - Pino Ósseo Ø5,0X180/80 TT, N/Estéril;
0211560-750 - Pino Ósseo Ø5,0X200/50 TT, N/Estéril;
0211560-760 - Pino Ósseo Ø5,0X200/60 TT, N/Estéril;
0211560-770 - Pino Ósseo Ø5,0X200/70 TT, N/Estéril;
0211560-780 - Pino Ósseo Ø5,0X200/80 TT, N/Estéril;
0211560-850 - Pino Ósseo Ø5,0X220/50 TT, N/Estéril;
0211560-860 - Pino Ósseo Ø5,0X220/60 TT, N/Estéril;
0211560-870 - Pino Ósseo Ø5,0X220/70 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211560-880 - Pino Ósseo Ø5,0X220/80 TT, N/Estéril;
0211560-950 - Pino Ósseo Ø5,0X250/50 TT, N/Estéril;
0211560-960 - Pino Ósseo Ø5,0X250/60 TT, N/Estéril;
0211560-970 - Pino Ósseo Ø5,0X250/70 TT, N/Estéril;
0211560-980 - Pino Ósseo Ø5,0X250/80 TT, N/Estéril;
0211561-000 - Pino Ósseo Ø5,0X90/30 FT, N/Estéril;
0211561-003 - Pino Ósseo Ø5,0X100/30 FT, N/Estéril;
0211561-004 - Pino Ósseo Ø5,0X100/40 FT, N/Estéril;
0211561-030 - Pino Ósseo Ø5,0X110/30 FT, N/Estéril;
0211561-040 - Pino Ósseo Ø5,0X110/40 FT, N/Estéril;
0211561-130 - Pino Ósseo Ø5,0X120/30 FT, N/Estéril;
0211561-140 - Pino Ósseo Ø5,0X120/40 FT, N/Estéril;
0211561-150 - Pino Ósseo Ø5,0X120/50 FT, N/Estéril;
0211561-230 - Pino Ósseo Ø5,0X130/30 FT, N/Estéril;
0211561-240 - Pino Ósseo Ø5,0X130/40 FT, N/Estéril;
0211561-250 - Pino Ósseo Ø5,0X130/50 FT, N/Estéril;
0211561-330 - Pino Ósseo Ø5,0X150/30 FT, N/Estéril;
0211561-340 - Pino Ósseo Ø5,0X150/40 FT, N/Estéril;
0211561-350 - Pino Ósseo Ø5,0X150/50 FT, N/Estéril;
0211561-360 - Pino Ósseo Ø5,0X150/60 FT, N/Estéril;
0211561-440 - Pino Ósseo Ø5,0X160/40 FT, N/Estéril;
0211561-450 - Pino Ósseo Ø5,0X160/50 FT, N/Estéril;
0211561-460 - Pino Ósseo Ø5,0X160/60 FT, N/Estéril;
0211561-540 - Pino Ósseo Ø5,0X170/40 FT, N/Estéril;
0211561-550 - Pino Ósseo Ø5,0X170/50 FT, N/Estéril;
0211561-560 - Pino Ósseo Ø5,0X170/60 FT, N/Estéril;
0211561-570 - Pino Ósseo Ø5,0X170/70 FT, N/Estéril;
0211561-640 - Pino Ósseo Ø5,0X180/40 FT, N/Estéril;
0211561-650 - Pino Ósseo Ø5,0X180/50 FT, N/Estéril;
0211561-660 - Pino Ósseo Ø5,0X180/60 FT, N/Estéril;
0211561-670 - Pino Ósseo Ø5,0X180/70 FT, N/Estéril;
0211561-680 - Pino Ósseo Ø5,0X180/80 FT, N/Estéril;
0211561-750 - Pino Ósseo Ø5,0X200/50 FT, N/Estéril;
0211561-760 - Pino Ósseo Ø5,0X200/60 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211561-770 - Pino Ósseo Ø5,0X200/70 FT, N/Estéril;
0211561-780 - Pino Ósseo Ø5,0X200/80 FT, N/Estéril;
0211561-850 - Pino Ósseo Ø5,0X220/50 FT, N/Estéril;
0211561-860 - Pino Ósseo Ø5,0X220/60 FT, N/Estéril;
0211561-870 - Pino Ósseo Ø5,0X220/70 FT, N/Estéril;
0211561-880 - Pino Ósseo Ø5,0X220/80 FT, N/Estéril;
0211561-950 - Pino Ósseo Ø5,0X250/50 FT, N/Estéril;
0211561-960 - Pino Ósseo Ø5,0X250/60 FT, N/Estéril;
0211561-970 - Pino Ósseo Ø5,0X250/70 FT, N/Estéril;
0211561-980 - Pino Ósseo Ø5,0X250/80 FT, N/Estéril;
0211562-000 - Pino Ósseo Ø5,0X90/30 TB, N/Estéril;
0211562-003 - Pino Ósseo Ø5,0X100/30 TB, N/Estéril;
0211562-004 - Pino Ósseo Ø5,0X100/40 TB, N/Estéril;
0211562-030 - Pino Ósseo Ø5,0X110/30 TB, N/Estéril;
0211562-040 - Pino Ósseo Ø5,0X110/40 TB, N/Estéril;
0211562-130 - Pino Ósseo Ø5,0X120/30 TB, N/Estéril;
0211562-140 - Pino Ósseo Ø5,0X120/40 TB, N/Estéril;
0211562-150 - Pino Ósseo Ø5,0X120/50 TB, N/Estéril;
0211562-230 - Pino Ósseo Ø5,0X130/30 TB, N/Estéril;
0211562-240 - Pino Ósseo Ø5,0X130/40 TB, N/Estéril;
0211562-250 - Pino Ósseo Ø5,0X130/50 TB, N/Estéril;
0211562-330 - Pino Ósseo Ø5,0X150/30 TB, N/Estéril;
0211562-340 - Pino Ósseo Ø5,0X150/40 TB, N/Estéril;
0211562-350 - Pino Ósseo Ø5,0X150/50 TB, N/Estéril;
0211562-360 - Pino Ósseo Ø5,0X150/60 TB, N/Estéril;
0211562-440 - Pino Ósseo Ø5,0X160/40 TB, N/Estéril;
0211562-450 - Pino Ósseo Ø5,0X160/50 TB, N/Estéril;
0211562-460 - Pino Ósseo Ø5,0X160/60 TB, N/Estéril;
0211562-540 - Pino Ósseo Ø5,0X170/40 TB, N/Estéril;
0211562-550 - Pino Ósseo Ø5,0X170/50 TB, N/Estéril;
0211562-560 - Pino Ósseo Ø5,0X170/60 TB, N/Estéril;
0211562-570 - Pino Ósseo Ø5,0X170/70 TB, N/Estéril;
0211562-640 - Pino Ósseo Ø5,0X180/40 TB, N/Estéril;
0211562-650 - Pino Ósseo Ø5,0X180/50 TB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211562-660 - Pino Ósseo Ø5,0X180/60 TB, N/Estéril;
0211562-670 - Pino Ósseo Ø5,0X180/70 TB, N/Estéril;
0211562-680 - Pino Ósseo Ø5,0X180/80 TB, N/Estéril;
0211562-750 - Pino Ósseo Ø5,0X200/50 TB, N/Estéril;
0211562-760 - Pino Ósseo Ø5,0X200/60 TB, N/Estéril;
0211562-770 - Pino Ósseo Ø5,0X200/70 TB, N/Estéril;
0211562-780 - Pino Ósseo Ø5,0X200/80 TB, N/Estéril;
0211562-850 - Pino Ósseo Ø5,0X220/50 TB, N/Estéril;
0211562-860 - Pino Ósseo Ø5,0X220/60 TB, N/Estéril;
0211562-870 - Pino Ósseo Ø5,0X220/70 TB, N/Estéril;
0211562-880 - Pino Ósseo Ø5,0X220/80 TB, N/Estéril;
0211562-950 - Pino Ósseo Ø5,0X250/50 TB, N/Estéril;
0211562-960 - Pino Ósseo Ø5,0X250/60 TB, N/Estéril;
0211562-970 - Pino Ósseo Ø5,0X250/70 TB, N/Estéril;
0211562-980 - Pino Ósseo Ø5,0X250/80 TB, N/Estéril;
0211563-000 - Pino Ósseo Ø5,0X90/30 FB, N/Estéril;
0211563-003 - Pino Ósseo Ø5,0X100/30 FB, N/Estéril;
0211563-004 - Pino Ósseo Ø5,0X100/40 FB, N/Estéril;
0211563-030 - Pino Ósseo Ø5,0X110/30 FB, N/Estéril;
0211563-040 - Pino Ósseo Ø5,0X110/40 FB, N/Estéril;
0211563-130 - Pino Ósseo Ø5,0X120/30 FB, N/Estéril;
0211563-140 - Pino Ósseo Ø5,0X120/40 FB, N/Estéril;
0211563-150 - Pino Ósseo Ø5,0X120/50 FB, N/Estéril;
0211563-230 - Pino Ósseo Ø5,0X130/30 FB, N/Estéril;
0211563-240 - Pino Ósseo Ø5,0X130/40 FB, N/Estéril;
0211563-250 - Pino Ósseo Ø5,0X130/50 FB, N/Estéril;
0211563-330 - Pino Ósseo Ø5,0X150/30 FB, N/Estéril;
0211563-340 - Pino Ósseo Ø5,0X150/40 FB, N/Estéril;
0211563-350 - Pino Ósseo Ø5,0X150/50 FB, N/Estéril;
0211563-360 - Pino Ósseo Ø5,0X150/60 FB, N/Estéril;
0211563-440 - Pino Ósseo Ø5,0X160/40 FB, N/Estéril;
0211563-450 - Pino Ósseo Ø5,0X160/50 FB, N/Estéril;
0211563-460 - Pino Ósseo Ø5,0X160/60 FB, N/Estéril;
0211563-540 - Pino Ósseo Ø5,0X170/40 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211563-550 - Pino Ósseo Ø5,0X170/50 FB, N/Estéril;
0211563-560 - Pino Ósseo Ø5,0X170/60 FB, N/Estéril;
0211563-570 - Pino Ósseo Ø5,0X170/70 FB, N/Estéril;
0211563-640 - Pino Ósseo Ø5,0X180/40 FB, N/Estéril;
0211563-650 - Pino Ósseo Ø5,0X180/50 FB, N/Estéril;
0211563-660 - Pino Ósseo Ø5,0X180/60 FB, N/Estéril;
0211563-670 - Pino Ósseo Ø5,0X180/70 FB, N/Estéril;
0211563-680 - Pino Ósseo Ø5,0X180/80 FB, N/Estéril;
0211563-750 - Pino Ósseo Ø5,0X200/50 FB, N/Estéril;
0211563-760 - Pino Ósseo Ø5,0X200/60 FB, N/Estéril;
0211563-770 - Pino Ósseo Ø5,0X200/70 FB, N/Estéril;
0211563-780 - Pino Ósseo Ø5,0X200/80 FB, N/Estéril;
0211563-850 - Pino Ósseo Ø5,0X220/50 FB, N/Estéril;
0211563-860 - Pino Ósseo Ø5,0X220/60 FB, N/Estéril;
0211563-870 - Pino Ósseo Ø5,0X220/70 FB, N/Estéril;
0211563-880 - Pino Ósseo Ø5,0X220/80 FB, N/Estéril;
0211563-950 - Pino Ósseo Ø5,0X250/50 FB, N/Estéril;
0211563-960 - Pino Ósseo Ø5,0X250/60 FB, N/Estéril;
0211563-970 - Pino Ósseo Ø5,0X250/70 FB, N/Estéril;
0211563-980 - Pino Ósseo Ø5,0X250/80 FB, N/Estéril;
0211570-330 - Pino Ósseo Ø5,0X150/30 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-340 - Pino Ósseo Ø5,0X150/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-350 - Pino Ósseo Ø5,0X150/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-360 - Pino Ósseo Ø5,0X150/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-440 - Pino Ósseo Ø5,0X160/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-450 - Pino Ósseo Ø5,0X160/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-460 - Pino Ósseo Ø5,0X160/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-540 - Pino Ósseo Ø5,0X170/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-550 - Pino Ósseo Ø5,0X170/50 TT, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211570-560 - Pino Ósseo Ø5,0X170/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-570 - Pino Ósseo Ø5,0X170/70 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-640 - Pino Ósseo Ø5,0X180/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-650 - Pino Ósseo Ø5,0X180/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-660 - Pino Ósseo Ø5,0X180/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-670 - Pino Ósseo Ø5,0X180/70 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-680 - Pino Ósseo Ø5,0X180/80 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-750 - Pino Ósseo Ø5,0X200/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-760 - Pino Ósseo Ø5,0X200/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-770 - Pino Ósseo Ø5,0X200/70 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-780 - Pino Ósseo Ø5,0X200/80 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-850 - Pino Ósseo Ø5,0X220/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-860 - Pino Ósseo Ø5,0X220/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-870 - Pino Ósseo Ø5,0X220/70 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-880 - Pino Ósseo Ø5,0X220/80 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-950 - Pino Ósseo Ø5,0X250/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-960 - Pino Ósseo Ø5,0X250/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-970 - Pino Ósseo Ø5,0X250/70 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211570-980 - Pino Ósseo Ø5,0X250/80 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-330 - Pino Ósseo Ø5,0X150/30 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-340 - Pino Ósseo Ø5,0X150/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-350 - Pino Ósseo Ø5,0X150/50 FT, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211571-360 - Pino Ósseo Ø5,0X150/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-440 - Pino Ósseo Ø5,0X160/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-450 - Pino Ósseo Ø5,0X160/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-460 - Pino Ósseo Ø5,0X160/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-540 - Pino Ósseo Ø5,0X170/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-550 - Pino Ósseo Ø5,0X170/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-560 - Pino Ósseo Ø5,0X170/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-570 - Pino Ósseo Ø5,0X170/70 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-640 - Pino Ósseo Ø5,0X180/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-650 - Pino Ósseo Ø5,0X180/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-660 - Pino Ósseo Ø5,0X180/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-670 - Pino Ósseo Ø5,0X180/70 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-680 - Pino Ósseo Ø5,0X180/80 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-750 - Pino Ósseo Ø5,0X200/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-760 - Pino Ósseo Ø5,0X200/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-770 - Pino Ósseo Ø5,0X200/70 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-780 - Pino Ósseo Ø5,0X200/80 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-850 - Pino Ósseo Ø5,0X220/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-860 - Pino Ósseo Ø5,0X220/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-870 - Pino Ósseo Ø5,0X220/70 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-880 - Pino Ósseo Ø5,0X220/80 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-950 - Pino Ósseo Ø5,0X250/50 FT, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211571-960 - Pino Ósseo Ø5,0X250/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-970 - Pino Ósseo Ø5,0X250/70 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211571-980 - Pino Ósseo Ø5,0X250/80 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211572-330 - Pino Ósseo Ø5,0X150/30 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-340 - Pino Ósseo Ø5,0X150/40 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-350 - Pino Ósseo Ø5,0X150/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-360 - Pino Ósseo Ø5,0X150/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-440 - Pino Ósseo Ø5,0X160/40 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-450 - Pino Ósseo Ø5,0X160/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-460 - Pino Ósseo Ø5,0X160/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-540 - Pino Ósseo Ø5,0X170/40 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-550 - Pino Ósseo Ø5,0X170/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-560 - Pino Ósseo Ø5,0X170/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-570 - Pino Ósseo Ø5,0X170/70 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-640 - Pino Ósseo Ø5,0X180/40 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-650 - Pino Ósseo Ø5,0X180/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-660 - Pino Ósseo Ø5,0X180/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-670 - Pino Ósseo Ø5,0X180/70 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-680 - Pino Ósseo Ø5,0X180/80 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-750 - Pino Ósseo Ø5,0X200/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-760 - Pino Ósseo Ø5,0X200/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-770 - Pino Ósseo Ø5,0X200/70 TB, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211572-780 - Pino Ósseo Ø5,0X200/80 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-850 - Pino Ósseo Ø5,0X220/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-860 - Pino Ósseo Ø5,0X220/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-870 - Pino Ósseo Ø5,0X220/70 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-880 - Pino Ósseo Ø5,0X220/80 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-950 - Pino Ósseo Ø5,0X250/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-960 - Pino Ósseo Ø5,0X250/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-970 - Pino Ósseo Ø5,0X250/70 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211572-980 - Pino Ósseo Ø5,0X250/80 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-330 - Pino Ósseo Ø5,0X150/30 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-340 - Pino Ósseo Ø5,0X150/40 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-350 - Pino Ósseo Ø5,0X150/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-360 - Pino Ósseo Ø5,0X150/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-440 - Pino Ósseo Ø5,0X160/40 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-450 - Pino Ósseo Ø5,0X160/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-460 - Pino Ósseo Ø5,0X160/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-540 - Pino Ósseo Ø5,0X170/40 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-550 - Pino Ósseo Ø5,0X170/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-560 - Pino Ósseo Ø5,0X170/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-570 - Pino Ósseo Ø5,0X170/70 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-640 - Pino Ósseo Ø5,0X180/40 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-650 - Pino Ósseo Ø5,0X180/50 FB, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211573-660 - Pino Ósseo Ø5,0X180/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-670 - Pino Ósseo Ø5,0X180/70 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-680 - Pino Ósseo Ø5,0X180/80 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-750 - Pino Ósseo Ø5,0X200/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-760 - Pino Ósseo Ø5,0X200/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-770 - Pino Ósseo Ø5,0X200/70 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-780 - Pino Ósseo Ø5,0X200/80 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-850 - Pino Ósseo Ø5,0X220/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-860 - Pino Ósseo Ø5,0X220/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-870 - Pino Ósseo Ø5,0X220/70 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-880 - Pino Ósseo Ø5,0X220/80 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-950 - Pino Ósseo Ø5,0X250/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-960 - Pino Ósseo Ø5,0X250/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-970 - Pino Ósseo Ø5,0X250/70 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211573-980 - Pino Ósseo Ø5,0X250/80 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211600-020 - Pino Ósseo Ø6,0X50, Rosca Ø3,5-3,0X20 T, N/Estéril;
0211600-120 - Pino Ósseo Ø6,0X60, Rosca Ø3,5-3,0X20 T, N/Estéril;
0211600-125 - Pino Ósseo Ø6,0X60, Rosca Ø3,5-3,0X25 T, N/Estéril;
0211600-220 - Pino Ósseo Ø6,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X20 T, N/Estéril;
0211600-225 - Pino Ósseo Ø6,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X25 T, N/Estéril;
0211600-230 - Pino Ósseo Ø6,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X30 T, N/Estéril;
0211600-320 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X20 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211600-325 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X25 T, N/Estéril;
0211600-330 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X30 T, N/Estéril;
0211600-335 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X35 T, N/Estéril;
0211600-430 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X30 T, N/Estéril;
0211600-435 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X35 T, N/Estéril;
0211600-440 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X40 T, N/Estéril;
0211600-530 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X30 T, N/Estéril;
0211600-535 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X35 T, N/Estéril;
0211600-540 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X40 T, N/Estéril;
0211600-545 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X45 T, N/Estéril;
0211600-550 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X50 T, N/Estéril;
0211600-620 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X20 T, N/Estéril;
0211600-625 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X25 T, N/Estéril;
0211600-630 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X30 T, N/Estéril;
0211600-635 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X35 T, N/Estéril;
0211600-640 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X40 T, N/Estéril;
0211600-645 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X45 T, N/Estéril;
0211600-650 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X50 T, N/Estéril;
0211600-740 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X40 T, N/Estéril;
0211600-745 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X45 T, N/Estéril;
0211600-750 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X50 T, N/Estéril;
0211601-020 - Pino Ósseo Ø6,0X50, Rosca Ø3,5-3,0X20 F, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211601-120 - Pino Ósseo Ø6,0X60, Rosca Ø3,5-3,0X20 F, N/Estéril;
0211601-125 - Pino Ósseo Ø6,0X60, Rosca Ø3,5-3,0X25 F, N/Estéril;
0211601-220 - Pino Ósseo Ø6,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X20 F, N/Estéril;
0211601-225 - Pino Ósseo Ø6,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X25 F, N/Estéril;
0211601-230 - Pino Ósseo Ø6,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X30 F, N/Estéril;
0211601-320 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X20 F, N/Estéril;
0211601-325 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X25 F, N/Estéril;
0211601-330 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X30 F, N/Estéril;
0211601-335 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X35 F, N/Estéril;
0211601-430 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X30 F, N/Estéril;
0211601-435 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X35 F, N/Estéril;
0211601-440 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X40 F, N/Estéril;
0211601-530 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X30 F, N/Estéril;
0211601-535 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X35 F, N/Estéril;
0211601-540 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X40 F, N/Estéril;
0211601-545 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X45 F, N/Estéril;
0211601-550 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X50 F, N/Estéril;
0211601-620 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X20 F, N/Estéril;
0211601-625 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X25 F, N/Estéril;
0211601-630 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X30 F, N/Estéril;
0211601-635 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X35 F, N/Estéril;
0211601-640 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X40 F, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211601-645 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X45 F, N/Estéril;
0211601-650 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X50 F, N/Estéril;
0211601-740 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X40 F, N/Estéril;
0211601-745 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X45 F, N/Estéril;
0211601-750 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X50 F, N/Estéril;
0211602-020 - Pino Ósseo Ø6,0X50, Rosca Ø3,5-3,0X20 TT, N/Estéril;
0211602-120 - Pino Ósseo Ø6,0X60, Rosca Ø3,5-3,0X20 TT, N/Estéril;
0211602-125 - Pino Ósseo Ø6,0X60, Rosca Ø3,5-3,0X25 TT, N/Estéril;
0211602-220 - Pino Ósseo Ø6,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X20 TT, N/Estéril;
0211602-225 - Pino Ósseo Ø6,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X25 TT, N/Estéril;
0211602-230 - Pino Ósseo Ø6,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X30 TT, N/Estéril;
0211602-320 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X20 TT, N/Estéril;
0211602-325 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X25 TT, N/Estéril;
0211602-330 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X30 TT, N/Estéril;
0211602-335 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X35 TT, N/Estéril;
0211602-430 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X30 TT, N/Estéril;
0211602-435 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X35 TT, N/Estéril;
0211602-440 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X40 TT, N/Estéril;
0211602-530 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X30 TT, N/Estéril;
0211602-535 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X35 TT, N/Estéril;
0211602-540 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X40 TT, N/Estéril;
0211602-545 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X45 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211602-550 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X50 TT, N/Estéril;
0211602-620 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X20 TT, N/Estéril;
0211602-625 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X25 TT, N/Estéril;
0211602-630 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X30 TT, N/Estéril;
0211602-635 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X35 TT, N/Estéril;
0211602-640 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X40 TT, N/Estéril;
0211602-645 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X45 TT, N/Estéril;
0211602-650 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X50 TT, N/Estéril;
0211602-740 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X40 TT, N/Estéril;
0211602-745 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X45 TT, N/Estéril;
0211602-750 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X50 TT, N/Estéril;
0211603-020 - Pino Ósseo Ø6,0X50, Rosca Ø3,5-3,0X20 FT, N/Estéril;
0211603-120 - Pino Ósseo Ø6,0X60, Rosca Ø3,5-3,0X20 FT, N/Estéril;
0211603-125 - Pino Ósseo Ø6,0X60, Rosca Ø3,5-3,0X25 FT, N/Estéril;
0211603-220 - Pino Ósseo Ø6,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X20 FT, N/Estéril;
0211603-225 - Pino Ósseo Ø6,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X25 FT, N/Estéril;
0211603-230 - Pino Ósseo Ø6,0X70, Rosca Ø3,5-3,0X30 FT, N/Estéril;
0211603-320 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X20 FT, N/Estéril;
0211603-325 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X25 FT, N/Estéril;
0211603-330 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X30 FT, N/Estéril;
0211603-335 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø3,5-3,0X35 FT, N/Estéril;
0211603-430 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X30 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211603-435 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X35 FT, N/Estéril;
0211603-440 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø3,5-3,0X40 FT, N/Estéril;
0211603-530 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X30 FT, N/Estéril;
0211603-535 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X35 FT, N/Estéril;
0211603-540 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X40 FT, N/Estéril;
0211603-545 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X45 FT, N/Estéril;
0211603-550 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø3,5-3,0X50 FT, N/Estéril;
0211603-620 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X20 FT, N/Estéril;
0211603-625 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X25 FT, N/Estéril;
0211603-630 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X30 FT, N/Estéril;
0211603-635 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X35 FT, N/Estéril;
0211603-640 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X40 FT, N/Estéril;
0211603-645 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X45 FT, N/Estéril;
0211603-650 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X50 FT, N/Estéril;
0211603-740 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X40 FT, N/Estéril;
0211603-745 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X45 FT, N/Estéril;
0211603-750 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X50 FT, N/Estéril;
0211610-620 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X20 T, Calibrado, N/Est.;
0211610-625 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X25 T, Calibrado, N/Est.;
0211610-630 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X30 T, Calibrado, N/Est.;
0211610-635 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X35 T, Calibrado, N/Est.;
0211610-640 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X40 T, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211610-645 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X45 T, Calibrado, N/Est.;
0211610-650 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211610-740 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211610-745 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X45 T, Calibrado, N/Est.;
0211610-750 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211611-620 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X20 F, Calibrado, N/Est.;
0211611-625 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X25 F, Calibrado, N/Est.;
0211611-630 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X30 F, Calibrado, N/Est.;
0211611-635 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X35 F, Calibrado, N/Est.;
0211611-640 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211611-645 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X45 F, Calibrado, N/Est.;
0211611-650 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211611-740 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211611-745 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X45 F, Calibrado, N/Est.;
0211611-750 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211612-620 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X20 TT, Calibrado, N/Est.;
0211612-625 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X25 TT, Calibrado, N/Est.;
0211612-630 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211612-635 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211612-640 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211612-645 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X45 TT, Calibrado, N/Est.;
0211612-650 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211612-740 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211612-745 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X45 TT, Calibrado, N/Est.;
0211612-750 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211613-620 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X20 FT, Calibrado, N/Est.;
0211613-625 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X25 FT, Calibrado, N/Est.;
0211613-630 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211613-635 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211613-640 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211613-645 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X45 FT, Calibrado, N/Est.;
0211613-650 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø3,5-3,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211613-740 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211613-745 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X45 FT, Calibrado, N/Est.;
0211613-750 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø3,5-3,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211620-003 - Pino Ósseo Ø6,0X70, Rosca Ø4,5-3,5X30 T, N/Estéril;
0211620-030 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X30 T, N/Estéril;
0211620-040 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, N/Estéril;
0211620-130 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X30 T, N/Estéril;
0211620-140 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, N/Estéril;
0211620-240 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, N/Estéril;
0211620-250 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, N/Estéril;
0211620-340 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, N/Estéril;
0211620-350 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211620-420 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 T, N/Estéril;
0211620-425 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 T, N/Estéril;
0211620-430 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 T, N/Estéril;
0211620-435 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 T, N/Estéril;
0211620-440 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, N/Estéril;
0211620-450 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, N/Estéril;
0211620-460 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, N/Estéril;
0211620-540 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, N/Estéril;
0211620-550 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, N/Estéril;
0211620-560 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, N/Estéril;
0211620-640 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, N/Estéril;
0211620-650 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, N/Estéril;
0211620-660 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, N/Estéril;
0211620-670 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 T, N/Estéril;
0211620-740 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, N/Estéril;
0211620-750 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, N/Estéril;
0211620-760 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, N/Estéril;
0211620-770 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 T, N/Estéril;
0211620-780 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 T, N/Estéril;
0211620-850 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, N/Estéril;
0211620-860 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, N/Estéril;
0211620-870 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211620-880 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 T, N/Estéril;
0211620-950 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, N/Estéril;
0211620-960 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, N/Estéril;
0211620-970 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 T, N/Estéril;
0211620-980 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 T, N/Estéril;
0211621-003 - Pino Ósseo Ø6,0X70, Rosca Ø4,5-3,5X30 F, N/Estéril;
0211621-030 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X30 F, N/Estéril;
0211621-040 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, N/Estéril;
0211621-130 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X30 F, N/Estéril;
0211621-140 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, N/Estéril;
0211621-240 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, N/Estéril;
0211621-250 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, N/Estéril;
0211621-340 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, N/Estéril;
0211621-350 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, N/Estéril;
0211621-420 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 F, N/Estéril;
0211621-425 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 F, N/Estéril;
0211621-430 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 F, N/Estéril;
0211621-435 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 F, N/Estéril;
0211621-440 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, N/Estéril;
0211621-450 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, N/Estéril;
0211621-460 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, N/Estéril;
0211621-540 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211621-550 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, N/Estéril;
0211621-560 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, N/Estéril;
0211621-640 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, N/Estéril;
0211621-650 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, N/Estéril;
0211621-660 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, N/Estéril;
0211621-670 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 F, N/Estéril;
0211621-740 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, N/Estéril;
0211621-750 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, N/Estéril;
0211621-760 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, N/Estéril;
0211621-770 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 F, N/Estéril;
0211621-780 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 F, N/Estéril;
0211621-850 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, N/Estéril;
0211621-860 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, N/Estéril;
0211621-870 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 F, N/Estéril;
0211621-880 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 F, N/Estéril;
0211621-950 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, N/Estéril;
0211621-960 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, N/Estéril;
0211621-970 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 F, N/Estéril;
0211621-980 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 F, N/Estéril;
0211622-003 - Pino Ósseo Ø6,0X70, Rosca Ø4,5-3,5X30 TT, N/Estéril;
0211622-030 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X30 TT, N/Estéril;
0211622-040 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211622-130 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X30 TT, N/Estéril;
0211622-140 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, N/Estéril;
0211622-240 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, N/Estéril;
0211622-250 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, N/Estéril;
0211622-340 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, N/Estéril;
0211622-350 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, N/Estéril;
0211622-420 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 TT, N/Estéril;
0211622-425 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 TT, N/Estéril;
0211622-430 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 TT, N/Estéril;
0211622-435 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 TT, N/Estéril;
0211622-440 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, N/Estéril;
0211622-450 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, N/Estéril;
0211622-460 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, N/Estéril;
0211622-540 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, N/Estéril;
0211622-550 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, N/Estéril;
0211622-560 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, N/Estéril;
0211622-640 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, N/Estéril;
0211622-650 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, N/Estéril;
0211622-660 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, N/Estéril;
0211622-670 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 TT, N/Estéril;
0211622-740 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, N/Estéril;
0211622-750 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211622-760 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, N/Estéril;
0211622-770 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 TT, N/Estéril;
0211622-780 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 TT, N/Estéril;
0211622-850 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, N/Estéril;
0211622-860 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, N/Estéril;
0211622-870 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 TT, N/Estéril;
0211622-880 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 TT, N/Estéril;
0211622-950 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, N/Estéril;
0211622-960 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, N/Estéril;
0211622-970 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 TT, N/Estéril;
0211622-980 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 TT, N/Estéril;
0211623-003 - Pino Ósseo Ø6,0X70, Rosca Ø4,5-3,5X30 FT, N/Estéril;
0211623-030 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X30 FT, N/Estéril;
0211623-040 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, N/Estéril;
0211623-130 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X30 FT, N/Estéril;
0211623-140 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, N/Estéril;
0211623-240 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, N/Estéril;
0211623-250 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, N/Estéril;
0211623-340 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, N/Estéril;
0211623-350 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, N/Estéril;
0211623-420 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 FT, N/Estéril;
0211623-425 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211623-430 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 FT, N/Estéril;
0211623-435 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 FT, N/Estéril;
0211623-440 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, N/Estéril;
0211623-450 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, N/Estéril;
0211623-460 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, N/Estéril;
0211623-540 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, N/Estéril;
0211623-550 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, N/Estéril;
0211623-560 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, N/Estéril;
0211623-640 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, N/Estéril;
0211623-650 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, N/Estéril;
0211623-660 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, N/Estéril;
0211623-670 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 FT, N/Estéril;
0211623-740 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, N/Estéril;
0211623-750 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, N/Estéril;
0211623-760 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, N/Estéril;
0211623-770 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 FT, N/Estéril;
0211623-780 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 FT, N/Estéril;
0211623-850 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, N/Estéril;
0211623-860 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, N/Estéril;
0211623-870 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 FT, N/Estéril;
0211623-880 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 FT, N/Estéril;
0211623-950 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211623-960 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, N/Estéril;
0211623-970 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 FT, N/Estéril;
0211623-980 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 FT, N/Estéril;
0211624-003 - Pino Ósseo Ø6,0X70, Rosca Ø4,5-3,5X30 TB, N/Estéril;
0211624-030 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X30 TB, N/Estéril;
0211624-040 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, N/Estéril;
0211624-130 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X30 TB, N/Estéril;
0211624-140 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, N/Estéril;
0211624-240 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, N/Estéril;
0211624-250 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, N/Estéril;
0211624-340 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, N/Estéril;
0211624-350 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, N/Estéril;
0211624-420 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 TB, N/Estéril;
0211624-425 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 TB, N/Estéril;
0211624-430 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 TB, N/Estéril;
0211624-435 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 TB, N/Estéril;
0211624-440 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, N/Estéril;
0211624-450 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, N/Estéril;
0211624-460 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, N/Estéril;
0211624-540 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, N/Estéril;
0211624-550 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, N/Estéril;
0211624-560 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211624-640 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, N/Estéril;
0211624-650 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, N/Estéril;
0211624-660 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, N/Estéril;
0211624-670 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 TB, N/Estéril;
0211624-740 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, N/Estéril;
0211624-750 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, N/Estéril;
0211624-760 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, N/Estéril;
0211624-770 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 TB, N/Estéril;
0211624-780 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 TB, N/Estéril;
0211624-850 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, N/Estéril;
0211624-860 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, N/Estéril;
0211624-870 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 TB, N/Estéril;
0211624-880 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 TB, N/Estéril;
0211624-950 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, N/Estéril;
0211624-960 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, N/Estéril;
0211624-970 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 TB, N/Estéril;
0211624-980 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 TB, N/Estéril;
0211625-003 - Pino Ósseo Ø6,0X70, Rosca Ø4,5-3,5X30 FB, N/Estéril;
0211625-030 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X30 FB, N/Estéril;
0211625-040 - Pino Ósseo Ø6,0X80, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, N/Estéril;
0211625-130 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X30 FB, N/Estéril;
0211625-140 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211625-240 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, N/Estéril;
0211625-250 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, N/Estéril;
0211625-340 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, N/Estéril;
0211625-350 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, N/Estéril;
0211625-420 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 FB, N/Estéril;
0211625-425 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 FB, N/Estéril;
0211625-430 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 FB, N/Estéril;
0211625-435 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 FB, N/Estéril;
0211625-440 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, N/Estéril;
0211625-450 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, N/Estéril;
0211625-460 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, N/Estéril;
0211625-540 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, N/Estéril;
0211625-550 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, N/Estéril;
0211625-560 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, N/Estéril;
0211625-640 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, N/Estéril;
0211625-650 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, N/Estéril;
0211625-660 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, N/Estéril;
0211625-670 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 FB, N/Estéril;
0211625-740 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, N/Estéril;
0211625-750 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, N/Estéril;
0211625-760 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, N/Estéril;
0211625-770 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211625-780 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 FB, N/Estéril;
0211625-850 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, N/Estéril;
0211625-860 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, N/Estéril;
0211625-870 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 FB, N/Estéril;
0211625-880 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 FB, N/Estéril;
0211625-950 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, N/Estéril;
0211625-960 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, N/Estéril;
0211625-970 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 FB, N/Estéril;
0211625-980 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 FB, N/Estéril;
0211630-420 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-425 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-430 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-435 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-440 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-450 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-460 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-540 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-550 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-560 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-640 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-650 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-660 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211630-670 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-740 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-750 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-760 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-770 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-780 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-850 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-860 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-870 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-880 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-950 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-960 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-970 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211630-980 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211631-420 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-425 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-430 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-435 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-440 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-450 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-460 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-540 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211631-550 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-560 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-640 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-650 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-660 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-670 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-740 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-750 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-760 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-770 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-780 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-850 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-860 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-870 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-880 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-950 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-960 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-970 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211631-980 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211632-420 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-425 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-430 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 TT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211632-435 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-440 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-450 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-460 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-540 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-550 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-560 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-640 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-650 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-660 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-670 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-740 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-750 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-760 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-770 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-780 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-850 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-860 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-870 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-880 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-950 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-960 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 TT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211632-970 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211632-980 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211633-420 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-425 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-430 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-435 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-440 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-450 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-460 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-540 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-550 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-560 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-640 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-650 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-660 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-670 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-740 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-750 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-760 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-770 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-780 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-850 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211633-860 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-870 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-880 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-950 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-960 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-970 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211633-980 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211634-420 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-425 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-430 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-435 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-440 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-450 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-460 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-540 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-550 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-560 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-640 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-650 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-660 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-670 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-740 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 TB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211634-750 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-760 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-770 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-780 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-850 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-860 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-870 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-880 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-950 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-960 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-970 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211634-980 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211635-420 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X20 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-425 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X25 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-430 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X30 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-435 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X35 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-440 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-450 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-460 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-540 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-550 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-560 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211635-640 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-650 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-660 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-670 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø4,5-3,5X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-740 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-750 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-760 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-770 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-780 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø4,5-3,5X80 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-850 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-860 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-870 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-880 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø4,5-3,5X80 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-950 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-960 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-970 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211635-980 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø4,5-3,5X80 FB, Calibrado, N/Est.;
0211640-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, N/Estéril;
0211640-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, N/Estéril;
0211640-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, N/Estéril;
0211640-103 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, N/Estéril;
0211640-104 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211640-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, N/Estéril;
0211640-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, N/Estéril;
0211640-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, N/Estéril;
0211640-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, N/Estéril;
0211640-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, N/Estéril;
0211640-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, N/Estéril;
0211640-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, N/Estéril;
0211640-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, N/Estéril;
0211640-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, N/Estéril;
0211640-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, N/Estéril;
0211640-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, N/Estéril;
0211640-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, N/Estéril;
0211640-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, N/Estéril;
0211640-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, N/Estéril;
0211640-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, N/Estéril;
0211640-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, N/Estéril;
0211640-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 T, N/Estéril;
0211640-620 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X20 T, N/Estéril;
0211640-625 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X25 T, N/Estéril;
0211640-630 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, N/Estéril;
0211640-635 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X35 T, N/Estéril;
0211640-640 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211640-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, N/Estéril;
0211640-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, N/Estéril;
0211640-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 T, N/Estéril;
0211640-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 T, N/Estéril;
0211640-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 T, N/Estéril;
0211640-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 T, N/Estéril;
0211640-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, N/Estéril;
0211640-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 T, N/Estéril;
0211640-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, N/Estéril;
0211640-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, N/Estéril;
0211640-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, N/Estéril;
0211640-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 T, N/Estéril;
0211640-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 T, N/Estéril;
0211640-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 T, N/Estéril;
0211640-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 T, N/Estéril;
0211640-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, N/Estéril;
0211640-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 T, N/Estéril;
0211640-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, N/Estéril;
0211640-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, N/Estéril;
0211640-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, N/Estéril;
0211640-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 T, N/Estéril;
0211640-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211640-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, N/Estéril;
0211640-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, N/Estéril;
0211640-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 T, N/Estéril;
0211640-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 T, N/Estéril;
0211641-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, N/Estéril;
0211641-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, N/Estéril;
0211641-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, N/Estéril;
0211641-103 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, N/Estéril;
0211641-104 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, N/Estéril;
0211641-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, N/Estéril;
0211641-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, N/Estéril;
0211641-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, N/Estéril;
0211641-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, N/Estéril;
0211641-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, N/Estéril;
0211641-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, N/Estéril;
0211641-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, N/Estéril;
0211641-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, N/Estéril;
0211641-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, N/Estéril;
0211641-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, N/Estéril;
0211641-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, N/Estéril;
0211641-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, N/Estéril;
0211641-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211641-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, N/Estéril;
0211641-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, N/Estéril;
0211641-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, N/Estéril;
0211641-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 F, N/Estéril;
0211641-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X20 F, N/Estéril;
0211641-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X25 F, N/Estéril;
0211641-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, N/Estéril;
0211641-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X35 F, N/Estéril;
0211641-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, N/Estéril;
0211641-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, N/Estéril;
0211641-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, N/Estéril;
0211641-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 F, N/Estéril;
0211641-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 F, N/Estéril;
0211641-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 F, N/Estéril;
0211641-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 F, N/Estéril;
0211641-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, N/Estéril;
0211641-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 F, N/Estéril;
0211641-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, N/Estéril;
0211641-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, N/Estéril;
0211641-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, N/Estéril;
0211641-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 F, N/Estéril;
0211641-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 F, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211641-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 F, N/Estéril;
0211641-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 F, N/Estéril;
0211641-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, N/Estéril;
0211641-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 F, N/Estéril;
0211641-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, N/Estéril;
0211641-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, N/Estéril;
0211641-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, N/Estéril;
0211641-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 F, N/Estéril;
0211641-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 F, N/Estéril;
0211641-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, N/Estéril;
0211641-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, N/Estéril;
0211641-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 F, N/Estéril;
0211641-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 F, N/Estéril;
0211642-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, N/Estéril;
0211642-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, N/Estéril;
0211642-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, N/Estéril;
0211642-103 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, N/Estéril;
0211642-104 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, N/Estéril;
0211642-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, N/Estéril;
0211642-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, N/Estéril;
0211642-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, N/Estéril;
0211642-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211642-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, N/Estéril;
0211642-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, N/Estéril;
0211642-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, N/Estéril;
0211642-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, N/Estéril;
0211642-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, N/Estéril;
0211642-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, N/Estéril;
0211642-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, N/Estéril;
0211642-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, N/Estéril;
0211642-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, N/Estéril;
0211642-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, N/Estéril;
0211642-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, N/Estéril;
0211642-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, N/Estéril;
0211642-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 TT, N/Estéril;
0211642-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X20 TT, N/Estéril;
0211642-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X25 TT, N/Estéril;
0211642-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, N/Estéril;
0211642-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X35 TT, N/Estéril;
0211642-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, N/Estéril;
0211642-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, N/Estéril;
0211642-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, N/Estéril;
0211642-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 TT, N/Estéril;
0211642-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211642-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 TT, N/Estéril;
0211642-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 TT, N/Estéril;
0211642-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, N/Estéril;
0211642-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 TT, N/Estéril;
0211642-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, N/Estéril;
0211642-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, N/Estéril;
0211642-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, N/Estéril;
0211642-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 TT, N/Estéril;
0211642-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 TT, N/Estéril;
0211642-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 TT, N/Estéril;
0211642-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 TT, N/Estéril;
0211642-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, N/Estéril;
0211642-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 TT, N/Estéril;
0211642-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, N/Estéril;
0211642-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, N/Estéril;
0211642-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, N/Estéril;
0211642-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 TT, N/Estéril;
0211642-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 TT, N/Estéril;
0211642-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, N/Estéril;
0211642-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, N/Estéril;
0211642-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 TT, N/Estéril;
0211642-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211643-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, N/Estéril;
0211643-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, N/Estéril;
0211643-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, N/Estéril;
0211643-103 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, N/Estéril;
0211643-104 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, N/Estéril;
0211643-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, N/Estéril;
0211643-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, N/Estéril;
0211643-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, N/Estéril;
0211643-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, N/Estéril;
0211643-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, N/Estéril;
0211643-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, N/Estéril;
0211643-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, N/Estéril;
0211643-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, N/Estéril;
0211643-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, N/Estéril;
0211643-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, N/Estéril;
0211643-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, N/Estéril;
0211643-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, N/Estéril;
0211643-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, N/Estéril;
0211643-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, N/Estéril;
0211643-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, N/Estéril;
0211643-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, N/Estéril;
0211643-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211643-620 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X20 FT, N/Estéril;
0211643-625 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X25 FT, N/Estéril;
0211643-630 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, N/Estéril;
0211643-635 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X35 FT, N/Estéril;
0211643-640 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, N/Estéril;
0211643-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, N/Estéril;
0211643-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, N/Estéril;
0211643-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 FT, N/Estéril;
0211643-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 FT, N/Estéril;
0211643-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 FT, N/Estéril;
0211643-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 FT, N/Estéril;
0211643-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, N/Estéril;
0211643-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 FT, N/Estéril;
0211643-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, N/Estéril;
0211643-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, N/Estéril;
0211643-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, N/Estéril;
0211643-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 FT, N/Estéril;
0211643-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 FT, N/Estéril;
0211643-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 FT, N/Estéril;
0211643-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 FT, N/Estéril;
0211643-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, N/Estéril;
0211643-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211643-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, N/Estéril;
0211643-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, N/Estéril;
0211643-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, N/Estéril;
0211643-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 FT, N/Estéril;
0211643-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 FT, N/Estéril;
0211643-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, N/Estéril;
0211643-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, N/Estéril;
0211643-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 FT, N/Estéril;
0211643-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 FT, N/Estéril;
0211644-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, N/Estéril;
0211644-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, N/Estéril;
0211644-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, N/Estéril;
0211644-103 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, N/Estéril;
0211644-104 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, N/Estéril;
0211644-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, N/Estéril;
0211644-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, N/Estéril;
0211644-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, N/Estéril;
0211644-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, N/Estéril;
0211644-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, N/Estéril;
0211644-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, N/Estéril;
0211644-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, N/Estéril;
0211644-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211644-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, N/Estéril;
0211644-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, N/Estéril;
0211644-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, N/Estéril;
0211644-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, N/Estéril;
0211644-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, N/Estéril;
0211644-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, N/Estéril;
0211644-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, N/Estéril;
0211644-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, N/Estéril;
0211644-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 TB, N/Estéril;
0211644-620 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X20 TB, N/Estéril;
0211644-625 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X25 TB, N/Estéril;
0211644-630 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, N/Estéril;
0211644-635 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X35 TB, N/Estéril;
0211644-640 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, N/Estéril;
0211644-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, N/Estéril;
0211644-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, N/Estéril;
0211644-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 TB, N/Estéril;
0211644-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 TB, N/Estéril;
0211644-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 TB, N/Estéril;
0211644-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 TB, N/Estéril;
0211644-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, N/Estéril;
0211644-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 TB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211644-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, N/Estéril;
0211644-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, N/Estéril;
0211644-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, N/Estéril;
0211644-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 TB, N/Estéril;
0211644-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 TB, N/Estéril;
0211644-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 TB, N/Estéril;
0211644-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 TB, N/Estéril;
0211644-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, N/Estéril;
0211644-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 TB, N/Estéril;
0211644-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, N/Estéril;
0211644-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, N/Estéril;
0211644-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, N/Estéril;
0211644-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 TB, N/Estéril;
0211644-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 TB, N/Estéril;
0211644-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, N/Estéril;
0211644-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, N/Estéril;
0211644-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 TB, N/Estéril;
0211644-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 TB, N/Estéril;
0211645-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, N/Estéril;
0211645-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, N/Estéril;
0211645-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, N/Estéril;
0211645-103 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211645-104 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, N/Estéril;
0211645-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, N/Estéril;
0211645-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, N/Estéril;
0211645-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, N/Estéril;
0211645-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, N/Estéril;
0211645-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, N/Estéril;
0211645-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, N/Estéril;
0211645-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, N/Estéril;
0211645-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, N/Estéril;
0211645-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, N/Estéril;
0211645-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, N/Estéril;
0211645-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, N/Estéril;
0211645-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, N/Estéril;
0211645-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, N/Estéril;
0211645-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, N/Estéril;
0211645-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, N/Estéril;
0211645-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, N/Estéril;
0211645-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 FB, N/Estéril;
0211645-620 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X20 FB, N/Estéril;
0211645-625 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X25 FB, N/Estéril;
0211645-630 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, N/Estéril;
0211645-635 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X35 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211645-640 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, N/Estéril;
0211645-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, N/Estéril;
0211645-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, N/Estéril;
0211645-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 FB, N/Estéril;
0211645-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 FB, N/Estéril;
0211645-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 FB, N/Estéril;
0211645-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 FB, N/Estéril;
0211645-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, N/Estéril;
0211645-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 FB, N/Estéril;
0211645-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, N/Estéril;
0211645-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, N/Estéril;
0211645-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, N/Estéril;
0211645-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 FB, N/Estéril;
0211645-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 FB, N/Estéril;
0211645-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 FB, N/Estéril;
0211645-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 FB, N/Estéril;
0211645-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, N/Estéril;
0211645-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 FB, N/Estéril;
0211645-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, N/Estéril;
0211645-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, N/Estéril;
0211645-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, N/Estéril;
0211645-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211645-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 FB, N/Estéril;
0211645-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, N/Estéril;
0211645-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, N/Estéril;
0211645-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 FB, N/Estéril;
0211645-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 FB, N/Estéril;
0211650-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-620 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X20 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-625 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X25 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-630 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-635 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X35 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-640 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211650-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 T, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211650-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211650-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211651-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-620 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X20 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-625 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X25 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-630 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-635 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X35 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-640 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 F, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211651-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211651-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 F, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211651-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211652-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-620 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X20 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-625 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X25 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-630 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-635 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-640 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 TT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211652-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211652-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211653-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211653-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-620 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X20 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-625 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X25 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-630 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-635 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-640 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211653-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211653-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211654-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211654-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-620 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X20 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-625 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X25 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-630 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-635 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X35 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-640 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211654-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211654-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211655-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211655-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø5,0-4,0X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-620 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X20 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-625 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X25 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-630 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-635 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X35 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-640 - Pino Ósseo Ø6,0x180, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø5,0-4,0X80 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X20 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X25 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X35 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211655-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø5,0-4,0X80 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X20 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X25 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X30 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X35 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø5,0-4,0X80 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211655-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø5,0-4,0X80 FB, Calibrado, N/Est.;
0211660-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø6,0-5,0X30 T, N/Estéril;
0211660-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,0X30 T, N/Estéril;
0211660-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,0X40 T, N/Estéril;
0211660-103 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,0X30 T, N/Estéril;
0211660-104 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,0X40 T, N/Estéril;
0211660-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,0X30 T, N/Estéril;
0211660-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,0X40 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211660-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,0X50 T, N/Estéril;
0211660-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,0X30 T, N/Estéril;
0211660-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,0X40 T, N/Estéril;
0211660-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,0X50 T, N/Estéril;
0211660-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X30 T, N/Estéril;
0211660-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X40 T, N/Estéril;
0211660-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X50 T, N/Estéril;
0211660-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X60 T, N/Estéril;
0211660-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X40 T, N/Estéril;
0211660-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X50 T, N/Estéril;
0211660-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X60 T, N/Estéril;
0211660-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X40 T, N/Estéril;
0211660-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X50 T, N/Estéril;
0211660-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X60 T, N/Estéril;
0211660-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X70 T, N/Estéril;
0211660-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X20 T, N/Estéril;
0211660-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X25 T, N/Estéril;
0211660-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X30 T, N/Estéril;
0211660-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X35 T, N/Estéril;
0211660-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X40 T, N/Estéril;
0211660-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X50 T, N/Estéril;
0211660-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X60 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211660-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X70 T, N/Estéril;
0211660-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X80 T, N/Estéril;
0211660-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X20 T, N/Estéril;
0211660-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X25 T, N/Estéril;
0211660-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X30 T, N/Estéril;
0211660-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X35 T, N/Estéril;
0211660-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X40 T, N/Estéril;
0211660-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X50 T, N/Estéril;
0211660-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X60 T, N/Estéril;
0211660-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X70 T, N/Estéril;
0211660-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X80 T, N/Estéril;
0211660-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X20 T, N/Estéril;
0211660-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X25 T, N/Estéril;
0211660-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X30 T, N/Estéril;
0211660-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X35 T, N/Estéril;
0211660-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X40 T, N/Estéril;
0211660-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X50 T, N/Estéril;
0211660-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X60 T, N/Estéril;
0211660-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X70 T, N/Estéril;
0211660-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X80 T, N/Estéril;
0211660-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X50 T, N/Estéril;
0211660-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X60 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211660-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X70 T, N/Estéril;
0211660-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X80 T, N/Estéril;
0211661-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø6,0-5,0X30 F, N/Estéril;
0211661-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,0X30 F, N/Estéril;
0211661-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,0X40 F, N/Estéril;
0211661-103 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,0X30 F, N/Estéril;
0211661-104 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,0X40 F, N/Estéril;
0211661-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,0X30 F, N/Estéril;
0211661-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,0X40 F, N/Estéril;
0211661-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,0X50 F, N/Estéril;
0211661-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,0X30 F, N/Estéril;
0211661-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,0X40 F, N/Estéril;
0211661-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,0X50 F, N/Estéril;
0211661-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X30 F, N/Estéril;
0211661-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X40 F, N/Estéril;
0211661-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X50 F, N/Estéril;
0211661-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X60 F, N/Estéril;
0211661-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X40 F, N/Estéril;
0211661-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X50 F, N/Estéril;
0211661-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X60 F, N/Estéril;
0211661-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X40 F, N/Estéril;
0211661-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X50 F, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211661-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X60 F, N/Estéril;
0211661-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X70 F, N/Estéril;
0211661-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X20 F, N/Estéril;
0211661-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X25 F, N/Estéril;
0211661-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X30 F, N/Estéril;
0211661-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X35 F, N/Estéril;
0211661-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X40 F, N/Estéril;
0211661-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X50 F, N/Estéril;
0211661-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X60 F, N/Estéril;
0211661-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X70 F, N/Estéril;
0211661-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X80 F, N/Estéril;
0211661-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X20 F, N/Estéril;
0211661-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X25 F, N/Estéril;
0211661-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X30 F, N/Estéril;
0211661-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X35 F, N/Estéril;
0211661-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X40 F, N/Estéril;
0211661-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X50 F, N/Estéril;
0211661-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X60 F, N/Estéril;
0211661-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X70 F, N/Estéril;
0211661-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X80 F, N/Estéril;
0211661-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X20 F, N/Estéril;
0211661-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X25 F, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211661-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X30 F, N/Estéril;
0211661-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X35 F, N/Estéril;
0211661-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X40 F, N/Estéril;
0211661-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X50 F, N/Estéril;
0211661-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X60 F, N/Estéril;
0211661-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X70 F, N/Estéril;
0211661-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X80 F, N/Estéril;
0211661-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X50 F, N/Estéril;
0211661-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X60 F, N/Estéril;
0211661-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X70 F, N/Estéril;
0211661-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X80 F, N/Estéril;
0211662-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø6,0-5,0X30 TT, N/Estéril;
0211662-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,0X30 TT, N/Estéril;
0211662-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,0X40 TT, N/Estéril;
0211662-103 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,0X30 TT, N/Estéril;
0211662-104 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,0X40 TT, N/Estéril;
0211662-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,0X30 TT, N/Estéril;
0211662-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,0X40 TT, N/Estéril;
0211662-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,0X50 TT, N/Estéril;
0211662-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,0X30 TT, N/Estéril;
0211662-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,0X40 TT, N/Estéril;
0211662-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,0X50 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211662-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X30 TT, N/Estéril;
0211662-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X40 TT, N/Estéril;
0211662-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X50 TT, N/Estéril;
0211662-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X60 TT, N/Estéril;
0211662-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X40 TT, N/Estéril;
0211662-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X50 TT, N/Estéril;
0211662-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X60 TT, N/Estéril;
0211662-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X40 TT, N/Estéril;
0211662-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X50 TT, N/Estéril;
0211662-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X60 TT, N/Estéril;
0211662-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X70 TT, N/Estéril;
0211662-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X20 TT, N/Estéril;
0211662-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X25 TT, N/Estéril;
0211662-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X30 TT, N/Estéril;
0211662-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X35 TT, N/Estéril;
0211662-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X40 TT, N/Estéril;
0211662-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X50 TT, N/Estéril;
0211662-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X60 TT, N/Estéril;
0211662-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X70 TT, N/Estéril;
0211662-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X80 TT, N/Estéril;
0211662-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X20 TT, N/Estéril;
0211662-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X25 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211662-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X30 TT, N/Estéril;
0211662-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X35 TT, N/Estéril;
0211662-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X40 TT, N/Estéril;
0211662-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X50 TT, N/Estéril;
0211662-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X60 TT, N/Estéril;
0211662-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X70 TT, N/Estéril;
0211662-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X80 TT, N/Estéril;
0211662-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X20 TT, N/Estéril;
0211662-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X25 TT, N/Estéril;
0211662-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X30 TT, N/Estéril;
0211662-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X35 TT, N/Estéril;
0211662-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X40 TT, N/Estéril;
0211662-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X50 TT, N/Estéril;
0211662-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X60 TT, N/Estéril;
0211662-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X70 TT, N/Estéril;
0211662-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X80 TT, N/Estéril;
0211662-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X50 TT, N/Estéril;
0211662-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X60 TT, N/Estéril;
0211662-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X70 TT, N/Estéril;
0211662-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X80 TT, N/Estéril;
0211663-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø6,0-5,0X30 FT, N/Estéril;
0211663-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,0X30 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211663-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,0X40 FT, N/Estéril;
0211663-103 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,0X30 FT, N/Estéril;
0211663-104 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,0X40 FT, N/Estéril;
0211663-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,0X30 FT, N/Estéril;
0211663-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,0X40 FT, N/Estéril;
0211663-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,0X50 FT, N/Estéril;
0211663-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,0X30 FT, N/Estéril;
0211663-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,0X40 FT, N/Estéril;
0211663-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,0X50 FT, N/Estéril;
0211663-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X30 FT, N/Estéril;
0211663-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X40 FT, N/Estéril;
0211663-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X50 FT, N/Estéril;
0211663-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X60 FT, N/Estéril;
0211663-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X40 FT, N/Estéril;
0211663-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X50 FT, N/Estéril;
0211663-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X60 FT, N/Estéril;
0211663-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X40 FT, N/Estéril;
0211663-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X50 FT, N/Estéril;
0211663-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X60 FT, N/Estéril;
0211663-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X70 FT, N/Estéril;
0211663-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X20 FT, N/Estéril;
0211663-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X25 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211663-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X30 FT, N/Estéril;
0211663-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X35 FT, N/Estéril;
0211663-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X40 FT, N/Estéril;
0211663-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X50 FT, N/Estéril;
0211663-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X60 FT, N/Estéril;
0211663-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X70 FT, N/Estéril;
0211663-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X80 FT, N/Estéril;
0211663-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X20 FT, N/Estéril;
0211663-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X25 FT, N/Estéril;
0211663-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X30 FT, N/Estéril;
0211663-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X35 FT, N/Estéril;
0211663-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X40 FT, N/Estéril;
0211663-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X50 FT, N/Estéril;
0211663-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X60 FT, N/Estéril;
0211663-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X70 FT, N/Estéril;
0211663-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X80 FT, N/Estéril;
0211663-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X20 FT, N/Estéril;
0211663-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X25 FT, N/Estéril;
0211663-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X30 FT, N/Estéril;
0211663-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X35 FT, N/Estéril;
0211663-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X40 FT, N/Estéril;
0211663-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X50 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211663-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X60 FT, N/Estéril;
0211663-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X70 FT, N/Estéril;
0211663-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X80 FT, N/Estéril;
0211663-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X50 FT, N/Estéril;
0211663-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X60 FT, N/Estéril;
0211663-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X70 FT, N/Estéril;
0211663-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X80 FT, N/Estéril;
0211664-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø6,0-5,0X30 TB, N/Estéril;
0211664-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,0X30 TB, N/Estéril;
0211664-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,0X40 TB, N/Estéril;
0211664-103 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,0X30 TB, N/Estéril;
0211664-104 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,0X40 TB, N/Estéril;
0211664-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,0X30 TB, N/Estéril;
0211664-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,0X40 TB, N/Estéril;
0211664-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,0X50 TB, N/Estéril;
0211664-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,0X30 TB, N/Estéril;
0211664-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,0X40 TB, N/Estéril;
0211664-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,0X50 TB, N/Estéril;
0211664-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X30 TB, N/Estéril;
0211664-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X40 TB, N/Estéril;
0211664-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X50 TB, N/Estéril;
0211664-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X60 TB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211664-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X40 TB, N/Estéril;
0211664-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X50 TB, N/Estéril;
0211664-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X60 TB, N/Estéril;
0211664-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X40 TB, N/Estéril;
0211664-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X50 TB, N/Estéril;
0211664-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X60 TB, N/Estéril;
0211664-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X70 TB, N/Estéril;
0211664-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X20 TB, N/Estéril;
0211664-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X25 TB, N/Estéril;
0211664-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X30 TB, N/Estéril;
0211664-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X35 TB, N/Estéril;
0211664-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X40 TB, N/Estéril;
0211664-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X50 TB, N/Estéril;
0211664-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X60 TB, N/Estéril;
0211664-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X70 TB, N/Estéril;
0211664-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X80 TB, N/Estéril;
0211664-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X20 TB, N/Estéril;
0211664-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X25 TB, N/Estéril;
0211664-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X30 TB, N/Estéril;
0211664-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X35 TB, N/Estéril;
0211664-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X40 TB, N/Estéril;
0211664-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X50 TB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211664-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X60 TB, N/Estéril;
0211664-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X70 TB, N/Estéril;
0211664-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X80 TB, N/Estéril;
0211664-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X20 TB, N/Estéril;
0211664-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X25 TB, N/Estéril;
0211664-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X30 TB, N/Estéril;
0211664-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X35 TB, N/Estéril;
0211664-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X40 TB, N/Estéril;
0211664-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X50 TB, N/Estéril;
0211664-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X60 TB, N/Estéril;
0211664-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X70 TB, N/Estéril;
0211664-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X80 TB, N/Estéril;
0211664-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X50 TB, N/Estéril;
0211664-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X60 TB, N/Estéril;
0211664-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X70 TB, N/Estéril;
0211664-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X80 TB, N/Estéril;
0211665-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø6,0-5,0X30 FB, N/Estéril;
0211665-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,0X30 FB, N/Estéril;
0211665-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,0X40 FB, N/Estéril;
0211665-103 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,0X30 FB, N/Estéril;
0211665-104 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,0X40 FB, N/Estéril;
0211665-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,0X30 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211665-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,0X40 FB, N/Estéril;
0211665-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,0X50 FB, N/Estéril;
0211665-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,0X30 FB, N/Estéril;
0211665-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,0X40 FB, N/Estéril;
0211665-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,0X50 FB, N/Estéril;
0211665-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X30 FB, N/Estéril;
0211665-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X40 FB, N/Estéril;
0211665-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X50 FB, N/Estéril;
0211665-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X60 FB, N/Estéril;
0211665-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X40 FB, N/Estéril;
0211665-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X50 FB, N/Estéril;
0211665-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X60 FB, N/Estéril;
0211665-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X40 FB, N/Estéril;
0211665-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X50 FB, N/Estéril;
0211665-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X60 FB, N/Estéril;
0211665-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X70 FB, N/Estéril;
0211665-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X20 FB, N/Estéril;
0211665-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X25 FB, N/Estéril;
0211665-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X30 FB, N/Estéril;
0211665-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X35 FB, N/Estéril;
0211665-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X40 FB, N/Estéril;
0211665-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X50 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211665-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X60 FB, N/Estéril;
0211665-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X70 FB, N/Estéril;
0211665-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X80 FB, N/Estéril;
0211665-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X20 FB, N/Estéril;
0211665-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X25 FB, N/Estéril;
0211665-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X30 FB, N/Estéril;
0211665-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X35 FB, N/Estéril;
0211665-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X40 FB, N/Estéril;
0211665-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X50 FB, N/Estéril;
0211665-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X60 FB, N/Estéril;
0211665-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X70 FB, N/Estéril;
0211665-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X80 FB, N/Estéril;
0211665-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X20 FB, N/Estéril;
0211665-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X25 FB, N/Estéril;
0211665-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X30 FB, N/Estéril;
0211665-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X35 FB, N/Estéril;
0211665-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X40 FB, N/Estéril;
0211665-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X50 FB, N/Estéril;
0211665-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X60 FB, N/Estéril;
0211665-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X70 FB, N/Estéril;
0211665-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X80 FB, N/Estéril;
0211665-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X50 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211665-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X60 FB, N/Estéril;
0211665-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X70 FB, N/Estéril;
0211665-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X80 FB, N/Estéril;
0211670-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X30 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X20 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X25 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X30 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X35 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X70 T, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211670-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X20 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X25 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X30 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X35 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X20 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X25 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X30 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X35 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211670-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X70 T, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211670-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211671-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X30 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X20 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X25 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X30 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X35 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X20 F, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211671-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X25 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X30 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X35 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X20 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X25 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X30 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X35 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211671-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211672-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X30 TT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211672-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X20 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X25 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X20 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X25 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X30 TT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211672-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X20 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X25 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211672-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211673-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211673-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X20 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X25 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X20 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X25 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211673-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X20 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X25 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211673-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211674-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X30 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X40 TB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211674-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X20 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X25 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X30 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X35 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X20 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X25 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X30 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X35 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211674-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X20 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X25 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X30 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X35 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211674-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211675-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X30 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211675-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,0X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X20 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X25 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X30 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X35 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,0X80 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X20 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X25 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X30 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X35 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,0X80 FB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211675-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X20 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X25 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X30 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X35 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,0X80 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211675-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,0X80 FB, Calibrado, N/Est.;
0211680-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø6,0-5,6X30 T, N/Estéril;
0211680-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,6X30 T, N/Estéril;
0211680-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,6X40 T, N/Estéril;
0211680-103 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,6X30 T, N/Estéril;
0211680-104 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,6X40 T, N/Estéril;
0211680-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,6X30 T, N/Estéril;
0211680-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,6X40 T, N/Estéril;
0211680-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,6X50 T, N/Estéril;
0211680-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,6X30 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211680-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,6X40 T, N/Estéril;
0211680-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,6X50 T, N/Estéril;
0211680-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X30 T, N/Estéril;
0211680-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X40 T, N/Estéril;
0211680-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X50 T, N/Estéril;
0211680-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X60 T, N/Estéril;
0211680-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X40 T, N/Estéril;
0211680-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X50 T, N/Estéril;
0211680-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X60 T, N/Estéril;
0211680-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X40 T, N/Estéril;
0211680-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X50 T, N/Estéril;
0211680-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X60 T, N/Estéril;
0211680-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X70 T, N/Estéril;
0211680-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X20 T, N/Estéril;
0211680-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X25 T, N/Estéril;
0211680-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X30 T, N/Estéril;
0211680-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X35 T, N/Estéril;
0211680-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X40 T, N/Estéril;
0211680-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X50 T, N/Estéril;
0211680-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X60 T, N/Estéril;
0211680-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X70 T, N/Estéril;
0211680-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X80 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211680-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X20 T, N/Estéril;
0211680-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X25 T, N/Estéril;
0211680-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X30 T, N/Estéril;
0211680-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X35 T, N/Estéril;
0211680-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X40 T, N/Estéril;
0211680-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X50 T, N/Estéril;
0211680-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X60 T, N/Estéril;
0211680-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X70 T, N/Estéril;
0211680-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X80 T, N/Estéril;
0211680-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X20 T, N/Estéril;
0211680-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X25 T, N/Estéril;
0211680-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X30 T, N/Estéril;
0211680-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X35 T, N/Estéril;
0211680-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X40 T, N/Estéril;
0211680-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X50 T, N/Estéril;
0211680-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X60 T, N/Estéril;
0211680-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X70 T, N/Estéril;
0211680-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X80 T, N/Estéril;
0211680-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X50 T, N/Estéril;
0211680-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X60 T, N/Estéril;
0211680-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X70 T, N/Estéril;
0211680-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X80 T, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211681-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø6,0-5,6X30 F, N/Estéril;
0211681-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,6X30 F, N/Estéril;
0211681-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,6X40 F, N/Estéril;
0211681-103 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,6X30 F, N/Estéril;
0211681-104 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,6X40 F, N/Estéril;
0211681-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,6X30 F, N/Estéril;
0211681-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,6X40 F, N/Estéril;
0211681-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,6X50 F, N/Estéril;
0211681-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,6X30 F, N/Estéril;
0211681-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,6X40 F, N/Estéril;
0211681-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,6X50 F, N/Estéril;
0211681-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X30 F, N/Estéril;
0211681-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X40 F, N/Estéril;
0211681-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X50 F, N/Estéril;
0211681-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X60 F, N/Estéril;
0211681-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X40 F, N/Estéril;
0211681-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X50 F, N/Estéril;
0211681-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X60 F, N/Estéril;
0211681-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X40 F, N/Estéril;
0211681-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X50 F, N/Estéril;
0211681-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X60 F, N/Estéril;
0211681-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X70 F, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211681-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X20 F, N/Estéril;
0211681-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X25 F, N/Estéril;
0211681-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X30 F, N/Estéril;
0211681-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X35 F, N/Estéril;
0211681-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X40 F, N/Estéril;
0211681-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X50 F, N/Estéril;
0211681-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X60 F, N/Estéril;
0211681-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X70 F, N/Estéril;
0211681-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X80 F, N/Estéril;
0211681-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X20 F, N/Estéril;
0211681-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X25 F, N/Estéril;
0211681-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X30 F, N/Estéril;
0211681-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X35 F, N/Estéril;
0211681-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X40 F, N/Estéril;
0211681-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X50 F, N/Estéril;
0211681-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X60 F, N/Estéril;
0211681-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X70 F, N/Estéril;
0211681-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X80 F, N/Estéril;
0211681-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X20 F, N/Estéril;
0211681-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X25 F, N/Estéril;
0211681-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X30 F, N/Estéril;
0211681-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X35 F, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211681-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X40 F, N/Estéril;
0211681-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X50 F, N/Estéril;
0211681-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X60 F, N/Estéril;
0211681-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X70 F, N/Estéril;
0211681-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X80 F, N/Estéril;
0211681-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X50 F, N/Estéril;
0211681-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X60 F, N/Estéril;
0211681-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X70 F, N/Estéril;
0211681-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X80 F, N/Estéril;
0211682-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø6,0-5,6X30 TT, N/Estéril;
0211682-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,6X30 TT, N/Estéril;
0211682-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,6X40 TT, N/Estéril;
0211682-103 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,6X30 TT, N/Estéril;
0211682-104 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,6X40 TT, N/Estéril;
0211682-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,6X30 TT, N/Estéril;
0211682-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,6X40 TT, N/Estéril;
0211682-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,6X50 TT, N/Estéril;
0211682-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,6X30 TT, N/Estéril;
0211682-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,6X40 TT, N/Estéril;
0211682-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,6X50 TT, N/Estéril;
0211682-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X30 TT, N/Estéril;
0211682-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X40 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211682-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X50 TT, N/Estéril;
0211682-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X60 TT, N/Estéril;
0211682-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X40 TT, N/Estéril;
0211682-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X50 TT, N/Estéril;
0211682-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X60 TT, N/Estéril;
0211682-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X40 TT, N/Estéril;
0211682-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X50 TT, N/Estéril;
0211682-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X60 TT, N/Estéril;
0211682-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X70 TT, N/Estéril;
0211682-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X20 TT, N/Estéril;
0211682-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X25 TT, N/Estéril;
0211682-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X30 TT, N/Estéril;
0211682-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X35 TT, N/Estéril;
0211682-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X40 TT, N/Estéril;
0211682-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X50 TT, N/Estéril;
0211682-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X60 TT, N/Estéril;
0211682-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X70 TT, N/Estéril;
0211682-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X80 TT, N/Estéril;
0211682-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X20 TT, N/Estéril;
0211682-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X25 TT, N/Estéril;
0211682-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X30 TT, N/Estéril;
0211682-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X35 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211682-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X40 TT, N/Estéril;
0211682-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X50 TT, N/Estéril;
0211682-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X60 TT, N/Estéril;
0211682-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X70 TT, N/Estéril;
0211682-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X80 TT, N/Estéril;
0211682-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X20 TT, N/Estéril;
0211682-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X25 TT, N/Estéril;
0211682-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X30 TT, N/Estéril;
0211682-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X35 TT, N/Estéril;
0211682-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X40 TT, N/Estéril;
0211682-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X50 TT, N/Estéril;
0211682-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X60 TT, N/Estéril;
0211682-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X70 TT, N/Estéril;
0211682-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X80 TT, N/Estéril;
0211682-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X50 TT, N/Estéril;
0211682-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X60 TT, N/Estéril;
0211682-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X70 TT, N/Estéril;
0211682-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X80 TT, N/Estéril;
0211683-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø6,0-5,6X30 FT, N/Estéril;
0211683-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,6X30 FT, N/Estéril;
0211683-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,6X40 FT, N/Estéril;
0211683-103 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,6X30 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211683-104 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,6X40 FT, N/Estéril;
0211683-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,6X30 FT, N/Estéril;
0211683-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,6X40 FT, N/Estéril;
0211683-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,6X50 FT, N/Estéril;
0211683-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,6X30 FT, N/Estéril;
0211683-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,6X40 FT, N/Estéril;
0211683-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,6X50 FT, N/Estéril;
0211683-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X30 FT, N/Estéril;
0211683-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X40 FT, N/Estéril;
0211683-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X50 FT, N/Estéril;
0211683-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X60 FT, N/Estéril;
0211683-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X40 FT, N/Estéril;
0211683-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X50 FT, N/Estéril;
0211683-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X60 FT, N/Estéril;
0211683-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X40 FT, N/Estéril;
0211683-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X50 FT, N/Estéril;
0211683-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X60 FT, N/Estéril;
0211683-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X70 FT, N/Estéril;
0211683-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X20 FT, N/Estéril;
0211683-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X25 FT, N/Estéril;
0211683-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X30 FT, N/Estéril;
0211683-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X35 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211683-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X40 FT, N/Estéril;
0211683-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X50 FT, N/Estéril;
0211683-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X60 FT, N/Estéril;
0211683-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X70 FT, N/Estéril;
0211683-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X80 FT, N/Estéril;
0211683-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X20 FT, N/Estéril;
0211683-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X25 FT, N/Estéril;
0211683-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X30 FT, N/Estéril;
0211683-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X35 FT, N/Estéril;
0211683-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X40 FT, N/Estéril;
0211683-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X50 FT, N/Estéril;
0211683-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X60 FT, N/Estéril;
0211683-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X70 FT, N/Estéril;
0211683-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X80 FT, N/Estéril;
0211683-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X20 FT, N/Estéril;
0211683-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X25 FT, N/Estéril;
0211683-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X30 FT, N/Estéril;
0211683-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X35 FT, N/Estéril;
0211683-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X40 FT, N/Estéril;
0211683-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X50 FT, N/Estéril;
0211683-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X60 FT, N/Estéril;
0211683-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X70 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211683-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X80 FT, N/Estéril;
0211683-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X50 FT, N/Estéril;
0211683-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X60 FT, N/Estéril;
0211683-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X70 FT, N/Estéril;
0211683-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X80 FT, N/Estéril;
0211684-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø6,0-5,6X30 TB, N/Estéril;
0211684-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,6X30 TB, N/Estéril;
0211684-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,6X40 TB, N/Estéril;
0211684-103 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,6X30 TB, N/Estéril;
0211684-104 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,6X40 TB, N/Estéril;
0211684-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,6X30 TB, N/Estéril;
0211684-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,6X40 TB, N/Estéril;
0211684-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,6X50 TB, N/Estéril;
0211684-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,6X30 TB, N/Estéril;
0211684-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,6X40 TB, N/Estéril;
0211684-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,6X50 TB, N/Estéril;
0211684-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X30 TB, N/Estéril;
0211684-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X40 TB, N/Estéril;
0211684-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X50 TB, N/Estéril;
0211684-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X60 TB, N/Estéril;
0211684-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X40 TB, N/Estéril;
0211684-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X50 TB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211684-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X60 TB, N/Estéril;
0211684-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X40 TB, N/Estéril;
0211684-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X50 TB, N/Estéril;
0211684-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X60 TB, N/Estéril;
0211684-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X70 TB, N/Estéril;
0211684-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X20 TB, N/Estéril;
0211684-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X25 TB, N/Estéril;
0211684-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X30 TB, N/Estéril;
0211684-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X35 TB, N/Estéril;
0211684-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X40 TB, N/Estéril;
0211684-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X50 TB, N/Estéril;
0211684-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X60 TB, N/Estéril;
0211684-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X70 TB, N/Estéril;
0211684-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X80 TB, N/Estéril;
0211684-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X20 TB, N/Estéril;
0211684-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X25 TB, N/Estéril;
0211684-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X30 TB, N/Estéril;
0211684-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X35 TB, N/Estéril;
0211684-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X40 TB, N/Estéril;
0211684-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X50 TB, N/Estéril;
0211684-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X60 TB, N/Estéril;
0211684-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X70 TB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211684-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X80 TB, N/Estéril;
0211684-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X20 TB, N/Estéril;
0211684-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X25 TB, N/Estéril;
0211684-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X30 TB, N/Estéril;
0211684-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X35 TB, N/Estéril;
0211684-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X40 TB, N/Estéril;
0211684-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X50 TB, N/Estéril;
0211684-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X60 TB, N/Estéril;
0211684-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X70 TB, N/Estéril;
0211684-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X80 TB, N/Estéril;
0211684-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X50 TB, N/Estéril;
0211684-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X60 TB, N/Estéril;
0211684-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X70 TB, N/Estéril;
0211684-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X80 TB, N/Estéril;
0211685-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90, Rosca Ø6,0-5,6X30 FB, N/Estéril;
0211685-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,6X30 FB, N/Estéril;
0211685-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100, Rosca Ø6,0-5,6X40 FB, N/Estéril;
0211685-103 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,6X30 FB, N/Estéril;
0211685-104 - Pino Ósseo Ø6,0X110, Rosca Ø6,0-5,6X40 FB, N/Estéril;
0211685-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,6X30 FB, N/Estéril;
0211685-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,6X40 FB, N/Estéril;
0211685-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120, Rosca Ø6,0-5,6X50 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211685-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,6X30 FB, N/Estéril;
0211685-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,6X40 FB, N/Estéril;
0211685-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130, Rosca Ø6,0-5,6X50 FB, N/Estéril;
0211685-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X30 FB, N/Estéril;
0211685-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X40 FB, N/Estéril;
0211685-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X50 FB, N/Estéril;
0211685-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X60 FB, N/Estéril;
0211685-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X40 FB, N/Estéril;
0211685-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X50 FB, N/Estéril;
0211685-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X60 FB, N/Estéril;
0211685-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X40 FB, N/Estéril;
0211685-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X50 FB, N/Estéril;
0211685-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X60 FB, N/Estéril;
0211685-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X70 FB, N/Estéril;
0211685-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X20 FB, N/Estéril;
0211685-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X25 FB, N/Estéril;
0211685-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X30 FB, N/Estéril;
0211685-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X35 FB, N/Estéril;
0211685-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X40 FB, N/Estéril;
0211685-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X50 FB, N/Estéril;
0211685-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X60 FB, N/Estéril;
0211685-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X70 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211685-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X80 FB, N/Estéril;
0211685-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X20 FB, N/Estéril;
0211685-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X25 FB, N/Estéril;
0211685-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X30 FB, N/Estéril;
0211685-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X35 FB, N/Estéril;
0211685-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X40 FB, N/Estéril;
0211685-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X50 FB, N/Estéril;
0211685-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X60 FB, N/Estéril;
0211685-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X70 FB, N/Estéril;
0211685-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X80 FB, N/Estéril;
0211685-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X20 FB, N/Estéril;
0211685-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X25 FB, N/Estéril;
0211685-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X30 FB, N/Estéril;
0211685-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X35 FB, N/Estéril;
0211685-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X40 FB, N/Estéril;
0211685-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X50 FB, N/Estéril;
0211685-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X60 FB, N/Estéril;
0211685-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X70 FB, N/Estéril;
0211685-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X80 FB, N/Estéril;
0211685-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X50 FB, N/Estéril;
0211685-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X60 FB, N/Estéril;
0211685-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X70 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211685-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X80 FB, N/Estéril;
0211690-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X30 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X20 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X25 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X30 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X35 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X20 T, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211690-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X25 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X30 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X35 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X20 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X25 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X30 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X35 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X40 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X50 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X60 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X70 T, Calibrado, N/Est.;
0211690-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X80 T, Calibrado, N/Est.;
0211691-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X30 F, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211691-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X20 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X25 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X30 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X35 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X20 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X25 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X30 F, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211691-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X35 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X20 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X25 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X30 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X35 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X40 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X50 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X60 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X70 F, Calibrado, N/Est.;
0211691-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X80 F, Calibrado, N/Est.;
0211692-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X50 TT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211692-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X20 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X25 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X20 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X25 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X40 TT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211692-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X20 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X25 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X30 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X35 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X40 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X50 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X60 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X70 TT, Calibrado, N/Est.;
0211692-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X80 TT, Calibrado, N/Est.;
0211693-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X40 FT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211693-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X20 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X25 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X20 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X25 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X60 FT, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211693-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X20 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X25 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X30 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X35 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X40 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X50 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X60 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X70 FT, Calibrado, N/Est.;
0211693-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X80 FT, Calibrado, N/Est.;
0211694-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X30 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X60 TB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211694-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X20 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X25 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X30 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X35 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X20 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X25 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X30 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X35 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X80 TB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211694-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X20 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X25 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X30 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X35 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X40 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X50 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X60 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X70 TB, Calibrado, N/Est.;
0211694-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X80 TB, Calibrado, N/Est.;
0211695-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X30 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150, Rosca Ø6,0-5,6X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160, Rosca Ø6,0-5,6X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X50 FB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211695-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170, Rosca Ø6,0-5,6X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-620 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X20 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-625 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X25 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-630 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X30 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-635 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X35 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180, Rosca Ø6,0-5,6X80 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-720 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X20 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-725 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X25 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-730 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X30 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-735 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X35 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-740 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200, Rosca Ø6,0-5,6X80 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-820 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X20 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-825 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X25 FB, Calibrado, N/Est.;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211695-830 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X30 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-835 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X35 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-840 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X40 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220, Rosca Ø6,0-5,6X80 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X50 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X60 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X70 FB, Calibrado, N/Est.;
0211695-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250, Rosca Ø6,0-5,6X80 FB, Calibrado, N/Est.;
0211700-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90/30 TT, N/Estéril;
0211700-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100/30 TT, N/Estéril;
0211700-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100/40 TT, N/Estéril;
0211700-030 - Pino Ósseo Ø6,0X110/30 TT, N/Estéril;
0211700-040 - Pino Ósseo Ø6,0X110/40 TT, N/Estéril;
0211700-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120/30 TT, N/Estéril;
0211700-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120/40 TT, N/Estéril;
0211700-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120/50 TT, N/Estéril;
0211700-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130/30 TT, N/Estéril;
0211700-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130/40 TT, N/Estéril;
0211700-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130/50 TT, N/Estéril;
0211700-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150/30 TT, N/Estéril;
0211700-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150/40 TT, N/Estéril;
0211700-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150/50 TT, N/Estéril;
0211700-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150/60 TT, N/Estéril;
0211700-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160/40 TT, N/Estéril;
0211700-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160/50 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211700-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160/60 TT, N/Estéril;
0211700-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170/40 TT, N/Estéril;
0211700-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170/50 TT, N/Estéril;
0211700-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170/60 TT, N/Estéril;
0211700-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170/70 TT, N/Estéril;
0211700-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180/40 TT, N/Estéril;
0211700-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180/50 TT, N/Estéril;
0211700-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180/60 TT, N/Estéril;
0211700-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180/70 TT, N/Estéril;
0211700-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180/80 TT, N/Estéril;
0211700-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200/50 TT, N/Estéril;
0211700-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200/60 TT, N/Estéril;
0211700-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200/70 TT, N/Estéril;
0211700-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200/80 TT, N/Estéril;
0211700-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220/50 TT, N/Estéril;
0211700-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220/60 TT, N/Estéril;
0211700-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220/70 TT, N/Estéril;
0211700-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220/80 TT, N/Estéril;
0211700-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250/50 TT, N/Estéril;
0211700-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250/60 TT, N/Estéril;
0211700-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250/70 TT, N/Estéril;
0211700-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250/80 TT, N/Estéril;
0211701-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90/30 FT, N/Estéril;
0211701-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100/30 FT, N/Estéril;
0211701-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100/40 FT, N/Estéril;
0211701-030 - Pino Ósseo Ø6,0X110/30 FT, N/Estéril;
0211701-040 - Pino Ósseo Ø6,0X110/40 FT, N/Estéril;
0211701-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120/30 FT, N/Estéril;
0211701-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120/40 FT, N/Estéril;
0211701-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120/50 FT, N/Estéril;
0211701-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130/30 FT, N/Estéril;
0211701-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130/40 FT, N/Estéril;
0211701-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130/50 FT, N/Estéril;
0211701-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150/30 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211701-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150/40 FT, N/Estéril;
0211701-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150/50 FT, N/Estéril;
0211701-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150/60 FT, N/Estéril;
0211701-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160/40 FT, N/Estéril;
0211701-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160/50 FT, N/Estéril;
0211701-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160/60 FT, N/Estéril;
0211701-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170/40 FT, N/Estéril;
0211701-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170/50 FT, N/Estéril;
0211701-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170/60 FT, N/Estéril;
0211701-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170/70 FT, N/Estéril;
0211701-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180/40 FT, N/Estéril;
0211701-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180/50 FT, N/Estéril;
0211701-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180/60 FT, N/Estéril;
0211701-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180/70 FT, N/Estéril;
0211701-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180/80 FT, N/Estéril;
0211701-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200/50 FT, N/Estéril;
0211701-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200/60 FT, N/Estéril;
0211701-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200/70 FT, N/Estéril;
0211701-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200/80 FT, N/Estéril;
0211701-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220/50 FT, N/Estéril;
0211701-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220/60 FT, N/Estéril;
0211701-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220/70 FT, N/Estéril;
0211701-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220/80 FT, N/Estéril;
0211701-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250/50 FT, N/Estéril;
0211701-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250/60 FT, N/Estéril;
0211701-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250/70 FT, N/Estéril;
0211701-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250/80 FT, N/Estéril;
0211702-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90/30 TB, N/Estéril;
0211702-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100/30 TB, N/Estéril;
0211702-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100/40 TB, N/Estéril;
0211702-030 - Pino Ósseo Ø6,0X110/30 TB, N/Estéril;
0211702-040 - Pino Ósseo Ø6,0X110/40 TB, N/Estéril;
0211702-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120/30 TB, N/Estéril;
0211702-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120/40 TB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211702-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120/50 TB, N/Estéril;
0211702-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130/30 TB, N/Estéril;
0211702-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130/40 TB, N/Estéril;
0211702-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130/50 TB, N/Estéril;
0211702-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150/30 TB, N/Estéril;
0211702-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150/40 TB, N/Estéril;
0211702-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150/50 TB, N/Estéril;
0211702-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150/60 TB, N/Estéril;
0211702-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160/40 TB, N/Estéril;
0211702-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160/50 TB, N/Estéril;
0211702-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160/60 TB, N/Estéril;
0211702-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170/40 TB, N/Estéril;
0211702-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170/50 TB, N/Estéril;
0211702-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170/60 TB, N/Estéril;
0211702-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170/70 TB, N/Estéril;
0211702-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180/40 TB, N/Estéril;
0211702-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180/50 TB, N/Estéril;
0211702-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180/60 TB, N/Estéril;
0211702-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180/70 TB, N/Estéril;
0211702-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180/80 TB, N/Estéril;
0211702-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200/50 TB, N/Estéril;
0211702-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200/60 TB, N/Estéril;
0211702-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200/70 TB, N/Estéril;
0211702-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200/80 TB, N/Estéril;
0211702-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220/50 TB, N/Estéril;
0211702-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220/60 TB, N/Estéril;
0211702-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220/70 TB, N/Estéril;
0211702-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220/80 TB, N/Estéril;
0211702-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250/50 TB, N/Estéril;
0211702-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250/60 TB, N/Estéril;
0211702-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250/70 TB, N/Estéril;
0211702-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250/80 TB, N/Estéril;
0211703-000 - Pino Ósseo Ø6,0X90/30 FB, N/Estéril;
0211703-003 - Pino Ósseo Ø6,0X100/30 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211703-004 - Pino Ósseo Ø6,0X100/40 FB, N/Estéril;
0211703-030 - Pino Ósseo Ø6,0X110/30 FB, N/Estéril;
0211703-040 - Pino Ósseo Ø6,0X110/40 FB, N/Estéril;
0211703-130 - Pino Ósseo Ø6,0X120/30 FB, N/Estéril;
0211703-140 - Pino Ósseo Ø6,0X120/40 FB, N/Estéril;
0211703-150 - Pino Ósseo Ø6,0X120/50 FB, N/Estéril;
0211703-230 - Pino Ósseo Ø6,0X130/30 FB, N/Estéril;
0211703-240 - Pino Ósseo Ø6,0X130/40 FB, N/Estéril;
0211703-250 - Pino Ósseo Ø6,0X130/50 FB, N/Estéril;
0211703-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150/30 FB, N/Estéril;
0211703-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150/40 FB, N/Estéril;
0211703-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150/50 FB, N/Estéril;
0211703-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150/60 FB, N/Estéril;
0211703-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160/40 FB, N/Estéril;
0211703-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160/50 FB, N/Estéril;
0211703-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160/60 FB, N/Estéril;
0211703-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170/40 FB, N/Estéril;
0211703-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170/50 FB, N/Estéril;
0211703-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170/60 FB, N/Estéril;
0211703-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170/70 FB, N/Estéril;
0211703-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180/40 FB, N/Estéril;
0211703-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180/50 FB, N/Estéril;
0211703-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180/60 FB, N/Estéril;
0211703-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180/70 FB, N/Estéril;
0211703-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180/80 FB, N/Estéril;
0211703-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200/50 FB, N/Estéril;
0211703-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200/60 FB, N/Estéril;
0211703-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200/70 FB, N/Estéril;
0211703-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200/80 FB, N/Estéril;
0211703-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220/50 FB, N/Estéril;
0211703-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220/60 FB, N/Estéril;
0211703-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220/70 FB, N/Estéril;
0211703-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220/80 FB, N/Estéril;
0211703-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250/50 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211703-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250/60 FB, N/Estéril;
0211703-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250/70 FB, N/Estéril;
0211703-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250/80 FB, N/Estéril;
0211710-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150/30 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170/70 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180/40 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180/70 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180/80 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200/70 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200/80 TT, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211710-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220/70 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220/80 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250/50 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250/60 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250/70 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211710-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250/80 TT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150/30 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170/70 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180/40 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180/60 FT, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211711-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180/70 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180/80 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200/70 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200/80 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220/70 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220/80 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250/50 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250/60 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250/70 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211711-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250/80 FT, Calibrado, N/Estéril;
0211712-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150/30 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150/40 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160/40 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170/40 TB, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211712-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170/70 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180/40 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180/70 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180/80 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200/70 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200/80 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220/70 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220/80 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250/50 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250/60 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250/70 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211712-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250/80 TB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-330 - Pino Ósseo Ø6,0X150/30 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-340 - Pino Ósseo Ø6,0X150/40 FB, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211713-350 - Pino Ósseo Ø6,0X150/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-360 - Pino Ósseo Ø6,0X150/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-440 - Pino Ósseo Ø6,0X160/40 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-450 - Pino Ósseo Ø6,0X160/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-460 - Pino Ósseo Ø6,0X160/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-540 - Pino Ósseo Ø6,0X170/40 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-550 - Pino Ósseo Ø6,0X170/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-560 - Pino Ósseo Ø6,0X170/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-570 - Pino Ósseo Ø6,0X170/70 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-640 - Pino Ósseo Ø6,0X180/40 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-650 - Pino Ósseo Ø6,0X180/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-660 - Pino Ósseo Ø6,0X180/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-670 - Pino Ósseo Ø6,0X180/70 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-680 - Pino Ósseo Ø6,0X180/80 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-750 - Pino Ósseo Ø6,0X200/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-760 - Pino Ósseo Ø6,0X200/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-770 - Pino Ósseo Ø6,0X200/70 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-780 - Pino Ósseo Ø6,0X200/80 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-850 - Pino Ósseo Ø6,0X220/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-860 - Pino Ósseo Ø6,0X220/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-870 - Pino Ósseo Ø6,0X220/70 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-880 - Pino Ósseo Ø6,0X220/80 FB, Calibrado, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211713-950 - Pino Ósseo Ø6,0X250/50 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-960 - Pino Ósseo Ø6,0X250/60 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-970 - Pino Ósseo Ø6,0X250/70 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211713-980 - Pino Ósseo Ø6,0X250/80 FB, Calibrado, N/Estéril;
0211032-020 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X20 TT, N/Estéril;
0211032-025 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X25 TT, N/Estéril;
0211032-030 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X30 TT, N/Estéril;
0211032-035 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X35 TT, N/Estéril;
0211032-040 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X40 TT, N/Estéril;
0211032-050 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X50 TT, N/Estéril;
0211032-060 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X60 TT, N/Estéril;
0211032-070 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X70 TT, N/Estéril;
0211032-080 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X80 TT, N/Estéril;
0211032-120 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X20 TT, N/Estéril;
0211032-125 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X25 TT, N/Estéril;
0211032-130 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X30 TT, N/Estéril;
0211032-135 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X35 TT, N/Estéril;
0211032-140 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X40 TT, N/Estéril;
0211032-150 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X50 TT, N/Estéril;
0211032-160 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X60 TT, N/Estéril;
0211032-170 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X70 TT, N/Estéril;
0211032-180 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X80 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211032-220 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X20 TT, N/Estéril;
0211032-225 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X25 TT, N/Estéril;
0211032-230 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X30 TT, N/Estéril;
0211032-235 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X35 TT, N/Estéril;
0211032-240 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X40 TT, N/Estéril;
0211032-250 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X50 TT, N/Estéril;
0211032-260 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X60 TT, N/Estéril;
0211032-270 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X70 TT, N/Estéril;
0211032-280 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X80 TT, N/Estéril;
0211032-320 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X20 TT, N/Estéril;
0211032-325 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X25 TT, N/Estéril;
0211032-330 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X30 TT, N/Estéril;
0211032-335 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X35 TT, N/Estéril;
0211032-340 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X40 TT, N/Estéril;
0211032-350 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X50 TT, N/Estéril;
0211032-360 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X60 TT, N/Estéril;
0211032-370 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X70 TT, N/Estéril;
0211032-380 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X80 TT, N/Estéril;
0211033-020 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X20 FT, N/Estéril;
0211033-025 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X25 FT, N/Estéril;
0211033-030 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X30 FT, N/Estéril;
0211033-035 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X35 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211033-040 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X40 FT, N/Estéril;
0211033-050 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X50 FT, N/Estéril;
0211033-060 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X60 FT, N/Estéril;
0211033-070 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X70 FT, N/Estéril;
0211033-080 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X80 FT, N/Estéril;
0211033-120 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X20 FT, N/Estéril;
0211033-125 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X25 FT, N/Estéril;
0211033-130 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X30 FT, N/Estéril;
0211033-135 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X35 FT, N/Estéril;
0211033-140 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X40 FT, N/Estéril;
0211033-150 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X50 FT, N/Estéril;
0211033-160 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X60 FT, N/Estéril;
0211033-170 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X70 FT, N/Estéril;
0211033-180 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X80 FT, N/Estéril;
0211033-220 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X20 FT, N/Estéril;
0211033-225 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X25 FT, N/Estéril;
0211033-230 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X30 FT, N/Estéril;
0211033-235 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X35 FT, N/Estéril;
0211033-240 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X40 FT, N/Estéril;
0211033-250 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X50 FT, N/Estéril;
0211033-260 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X60 FT, N/Estéril;
0211033-270 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X70 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211033-280 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X80 FT, N/Estéril;
0211033-320 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X20 FT, N/Estéril;
0211033-325 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X25 FT, N/Estéril;
0211033-330 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X30 FT, N/Estéril;
0211033-335 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X35 FT, N/Estéril;
0211033-340 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X40 FT, N/Estéril;
0211033-350 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X50 FT, N/Estéril;
0211033-360 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X60 FT, N/Estéril;
0211033-370 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X70 FT, N/Estéril;
0211033-380 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X80 FT, N/Estéril;
0211034-020 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X20 TB, N/Estéril;
0211034-025 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X25 TB, N/Estéril;
0211034-030 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X30 TB, N/Estéril;
0211034-035 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X35 TB, N/Estéril;
0211034-040 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X40 TB, N/Estéril;
0211034-050 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X50 TB, N/Estéril;
0211034-060 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X60 TB, N/Estéril;
0211034-070 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X70 TB, N/Estéril;
0211034-080 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X80 TB, N/Estéril;
0211034-120 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X20 TB, N/Estéril;
0211034-125 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X25 TB, N/Estéril;
0211034-130 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X30 TB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211034-135 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X35 TB, N/Estéril;
0211034-140 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X40 TB, N/Estéril;
0211034-150 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X50 TB, N/Estéril;
0211034-160 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X60 TB, N/Estéril;
0211034-170 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X70 TB, N/Estéril;
0211034-180 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X80 TB, N/Estéril;
0211034-220 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X20 TB, N/Estéril;
0211034-225 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X25 TB, N/Estéril;
0211034-230 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X30 TB, N/Estéril;
0211034-235 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X35 TB, N/Estéril;
0211034-240 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X40 TB, N/Estéril;
0211034-250 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X50 TB, N/Estéril;
0211034-260 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X60 TB, N/Estéril;
0211034-270 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X70 TB, N/Estéril;
0211034-280 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X80 TB, N/Estéril;
0211034-320 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X20 TB, N/Estéril;
0211034-325 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X25 TB, N/Estéril;
0211034-330 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X30 TB, N/Estéril;
0211034-335 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X35 TB, N/Estéril;
0211034-340 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X40 TB, N/Estéril;
0211034-350 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X50 TB, N/Estéril;
0211034-360 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X60 TB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211034-370 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X70 TB, N/Estéril;
0211034-380 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X80 TB, N/Estéril;
0211035-020 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X20 FB, N/Estéril;
0211035-025 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X25 FB, N/Estéril;
0211035-030 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X30 FB, N/Estéril;
0211035-035 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X35 FB, N/Estéril;
0211035-040 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X40 FB, N/Estéril;
0211035-050 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X50 FB, N/Estéril;
0211035-060 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X60 FB, N/Estéril;
0211035-070 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X70 FB, N/Estéril;
0211035-080 - Pino Ósseo Ø3,0X250, Rosca Ø4,0X80 FB, N/Estéril;
0211035-120 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X20 FB, N/Estéril;
0211035-125 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X25 FB, N/Estéril;
0211035-130 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X30 FB, N/Estéril;
0211035-135 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X35 FB, N/Estéril;
0211035-140 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X40 FB, N/Estéril;
0211035-150 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X50 FB, N/Estéril;
0211035-160 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X60 FB, N/Estéril;
0211035-170 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X70 FB, N/Estéril;
0211035-180 - Pino Ósseo Ø3,0X300, Rosca Ø4,0X80 FB, N/Estéril;
0211035-220 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X20 FB, N/Estéril;
0211035-225 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X25 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211035-230 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X30 FB, N/Estéril;
0211035-235 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X35 FB, N/Estéril;
0211035-240 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X40 FB, N/Estéril;
0211035-250 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X50 FB, N/Estéril;
0211035-260 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X60 FB, N/Estéril;
0211035-270 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X70 FB, N/Estéril;
0211035-280 - Pino Ósseo Ø3,0X350, Rosca Ø4,0X80 FB, N/Estéril;
0211035-320 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X20 FB, N/Estéril;
0211035-325 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X25 FB, N/Estéril;
0211035-330 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X30 FB, N/Estéril;
0211035-335 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X35 FB, N/Estéril;
0211035-340 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X40 FB, N/Estéril;
0211035-350 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X50 FB, N/Estéril;
0211035-360 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X60 FB, N/Estéril;
0211035-370 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X70 FB, N/Estéril;
0211035-380 - Pino Ósseo Ø3,0X400, Rosca Ø4,0X80 FB, N/Estéril;
0211042-020 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X20 TT, N/Estéril;
0211042-025 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X25 TT, N/Estéril;
0211042-030 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X30 TT, N/Estéril;
0211042-035 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X35 TT, N/Estéril;
0211042-040 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X40 TT, N/Estéril;
0211042-050 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X50 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211042-060 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X60 TT, N/Estéril;
0211042-070 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X70 TT, N/Estéril;
0211042-080 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X80 TT, N/Estéril;
0211042-120 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X20 TT, N/Estéril;
0211042-125 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X25 TT, N/Estéril;
0211042-130 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X30 TT, N/Estéril;
0211042-135 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X35 TT, N/Estéril;
0211042-140 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X40 TT, N/Estéril;
0211042-150 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X50 TT, N/Estéril;
0211042-160 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X60 TT, N/Estéril;
0211042-170 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X70 TT, N/Estéril;
0211042-180 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X80 TT, N/Estéril;
0211042-220 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X20 TT, N/Estéril;
0211042-225 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X25 TT, N/Estéril;
0211042-230 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X30 TT, N/Estéril;
0211042-235 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X35 TT, N/Estéril;
0211042-240 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X40 TT, N/Estéril;
0211042-250 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X50 TT, N/Estéril;
0211042-260 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X60 TT, N/Estéril;
0211042-270 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X70 TT, N/Estéril;
0211042-280 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X80 TT, N/Estéril;
0211042-320 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X20 TT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211042-325 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X25 TT, N/Estéril;
0211042-330 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X30 TT, N/Estéril;
0211042-335 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X35 TT, N/Estéril;
0211042-340 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X40 TT, N/Estéril;
0211042-350 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X50 TT, N/Estéril;
0211042-360 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X60 TT, N/Estéril;
0211042-370 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X70 TT, N/Estéril;
0211042-380 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X80 TT, N/Estéril;
0211043-020 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X20 FT, N/Estéril;
0211043-025 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X25 FT, N/Estéril;
0211043-030 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X30 FT, N/Estéril;
0211043-035 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X35 FT, N/Estéril;
0211043-040 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X40 FT, N/Estéril;
0211043-050 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X50 FT, N/Estéril;
0211043-060 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X60 FT, N/Estéril;
0211043-070 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X70 FT, N/Estéril;
0211043-080 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X80 FT, N/Estéril;
0211043-120 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X20 FT, N/Estéril;
0211043-125 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X25 FT, N/Estéril;
0211043-130 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X30 FT, N/Estéril;
0211043-135 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X35 FT, N/Estéril;
0211043-140 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X40 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211043-150 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X50 FT, N/Estéril;
0211043-160 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X60 FT, N/Estéril;
0211043-170 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X70 FT, N/Estéril;
0211043-180 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X80 FT, N/Estéril;
0211043-220 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X20 FT, N/Estéril;
0211043-225 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X25 FT, N/Estéril;
0211043-230 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X30 FT, N/Estéril;
0211043-235 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X35 FT, N/Estéril;
0211043-240 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X40 FT, N/Estéril;
0211043-250 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X50 FT, N/Estéril;
0211043-260 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X60 FT, N/Estéril;
0211043-270 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X70 FT, N/Estéril;
0211043-280 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X80 FT, N/Estéril;
0211043-320 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X20 FT, N/Estéril;
0211043-325 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X25 FT, N/Estéril;
0211043-330 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X30 FT, N/Estéril;
0211043-335 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X35 FT, N/Estéril;
0211043-340 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X40 FT, N/Estéril;
0211043-350 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X50 FT, N/Estéril;
0211043-360 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X60 FT, N/Estéril;
0211043-370 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X70 FT, N/Estéril;
0211043-380 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X80 FT, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211044-020 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X20 TB, N/Estéril;
0211044-025 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X25 TB, N/Estéril;
0211044-030 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X30 TB, N/Estéril;
0211044-035 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X35 TB, N/Estéril;
0211044-040 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X40 TB, N/Estéril;
0211044-050 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X50 TB, N/Estéril;
0211044-060 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X60 TB, N/Estéril;
0211044-070 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X70 TB, N/Estéril;
0211044-080 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X80 TB, N/Estéril;
0211044-120 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X20 TB, N/Estéril;
0211044-125 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X25 TB, N/Estéril;
0211044-130 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X30 TB, N/Estéril;
0211044-135 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X35 TB, N/Estéril;
0211044-140 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X40 TB, N/Estéril;
0211044-150 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X50 TB, N/Estéril;
0211044-160 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X60 TB, N/Estéril;
0211044-170 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X70 TB, N/Estéril;
0211044-180 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X80 TB, N/Estéril;
0211044-220 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X20 TB, N/Estéril;
0211044-225 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X25 TB, N/Estéril;
0211044-230 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X30 TB, N/Estéril;
0211044-235 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X35 TB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211044-240 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X40 TB, N/Estéril;
0211044-250 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X50 TB, N/Estéril;
0211044-260 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X60 TB, N/Estéril;
0211044-270 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X70 TB, N/Estéril;
0211044-280 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X80 TB, N/Estéril;
0211044-320 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X20 TB, N/Estéril;
0211044-325 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X25 TB, N/Estéril;
0211044-330 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X30 TB, N/Estéril;
0211044-335 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X35 TB, N/Estéril;
0211044-340 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X40 TB, N/Estéril;
0211044-350 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X50 TB, N/Estéril;
0211044-360 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X60 TB, N/Estéril;
0211044-370 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X70 TB, N/Estéril;
0211044-380 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X80 TB, N/Estéril;
0211045-020 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X20 FB, N/Estéril;
0211045-025 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X25 FB, N/Estéril;
0211045-030 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X30 FB, N/Estéril;
0211045-035 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X35 FB, N/Estéril;
0211045-040 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X40 FB, N/Estéril;
0211045-050 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X50 FB, N/Estéril;
0211045-060 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X60 FB, N/Estéril;
0211045-070 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X70 FB, N/Estéril;

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211045-080 - Pino Ósseo Ø4,0X250, Rosca Ø5,5X80 FB, N/Estéril;
0211045-120 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X20 FB, N/Estéril;
0211045-125 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X25 FB, N/Estéril;
0211045-130 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X30 FB, N/Estéril;
0211045-135 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X35 FB, N/Estéril;
0211045-140 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X40 FB, N/Estéril;
0211045-150 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X50 FB, N/Estéril;
0211045-160 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X60 FB, N/Estéril;
0211045-170 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X70 FB, N/Estéril;
0211045-180 - Pino Ósseo Ø4,0X300, Rosca Ø5,5X80 FB, N/Estéril;
0211045-220 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X20 FB, N/Estéril;
0211045-225 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X25 FB, N/Estéril;
0211045-230 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X30 FB, N/Estéril;
0211045-235 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X35 FB, N/Estéril;
0211045-240 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X40 FB, N/Estéril;
0211045-250 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X50 FB, N/Estéril;
0211045-260 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X60 FB, N/Estéril;
0211045-270 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X70 FB, N/Estéril;
0211045-280 - Pino Ósseo Ø4,0X350, Rosca Ø5,5X80 FB, N/Estéril;
0211045-320 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X20 FB, N/Estéril;
0211045-325 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X25 FB, N/Estéril;
0211045-330 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X30 FB, N/Estéril;

Registro ANVISA nº 80083650064 – Revisão 03

CÓDIGO E DESCRIÇÃO
0211045-335 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X35 FB, N/Estéril;
0211045-340 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X40 FB, N/Estéril;
0211045-350 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X50 FB, N/Estéril;
0211045-360 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X60 FB, N/Estéril;
0211045-370 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X70 FB, N/Estéril;
0211045-380 - Pino Ósseo Ø4,0X400, Rosca Ø5,5X80 FB, N/Estéril;

A correta seleção dos pinos a serem implantados é responsabilidade do cirurgião que também é responsável pela técnica adotada, devendo este estar familiarizado com o material, o método de aplicação e o procedimento cirúrgico a ser adotado.

O êxito do procedimento está ligado à correta seleção, posicionamento e fixação dos dispositivos que é de responsabilidade do médico que avalia o paciente e decide quais os implantes a serem utilizados. Está vinculado também o rigoroso cumprimento dos cuidados pós-operatórios recomendados pelo médico responsável.

Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada ou violada ou o produto esteja descaracterizado.

SIGNIFICADO DA LEGENDA DOS SÍMBOLOS GRÁFICOS CONTIDOS NA ROTULAGEM DO DISPOSITIVO MÉDICO:

As simbologias apresentadas nos rótulos dos dispositivos médicos estão ilustradas abaixo e seguem denominações em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 15223-1.

	Número de catálogo (código do produto embalado)
	Quantidade do produto embalado
	Código de remessa (número de lote do produto embalado)
	Data de Fabricação
	Usar até a data (validade)
	Não estéril
	Não Reusar
	Consultar Instruções de uso ou consultar instruções eletrônicas de uso
	Fabricante
	Não usar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de uso

	Proteger de luz solar
	Manter seco
	Frágil, manusear com cuidado
	Dispositivo médico
	Identificador único do dispositivo

ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os dispositivos médicos são acompanhados de um alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso no site do fabricante, além de informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso.

ALERTA DE INSTRUÇÕES DE USO

Conforme Resolução RDC 751 de 15.09.2022, que estabelece requisitos para disponibilização de Instrução de Uso em formato não impresso de dispositivos médicos, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.

As Instruções de Uso estão disponíveis em:
https://sartori.ind.br/instrucao_uso

Para a visualização dos arquivos utilize o software Adobe Acrobat Reader. As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do número de Registro/ Notificação ANVISA e respectivo nome comercial (descrição do registro).

Todas as Instruções de Uso possuem o Nº do Registro/Notificação ANVISA e a revisão na primeira página do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso, informada no rótulo do produto.

Para Instrução de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar sem custo adicional (inclusive de envio), por meio do telefone +55 19 3538-1910 ou do e-mail: info@sartori.ind.br.

(FSQ 095.07.01)

MATERIAL DE APOIO

Os materiais de apoio são os instrumentais designados para implantação do Elemento de Fixação Óssea Não Estéril.

Esses instrumentais são fabricados em aço inoxidável que lhes fornecem alta resistência e durabilidade, conforme requisitos especificados pelas normas NBR 13911 – Instrumental Cirúrgico – Material Metálico – Especificações para Tarugos, barras e fios de aço inoxidável e ASTM F899 - Standard Specification for Wrought Stainless Steels for Surgical Instruments.

Os instrumentais a seguir possuem registro próprio na ANVISA e devem ser adquiridos separadamente e sempre do mesmo fabricante do implante, para não ocorrer incongruência entre os encaixes.

Código	Descrição
E00 0 724	Estojo S377 - 310 mm x 280 mm x 65 mm
T21 1 360	Broca Inox Ø 3,2 X 40 X 250
T22 3 308	Chave Em "T" p/ Pino Ø5,0
T26 0 200	Guia Ø 3,2
T26 0 210	Guia Ø 5,0
T26 0 322	Guia de Broca Ø 5.2
T31 1 300	Limitador de Perfuração
T32 0 425	Martelo Inox 250G
T32 1 450	Medidor de Profundidade com Limitador
T35 3 325	Punção
B21 1 285	Broca Ø1,5x40/150
B21 1 423	Broca Ø1,8x40/150
B21 1 495	Broca Ø2,0x40/150
B21 1 645	Broca Ø2,5x40/200
B51 0 602	Broca Ø2,7x45/230
B21 1 821	Broca Ø3,2x40/200
B21 4 530	Broca Ø3,8x40/200 TR
B21 4 660	Broca Ø4,0x40/200 TR

Os instrumentais são fornecidos descontaminados, porém não esterilizados. Esterilização inadequada do instrumental cirúrgico pode causar infecção.

Os instrumentos cirúrgicos estão sujeitos a desgastes durante a sua utilização normal podendo, portanto, quebrar-se.

PRECAUÇÕES

O cirurgião ou a equipe responsável deve considerar algumas informações importantes descritas a seguir:

- Antes da utilização do pino é necessária a leitura completa das instruções de uso do produto e análise detalhada do procedimento cirúrgico a ser adotado;
- São de responsabilidade do cirurgião o conhecimento da anatomia e domínio da técnica a serem utilizadas, pois os resultados clínicos e a durabilidade dos implantes são extremamente dependentes de que haja uma técnica cirúrgica precisa;
- Erros na indicação, manipulação e técnica de aplicação podem provocar tensões excessivas sobre o implante, podendo acarretar a falência por fadiga, fratura e até soltura dos mesmos, pois nenhum implante corrige os inconvenientes decorrentes de uma redução inadequada da fratura;

- Quando for realizada a técnica cirúrgica, a velocidade de perfuração não deve ser superior a 1.800 rpm, pois velocidade superior corre o risco de ocorrer necrose térmica do tecido ósseo, e perfurar um canal ósseo com diâmetro maior que o necessário, podendo acarretar uma fixação instável. É necessária irrigação contínua com soro fisiológico durante o processo de perfuração;
- O produto não deve ser utilizado caso não se consiga um suporte ósseo adequado, que garanta a estabilidade do implante;
- O design do produto foi desenvolvido para fixação exclusiva nos ossos médios e longos das extremidades do corpo humano, sendo que a utilização para fixação de outros ossos representa um risco e está contraindicada;
- À critério médico pode-se fazer uso de antibioticoterapia profilática pré e perioperatória, bem como antibioticoterapia em casos em que haja predisposição local e/ou sistêmica ou onde haja ocorrência de infecções;
- É extremamente importante que o médico instrua o paciente para manter a área dos pinos sempre limpa, com higiene meticulosa, através de cuidados diários, para evitar possíveis complicações como infecção, e com isso provoque o afrouxamento do implante e falha na montagem;
- A função principal de um implante durante o processo de consolidação óssea é auxiliar na proteção mecânica do local da fratura, entretanto, não possui o desempenho do osso normal, portanto pode quebrar, deformar ou soltar, em decorrência de esforços ou atividades excessivas e carga precoce e outras situações;
- Os produtos foram desenvolvidos para utilização seguindo as precauções acima, de modo que quaisquer outras utilizações são consideradas contraindicadas ou sem substrato científico que suporte o seu uso;
- Produto de uso único – Não reutilizar, PROIBIDO REPROCESSAR.

ADVERTÊNCIAS

- O conhecimento anatômico para colocação dos pinos é de fundamental importância para que não ocorra migração dos mesmos nas articulações, ou nas placas de crescimento em crianças;
- A correta seleção e colocação dos pinos são a chave para a estabilização bem-sucedida de fraturas ou osteotomias;
- A utilização em pacientes com predisposição a desobedecer às orientações médicas e restrições pós-operatórias, como crianças, idosos, indivíduos com alterações neurológicas ou dependentes químicos, representam um risco maior para falha do implante;
- Durante o período pós-operatório, os riscos de falha do implante são maiores quando carregado além de sua capacidade funcional, contrariando as orientações médica;
- O paciente deve fazer acompanhamento médico periódico para checar as condições do implante, osso e do tecido adjacente;
- O produto foi projetado para ser utilizado com instrumentais desenvolvidos para esse fim e necessários para inserção e posicionamento adequado dos implantes. Quaisquer improvisações com diferentes instrumentais ou técnica cirúrgica imprecisa, podem comprometer a qualidade da fixação e/ou posicionamento dos implantes;
- O produto nunca deve ser reutilizado, embora possa parecer não estar danificado, as tensões prévias a que os mesmos foram submetidos, podem originar imperfeições que reduziram o tempo de vida útil do produto num reimplante e/ou provocar infecção e rejeição;

- Os modelos comerciais que compõem a família do Elemento de Fixação Óssea Não Estéril foram projetados para serem utilizados em conjunto com os Fixadores Externos (componentes ancilares e não integrantes deste produto) da Sartori Instrumentais, Implantes e Fixadores devido a compatibilidade dimensional, pois os mesmos não devem ser utilizados com Fixadores Externos de outros fabricantes, para que não ocorra incongruência entre os encaixes;
- Produto Não Estéril – Deve ser esterilizado antes da utilização e manipulado corretamente de forma a evitar contaminação;
- É recomendado que o implante seja desembalado e esterilizado imediatamente antes do procedimento cirúrgico, de forma a preservar intactos o acabamento da superfície e a configuração original, e convém que os mesmos sejam manuseados o mínimo possível quando nessas condições. Deve-se evitar a recontaminação após a esterilização;
- Esterilização inadequada do instrumental cirúrgico pode causar infecção cruzada;
- Data de fabricação, prazo de validade e número de lote: vide rótulo.

ORIENTAÇÕES AO PACIENTE E/OU REPRESENTANTE LEGAL

As informações abaixo devem ser repassadas ao paciente ou ao seu representante legal e também as informações contidas no item Efeitos Adversos:

- É importante o cumprimento rigoroso dos cuidados pós-operatórios e das restrições recomendadas pelo médico responsável. A higiene diária no local dos pinos em contato com a pele é primordial para evitar as infecções. A conduta do paciente em seguir as orientações médicas constitui um dos aspectos mais importantes em um procedimento cirúrgico;
- O fato de que os riscos são maiores quando da utilização em pacientes com predisposição a desobedecer às orientações médicas, cuidados e restrições pós-operatórias, como crianças, idosos, indivíduos com alterações neurológicas ou dependentes químicos;
- Deve-se fazer compreender completamente e alertar ao paciente que o implante é usado com a finalidade de fixação enquanto a consolidação óssea não esteja totalmente integrada e não possui o desempenho do osso normal e, que, portanto, pode quebrar, deformar ou soltar, em decorrência de esforços ou atividades excessivas de movimento e carga precoce e outras situações;
- A necessidade de acompanhamento médico periódico para checar as condições do implante, do osso e dos tecidos adjacentes;
- Que nos casos em que não ocorreu a consolidação óssea em até 1 (um) ano ou no prazo determinado pelo médico ou soltura dos elementos, recomenda-se a cirurgia de revisão, caso contrário, o implante pode apresentar falência mecânica;
- Os implantes podem interferir nos resultados dos exames por imagem, diante disso, portadores de implantes devem informar esse fato quando da realização de tais exames;
- A durabilidade dos implantes é afetada por numerosos fatores biológicos, biomecânicos e extrínsecos, que limitam a sua vida útil. Portanto, é estritamente necessária a obediência às indicações, contraindicações e precauções e advertências, os quais são essenciais para maximizar o tempo de uso pretendido;
- A importância de guardar o número de lote dos implantes utilizados para rastreabilidade dos produtos, e possíveis notificações à ANVISA quando da ocorrência de eventos adversos graves, conforme descrito nos itens de Rastreabilidade.

RASTREABILIDADE


A rastreabilidade do Elemento de Fixação Óssea Não Estéril é realizada por meio das informações apresentadas nas etiquetas de rastreabilidade, nas quais estão disponíveis informações a respeito do fabricante, nome e modelo comercial do produto, número de lote, código do produto e o número de registro Anvisa, possibilitando traçar o caminho reverso até a fabricação do produto. Desse modo é possível verificar a matéria-prima, seus fornecedores e informações sobre os controles de qualidade realizados do início ao fim do processo de fabricação.

Na embalagem dos modelos comerciais são fornecidas 5 unidades de etiqueta de rastreabilidade e sua fixação é obrigatória no prontuário clínico, no documento a ser entregue ao paciente, e na documentação fiscal que gera a cobrança.

Imagem ilustrativa da etiqueta de rastreabilidade



Os modelos comerciais do Elemento de Fixação Óssea Não Estéril também recebem marcação à laser contendo lote, logotipo da empresa, código, dimensões do produto e símbolo da matéria-prima para fabricação, como ilustrado nas imagens abaixo:

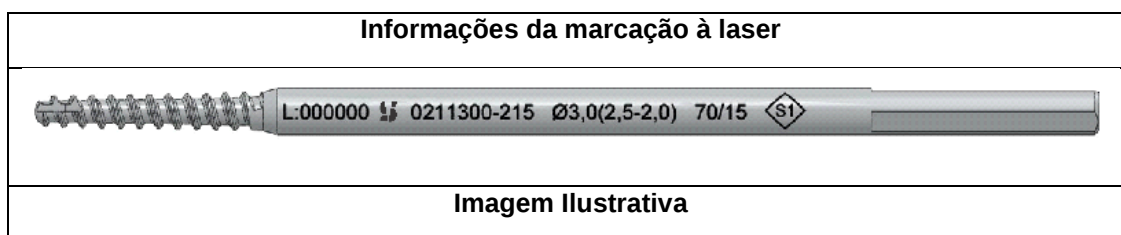

O local a ser efetuada a marcação do produto é eleito conforme descrito na norma ABNT NBR 12932 Implantes para cirurgia - Materiais Metálicos - Preparação de superfície e marcação, e é efetuada em regiões de baixas concentrações de tensões onde não cruzam com escareados ou bordas dos implantes.

NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS

Na ocorrência de qualquer evento adverso ou a necessidade de registrar queixa técnica, a SARTORI e a Anvisa devem ser notificadas por meio dos seguintes canais:

- SARTORI: <https://sartori.ind.br>

- Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) através do telefone +55 (19) 3538-1910 ou pelo e-mail: info@sartori.ind.br
- Sistema NOTIVISA (Anvisa): www.gov.br/anvisa

INSTRUÇÕES DE USO

Os pinos devem ser manipulados e armazenados com os devidos cuidados, somente por pessoas devidamente capacitadas, em ambientes adequados (centros de materiais e salas cirúrgicas) para que não ocorra dano ao material e proporcione falência prematura do implante, ou perda da esterilização, acarretando infecção ao paciente.

Devem estar asseguradas as condições para que ocorra cirurgia altamente asséptica e que todos os compostos não-implantáveis (por ex. instrumentais) estejam disponíveis antes do uso.

A avaliação clínica e por imagem (radiografia, ressonância magnética, tomografia etc.) pré-operatória do paciente deve ser conclusiva.

É de responsabilidade do cirurgião a escolha dos implantes, bem como o conhecimento e domínio da técnica cirúrgica a ser utilizada, devendo estar familiarizado com o material, o método de aplicação e o procedimento cirúrgico a ser adotado.

A correta seleção e colocação dos pinos são a chave para a estabilização bem-sucedida de fraturas ou osteotomias. O melhor produto é inútil se não for corretamente posicionado e fixado, sendo de total responsabilidade do médico que avalia o paciente e decide quais os modelos a serem utilizados.

Instrução de uso durante o procedimento cirúrgico:

- O local de colocação dos pinos deve ser cuidadosamente posicionado para que não ocorram lesões a nervos, vasos, músculos e tendões;
- Tíbia: a zona de segurança é a ântero-medial;
- Fêmur: é recomendada uma abordagem lateral ao fêmur dentro de um ângulo de 30°, também é possível uma abordagem medial em uma direção distal;
- Úmero: a principal consideração deve ser dada aos nervos radial e axilar. Recomendamos uma abordagem dorsal para a região de colocação distal do úmero. Na região proximal, é recomendada a inserção dos pinos em uma direção ventrolateral, caudal para o trajeto do nervo axilar;
- Realizar uma incisão de 15mm de forma que a pele ao redor não esteja comprimida;
- Posicionar o guia de perfuração;
- Para realizar a perfuração, utilizar o guia de broca com broca de diâmetro apropriada ao tipo de pino, como especificado no item "Descrição das características do produto", que se encontra logo no início deste documento;
- Inserir o pino manualmente até que ultrapasse a segunda cortical;
- Inserir os parafusos restantes da mesma forma;
- Em seguida realizar a montagem do fixador (componente ancilar) conforme patologia e estrutura óssea;
- Fazer os ajustes nas montagens e fixá-las;
- Fechar e limpar bem o acesso cirúrgico.

O cirurgião deve informar ao paciente e/ou Representante Legal, sobre as instruções de uso e a manutenção do mesmo e o cuidado com o local do pino.

O paciente deve também ser instruído quanto à observar meticulosamente a higiene do local dos pinos e alertar o paciente de informar ao médico sobre qualquer moléstia ou imprevisto.

A vida útil do implante é caracterizada pelo tempo de uso pretendido, se bem planejado, corretamente fixado e em condições ideais, o tempo de permanência é de até 1 (um) ano, porém caso apresente instabilidade, esta pode representar um risco de falha do implante por excesso de solicitação mecânica.

Entretanto é importante a compreensão que a vida útil do produto está condicionada às respostas ideais, ou seja, depende da interação de diversos fatores como: a responsabilidade do fabricante em relação ao projeto adequado do produto, responsabilidade do profissional como técnica cirúrgica precisa, e outros fatores que dependem do paciente, como resposta fisiológica, a condição clínica, conduta do paciente em relação a aumento de peso, porte de cargas pesadas e adoção de alto nível de atividade física.

Poderá ser necessária a realização de cirurgia de revisão, caso ocorra falha no produto ou deslocamento do pino, devendo o cirurgião responsável instruir o paciente quanto ao acompanhamento periódico para checar as condições do implante, do osso e do tecido adjacente.

Recomendamos a remoção dos implantes após o término do tratamento estipulado pelo cirurgião.

Foram desenvolvidos instrumentais específicos para implantação do Elemento de Fixação Óssea Não Estéril, devidamente descrito no tópico “Material de Apoio”. Os implantes não devem ser utilizados com instrumentais de outros fabricantes, para que não ocorra incompatibilidade dimensional e/ou funcional.

MANUSEIO

O manuseio do produto e abertura da embalagem devem ser realizados por profissionais devidamente capacitados da área médico-hospitalar.

Os implantes devem ser mantidos em suas embalagens originais. A integridade dos implantes deve ser assegurada na verificação da embalagem antes do uso, pois caso a embalagem esteja violada ou danificada, os mesmos não devem ser utilizados.

É recomendado que os implantes sejam desembalados e esterilizados imediatamente antes do procedimento cirúrgico, de forma a preservar intactos o acabamento da superfície e a configuração original, e convém que eles sejam manuseados o mínimo possível quando nessas condições. Deve-se evitar a contaminação cruzada.

Caso ocorra queda accidental ou esmagamento sobre superfícies duras, o implante deve ser inspecionado para verificar possíveis danos superficiais como trincas, quebras, deformações, que podem comprometer o desempenho do produto. Constatado tal problema, o produto deve ser descartado, como indicado no item Forma de Descarte dos Implantes.

A correta manipulação do implante antes e durante o procedimento cirúrgico é determinante para o sucesso da cirurgia. Este produto é de uso único e não pode ser reutilizado.

A abertura da embalagem para utilização cirúrgica e manipulação do produto, somente deverá ser feita por pessoal habilitado a realizar esse procedimento, para que não ocorra dano ao material, e em local totalmente asséptico.

Não utilize o produto se estiver com a embalagem violada.

Após a abertura da embalagem deve-se verificar a integridade do produto, o qual deve estar livre de manchas, riscos, deformações, ou seja, livre de qualquer dano. Somente podem ser utilizados produtos que estejam nessas condições.

É necessário que as combinações entre os Pinos e os Fixadores Externos (componentes ancilares) sejam do mesmo fabricante, pois os mesmos foram projetados para tais

combinações observando acabamento, tratamento superficial e outros fatores exigidos em projetos, que podem interferir nas combinações. Por isso implantes e fixadores de diferentes fabricantes não são recomendados por motivos de incompatibilidade química, física, biológica e funcional.

ESTERILIZAÇÃO

Os modelos comerciais que fazem parte da família do Elemento de Fixação Óssea Não Estéril são fornecidos na condição Não Estéril.

Os produtos devem ser acondicionados individualmente em embalagens indicadas para o processo de esterilização por calor úmido. Estas embalagens devem garantir a esterilização do produto até o seu uso em procedimento cirúrgico.

O método de esterilização indicado é a esterilização por calor úmido (autoclave), conforme requisitos da norma NBR ISO 17665-1 - Esterilização de produtos para saúde - Vapor - Parte 1: Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde.

Os Implantes são fornecidos descontaminados pelo fabricante, porém devem ser manipulados e esterilizados adequadamente, conforme informações a seguir, de forma a evitar a contaminação do implante e consequente infecção ao paciente.

LIMPEZA

Quando da utilização dos modelos comerciais, esses devem ser removidos de suas embalagens e lavados com álcool para fins médicos a 70% + água destilada 30%.

Após a limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada e secos com pano de limpeza que não libera fibras.

Se o processo de limpeza for realizado em equipamentos termodesinfectores com o auxílio de substâncias desincrustantes, as orientações do fabricante destes devem ser adotadas.

Parâmetros de esterilização

A esterilização dos modelos comerciais que compõem a família do Elemento de Fixação Óssea Não Estéril deve ser realizada conforme parâmetros descritos na tabela abaixo:

Método	Ciclo	Temperatura	Tempo de Exposição
Calor Úmido (autoclave)	Pré-Vácuo Esterilização (Vácuo) Secagem	134° à 137°	10 minutos

O processo de esterilização deve atender a probabilidade teórica da presença de microorganismos vitais de no máximo 1 sobre 10⁻⁶ (S.A.L. [Sterility Assurance Level] nível de garantia de esterilidade = 10⁻⁶).

As condições do equipamento (autoclave) utilizado durante o processo de esterilização (programa de calibração, manutenção etc.), bem como a garantia da utilização de um processo de esterilização adequado e a comprovação da esterilidade do produto é responsabilidade do pessoal habilitado (central de material) do Hospital.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Para o armazenamento, recomenda-se local seco, arejado e limpo, sem exposição à incidência de raio solar, à umidade ou a substâncias contaminantes. Alertamos também, que

os modelos comerciais que compõem a família dos pinos não sejam armazenados diretamente sobre o chão, sendo assim, recomenda-se a utilização de prateleiras. Não armazenar o produto próximo a lâmpadas, para que não ocorra perda das informações contidas nos rótulos do produto.

O produto deve ser conservado em suas embalagens originais até o momento de sua esterilização, sendo que a abertura da embalagem e o manuseio do produto deverá ser realizado por pessoal habilitado para este procedimento.

O produto deve ser armazenado de forma a impedir qualquer dano ou alteração as suas características, acabamento de superfície e embalagem, ou seja, livre da ação de intempéries. Deve ser evitado o empilhamento inadequado durante o armazenamento. Condições inadequadas de manipulação e armazenamento podem provocar danos como perda de informações do rótulo, danos mecânicos aos implantes, acarretando problemas ao paciente.

Para informações acerca da data de fabricação, data da validade e número do lote: vide rótulo.

TRANSPORTE

O transporte não adequado poderá gerar riscos ao procedimento cirúrgico e ao paciente. Os efeitos de vibração, quedas, atrito, corrosão, assentamento defeituoso durante a movimentação e transporte, empilhamento inadequado durante o armazenamento deve ser evitado, para não ocorrer falência precoce do dispositivo.

O transportador deve ser informado sobre o conteúdo e prazo da entrega.

O produto deve ser devidamente identificado como material médico de uso hospitalar.

O produto deve ser transportado adequadamente, por empresa devidamente capacitada e pessoal treinado para execução desta etapa, evitando-se quedas e atritos que possam danificar a estrutura e a superfície da peça e embalagem.

REMOÇÃO DOS IMPLANTES

É recomendada a remoção do produto ao término do tratamento conforme indicação médica.

A remoção deve ser tratada com todos os cuidados como quando da sua implantação para se evitar o risco de uma nova fratura.

Existem riscos de contaminação biológica e transmissão de doenças virais relacionados ao implante removido. De modo a minimizar esses riscos, todos os implantes explantados devem ser tratados como material potencialmente contaminante, devendo-se adotar as normatizações e/ou demais regulamentos locais aplicáveis, para evitar contaminação ao meio ambiente ou às pessoas que tenham contato com o produto explantado.

Produto de Uso Único. O produto nunca deve ser reutilizado, embora possa parecer não estar danificado, as tensões prévias a que os mesmos foram submetidos, podem originar imperfeições que reduziram o tempo de vida útil do produto num reimplante e/ou provocar infecção e rejeição.

FORMA DE DESCARTE

Os modelos comerciais que compõem a família do Elemento de Fixação Óssea Não Estéril explantados ou considerados inadequados para o uso devem ser descartados.

Recomenda-se que antes do descarte, o produto seja descaracterizado, para tal as peças podem ser cortadas, entortadas ou limadas.

Conforme a Resolução RE nº 2605, de 11/08/06, dispositivos implantáveis de qualquer natureza enquadrados como de uso único são proibidos de serem reprocessados.

Implantes que forem removidos da embalagem interna e inseridos dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido implantados ou contaminados por outras fontes, que forem removidos de seus pacientes e que não tenham objetivos de estudos e/ou análises posteriores devem ser adequadamente descartados pela instituição hospitalar.

Os métodos e procedimentos de descarte do produto médico utilizado devem assegurar a completa descaracterização do mesmo, impedindo qualquer possibilidade de sua reutilização. A descaracterização do produto médico é de inteira responsabilidade da instituição hospitalar, assim como, os métodos e procedimentos de descarte utilizados. Entretanto, a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores recomenda que tais produtos sejam deformados mecanicamente. Em seguida, devem ser identificados de forma clara e visível, indicando a sua situação, ou seja, impróprio ao uso.

Os implantes devem ser descartados em locais apropriados, de forma a evitar a contaminação do meio ambiente e demais indivíduos. Recomenda-se a adoção dos regulamentos legais locais para descarte de produtos potencialmente contaminantes.

Produto de uso único – Não reutilizar, PROIBIDO REPROCESSAR.

RECLAMAÇÃO E ATENDIMENTO AO CLIENTE

Todo cliente ou usuário desse dispositivo médico que tiver dúvidas ou queira maiores esclarecimentos sobre os serviços e/ou produtos oferecidos, poderá entrar em contato com a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores através dos dados para contato contido nas instruções de uso (disponível no site: www.sartori.ind.br/intrucao_uso) e rótulos da embalagem do produto.

Para o envio de dispositivos médicos explantados ao fabricante para análise, o produto deve estar limpo e estéril. Devem ser utilizadas embalagens que mantenham a integridade física do produto médico. A embalagem deve conter todas as informações necessárias para a identificação do produto médico, bem como as condições de manuseio desses produtos, tais como métodos de limpeza e desinfecção utilizados, bem como descrição e número do lote do produto médico.

FABRICANTE/ DETENTOR DO REGISTRO:

LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA.

Avenida Brasil, n.º 13500 - Distrito de Ajapi - Rio Claro - SP

CEP: 13508-000 Tel.: (19) 3538-1910

CNPJ: 04.861.623/0001-00 Indústria Brasileira

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: (19) 3538-1910

e-mail: info@sartori.ind.br

Registro ANVISA nº: 80083650064

Responsável Técnico: Sérgio Roberto Alves de Oliveira

CREA/SP: 5070105936