

Luiz Guilherme Sartori & Cia Ltda. – CNPJ: 04.861.623/0001-00
Avenida Brasil, nº. 13500 – Ajapi - Rio Claro/SP - Resp. Téc.: Sérgio R.A.de Oliveira CREA/SP: 5070105936

Visando a praticidade e a facilidade de ter acesso às informações contidas nas Instruções de Uso de nossos produtos, a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores em acordo com a RDC 751/2022 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no site: http://www.sartori.ind.br/instrucao_uso

Importante: Verifique a versão da Instrução de Uso indicado no rótulo do produto, juntamente com o nº do registro e clique em "Baixar" no documento desejado para iniciar a transferência do arquivo.

Para obter a Instrução de Uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone +55 (19) 3538-1910 ou pelo e-mail info@sartori.ind.br.

Instrução de Uso

Brocas

Registro ANVISA nº 80083650035 - Revisão 07

INFORMAÇÕES TÉCNICAS E CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Nome Técnico: Brocas Cirúrgicas

Nome Comercial: Brocas

Matéria Prima: Aço Inox (AISI) 630 / Aço Inox (UNS) S46500 (ASTM F899) / Aço Inox (AISI) 302 / Aço Inox (AISI) 304 (NBR13911-2010) / Poliacetal (NBR 15804-5-2010).

Produto Não Estéril - Esterilizar antes do uso

Método Indicado para Esterilização: Esterilização por calor úmido (autoclave)

Validade: Indeterminada

Produto Reutilizável

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

As Brocas são instrumentos cirúrgicos reutilizáveis, destinados a perfurar ossos do corpo humano, com conexão para perfuradores ativos e não ativos e que podem ser reutilizados, após serem submetidos a procedimentos de limpeza e esterilização adequadas, a fim de evitar infecções ou transmissão de doenças, tendo o cuidado de efetuar uma avaliação prévia de seu estado físico, a julgar estar íntegro, para não comprometer o seu funcionamento.

São classificados como instrumentais não articulados, cortantes, sem insertos, invasivos cirurgicamente e de uso transitório.

As Brocas foram projetadas visando aos diversos tipos de procedimentos, como cirurgias para Ortopedia e Traumatologia, Bucomaxilofacial, Joelho etc., com isso existem brocas com variações nas suas características e dimensões como Brocas curtas, longas, rebaixadas, graduadas, escalonadas e canuladas.

Também possuem variações na extremidade para acoplamento aos perfuradores, os quais são: SB (Standard Buco), BL (Buco L), TR (Triangular), ST (Standard Trauma), RC (Rosca) e SJ (Standard Joelho) [vide tabela abaixo], possibilitando agilidade e precisão ao cirurgião nos procedimentos cirúrgicos



COMPONENTES ANCILARES

São os instrumentais designados para utilização em conjunto com as Brocas, para que sua função seja desempenhada, entretanto não são integrantes deste produto. Possuem registro próprio na ANVISA e devem ser adquiridos separadamente.

Os componentes ancilares são: Guias de Broca, Fios Guia, Cânulas, Perfuradores Manuais com mandril, Perfuradores Pneumáticos, Perfuradores Elétricos, Chaves em "T" com mandril e Cabos com engate rápido.

MATERIAL DE FABRICAÇÃO

Os modelos comerciais que compõem a família de Brocas são fabricados com Aço Inoxidável S46500 e 630, que cumprem com os requisitos especificados conforme a norma ASTM F899 - Standard Specification for Wrought Stainless Steels for Surgical Instruments, Aço Inox (AISI) 302 e 304 que cumprem com os requisitos especificados conforme a norma NBR 13911 - Materiais Metálicos – Especificações para tarugos, barras e fios de aço inoxidável e Poliacetal conforme norma NBR 15804-5 - Materiais Poliméricos para aplicações médicas Parte 5: Especificações para polioximetileno (acetal), caracterizados como ligas com propriedades mecânica e metalúrgica favoráveis para esse fim.

MECANISMO DE AÇÃO

O princípio de funcionamento das Brocas é a perfuração dos ossos do corpo humano, cuja finalidade é a de facilitar a implantação dos implantes nos locais perfurados.

Paralelamente deve ocorrer uma irrigação no local, para não superaquecer o osso e consequentemente ocorrer necrose óssea localizada.

INDICAÇÃO

As Brocas têm a finalidade de furar ossos grandes e pequenos do corpo humano, servindo como auxiliador na implantação de dispositivos médicos.

É fundamental a seleção da técnica adequada para cada procedimento cirúrgico. O tratamento deve objetivar primariamente o restabelecimento anatômico e a recuperação da biomecânica. O reconhecimento dos detalhes da anatomia patológica é decisivo e devem ser os alvos da estratégia cirúrgica.

O êxito do procedimento está ligado à correta seleção e posicionamento do instrumental, que é de responsabilidade do médico que avalia o paciente e decide quais materiais e técnicas cirúrgicas deverão ser utilizadas, está vinculado também ao rigoroso cumprimento dos cuidados pós-operatórios recomendados pelo médico responsável.

CONTRAINDICAÇÃO

Não possui contraindicações para estes produtos.

EFEITOS ADVERSOS

Não apresenta. Entretanto recomendamos que haja uma irrigação no local, em paralelo a perfuração, para não superaquecer o osso e consequentemente necrose óssea localizada.

As Brocas têm sido utilizadas sem incidência de efeitos adversos reportados desde que verificadas as precauções, advertências, contraindicações e cuidados especiais.

Produto Não Estéril – Esterilizar antes do uso. Esterilização inadequada pode provocar infecção ao paciente.

PRECAUÇÕES

Não utilizar as Brocas caso apresente qualquer tipo de irregularidade, ou seja, quando estiver com seu funcionamento danificado.

Não usar as brocas cirúrgicas como alavanca, cunha ou submetidas à sobrecarga.

Não forçar demais a broca cirúrgica e evitar mudanças bruscas de velocidade.

Durante a perfuração utilizar irrigação local para não ocorrer superaquecimento no osso.

ADVERTÊNCIAS

As Brocas devem ser utilizadas somente por profissionais da área médico-hospitalar, devidamente treinados e orientados para procedimentos cirúrgicos ortopédicos.

O uso incorreto e/ou por pessoas não capacitadas pode causar danos ao instrumental, como, por exemplo, quebra, acarretando problemas ao paciente, principalmente se a parte rompida permanecer no local e não for extraída, por motivos de força maior. Recomendamos ao cirurgião, caso ocorra permanência de partes do produto dentro do paciente, o ocorrido deverá ser informado ao paciente ou responsável, e radiografias devem ser tiradas periodicamente, por prazo de tempo estabelecido pelo cirurgião, para acompanhamento do caso.

É importante a utilização das Brocas através dos guias para perfuração, pois são elementos que garantem a boa funcionalidade, correto alinhamento e o desempenho pretendido do produto.

Produto Não Implantável.

RASTREABILIDADE

Para garantir a rastreabilidade dos modelos comerciais que compõem a família de Brocas, os produtos recebem marcação à laser contendo logotipo da empresa, código, diâmetro do produto (quando possível, pois existem produtos cujos locais são limitados e não permitem gravações do diâmetro) e número do lote de fabricação.

No rótulo constam os dados do produto como código, descrição e lote do mesmo, entre outras informações como o número do registro do produto na ANVISA.

Quando da ocorrência de eventos adversos graves, essas informações são necessárias para notificação, pelo serviço de saúde e/ou pelo próprio paciente à Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA e ao fabricante, para a condução das investigações cabíveis.

Ocorrido o Evento Adverso (EA) e a necessidade de realização de Queixa Técnica (QT) deve-se proceder à notificação no Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária – NOTIVISA, que pode ser encontrado no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA no endereço www.anvisa.gov.br, link NOTIVISA.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

As Brocas são disponibilizadas para comercialização na condição de produto não estéril, acondicionadas em embalagem plástica de polietileno, contendo 1 (uma), 3 (três), 5 (cinco) ou 10 (dez) unidades em cada embalagem.

Dentro da embalagem segue um folheto com as instruções de uso, bem como as informações para manuseio e utilização do produto. Sobre a embalagem é colado um rótulo, contendo as informações necessárias para a identificação do produto.

As Brocas são marcadas a laser com logotipo da empresa, código, diâmetro do produto (quando possível, pois existem produtos cujos locais são limitados e não permitem gravações do diâmetro) e número do lote de fabricação e foram desenvolvidas com variações nas suas características e dimensões.

A correta seleção das brocas e técnica cirúrgica é responsabilidade do cirurgião, devendo este, estar familiarizado com o material, o método de aplicação e o procedimento cirúrgico a ser adotado.

Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada ou violada ou o produto esteja descaracterizado.

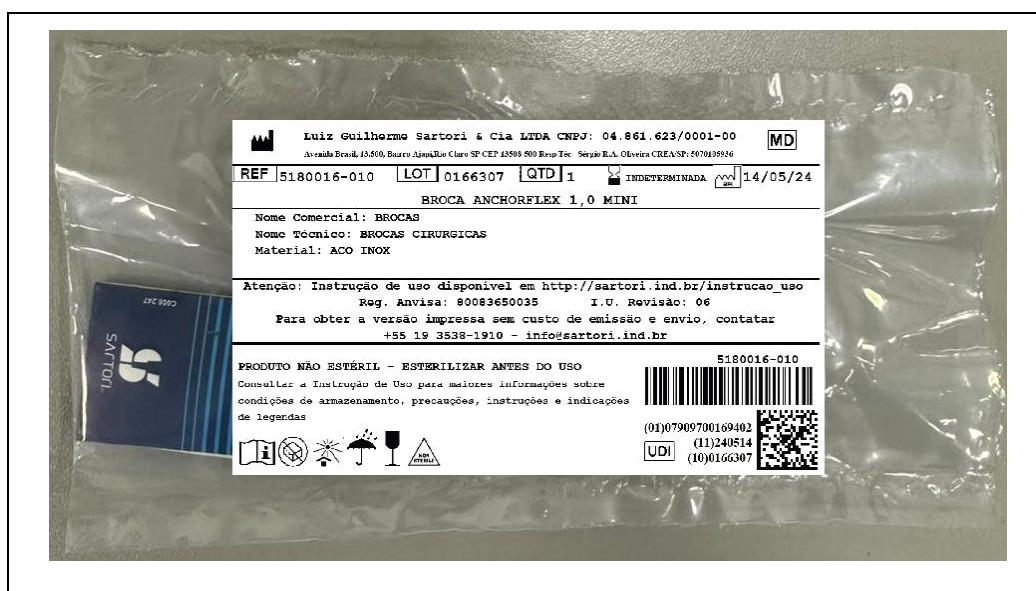


Imagem ilustrativa da embalagem

		Luiz Guilherme Sartori & Cia LTDA CNPJ: 04.861.623/0001-00			
Avenida Brasil, 13.500, Bairro Ajapi, Rio Claro SP CEP 13508-500 Resp.Téc.- Sérgio R.A. Oliveira CREA/SP: 5070105936					
REF	5180016-010	LOT	0166307	QTD	1
				INDETERMINADA	14/05/24
BROCA ANCHORFLEX 1,0 MINI					
Nome Comercial: BROCAS Nome Técnico: BROCAS CIRURGICAS Material: ACO INOX					
Atenção: Instrução de uso disponível em http://sartori.ind.br/instrucao_uso Reg. Anvisa: 80083650035 I.U. Revisão: XX Para obter a versão impressa sem custo de emissão e envio, contatar +55 19 3538-1910 - info@sartori.ind.br					
PRODUTO NÃO ESTÉRIL - ESTERILIZAR ANTES DO USO Consultar a Instrução de Uso para maiores informações sobre condições de armazenamento, precauções, instruções e indicações de legendas				5180016-010  (01)07909700169402 (11)240514 (10)0166307 	
					
					
					

Imagem ilustrativa do rótulo do produto

SIGNIFICADO DA LEGENDA DOS SÍMBOLOS GRÁFICOS CONTIDOS NA ROTULAGEM DO PRODUTO MÉDICO:

As simbologias apresentadas nos rótulos dos dispositivos médicos estão ilustradas abaixo e seguem denominações em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 15223-1.

	Número de catálogo (código do produto embalado)
	Quantidade do produto embalado
	Código de remessa (número de lote do produto embalado)
	Data de Fabricação
	Usar até a data (validade)
	Não estéril
	Consultar Instruções de uso ou consultar instruções eletrônicas de uso
	Fabricante
	Não usar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de uso
	Proteger de luz solar
	Manter seco
	Frágil, manusear com cuidado
	Dispositivo médico



Identificador único do dispositivo

ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os produtos são acompanhados de um Alerta de Instrução de Uso, contendo todas as informações para acesso no site do fabricante, além das informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso.

ALERTA DE INSTRUÇÕES DE USO

Conforme Resolução RDC 751 de 15.09.2022, que estabelece requisitos para disponibilização de Instrução de Uso em formato não impresso de dispositivos médicos, seguem neste alerta as informações para acesso das Instruções de Uso no site do fabricante do produto.

As Instruções de Uso estão disponíveis em: https://sartori.ind.br/instrucao_uso

Para a visualização dos arquivos utilize o software Adobe Acrobat Reader. As Instruções de Uso estão indexadas no website por meio do número de Registro/ Notificação ANVISA e respectivo nome comercial (descrição do registro).

Todas as Instruções de Uso possuem o Nº do Registro/Notificação ANVISA e a revisão na primeira página do documento. O usuário deve atentar-se para a correta revisão da Instrução de Uso, informada no rótulo do produto.

Para Instrução de Uso no formato impresso, o consumidor pode solicitar sem custo adicional (inclusive de envio), por meio do telefone +55 19 3538-1910 ou do e-mail: info@sartori.ind.br.

(FSQ 095.07.01)

A seguir código e descrição dos modelos comerciais que compõem a família das Brocas:

5180016-010 - BROCA ANCHORFLEX 1,0 MINI; 5180016-014 - BROCA ANCHORFLEX 1,4 HC; 5180016-023 - BROCA ANCHORFLEX 2,3 HC; 5180016-025 - BROCA ANCHORFLEX 2,5 HC; 5180016-114 - BROCA ANCHORFLEX 1,4 STD; 5180016-123 - BROCA ANCHORFLEX 2,3 STD; 5180016-125 - BROCA ANCHORFLEX 2,5 STD; 5180016-214 - BROCA ANCHORFLEX 1,4 HL; 5180016-223 - BROCA ANCHORFLEX 2,3 HL; 5180016-225 - BROCA ANCHORFLEX 2,5 HL; 5180016-314 - BROCA FLEXÍVEL ANCHORFLEX 1,4 HL; 5180016-323 - BROCA FLEXÍVEL ANCHORFLEX 2,3 HL; 5180016-325 - BROCA FLEXÍVEL ANCHORFLEX 2,5 HL; 5181000-000 - BROCA DIAM.2,7; 5181000-002 - BROCA DIAM.2,7X15/60; 5181000-004 - BROCA DIAM.2,7X15/80; 5181000-006 - BROCA DIAM.2,7X15/100; 5181000-008 - BROCA DIAM.2,7X15/120; 5181000-010 - BROCA DIAM.2,7X15/150; 5181000-012 - BROCA DIAM.2,7X20/60; 5181000-014 - BROCA DIAM.2,7X20/80; 5181000-016 - BROCA DIAM.2,7X20/100; 5181000-018 - BROCA DIAM.2,7X20/120; 5181000-020 - BROCA DIAM.2,7X20/150; 5181000-022 - BROCA DIAM.2,7X25/80; 5181000-024 - BROCA DIAM.2,7X25/100; 5181000-026 - BROCA DIAM.2,7X25/120; 5181000-028 - BROCA DIAM.2,7X25/150; 5181000-030 - BROCA DIAM.2,7X25/180; 5181000-032 - BROCA DIAM.2,7X25/200; 5181000-034 - BROCA DIAM.2,7X30/80; 5181000-036 - BROCA DIAM.2,7X30/100; 5181000-038 - BROCA DIAM.2,7X30/120; 5181000-040 - BROCA DIAM.2,7X30/150; 5181000-042 - BROCA DIAM.2,7X30/180; 5181000-044 - BROCA DIAM.2,7X30/200; 5181000-046 - BROCA DIAM.2,7X40/100; 5181000-048 - BROCA DIAM.2,7X40/120; 5181000-050 - BROCA DIAM.2,7X40/150; 5181000-052 - BROCA DIAM.2,7X40/180; 5181000-054 - BROCA DIAM.2,7X40/200; 5181000-056 - BROCA DIAM.2,7X40/220; 5181000-058 - BROCA DIAM.2,7X40/250; 5181000-060 - BROCA DIAM.2,7X40/300; 5181000-062 - BROCA DIAM.2,7X50/100; 5181000-064 - BROCA DIAM.2,7X50/120; 5181000-066 - BROCA DIAM.2,7X50/150; 5181000-068 - BROCA DIAM.2,7X50/180; 5181000-070 - BROCA DIAM.2,7X50/200; 5181000-072 - BROCA DIAM.2,7X50/220; 5181000-074 - BROCA DIAM.2,7X50/250; 5181000-076 - BROCA DIAM.2,7X50/300; 5181001-000 - BROCA DIAM.2,7 TR; 5181001-002 - BROCA DIAM.2,7X15/60 TR; 5181001-004 - BROCA DIAM.2,7X15/80 TR; 5181001-006 - BROCA DIAM.2,7X15/100 TR; 5181001-008 - BROCA DIAM.2,7X15/120 TR; 5181001-010 - BROCA DIAM.2,7X15/150 TR; 5181001-012 - BROCA DIAM.2,7X20/60 TR; 5181001-014 - BROCA DIAM.2,7X20/80 TR; 5181001-016 - BROCA DIAM.2,7X20/100 TR; 5181001-018 - BROCA DIAM.2,7X20/120 TR; 5181001-020 - BROCA DIAM.2,7X20/150 TR; 5181001-022 - BROCA DIAM.2,7X25/80 TR; 5181001-024 - BROCA DIAM.2,7X25/100 TR; 5181001-026 - BROCA DIAM.2,7X25/120 TR; 5181001-028 - BROCA DIAM.2,7X25/150 TR; 5181001-030 - BROCA DIAM.2,7X25/180 TR; 5181001-032 - BROCA DIAM.2,7X25/200 TR; 5181001-034 - BROCA DIAM.2,7X30/80 TR; 5181001-036 - BROCA DIAM.2,7X30/100 TR; 5181001-038 - BROCA DIAM.2,7X30/120 TR; 5181001-040 - BROCA DIAM.2,7X30/150 TR; 5181001-042 - BROCA DIAM.2,7X30/180 TR; 5181001-044 - BROCA DIAM.2,7X30/200 TR; 5181001-046 - BROCA DIAM.2,7X40/100 TR; 5181001-048 - BROCA DIAM.2,7X40/120 TR; 5181001-050 - BROCA DIAM.2,7X40/150 TR; 5181001-052 - BROCA DIAM.2,7X40/180 TR; 5181001-054 - BROCA DIAM.2,7X40/200 TR; 5181001-056 - BROCA DIAM.2,7X40/220 TR; 5181001-058 - BROCA DIAM.2,7X40/250 TR; 5181001-060 - BROCA DIAM.2,7X40/300 TR; 5181001-062 - BROCA DIAM.2,7X50/100 TR; 5181001-

064 - BROCA DIAM.2,7X50/120R; 5181001-066 - BROCA DIAM.2,7X50/150 TR; 5181001-068 - BROCA DIAM.2,7X50/180 TR; 5181001-070 - BROCA DIAM.2,7X50/200 TR; 5181001-072 - BROCA DIAM.2,7X50/220 TR; 5181001-074 - BROCA DIAM.2,7X50/250 TR; 5181001-076 - BROCA DIAM.2,7X50/300 TR; 5181002-000 - BROCA DIAM.2,7 ST; 5181002-002 - BROCA DIAM.2,7X15/60 ST; 5181002-004 - BROCA DIAM.2,7X15/80 ST; 5181002-006 - BROCA DIAM.2,7X15/100 ST; 5181002-008 - BROCA DIAM.2,7X15/120 ST; 5181002-010 - BROCA DIAM.2,7X15/150 ST; 5181002-012 - BROCA DIAM.2,7X20/60 ST; 5181002-014 - BROCA DIAM.2,7X20/80 ST; 5181002-016 - BROCA DIAM.2,7X20/100 ST; 5181002-018 - BROCA DIAM.2,7X20/120 ST; 5181002-020 - BROCA DIAM.2,7X20/150 ST; 5181002-022 - BROCA DIAM.2,7X25/80 ST; 5181002-024 - BROCA DIAM.2,7X25/100 ST; 5181002-026 - BROCA DIAM.2,7X25/120 ST; 5181002-028 - BROCA DIAM.2,7X25/150 ST; 5181002-030 - BROCA DIAM.2,7X25/180 ST; 5181002-032 - BROCA DIAM.2,7X25/200 ST; 5181002-034 - BROCA DIAM.2,7X30/80 ST; 5181002-036 - BROCA DIAM.2,7X30/100 ST; 5181002-038 - BROCA DIAM.2,7X30/120 ST; 5181002-040 - BROCA DIAM.2,7X30/150 ST; 5181002-042 - BROCA DIAM.2,7X30/180 ST; 5181002-044 - BROCA DIAM.2,7X30/200 ST; 5181002-046 - BROCA DIAM.2,7X40/100 ST; 5181002-048 - BROCA DIAM.2,7X40/120 ST; 5181002-050 - BROCA DIAM.2,7X40/150 ST; 5181002-052 - BROCA DIAM.2,7X40/180 ST; 5181002-054 - BROCA DIAM.2,7X40/200 ST; 5181002-056 - BROCA DIAM.2,7X40/220 ST; 5181002-058 - BROCA DIAM.2,7X40/250 ST; 5181002-060 - BROCA DIAM.2,7X40/300 ST; 5181002-062 - BROCA DIAM.2,7X50/100 ST; 5181002-064 - BROCA DIAM.2,7X50/120 ST; 5181002-066 - BROCA DIAM.2,7X50/150 ST; 5181002-068 - BROCA DIAM.2,7X50/180 ST; 5181002-070 - BROCA DIAM.2,7X50/200 ST; 5181002-072 - BROCA DIAM.2,7X50/220 ST; 5181002-074 - BROCA DIAM.2,7X50/250 ST; 5181002-076 - BROCA DIAM.2,7X50/300 ST; 5181003-000 - BROCA DIAM.2,8; 5181003-002 - BROCA DIAM.2,8X15/60; 5181003-004 - BROCA DIAM.2,8X15/80; 5181003-006 - BROCA DIAM.2,8X15/100; 5181003-008 - BROCA DIAM.2,8X15/120; 5181003-010 - BROCA DIAM.2,8X15/150; 5181003-012 - BROCA DIAM.2,8X20/60; 5181003-014 - BROCA DIAM.2,8X20/80; 5181003-016 - BROCA DIAM.2,8X20/100; 5181003-018 - BROCA DIAM.2,8X20/120; 5181003-020 - BROCA DIAM.2,8X20/150; 5181003-022 - BROCA DIAM.2,8X25/80; 5181003-024 - BROCA DIAM.2,8X25/100; 5181003-026 - BROCA DIAM.2,8X25/120; 5181003-028 - BROCA DIAM.2,8X25/150; 5181003-030 - BROCA DIAM.2,8X25/180; 5181003-032 - BROCA DIAM.2,8X25/200; 5181003-034 - BROCA DIAM.2,8X30/80; 5181003-036 - BROCA DIAM.2,8X30/100; 5181003-038 - BROCA DIAM.2,8X30/120; 5181003-040 - BROCA DIAM.2,8X30/150; 5181003-042 - BROCA DIAM.2,8X30/180; 5181003-044 - BROCA DIAM.2,8X30/200; 5181003-046 - BROCA DIAM.2,8X30/220; 5181003-048 - BROCA DIAM.2,8X30/250; 5181003-050 - BROCA DIAM.2,8X40/100; 5181003-052 - BROCA DIAM.2,8X40/120; 5181003-054 - BROCA DIAM.2,8X40/150; 5181003-056 - BROCA DIAM.2,8X40/180; 5181003-058 - BROCA DIAM.2,8X40/200; 5181003-060 - BROCA DIAM.2,8X40/220; 5181003-062 - BROCA DIAM.2,8X40/250; 5181003-064 - BROCA DIAM.2,8X40/300; 5181003-066 - BROCA DIAM.2,8X40/350; 5181003-068 - BROCA DIAM.2,8X50/100; 5181003-070 - BROCA DIAM.2,8X50/120; 5181003-072 - BROCA DIAM.2,8X50/150; 5181003-074 - BROCA DIAM.2,8X50/180; 5181003-076 - BROCA DIAM.2,8X50/200; 5181003-078 - BROCA DIAM.2,8X50/220; 5181003-080 - BROCA DIAM.2,8X50/250; 5181003-082 - BROCA DIAM.2,8X50/300; 5181003-084 - BROCA DIAM.2,8X50/350; 5181003-086 - BROCA DIAM.2,8X70/200; 5181003-088 - BROCA DIAM.2,8X70/220; 5181003-090 - BROCA DIAM.2,8X70/250; 5181003-092 - BROCA DIAM.2,8X70/300; 5181003-094 - BROCA DIAM.2,8X70/350; 5181004-000 - BROCA DIAM.2,8 TR; 5181004-002 - BROCA DIAM.2,8X15/60 TR; 5181004-004 - BROCA DIAM.2,8X15/80 TR; 5181004-006 - BROCA DIAM.2,8X15/100 TR; 5181004-008 - BROCA DIAM.2,8X15/120 TR; 5181004-010 - BROCA DIAM.2,8X15/150 TR; 5181004-012 - BROCA DIAM.2,8X20/60 TR; 5181004-014 - BROCA DIAM.2,8X20/80 TR; 5181004-016 - BROCA DIAM.2,8X20/100 TR; 5181004-018 - BROCA DIAM.2,8X20/120 TR; 5181004-020 - BROCA DIAM.2,8X20/150 TR; 5181004-022 - BROCA DIAM.2,8X25/80 TR; 5181004-024 - BROCA DIAM.2,8X25/100 TR; 5181004-026 - BROCA DIAM.2,8X25/120 TR; 5181004-028 - BROCA DIAM.2,8X25/150 TR; 5181004-030 - BROCA DIAM.2,8X25/180 TR; 5181004-032 - BROCA DIAM.2,8X25/200 TR; 5181004-034 - BROCA DIAM.2,8X30/80 TR; 5181004-036 - BROCA DIAM.2,8X30/100 TR; 5181004-038 - BROCA DIAM.2,8X30/120 TR; 5181004-040 - BROCA DIAM.2,8X30/150 TR; 5181004-042 - BROCA DIAM.2,8X30/180 TR; 5181004-044 - BROCA DIAM.2,8X30/200 TR; 5181004-046 - BROCA DIAM.2,8X30/220 TR; 5181004-048 - BROCA DIAM.2,8X30/250 TR; 5181004-050 - BROCA DIAM.2,8X40/100 TR; 5181004-052 - BROCA DIAM.2,8X40/120 TR; 5181004-054 - BROCA DIAM.2,8X40/150 TR; 5181004-056 - BROCA DIAM.2,8X40/180 TR; 5181004-058 - BROCA DIAM.2,8X40/200 TR; 5181004-060 - BROCA DIAM.2,8X40/220 TR; 5181004-062 - BROCA DIAM.2,8X40/250 TR; 5181004-064 - BROCA DIAM.2,8X40/300 TR; 5181004-066 - BROCA DIAM.2,8X40/350 TR; 5181004-068 - BROCA DIAM.2,8X50/100 TR; 5181004-070 - BROCA DIAM.2,8X50/120 TR; 5181004-072 - BROCA DIAM.2,8X50/150 TR; 5181004-074 - BROCA DIAM.2,8X50/180 TR; 5181004-076 - BROCA DIAM.2,8X50/200 TR; 5181004-078 - BROCA DIAM.2,8X50/220 TR; 5181004-080 - BROCA DIAM.2,8X50/250 TR; 5181004-082 - BROCA DIAM.2,8X50/300 TR; 5181004-084 - BROCA DIAM.2,8X50/350 TR; 5181004-086 - BROCA DIAM.2,8X70/200 TR; 5181004-088 - BROCA DIAM.2,8X70/220 TR; 5181004-090 - BROCA DIAM.2,

[illegible]

BROCA DIAM.4,3X50/400 TR; 5181011-066 - BROCA DIAM.4,3X70/200 TR; 5181011-068 - BROCA DIAM.4,3X70/220 TR; 5181011-070 - BROCA DIAM.4,3X70/250 TR; 5181011-072 - BROCA DIAM.4,3X70/300 TR; 5181011-074 - BROCA DIAM.4,3X70/350 TR; 5181011-076 - BROCA DIAM.4,3X70/400 TR; 5181012-000 - BROCA DIAM.4,3 ST; 5181012-002 - BROCA DIAM.4,3X25/100 ST; 5181012-004 - BROCA DIAM.4,3X25/120 ST; 5181012-006 - BROCA DIAM.4,3X25/150 ST; 5181012-008 - BROCA DIAM.4,3X25/180 ST; 5181012-010 - BROCA DIAM.4,3X25/200 ST; 5181012-012 - BROCA DIAM.4,3X30/100 ST; 5181012-014 - BROCA DIAM.4,3X30/120 ST; 5181012-016 - BROCA DIAM.4,3X30/150 ST; 5181012-018 - BROCA DIAM.4,3X30/180 ST; 5181012-020 - BROCA DIAM.4,3X30/200 ST; 5181012-022 - BROCA DIAM.4,3X30/220 ST; 5181012-024 - BROCA DIAM.4,3X30/250 ST; 5181012-026 - BROCA DIAM.4,3X40/100 ST; 5181012-028 - BROCA DIAM.4,3X40/120 ST; 5181012-030 - BROCA DIAM.4,3X40/150 ST; 5181012-032 - BROCA DIAM.4,3X40/180 ST; 5181012-034 - BROCA DIAM.4,3X40/200 ST; 5181012-036 - BROCA DIAM.4,3X40/220 ST; 5181012-038 - BROCA DIAM.4,3X40/250 ST; 5181012-040 - BROCA DIAM.4,3X40/300 ST; 5181012-042 - BROCA DIAM.4,3X40/350 ST; 5181012-044 - BROCA DIAM.4,3X40/400 ST; 5181012-046 - BROCA DIAM.4,3X50/100 ST; 5181012-048 - BROCA DIAM.4,3X50/120 ST; 5181012-050 - BROCA DIAM.4,3X50/150 ST; 5181012-052 - BROCA DIAM.4,3X50/180 ST; 5181012-054 - BROCA DIAM.4,3X50/200 ST; 5181012-056 - BROCA DIAM.4,3X50/220 ST; 5181012-058 - BROCA DIAM.4,3X50/250 ST; 5181012-060 - BROCA DIAM.4,3X50/300 ST; 5181012-062 - BROCA DIAM.4,3X50/350 ST; 5181012-064 - BROCA DIAM.4,3X50/400 ST; 5181012-066 - BROCA DIAM.4,3X70/200 ST; 5181012-068 - BROCA DIAM.4,3X70/220 ST; 5181012-070 - BROCA DIAM.4,3X70/250 ST; 5181012-072 - BROCA DIAM.4,3X70/300 ST; 5181012-074 - BROCA DIAM.4,3X70/350 ST; 5181012-076 - BROCA DIAM.4,3X70/400 ST; 5181014-012 - BROCA CANULADA MINI - 8/12MM; 5181014-018 - BROCA CANULADA MINI - 14/18MM; 5181014-026 - BROCA CANULADA MINI - 20/26MM; 5181014-112 - BROCA CANULADA MINI - 8/12MM LONGA; 5181014-118 - BROCA CANULADA MINI - 14/18MM LONGA; 5181014-126 - BROCA CANULADA MINI - 20/26MM LONGA; 5181014-215 - BROCA CANULADA STD - 12,5/15MM; 5181014-222 - BROCA CANULADA STD - 17,5/22,5MM; 5181014-230 - BROCA CANULADA STD - 25/30MM; 5181014-345 - BROCA CANULADA PLUS - 35/45MM; 5181014-360 - BROCA CANULADA PLUS - 50/60MM; 5181014-380 - BROCA CANULADA PLUS - 65/80MM; 5181014-430 - BROCA CANULADA 4/5 - 25/30MM; 5181014-440 - BROCA CANULADA 4/5 - 35/40MM; 5181014-450 - BROCA CANULADA 4/5 - 45/50MM; 5181014-545 - BROCA CANULADA 6/7 - 40/45MM; 5181014-555 - BROCA CANULADA 6/7 - 50/55MM; 5181014-570 - BROCA CANULADA 6/7 - 60/70MM; 5181014-585 - BROCA CANULADA 6/7 - 75/85MM; 5181014-590 - BROCA CANULADA 6/7 - 90/100MM; 5181015-045 - BROCA CANULADA E-BUTTON DIAM.4,5MM; B21 0 050 - BROCA Ø0,6 CURTA; B21 0 052 - BROCA Ø0,6; B21 0 054 - BROCA Ø0,6 LONGA; B21 0 056 - BROCA Ø0,6 REBAIXADA CURTA; B21 0 058 - BROCA Ø0,6 REBAIXADA; B21 0 060 - BROCA Ø0,6 REBAIXADA LONGA; B21 0 100 - BROCA Ø1,0 CURTA; B21 0 102 - BROCA Ø1,0X5 CURTA; B21 0 104 - BROCA Ø1,0X7 CURTA; B21 0 106 - BROCA Ø1,0X9 CURTA; B21 0 108 - BROCA Ø1,0X11 CURTA; B21 0 110 - BROCA Ø1,0X13 CURTA; B21 0 112 - BROCA Ø1,0X15 CURTA; B21 0 114 - BROCA Ø1,0X17 CURTA; B21 0 116 - BROCA Ø1,0X20 CURTA; B21 0 118 - BROCA Ø1,0X22 CURTA; B21 0 120 - BROCA Ø1,0; B21 0 122 - BROCA Ø1,0X5; B21 0 124 - BROCA Ø1,0X7; B21 0 126 - BROCA Ø1,0X9; B21 0 128 - BROCA Ø1,0X11; B21 0 130 - BROCA Ø1,0X13; B21 0 132 - BROCA Ø1,0X15; B21 0 134 - BROCA Ø1,0X17; B21 0 136 - BROCA Ø1,0X20; B21 0 138 - BROCA Ø1,0X22; B21 0 140 - BROCA Ø1,0 LONGA; B21 0 142 - BROCA Ø1,0X5 LONGA; B21 0 144 - BROCA Ø1,0X7 LONGA; B21 0 146 - BROCA Ø1,0X9 LONGA; B21 0 148 - BROCA Ø1,0X11 LONGA; B21 0 150 - BROCA Ø1,0X13 LONGA; B21 0 152 - BROCA Ø1,0X15 LONGA; B21 0 154 - BROCA Ø1,0X17 LONGA; B21 0 156 - BROCA Ø1,0X20 LONGA; B21 0 158 - BROCA Ø1,0X22 LONGA; B21 0 160 - BROCA Ø1,0 REBAIXADA CURTA; B21 0 162 - BROCA Ø1,0X5 REBAIXADA CURTA; B21 0 164 - BROCA Ø1,0X7 REBAIXADA CURTA; B21 0 166 - BROCA Ø1,0X9 REBAIXADA CURTA; B21 0 168 - BROCA Ø1,0X11 REBAIXADA CURTA; B21 0 170 - BROCA Ø1,0X13 REBAIXADA CURTA; B21 0 172 - BROCA Ø1,0X15 REBAIXADA CURTA; B21 0 174 - BROCA Ø1,0X17 REBAIXADA CURTA; B21 0 176 - BROCA Ø1,0X20 REBAIXADA CURTA; B21 0 178 - BROCA Ø1,0X22 REBAIXADA CURTA; B21 0 180 - BROCA Ø1,0 REBAIXADA; B21 0 182 - BROCA Ø1,0X5 REBAIXADA; B21 0 184 - BROCA Ø1,0X7 REBAIXADA; B21 0 186 - BROCA Ø1,0X9 REBAIXADA; B21 0 188 - BROCA Ø1,0X11 REBAIXADA; B21 0 190 - BROCA Ø1,0X13 REBAIXADA; B21 0 192 - BROCA Ø1,0X15 REBAIXADA; B21 0 194 - BROCA Ø1,0X17 REBAIXADA; B21 0 196 - BROCA Ø1,0X20 REBAIXADA; B21 0 198 - BROCA Ø1,0X22 REBAIXADA; B21 0 200 - BROCA Ø1,0 REBAIXADA LONGA; B21 0 202 - BROCA Ø1,0X5 REBAIXADA LONGA; B21 0 204 - BROCA Ø1,0X7 REBAIXADA LONGA; B21 0 206 - BROCA Ø1,0X9 REBAIXADA LONGA; B21 0 208 - BROCA Ø1,0X11 REBAIXADA LONGA; B21 0 210 - BROCA Ø1,0X13 REBAIXADA LONGA; B21 0 212 - BROCA Ø1,0X15 REBAIXADA LONGA; B21 0 214 - BROCA Ø1,0X17 REBAIXADA LONGA; B21 0 216 - BROCA Ø1,0X20 REBAIXADA LONGA; B21 0 218 - BROCA Ø1,0X22 REBAIXADA LONGA; B21 0 220 - BROCA Ø1,1 CURTA; B21 0 222 - BROCA Ø1,1X5 CURTA; B21 0 224 - BROCA Ø1,1X7 CURTA; B21 0 226 - BROCA Ø1,1X9 CURTA; B21 0 228 - BROCA Ø1,1X11 CURTA; B21 0 230 - BROCA Ø1,1X13 CURTA; B21 0 232 - BROCA Ø1,1X15 CURTA; B21 0 234 - BROCA Ø1,1X17 CURTA; B21 0 236 - BROCA Ø1,1X20 CURTA; B21 0 238 - BROCA Ø1,1X22 CURTA; B21 0 240 - BROCA Ø1,1; B21 0 242 - BROCA Ø1,1X5; B21 0 244 - BROCA Ø1,1X7; B21 0 246 - BROCA Ø1,1X9; B21 0 248 - BROCA Ø1,1X11; B21 0 250 - BROCA Ø1,1X13; B21 0 252 - BROCA Ø1,1X15; B21 0 254 - BROCA Ø1,1X17; B21 0 256 - BROCA Ø1,1X20; B21 0 258 - BROCA Ø1,1X22; B21 0 260 - BROCA Ø1,1 LONGA; B21 0 262 - BROCA Ø1,1X5 LONGA; B21 0 264 - BROCA Ø1,1X7 LONGA; B21 0 266 - BROCA Ø1,1X9 LONGA; B21 0 268 - BROCA Ø1,1X11 LONGA; B21 0 270 - BROCA Ø1,1X13 LONGA; B21 0 272 - BROCA Ø1,1X15 LONGA; B21 0 274 - BROCA Ø1,1X17 LONGA; B21 0 276 - BROCA Ø1,1X20 LONGA; B21 0 278 - BROCA Ø1,1X22 LONGA; B21 0 280 - BROCA Ø1,1 REBAIXADA CURTA; B21 0 282 - BROCA Ø1,1X5 REBAIXADA CURTA; B21 0 284 - BROCA Ø1,1X7 REBAIXADA CURTA; B21 0 286 - BROCA Ø1,1X9 REBAIXADA CURTA; B21 0 288 - BROCA Ø1,1X11 REBAIXADA CURTA; B21 0 290 - BROCA Ø1,1X13 REBAIXADA CURTA; B21 0 292 - BROCA Ø1,1X15 REBAIXADA CURTA; B21 0 294 - BROCA Ø1,1X17 REBAIXADA CURTA; B21 0 296 - BROCA Ø1,1X20 REBAIXADA CURTA; B21 0 298 - BROCA Ø1,1X22 REBAIXADA CURTA; B21 0 300 - BROCA Ø1,1 REBAIXADA; B21 0 302 - BROCA Ø1,1X5 REBAIXADA; B21 0 304 - BROCA Ø1,1X7 REBAIXADA; B21 0 306 - BROCA Ø1,1X9 REBAIXADA; B21 0 308 - BROCA Ø1,1X11 REBAIXADA; B21 0 310 - BROCA Ø1,1X13 REBAIXADA; B21 0 312 - BROCA Ø1,1X15 REBAIXADA; B21 0 314 - BROCA Ø1,1X17 REBAIXADA; B21 0 316 - BROCA Ø1,1X20 REBAIXADA; B21 0 318 - BROCA Ø1,1X22 REBAIXADA; B21 0 320 - BROCA Ø1,1 REBAIXADA LONGA; B21 0 322 - BROCA Ø1,1X5 REBAIXADA LONGA; B21 0 324 - BROCA Ø1,1X7 REBAIXADA LONGA; B21 0 326 - BROCA Ø1,1X9 REBAIXADA LONGA; B21 0 328 - BROCA Ø1,1X11 REBAIXADA LONGA; B21 0 330 - BROCA Ø1,1X13 REBAIXADA LONGA; B21 0 332 - BROCA Ø1,1X15 REBAIXADA LONGA; B21 0 334 - BROCA Ø1,1X17 REBAIXADA LONGA; B21 0 336 - BROCA Ø1,1X20 REBAIXADA LONGA; B21 0 338 - BROCA Ø1,1X22 REBAIXADA LONGA; B21 0 340 - BROCA Ø1,2 CURTA; B21 0 342 - BROCA Ø1,2X5 CURTA; B21 0 344 - BROCA Ø1,2X7 CURTA; B21

0 346 - BROCA Ø1,2X9 CURTA; B21 0 348 - BROCA Ø1,2X11 CURTA; B21 0 350 - BROCA Ø1,2X13 CURTA; B21 0 352 - BROCA Ø1,2X15 CURTA; B21 0 354 - BROCA Ø1,2X17 CURTA; B21 0 356 - BROCA Ø1,2X20 CURTA; B21 0 358 - BROCA Ø1,2X22 CURTA; B21 0 360 - BROCA Ø1,2; B21 0 362 - BROCA Ø1,2X5; B21 0 364 - BROCA Ø1,2X7; B21 0 366 - BROCA Ø1,2X9; B21 0 368 - BROCA Ø1,2X11; B21 0 370 - BROCA Ø1,2X13; B21 0 372 - BROCA Ø1,2X15; B21 0 374 - BROCA Ø1,2X17; B21 0 376 - BROCA Ø1,2X20; B21 0 378 - BROCA Ø1,2X22; B21 0 380 - BROCA Ø1,2 LONGA; B21 0 382 - BROCA Ø1,2X5 LONGA; B21 0 384 - BROCA Ø1,2X7 LONGA; B21 0 386 - BROCA Ø1,2X9 LONGA; B21 0 388 - BROCA Ø1,2X11 LONGA; B21 0 390 - BROCA Ø1,2X13 LONGA; B21 0 392 - BROCA Ø1,2X15 LONGA; B21 0 394 - BROCA Ø1,2X17 LONGA; B21 0 396 - BROCA Ø1,2X20 LONGA; B21 0 398 - BROCA Ø1,2X22 LONGA; B21 0 400 - BROCA Ø1,2 REBAIXADA CURTA; B21 0 402 - BROCA Ø1,2X5 REBAIXADA CURTA; B21 0 404 - BROCA Ø1,2X7 REBAIXADA CURTA; B21 0 406 - BROCA Ø1,2X9 REBAIXADA CURTA; B21 0 408 - BROCA Ø1,2X11 REBAIXADA CURTA; B21 0 410 - BROCA Ø1,2X13 REBAIXADA CURTA; B21 0 412 - BROCA Ø1,2X15 REBAIXADA CURTA; B21 0 414 - BROCA Ø1,2X17 REBAIXADA CURTA; B21 0 416 - BROCA Ø1,2X20 REBAIXADA CURTA; B21 0 418 - BROCA Ø1,2X22 REBAIXADA CURTA; B21 0 420 - BROCA Ø1,2 REBAIXADA; B21 0 422 - BROCA Ø1,2X5 REBAIXADA; B21 0 424 - BROCA Ø1,2X7 REBAIXADA; B21 0 426 - BROCA Ø1,2X9 REBAIXADA; B21 0 428 - BROCA Ø1,2X11 REBAIXADA; B21 0 430 - BROCA Ø1,2X13 REBAIXADA; B21 0 432 - BROCA Ø1,2X15 REBAIXADA; B21 0 434 - BROCA Ø1,2X17 REBAIXADA; B21 0 436 - BROCA Ø1,2X20 REBAIXADA; B21 0 438 - BROCA Ø1,2X22 REBAIXADA; B21 0 440 - BROCA Ø1,2 REBAIXADA LONGA; B21 0 442 - BROCA Ø1,2X5 REBAIXADA LONGA; B21 0 444 - BROCA Ø1,2X7 REBAIXADA LONGA; B21 0 446 - BROCA Ø1,2X9 REBAIXADA LONGA; B21 0 448 - BROCA Ø1,2X11 REBAIXADA LONGA; B21 0 450 - BROCA Ø1,2X13 REBAIXADA LONGA; B21 0 452 - BROCA Ø1,2X15 REBAIXADA LONGA; B21 0 454 - BROCA Ø1,2X17 REBAIXADA LONGA; B21 0 456 - BROCA Ø1,2X20 REBAIXADA LONGA; B21 0 458 - BROCA Ø1,2X22 REBAIXADA LONGA; B21 0 460 - BROCA Ø1,5 CURTA; B21 0 462 - BROCA Ø1,5X5 CURTA; B21 0 464 - BROCA Ø1,5X7 CURTA; B21 0 466 - BROCA Ø1,5X9 CURTA; B21 0 468 - BROCA Ø1,5X11 CURTA; B21 0 470 - BROCA Ø1,5X13 CURTA; B21 0 472 - BROCA Ø1,5X15 CURTA; B21 0 474 - BROCA Ø1,5X17 CURTA; B21 0 476 - BROCA Ø1,5X20 CURTA; B21 0 478 - BROCA Ø1,5X22 CURTA; B21 0 480 - BROCA Ø1,5; B21 0 482 - BROCA Ø1,5X5; B21 0 484 - BROCA Ø1,5X7; B21 0 486 - BROCA Ø1,5X9; B21 0 488 - BROCA Ø1,5X11; B21 0 490 - BROCA Ø1,5X13; B21 0 492 - BROCA Ø1,5X15; B21 0 494 - BROCA Ø1,5X17; B21 0 496 - BROCA Ø1,5X20; B21 0 498 - BROCA Ø1,5X22; B21 0 500 - BROCA Ø1,5 LONGA; B21 0 502 - BROCA Ø1,5X5 LONGA; B21 0 504 - BROCA Ø1,5X7 LONGA; B21 0 506 - BROCA Ø1,5X9 LONGA; B21 0 508 - BROCA Ø1,5X11 LONGA; B21 0 510 - BROCA Ø1,5X13 LONGA; B21 0 512 - BROCA Ø1,5X15 LONGA; B21 0 514 - BROCA Ø1,5X17 LONGA; B21 0 516 - BROCA Ø1,5X20 LONGA; B21 0 518 - BROCA Ø1,5X22 LONGA; B21 0 520 - BROCA Ø1,5 REBAIXADA CURTA; B21 0 522 - BROCA Ø1,5X5 REBAIXADA CURTA; B21 0 524 - BROCA Ø1,5X7 REBAIXADA CURTA; B21 0 526 - BROCA Ø1,5X9 REBAIXADA CURTA; B21 0 528 - BROCA Ø1,5X11 REBAIXADA CURTA; B21 0 530 - BROCA Ø1,5X13 REBAIXADA CURTA; B21 0 532 - BROCA Ø1,5X15 REBAIXADA CURTA; B21 0 534 - BROCA Ø1,5X17 REBAIXADA CURTA; B21 0 536 - BROCA Ø1,5X20 REBAIXADA CURTA; B21 0 538 - BROCA Ø1,5X22 REBAIXADA CURTA; B21 0 540 - BROCA Ø1,5 REBAIXADA; B21 0 542 - BROCA Ø1,5X5 REBAIXADA; B21 0 544 - BROCA Ø1,5X7 REBAIXADA; B21 0 546 - BROCA Ø1,5X9 REBAIXADA; B21 0 548 - BROCA Ø1,5X11 REBAIXADA; B21 0 550 - BROCA Ø1,5X13 REBAIXADA; B21 0 552 - BROCA Ø1,5X15 REBAIXADA; B21 0 554 - BROCA Ø1,5X17 REBAIXADA; B21 0 556 - BROCA Ø1,5X20 REBAIXADA; B21 0 558 - BROCA Ø1,5X22 REBAIXADA; B21 0 560 - BROCA Ø1,5 REBAIXADA LONGA; B21 0 562 - BROCA Ø1,5X5 REBAIXADA LONGA; B21 0 564 - BROCA Ø1,5X7 REBAIXADA LONGA; B21 0 566 - BROCA Ø1,5X9 REBAIXADA LONGA; B21 0 568 - BROCA Ø1,5X11 REBAIXADA LONGA; B21 0 570 - BROCA Ø1,5X13 REBAIXADA LONGA; B21 0 572 - BROCA Ø1,5X15 REBAIXADA LONGA; B21 0 574 - BROCA Ø1,5X17 REBAIXADA LONGA; B21 0 576 - BROCA Ø1,5X20 REBAIXADA LONGA; B21 0 578 - BROCA Ø1,5X22 REBAIXADA LONGA; B21 0 580 - BROCA Ø1,6 CURTA; B21 0 582 - BROCA Ø1,6X5 CURTA; B21 0 584 - BROCA Ø1,6X7 CURTA; B21 0 586 - BROCA Ø1,6X9 CURTA; B21 0 588 - BROCA Ø1,6X11 CURTA; B21 0 590 - BROCA Ø1,6X13 CURTA; B21 0 592 - BROCA Ø1,6X15 CURTA; B21 0 594 - BROCA Ø1,6X17 CURTA; B21 0 596 - BROCA Ø1,6X20 CURTA; B21 0 598 - BROCA Ø1,6X22 CURTA; B21 0 600 - BROCA Ø1,6; B21 0 602 - BROCA Ø1,6X5; B21 0 604 - BROCA Ø1,6X7; B21 0 606 - BROCA Ø1,6X9; B21 0 608 - BROCA Ø1,6X11; B21 0 610 - BROCA Ø1,6X13; B21 0 612 - BROCA Ø1,6X15; B21 0 614 - BROCA Ø1,6X17; B21 0 616 - BROCA Ø1,6X20; B21 0 618 - BROCA Ø1,6X22; B21 0 620 - BROCA Ø1,6 LONGA; B21 0 622 - BROCA Ø1,6X5 LONGA; B21 0 624 - BROCA Ø1,6X7 LONGA; B21 0 626 - BROCA Ø1,6X9 LONGA; B21 0 628 - BROCA Ø1,6X11 LONGA; B21 0 630 - BROCA Ø1,6X13 LONGA; B21 0 632 - BROCA Ø1,6X15 LONGA; B21 0 634 - BROCA Ø1,6X17 LONGA; B21 0 636 - BROCA Ø1,6X20 LONGA; B21 0 638 - BROCA Ø1,6X22 LONGA; B21 0 640 - BROCA Ø1,6 REBAIXADA CURTA; B21 0 642 - BROCA Ø1,6X5 REBAIXADA CURTA; B21 0 644 - BROCA Ø1,6X7 REBAIXADA CURTA; B21 0 646 - BROCA Ø1,6X9 REBAIXADA CURTA; B21 0 648 - BROCA Ø1,6X11 REBAIXADA CURTA; B21 0 650 - BROCA Ø1,6X13 REBAIXADA CURTA; B21 0 652 - BROCA Ø1,6X15 REBAIXADA CURTA; B21 0 654 - BROCA Ø1,6X17 REBAIXADA CURTA; B21 0 656 - BROCA Ø1,6X20 REBAIXADA CURTA; B21 0 658 - BROCA Ø1,6X22 REBAIXADA CURTA; B21 0 660 - BROCA Ø1,6 REBAIXADA; B21 0 662 - BROCA Ø1,6X5 REBAIXADA; B21 0 664 - BROCA Ø1,6X7 REBAIXADA; B21 0 666 - BROCA Ø1,6X9 REBAIXADA; B21 0 668 - BROCA Ø1,6X11 REBAIXADA; B21 0 670 - BROCA Ø1,6X13 REBAIXADA; B21 0 672 - BROCA Ø1,6X15 REBAIXADA; B21 0 674 - BROCA Ø1,6X17 REBAIXADA; B21 0 676 - BROCA Ø1,6X20 REBAIXADA; B21 0 678 - BROCA Ø1,6X22 REBAIXADA; B21 0 680 - BROCA Ø1,6 REBAIXADA LONGA; B21 0 682 - BROCA Ø1,6X5 REBAIXADA LONGA; B21 0 684 - BROCA Ø1,6X7 REBAIXADA LONGA; B21 0 686 - BROCA Ø1,6X9 REBAIXADA LONGA; B21 0 688 - BROCA Ø1,6X11 REBAIXADA LONGA; B21 0 690 - BROCA Ø1,6X13 REBAIXADA LONGA; B21 0 692 - BROCA Ø1,6X15 REBAIXADA LONGA; B21 0 694 - BROCA Ø1,6X17 REBAIXADA LONGA; B21 0 696 - BROCA Ø1,6X20 REBAIXADA LONGA; B21 0 698 - BROCA Ø1,6X22 REBAIXADA LONGA; B21 0 700 - BROCA Ø1,8 CURTA; B21 0 702 - BROCA Ø1,8X5 CURTA; B21 0 704 - BROCA Ø1,8X7 CURTA; B21 0 706 - BROCA Ø1,8X9 CURTA; B21 0 708 - BROCA Ø1,8X11 CURTA; B21 0 710 - BROCA Ø1,8X13 CURTA; B21 0 712 - BROCA Ø1,8X15 CURTA; B21 0 714 - BROCA Ø1,8X17 CURTA; B21 0 716 - BROCA Ø1,8X20 CURTA; B21 0 718 - BROCA Ø1,8X22 CURTA; B21 0 720 - BROCA Ø1,8; B21 0 722 - BROCA Ø1,8X5; B21 0 724 - BROCA Ø1,8X7; B21 0 726 - BROCA Ø1,8X9; B21 0 728 - BROCA Ø1,8X11; B21 0 730 - BROCA Ø1,8X13; B21 0 732 - BROCA Ø1,8X15; B21 0 734 - BROCA Ø1,8X17; B21 0 736 - BROCA Ø1,8X20; B21 0 738 - BROCA Ø1,8X22; B21 0 740 - BROCA Ø1,8 LONGA; B21 0 742 - BROCA Ø1,8X5 LONGA; B21 0 744 - BROCA Ø1,8X7 LONGA; B21 0 746 - BROCA Ø1,8X9 LONGA; B21 0 748 - BROCA Ø1,8X11 LONGA; B21 0 750 - BROCA Ø1,8X13 LONGA; B21 0 752 - BROCA Ø1,8X15 LONGA; B21 0 754 - BROCA Ø1,8X17 LONGA; B21 0 756 - BROCA Ø1,8X20 LONGA; B21 0 758 - BROCA Ø1,8X22 LONGA; B21 0 760 - BROCA Ø1,8 REBAIXADA CURTA; B21 0 762 - BROCA Ø1,8X5 REBAIXADA CURTA; B21 0 764 - BROCA Ø1,8X7 REBAIXADA CURTA; B21 0 766 - BROCA Ø1,8X9

REBAIXADA CURTA; B21 0 768 - BROCA Ø1,8X11 REBAIXADA CURTA; B21 0 770 - BROCA Ø1,8X13 REBAIXADA CURTA; B21 0 772 - BROCA Ø1,8X15 REBAIXADA CURTA; B21 0 774 - BROCA Ø1,8X17 REBAIXADA CURTA; B21 0 776 - BROCA Ø1,8X20 REBAIXADA CURTA; B21 0 778 - BROCA Ø1,8X22 REBAIXADA CURTA; B21 0 780 - BROCA Ø1,8 REBAIXADA; B21 0 782 - BROCA Ø1,8X5 REBAIXADA; B21 0 784 - BROCA Ø1,8X7 REBAIXADA; B21 0 786 - BROCA Ø1,8X9 REBAIXADA; B21 0 788 - BROCA Ø1,8X11 REBAIXADA; B21 0 790 - BROCA Ø1,8X13 REBAIXADA; B21 0 792 - BROCA Ø1,8X15 REBAIXADA; B21 0 794 - BROCA Ø1,8X17 REBAIXADA; B21 0 796 - BROCA Ø1,8X20 REBAIXADA; B21 0 798 - BROCA Ø1,8X22 REBAIXADA; B21 0 800 - BROCA Ø1,8 REBAIXADA LONGA; B21 0 802 - BROCA Ø1,8X5 REBAIXADA LONGA; B21 0 804 - BROCA Ø1,8X7 REBAIXADA LONGA; B21 0 806 - BROCA Ø1,8X9 REBAIXADA LONGA; B21 0 808 - BROCA Ø1,8X11 REBAIXADA LONGA; B21 0 810 - BROCA Ø1,8X13 REBAIXADA LONGA; B21 0 812 - BROCA Ø1,8X15 REBAIXADA LONGA; B21 0 814 - BROCA Ø1,8X17 REBAIXADA LONGA; B21 0 816 - BROCA Ø1,8X20 REBAIXADA LONGA; B21 0 818 - BROCA Ø1,8X22 REBAIXADA LONGA; B21 0 820 - BROCA Ø2,0 CURTA; B21 0 822 - BROCA Ø2,0X5 CURTA; B21 0 824 - BROCA Ø2,0X7 CURTA; B21 0 826 - BROCA Ø2,0X9 CURTA; B21 0 828 - BROCA Ø2,0X11 CURTA; B21 0 830 - BROCA Ø2,0X13 CURTA; B21 0 832 - BROCA Ø2,0X15 CURTA; B21 0 834 - BROCA Ø2,0X17 CURTA; B21 0 836 - BROCA Ø2,0X20 CURTA; B21 0 838 - BROCA Ø2,0X22 CURTA; B21 0 840 - BROCA Ø2,0; B21 0 842 - BROCA Ø2,0X5; B21 0 844 - BROCA Ø2,0X7; B21 0 846 - BROCA Ø2,0X9; B21 0 848 - BROCA Ø2,0X11; B21 0 850 - BROCA Ø2,0X13; B21 0 852 - BROCA Ø2,0X15; B21 0 854 - BROCA Ø2,0X17; B21 0 856 - BROCA Ø2,0X20; B21 0 858 - BROCA Ø2,0X22; B21 0 860 - BROCA Ø2,0 LONGA; B21 0 862 - BROCA Ø2,0X5 LONGA; B21 0 864 - BROCA Ø2,0X7 LONGA; B21 0 866 - BROCA Ø2,0X9 LONGA; B21 0 868 - BROCA Ø2,0X11 LONGA; B21 0 870 - BROCA Ø2,0X13 LONGA; B21 0 872 - BROCA Ø2,0X15 LONGA; B21 0 874 - BROCA Ø2,0X17 LONGA; B21 0 876 - BROCA Ø2,0X20 LONGA; B21 0 878 - BROCA Ø2,0X22 LONGA; B21 0 880 - BROCA Ø2,0 REBAIXADA CURTA; B21 0 882 - BROCA Ø2,0X5 REBAIXADA CURTA; B21 0 884 - BROCA Ø2,0X7 REBAIXADA CURTA; B21 0 886 - BROCA Ø2,0X9 REBAIXADA CURTA; B21 0 888 - BROCA Ø2,0X11 REBAIXADA CURTA; B21 0 890 - BROCA Ø2,0X13 REBAIXADA CURTA; B21 0 892 - BROCA Ø2,0X15 REBAIXADA CURTA; B21 0 894 - BROCA Ø2,0X17 REBAIXADA CURTA; B21 0 896 - BROCA Ø2,0X20 REBAIXADA CURTA; B21 0 898 - BROCA Ø2,0X22 REBAIXADA CURTA; B21 0 900 - BROCA Ø2,0 REBAIXADA; B21 0 902 - BROCA Ø2,0X5 REBAIXADA; B21 0 904 - BROCA Ø2,0X7 REBAIXADA; B21 0 906 - BROCA Ø2,0X9 REBAIXADA; B21 0 908 - BROCA Ø2,0X11 REBAIXADA; B21 0 910 - BROCA Ø2,0X13 REBAIXADA; B21 0 912 - BROCA Ø2,0X15 REBAIXADA; B21 0 914 - BROCA Ø2,0X17 REBAIXADA; B21 0 916 - BROCA Ø2,0X20 REBAIXADA; B21 0 918 - BROCA Ø2,0X22 REBAIXADA; B21 0 920 - BROCA Ø2,0 REBAIXADA LONGA; B21 0 922 - BROCA Ø2,0X5 REBAIXADA LONGA; B21 0 924 - BROCA Ø2,0X7 REBAIXADA LONGA; B21 0 926 - BROCA Ø2,0X9 REBAIXADA LONGA; B21 0 928 - BROCA Ø2,0X11 REBAIXADA LONGA; B21 0 930 - BROCA Ø2,0X13 REBAIXADA LONGA; B21 0 932 - BROCA Ø2,0X15 REBAIXADA LONGA; B21 0 934 - BROCA Ø2,0X17 REBAIXADA LONGA; B21 0 936 - BROCA Ø2,0X20 REBAIXADA LONGA; B21 0 938 - BROCA Ø2,0X22 REBAIXADA LONGA; B21 1 050 - BROCA Ø0,8; B21 1 051 - BROCA Ø0,8X15/40; B21 1 052 - BROCA Ø0,8X15/50; B21 1 053 - BROCA Ø0,8X15/60; B21 1 054 - BROCA Ø0,8X15/80; B21 1 055 - BROCA Ø0,8X15/100; B21 1 056 - BROCA Ø0,8X15/120; B21 1 058 - BROCA Ø0,8X20/50; B21 1 059 - BROCA Ø0,8X20/60; B21 1 060 - BROCA Ø0,8X20/80; B21 1 061 - BROCA Ø0,8X20/100; B21 1 062 - BROCA Ø0,8X20/120; B21 1 064 - BROCA Ø0,8X25/60; B21 1 065 - BROCA Ø0,8X25/80; B21 1 066 - BROCA Ø0,8X25/100; B21 1 067 - BROCA Ø0,8X25/120; B21 1 069 - BROCA Ø0,8X30/80; B21 1 070 - BROCA Ø0,8X30/100; B21 1 071 - BROCA Ø0,8X30/120; B21 1 073 - BROCA Ø0,8X40/100; B21 1 074 - BROCA Ø0,8X40/120; B21 1 100 - BROCA Ø1,0; B21 1 101 - BROCA Ø1,0X15/40; B21 1 102 - BROCA Ø1,0X15/50; B21 1 103 - BROCA Ø1,0X15/60; B21 1 104 - BROCA Ø1,0X15/80; B21 1 105 - BROCA Ø1,0X15/100; B21 1 106 - BROCA Ø1,0X15/120; B21 1 107 - BROCA Ø1,0X15/150; B21 1 108 - BROCA Ø1,0X20/50; B21 1 109 - BROCA Ø1,0X20/60; B21 1 110 - BROCA Ø1,0X20/80; B21 1 111 - BROCA Ø1,0X20/100; B21 1 112 - BROCA Ø1,0X20/120; B21 1 113 - BROCA Ø1,0X20/150; B21 1 114 - BROCA Ø1,0X25/60; B21 1 115 - BROCA Ø1,0X25/80; B21 1 116 - BROCA Ø1,0X25/100; B21 1 117 - BROCA Ø1,0X25/120; B21 1 118 - BROCA Ø1,0X25/150; B21 1 119 - BROCA Ø1,0X30/80; B21 1 120 - BROCA Ø1,0X30/100; B21 1 121 - BROCA Ø1,0X30/120; B21 1 122 - BROCA Ø1,0X30/150; B21 1 123 - BROCA Ø1,0X40/100; B21 1 124 - BROCA Ø1,0X40/120; B21 1 125 - BROCA Ø1,0X40/150; B21 1 126 - BROCA Ø1,0 REBAIXADA; B21 1 127 - BROCA Ø1,0X15/40 REBAIXADA; B21 1 128 - BROCA Ø1,0X15/50 REBAIXADA; B21 1 129 - BROCA Ø1,0X15/60 REBAIXADA; B21 1 130 - BROCA Ø1,0X15/80 REBAIXADA; B21 1 131 - BROCA Ø1,0X15/100 REBAIXADA; B21 1 132 - BROCA Ø1,0X15/120 REBAIXADA; B21 1 133 - BROCA Ø1,0X15/150 REBAIXADA; B21 1 134 - BROCA Ø1,0X20/50 REBAIXADA; B21 1 135 - BROCA Ø1,0X20/60 REBAIXADA; B21 1 136 - BROCA Ø1,0X20/80 REBAIXADA; B21 1 137 - BROCA Ø1,0X20/100 REBAIXADA; B21 1 138 - BROCA Ø1,0X20/120 REBAIXADA; B21 1 139 - BROCA Ø1,0X20/150 REBAIXADA; B21 1 140 - BROCA Ø1,0X25/60 REBAIXADA; B21 1 141 - BROCA Ø1,0X25/80 REBAIXADA; B21 1 142 - BROCA Ø1,0X25/100 REBAIXADA; B21 1 143 - BROCA Ø1,0X25/120 REBAIXADA; B21 1 144 - BROCA Ø1,0X25/150 REBAIXADA; B21 1 145 - BROCA Ø1,0X30/80 REBAIXADA; B21 1 146 - BROCA Ø1,0X30/100 REBAIXADA; B21 1 147 - BROCA Ø1,0X30/120 REBAIXADA; B21 1 148 - BROCA Ø1,0X30/150 REBAIXADA; B21 1 149 - BROCA Ø1,0X40/100 REBAIXADA; B21 1 150 - BROCA Ø1,0X40/120 REBAIXADA; B21 1 151 - BROCA Ø1,0X40/150 REBAIXADA; B21 1 152 - BROCA Ø1,1; B21 1 153 - BROCA Ø1,1X15/40; B21 1 154 - BROCA Ø1,1X15/50; B21 1 155 - BROCA Ø1,1X15/60; B21 1 156 - BROCA Ø1,1X15/80; B21 1 157 - BROCA Ø1,1X15/100; B21 1 158 - BROCA Ø1,1X15/120; B21 1 159 - BROCA Ø1,1X15/150; B21 1 160 - BROCA Ø1,1X20/50; B21 1 161 - BROCA Ø1,1X20/60; B21 1 162 - BROCA Ø1,1X20/80; B21 1 163 - BROCA Ø1,1X20/100; B21 1 164 - BROCA Ø1,1X20/120; B21 1 165 - BROCA Ø1,1X20/150; B21 1 166 - BROCA Ø1,1X25/60; B21 1 167 - BROCA Ø1,1X25/80; B21 1 168 - BROCA Ø1,1X25/100; B21 1 169 - BROCA Ø1,1X25/120; B21 1 170 - BROCA Ø1,1X25/150; B21 1 171 - BROCA Ø1,1X30/80; B21 1 172 - BROCA Ø1,1X30/100; B21 1 173 - BROCA Ø1,1X30/120; B21 1 174 - BROCA Ø1,1X30/150; B21 1 175 - BROCA Ø1,1X40/100; B21 1 176 - BROCA Ø1,1X40/120; B21 1 177 - BROCA Ø1,1X40/150; B21 1 178 - BROCA Ø1,1 REBAIXADA; B21 1 179 - BROCA Ø1,1X15/40 REBAIXADA; B21 1 180 - BROCA Ø1,1X15/50 REBAIXADA; B21 1 181 - BROCA Ø1,1X15/60 REBAIXADA; B21 1 182 - BROCA Ø1,1X15/80 REBAIXADA; B21 1 183 - BROCA Ø1,1X15/100 REBAIXADA; B21 1 184 - BROCA Ø1,1X15/120 REBAIXADA; B21 1 185 - BROCA Ø1,1X15/150 REBAIXADA; B21 1 186 - BROCA Ø1,1X20/50 REBAIXADA; B21 1 187 - BROCA Ø1,1X20/60 REBAIXADA; B21 1 188 - BROCA Ø1,1X20/80 REBAIXADA; B21 1 189 - BROCA Ø1,1X20/100 REBAIXADA; B21 1 190 - BROCA Ø1,1X20/120 REBAIXADA; B21 1 191 - BROCA Ø1,1X20/150 REBAIXADA; B21 1 192 - BROCA Ø1,1X25/60 REBAIXADA; B21 1 193 - BROCA Ø1,1X25/80 REBAIXADA; B21 1 194 - BROCA Ø1,1X25/100 REBAIXADA; B21 1 195 - BROCA Ø1,1X25/120 REBAIXADA; B21 1 196 - BROCA Ø1,1X25/150 REBAIXADA; B21 1 197 - BROCA Ø1,1X30/80 REBAIXADA; B21 1 198 - BROCA Ø1,1X30/100 REBAIXADA; B21 1 199 - BROCA Ø1,1X30/120 REBAIXADA; B21 1 200 - BROCA Ø1,1X30/150 REBAIXADA;

B21 1 201 - BROCA Ø1,1X40/100 REBAIXADA; B21 1 202 - BROCA Ø1,1X40/120 REBAIXADA; B21 1 203 - BROCA Ø1,1X40/150 REBAIXADA; B21 1 204 - BROCA Ø1,2; B21 1 205 - BROCA Ø1,2X15/40; B21 1 206 - BROCA Ø1,2X15/50; B21 1 207 - BROCA Ø1,2X15/60; B21 1 208 - BROCA Ø1,2X15/80; B21 1 209 - BROCA Ø1,2X15/100; B21 1 210 - BROCA Ø1,2X15/120; B21 1 211 - BROCA Ø1,2X15/150; B21 1 212 - BROCA Ø1,2X20/50; B21 1 213 - BROCA Ø1,2X20/60; B21 1 214 - BROCA Ø1,2X20/80; B21 1 215 - BROCA Ø1,2X20/100; B21 1 216 - BROCA Ø1,2X20/120; B21 1 217 - BROCA Ø1,2X20/150; B21 1 218 - BROCA Ø1,2X25/60; B21 1 219 - BROCA Ø1,2X25/80; B21 1 220 - BROCA Ø1,2X25/100; B21 1 221 - BROCA Ø1,2X25/120; B21 1 222 - BROCA Ø1,2X25/150; B21 1 223 - BROCA Ø1,2X30/80; B21 1 224 - BROCA Ø1,2X30/100; B21 1 225 - BROCA Ø1,2X30/120; B21 1 226 - BROCA Ø1,2X30/150; B21 1 227 - BROCA Ø1,2X40/100; B21 1 228 - BROCA Ø1,2X40/120; B21 1 229 - BROCA Ø1,2X40/150; B21 1 230 - BROCA Ø1,2 REBAIXADA; B21 1 231 - BROCA Ø1,2X15/40 REBAIXADA; B21 1 232 - BROCA Ø1,2X15/50 REBAIXADA; B21 1 233 - BROCA Ø1,2X15/60 REBAIXADA; B21 1 234 - BROCA Ø1,2X15/80 REBAIXADA; B21 1 235 - BROCA Ø1,2X15/100 REBAIXADA; B21 1 236 - BROCA Ø1,2X15/120 REBAIXADA; B21 1 237 - BROCA Ø1,2X15/150 REBAIXADA; B21 1 238 - BROCA Ø1,2X20/50 REBAIXADA; B21 1 239 - BROCA Ø1,2X20/60 REBAIXADA; B21 1 240 - BROCA Ø1,2X20/80 REBAIXADA; B21 1 241 - BROCA Ø1,2X20/100 REBAIXADA; B21 1 242 - BROCA Ø1,2X20/120 REBAIXADA; B21 1 243 - BROCA Ø1,2X20/150 REBAIXADA; B21 1 244 - BROCA Ø1,2X25/60 REBAIXADA; B21 1 245 - BROCA Ø1,2X25/80 REBAIXADA; B21 1 246 - BROCA Ø1,2X25/100 REBAIXADA; B21 1 247 - BROCA Ø1,2X25/120 REBAIXADA; B21 1 248 - BROCA Ø1,2X25/150 REBAIXADA; B21 1 249 - BROCA Ø1,2X30/80 REBAIXADA; B21 1 250 - BROCA Ø1,2X30/100 REBAIXADA; B21 1 251 - BROCA Ø1,2X30/120 REBAIXADA; B21 1 252 - BROCA Ø1,2X30/150 REBAIXADA; B21 1 253 - BROCA Ø1,2X40/100 REBAIXADA; B21 1 254 - BROCA Ø1,2X40/120 REBAIXADA; B21 1 255 - BROCA Ø1,2X40/150 REBAIXADA; B21 1 256 - BROCA Ø1,5; B21 1 257 - BROCA Ø1,5X15/40; B21 1 258 - BROCA Ø1,5X15/50; B21 1 259 - BROCA Ø1,5X15/60; B21 1 260 - BROCA Ø1,5X15/80; B21 1 261 - BROCA Ø1,5X15/100; B21 1 262 - BROCA Ø1,5X15/120; B21 1 263 - BROCA Ø1,5X15/150; B21 1 264 - BROCA Ø1,5X15/180; B21 1 265 - BROCA Ø1,5X20/50; B21 1 266 - BROCA Ø1,5X20/60; B21 1 267 - BROCA Ø1,5X20/80; B21 1 268 - BROCA Ø1,5X20/100; B21 1 269 - BROCA Ø1,5X20/120; B21 1 270 - BROCA Ø1,5X20/150; B21 1 271 - BROCA Ø1,5X20/180; B21 1 272 - BROCA Ø1,5X25/60; B21 1 273 - BROCA Ø1,5X25/80; B21 1 274 - BROCA Ø1,5X25/100; B21 1 275 - BROCA Ø1,5X25/120; B21 1 276 - BROCA Ø1,5X25/150; B21 1 277 - BROCA Ø1,5X25/180; B21 1 278 - BROCA Ø1,5X30/80; B21 1 279 - BROCA Ø1,5X30/100; B21 1 280 - BROCA Ø1,5X30/120; B21 1 281 - BROCA Ø1,5X30/150; B21 1 282 - BROCA Ø1,5X30/180; B21 1 283 - BROCA Ø1,5X40/100; B21 1 284 - BROCA Ø1,5X40/120; B21 1 285 - BROCA Ø1,5X40/150; B21 1 286 - BROCA Ø1,5X40/180; B21 1 287 - BROCA Ø1,5X50/100; B21 1 288 - BROCA Ø1,5X50/120; B21 1 289 - BROCA Ø1,5X50/150; B21 1 290 - BROCA Ø1,5X50/180; B21 1 291 - BROCA Ø1,5 REBAIXADA; B21 1 292 - BROCA Ø1,5X15/40 REBAIXADA; B21 1 293 - BROCA Ø1,5X15/50 REBAIXADA; B21 1 294 - BROCA Ø1,5X15/60 REBAIXADA; B21 1 295 - BROCA Ø1,5X15/80 REBAIXADA; B21 1 296 - BROCA Ø1,5X15/100 REBAIXADA; B21 1 297 - BROCA Ø1,5X15/120 REBAIXADA; B21 1 298 - BROCA Ø1,5X15/150 REBAIXADA; B21 1 299 - BROCA Ø1,5X15/180 REBAIXADA; B21 1 300 - BROCA Ø1,5X20/50 REBAIXADA; B21 1 301 - BROCA Ø1,5X20/60 REBAIXADA; B21 1 302 - BROCA Ø1,5X20/80 REBAIXADA; B21 1 303 - BROCA Ø1,5X20/100 REBAIXADA; B21 1 304 - BROCA Ø1,5X20/120 REBAIXADA; B21 1 305 - BROCA Ø1,5X20/150 REBAIXADA; B21 1 306 - BROCA Ø1,5X20/180 REBAIXADA; B21 1 307 - BROCA Ø1,5X25/60 REBAIXADA; B21 1 308 - BROCA Ø1,5X25/80 REBAIXADA; B21 1 309 - BROCA Ø1,5X25/100 REBAIXADA; B21 1 310 - BROCA Ø1,5X25/120 REBAIXADA; B21 1 311 - BROCA Ø1,5X25/150 REBAIXADA; B21 1 312 - BROCA Ø1,5X25/180 REBAIXADA; B21 1 313 - BROCA Ø1,5X30/80 REBAIXADA; B21 1 314 - BROCA Ø1,5X30/100 REBAIXADA; B21 1 315 - BROCA Ø1,5X30/120 REBAIXADA; B21 1 316 - BROCA Ø1,5X30/150 REBAIXADA; B21 1 317 - BROCA Ø1,5X30/180 REBAIXADA; B21 1 318 - BROCA Ø1,5X40/100 REBAIXADA; B21 1 319 - BROCA Ø1,5X40/120 REBAIXADA; B21 1 320 - BROCA Ø1,5X40/150 REBAIXADA; B21 1 321 - BROCA Ø1,5X40/180 REBAIXADA; B21 1 322 - BROCA Ø1,5X50/100 REBAIXADA; B21 1 323 - BROCA Ø1,5X50/120 REBAIXADA; B21 1 324 - BROCA Ø1,5X50/150 REBAIXADA; B21 1 325 - BROCA Ø1,5X50/180 REBAIXADA; B21 1 326 - BROCA Ø1,6; B21 1 327 - BROCA Ø1,6X15/40; B21 1 328 - BROCA Ø1,6X15/50; B21 1 329 - BROCA Ø1,6X15/60; B21 1 330 - BROCA Ø1,6X15/80; B21 1 331 - BROCA Ø1,6X15/100; B21 1 332 - BROCA Ø1,6X15/120; B21 1 333 - BROCA Ø1,6X15/150; B21 1 334 - BROCA Ø1,6X15/180; B21 1 335 - BROCA Ø1,6X20/50; B21 1 336 - BROCA Ø1,6X20/60; B21 1 337 - BROCA Ø1,6X20/80; B21 1 338 - BROCA Ø1,6X20/100; B21 1 339 - BROCA Ø1,6X20/120; B21 1 340 - BROCA Ø1,6X20/150; B21 1 341 - BROCA Ø1,6X20/180; B21 1 342 - BROCA Ø1,6X25/60; B21 1 343 - BROCA Ø1,6X25/80; B21 1 344 - BROCA Ø1,6X25/100; B21 1 345 - BROCA Ø1,6X25/120; B21 1 346 - BROCA Ø1,6X25/150; B21 1 347 - BROCA Ø1,6X25/180; B21 1 348 - BROCA Ø1,6X30/80; B21 1 349 - BROCA Ø1,6X30/100; B21 1 350 - BROCA Ø1,6X30/120; B21 1 351 - BROCA Ø1,6X30/150; B21 1 352 - BROCA Ø1,6X30/180; B21 1 353 - BROCA Ø1,6X40/100; B21 1 354 - BROCA Ø1,6X40/120; B21 1 355 - BROCA Ø1,6X40/150; B21 1 356 - BROCA Ø1,6X40/180; B21 1 357 - BROCA Ø1,6X50/100; B21 1 358 - BROCA Ø1,6X50/120; B21 1 359 - BROCA Ø1,6X50/150; B21 1 360 - BROCA Ø1,6X50/180; B21 1 361 - BROCA Ø1,6 REBAIXADA; B21 1 362 - BROCA Ø1,6X15/40 REBAIXADA; B21 1 363 - BROCA Ø1,6X15/50 REBAIXADA; B21 1 364 - BROCA Ø1,6X15/60 REBAIXADA; B21 1 365 - BROCA Ø1,6X15/80 REBAIXADA; B21 1 366 - BROCA Ø1,6X15/100 REBAIXADA; B21 1 367 - BROCA Ø1,6X15/120 REBAIXADA; B21 1 368 - BROCA Ø1,6X15/150 REBAIXADA; B21 1 369 - BROCA Ø1,6X15/180 REBAIXADA; B21 1 370 - BROCA Ø1,6X20/50 REBAIXADA; B21 1 371 - BROCA Ø1,6X20/60 REBAIXADA; B21 1 372 - BROCA Ø1,6X20/80 REBAIXADA; B21 1 373 - BROCA Ø1,6X20/100 REBAIXADA; B21 1 374 - BROCA Ø1,6X20/120 REBAIXADA; B21 1 375 - BROCA Ø1,6X20/150 REBAIXADA; B21 1 376 - BROCA Ø1,6X20/180 REBAIXADA; B21 1 377 - BROCA Ø1,6X25/60 REBAIXADA; B21 1 378 - BROCA Ø1,6X25/80 REBAIXADA; B21 1 379 - BROCA Ø1,6X25/100 REBAIXADA; B21 1 380 - BROCA Ø1,6X25/120 REBAIXADA; B21 1 381 - BROCA Ø1,6X25/150 REBAIXADA; B21 1 382 - BROCA Ø1,6X25/180 REBAIXADA; B21 1 383 - BROCA Ø1,6X30/80 REBAIXADA; B21 1 384 - BROCA Ø1,6X30/100 REBAIXADA; B21 1 385 - BROCA Ø1,6X30/120 REBAIXADA; B21 1 386 - BROCA Ø1,6X30/150 REBAIXADA; B21 1 387 - BROCA Ø1,6X30/180 REBAIXADA; B21 1 388 - BROCA Ø1,6X40/100 REBAIXADA; B21 1 389 - BROCA Ø1,6X40/120 REBAIXADA; B21 1 390 - BROCA Ø1,6X40/150 REBAIXADA; B21 1 391 - BROCA Ø1,6X40/180 REBAIXADA; B21 1 392 - BROCA Ø1,6X50/100 REBAIXADA; B21 1 393 - BROCA Ø1,6X50/120 REBAIXADA; B21 1 394 - BROCA Ø1,6X50/150 REBAIXADA; B21 1 395 - BROCA Ø1,6X50/180 REBAIXADA; B21 1 396 - BROCA Ø1,8; B21 1 397 - BROCA Ø1,8X15/60; B21 1 398 - BROCA Ø1,8X15/80; B21 1 399 - BROCA Ø1,8X15/100; B21 1 400 - BROCA Ø1,8X15/120; B21 1 401 - BROCA Ø1,8X15/150; B21 1 402 - BROCA Ø1,8X20/50; B21 1 403 - BROCA Ø1,8X20/60; B21 1 404 - BROCA Ø1,8X20/80; B21 1 405 - BROCA Ø1,8X20/100; B21 1 406 - BROCA Ø1,8X20/120; B21 1 407 - BROCA Ø1,8X20/150; B21 1 408 - BROCA Ø1,8X25/60; B21 1 409 - BROCA Ø1,8X25/80; B21 1 410 - BROCA Ø1,8X25/100;

B21 1 411 - BROCA Ø1,8X25/120; B21 1 412 - BROCA Ø1,8X25/150; B21 1 413 - BROCA Ø1,8X25/180; B21 1 414 - BROCA Ø1,8X25/200; B21 1 415 - BROCA Ø1,8X30/80; B21 1 416 - BROCA Ø1,8X30/100; B21 1 417 - BROCA Ø1,8X30/120; B21 1 418 - BROCA Ø1,8X30/150; B21 1 419 - BROCA Ø1,8X30/180; B21 1 420 - BROCA Ø1,8X30/200; B21 1 421 - BROCA Ø1,8X40/100; B21 1 422 - BROCA Ø1,8X40/120; B21 1 423 - BROCA Ø1,8X40/150; B21 1 424 - BROCA Ø1,8X40/180; B21 1 425 - BROCA Ø1,8X40/200; B21 1 426 - BROCA Ø1,8X40/220; B21 1 427 - BROCA Ø1,8X50/100; B21 1 428 - BROCA Ø1,8X50/120; B21 1 429 - BROCA Ø1,8X50/150; B21 1 430 - BROCA Ø1,8X50/180; B21 1 431 - BROCA Ø1,8X50/200; B21 1 432 - BROCA Ø1,8X50/220; B21 1 433 - BROCA Ø1,8 REBAIXADA; B21 1 434 - BROCA Ø1,8X15/60 REBAIXADA; B21 1 435 - BROCA Ø1,8X15/80 REBAIXADA; B21 1 436 - BROCA Ø1,8X15/100 REBAIXADA; B21 1 437 - BROCA Ø1,8X15/120 REBAIXADA; B21 1 438 - BROCA Ø1,8X15/150 REBAIXADA; B21 1 439 - BROCA Ø1,8X20/50 REBAIXADA; B21 1 440 - BROCA Ø1,8X20/60 REBAIXADA; B21 1 441 - BROCA Ø1,8X20/80 REBAIXADA; B21 1 442 - BROCA Ø1,8X20/100 REBAIXADA; B21 1 443 - BROCA Ø1,8X20/120 REBAIXADA; B21 1 444 - BROCA Ø1,8X20/150 REBAIXADA; B21 1 445 - BROCA Ø1,8X25/60 REBAIXADA; B21 1 446 - BROCA Ø1,8X25/80 REBAIXADA; B21 1 447 - BROCA Ø1,8X25/100 REBAIXADA; B21 1 448 - BROCA Ø1,8X25/120 REBAIXADA; B21 1 449 - BROCA Ø1,8X25/150 REBAIXADA; B21 1 450 - BROCA Ø1,8X25/180 REBAIXADA; B21 1 451 - BROCA Ø1,8X25/200 REBAIXADA; B21 1 452 - BROCA Ø1,8X30/80 REBAIXADA; B21 1 453 - BROCA Ø1,8X30/100 REBAIXADA; B21 1 454 - BROCA Ø1,8X30/120 REBAIXADA; B21 1 455 - BROCA Ø1,8X30/150 REBAIXADA; B21 1 456 - BROCA Ø1,8X30/180 REBAIXADA; B21 1 457 - BROCA Ø1,8X30/200 REBAIXADA; B21 1 458 - BROCA Ø1,8X40/100 REBAIXADA; B21 1 459 - BROCA Ø1,8X40/120 REBAIXADA; B21 1 460 - BROCA Ø1,8X40/150 REBAIXADA; B21 1 461 - BROCA Ø1,8X40/180 REBAIXADA; B21 1 462 - BROCA Ø1,8X40/200 REBAIXADA; B21 1 463 - BROCA Ø1,8X40/220 REBAIXADA; B21 1 464 - BROCA Ø1,8X50/100 REBAIXADA; B21 1 465 - BROCA Ø1,8X50/120 REBAIXADA; B21 1 466 - BROCA Ø1,8X50/150 REBAIXADA; B21 1 467 - BROCA Ø1,8X50/180 REBAIXADA; B21 1 468 - BROCA Ø1,8X50/200 REBAIXADA; B21 1 469 - BROCA Ø1,8X50/220 REBAIXADA; B21 1 470 - BROCA Ø2,0; B21 1 471 - BROCA Ø2,0X15/60; B21 1 472 - BROCA Ø2,0X15/80; B21 1 473 - BROCA Ø2,0X15/100; B21 1 474 - BROCA Ø2,0X15/120; B21 1 475 - BROCA Ø2,0X15/150; B21 1 476 - BROCA Ø2,0X20/60; B21 1 477 - BROCA Ø2,0X20/80; B21 1 478 - BROCA Ø2,0X20/100; B21 1 479 - BROCA Ø2,0X20/120; B21 1 480 - BROCA Ø2,0X20/150; B21 1 481 - BROCA Ø2,0X25/80; B21 1 482 - BROCA Ø2,0X25/100; B21 1 483 - BROCA Ø2,0X25/120; B21 1 484 - BROCA Ø2,0X25/150; B21 1 485 - BROCA Ø2,0X25/180; B21 1 486 - BROCA Ø2,0X25/200; B21 1 487 - BROCA Ø2,0X30/80; B21 1 488 - BROCA Ø2,0X30/100; B21 1 489 - BROCA Ø2,0X30/120; B21 1 490 - BROCA Ø2,0X30/150; B21 1 491 - BROCA Ø2,0X30/180; B21 1 492 - BROCA Ø2,0X30/200; B21 1 493 - BROCA Ø2,0X40/100; B21 1 494 - BROCA Ø2,0X40/120; B21 1 495 - BROCA Ø2,0X40/150; B21 1 496 - BROCA Ø2,0X40/180; B21 1 497 - BROCA Ø2,0X40/200; B21 1 498 - BROCA Ø2,0X40/220; B21 1 499 - BROCA Ø2,0X40/250; B21 1 500 - BROCA Ø2,0X50/100; B21 1 501 - BROCA Ø2,0X50/120; B21 1 502 - BROCA Ø2,0X50/150; B21 1 503 - BROCA Ø2,0X50/180; B21 1 504 - BROCA Ø2,0X50/200; B21 1 505 - BROCA Ø2,0X50/220; B21 1 506 - BROCA Ø2,0X50/250; B21 1 507 - BROCA Ø2,0 REBAIXADA; B21 1 508 - BROCA Ø2,0X15/60 REBAIXADA; B21 1 509 - BROCA Ø2,0X15/80 REBAIXADA; B21 1 510 - BROCA Ø2,0X15/100 REBAIXADA; B21 1 511 - BROCA Ø2,0X15/120 REBAIXADA; B21 1 512 - BROCA Ø2,0X15/150 REBAIXADA; B21 1 513 - BROCA Ø2,0X20/60 REBAIXADA; B21 1 514 - BROCA Ø2,0X20/80 REBAIXADA; B21 1 515 - BROCA Ø2,0X20/100 REBAIXADA; B21 1 516 - BROCA Ø2,0X20/120 REBAIXADA; B21 1 517 - BROCA Ø2,0X20/150 REBAIXADA; B21 1 518 - BROCA Ø2,0X25/80 REBAIXADA; B21 1 519 - BROCA Ø2,0X25/100 REBAIXADA; B21 1 520 - BROCA Ø2,0X25/120 REBAIXADA; B21 1 521 - BROCA Ø2,0X25/150 REBAIXADA; B21 1 522 - BROCA Ø2,0X25/180 REBAIXADA; B21 1 523 - BROCA Ø2,0X25/200 REBAIXADA; B21 1 524 - BROCA Ø2,0X30/80 REBAIXADA; B21 1 525 - BROCA Ø2,0X30/100 REBAIXADA; B21 1 526 - BROCA Ø2,0X30/120 REBAIXADA; B21 1 527 - BROCA Ø2,0X30/150 REBAIXADA; B21 1 528 - BROCA Ø2,0X30/180 REBAIXADA; B21 1 529 - BROCA Ø2,0X30/200 REBAIXADA; B21 1 530 - BROCA Ø2,0X40/100 REBAIXADA; B21 1 531 - BROCA Ø2,0X40/120 REBAIXADA; B21 1 532 - BROCA Ø2,0X40/150 REBAIXADA; B21 1 533 - BROCA Ø2,0X40/180 REBAIXADA; B21 1 534 - BROCA Ø2,0X40/200 REBAIXADA; B21 1 535 - BROCA Ø2,0X40/220 REBAIXADA; B21 1 536 - BROCA Ø2,0X40/250 REBAIXADA; B21 1 537 - BROCA Ø2,0X50/100 REBAIXADA; B21 1 538 - BROCA Ø2,0X50/120 REBAIXADA; B21 1 539 - BROCA Ø2,0X50/150 REBAIXADA; B21 1 540 - BROCA Ø2,0X50/180 REBAIXADA; B21 1 541 - BROCA Ø2,0X50/200 REBAIXADA; B21 1 542 - BROCA Ø2,0X50/220 REBAIXADA; B21 1 543 - BROCA Ø2,0X50/250 REBAIXADA; B21 1 544 - BROCA Ø2,2; B21 1 545 - BROCA Ø2,2X15/60; B21 1 546 - BROCA Ø2,2X15/80; B21 1 547 - BROCA Ø2,2X15/100; B21 1 548 - BROCA Ø2,2X15/120; B21 1 549 - BROCA Ø2,2X15/150; B21 1 550 - BROCA Ø2,2X20/60; B21 1 551 - BROCA Ø2,2X20/80; B21 1 552 - BROCA Ø2,2X20/100; B21 1 553 - BROCA Ø2,2X20/120; B21 1 554 - BROCA Ø2,2X20/150; B21 1 555 - BROCA Ø2,2X25/80; B21 1 556 - BROCA Ø2,2X25/100; B21 1 557 - BROCA Ø2,2X25/120; B21 1 558 - BROCA Ø2,2X25/150; B21 1 559 - BROCA Ø2,2X25/180; B21 1 560 - BROCA Ø2,2X25/200; B21 1 561 - BROCA Ø2,2X30/80; B21 1 562 - BROCA Ø2,2X30/100; B21 1 563 - BROCA Ø2,2X30/120; B21 1 564 - BROCA Ø2,2X30/150; B21 1 565 - BROCA Ø2,2X30/180; B21 1 566 - BROCA Ø2,2X30/200; B21 1 567 - BROCA Ø2,2X40/100; B21 1 568 - BROCA Ø2,2X40/120; B21 1 569 - BROCA Ø2,2X40/150; B21 1 570 - BROCA Ø2,2X40/180; B21 1 571 - BROCA Ø2,2X40/200; B21 1 572 - BROCA Ø2,2X40/220; B21 1 573 - BROCA Ø2,2X40/250; B21 1 574 - BROCA Ø2,2X50/100; B21 1 575 - BROCA Ø2,2X50/120; B21 1 576 - BROCA Ø2,2X50/150; B21 1 577 - BROCA Ø2,2X50/180; B21 1 578 - BROCA Ø2,2X50/200; B21 1 579 - BROCA Ø2,2X50/220; B21 1 580 - BROCA Ø2,2X50/250; B21 1 581 - BROCA Ø2,2 REBAIXADA; B21 1 582 - BROCA Ø2,2X15/60 REBAIXADA; B21 1 583 - BROCA Ø2,2X15/80 REBAIXADA; B21 1 584 - BROCA Ø2,2X15/100 REBAIXADA; B21 1 585 - BROCA Ø2,2X15/120 REBAIXADA; B21 1 586 - BROCA Ø2,2X15/150 REBAIXADA; B21 1 587 - BROCA Ø2,2X20/60 REBAIXADA; B21 1 588 - BROCA Ø2,2X20/80 REBAIXADA; B21 1 589 - BROCA Ø2,2X20/100 REBAIXADA; B21 1 590 - BROCA Ø2,2X20/120 REBAIXADA; B21 1 591 - BROCA Ø2,2X20/150 REBAIXADA; B21 1 592 - BROCA Ø2,2X25/80 REBAIXADA; B21 1 593 - BROCA Ø2,2X25/100 REBAIXADA; B21 1 594 - BROCA Ø2,2X25/120 REBAIXADA; B21 1 595 - BROCA Ø2,2X25/150 REBAIXADA; B21 1 596 - BROCA Ø2,2X25/180 REBAIXADA; B21 1 597 - BROCA Ø2,2X25/200 REBAIXADA; B21 1 598 - BROCA Ø2,2X30/80 REBAIXADA; B21 1 599 - BROCA Ø2,2X30/100 REBAIXADA; B21 1 600 - BROCA Ø2,2X30/120 REBAIXADA; B21 1 601 - BROCA Ø2,2X30/150 REBAIXADA; B21 1 602 - BROCA Ø2,2X30/180 REBAIXADA; B21 1 603 - BROCA Ø2,2X30/200 REBAIXADA; B21 1 604 - BROCA Ø2,2X40/100 REBAIXADA; B21 1 605 - BROCA Ø2,2X40/120 REBAIXADA; B21 1 606 - BROCA Ø2,2X40/150 REBAIXADA; B21 1 607 - BROCA Ø2,2X40/180 REBAIXADA; B21 1 608 - BROCA Ø2,2X40/200 REBAIXADA; B21 1 609 - BROCA Ø2,2X40/220 REBAIXADA; B21 1 610 - BROCA Ø2,2X40/250 REBAIXADA; B21 1 611 - BROCA Ø2,2X50/100 REBAIXADA; B21 1 612 - BROCA Ø2,2X50/120 REBAIXADA; B21 1 613 - BROCA Ø2,2X50/150 REBAIXADA; B21 1 614 - BROCA Ø2,2X50/180 REBAIXADA; B21 1 615 - BROCA Ø2,2X50/200 REBAIXADA; B21 1 616

- BROCA Ø2,2X50/220 REBAIXADA; B21 1 617 - BROCA Ø2,2X50/250 REBAIXADA; B21 1 618 - BROCA Ø2,5; B21 1 619 - BROCA Ø2,5X15/60; B21 1 620 - BROCA Ø2,5X15/80; B21 1 621 - BROCA Ø2,5X15/100; B21 1 622 - BROCA Ø2,5X15/120; B21 1 623 - BROCA Ø2,5X15/150; B21 1 624 - BROCA Ø2,5X20/60; B21 1 625 - BROCA Ø2,5X20/80; B21 1 626 - BROCA Ø2,5X20/100; B21 1 627 - BROCA Ø2,5X20/120; B21 1 628 - BROCA Ø2,5X20/150; B21 1 629 - BROCA Ø2,5X25/80; B21 1 630 - BROCA Ø2,5X25/100; B21 1 631 - BROCA Ø2,5X25/120; B21 1 632 - BROCA Ø2,5X25/150; B21 1 633 - BROCA Ø2,5X25/180; B21 1 634 - BROCA Ø2,5X25/200; B21 1 635 - BROCA Ø2,5X30/80; B21 1 636 - BROCA Ø2,5X30/100; B21 1 637 - BROCA Ø2,5X30/120; B21 1 638 - BROCA Ø2,5X30/150; B21 1 639 - BROCA Ø2,5X30/180; B21 1 640 - BROCA Ø2,5X30/200; B21 1 641 - BROCA Ø2,5X40/100; B21 1 642 - BROCA Ø2,5X40/120; B21 1 643 - BROCA Ø2,5X40/150; B21 1 644 - BROCA Ø2,5X40/180; B21 1 645 - BROCA Ø2,5X40/200; B21 1 646 - BROCA Ø2,5X40/220; B21 1 647 - BROCA Ø2,5X40/250; B21 1 648 - BROCA Ø2,5X40/300; B21 1 649 - BROCA Ø2,5X50/100; B21 1 650 - BROCA Ø2,5X50/120; B21 1 651 - BROCA Ø2,5X50/150; B21 1 652 - BROCA Ø2,5X50/180; B21 1 653 - BROCA Ø2,5X50/200; B21 1 654 - BROCA Ø2,5X50/220; B21 1 655 - BROCA Ø2,5X50/250; B21 1 656 - BROCA Ø2,5X50/300; B21 1 657 - BROCA Ø2,5 REBAIXADA; B21 1 658 - BROCA Ø2,5X15/60 REBAIXADA; B21 1 659 - BROCA Ø2,5X15/80 REBAIXADA; B21 1 660 - BROCA Ø2,5X15/100 REBAIXADA; B21 1 661 - BROCA Ø2,5X15/120 REBAIXADA; B21 1 662 - BROCA Ø2,5X15/150 REBAIXADA; B21 1 663 - BROCA Ø2,5X20/60 REBAIXADA; B21 1 664 - BROCA Ø2,5X20/80 REBAIXADA; B21 1 665 - BROCA Ø2,5X20/100 REBAIXADA; B21 1 666 - BROCA Ø2,5X20/120 REBAIXADA; B21 1 667 - BROCA Ø2,5X20/150 REBAIXADA; B21 1 668 - BROCA Ø2,5X25/80 REBAIXADA; B21 1 669 - BROCA Ø2,5X25/100 REBAIXADA; B21 1 670 - BROCA Ø2,5X25/120 REBAIXADA; B21 1 671 - BROCA Ø2,5X25/150 REBAIXADA; B21 1 672 - BROCA Ø2,5X25/180 REBAIXADA; B21 1 673 - BROCA Ø2,5X25/200 REBAIXADA; B21 1 674 - BROCA Ø2,5X30/80 REBAIXADA; B21 1 675 - BROCA Ø2,5X30/100 REBAIXADA; B21 1 676 - BROCA Ø2,5X30/120 REBAIXADA; B21 1 677 - BROCA Ø2,5X30/150 REBAIXADA; B21 1 678 - BROCA Ø2,5X30/180 REBAIXADA; B21 1 679 - BROCA Ø2,5X30/200 REBAIXADA; B21 1 680 - BROCA Ø2,5X40/100 REBAIXADA; B21 1 681 - BROCA Ø2,5X40/120 REBAIXADA; B21 1 682 - BROCA Ø2,5X40/150 REBAIXADA; B21 1 683 - BROCA Ø2,5X40/180 REBAIXADA; B21 1 684 - BROCA Ø2,5X40/200 REBAIXADA; B21 1 685 - BROCA Ø2,5X40/220 REBAIXADA; B21 1 686 - BROCA Ø2,5X40/250 REBAIXADA; B21 1 687 - BROCA Ø2,5X40/300 REBAIXADA; B21 1 688 - BROCA Ø2,5X50/100 REBAIXADA; B21 1 689 - BROCA Ø2,5X50/120 REBAIXADA; B21 1 690 - BROCA Ø2,5X50/150 REBAIXADA; B21 1 691 - BROCA Ø2,5X50/180 REBAIXADA; B21 1 692 - BROCA Ø2,5X50/200 REBAIXADA; B21 1 693 - BROCA Ø2,5X50/220 REBAIXADA; B21 1 694 - BROCA Ø2,5X50/250 REBAIXADA; B21 1 695 - BROCA Ø2,5X50/300 REBAIXADA; B21 1 696 - BROCA Ø3,0; B21 1 697 - BROCA Ø3,0X15/60; B21 1 698 - BROCA Ø3,0X15/80; B21 1 699 - BROCA Ø3,0X15/100; B21 1 700 - BROCA Ø3,0X15/120; B21 1 701 - BROCA Ø3,0X15/150; B21 1 702 - BROCA Ø3,0X20/60; B21 1 703 - BROCA Ø3,0X20/80; B21 1 704 - BROCA Ø3,0X20/100; B21 1 705 - BROCA Ø3,0X20/120; B21 1 706 - BROCA Ø3,0X20/150; B21 1 707 - BROCA Ø3,0X25/80; B21 1 708 - BROCA Ø3,0X25/100; B21 1 709 - BROCA Ø3,0X25/120; B21 1 710 - BROCA Ø3,0X25/150; B21 1 711 - BROCA Ø3,0X25/180; B21 1 712 - BROCA Ø3,0X25/200; B21 1 713 - BROCA Ø3,0X30/80; B21 1 714 - BROCA Ø3,0X30/100; B21 1 715 - BROCA Ø3,0X30/120; B21 1 716 - BROCA Ø3,0X30/150; B21 1 717 - BROCA Ø3,0X30/180; B21 1 718 - BROCA Ø3,0X30/200; B21 1 719 - BROCA Ø3,0X30/220; B21 1 720 - BROCA Ø3,0X30/250; B21 1 721 - BROCA Ø3,0X40/100; B21 1 722 - BROCA Ø3,0X40/120; B21 1 723 - BROCA Ø3,0X40/150; B21 1 724 - BROCA Ø3,0X40/180; B21 1 725 - BROCA Ø3,0X40/200; B21 1 726 - BROCA Ø3,0X40/220; B21 1 727 - BROCA Ø3,0X40/250; B21 1 728 - BROCA Ø3,0X40/300; B21 1 729 - BROCA Ø3,0X40/350; B21 1 730 - BROCA Ø3,0X50/100; B21 1 731 - BROCA Ø3,0X50/120; B21 1 732 - BROCA Ø3,0X50/150; B21 1 733 - BROCA Ø3,0X50/180; B21 1 734 - BROCA Ø3,0X50/200; B21 1 735 - BROCA Ø3,0X50/220; B21 1 736 - BROCA Ø3,0X50/250; B21 1 737 - BROCA Ø3,0X50/300; B21 1 738 - BROCA Ø3,0X50/350; B21 1 739 - BROCA Ø3,0X70/200; B21 1 740 - BROCA Ø3,0X70/220; B21 1 741 - BROCA Ø3,0X70/250; B21 1 742 - BROCA Ø3,0X70/300; B21 1 743 - BROCA Ø3,0X70/350; B21 1 744 - BROCA Ø3,0 REBAIXADA; B21 1 745 - BROCA Ø3,0X15/60 REBAIXADA; B21 1 746 - BROCA Ø3,0X15/80 REBAIXADA; B21 1 747 - BROCA Ø3,0X15/100 REBAIXADA; B21 1 748 - BROCA Ø3,0X15/120 REBAIXADA; B21 1 749 - BROCA Ø3,0X15/150 REBAIXADA; B21 1 750 - BROCA Ø3,0X20/60 REBAIXADA; B21 1 751 - BROCA Ø3,0X20/80 REBAIXADA; B21 1 752 - BROCA Ø3,0X20/100 REBAIXADA; B21 1 753 - BROCA Ø3,0X20/120 REBAIXADA; B21 1 754 - BROCA Ø3,0X20/150 REBAIXADA; B21 1 755 - BROCA Ø3,0X25/80 REBAIXADA; B21 1 756 - BROCA Ø3,0X25/100 REBAIXADA; B21 1 757 - BROCA Ø3,0X25/120 REBAIXADA; B21 1 758 - BROCA Ø3,0X25/150 REBAIXADA; B21 1 759 - BROCA Ø3,0X25/180 REBAIXADA; B21 1 760 - BROCA Ø3,0X25/200 REBAIXADA; B21 1 761 - BROCA Ø3,0X30/80 REBAIXADA; B21 1 762 - BROCA Ø3,0X30/100 REBAIXADA; B21 1 763 - BROCA Ø3,0X30/120 REBAIXADA; B21 1 764 - BROCA Ø3,0X30/150 REBAIXADA; B21 1 765 - BROCA Ø3,0X30/180 REBAIXADA; B21 1 766 - BROCA Ø3,0X30/200 REBAIXADA; B21 1 767 - BROCA Ø3,0X30/220 REBAIXADA; B21 1 768 - BROCA Ø3,0X30/250 REBAIXADA; B21 1 769 - BROCA Ø3,0X40/100 REBAIXADA; B21 1 770 - BROCA Ø3,0X40/120 REBAIXADA; B21 1 771 - BROCA Ø3,0X40/150 REBAIXADA; B21 1 772 - BROCA Ø3,0X40/180 REBAIXADA; B21 1 773 - BROCA Ø3,0X40/200 REBAIXADA; B21 1 774 - BROCA Ø3,0X40/220 REBAIXADA; B21 1 775 - BROCA Ø3,0X40/250 REBAIXADA; B21 1 776 - BROCA Ø3,0X40/300 REBAIXADA; B21 1 777 - BROCA Ø3,0X40/350 REBAIXADA; B21 1 778 - BROCA Ø3,0X50/100 REBAIXADA; B21 1 779 - BROCA Ø3,0X50/120 REBAIXADA; B21 1 780 - BROCA Ø3,0X50/150 REBAIXADA; B21 1 781 - BROCA Ø3,0X50/180 REBAIXADA; B21 1 782 - BROCA Ø3,0X50/200 REBAIXADA; B21 1 783 - BROCA Ø3,0X50/220 REBAIXADA; B21 1 784 - BROCA Ø3,0X50/250 REBAIXADA; B21 1 785 - BROCA Ø3,0X50/300 REBAIXADA; B21 1 786 - BROCA Ø3,0X50/350 REBAIXADA; B21 1 787 - BROCA Ø3,0X70/200 REBAIXADA; B21 1 788 - BROCA Ø3,0X70/220 REBAIXADA; B21 1 789 - BROCA Ø3,0X70/250 REBAIXADA; B21 1 790 - BROCA Ø3,0X70/300 REBAIXADA; B21 1 791 - BROCA Ø3,0X70/350 REBAIXADA; B21 1 792 - BROCA Ø3,2; B21 1 793 - BROCA Ø3,2X15/60; B21 1 794 - BROCA Ø3,2X15/80; B21 1 795 - BROCA Ø3,2X15/100; B21 1 796 - BROCA Ø3,2X15/120; B21 1 797 - BROCA Ø3,2X15/150; B21 1 798 - BROCA Ø3,2X20/60; B21 1 799 - BROCA Ø3,2X20/80; B21 1 800 - BROCA Ø3,2X20/100; B21 1 801 - BROCA Ø3,2X20/120; B21 1 802 - BROCA Ø3,2X20/150; B21 1 803 - BROCA Ø3,2X25/80; B21 1 804 - BROCA Ø3,2X25/100; B21 1 805 - BROCA Ø3,2X25/120; B21 1 806 - BROCA Ø3,2X25/150; B21 1 807 - BROCA Ø3,2X25/180; B21 1 808 - BROCA Ø3,2X25/200; B21 1 809 - BROCA Ø3,2X30/80; B21 1 810 - BROCA Ø3,2X30/100; B21 1 811 - BROCA Ø3,2X30/120; B21 1 812 - BROCA Ø3,2X30/150; B21 1 813 - BROCA Ø3,2X30/180; B21 1 814 - BROCA Ø3,2X30/200; B21 1 815 - BROCA Ø3,2X30/220; B21 1 816 - BROCA Ø3,2X30/250; B21 1 817 - BROCA Ø3,2X40/100; B21 1 818 - BROCA Ø3,2X40/120; B21 1 819 - BROCA Ø3,2X40/150; B21 1 820 - BROCA Ø3,2X40/180; B21 1 821 - BROCA Ø3,2X40/200; B21 1 822 - BROCA Ø3,2X40/220; B21 1 823 - BROCA Ø3,2X40/250; B21 1 824 - BROCA Ø3,2X40/300; B21 1 825 - BROCA Ø3,2X40/350; B21 1 826 - BROCA Ø3,2X50/100; B21 1 827 - BROCA Ø3,2X50/120; B21 1 828 - BROCA Ø3,2X50/150; B21

1 829 - BROCA Ø3,2X50/180; B21 1 830 - BROCA Ø3,2X50/200; B21 1 831 - BROCA Ø3,2X50/220; B21 1 832 - BROCA Ø3,2X50/250; B21 1 833 - BROCA Ø3,2X50/300; B21 1 834 - BROCA Ø3,2X50/350; B21 1 835 - BROCA Ø3,2X70/200; B21 1 836 - BROCA Ø3,2X70/220; B21 1 837 - BROCA Ø3,2X70/250; B21 1 838 - BROCA Ø3,2X70/300; B21 1 839 - BROCA Ø3,2X70/350; B21 1 840 - BROCA Ø3,2 REBAIXADA; B21 1 841 - BROCA Ø3,2X15/60 REBAIXADA; B21 1 842 - BROCA Ø3,2X15/80 REBAIXADA; B21 1 843 - BROCA Ø3,2X15/100 REBAIXADA; B21 1 844 - BROCA Ø3,2X15/120 REBAIXADA; B21 1 845 - BROCA Ø3,2X15/150 REBAIXADA; B21 1 846 - BROCA Ø3,2X20/60 REBAIXADA; B21 1 847 - BROCA Ø3,2X20/80 REBAIXADA; B21 1 848 - BROCA Ø3,2X20/100 REBAIXADA; B21 1 849 - BROCA Ø3,2X20/120 REBAIXADA; B21 1 850 - BROCA Ø3,2X20/150 REBAIXADA; B21 1 851 - BROCA Ø3,2X25/80 REBAIXADA; B21 1 852 - BROCA Ø3,2X25/100 REBAIXADA; B21 1 853 - BROCA Ø3,2X25/120 REBAIXADA; B21 1 854 - BROCA Ø3,2X25/150 REBAIXADA; B21 1 855 - BROCA Ø3,2X25/180 REBAIXADA; B21 1 856 - BROCA Ø3,2X25/200 REBAIXADA; B21 1 857 - BROCA Ø3,2X30/80 REBAIXADA; B21 1 858 - BROCA Ø3,2X30/100 REBAIXADA; B21 1 859 - BROCA Ø3,2X30/120 REBAIXADA; B21 1 860 - BROCA Ø3,2X30/150 REBAIXADA; B21 1 861 - BROCA Ø3,2X30/180 REBAIXADA; B21 1 862 - BROCA Ø3,2X30/200 REBAIXADA; B21 1 863 - BROCA Ø3,2X30/220 REBAIXADA; B21 1 864 - BROCA Ø3,2X30/250 REBAIXADA; B21 1 865 - BROCA Ø3,2X40/100 REBAIXADA; B21 1 866 - BROCA Ø3,2X40/120 REBAIXADA; B21 1 867 - BROCA Ø3,2X40/150 REBAIXADA; B21 1 868 - BROCA Ø3,2X40/180 REBAIXADA; B21 1 869 - BROCA Ø3,2X40/200 REBAIXADA; B21 1 870 - BROCA Ø3,2X40/220 REBAIXADA; B21 1 871 - BROCA Ø3,2X40/250 REBAIXADA; B21 1 872 - BROCA Ø3,2X40/300 REBAIXADA; B21 1 873 - BROCA Ø3,2X40/350 REBAIXADA; B21 1 874 - BROCA Ø3,2X50/100 REBAIXADA; B21 1 875 - BROCA Ø3,2X50/120 REBAIXADA; B21 1 876 - BROCA Ø3,2X50/150 REBAIXADA; B21 1 877 - BROCA Ø3,2X50/180 REBAIXADA; B21 1 878 - BROCA Ø3,2X50/200 REBAIXADA; B21 1 879 - BROCA Ø3,2X50/220 REBAIXADA; B21 1 880 - BROCA Ø3,2X50/250 REBAIXADA; B21 1 881 - BROCA Ø3,2X50/300 REBAIXADA; B21 1 882 - BROCA Ø3,2X50/350 REBAIXADA; B21 1 883 - BROCA Ø3,2X70/200 REBAIXADA; B21 1 884 - BROCA Ø3,2X70/220 REBAIXADA; B21 1 885 - BROCA Ø3,2X70/250 REBAIXADA; B21 1 886 - BROCA Ø3,2X70/300 REBAIXADA; B21 1 887 - BROCA Ø3,2X70/350 REBAIXADA; B21 1 888 - BROCA Ø3,5; B21 1 889 - BROCA Ø3,5X15/80; B21 1 890 - BROCA Ø3,5X15/100; B21 1 891 - BROCA Ø3,5X15/120; B21 1 892 - BROCA Ø3,5X15/150; B21 1 893 - BROCA Ø3,5X20/80; B21 1 894 - BROCA Ø3,5X20/100; B21 1 895 - BROCA Ø3,5X20/120; B21 1 896 - BROCA Ø3,5X20/150; B21 1 897 - BROCA Ø3,5X25/100; B21 1 898 - BROCA Ø3,5X25/120; B21 1 899 - BROCA Ø3,5X25/150; B21 1 900 - BROCA Ø3,5X25/180; B21 1 901 - BROCA Ø3,5X25/200; B21 1 902 - BROCA Ø3,5X30/100; B21 1 903 - BROCA Ø3,5X30/120; B21 1 904 - BROCA Ø3,5X30/150; B21 1 905 - BROCA Ø3,5X30/180; B21 1 906 - BROCA Ø3,5X30/200; B21 1 907 - BROCA Ø3,5X30/220; B21 1 908 - BROCA Ø3,5X30/250; B21 1 909 - BROCA Ø3,5X40/100; B21 1 910 - BROCA Ø3,5X40/120; B21 1 911 - BROCA Ø3,5X40/150; B21 1 912 - BROCA Ø3,5X40/180; B21 1 913 - BROCA Ø3,5X40/200; B21 1 914 - BROCA Ø3,5X40/220; B21 1 915 - BROCA Ø3,5X40/250; B21 1 916 - BROCA Ø3,5X40/300; B21 1 917 - BROCA Ø3,5X40/350; B21 1 918 - BROCA Ø3,5X40/400; B21 1 919 - BROCA Ø3,5X50/100; B21 1 920 - BROCA Ø3,5X50/120; B21 1 921 - BROCA Ø3,5X50/150; B21 1 922 - BROCA Ø3,5X50/180; B21 1 923 - BROCA Ø3,5X50/200; B21 1 924 - BROCA Ø3,5X50/220; B21 1 925 - BROCA Ø3,5X50/250; B21 1 926 - BROCA Ø3,5X50/300; B21 1 927 - BROCA Ø3,5X50/350; B21 1 928 - BROCA Ø3,5X50/400; B21 1 929 - BROCA Ø3,5X70/200; B21 1 930 - BROCA Ø3,5X70/220; B21 1 931 - BROCA Ø3,5X70/250; B21 1 932 - BROCA Ø3,5X70/300; B21 1 933 - BROCA Ø3,5X70/350; B21 1 934 - BROCA Ø3,5X70/400; B21 1 935 - BROCA Ø3,5 REBAIXADA; B21 1 936 - BROCA Ø3,5X15/80 REBAIXADA; B21 1 937 - BROCA Ø3,5X15/100 REBAIXADA; B21 1 938 - BROCA Ø3,5X15/120 REBAIXADA; B21 1 939 - BROCA Ø3,5X15/150 REBAIXADA; B21 1 940 - BROCA Ø3,5X20/80 REBAIXADA; B21 1 941 - BROCA Ø3,5X20/100 REBAIXADA; B21 1 942 - BROCA Ø3,5X20/120 REBAIXADA; B21 1 943 - BROCA Ø3,5X20/150 REBAIXADA; B21 1 944 - BROCA Ø3,5X25/100 REBAIXADA; B21 1 945 - BROCA Ø3,5X25/120 REBAIXADA; B21 1 946 - BROCA Ø3,5X25/150 REBAIXADA; B21 1 947 - BROCA Ø3,5X25/180 REBAIXADA; B21 1 948 - BROCA Ø3,5X25/200 REBAIXADA; B21 1 949 - BROCA Ø3,5X30/100 REBAIXADA; B21 1 950 - BROCA Ø3,5X30/120 REBAIXADA; B21 1 951 - BROCA Ø3,5X30/150 REBAIXADA; B21 1 952 - BROCA Ø3,5X30/180 REBAIXADA; B21 1 953 - BROCA Ø3,5X30/200 REBAIXADA; B21 1 954 - BROCA Ø3,5X30/220 REBAIXADA; B21 1 955 - BROCA Ø3,5X30/250 REBAIXADA; B21 1 956 - BROCA Ø3,5X40/100 REBAIXADA; B21 1 957 - BROCA Ø3,5X40/120 REBAIXADA; B21 1 958 - BROCA Ø3,5X40/150 REBAIXADA; B21 1 959 - BROCA Ø3,5X40/180 REBAIXADA; B21 1 960 - BROCA Ø3,5X40/200 REBAIXADA; B21 1 961 - BROCA Ø3,5X40/220 REBAIXADA; B21 1 962 - BROCA Ø3,5X40/250 REBAIXADA; B21 1 963 - BROCA Ø3,5X40/300 REBAIXADA; B21 1 964 - BROCA Ø3,5X40/350 REBAIXADA; B21 1 965 - BROCA Ø3,5X40/400 REBAIXADA; B21 1 966 - BROCA Ø3,5X50/100 REBAIXADA; B21 1 967 - BROCA Ø3,5X50/120 REBAIXADA; B21 1 968 - BROCA Ø3,5X50/150 REBAIXADA; B21 1 969 - BROCA Ø3,5X50/180 REBAIXADA; B21 1 970 - BROCA Ø3,5X50/200 REBAIXADA; B21 1 971 - BROCA Ø3,5X50/220 REBAIXADA; B21 1 972 - BROCA Ø3,5X50/250 REBAIXADA; B21 1 973 - BROCA Ø3,5X50/300 REBAIXADA; B21 1 974 - BROCA Ø3,5X50/350 REBAIXADA; B21 1 975 - BROCA Ø3,5X50/400 REBAIXADA; B21 1 976 - BROCA Ø3,5X70/200 REBAIXADA; B21 1 977 - BROCA Ø3,5X70/220 REBAIXADA; B21 1 978 - BROCA Ø3,5X70/250 REBAIXADA; B21 1 979 - BROCA Ø3,5X70/300 REBAIXADA; B21 1 980 - BROCA Ø3,5X70/350 REBAIXADA; B21 1 981 - BROCA Ø3,5X70/400 REBAIXADA; B21 2 051 - BROCA Ø0,6 CURTA SB; B21 2 052 - BROCA Ø0,6 SB; B21 2 054 - BROCA Ø0,6 LONGA SB; B21 2 056 - BROCA Ø0,6 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 058 - BROCA Ø0,6 REBAIXADA SB; B21 2 060 - BROCA Ø0,6 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 100 - BROCA Ø1,0 CURTA SB; B21 2 102 - BROCA Ø1,0X5 CURTA SB; B21 2 104 - BROCA Ø1,0X7 CURTA SB; B21 2 106 - BROCA Ø1,0X9 CURTA SB; B21 2 108 - BROCA Ø1,0X11 CURTA SB; B21 2 110 - BROCA Ø1,0X13 CURTA SB; B21 2 112 - BROCA Ø1,0X15 CURTA SB; B21 2 114 - BROCA Ø1,0X17 CURTA SB; B21 2 116 - BROCA Ø1,0X20 CURTA SB; B21 2 118 - BROCA Ø1,0X22 CURTA SB; B21 2 120 - BROCA Ø1,0 SB; B21 2 122 - BROCA Ø1,0X5 SB; B21 2 124 - BROCA Ø1,0X7 SB; B21 2 126 - BROCA Ø1,0X9 SB; B21 2 128 - BROCA Ø1,0X11 SB; B21 2 130 - BROCA Ø1,0X13 SB; B21 2 132 - BROCA Ø1,0X15 SB; B21 2 134 - BROCA Ø1,0X17 SB; B21 2 136 - BROCA Ø1,0X20 SB; B21 2 138 - BROCA Ø1,0X22 SB; B21 2 140 - BROCA Ø1,0 LONGA SB; B21 2 142 - BROCA Ø1,0X5 LONGA SB; B21 2 144 - BROCA Ø1,0X7 LONGA SB; B21 2 146 - BROCA Ø1,0X9 LONGA SB; B21 2 148 - BROCA Ø1,0X11 LONGA SB; B21 2 150 - BROCA Ø1,0X13 LONGA SB; B21 2 152 - BROCA Ø1,0X15 LONGA SB; B21 2 154 - BROCA Ø1,0X17 LONGA SB; B21 2 156 - BROCA Ø1,0X20 LONGA SB; B21 2 158 - BROCA Ø1,0X22 LONGA SB; B21 2 160 - BROCA Ø1,0 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 162 - BROCA Ø1,0X5 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 164 - BROCA Ø1,0X7 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 166 - BROCA Ø1,0X9 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 168 - BROCA Ø1,0X11 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 170 - BROCA Ø1,0X13 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 172 - BROCA Ø1,0X15 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 174 - BROCA Ø1,0X17 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 176 - BROCA Ø1,0X20 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 178 - BROCA Ø1,0X22 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 180 - BROCA Ø1,0 REBAIXADA SB; B21 2 182 - BROCA Ø1,0X5

REBAIXADA SB; B21 2 184 - BROCA Ø1,0X7 REBAIXADA SB; B21 2 186 - BROCA Ø1,0X9 REBAIXADA SB; B21 2 188 - BROCA Ø1,0X11 REBAIXADA SB; B21 2 190 - BROCA Ø1,0X13 REBAIXADA SB; B21 2 192 - BROCA Ø1,0X15 REBAIXADA SB; B21 2 194 - BROCA Ø1,0X17 REBAIXADA SB; B21 2 196 - BROCA Ø1,0X20 REBAIXADA SB; B21 2 198 - BROCA Ø1,0X22 REBAIXADA SB; B21 2 200 - BROCA Ø1,0 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 202 - BROCA Ø1,0X5 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 204 - BROCA Ø1,0X7 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 206 - BROCA Ø1,0X9 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 208 - BROCA Ø1,0X11 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 210 - BROCA Ø1,0X13 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 212 - BROCA Ø1,0X15 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 214 - BROCA Ø1,0X17 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 216 - BROCA Ø1,0X20 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 218 - BROCA Ø1,0X22 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 220 - BROCA Ø1,1 CURTA SB; B21 2 222 - BROCA Ø1,1X5 CURTA SB; B21 2 224 - BROCA Ø1,1X7 CURTA SB; B21 2 226 - BROCA Ø1,1X9 CURTA SB; B21 2 228 - BROCA Ø1,1X11 CURTA SB; B21 2 230 - BROCA Ø1,1X13 CURTA SB; B21 2 232 - BROCA Ø1,1X15 CURTA SB; B21 2 234 - BROCA Ø1,1X17 CURTA SB; B21 2 236 - BROCA Ø1,1X20 CURTA SB; B21 2 238 - BROCA Ø1,1X22 CURTA SB; B21 2 240 - BROCA Ø1,1 SB; B21 2 242 - BROCA Ø1,1X5 SB; B21 2 244 - BROCA Ø1,1X7 SB; B21 2 246 - BROCA Ø1,1X9 SB; B21 2 248 - BROCA Ø1,1X11 SB; B21 2 250 - BROCA Ø1,1X13 SB; B21 2 252 - BROCA Ø1,1X15 SB; B21 2 254 - BROCA Ø1,1X17 SB; B21 2 256 - BROCA Ø1,1X20 SB; B21 2 258 - BROCA Ø1,1X22 SB; B21 2 260 - BROCA Ø1,1 LONGA SB; B21 2 262 - BROCA Ø1,1X5 LONGA SB; B21 2 264 - BROCA Ø1,1X7 LONGA SB; B21 2 266 - BROCA Ø1,1X9 LONGA SB; B21 2 268 - BROCA Ø1,1X11 LONGA SB; B21 2 270 - BROCA Ø1,1X13 LONGA SB; B21 2 272 - BROCA Ø1,1X15 LONGA SB; B21 2 274 - BROCA Ø1,1X17 LONGA SB; B21 2 276 - BROCA Ø1,1X20 LONGA SB; B21 2 278 - BROCA Ø1,1X22 LONGA SB; B21 2 280 - BROCA Ø1,1 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 282 - BROCA Ø1,1X5 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 284 - BROCA Ø1,1X7 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 286 - BROCA Ø1,1X9 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 288 - BROCA Ø1,1X11 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 290 - BROCA Ø1,1X13 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 292 - BROCA Ø1,1X15 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 294 - BROCA Ø1,1X17 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 296 - BROCA Ø1,1X20 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 298 - BROCA Ø1,1X22 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 300 - BROCA Ø1,1 REBAIXADA SB; B21 2 302 - BROCA Ø1,1X5 REBAIXADA SB; B21 2 304 - BROCA Ø1,1X7 REBAIXADA SB; B21 2 306 - BROCA Ø1,1X9 REBAIXADA SB; B21 2 308 - BROCA Ø1,1X11 REBAIXADA SB; B21 2 310 - BROCA Ø1,1X13 REBAIXADA SB; B21 2 312 - BROCA Ø1,1X15 REBAIXADA SB; B21 2 314 - BROCA Ø1,1X17 REBAIXADA SB; B21 2 316 - BROCA Ø1,1X20 REBAIXADA SB; B21 2 318 - BROCA Ø1,1X22 REBAIXADA SB; B21 2 320 - BROCA Ø1,1 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 322 - BROCA Ø1,1X5 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 324 - BROCA Ø1,1X7 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 326 - BROCA Ø1,1X9 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 328 - BROCA Ø1,1X11 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 330 - BROCA Ø1,1X13 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 332 - BROCA Ø1,1X15 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 334 - BROCA Ø1,1X17 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 336 - BROCA Ø1,1X20 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 338 - BROCA Ø1,1X22 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 340 - BROCA Ø1,2 CURTA SB; B21 2 342 - BROCA Ø1,2X5 CURTA SB; B21 2 344 - BROCA Ø1,2X7 CURTA SB; B21 2 346 - BROCA Ø1,2X9 CURTA SB; B21 2 348 - BROCA Ø1,2X11 CURTA SB; B21 2 350 - BROCA Ø1,2X13 CURTA SB; B21 2 352 - BROCA Ø1,2X15 CURTA SB; B21 2 354 - BROCA Ø1,2X17 CURTA SB; B21 2 356 - BROCA Ø1,2X20 CURTA SB; B21 2 358 - BROCA Ø1,2X22 CURTA SB; B21 2 360 - BROCA Ø1,2 SB; B21 2 362 - BROCA Ø1,2X5 SB; B21 2 364 - BROCA Ø1,2X7 SB; B21 2 366 - BROCA Ø1,2X9 SB; B21 2 368 - BROCA Ø1,2X11 SB; B21 2 370 - BROCA Ø1,2X13 SB; B21 2 372 - BROCA Ø1,2X15 SB; B21 2 374 - BROCA Ø1,2X17 SB; B21 2 376 - BROCA Ø1,2X20 SB; B21 2 378 - BROCA Ø1,2X22 SB; B21 2 380 - BROCA Ø1,2 LONGA SB; B21 2 382 - BROCA Ø1,2X5 LONGA SB; B21 2 384 - BROCA Ø1,2X7 LONGA SB; B21 2 386 - BROCA Ø1,2X9 LONGA SB; B21 2 388 - BROCA Ø1,2X11 LONGA SB; B21 2 390 - BROCA Ø1,2X13 LONGA SB; B21 2 392 - BROCA Ø1,2X15 LONGA SB; B21 2 394 - BROCA Ø1,2X17 LONGA SB; B21 2 396 - BROCA Ø1,2X20 LONGA SB; B21 2 398 - BROCA Ø1,2X22 LONGA SB; B21 2 400 - BROCA Ø1,2 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 402 - BROCA Ø1,2X5 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 404 - BROCA Ø1,2X7 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 406 - BROCA Ø1,2X9 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 408 - BROCA Ø1,2X11 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 410 - BROCA Ø1,2X13 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 412 - BROCA Ø1,2X15 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 414 - BROCA Ø1,2X17 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 416 - BROCA Ø1,2X20 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 418 - BROCA Ø1,2X22 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 420 - BROCA Ø1,2 REBAIXADA SB; B21 2 422 - BROCA Ø1,2X5 REBAIXADA SB; B21 2 424 - BROCA Ø1,2X7 REBAIXADA SB; B21 2 426 - BROCA Ø1,2X9 REBAIXADA SB; B21 2 428 - BROCA Ø1,2X11 REBAIXADA SB; B21 2 430 - BROCA Ø1,2X13 REBAIXADA SB; B21 2 432 - BROCA Ø1,2X15 REBAIXADA SB; B21 2 434 - BROCA Ø1,2X17 REBAIXADA SB; B21 2 436 - BROCA Ø1,2X20 REBAIXADA SB; B21 2 438 - BROCA Ø1,2X22 REBAIXADA SB; B21 2 440 - BROCA Ø1,2 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 442 - BROCA Ø1,2X5 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 444 - BROCA Ø1,2X7 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 446 - BROCA Ø1,2X9 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 448 - BROCA Ø1,2X11 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 450 - BROCA Ø1,2X13 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 452 - BROCA Ø1,2X15 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 454 - BROCA Ø1,2X17 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 456 - BROCA Ø1,2X20 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 458 - BROCA Ø1,2X22 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 460 - BROCA Ø1,5 CURTA SB; B21 2 462 - BROCA Ø1,5X5 CURTA SB; B21 2 464 - BROCA Ø1,5X7 CURTA SB; B21 2 466 - BROCA Ø1,5X9 CURTA SB; B21 2 468 - BROCA Ø1,5X11 CURTA SB; B21 2 470 - BROCA Ø1,5X13 CURTA SB; B21 2 472 - BROCA Ø1,5X15 CURTA SB; B21 2 474 - BROCA Ø1,5X17 CURTA SB; B21 2 476 - BROCA Ø1,5X20 CURTA SB; B21 2 478 - BROCA Ø1,5X22 CURTA SB; B21 2 480 - BROCA Ø1,5 SB; B21 2 482 - BROCA Ø1,5X5 SB; B21 2 484 - BROCA Ø1,5X7 SB; B21 2 486 - BROCA Ø1,5X9 SB; B21 2 488 - BROCA Ø1,5X11 SB; B21 2 490 - BROCA Ø1,5X13 SB; B21 2 492 - BROCA Ø1,5X15 SB; B21 2 494 - BROCA Ø1,5X17 SB; B21 2 496 - BROCA Ø1,5X20 SB; B21 2 498 - BROCA Ø1,5X22 SB; B21 2 500 - BROCA Ø1,5 LONGA SB; B21 2 502 - BROCA Ø1,5X5 LONGA SB; B21 2 504 - BROCA Ø1,5X7 LONGA SB; B21 2 506 - BROCA Ø1,5X9 LONGA SB; B21 2 508 - BROCA Ø1,5X11 LONGA SB; B21 2 510 - BROCA Ø1,5X13 LONGA SB; B21 2 512 - BROCA Ø1,5X15 LONGA SB; B21 2 514 - BROCA Ø1,5X17 LONGA SB; B21 2 516 - BROCA Ø1,5X20 LONGA SB; B21 2 518 - BROCA Ø1,5X22 LONGA SB; B21 2 520 - BROCA Ø1,5 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 522 - BROCA Ø1,5X5 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 524 - BROCA Ø1,5X7 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 526 - BROCA Ø1,5X9 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 528 - BROCA Ø1,5X11 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 530 - BROCA Ø1,5X13 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 532 - BROCA Ø1,5X15 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 534 - BROCA Ø1,5X17 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 536 - BROCA Ø1,5X20 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 538 - BROCA Ø1,5X22 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 540 - BROCA Ø1,5 REBAIXADA SB; B21 2 542 - BROCA Ø1,5X5 REBAIXADA SB; B21 2 544 - BROCA Ø1,5X7 REBAIXADA SB; B21 2 546 - BROCA Ø1,5X9 REBAIXADA SB; B21 2 548 - BROCA Ø1,5X11 REBAIXADA SB; B21 2 550 - BROCA Ø1,5X13 REBAIXADA SB; B21 2 552 - BROCA Ø1,5X15 REBAIXADA SB; B21 2 554 - BROCA Ø1,5X17 REBAIXADA SB; B21 2 556 - BROCA Ø1,5X20 REBAIXADA SB; B21 2 558 - BROCA Ø1,5X22 REBAIXADA SB; B21 2 560 - BROCA Ø1,5 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 562 - BROCA Ø1,5X5 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 564 - BROCA Ø1,5X7 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 566 - BROCA Ø1,5X9

REBAIXADA LONGA SB; B21 2 568 - BROCA Ø1,5X11 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 570 - BROCA Ø1,5X13 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 572 - BROCA Ø1,5X15 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 574 - BROCA Ø1,5X17 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 576 - BROCA Ø1,5X20 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 578 - BROCA Ø1,5X22 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 580 - BROCA Ø1,6 CURTA SB; B21 2 582 - BROCA Ø1,6X5 CURTA SB; B21 2 584 - BROCA Ø1,6X7 CURTA SB; B21 2 586 - BROCA Ø1,6X9 CURTA SB; B21 2 588 - BROCA Ø1,6X11 CURTA SB; B21 2 590 - BROCA Ø1,6X13 CURTA SB; B21 2 592 - BROCA Ø1,6X15 CURTA SB; B21 2 594 - BROCA Ø1,6X17 CURTA SB; B21 2 596 - BROCA Ø1,6X20 CURTA SB; B21 2 598 - BROCA Ø1,6X22 CURTA SB; B21 2 600 - BROCA Ø1,6 SB; B21 2 602 - BROCA Ø1,6X5 SB; B21 2 604 - BROCA Ø1,6X7 SB; B21 2 606 - BROCA Ø1,6X9 SB; B21 2 608 - BROCA Ø1,6X11 SB; B21 2 610 - BROCA Ø1,6X13 SB; B21 2 612 - BROCA Ø1,6X15 SB; B21 2 614 - BROCA Ø1,6X17 SB; B21 2 616 - BROCA Ø1,6X20 SB; B21 2 618 - BROCA Ø1,6X22 SB; B21 2 620 - BROCA Ø1,6 LONGA SB; B21 2 622 - BROCA Ø1,6X5 LONGA SB; B21 2 624 - BROCA Ø1,6X7 LONGA SB; B21 2 626 - BROCA Ø1,6X9 LONGA SB; B21 2 628 - BROCA Ø1,6X11 LONGA SB; B21 2 630 - BROCA Ø1,6X13 LONGA SB; B21 2 632 - BROCA Ø1,6X15 LONGA SB; B21 2 634 - BROCA Ø1,6X17 LONGA SB; B21 2 636 - BROCA Ø1,6X20 LONGA SB; B21 2 638 - BROCA Ø1,6X22 LONGA SB; B21 2 640 - BROCA Ø1,6 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 642 - BROCA Ø1,6X5 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 644 - BROCA Ø1,6X7 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 646 - BROCA Ø1,6X9 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 648 - BROCA Ø1,6X11 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 650 - BROCA Ø1,6X13 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 652 - BROCA Ø1,6X15 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 654 - BROCA Ø1,6X17 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 656 - BROCA Ø1,6X20 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 658 - BROCA Ø1,6X22 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 660 - BROCA Ø1,6 REBAIXADA SB; B21 2 662 - BROCA Ø1,6X5 REBAIXADA SB; B21 2 664 - BROCA Ø1,6X7 REBAIXADA SB; B21 2 666 - BROCA Ø1,6X9 REBAIXADA SB; B21 2 668 - BROCA Ø1,6X11 REBAIXADA SB; B21 2 670 - BROCA Ø1,6X13 REBAIXADA SB; B21 2 672 - BROCA Ø1,6X15 REBAIXADA SB; B21 2 674 - BROCA Ø1,6X17 REBAIXADA SB; B21 2 676 - BROCA Ø1,6X20 REBAIXADA SB; B21 2 678 - BROCA Ø1,6X22 REBAIXADA SB; B21 2 680 - BROCA Ø1,6 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 682 - BROCA Ø1,6X5 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 684 - BROCA Ø1,6X7 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 686 - BROCA Ø1,6X9 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 688 - BROCA Ø1,6X11 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 690 - BROCA Ø1,6X13 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 692 - BROCA Ø1,6X15 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 694 - BROCA Ø1,6X17 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 696 - BROCA Ø1,6X20 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 698 - BROCA Ø1,6X22 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 700 - BROCA Ø1,8 CURTA SB; B21 2 702 - BROCA Ø1,8X5 CURTA SB; B21 2 704 - BROCA Ø1,8X7 CURTA SB; B21 2 706 - BROCA Ø1,8X9 CURTA SB; B21 2 708 - BROCA Ø1,8X11 CURTA SB; B21 2 710 - BROCA Ø1,8X13 CURTA SB; B21 2 712 - BROCA Ø1,8X15 CURTA SB; B21 2 714 - BROCA Ø1,8X17 CURTA SB; B21 2 716 - BROCA Ø1,8X20 CURTA SB; B21 2 718 - BROCA Ø1,8X22 CURTA SB; B21 2 720 - BROCA Ø1,8 SB; B21 2 722 - BROCA Ø1,8X5 SB; B21 2 724 - BROCA Ø1,8X7 SB; B21 2 726 - BROCA Ø1,8X9 SB; B21 2 728 - BROCA Ø1,8X11 SB; B21 2 730 - BROCA Ø1,8X13 SB; B21 2 732 - BROCA Ø1,8X15 SB; B21 2 734 - BROCA Ø1,8X17 SB; B21 2 736 - BROCA Ø1,8X20 SB; B21 2 738 - BROCA Ø1,8X22 SB; B21 2 740 - BROCA Ø1,8 LONGA SB; B21 2 742 - BROCA Ø1,8X5 LONGA SB; B21 2 744 - BROCA Ø1,8X7 LONGA SB; B21 2 746 - BROCA Ø1,8X9 LONGA SB; B21 2 748 - BROCA Ø1,8X11 LONGA SB; B21 2 750 - BROCA Ø1,8X13 LONGA SB; B21 2 752 - BROCA Ø1,8X15 LONGA SB; B21 2 754 - BROCA Ø1,8X17 LONGA SB; B21 2 756 - BROCA Ø1,8X20 LONGA SB; B21 2 758 - BROCA Ø1,8X22 LONGA SB; B21 2 760 - BROCA Ø1,8 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 762 - BROCA Ø1,8X5 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 764 - BROCA Ø1,8X7 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 766 - BROCA Ø1,8X9 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 768 - BROCA Ø1,8X11 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 770 - BROCA Ø1,8X13 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 772 - BROCA Ø1,8X15 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 774 - BROCA Ø1,8X17 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 776 - BROCA Ø1,8X20 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 778 - BROCA Ø1,8X22 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 780 - BROCA Ø1,8 REBAIXADA SB; B21 2 782 - BROCA Ø1,8X5 REBAIXADA SB; B21 2 784 - BROCA Ø1,8X7 REBAIXADA SB; B21 2 786 - BROCA Ø1,8X9 REBAIXADA SB; B21 2 788 - BROCA Ø1,8X11 REBAIXADA SB; B21 2 790 - BROCA Ø1,8X13 REBAIXADA SB; B21 2 792 - BROCA Ø1,8X15 REBAIXADA SB; B21 2 794 - BROCA Ø1,8X17 REBAIXADA SB; B21 2 796 - BROCA Ø1,8X20 REBAIXADA SB; B21 2 798 - BROCA Ø1,8X22 REBAIXADA SB; B21 2 800 - BROCA Ø1,8 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 802 - BROCA Ø1,8X5 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 804 - BROCA Ø1,8X7 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 806 - BROCA Ø1,8X9 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 808 - BROCA Ø1,8X11 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 810 - BROCA Ø1,8X13 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 812 - BROCA Ø1,8X15 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 814 - BROCA Ø1,8X17 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 816 - BROCA Ø1,8X20 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 818 - BROCA Ø1,8X22 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 820 - BROCA Ø2,0 CURTA SB; B21 2 822 - BROCA Ø2,0X5 CURTA SB; B21 2 824 - BROCA Ø2,0X7 CURTA SB; B21 2 826 - BROCA Ø2,0X9 CURTA SB; B21 2 828 - BROCA Ø2,0X11 CURTA SB; B21 2 830 - BROCA Ø2,0X13 CURTA SB; B21 2 832 - BROCA Ø2,0X15 CURTA SB; B21 2 834 - BROCA Ø2,0X17 CURTA SB; B21 2 836 - BROCA Ø2,0X20 CURTA SB; B21 2 838 - BROCA Ø2,0X22 CURTA SB; B21 2 840 - BROCA Ø2,0 SB; B21 2 842 - BROCA Ø2,0X5 SB; B21 2 844 - BROCA Ø2,0X7 SB; B21 2 846 - BROCA Ø2,0X9 SB; B21 2 848 - BROCA Ø2,0X11 SB; B21 2 850 - BROCA Ø2,0X13 SB; B21 2 852 - BROCA Ø2,0X15 SB; B21 2 854 - BROCA Ø2,0X17 SB; B21 2 856 - BROCA Ø2,0X20 SB; B21 2 858 - BROCA Ø2,0X22 SB; B21 2 860 - BROCA Ø2,0 LONGA SB; B21 2 862 - BROCA Ø2,0X5 LONGA SB; B21 2 864 - BROCA Ø2,0X7 LONGA SB; B21 2 866 - BROCA Ø2,0X9 LONGA SB; B21 2 868 - BROCA Ø2,0X11 LONGA SB; B21 2 870 - BROCA Ø2,0X13 LONGA SB; B21 2 872 - BROCA Ø2,0X15 LONGA SB; B21 2 874 - BROCA Ø2,0X17 LONGA SB; B21 2 876 - BROCA Ø2,0X20 LONGA SB; B21 2 878 - BROCA Ø2,0X22 LONGA SB; B21 2 880 - BROCA Ø2,0 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 882 - BROCA Ø2,0X5 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 884 - BROCA Ø2,0X7 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 886 - BROCA Ø2,0X9 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 888 - BROCA Ø2,0X11 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 890 - BROCA Ø2,0X13 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 892 - BROCA Ø2,0X15 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 894 - BROCA Ø2,0X17 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 896 - BROCA Ø2,0X20 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 898 - BROCA Ø2,0X22 REBAIXADA CURTA SB; B21 2 900 - BROCA Ø2,0 REBAIXADA SB; B21 2 902 - BROCA Ø2,0X5 REBAIXADA SB; B21 2 904 - BROCA Ø2,0X7 REBAIXADA SB; B21 2 906 - BROCA Ø2,0X9 REBAIXADA SB; B21 2 908 - BROCA Ø2,0X11 REBAIXADA SB; B21 2 910 - BROCA Ø2,0X13 REBAIXADA SB; B21 2 912 - BROCA Ø2,0X15 REBAIXADA SB; B21 2 914 - BROCA Ø2,0X17 REBAIXADA SB; B21 2 916 - BROCA Ø2,0X20 REBAIXADA SB; B21 2 918 - BROCA Ø2,0X22 REBAIXADA SB; B21 2 920 - BROCA Ø2,0 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 922 - BROCA Ø2,0X5 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 924 - BROCA Ø2,0X7 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 926 - BROCA Ø2,0X9 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 928 - BROCA Ø2,0X11 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 930 - BROCA Ø2,0X13 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 932 - BROCA Ø2,0X15 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 934 - BROCA Ø2,0X17 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 936 - BROCA Ø2,0X20 REBAIXADA LONGA SB; B21 2 938 - BROCA Ø2,0X22 REBAIXADA LONGA SB; B21 3 051 - BROCA Ø0,6 CURTA BL; B21 3 052 - BROCA Ø0,6 BL; B21 3 054 - BROCA Ø0,6 LONGA BL; B21 3 056 - BROCA Ø0,6 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 058 - BROCA Ø0,6 REBAIXADA BL; B21

3 060 - BROCA Ø0,6 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 100 - BROCA Ø1,0 CURTA BL; B21 3 102 - BROCA Ø1,0X5 CURTA BL; B21 3 104 - BROCA Ø1,0X7 CURTA BL; B21 3 106 - BROCA Ø1,0X9 CURTA BL; B21 3 108 - BROCA Ø1,0X11 CURTA BL; B21 3 110 - BROCA Ø1,0X13 CURTA BL; B21 3 112 - BROCA Ø1,0X15 CURTA BL; B21 3 114 - BROCA Ø1,0X17 CURTA BL; B21 3 116 - BROCA Ø1,0X20 CURTA BL; B21 3 118 - BROCA Ø1,0X22 CURTA BL; B21 3 120 - BROCA Ø1,0 BL; B21 3 122 - BROCA Ø1,0X5 BL; B21 3 124 - BROCA Ø1,0X7 BL; B21 3 126 - BROCA Ø1,0X9 BL; B21 3 128 - BROCA Ø1,0X11 BL; B21 3 130 - BROCA Ø1,0X13 BL; B21 3 132 - BROCA Ø1,0X15 BL; B21 3 134 - BROCA Ø1,0X17 BL; B21 3 136 - BROCA Ø1,0X20 BL; B21 3 138 - BROCA Ø1,0X22 BL; B21 3 140 - BROCA Ø1,0 LONGA BL; B21 3 142 - BROCA Ø1,0X5 LONGA BL; B21 3 144 - BROCA Ø1,0X7 LONGA BL; B21 3 146 - BROCA Ø1,0X9 LONGA BL; B21 3 148 - BROCA Ø1,0X11 LONGA BL; B21 3 150 - BROCA Ø1,0X13 LONGA BL; B21 3 152 - BROCA Ø1,0X15 LONGA BL; B21 3 154 - BROCA Ø1,0X17 LONGA BL; B21 3 156 - BROCA Ø1,0X20 LONGA BL; B21 3 158 - BROCA Ø1,0X22 LONGA BL; B21 3 160 - BROCA Ø1,0 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 162 - BROCA Ø1,0X5 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 164 - BROCA Ø1,0X7 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 166 - BROCA Ø1,0X9 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 168 - BROCA Ø1,0X11 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 170 - BROCA Ø1,0X13 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 172 - BROCA Ø1,0X15 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 174 - BROCA Ø1,0X17 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 176 - BROCA Ø1,0X20 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 178 - BROCA Ø1,0X22 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 180 - BROCA Ø1,0 REBAIXADA BL; B21 3 182 - BROCA Ø1,0X5 REBAIXADA BL; B21 3 184 - BROCA Ø1,0X7 REBAIXADA BL; B21 3 186 - BROCA Ø1,0X9 REBAIXADA BL; B21 3 188 - BROCA Ø1,0X11 REBAIXADA BL; B21 3 190 - BROCA Ø1,0X13 REBAIXADA BL; B21 3 192 - BROCA Ø1,0X15 REBAIXADA BL; B21 3 194 - BROCA Ø1,0X17 REBAIXADA BL; B21 3 196 - BROCA Ø1,0X20 REBAIXADA BL; B21 3 198 - BROCA Ø1,0X22 REBAIXADA BL; B21 3 200 - BROCA Ø1,0 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 202 - BROCA Ø1,0X5 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 204 - BROCA Ø1,0X7 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 206 - BROCA Ø1,0X9 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 208 - BROCA Ø1,0X11 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 210 - BROCA Ø1,0X13 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 212 - BROCA Ø1,0X15 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 214 - BROCA Ø1,0X17 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 216 - BROCA Ø1,0X20 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 218 - BROCA Ø1,0X22 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 220 - BROCA Ø1,1 CURTA BL; B21 3 222 - BROCA Ø1,1X5 CURTA BL; B21 3 224 - BROCA Ø1,1X7 CURTA BL; B21 3 226 - BROCA Ø1,1X9 CURTA BL; B21 3 228 - BROCA Ø1,1X11 CURTA BL; B21 3 230 - BROCA Ø1,1X13 CURTA BL; B21 3 232 - BROCA Ø1,1X15 CURTA BL; B21 3 234 - BROCA Ø1,1X17 CURTA BL; B21 3 236 - BROCA Ø1,1X20 CURTA BL; B21 3 238 - BROCA Ø1,1X22 CURTA BL; B21 3 240 - BROCA Ø1,1 BL; B21 3 242 - BROCA Ø1,1X5 BL; B21 3 244 - BROCA Ø1,1X7 BL; B21 3 246 - BROCA Ø1,1X9 BL; B21 3 248 - BROCA Ø1,1X11 BL; B21 3 250 - BROCA Ø1,1X13 BL; B21 3 252 - BROCA Ø1,1X15 BL; B21 3 254 - BROCA Ø1,1X17 BL; B21 3 256 - BROCA Ø1,1X20 BL; B21 3 258 - BROCA Ø1,1X22 BL; B21 3 260 - BROCA Ø1,1 LONGA BL; B21 3 262 - BROCA Ø1,1X5 LONGA BL; B21 3 264 - BROCA Ø1,1X7 LONGA BL; B21 3 266 - BROCA Ø1,1X9 LONGA BL; B21 3 268 - BROCA Ø1,1X11 LONGA BL; B21 3 270 - BROCA Ø1,1X13 LONGA BL; B21 3 272 - BROCA Ø1,1X15 LONGA BL; B21 3 274 - BROCA Ø1,1X17 LONGA BL; B21 3 276 - BROCA Ø1,1X20 LONGA BL; B21 3 278 - BROCA Ø1,1X22 LONGA BL; B21 3 280 - BROCA Ø1,1 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 282 - BROCA Ø1,1X5 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 284 - BROCA Ø1,1X7 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 286 - BROCA Ø1,1X9 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 288 - BROCA Ø1,1X11 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 290 - BROCA Ø1,1X13 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 292 - BROCA Ø1,1X15 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 294 - BROCA Ø1,1X17 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 296 - BROCA Ø1,1X20 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 298 - BROCA Ø1,1X22 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 300 - BROCA Ø1,1 REBAIXADA BL; B21 3 302 - BROCA Ø1,1X5 REBAIXADA BL; B21 3 304 - BROCA Ø1,1X7 REBAIXADA BL; B21 3 306 - BROCA Ø1,1X9 REBAIXADA BL; B21 3 308 - BROCA Ø1,1X11 REBAIXADA BL; B21 3 310 - BROCA Ø1,1X13 REBAIXADA BL; B21 3 312 - BROCA Ø1,1X15 REBAIXADA BL; B21 3 314 - BROCA Ø1,1X17 REBAIXADA BL; B21 3 316 - BROCA Ø1,1X20 REBAIXADA BL; B21 3 318 - BROCA Ø1,1X22 REBAIXADA BL; B21 3 320 - BROCA Ø1,1 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 322 - BROCA Ø1,1X5 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 324 - BROCA Ø1,1X7 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 326 - BROCA Ø1,1X9 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 328 - BROCA Ø1,1X11 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 330 - BROCA Ø1,1X13 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 332 - BROCA Ø1,1X15 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 334 - BROCA Ø1,1X17 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 336 - BROCA Ø1,1X20 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 338 - BROCA Ø1,1X22 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 340 - BROCA Ø1,2 CURTA BL; B21 3 342 - BROCA Ø1,2X5 CURTA BL; B21 3 344 - BROCA Ø1,2X7 CURTA BL; B21 3 346 - BROCA Ø1,2X9 CURTA BL; B21 3 348 - BROCA Ø1,2X11 CURTA BL; B21 3 350 - BROCA Ø1,2X13 CURTA BL; B21 3 352 - BROCA Ø1,2X15 CURTA BL; B21 3 354 - BROCA Ø1,2X17 CURTA BL; B21 3 356 - BROCA Ø1,2X20 CURTA BL; B21 3 358 - BROCA Ø1,2X22 CURTA BL; B21 3 360 - BROCA Ø1,2 BL; B21 3 362 - BROCA Ø1,2X5 BL; B21 3 364 - BROCA Ø1,2X7 BL; B21 3 366 - BROCA Ø1,2X9 BL; B21 3 368 - BROCA Ø1,2X11 BL; B21 3 370 - BROCA Ø1,2X13 BL; B21 3 372 - BROCA Ø1,2X15 BL; B21 3 374 - BROCA Ø1,2X17 BL; B21 3 376 - BROCA Ø1,2X20 BL; B21 3 378 - BROCA Ø1,2X22 BL; B21 3 380 - BROCA Ø1,2 LONGA BL; B21 3 382 - BROCA Ø1,2X5 LONGA BL; B21 3 384 - BROCA Ø1,2X7 LONGA BL; B21 3 386 - BROCA Ø1,2X9 LONGA BL; B21 3 388 - BROCA Ø1,2X11 LONGA BL; B21 3 390 - BROCA Ø1,2X13 LONGA BL; B21 3 392 - BROCA Ø1,2X15 LONGA BL; B21 3 394 - BROCA Ø1,2X17 LONGA BL; B21 3 396 - BROCA Ø1,2X20 LONGA BL; B21 3 398 - BROCA Ø1,2X22 LONGA BL; B21 3 400 - BROCA Ø1,2 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 402 - BROCA Ø1,2X5 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 404 - BROCA Ø1,2X7 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 406 - BROCA Ø1,2X9 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 408 - BROCA Ø1,2X11 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 410 - BROCA Ø1,2X13 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 412 - BROCA Ø1,2X15 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 414 - BROCA Ø1,2X17 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 416 - BROCA Ø1,2X20 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 418 - BROCA Ø1,2X22 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 420 - BROCA Ø1,2 REBAIXADA BL; B21 3 422 - BROCA Ø1,2X5 REBAIXADA BL; B21 3 424 - BROCA Ø1,2X7 REBAIXADA BL; B21 3 426 - BROCA Ø1,2X9 REBAIXADA BL; B21 3 428 - BROCA Ø1,2X11 REBAIXADA BL; B21 3 430 - BROCA Ø1,2X13 REBAIXADA BL; B21 3 432 - BROCA Ø1,2X15 REBAIXADA BL; B21 3 434 - BROCA Ø1,2X17 REBAIXADA BL; B21 3 436 - BROCA Ø1,2X20 REBAIXADA BL; B21 3 438 - BROCA Ø1,2X22 REBAIXADA BL; B21 3 440 - BROCA Ø1,2 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 442 - BROCA Ø1,2X5 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 444 - BROCA Ø1,2X7 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 446 - BROCA Ø1,2X9 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 448 - BROCA Ø1,2X11 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 450 - BROCA Ø1,2X13 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 452 - BROCA Ø1,2X15 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 454 - BROCA Ø1,2X17 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 456 - BROCA Ø1,2X20 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 458 - BROCA Ø1,2X22 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 460 - BROCA Ø1,5 CURTA BL; B21 3 462 - BROCA Ø1,5X5 CURTA BL; B21 3 464 - BROCA Ø1,5X7 CURTA BL; B21 3 466 - BROCA Ø1,5X9 CURTA BL; B21 3 468 - BROCA Ø1,5X11 CURTA BL; B21 3 470 - BROCA Ø1,5X13 CURTA BL; B21 3 472 - BROCA Ø1,5X15 CURTA BL; B21 3 474 - BROCA Ø1,5X17 CURTA BL; B21 3 476 - BROCA Ø1,5X20 CURTA BL; B21 3 478 - BROCA Ø1,5X22 CURTA BL; B21 3 480 - BROCA Ø1,5 BL; B21 3 482 - BROCA Ø1,5X5 BL; B21 3 484 - BROCA Ø1,5X7 BL;

B21 3 486 - BROCA Ø1,5X9 BL; B21 3 488 - BROCA Ø1,5X11 BL; B21 3 490 - BROCA Ø1,5X13 BL; B21 3 492 - BROCA Ø1,5X15 BL; B21 3 494 - BROCA Ø1,5X17 BL; B21 3 496 - BROCA Ø1,5X20 BL; B21 3 498 - BROCA Ø1,5X22 BL; B21 3 500 - BROCA Ø1,5 LONGA BL; B21 3 502 - BROCA Ø1,5X5 LONGA BL; B21 3 504 - BROCA Ø1,5X7 LONGA BL; B21 3 506 - BROCA Ø1,5X9 LONGA BL; B21 3 508 - BROCA Ø1,5X11 LONGA BL; B21 3 510 - BROCA Ø1,5X13 LONGA BL; B21 3 512 - BROCA Ø1,5X15 LONGA BL; B21 3 514 - BROCA Ø1,5X17 LONGA BL; B21 3 516 - BROCA Ø1,5X20 LONGA BL; B21 3 518 - BROCA Ø1,5X22 LONGA BL; B21 3 520 - BROCA Ø1,5 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 522 - BROCA Ø1,5X5 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 524 - BROCA Ø1,5X7 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 526 - BROCA Ø1,5X9 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 528 - BROCA Ø1,5X11 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 530 - BROCA Ø1,5X13 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 532 - BROCA Ø1,5X15 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 534 - BROCA Ø1,5X17 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 536 - BROCA Ø1,5X20 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 538 - BROCA Ø1,5X22 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 540 - BROCA Ø1,5 REBAIXADA BL; B21 3 542 - BROCA Ø1,5X5 REBAIXADA BL; B21 3 544 - BROCA Ø1,5X7 REBAIXADA BL; B21 3 546 - BROCA Ø1,5X9 REBAIXADA BL; B21 3 548 - BROCA Ø1,5X11 REBAIXADA BL; B21 3 550 - BROCA Ø1,5X13 REBAIXADA BL; B21 3 552 - BROCA Ø1,5X15 REBAIXADA BL; B21 3 554 - BROCA Ø1,5X17 REBAIXADA BL; B21 3 556 - BROCA Ø1,5X20 REBAIXADA BL; B21 3 558 - BROCA Ø1,5X22 REBAIXADA BL; B21 3 560 - BROCA Ø1,5 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 562 - BROCA Ø1,5X5 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 564 - BROCA Ø1,5X7 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 566 - BROCA Ø1,5X9 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 568 - BROCA Ø1,5X11 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 570 - BROCA Ø1,5X13 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 572 - BROCA Ø1,5X15 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 574 - BROCA Ø1,5X17 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 576 - BROCA Ø1,5X20 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 578 - BROCA Ø1,5X22 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 580 - BROCA Ø1,6 CURTA BL; B21 3 582 - BROCA Ø1,6X5 CURTA BL; B21 3 584 - BROCA Ø1,6X7 CURTA BL; B21 3 586 - BROCA Ø1,6X9 CURTA BL; B21 3 588 - BROCA Ø1,6X11 CURTA BL; B21 3 590 - BROCA Ø1,6X13 CURTA BL; B21 3 592 - BROCA Ø1,6X15 CURTA BL; B21 3 594 - BROCA Ø1,6X17 CURTA BL; B21 3 596 - BROCA Ø1,6X20 CURTA BL; B21 3 598 - BROCA Ø1,6X22 CURTA BL; B21 3 600 - BROCA Ø1,6 BL; B21 3 602 - BROCA Ø1,6X5 BL; B21 3 604 - BROCA Ø1,6X7 BL; B21 3 606 - BROCA Ø1,6X9 BL; B21 3 608 - BROCA Ø1,6X11 BL; B21 3 610 - BROCA Ø1,6X13 BL; B21 3 612 - BROCA Ø1,6X15 BL; B21 3 614 - BROCA Ø1,6X17 BL; B21 3 616 - BROCA Ø1,6X20 BL; B21 3 618 - BROCA Ø1,6X22 BL; B21 3 620 - BROCA Ø1,6 LONGA BL; B21 3 622 - BROCA Ø1,6X5 LONGA BL; B21 3 624 - BROCA Ø1,6X7 LONGA BL; B21 3 626 - BROCA Ø1,6X9 LONGA BL; B21 3 628 - BROCA Ø1,6X11 LONGA BL; B21 3 630 - BROCA Ø1,6X13 LONGA BL; B21 3 632 - BROCA Ø1,6X15 LONGA BL; B21 3 634 - BROCA Ø1,6X17 LONGA BL; B21 3 636 - BROCA Ø1,6X20 LONGA BL; B21 3 638 - BROCA Ø1,6X22 LONGA BL; B21 3 640 - BROCA Ø1,6 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 642 - BROCA Ø1,6X5 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 644 - BROCA Ø1,6X7 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 646 - BROCA Ø1,6X9 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 648 - BROCA Ø1,6X11 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 650 - BROCA Ø1,6X13 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 652 - BROCA Ø1,6X15 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 654 - BROCA Ø1,6X17 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 656 - BROCA Ø1,6X20 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 658 - BROCA Ø1,6X22 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 660 - BROCA Ø1,6 REBAIXADA BL; B21 3 662 - BROCA Ø1,6X5 REBAIXADA BL; B21 3 664 - BROCA Ø1,6X7 REBAIXADA BL; B21 3 666 - BROCA Ø1,6X9 REBAIXADA BL; B21 3 668 - BROCA Ø1,6X11 REBAIXADA BL; B21 3 670 - BROCA Ø1,6X13 REBAIXADA BL; B21 3 672 - BROCA Ø1,6X15 REBAIXADA BL; B21 3 674 - BROCA Ø1,6X17 REBAIXADA BL; B21 3 676 - BROCA Ø1,6X20 REBAIXADA BL; B21 3 678 - BROCA Ø1,6X22 REBAIXADA BL; B21 3 680 - BROCA Ø1,6 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 682 - BROCA Ø1,6X5 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 684 - BROCA Ø1,6X7 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 686 - BROCA Ø1,6X9 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 688 - BROCA Ø1,6X11 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 690 - BROCA Ø1,6X13 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 692 - BROCA Ø1,6X15 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 694 - BROCA Ø1,6X17 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 696 - BROCA Ø1,6X20 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 698 - BROCA Ø1,6X22 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 700 - BROCA Ø1,8 CURTA BL; B21 3 702 - BROCA Ø1,8X5 CURTA BL; B21 3 704 - BROCA Ø1,8X7 CURTA BL; B21 3 706 - BROCA Ø1,8X9 CURTA BL; B21 3 708 - BROCA Ø1,8X11 CURTA BL; B21 3 710 - BROCA Ø1,8X13 CURTA BL; B21 3 712 - BROCA Ø1,8X15 CURTA BL; B21 3 714 - BROCA Ø1,8X17 CURTA BL; B21 3 716 - BROCA Ø1,8X20 CURTA BL; B21 3 718 - BROCA Ø1,8X22 CURTA BL; B21 3 720 - BROCA Ø1,8 BL; B21 3 722 - BROCA Ø1,8X5 BL; B21 3 724 - BROCA Ø1,8X7 BL; B21 3 726 - BROCA Ø1,8X9 BL; B21 3 728 - BROCA Ø1,8X11 BL; B21 3 730 - BROCA Ø1,8X13 BL; B21 3 732 - BROCA Ø1,8X15 BL; B21 3 734 - BROCA Ø1,8X17 BL; B21 3 736 - BROCA Ø1,8X20 BL; B21 3 738 - BROCA Ø1,8X22 BL; B21 3 740 - BROCA Ø1,8 LONGA BL; B21 3 742 - BROCA Ø1,8X5 LONGA BL; B21 3 744 - BROCA Ø1,8X7 LONGA BL; B21 3 746 - BROCA Ø1,8X9 LONGA BL; B21 3 748 - BROCA Ø1,8X11 LONGA BL; B21 3 750 - BROCA Ø1,8X13 LONGA BL; B21 3 752 - BROCA Ø1,8X15 LONGA BL; B21 3 754 - BROCA Ø1,8X17 LONGA BL; B21 3 756 - BROCA Ø1,8X20 LONGA BL; B21 3 758 - BROCA Ø1,8X22 LONGA BL; B21 3 760 - BROCA Ø1,8 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 762 - BROCA Ø1,8X5 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 764 - BROCA Ø1,8X7 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 766 - BROCA Ø1,8X9 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 768 - BROCA Ø1,8X11 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 770 - BROCA Ø1,8X13 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 772 - BROCA Ø1,8X15 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 774 - BROCA Ø1,8X17 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 776 - BROCA Ø1,8X20 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 778 - BROCA Ø1,8X22 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 780 - BROCA Ø1,8 REBAIXADA BL; B21 3 782 - BROCA Ø1,8X5 REBAIXADA BL; B21 3 784 - BROCA Ø1,8X7 REBAIXADA BL; B21 3 786 - BROCA Ø1,8X9 REBAIXADA BL; B21 3 788 - BROCA Ø1,8X11 REBAIXADA BL; B21 3 790 - BROCA Ø1,8X13 REBAIXADA BL; B21 3 792 - BROCA Ø1,8X15 REBAIXADA BL; B21 3 794 - BROCA Ø1,8X17 REBAIXADA BL; B21 3 796 - BROCA Ø1,8X20 REBAIXADA BL; B21 3 798 - BROCA Ø1,8X22 REBAIXADA BL; B21 3 800 - BROCA Ø1,8 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 802 - BROCA Ø1,8X5 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 804 - BROCA Ø1,8X7 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 806 - BROCA Ø1,8X9 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 808 - BROCA Ø1,8X11 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 810 - BROCA Ø1,8X13 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 812 - BROCA Ø1,8X15 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 814 - BROCA Ø1,8X17 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 816 - BROCA Ø1,8X20 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 818 - BROCA Ø1,8X22 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 820 - BROCA Ø2,0 CURTA BL; B21 3 822 - BROCA Ø2,0X5 CURTA BL; B21 3 824 - BROCA Ø2,0X7 CURTA BL; B21 3 826 - BROCA Ø2,0X9 CURTA BL; B21 3 828 - BROCA Ø2,0X11 CURTA BL; B21 3 830 - BROCA Ø2,0X13 CURTA BL; B21 3 832 - BROCA Ø2,0X15 CURTA BL; B21 3 834 - BROCA Ø2,0X17 CURTA BL; B21 3 836 - BROCA Ø2,0X20 CURTA BL; B21 3 838 - BROCA Ø2,0X22 CURTA BL; B21 3 840 - BROCA Ø2,0 BL; B21 3 842 - BROCA Ø2,0X5 BL; B21 3 844 - BROCA Ø2,0X7 BL; B21 3 846 - BROCA Ø2,0X9 BL; B21 3 848 - BROCA Ø2,0X11 BL; B21 3 850 - BROCA Ø2,0X13 BL; B21 3 852 - BROCA Ø2,0X15 BL; B21 3 854 - BROCA Ø2,0X17 BL; B21 3 856 - BROCA Ø2,0X20 BL; B21 3 858 - BROCA Ø2,0X22 BL; B21 3 860 - BROCA Ø2,0 LONGA BL; B21 3 862 - BROCA Ø2,0X5 LONGA BL; B21 3 864 - BROCA Ø2,0X7 LONGA BL; B21 3 866 - BROCA Ø2,0X9 LONGA BL; B21 3 868 - BROCA Ø2,0X11 LONGA BL; B21 3 870 - BROCA Ø2,0X13 LONGA BL; B21 3 872 - BROCA Ø2,0X15 LONGA BL; B21 3 874 - BROCA Ø2,0X17 LONGA

BL; B21 3 876 - BROCA Ø2,0X20 LONGA BL; B21 3 878 - BROCA Ø2,0X22 LONGA BL; B21 3 880 - BROCA Ø2,0 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 882 - BROCA Ø2,0X5 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 884 - BROCA Ø2,0X7 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 886 - BROCA Ø2,0X9 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 888 - BROCA Ø2,0X11 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 890 - BROCA Ø2,0X13 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 892 - BROCA Ø2,0X15 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 894 - BROCA Ø2,0X17 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 896 - BROCA Ø2,0X20 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 898 - BROCA Ø2,0X22 REBAIXADA CURTA BL; B21 3 900 - BROCA Ø2,0 REBAIXADA BL; B21 3 902 - BROCA Ø2,0X5 REBAIXADA BL; B21 3 904 - BROCA Ø2,0X7 REBAIXADA BL; B21 3 906 - BROCA Ø2,0X9 REBAIXADA BL; B21 3 908 - BROCA Ø2,0X11 REBAIXADA BL; B21 3 910 - BROCA Ø2,0X13 REBAIXADA BL; B21 3 912 - BROCA Ø2,0X15 REBAIXADA BL; B21 3 914 - BROCA Ø2,0X17 REBAIXADA BL; B21 3 916 - BROCA Ø2,0X20 REBAIXADA BL; B21 3 918 - BROCA Ø2,0X22 REBAIXADA BL; B21 3 920 - BROCA Ø2,0 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 922 - BROCA Ø2,0X5 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 924 - BROCA Ø2,0X7 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 926 - BROCA Ø2,0X9 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 928 - BROCA Ø2,0X11 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 930 - BROCA Ø2,0X13 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 932 - BROCA Ø2,0X15 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 934 - BROCA Ø2,0X17 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 936 - BROCA Ø2,0X20 REBAIXADA LONGA BL; B21 3 938 - BROCA Ø2,0X22 REBAIXADA LONGA BL; B21 4 100 - BROCA Ø2,5 TR; B21 4 101 - BROCA Ø2,5X15/60 TR; B21 4 102 - BROCA Ø2,5X15/80 TR; B21 4 103 - BROCA Ø2,5X15/100 TR; B21 4 104 - BROCA Ø2,5X15/120 TR; B21 4 105 - BROCA Ø2,5X15/150 TR; B21 4 106 - BROCA Ø2,5X20/60 TR; B21 4 107 - BROCA Ø2,5X20/80 TR; B21 4 108 - BROCA Ø2,5X20/100 TR; B21 4 109 - BROCA Ø2,5X20/120 TR; B21 4 110 - BROCA Ø2,5X20/150 TR; B21 4 111 - BROCA Ø2,5X25/80 TR; B21 4 112 - BROCA Ø2,5X25/100 TR; B21 4 113 - BROCA Ø2,5X25/120 TR; B21 4 114 - BROCA Ø2,5X25/150 TR; B21 4 115 - BROCA Ø2,5X25/180 TR; B21 4 116 - BROCA Ø2,5X25/200 TR; B21 4 117 - BROCA Ø2,5X30/80 TR; B21 4 118 - BROCA Ø2,5X30/100 TR; B21 4 119 - BROCA Ø2,5X30/120 TR; B21 4 120 - BROCA Ø2,5X30/150 TR; B21 4 121 - BROCA Ø2,5X30/180 TR; B21 4 122 - BROCA Ø2,5X30/200 TR; B21 4 123 - BROCA Ø2,5X40/100 TR; B21 4 124 - BROCA Ø2,5X40/120 TR; B21 4 125 - BROCA Ø2,5X40/150 TR; B21 4 126 - BROCA Ø2,5X40/180 TR; B21 4 127 - BROCA Ø2,5X40/200 TR; B21 4 128 - BROCA Ø2,5X40/220 TR; B21 4 129 - BROCA Ø2,5X40/250 TR; B21 4 130 - BROCA Ø2,5X40/300 TR; B21 4 131 - BROCA Ø2,5X50/100 TR; B21 4 132 - BROCA Ø2,5X50/120 TR; B21 4 133 - BROCA Ø2,5X50/150 TR; B21 4 134 - BROCA Ø2,5X50/180 TR; B21 4 135 - BROCA Ø2,5X50/200 TR; B21 4 136 - BROCA Ø2,5X50/220 TR; B21 4 137 - BROCA Ø2,5X50/250 TR; B21 4 138 - BROCA Ø2,5X50/300 TR; B21 4 139 - BROCA Ø2,5 REBAIXADA TR; B21 4 140 - BROCA Ø2,5X15/60 REBAIXADA TR; B21 4 141 - BROCA Ø2,5X15/80 REBAIXADA TR; B21 4 142 - BROCA Ø2,5X15/100 REBAIXADA TR; B21 4 143 - BROCA Ø2,5X15/120 REBAIXADA TR; B21 4 144 - BROCA Ø2,5X15/150 REBAIXADA TR; B21 4 145 - BROCA Ø2,5X20/60 REBAIXADA TR; B21 4 146 - BROCA Ø2,5X20/80 REBAIXADA TR; B21 4 147 - BROCA Ø2,5X20/100 REBAIXADA TR; B21 4 148 - BROCA Ø2,5X20/120 REBAIXADA TR; B21 4 149 - BROCA Ø2,5X20/150 REBAIXADA TR; B21 4 150 - BROCA Ø2,5X25/80 REBAIXADA TR; B21 4 151 - BROCA Ø2,5X25/100 REBAIXADA TR; B21 4 152 - BROCA Ø2,5X25/120 REBAIXADA TR; B21 4 153 - BROCA Ø2,5X25/150 REBAIXADA TR; B21 4 154 - BROCA Ø2,5X25/180 REBAIXADA TR; B21 4 155 - BROCA Ø2,5X25/200 REBAIXADA TR; B21 4 156 - BROCA Ø2,5X30/80 REBAIXADA TR; B21 4 157 - BROCA Ø2,5X30/100 REBAIXADA TR; B21 4 158 - BROCA Ø2,5X30/120 REBAIXADA TR; B21 4 159 - BROCA Ø2,5X30/150 REBAIXADA TR; B21 4 160 - BROCA Ø2,5X30/180 REBAIXADA TR; B21 4 161 - BROCA Ø2,5X30/200 REBAIXADA TR; B21 4 162 - BROCA Ø2,5X40/100 REBAIXADA TR; B21 4 163 - BROCA Ø2,5X40/120 REBAIXADA TR; B21 4 164 - BROCA Ø2,5X40/150 REBAIXADA TR; B21 4 165 - BROCA Ø2,5X40/180 REBAIXADA TR; B21 4 166 - BROCA Ø2,5X40/200 REBAIXADA TR; B21 4 167 - BROCA Ø2,5X40/220 REBAIXADA TR; B21 4 168 - BROCA Ø2,5X40/250 REBAIXADA TR; B21 4 169 - BROCA Ø2,5X40/300 REBAIXADA TR; B21 4 170 - BROCA Ø2,5X50/100 REBAIXADA TR; B21 4 171 - BROCA Ø2,5X50/120 REBAIXADA TR; B21 4 172 - BROCA Ø2,5X50/150 REBAIXADA TR; B21 4 173 - BROCA Ø2,5X50/180 REBAIXADA TR; B21 4 174 - BROCA Ø2,5X50/200 REBAIXADA TR; B21 4 175 - BROCA Ø2,5X50/220 REBAIXADA TR; B21 4 176 - BROCA Ø2,5X50/250 REBAIXADA TR; B21 4 177 - BROCA Ø2,5X50/300 REBAIXADA TR; B21 4 178 - BROCA Ø3,0 TR; B21 4 179 - BROCA Ø3,0X15/60 TR; B21 4 180 - BROCA Ø3,0X15/80 TR; B21 4 181 - BROCA Ø3,0X15/100 TR; B21 4 182 - BROCA Ø3,0X15/120 TR; B21 4 183 - BROCA Ø3,0X15/150 TR; B21 4 184 - BROCA Ø3,0X20/60 TR; B21 4 185 - BROCA Ø3,0X20/80 TR; B21 4 186 - BROCA Ø3,0X20/100 TR; B21 4 187 - BROCA Ø3,0X20/120 TR; B21 4 188 - BROCA Ø3,0X20/150 TR; B21 4 189 - BROCA Ø3,0X25/80 TR; B21 4 190 - BROCA Ø3,0X25/100 TR; B21 4 191 - BROCA Ø3,0X25/120 TR; B21 4 192 - BROCA Ø3,0X25/150 TR; B21 4 193 - BROCA Ø3,0X25/180 TR; B21 4 194 - BROCA Ø3,0X25/200 TR; B21 4 195 - BROCA Ø3,0X30/80 TR; B21 4 196 - BROCA Ø3,0X30/100 TR; B21 4 197 - BROCA Ø3,0X30/120 TR; B21 4 198 - BROCA Ø3,0X30/150 TR; B21 4 199 - BROCA Ø3,0X30/180 TR; B21 4 200 - BROCA Ø3,0X30/200 TR; B21 4 201 - BROCA Ø3,0X30/220 TR; B21 4 202 - BROCA Ø3,0X30/250 TR; B21 4 203 - BROCA Ø3,0X40/100 TR; B21 4 204 - BROCA Ø3,0X40/120 TR; B21 4 205 - BROCA Ø3,0X40/150 TR; B21 4 206 - BROCA Ø3,0X40/180 TR; B21 4 207 - BROCA Ø3,0X40/200 TR; B21 4 208 - BROCA Ø3,0X40/220 TR; B21 4 209 - BROCA Ø3,0X40/250 TR; B21 4 210 - BROCA Ø3,0X40/300 TR; B21 4 211 - BROCA Ø3,0X40/350 TR; B21 4 212 - BROCA Ø3,0X50/100 TR; B21 4 213 - BROCA Ø3,0X50/120 TR; B21 4 214 - BROCA Ø3,0X50/150 TR; B21 4 215 - BROCA Ø3,0X50/180 TR; B21 4 216 - BROCA Ø3,0X50/200 TR; B21 4 217 - BROCA Ø3,0X50/220 TR; B21 4 218 - BROCA Ø3,0X50/250 TR; B21 4 219 - BROCA Ø3,0X50/300 TR; B21 4 220 - BROCA Ø3,0X50/350 TR; B21 4 221 - BROCA Ø3,0X70/200 TR; B21 4 222 - BROCA Ø3,0X70/220 TR; B21 4 223 - BROCA Ø3,0X70/250 TR; B21 4 224 - BROCA Ø3,0X70/300 TR; B21 4 225 - BROCA Ø3,0X70/350 TR; B21 4 226 - BROCA Ø3,0 REBAIXADA TR; B21 4 227 - BROCA Ø3,0X15/60 REBAIXADA TR; B21 4 228 - BROCA Ø3,0X15/80 REBAIXADA TR; B21 4 229 - BROCA Ø3,0X15/100 REBAIXADA TR; B21 4 230 - BROCA Ø3,0X15/120 REBAIXADA TR; B21 4 231 - BROCA Ø3,0X15/150 REBAIXADA TR; B21 4 232 - BROCA Ø3,0X20/60 REBAIXADA TR; B21 4 233 - BROCA Ø3,0X20/80 REBAIXADA TR; B21 4 234 - BROCA Ø3,0X20/100 REBAIXADA TR; B21 4 235 - BROCA Ø3,0X20/120 REBAIXADA TR; B21 4 236 - BROCA Ø3,0X20/150 REBAIXADA TR; B21 4 237 - BROCA Ø3,0X25/80 REBAIXADA TR; B21 4 238 - BROCA Ø3,0X25/100 REBAIXADA TR; B21 4 239 - BROCA Ø3,0X25/120 REBAIXADA TR; B21 4 240 - BROCA Ø3,0X25/150 REBAIXADA TR; B21 4 241 - BROCA Ø3,0X25/180 REBAIXADA TR; B21 4 242 - BROCA Ø3,0X25/200 REBAIXADA TR; B21 4 243 - BROCA Ø3,0X30/80 REBAIXADA TR; B21 4 244 - BROCA Ø3,0X30/100 REBAIXADA TR; B21 4 245 - BROCA Ø3,0X30/120 REBAIXADA TR; B21 4 246 - BROCA Ø3,0X30/150 REBAIXADA TR; B21 4 247 - BROCA Ø3,0X30/180 REBAIXADA TR; B21 4 248 - BROCA Ø3,0X30/200 REBAIXADA TR; B21 4 249 - BROCA Ø3,0X30/220 REBAIXADA TR; B21 4 250 - BROCA Ø3,0X30/250 REBAIXADA TR; B21 4 251 - BROCA Ø3,0X40/100 REBAIXADA TR; B21 4 252 - BROCA Ø3,0X40/120 REBAIXADA TR; B21 4 253 - BROCA Ø3,0X40/150 REBAIXADA TR; B21 4 254 - BROCA Ø3,0X40/180 REBAIXADA TR; B21 4 255 - BROCA Ø3,0X40/200 REBAIXADA TR; B21 4 256 - BROCA Ø3,0X40/220 REBAIXADA TR; B21 4 257 - BROCA Ø3,0X40/250 REBAIXADA TR; B21 4 258 - BROCA Ø3,0X40/300 REBAIXADA TR; B21 4 259 -

BROCA Ø3,0X40/350 REBAIXADA TR; B21 4 260 - BROCA Ø3,0X50/100 REBAIXADA TR; B21 4 261 - BROCA Ø3,0X50/120 REBAIXADA TR; B21 4 262 - BROCA Ø3,0X50/150 REBAIXADA TR; B21 4 263 - BROCA Ø3,0X50/180 REBAIXADA TR; B21 4 264 - BROCA Ø3,0X50/200 REBAIXADA TR; B21 4 265 - BROCA Ø3,0X50/220 REBAIXADA TR; B21 4 266 - BROCA Ø3,0X50/250 REBAIXADA TR; B21 4 267 - BROCA Ø3,0X50/300 REBAIXADA TR; B21 4 268 - BROCA Ø3,0X50/350 REBAIXADA TR; B21 4 269 - BROCA Ø3,0X70/200 REBAIXADA TR; B21 4 270 - BROCA Ø3,0X70/220 REBAIXADA TR; B21 4 271 - BROCA Ø3,0X70/250 REBAIXADA TR; B21 4 272 - BROCA Ø3,0X70/300 REBAIXADA TR; B21 4 273 - BROCA Ø3,0X70/350 REBAIXADA TR; B21 4 274 - BROCA Ø3,2 TR; B21 4 275 - BROCA Ø3,2X15/60 TR; B21 4 276 - BROCA Ø3,2X15/80 TR; B21 4 277 - BROCA Ø3,2X15/100 TR; B21 4 278 - BROCA Ø3,2X15/120 TR; B21 4 279 - BROCA Ø3,2X15/150 TR; B21 4 280 - BROCA Ø3,2X20/60 TR; B21 4 281 - BROCA Ø3,2X20/80 TR; B21 4 282 - BROCA Ø3,2X20/100 TR; B21 4 283 - BROCA Ø3,2X20/120 TR; B21 4 284 - BROCA Ø3,2X20/150 TR; B21 4 285 - BROCA Ø3,2X25/80 TR; B21 4 286 - BROCA Ø3,2X25/100 TR; B21 4 287 - BROCA Ø3,2X25/120 TR; B21 4 288 - BROCA Ø3,2X25/150 TR; B21 4 289 - BROCA Ø3,2X25/180 TR; B21 4 290 - BROCA Ø3,2X25/200 TR; B21 4 291 - BROCA Ø3,2X30/80 TR; B21 4 292 - BROCA Ø3,2X30/100 TR; B21 4 293 - BROCA Ø3,2X30/120 TR; B21 4 294 - BROCA Ø3,2X30/150 TR; B21 4 295 - BROCA Ø3,2X30/180 TR; B21 4 296 - BROCA Ø3,2X30/200 TR; B21 4 297 - BROCA Ø3,2X30/220 TR; B21 4 298 - BROCA Ø3,2X30/250 TR; B21 4 299 - BROCA Ø3,2X40/100 TR; B21 4 300 - BROCA Ø3,2X40/120 TR; B21 4 301 - BROCA Ø3,2X40/150 TR; B21 4 302 - BROCA Ø3,2X40/180 TR; B21 4 303 - BROCA Ø3,2X40/200 TR; B21 4 304 - BROCA Ø3,2X40/220 TR; B21 4 305 - BROCA Ø3,2X40/250 TR; B21 4 306 - BROCA Ø3,2X40/300 TR; B21 4 307 - BROCA Ø3,2X40/350 TR; B21 4 308 - BROCA Ø3,2X50/100 TR; B21 4 309 - BROCA Ø3,2X50/120 TR; B21 4 310 - BROCA Ø3,2X50/150 TR; B21 4 311 - BROCA Ø3,2X50/180 TR; B21 4 312 - BROCA Ø3,2X50/200 TR; B21 4 313 - BROCA Ø3,2X50/220 TR; B21 4 314 - BROCA Ø3,2X50/250 TR; B21 4 315 - BROCA Ø3,2X50/300 TR; B21 4 316 - BROCA Ø3,2X50/350 TR; B21 4 317 - BROCA Ø3,2X70/200 TR; B21 4 318 - BROCA Ø3,2X70/220 TR; B21 4 319 - BROCA Ø3,2X70/250 TR; B21 4 320 - BROCA Ø3,2X70/300 TR; B21 4 321 - BROCA Ø3,2X70/350 TR; B21 4 322 - BROCA Ø3,2 REBAIXADA TR; B21 4 323 - BROCA Ø3,2X15/60 REBAIXADA TR; B21 4 324 - BROCA Ø3,2X15/80 REBAIXADA TR; B21 4 325 - BROCA Ø3,2X15/100 REBAIXADA TR; B21 4 326 - BROCA Ø3,2X15/120 REBAIXADA TR; B21 4 327 - BROCA Ø3,2X15/150 REBAIXADA TR; B21 4 328 - BROCA Ø3,2X20/60 REBAIXADA TR; B21 4 329 - BROCA Ø3,2X20/80 REBAIXADA TR; B21 4 330 - BROCA Ø3,2X20/100 REBAIXADA TR; B21 4 331 - BROCA Ø3,2X20/120 REBAIXADA TR; B21 4 332 - BROCA Ø3,2X20/150 REBAIXADA TR; B21 4 333 - BROCA Ø3,2X25/80 REBAIXADA TR; B21 4 334 - BROCA Ø3,2X25/100 REBAIXADA TR; B21 4 335 - BROCA Ø3,2X25/120 REBAIXADA TR; B21 4 336 - BROCA Ø3,2X25/150 REBAIXADA TR; B21 4 337 - BROCA Ø3,2X25/180 REBAIXADA TR; B21 4 338 - BROCA Ø3,2X25/200 REBAIXADA TR; B21 4 339 - BROCA Ø3,2X30/80 REBAIXADA TR; B21 4 340 - BROCA Ø3,2X30/100 REBAIXADA TR; B21 4 341 - BROCA Ø3,2X30/120 REBAIXADA TR; B21 4 342 - BROCA Ø3,2X30/150 REBAIXADA TR; B21 4 343 - BROCA Ø3,2X30/180 REBAIXADA TR; B21 4 344 - BROCA Ø3,2X30/200 REBAIXADA TR; B21 4 345 - BROCA Ø3,2X30/220 REBAIXADA TR; B21 4 346 - BROCA Ø3,2X30/250 REBAIXADA TR; B21 4 347 - BROCA Ø3,2X40/100 REBAIXADA TR; B21 4 348 - BROCA Ø3,2X40/120 REBAIXADA TR; B21 4 349 - BROCA Ø3,2X40/150 REBAIXADA TR; B21 4 350 - BROCA Ø3,2X40/180 REBAIXADA TR; B21 4 351 - BROCA Ø3,2X40/200 REBAIXADA TR; B21 4 352 - BROCA Ø3,2X40/220 REBAIXADA TR; B21 4 353 - BROCA Ø3,2X40/250 REBAIXADA TR; B21 4 354 - BROCA Ø3,2X40/300 REBAIXADA TR; B21 4 355 - BROCA Ø3,2X40/350 REBAIXADA TR; B21 4 356 - BROCA Ø3,2X50/100 REBAIXADA TR; B21 4 357 - BROCA Ø3,2X50/120 REBAIXADA TR; B21 4 358 - BROCA Ø3,2X50/150 REBAIXADA TR; B21 4 359 - BROCA Ø3,2X50/180 REBAIXADA TR; B21 4 360 - BROCA Ø3,2X50/200 REBAIXADA TR; B21 4 361 - BROCA Ø3,2X50/220 REBAIXADA TR; B21 4 362 - BROCA Ø3,2X50/250 REBAIXADA TR; B21 4 363 - BROCA Ø3,2X50/300 REBAIXADA TR; B21 4 364 - BROCA Ø3,2X50/350 REBAIXADA TR; B21 4 365 - BROCA Ø3,2X70/200 REBAIXADA TR; B21 4 366 - BROCA Ø3,2X70/220 REBAIXADA TR; B21 4 367 - BROCA Ø3,2X70/250 REBAIXADA TR; B21 4 368 - BROCA Ø3,2X70/300 REBAIXADA TR; B21 4 369 - BROCA Ø3,2X70/350 REBAIXADA TR; B21 4 370 - BROCA Ø3,5 TR; B21 4 371 - BROCA Ø3,5X15/80 TR; B21 4 372 - BROCA Ø3,5X15/100 TR; B21 4 373 - BROCA Ø3,5X15/120 TR; B21 4 374 - BROCA Ø3,5X15/150 TR; B21 4 375 - BROCA Ø3,5X20/80 TR; B21 4 376 - BROCA Ø3,5X20/100 TR; B21 4 377 - BROCA Ø3,5X20/120 TR; B21 4 378 - BROCA Ø3,5X20/150 TR; B21 4 379 - BROCA Ø3,5X25/100 TR; B21 4 380 - BROCA Ø3,5X25/120 TR; B21 4 381 - BROCA Ø3,5X25/150 TR; B21 4 382 - BROCA Ø3,5X25/180 TR; B21 4 383 - BROCA Ø3,5X25/200 TR; B21 4 384 - BROCA Ø3,5X30/100 TR; B21 4 385 - BROCA Ø3,5X30/120 TR; B21 4 386 - BROCA Ø3,5X30/150 TR; B21 4 387 - BROCA Ø3,5X30/180 TR; B21 4 388 - BROCA Ø3,5X30/200 TR; B21 4 389 - BROCA Ø3,5X30/220 TR; B21 4 390 - BROCA Ø3,5X30/250 TR; B21 4 391 - BROCA Ø3,5X40/100 TR; B21 4 392 - BROCA Ø3,5X40/120 TR; B21 4 393 - BROCA Ø3,5X40/150 TR; B21 4 394 - BROCA Ø3,5X40/180 TR; B21 4 395 - BROCA Ø3,5X40/200 TR; B21 4 396 - BROCA Ø3,5X40/220 TR; B21 4 397 - BROCA Ø3,5X40/250 TR; B21 4 398 - BROCA Ø3,5X40/300 TR; B21 4 399 - BROCA Ø3,5X40/350 TR; B21 4 400 - BROCA Ø3,5X40/400 TR; B21 4 401 - BROCA Ø3,5X50/100 TR; B21 4 402 - BROCA Ø3,5X50/120 TR; B21 4 403 - BROCA Ø3,5X50/150 TR; B21 4 404 - BROCA Ø3,5X50/180 TR; B21 4 405 - BROCA Ø3,5X50/200 TR; B21 4 406 - BROCA Ø3,5X50/220 TR; B21 4 407 - BROCA Ø3,5X50/250 TR; B21 4 408 - BROCA Ø3,5X50/300 TR; B21 4 409 - BROCA Ø3,5X50/350 TR; B21 4 410 - BROCA Ø3,5X50/400 TR; B21 4 411 - BROCA Ø3,5X70/200 TR; B21 4 412 - BROCA Ø3,5X70/220 TR; B21 4 413 - BROCA Ø3,5X70/250 TR; B21 4 414 - BROCA Ø3,5X70/300 TR; B21 4 415 - BROCA Ø3,5X70/350 TR; B21 4 416 - BROCA Ø3,5X70/400 TR; B21 4 417 - BROCA Ø3,5 GRADUADA TR; B21 4 418 - BROCA Ø3,5X25/200 GRADUADA TR; B21 4 419 - BROCA Ø3,5X30/200 GRADUADA TR; B21 4 420 - BROCA Ø3,5X30/220 GRADUADA TR; B21 4 421 - BROCA Ø3,5X30/250 GRADUADA TR; B21 4 422 - BROCA Ø3,5X40/200 GRADUADA TR; B21 4 423 - BROCA Ø3,5X40/220 GRADUADA TR; B21 4 424 - BROCA Ø3,5X40/250 GRADUADA TR; B21 4 425 - BROCA Ø3,5X40/300 GRADUADA TR; B21 4 426 - BROCA Ø3,5X40/350 GRADUADA TR; B21 4 427 - BROCA Ø3,5X40/400 GRADUADA TR; B21 4 428 - BROCA Ø3,5X50/200 GRADUADA TR; B21 4 429 - BROCA Ø3,5X50/220 GRADUADA TR; B21 4 430 - BROCA Ø3,5X50/250 GRADUADA TR; B21 4 431 - BROCA Ø3,5X50/300 GRADUADA TR; B21 4 432 - BROCA Ø3,5X50/350 GRADUADA TR; B21 4 433 - BROCA Ø3,5X50/400 GRADUADA TR; B21 4 434 - BROCA Ø3,5X70/200 GRADUADA TR; B21 4 435 - BROCA Ø3,5X70/220 GRADUADA TR; B21 4 436 - BROCA Ø3,5X70/250 GRADUADA TR; B21 4 437 - BROCA Ø3,5X70/300 GRADUADA TR; B21 4 438 - BROCA Ø3,5X70/350 GRADUADA TR; B21 4 439 - BROCA Ø3,5X70/400 GRADUADA TR; B21 4 440 - BROCA Ø3,5 REBAIXADA TR; B21 4 441 - BROCA Ø3,5X15/80 REBAIXADA TR; B21 4 442 - BROCA Ø3,5X15/100 REBAIXADA TR; B21 4 443 - BROCA Ø3,5X15/120 REBAIXADA TR; B21 4 444 - BROCA Ø3,5X15/150 REBAIXADA TR; B21 4 445 - BROCA Ø3,5X20/80 REBAIXADA TR; B21 4 446 - BROCA Ø3,5X20/100 REBAIXADA TR; B21 4 447 - BROCA Ø3,5X20/120 REBAIXADA TR; B21 4 448 - BROCA Ø3,5X20/150 REBAIXADA TR; B21 4 449 - BROCA Ø3,5X25/100 REBAIXADA TR; B21 4 450 - BROCA Ø3,5X25/120

[illegible]

BROCA Ø3,8X30/220 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 621 - BROCA Ø3,8X30/250 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 622 - BROCA Ø3,8X40/200 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 623 - BROCA Ø3,8X40/220 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 624 - BROCA Ø3,8X40/250 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 625 - BROCA Ø3,8X40/300 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 626 - BROCA Ø3,8X40/350 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 627 - BROCA Ø3,8X40/400 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 628 - BROCA Ø3,8X50/200 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 629 - BROCA Ø3,8X50/220 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 630 - BROCA Ø3,8X50/250 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 631 - BROCA Ø3,8X50/300 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 632 - BROCA Ø3,8X50/350 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 633 - BROCA Ø3,8X50/400 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 634 - BROCA Ø3,8X70/200 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 635 - BROCA Ø3,8X70/220 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 636 - BROCA Ø3,8X70/250 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 637 - BROCA Ø3,8X70/300 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 638 - BROCA Ø3,8X70/350 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 639 - BROCA Ø3,8X70/400 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 640 - BROCA Ø4,0 TR; B21 4 641 - BROCA Ø4,0X20/100 TR; B21 4 642 - BROCA Ø4,0X20/120 TR; B21 4 643 - BROCA Ø4,0X20/150 TR; B21 4 644 - BROCA Ø4,0X25/100 TR; B21 4 645 - BROCA Ø4,0X25/120 TR; B21 4 646 - BROCA Ø4,0X25/150 TR; B21 4 647 - BROCA Ø4,0X25/180 TR; B21 4 648 - BROCA Ø4,0X25/200 TR; B21 4 649 - BROCA Ø4,0X30/100 TR; B21 4 650 - BROCA Ø4,0X30/120 TR; B21 4 651 - BROCA Ø4,0X30/150 TR; B21 4 652 - BROCA Ø4,0X30/180 TR; B21 4 653 - BROCA Ø4,0X30/200 TR; B21 4 654 - BROCA Ø4,0X30/220 TR; B21 4 655 - BROCA Ø4,0X30/250 TR; B21 4 656 - BROCA Ø4,0X40/100 TR; B21 4 657 - BROCA Ø4,0X40/120 TR; B21 4 658 - BROCA Ø4,0X40/150 TR; B21 4 659 - BROCA Ø4,0X40/180 TR; B21 4 660 - BROCA Ø4,0X40/200 TR; B21 4 661 - BROCA Ø4,0X40/220 TR; B21 4 662 - BROCA Ø4,0X40/250 TR; B21 4 663 - BROCA Ø4,0X40/300 TR; B21 4 664 - BROCA Ø4,0X40/350 TR; B21 4 665 - BROCA Ø4,0X40/400 TR; B21 4 666 - BROCA Ø4,0X50/100 TR; B21 4 667 - BROCA Ø4,0X50/120 TR; B21 4 668 - BROCA Ø4,0X50/150 TR; B21 4 669 - BROCA Ø4,0X50/180 TR; B21 4 670 - BROCA Ø4,0X50/200 TR; B21 4 671 - BROCA Ø4,0X50/220 TR; B21 4 672 - BROCA Ø4,0X50/250 TR; B21 4 673 - BROCA Ø4,0X50/300 TR; B21 4 674 - BROCA Ø4,0X50/350 TR; B21 4 675 - BROCA Ø4,0X50/400 TR; B21 4 676 - BROCA Ø4,0X70/200 TR; B21 4 677 - BROCA Ø4,0X70/220 TR; B21 4 678 - BROCA Ø4,0X70/250 TR; B21 4 679 - BROCA Ø4,0X70/300 TR; B21 4 680 - BROCA Ø4,0X70/350 TR; B21 4 681 - BROCA Ø4,0X70/400 TR; B21 4 682 - BROCA Ø4,0 GRADUADA TR; B21 4 683 - BROCA Ø4,0X25/200 GRADUADA TR; B21 4 684 - BROCA Ø4,0X30/200 GRADUADA TR; B21 4 685 - BROCA Ø4,0X30/220 GRADUADA TR; B21 4 686 - BROCA Ø4,0X30/250 GRADUADA TR; B21 4 687 - BROCA Ø4,0X40/200 GRADUADA TR; B21 4 688 - BROCA Ø4,0X40/220 GRADUADA TR; B21 4 689 - BROCA Ø4,0X40/250 GRADUADA TR; B21 4 690 - BROCA Ø4,0X40/300 GRADUADA TR; B21 4 691 - BROCA Ø4,0X40/350 GRADUADA TR; B21 4 692 - BROCA Ø4,0X40/400 GRADUADA TR; B21 4 693 - BROCA Ø4,0X50/200 GRADUADA TR; B21 4 694 - BROCA Ø4,0X50/220 GRADUADA TR; B21 4 695 - BROCA Ø4,0X50/250 GRADUADA TR; B21 4 696 - BROCA Ø4,0X50/300 GRADUADA TR; B21 4 697 - BROCA Ø4,0X50/350 GRADUADA TR; B21 4 698 - BROCA Ø4,0X50/400 GRADUADA TR; B21 4 699 - BROCA Ø4,0X70/200 GRADUADA TR; B21 4 700 - BROCA Ø4,0X70/220 GRADUADA TR; B21 4 701 - BROCA Ø4,0X70/250 GRADUADA TR; B21 4 702 - BROCA Ø4,0X70/300 GRADUADA TR; B21 4 703 - BROCA Ø4,0X70/350 GRADUADA TR; B21 4 704 - BROCA Ø4,0X70/400 GRADUADA TR; B21 4 705 - BROCA Ø4,0 REBAIXADA TR; B21 4 706 - BROCA Ø4,0X20/100 REBAIXADA TR; B21 4 707 - BROCA Ø4,0X20/120 REBAIXADA TR; B21 4 708 - BROCA Ø4,0X20/150 REBAIXADA TR; B21 4 709 - BROCA Ø4,0X25/100 REBAIXADA TR; B21 4 710 - BROCA Ø4,0X25/120 REBAIXADA TR; B21 4 711 - BROCA Ø4,0X25/150 REBAIXADA TR; B21 4 712 - BROCA Ø4,0X25/180 REBAIXADA TR; B21 4 713 - BROCA Ø4,0X25/200 REBAIXADA TR; B21 4 714 - BROCA Ø4,0X30/100 REBAIXADA TR; B21 4 715 - BROCA Ø4,0X30/120 REBAIXADA TR; B21 4 716 - BROCA Ø4,0X30/150 REBAIXADA TR; B21 4 717 - BROCA Ø4,0X30/180 REBAIXADA TR; B21 4 718 - BROCA Ø4,0X30/200 REBAIXADA TR; B21 4 719 - BROCA Ø4,0X30/220 REBAIXADA TR; B21 4 720 - BROCA Ø4,0X30/250 REBAIXADA TR; B21 4 721 - BROCA Ø4,0X40/100 REBAIXADA TR; B21 4 722 - BROCA Ø4,0X40/120 REBAIXADA TR; B21 4 723 - BROCA Ø4,0X40/150 REBAIXADA TR; B21 4 724 - BROCA Ø4,0X40/180 REBAIXADA TR; B21 4 725 - BROCA Ø4,0X40/200 REBAIXADA TR; B21 4 726 - BROCA Ø4,0X40/220 REBAIXADA TR; B21 4 727 - BROCA Ø4,0X40/250 REBAIXADA TR; B21 4 728 - BROCA Ø4,0X40/300 REBAIXADA TR; B21 4 729 - BROCA Ø4,0X40/350 REBAIXADA TR; B21 4 730 - BROCA Ø4,0X40/400 REBAIXADA TR; B21 4 731 - BROCA Ø4,0X50/100 REBAIXADA TR; B21 4 732 - BROCA Ø4,0X50/120 REBAIXADA TR; B21 4 733 - BROCA Ø4,0X50/150 REBAIXADA TR; B21 4 734 - BROCA Ø4,0X50/180 REBAIXADA TR; B21 4 735 - BROCA Ø4,0X50/200 REBAIXADA TR; B21 4 736 - BROCA Ø4,0X50/220 REBAIXADA TR; B21 4 737 - BROCA Ø4,0X50/250 REBAIXADA TR; B21 4 738 - BROCA Ø4,0X50/300 REBAIXADA TR; B21 4 739 - BROCA Ø4,0X50/350 REBAIXADA TR; B21 4 740 - BROCA Ø4,0X50/400 REBAIXADA TR; B21 4 741 - BROCA Ø4,0X70/200 REBAIXADA TR; B21 4 742 - BROCA Ø4,0X70/220 REBAIXADA TR; B21 4 743 - BROCA Ø4,0X70/250 REBAIXADA TR; B21 4 744 - BROCA Ø4,0X70/300 REBAIXADA TR; B21 4 745 - BROCA Ø4,0X70/350 REBAIXADA TR; B21 4 746 - BROCA Ø4,0X70/400 REBAIXADA TR; B21 4 747 - BROCA Ø4,0 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 748 - BROCA Ø4,0X25/200 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 749 - BROCA Ø4,0X30/200 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 750 - BROCA Ø4,0X30/220 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 751 - BROCA Ø4,0X30/250 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 752 - BROCA Ø4,0X40/200 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 753 - BROCA Ø4,0X40/220 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 754 - BROCA Ø4,0X40/250 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 755 - BROCA Ø4,0X40/300 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 756 - BROCA Ø4,0X40/350 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 757 - BROCA Ø4,0X40/400 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 758 - BROCA Ø4,0X50/200 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 759 - BROCA Ø4,0X50/220 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 760 - BROCA Ø4,0X50/250 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 761 - BROCA Ø4,0X50/300 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 762 - BROCA Ø4,0X50/350 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 763 - BROCA Ø4,0X50/400 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 764 - BROCA Ø4,0X70/200 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 765 - BROCA Ø4,0X70/220 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 766 - BROCA Ø4,0X70/250 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 767 - BROCA Ø4,0X70/300 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 768 - BROCA Ø4,0X70/350 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 769 - BROCA Ø4,0X70/400 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 770 - BROCA Ø4,5 TR; B21 4 771 - BROCA Ø4,5X25/100 TR; B21 4 772 - BROCA Ø4,5X25/120 TR; B21 4 773 - BROCA Ø4,5X25/150 TR; B21 4 774 - BROCA Ø4,5X25/180 TR; B21 4 775 - BROCA Ø4,5X25/200 TR; B21 4 776 - BROCA Ø4,5X30/100 TR; B21 4 777 - BROCA Ø4,5X30/120 TR; B21 4 778 - BROCA Ø4,5X30/150 TR; B21 4 779 - BROCA Ø4,5X30/180 TR; B21 4 780 - BROCA Ø4,5X30/200 TR; B21 4 781 - BROCA Ø4,5X30/220 TR; B21 4 782 - BROCA Ø4,5X30/250 TR; B21 4 783 - BROCA Ø4,5X40/100 TR; B21 4 784 - BROCA Ø4,5X40/120 TR; B21 4 785 - BROCA Ø4,5X40/150 TR; B21 4 786 - BROCA Ø4,5X40/180 TR; B21 4 787 - BROCA Ø4,5X40/200 TR; B21 4 788 - BROCA Ø4,5X40/220 TR; B21 4 789 - BROCA Ø4,5X40/250 TR; B21 4 790 - BROCA Ø4,5X40/300 TR; B21 4 791 - BROCA

Ø4,5X40/350 TR; B21 4 792 - BROCA Ø4,5X40/400 TR; B21 4 793 - BROCA Ø4,5X50/100 TR; B21 4 794 - BROCA Ø4,5X50/120 TR; B21 4 795 - BROCA Ø4,5X50/150 TR; B21 4 796 - BROCA Ø4,5X50/180 TR; B21 4 797 - BROCA Ø4,5X50/200 TR; B21 4 798 - BROCA Ø4,5X50/220 TR; B21 4 799 - BROCA Ø4,5X50/250 TR; B21 4 800 - BROCA Ø4,5X50/300 TR; B21 4 801 - BROCA Ø4,5X50/350 TR; B21 4 802 - BROCA Ø4,5X50/400 TR; B21 4 803 - BROCA Ø4,5X70/200 TR; B21 4 804 - BROCA Ø4,5X70/220 TR; B21 4 805 - BROCA Ø4,5X70/250 TR; B21 4 806 - BROCA Ø4,5X70/300 TR; B21 4 807 - BROCA Ø4,5X70/350 TR; B21 4 808 - BROCA Ø4,5X70/400 TR; B21 4 809 - BROCA Ø4,5 GRADUADA TR; B21 4 810 - BROCA Ø4,5X25/200 GRADUADA TR; B21 4 811 - BROCA Ø4,5X30/200 GRADUADA TR; B21 4 812 - BROCA Ø4,5X30/220 GRADUADA TR; B21 4 813 - BROCA Ø4,5X30/250 GRADUADA TR; B21 4 814 - BROCA Ø4,5X40/200 GRADUADA TR; B21 4 815 - BROCA Ø4,5X40/220 GRADUADA TR; B21 4 816 - BROCA Ø4,5X40/250 GRADUADA TR; B21 4 817 - BROCA Ø4,5X40/300 GRADUADA TR; B21 4 818 - BROCA Ø4,5X40/350 GRADUADA TR; B21 4 819 - BROCA Ø4,5X40/400 GRADUADA TR; B21 4 820 - BROCA Ø4,5X50/200 GRADUADA TR; B21 4 821 - BROCA Ø4,5X50/220 GRADUADA TR; B21 4 822 - BROCA Ø4,5X50/250 GRADUADA TR; B21 4 823 - BROCA Ø4,5X50/300 GRADUADA TR; B21 4 824 - BROCA Ø4,5X50/350 GRADUADA TR; B21 4 825 - BROCA Ø4,5X50/400 GRADUADA TR; B21 4 826 - BROCA Ø4,5X70/200 GRADUADA TR; B21 4 827 - BROCA Ø4,5X70/220 GRADUADA TR; B21 4 828 - BROCA Ø4,5X70/250 GRADUADA TR; B21 4 829 - BROCA Ø4,5X70/300 GRADUADA TR; B21 4 830 - BROCA Ø4,5X70/350 GRADUADA TR; B21 4 831 - BROCA Ø4,5X70/400 GRADUADA TR; B21 4 832 - BROCA Ø4,5 REBAIXADA TR; B21 4 833 - BROCA Ø4,5X25/100 REBAIXADA TR; B21 4 834 - BROCA Ø4,5X25/120 REBAIXADA TR; B21 4 835 - BROCA Ø4,5X25/150 REBAIXADA TR; B21 4 836 - BROCA Ø4,5X25/180 REBAIXADA TR; B21 4 837 - BROCA Ø4,5X25/200 REBAIXADA TR; B21 4 838 - BROCA Ø4,5X30/100 REBAIXADA TR; B21 4 839 - BROCA Ø4,5X30/120 REBAIXADA TR; B21 4 840 - BROCA Ø4,5X30/150 REBAIXADA TR; B21 4 841 - BROCA Ø4,5X30/180 REBAIXADA TR; B21 4 842 - BROCA Ø4,5X30/200 REBAIXADA TR; B21 4 843 - BROCA Ø4,5X30/220 REBAIXADA TR; B21 4 844 - BROCA Ø4,5X30/250 REBAIXADA TR; B21 4 845 - BROCA Ø4,5X40/100 REBAIXADA TR; B21 4 846 - BROCA Ø4,5X40/120 REBAIXADA TR; B21 4 847 - BROCA Ø4,5X40/150 REBAIXADA TR; B21 4 848 - BROCA Ø4,5X40/180 REBAIXADA TR; B21 4 849 - BROCA Ø4,5X40/200 REBAIXADA TR; B21 4 850 - BROCA Ø4,5X40/220 REBAIXADA TR; B21 4 851 - BROCA Ø4,5X40/250 REBAIXADA TR; B21 4 852 - BROCA Ø4,5X40/300 REBAIXADA TR; B21 4 853 - BROCA Ø4,5X40/350 REBAIXADA TR; B21 4 854 - BROCA Ø4,5X40/400 REBAIXADA TR; B21 4 855 - BROCA Ø4,5X50/100 REBAIXADA TR; B21 4 856 - BROCA Ø4,5X50/120 REBAIXADA TR; B21 4 857 - BROCA Ø4,5X50/150 REBAIXADA TR; B21 4 858 - BROCA Ø4,5X50/180 REBAIXADA TR; B21 4 859 - BROCA Ø4,5X50/200 REBAIXADA TR; B21 4 860 - BROCA Ø4,5X50/220 REBAIXADA TR; B21 4 861 - BROCA Ø4,5X50/250 REBAIXADA TR; B21 4 862 - BROCA Ø4,5X50/300 REBAIXADA TR; B21 4 863 - BROCA Ø4,5X50/350 REBAIXADA TR; B21 4 864 - BROCA Ø4,5X50/400 REBAIXADA TR; B21 4 865 - BROCA Ø4,5X70/200 REBAIXADA TR; B21 4 866 - BROCA Ø4,5X70/220 REBAIXADA TR; B21 4 867 - BROCA Ø4,5X70/250 REBAIXADA TR; B21 4 868 - BROCA Ø4,5X70/300 REBAIXADA TR; B21 4 869 - BROCA Ø4,5X70/350 REBAIXADA TR; B21 4 870 - BROCA Ø4,5X70/400 REBAIXADA TR; B21 4 871 - BROCA Ø4,5 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 872 - BROCA Ø4,5X25/200 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 873 - BROCA Ø4,5X30/200 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 874 - BROCA Ø4,5X30/220 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 875 - BROCA Ø4,5X30/250 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 876 - BROCA Ø4,5X40/200 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 877 - BROCA Ø4,5X40/220 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 878 - BROCA Ø4,5X40/250 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 879 - BROCA Ø4,5X40/300 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 880 - BROCA Ø4,5X40/350 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 881 - BROCA Ø4,5X40/400 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 882 - BROCA Ø4,5X50/200 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 883 - BROCA Ø4,5X50/220 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 884 - BROCA Ø4,5X50/250 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 885 - BROCA Ø4,5X50/300 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 886 - BROCA Ø4,5X50/350 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 887 - BROCA Ø4,5X50/400 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 888 - BROCA Ø4,5X70/200 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 889 - BROCA Ø4,5X70/220 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 890 - BROCA Ø4,5X70/250 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 891 - BROCA Ø4,5X70/300 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 892 - BROCA Ø4,5X70/350 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 4 893 - BROCA Ø4,5X70/400 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 100 - BROCA Ø4,8 TR; B21 5 101 - BROCA Ø4,8X25/100 TR; B21 5 102 - BROCA Ø4,8X25/120 TR; B21 5 103 - BROCA Ø4,8X25/150 TR; B21 5 104 - BROCA Ø4,8X25/180 TR; B21 5 105 - BROCA Ø4,8X25/200 TR; B21 5 106 - BROCA Ø4,8X30/100 TR; B21 5 107 - BROCA Ø4,8X30/120 TR; B21 5 108 - BROCA Ø4,8X30/150 TR; B21 5 109 - BROCA Ø4,8X30/180 TR; B21 5 110 - BROCA Ø4,8X30/200 TR; B21 5 111 - BROCA Ø4,8X30/220 TR; B21 5 112 - BROCA Ø4,8X30/250 TR; B21 5 113 - BROCA Ø4,8X40/100 TR; B21 5 114 - BROCA Ø4,8X40/120 TR; B21 5 115 - BROCA Ø4,8X40/150 TR; B21 5 116 - BROCA Ø4,8X40/180 TR; B21 5 117 - BROCA Ø4,8X40/200 TR; B21 5 118 - BROCA Ø4,8X40/220 TR; B21 5 119 - BROCA Ø4,8X40/250 TR; B21 5 120 - BROCA Ø4,8X40/300 TR; B21 5 121 - BROCA Ø4,8X40/350 TR; B21 5 122 - BROCA Ø4,8X40/400 TR; B21 5 123 - BROCA Ø4,8X50/100 TR; B21 5 124 - BROCA Ø4,8X50/120 TR; B21 5 125 - BROCA Ø4,8X50/150 TR; B21 5 126 - BROCA Ø4,8X50/180 TR; B21 5 127 - BROCA Ø4,8X50/200 TR; B21 5 128 - BROCA Ø4,8X50/220 TR; B21 5 129 - BROCA Ø4,8X50/250 TR; B21 5 130 - BROCA Ø4,8X50/300 TR; B21 5 131 - BROCA Ø4,8X50/350 TR; B21 5 132 - BROCA Ø4,8X50/400 TR; B21 5 133 - BROCA Ø4,8X70/200 TR; B21 5 134 - BROCA Ø4,8X70/220 TR; B21 5 135 - BROCA Ø4,8X70/250 TR; B21 5 136 - BROCA Ø4,8X70/300 TR; B21 5 137 - BROCA Ø4,8X70/350 TR; B21 5 138 - BROCA Ø4,8X70/400 TR; B21 5 139 - BROCA Ø4,8 GRADUADA TR; B21 5 140 - BROCA Ø4,8X25/200 GRADUADA TR; B21 5 141 - BROCA Ø4,8X30/200 GRADUADA TR; B21 5 142 - BROCA Ø4,8X30/220 GRADUADA TR; B21 5 143 - BROCA Ø4,8X30/250 GRADUADA TR; B21 5 144 - BROCA Ø4,8X40/200 GRADUADA TR; B21 5 145 - BROCA Ø4,8X40/220 GRADUADA TR; B21 5 146 - BROCA Ø4,8X40/250 GRADUADA TR; B21 5 147 - BROCA Ø4,8X40/300 GRADUADA TR; B21 5 148 - BROCA Ø4,8X40/350 GRADUADA TR; B21 5 149 - BROCA Ø4,8X40/400 GRADUADA TR; B21 5 150 - BROCA Ø4,8X50/200 GRADUADA TR; B21 5 151 - BROCA Ø4,8X50/220 GRADUADA TR; B21 5 152 - BROCA Ø4,8X50/250 GRADUADA TR; B21 5 153 - BROCA Ø4,8X50/300 GRADUADA TR; B21 5 154 - BROCA Ø4,8X50/350 GRADUADA TR; B21 5 155 - BROCA Ø4,8X50/400 GRADUADA TR; B21 5 156 - BROCA Ø4,8X70/200 GRADUADA TR; B21 5 157 - BROCA Ø4,8X70/220 GRADUADA TR; B21 5 158 - BROCA Ø4,8X70/250 GRADUADA TR; B21 5 159 - BROCA Ø4,8X70/300 GRADUADA TR; B21 5 160 - BROCA Ø4,8X70/350 GRADUADA TR; B21 5 161 - BROCA Ø4,8X70/400 GRADUADA TR; B21 5 162 - BROCA Ø4,8 REBAIXADA TR; B21 5 163 - BROCA Ø4,8X25/100 REBAIXADA TR; B21 5 164 - BROCA Ø4,8X25/120 REBAIXADA TR; B21 5 165 - BROCA Ø4,8X25/150 REBAIXADA TR; B21 5 166 - BROCA Ø4,8X25/180 REBAIXADA TR; B21 5 167 - BROCA Ø4,8X25/200 REBAIXADA TR; B21 5 168 - BROCA Ø4,8X30/100 REBAIXADA TR; B21 5 169 - BROCA Ø4,8X30/120 REBAIXADA TR; B21 5 170 - BROCA Ø4,8X30/150 REBAIXADA TR; B21 5 171 - BROCA Ø4,8X30/180 REBAIXADA TR; B21 5 172 -

BROCA Ø4,8X30/200 REBAIXADA TR; B21 5 173 - BROCA Ø4,8X30/220 REBAIXADA TR; B21 5 174 - BROCA Ø4,8X30/250 REBAIXADA TR; B21 5 175 - BROCA Ø4,8X40/100 REBAIXADA TR; B21 5 176 - BROCA Ø4,8X40/120 REBAIXADA TR; B21 5 177 - BROCA Ø4,8X40/150 REBAIXADA TR; B21 5 178 - BROCA Ø4,8X40/180 REBAIXADA TR; B21 5 179 - BROCA Ø4,8X40/200 REBAIXADA TR; B21 5 180 - BROCA Ø4,8X40/220 REBAIXADA TR; B21 5 181 - BROCA Ø4,8X40/250 REBAIXADA TR; B21 5 182 - BROCA Ø4,8X40/300 REBAIXADA TR; B21 5 183 - BROCA Ø4,8X40/350 REBAIXADA TR; B21 5 184 - BROCA Ø4,8X40/400 REBAIXADA TR; B21 5 185 - BROCA Ø4,8X50/100 REBAIXADA TR; B21 5 186 - BROCA Ø4,8X50/120 REBAIXADA TR; B21 5 187 - BROCA Ø4,8X50/150 REBAIXADA TR; B21 5 188 - BROCA Ø4,8X50/180 REBAIXADA TR; B21 5 189 - BROCA Ø4,8X50/200 REBAIXADA TR; B21 5 190 - BROCA Ø4,8X50/220 REBAIXADA TR; B21 5 191 - BROCA Ø4,8X50/250 REBAIXADA TR; B21 5 192 - BROCA Ø4,8X50/300 REBAIXADA TR; B21 5 193 - BROCA Ø4,8X50/350 REBAIXADA TR; B21 5 194 - BROCA Ø4,8X50/400 REBAIXADA TR; B21 5 195 - BROCA Ø4,8X70/200 REBAIXADA TR; B21 5 196 - BROCA Ø4,8X70/220 REBAIXADA TR; B21 5 197 - BROCA Ø4,8X70/250 REBAIXADA TR; B21 5 198 - BROCA Ø4,8X70/300 REBAIXADA TR; B21 5 199 - BROCA Ø4,8X70/350 REBAIXADA TR; B21 5 200 - BROCA Ø4,8X70/400 REBAIXADA TR; B21 5 201 - BROCA Ø4,8 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 202 - BROCA Ø4,8X25/200 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 203 - BROCA Ø4,8X30/200 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 204 - BROCA Ø4,8X30/220 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 205 - BROCA Ø4,8X30/250 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 206 - BROCA Ø4,8X40/200 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 207 - BROCA Ø4,8X40/220 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 208 - BROCA Ø4,8X40/250 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 209 - BROCA Ø4,8X40/300 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 210 - BROCA Ø4,8X40/350 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 211 - BROCA Ø4,8X40/400 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 212 - BROCA Ø4,8X50/200 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 213 - BROCA Ø4,8X50/220 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 214 - BROCA Ø4,8X50/250 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 215 - BROCA Ø4,8X50/300 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 216 - BROCA Ø4,8X50/350 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 217 - BROCA Ø4,8X50/400 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 218 - BROCA Ø4,8X70/200 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 219 - BROCA Ø4,8X70/220 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 220 - BROCA Ø4,8X70/250 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 221 - BROCA Ø4,8X70/300 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 222 - BROCA Ø4,8X70/350 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 223 - BROCA Ø4,8X70/400 GRADUADA REBAIXADA TR; B21 5 224 - BROCA Ø5,0 TR; B21 5 225 - BROCA Ø5,0X25/120 TR; B21 5 226 - BROCA Ø5,0X25/150 TR; B21 5 227 - BROCA Ø5,0X25/180 TR; B21 5 228 - BROCA Ø5,0X25/200 TR; B21 5 229 - BROCA Ø5,0X30/120 TR; B21 5 230 - BROCA Ø5,0X30/150 TR; B21 5 231 - BROCA Ø5,0X30/180 TR; B21 5 232 - BROCA Ø5,0X30/200 TR; B21 5 233 - BROCA Ø5,0X30/220 TR; B21 5 234 - BROCA Ø5,0X30/250 TR; B21 5 235 - BROCA Ø5,0X40/120 TR; B21 5 236 - BROCA Ø5,0X40/150 TR; B21 5 237 - BROCA Ø5,0X40/180 TR; B21 5 238 - BROCA Ø5,0X40/200 TR; B21 5 239 - BROCA Ø5,0X40/220 TR; B21 5 240 - BROCA Ø5,0X40/250 TR; B21 5 241 - BROCA Ø5,0X40/300 TR; B21 5 242 - BROCA Ø5,0X40/350 TR; B21 5 243 - BROCA Ø5,0X40/400 TR; B21 5 244 - BROCA Ø5,0X50/120 TR; B21 5 245 - BROCA Ø5,0X50/150 TR; B21 5 246 - BROCA Ø5,0X50/180 TR; B21 5 247 - BROCA Ø5,0X50/200 TR; B21 5 248 - BROCA Ø5,0X50/220 TR; B21 5 249 - BROCA Ø5,0X50/250 TR; B21 5 250 - BROCA Ø5,0X50/300 TR; B21 5 251 - BROCA Ø5,0X50/350 TR; B21 5 252 - BROCA Ø5,0X50/400 TR; B21 5 253 - BROCA Ø5,0X70/200 TR; B21 5 254 - BROCA Ø5,0X70/220 TR; B21 5 255 - BROCA Ø5,0X70/250 TR; B21 5 256 - BROCA Ø5,0X70/300 TR; B21 5 257 - BROCA Ø5,0X70/350 TR; B21 5 258 - BROCA Ø5,0X70/400 TR; B21 5 259 - BROCA Ø5,0 GRADUADA TR; B21 5 260 - BROCA Ø5,0X25/200 GRADUADA TR; B21 5 261 - BROCA Ø5,0X30/200 GRADUADA TR; B21 5 262 - BROCA Ø5,0X30/220 GRADUADA TR; B21 5 263 - BROCA Ø5,0X30/250 GRADUADA TR; B21 5 264 - BROCA Ø5,0X40/200 GRADUADA TR; B21 5 265 - BROCA Ø5,0X40/220 GRADUADA TR; B21 5 266 - BROCA Ø5,0X40/250 GRADUADA TR; B21 5 267 - BROCA Ø5,0X40/300 GRADUADA TR; B21 5 268 - BROCA Ø5,0X40/350 GRADUADA TR; B21 5 269 - BROCA Ø5,0X40/400 GRADUADA TR; B21 5 270 - BROCA Ø5,0X50/200 GRADUADA TR; B21 5 271 - BROCA Ø5,0X50/220 GRADUADA TR; B21 5 272 - BROCA Ø5,0X50/250 GRADUADA TR; B21 5 273 - BROCA Ø5,0X50/300 GRADUADA TR; B21 5 274 - BROCA Ø5,0X50/350 GRADUADA TR; B21 5 275 - BROCA Ø5,0X50/400 GRADUADA TR; B21 5 276 - BROCA Ø5,0X70/200 GRADUADA TR; B21 5 277 - BROCA Ø5,0X70/220 GRADUADA TR; B21 5 278 - BROCA Ø5,0X70/250 GRADUADA TR; B21 5 279 - BROCA Ø5,0X70/300 GRADUADA TR; B21 5 280 - BROCA Ø5,0X70/350 GRADUADA TR; B21 5 281 - BROCA Ø5,0X70/400 GRADUADA TR; B21 5 282 - BROCA Ø5,5 TR; B21 5 283 - BROCA Ø5,5X25/150 TR; B21 5 284 - BROCA Ø5,5X25/180 TR; B21 5 285 - BROCA Ø5,5X25/200 TR; B21 5 286 - BROCA Ø5,5X30/150 TR; B21 5 287 - BROCA Ø5,5X30/180 TR; B21 5 288 - BROCA Ø5,5X30/200 TR; B21 5 289 - BROCA Ø5,5X30/220 TR; B21 5 290 - BROCA Ø5,5X30/250 TR; B21 5 291 - BROCA Ø5,5X40/150 TR; B21 5 292 - BROCA Ø5,5X40/180 TR; B21 5 293 - BROCA Ø5,5X40/200 TR; B21 5 294 - BROCA Ø5,5X40/220 TR; B21 5 295 - BROCA Ø5,5X40/250 TR; B21 5 296 - BROCA Ø5,5X40/300 TR; B21 5 297 - BROCA Ø5,5X40/350 TR; B21 5 298 - BROCA Ø5,5X40/400 TR; B21 5 299 - BROCA Ø5,5X50/150 TR; B21 5 300 - BROCA Ø5,5X50/180 TR; B21 5 301 - BROCA Ø5,5X50/200 TR; B21 5 302 - BROCA Ø5,5X50/220 TR; B21 5 303 - BROCA Ø5,5X50/250 TR; B21 5 304 - BROCA Ø5,5X50/300 TR; B21 5 305 - BROCA Ø5,5X50/350 TR; B21 5 306 - BROCA Ø5,5X50/400 TR; B21 5 307 - BROCA Ø5,5X70/200 TR; B21 5 308 - BROCA Ø5,5X70/220 TR; B21 5 309 - BROCA Ø5,5X70/250 TR; B21 5 310 - BROCA Ø5,5X70/300 TR; B21 5 311 - BROCA Ø5,5X70/350 TR; B21 5 312 - BROCA Ø5,5X70/400 TR; B21 5 313 - BROCA Ø5,5 GRADUADA TR; B21 5 314 - BROCA Ø5,5X25/200 GRADUADA TR; B21 5 315 - BROCA Ø5,5X30/200 GRADUADA TR; B21 5 316 - BROCA Ø5,5X30/220 GRADUADA TR; B21 5 317 - BROCA Ø5,5X30/250 GRADUADA TR; B21 5 318 - BROCA Ø5,5X40/200 GRADUADA TR; B21 5 319 - BROCA Ø5,5X40/220 GRADUADA TR; B21 5 320 - BROCA Ø5,5X40/250 GRADUADA TR; B21 5 321 - BROCA Ø5,5X40/300 GRADUADA TR; B21 5 322 - BROCA Ø5,5X40/350 GRADUADA TR; B21 5 323 - BROCA Ø5,5X40/400 GRADUADA TR; B21 5 324 - BROCA Ø5,5X50/200 GRADUADA TR; B21 5 325 - BROCA Ø5,5X50/220 GRADUADA TR; B21 5 326 - BROCA Ø5,5X50/250 GRADUADA TR; B21 5 327 - BROCA Ø5,5X50/300 GRADUADA TR; B21 5 328 - BROCA Ø5,5X50/350 GRADUADA TR; B21 5 329 - BROCA Ø5,5X50/400 GRADUADA TR; B21 5 330 - BROCA Ø5,5X70/200 GRADUADA TR; B21 5 331 - BROCA Ø5,5X70/220 GRADUADA TR; B21 5 332 - BROCA Ø5,5X70/250 GRADUADA TR; B21 5 333 - BROCA Ø5,5X70/300 GRADUADA TR; B21 5 334 - BROCA Ø5,5X70/350 GRADUADA TR; B21 5 335 - BROCA Ø5,5X70/400 GRADUADA TR; B21 5 336 - BROCA Ø6,0 TR; B21 5 337 - BROCA Ø6,0X30/150 TR; B21 5 338 - BROCA Ø6,0X30/180 TR; B21 5 339 - BROCA Ø6,0X30/200 TR; B21 5 340 - BROCA Ø6,0X30/220 TR; B21 5 341 - BROCA Ø6,0X30/250 TR; B21 5 342 - BROCA Ø6,0X40/150 TR; B21 5 343 - BROCA Ø6,0X40/180 TR; B21 5 344 - BROCA Ø6,0X40/200 TR; B21 5 345 - BROCA Ø6,0X40/220 TR; B21 5 346 - BROCA Ø6,0X40/250 TR; B21 5 347 - BROCA Ø6,0X40/300 TR; B21 5 348 - BROCA Ø6,0X40/350 TR; B21 5 349 - BROCA Ø6,0X40/400 TR; B21 5 350 - BROCA Ø6,0X50/150 TR; B21 5 351 - BROCA Ø6,0X50/180 TR; B21 5 352 - BROCA Ø6,0X50/200 TR; B21 5 353 - BROCA Ø6,0X50/220 TR; B21 5 354 - BROCA

[illegible]

B21 5 549 - BROCA Ø7,5X40/400 TR; B21 5 550 - BROCA Ø7,5X50/150 TR; B21 5 551 - BROCA Ø7,5X50/180 TR; B21 5 552 - BROCA Ø7,5X50/200 TR; B21 5 553 - BROCA Ø7,5X50/220 TR; B21 5 554 - BROCA Ø7,5X50/250 TR; B21 5 555 - BROCA Ø7,5X50/300 TR; B21 5 556 - BROCA Ø7,5X50/350 TR; B21 5 557 - BROCA Ø7,5X50/400 TR; B21 5 558 - BROCA Ø7,5X70/200 TR; B21 5 559 - BROCA Ø7,5X70/220 TR; B21 5 560 - BROCA Ø7,5X70/250 TR; B21 5 561 - BROCA Ø7,5X70/300 TR; B21 5 562 - BROCA Ø7,5X70/350 TR; B21 5 563 - BROCA Ø7,5X70/400 TR; B21 5 564 - BROCA Ø7,5 GRADUADA TR; B21 5 565 - BROCA Ø7,5X30/200 GRADUADA TR; B21 5 566 - BROCA Ø7,5X30/220 GRADUADA TR; B21 5 567 - BROCA Ø7,5X30/250 GRADUADA TR; B21 5 568 - BROCA Ø7,5X40/200 GRADUADA TR; B21 5 569 - BROCA Ø7,5X40/220 GRADUADA TR; B21 5 570 - BROCA Ø7,5X40/250 GRADUADA TR; B21 5 571 - BROCA Ø7,5X40/300 GRADUADA TR; B21 5 572 - BROCA Ø7,5X40/350 GRADUADA TR; B21 5 573 - BROCA Ø7,5X40/400 GRADUADA TR; B21 5 574 - BROCA Ø7,5X50/200 GRADUADA TR; B21 5 575 - BROCA Ø7,5X50/220 GRADUADA TR; B21 5 576 - BROCA Ø7,5X50/250 GRADUADA TR; B21 5 577 - BROCA Ø7,5X50/300 GRADUADA TR; B21 5 578 - BROCA Ø7,5X50/350 GRADUADA TR; B21 5 579 - BROCA Ø7,5X50/400 GRADUADA TR; B21 5 580 - BROCA Ø7,5X70/200 GRADUADA TR; B21 5 581 - BROCA Ø7,5X70/220 GRADUADA TR; B21 5 582 - BROCA Ø7,5X70/250 GRADUADA TR; B21 5 583 - BROCA Ø7,5X70/300 GRADUADA TR; B21 5 584 - BROCA Ø7,5X70/350 GRADUADA TR; B21 5 585 - BROCA Ø7,5X70/400 GRADUADA TR; B21 5 586 - BROCA Ø8,0 TR; B21 5 587 - BROCA Ø8,0X30/150 TR; B21 5 588 - BROCA Ø8,0X30/180 TR; B21 5 589 - BROCA Ø8,0X30/200 TR; B21 5 590 - BROCA Ø8,0X30/220 TR; B21 5 591 - BROCA Ø8,0X30/250 TR; B21 5 592 - BROCA Ø8,0X40/150 TR; B21 5 593 - BROCA Ø8,0X40/180 TR; B21 5 594 - BROCA Ø8,0X40/200 TR; B21 5 595 - BROCA Ø8,0X40/220 TR; B21 5 596 - BROCA Ø8,0X40/250 TR; B21 5 597 - BROCA Ø8,0X40/300 TR; B21 5 598 - BROCA Ø8,0X40/350 TR; B21 5 599 - BROCA Ø8,0X40/400 TR; B21 5 600 - BROCA Ø8,0X50/150 TR; B21 5 601 - BROCA Ø8,0X50/180 TR; B21 5 602 - BROCA Ø8,0X50/200 TR; B21 5 603 - BROCA Ø8,0X50/220 TR; B21 5 604 - BROCA Ø8,0X50/250 TR; B21 5 605 - BROCA Ø8,0X50/300 TR; B21 5 606 - BROCA Ø8,0X50/350 TR; B21 5 607 - BROCA Ø8,0X50/400 TR; B21 5 608 - BROCA Ø8,0X70/200 TR; B21 5 609 - BROCA Ø8,0X70/220 TR; B21 5 610 - BROCA Ø8,0X70/250 TR; B21 5 611 - BROCA Ø8,0X70/300 TR; B21 5 612 - BROCA Ø8,0X70/350 TR; B21 5 613 - BROCA Ø8,0X70/400 TR; B21 5 614 - BROCA Ø8,0 GRADUADA TR; B21 5 615 - BROCA Ø8,0X30/200 GRADUADA TR; B21 5 616 - BROCA Ø8,0X30/220 GRADUADA TR; B21 5 617 - BROCA Ø8,0X30/250 GRADUADA TR; B21 5 618 - BROCA Ø8,0X40/200 GRADUADA TR; B21 5 619 - BROCA Ø8,0X40/220 GRADUADA TR; B21 5 620 - BROCA Ø8,0X40/250 GRADUADA TR; B21 5 621 - BROCA Ø8,0X40/300 GRADUADA TR; B21 5 622 - BROCA Ø8,0X40/350 GRADUADA TR; B21 5 623 - BROCA Ø8,0X40/400 GRADUADA TR; B21 5 624 - BROCA Ø8,0X50/200 GRADUADA TR; B21 5 625 - BROCA Ø8,0X50/220 GRADUADA TR; B21 5 626 - BROCA Ø8,0X50/250 GRADUADA TR; B21 5 627 - BROCA Ø8,0X50/300 GRADUADA TR; B21 5 628 - BROCA Ø8,0X50/350 GRADUADA TR; B21 5 629 - BROCA Ø8,0X50/400 GRADUADA TR; B21 5 630 - BROCA Ø8,0X70/200 GRADUADA TR; B21 5 631 - BROCA Ø8,0X70/220 GRADUADA TR; B21 5 632 - BROCA Ø8,0X70/250 GRADUADA TR; B21 5 633 - BROCA Ø8,0X70/300 GRADUADA TR; B21 5 634 - BROCA Ø8,0X70/350 GRADUADA TR; B21 5 635 - BROCA Ø8,0X70/400 GRADUADA TR; B21 5 636 - BROCA Ø9,0 TR; B21 5 637 - BROCA Ø9,0X30/150 TR; B21 5 638 - BROCA Ø9,0X30/180 TR; B21 5 639 - BROCA Ø9,0X30/200 TR; B21 5 640 - BROCA Ø9,0X30/220 TR; B21 5 641 - BROCA Ø9,0X30/250 TR; B21 5 642 - BROCA Ø9,0X40/150 TR; B21 5 643 - BROCA Ø9,0X40/180 TR; B21 5 644 - BROCA Ø9,0X40/200 TR; B21 5 645 - BROCA Ø9,0X40/220 TR; B21 5 646 - BROCA Ø9,0X40/250 TR; B21 5 647 - BROCA Ø9,0X40/300 TR; B21 5 648 - BROCA Ø9,0X40/350 TR; B21 5 649 - BROCA Ø9,0X40/400 TR; B21 5 650 - BROCA Ø9,0X50/150 TR; B21 5 651 - BROCA Ø9,0X50/180 TR; B21 5 652 - BROCA Ø9,0X50/200 TR; B21 5 653 - BROCA Ø9,0X50/220 TR; B21 5 654 - BROCA Ø9,0X50/250 TR; B21 5 655 - BROCA Ø9,0X50/300 TR; B21 5 656 - BROCA Ø9,0X50/350 TR; B21 5 657 - BROCA Ø9,0X50/400 TR; B21 5 658 - BROCA Ø9,0X70/200 TR; B21 5 659 - BROCA Ø9,0X70/220 TR; B21 5 660 - BROCA Ø9,0X70/250 TR; B21 5 661 - BROCA Ø9,0X70/300 TR; B21 5 662 - BROCA Ø9,0X70/350 TR; B21 5 663 - BROCA Ø9,0X70/400 TR; B21 5 664 - BROCA Ø9,0 GRADUADA TR; B21 5 665 - BROCA Ø9,0X30/200 GRADUADA TR; B21 5 666 - BROCA Ø9,0X30/220 GRADUADA TR; B21 5 667 - BROCA Ø9,0X30/250 GRADUADA TR; B21 5 668 - BROCA Ø9,0X40/200 GRADUADA TR; B21 5 669 - BROCA Ø9,0X40/220 GRADUADA TR; B21 5 670 - BROCA Ø9,0X40/250 GRADUADA TR; B21 5 671 - BROCA Ø9,0X40/300 GRADUADA TR; B21 5 672 - BROCA Ø9,0X40/350 GRADUADA TR; B21 5 673 - BROCA Ø9,0X40/400 GRADUADA TR; B21 5 674 - BROCA Ø9,0X50/200 GRADUADA TR; B21 5 675 - BROCA Ø9,0X50/220 GRADUADA TR; B21 5 676 - BROCA Ø9,0X50/250 GRADUADA TR; B21 5 677 - BROCA Ø9,0X50/300 GRADUADA TR; B21 5 678 - BROCA Ø9,0X50/350 GRADUADA TR; B21 5 679 - BROCA Ø9,0X50/400 GRADUADA TR; B21 5 680 - BROCA Ø9,0X70/200 GRADUADA TR; B21 5 681 - BROCA Ø9,0X70/220 GRADUADA TR; B21 5 682 - BROCA Ø9,0X70/250 GRADUADA TR; B21 5 683 - BROCA Ø9,0X70/300 GRADUADA TR; B21 5 684 - BROCA Ø9,0X70/350 GRADUADA TR; B21 5 685 - BROCA Ø9,0X70/400 GRADUADA TR; B21 5 686 - BROCA Ø10,0 TR; B21 5 687 - BROCA Ø10,0X30/200 TR; B21 5 688 - BROCA Ø10,0X30/220 TR; B21 5 689 - BROCA Ø10,0X30/250 TR; B21 5 690 - BROCA Ø10,0X40/200 TR; B21 5 691 - BROCA Ø10,0X40/220 TR; B21 5 692 - BROCA Ø10,0X40/250 TR; B21 5 693 - BROCA Ø10,0X40/300 TR; B21 5 694 - BROCA Ø10,0X40/350 TR; B21 5 695 - BROCA Ø10,0X40/400 TR; B21 5 696 - BROCA Ø10,0X50/200 TR; B21 5 697 - BROCA Ø10,0X50/220 TR; B21 5 698 - BROCA Ø10,0X50/250 TR; B21 5 699 - BROCA Ø10,0X50/300 TR; B21 5 700 - BROCA Ø10,0X50/350 TR; B21 5 701 - BROCA Ø10,0X50/400 TR; B21 5 702 - BROCA Ø10,0X70/200 TR; B21 5 703 - BROCA Ø10,0X70/220 TR; B21 5 704 - BROCA Ø10,0X70/250 TR; B21 5 705 - BROCA Ø10,0X70/300 TR; B21 5 706 - BROCA Ø10,0X70/350 TR; B21 5 707 - BROCA Ø10,0X70/400 TR; B21 5 708 - BROCA Ø10,0 GRADUADA TR; B21 5 709 - BROCA Ø10,0X30/200 GRADUADA TR; B21 5 710 - BROCA Ø10,0X30/220 GRADUADA TR; B21 5 711 - BROCA Ø10,0X30/250 GRADUADA TR; B21 5 712 - BROCA Ø10,0X40/200 GRADUADA TR; B21 5 713 - BROCA Ø10,0X40/220 GRADUADA TR; B21 5 714 - BROCA Ø10,0X40/250 GRADUADA TR; B21 5 715 - BROCA Ø10,0X40/300 GRADUADA TR; B21 5 716 - BROCA Ø10,0X40/350 GRADUADA TR; B21 5 717 - BROCA Ø10,0X40/400 GRADUADA TR; B21 5 718 - BROCA Ø10,0X50/200 GRADUADA TR; B21 5 719 - BROCA Ø10,0X50/220 GRADUADA TR; B21 5 720 - BROCA Ø10,0X50/250 GRADUADA TR; B21 5 721 - BROCA Ø10,0X50/300 GRADUADA TR; B21 5 722 - BROCA Ø10,0X50/350 GRADUADA TR; B21 5 723 - BROCA Ø10,0X50/400 GRADUADA TR; B21 5 724 - BROCA Ø10,0X70/200 GRADUADA TR; B21 5 725 - BROCA Ø10,0X70/220 GRADUADA TR; B21 5 726 - BROCA Ø10,0X70/250 GRADUADA TR; B21 5 727 - BROCA Ø10,0X70/300 GRADUADA TR; B21 5 728 - BROCA Ø10,0X70/350 GRADUADA TR; B21 5 729 - BROCA Ø10,0X70/400 GRADUADA TR; B21 5 730 - BROCA Ø11,0 TR; B21 5 731 - BROCA Ø11,0X30/200 TR; B21 5 732 - BROCA Ø11,0X30/220 TR; B21 5 733 - BROCA Ø11,0X30/250 TR; B21 5 734 - BROCA Ø11,0X40/200 TR; B21 5 735 - BROCA Ø11,0X40/220 TR; B21 5 736 - BROCA Ø11,0X40/250 TR; B21 5 737 - BROCA Ø11,0X40/300 TR; B21 5 738 - BROCA Ø11,0X40/350 TR; B21 5 739 - BROCA Ø11,0X40/400 TR; B21 5 740 - BROCA Ø11,0X50/200 TR; B21 5 741 - BROCA Ø11,0X50/220

[illegible]

GRADUADA TR; B21 5 931 - BROCA Ø15,0X30/250 GRADUADA TR; B21 5 932 - BROCA Ø15,0X40/200 GRADUADA TR; B21 5 933 - BROCA Ø15,0X40/220 GRADUADA TR; B21 5 934 - BROCA Ø15,0X40/250 GRADUADA TR; B21 5 935 - BROCA Ø15,0X40/300 GRADUADA TR; B21 5 936 - BROCA Ø15,0X40/350 GRADUADA TR; B21 5 937 - BROCA Ø15,0X40/400 GRADUADA TR; B21 5 938 - BROCA Ø15,0X50/200 GRADUADA TR; B21 5 939 - BROCA Ø15,0X50/220 GRADUADA TR; B21 5 940 - BROCA Ø15,0X50/250 GRADUADA TR; B21 5 941 - BROCA Ø15,0X50/300 GRADUADA TR; B21 5 942 - BROCA Ø15,0X50/350 GRADUADA TR; B21 5 943 - BROCA Ø15,0X50/400 GRADUADA TR; B21 5 944 - BROCA Ø15,0X70/200 GRADUADA TR; B21 5 945 - BROCA Ø15,0X70/220 GRADUADA TR; B21 5 946 - BROCA Ø15,0X70/250 GRADUADA TR; B21 5 947 - BROCA Ø15,0X70/300 GRADUADA TR; B21 5 948 - BROCA Ø15,0X70/350 GRADUADA TR; B21 5 949 - BROCA Ø15,0X70/400 GRADUADA TR; B21 6 100 - BROCA Ø1,0 ST; B21 6 101 - BROCA Ø1,0X15/40 ST; B21 6 102 - BROCA Ø1,0X15/50 ST; B21 6 103 - BROCA Ø1,0X15/60 ST; B21 6 104 - BROCA Ø1,0X15/80 ST; B21 6 105 - BROCA Ø1,0X15/100 ST; B21 6 106 - BROCA Ø1,0X15/120 ST; B21 6 107 - BROCA Ø1,0X15/150 ST; B21 6 108 - BROCA Ø1,0X20/50 ST; B21 6 109 - BROCA Ø1,0X20/60 ST; B21 6 110 - BROCA Ø1,0X20/80 ST; B21 6 111 - BROCA Ø1,0X20/100 ST; B21 6 112 - BROCA Ø1,0X20/120 ST; B21 6 113 - BROCA Ø1,0X20/150 ST; B21 6 114 - BROCA Ø1,0X25/60 ST; B21 6 115 - BROCA Ø1,0X25/80 ST; B21 6 116 - BROCA Ø1,0X25/100 ST; B21 6 117 - BROCA Ø1,0X25/120 ST; B21 6 118 - BROCA Ø1,0X25/150 ST; B21 6 119 - BROCA Ø1,0X30/80 ST; B21 6 120 - BROCA Ø1,0X30/100 ST; B21 6 121 - BROCA Ø1,0X30/120 ST; B21 6 122 - BROCA Ø1,0X30/150 ST; B21 6 123 - BROCA Ø1,0X40/100 ST; B21 6 124 - BROCA Ø1,0X40/120 ST; B21 6 125 - BROCA Ø1,0X40/150 ST; B21 6 126 - BROCA Ø1,0 REBAIXADA ST; B21 6 127 - BROCA Ø1,0X15/40 REBAIXADA ST; B21 6 128 - BROCA Ø1,0X15/50 REBAIXADA ST; B21 6 129 - BROCA Ø1,0X15/60 REBAIXADA ST; B21 6 130 - BROCA Ø1,0X15/80 REBAIXADA ST; B21 6 131 - BROCA Ø1,0X15/100 REBAIXADA ST; B21 6 132 - BROCA Ø1,0X15/120 REBAIXADA ST; B21 6 133 - BROCA Ø1,0X15/150 REBAIXADA ST; B21 6 134 - BROCA Ø1,0X20/50 REBAIXADA ST; B21 6 135 - BROCA Ø1,0X20/60 REBAIXADA ST; B21 6 136 - BROCA Ø1,0X20/80 REBAIXADA ST; B21 6 137 - BROCA Ø1,0X20/100 REBAIXADA ST; B21 6 138 - BROCA Ø1,0X20/120 REBAIXADA ST; B21 6 139 - BROCA Ø1,0X20/150 REBAIXADA ST; B21 6 140 - BROCA Ø1,0X25/60 REBAIXADA ST; B21 6 141 - BROCA Ø1,0X25/80 REBAIXADA ST; B21 6 142 - BROCA Ø1,0X25/100 REBAIXADA ST; B21 6 143 - BROCA Ø1,0X25/120 REBAIXADA ST; B21 6 144 - BROCA Ø1,0X25/150 REBAIXADA ST; B21 6 145 - BROCA Ø1,0X30/80 REBAIXADA ST; B21 6 146 - BROCA Ø1,0X30/100 REBAIXADA ST; B21 6 147 - BROCA Ø1,0X30/120 REBAIXADA ST; B21 6 148 - BROCA Ø1,0X30/150 REBAIXADA ST; B21 6 149 - BROCA Ø1,0X40/100 REBAIXADA ST; B21 6 150 - BROCA Ø1,0X40/120 REBAIXADA ST; B21 6 151 - BROCA Ø1,0X40/150 REBAIXADA ST; B21 6 152 - BROCA Ø1,1 ST; B21 6 153 - BROCA Ø1,1X15/40 ST; B21 6 154 - BROCA Ø1,1X15/50 ST; B21 6 155 - BROCA Ø1,1X15/60 ST; B21 6 156 - BROCA Ø1,1X15/80 ST; B21 6 157 - BROCA Ø1,1X15/100 ST; B21 6 158 - BROCA Ø1,1X15/120 ST; B21 6 159 - BROCA Ø1,1X15/150 ST; B21 6 160 - BROCA Ø1,1X20/50 ST; B21 6 161 - BROCA Ø1,1X20/60 ST; B21 6 162 - BROCA Ø1,1X20/80 ST; B21 6 163 - BROCA Ø1,1X20/100 ST; B21 6 164 - BROCA Ø1,1X20/120 ST; B21 6 165 - BROCA Ø1,1X20/150 ST; B21 6 166 - BROCA Ø1,1X25/60 ST; B21 6 167 - BROCA Ø1,1X25/80 ST; B21 6 168 - BROCA Ø1,1X25/100 ST; B21 6 169 - BROCA Ø1,1X25/120 ST; B21 6 170 - BROCA Ø1,1X25/150 ST; B21 6 171 - BROCA Ø1,1X30/80 ST; B21 6 172 - BROCA Ø1,1X30/100 ST; B21 6 173 - BROCA Ø1,1X30/120 ST; B21 6 174 - BROCA Ø1,1X30/150 ST; B21 6 175 - BROCA Ø1,1X40/100 ST; B21 6 176 - BROCA Ø1,1X40/120 ST; B21 6 177 - BROCA Ø1,1X40/150 ST; B21 6 178 - BROCA Ø1,1 REBAIXADA ST; B21 6 179 - BROCA Ø1,1X15/40 REBAIXADA ST; B21 6 180 - BROCA Ø1,1X15/50 REBAIXADA ST; B21 6 181 - BROCA Ø1,1X15/60 REBAIXADA ST; B21 6 182 - BROCA Ø1,1X15/80 REBAIXADA ST; B21 6 183 - BROCA Ø1,1X15/100 REBAIXADA ST; B21 6 184 - BROCA Ø1,1X15/120 REBAIXADA ST; B21 6 185 - BROCA Ø1,1X15/150 REBAIXADA ST; B21 6 186 - BROCA Ø1,1X20/50 REBAIXADA ST; B21 6 187 - BROCA Ø1,1X20/60 REBAIXADA ST; B21 6 188 - BROCA Ø1,1X20/80 REBAIXADA ST; B21 6 189 - BROCA Ø1,1X20/100 REBAIXADA ST; B21 6 190 - BROCA Ø1,1X20/120 REBAIXADA ST; B21 6 191 - BROCA Ø1,1X20/150 REBAIXADA ST; B21 6 192 - BROCA Ø1,1X25/60 REBAIXADA ST; B21 6 193 - BROCA Ø1,1X25/80 REBAIXADA ST; B21 6 194 - BROCA Ø1,1X25/100 REBAIXADA ST; B21 6 195 - BROCA Ø1,1X25/120 REBAIXADA ST; B21 6 196 - BROCA Ø1,1X25/150 REBAIXADA ST; B21 6 197 - BROCA Ø1,1X30/80 REBAIXADA ST; B21 6 198 - BROCA Ø1,1X30/100 REBAIXADA ST; B21 6 199 - BROCA Ø1,1X30/120 REBAIXADA ST; B21 6 200 - BROCA Ø1,1X30/150 REBAIXADA ST; B21 6 201 - BROCA Ø1,1X40/100 REBAIXADA ST; B21 6 202 - BROCA Ø1,1X40/120 REBAIXADA ST; B21 6 203 - BROCA Ø1,1X40/150 REBAIXADA ST; B21 6 204 - BROCA Ø1,2 ST; B21 6 205 - BROCA Ø1,2X15/40 ST; B21 6 206 - BROCA Ø1,2X15/50 ST; B21 6 207 - BROCA Ø1,2X15/60 ST; B21 6 208 - BROCA Ø1,2X15/80 ST; B21 6 209 - BROCA Ø1,2X15/100 ST; B21 6 210 - BROCA Ø1,2X15/120 ST; B21 6 211 - BROCA Ø1,2X15/150 ST; B21 6 212 - BROCA Ø1,2X20/50 ST; B21 6 213 - BROCA Ø1,2X20/60 ST; B21 6 214 - BROCA Ø1,2X20/80 ST; B21 6 215 - BROCA Ø1,2X20/100 ST; B21 6 216 - BROCA Ø1,2X20/120 ST; B21 6 217 - BROCA Ø1,2X20/150 ST; B21 6 218 - BROCA Ø1,2X25/60 ST; B21 6 219 - BROCA Ø1,2X25/80 ST; B21 6 220 - BROCA Ø1,2X25/100 ST; B21 6 221 - BROCA Ø1,2X25/120 ST; B21 6 222 - BROCA Ø1,2X25/150 ST; B21 6 223 - BROCA Ø1,2X30/80 ST; B21 6 224 - BROCA Ø1,2X30/100 ST; B21 6 225 - BROCA Ø1,2X30/120 ST; B21 6 226 - BROCA Ø1,2X30/150 ST; B21 6 227 - BROCA Ø1,2X40/100 ST; B21 6 228 - BROCA Ø1,2X40/120 ST; B21 6 229 - BROCA Ø1,2X40/150 ST; B21 6 230 - BROCA Ø1,2 REBAIXADA ST; B21 6 231 - BROCA Ø1,2X15/40 REBAIXADA ST; B21 6 232 - BROCA Ø1,2X15/50 REBAIXADA ST; B21 6 233 - BROCA Ø1,2X15/60 REBAIXADA ST; B21 6 234 - BROCA Ø1,2X15/80 REBAIXADA ST; B21 6 235 - BROCA Ø1,2X15/100 REBAIXADA ST; B21 6 236 - BROCA Ø1,2X15/120 REBAIXADA ST; B21 6 237 - BROCA Ø1,2X15/150 REBAIXADA ST; B21 6 238 - BROCA Ø1,2X20/50 REBAIXADA ST; B21 6 239 - BROCA Ø1,2X20/60 REBAIXADA ST; B21 6 240 - BROCA Ø1,2X20/80 REBAIXADA ST; B21 6 241 - BROCA Ø1,2X20/100 REBAIXADA ST; B21 6 242 - BROCA Ø1,2X20/120 REBAIXADA ST; B21 6 243 - BROCA Ø1,2X20/150 REBAIXADA ST; B21 6 244 - BROCA Ø1,2X25/60 REBAIXADA ST; B21 6 245 - BROCA Ø1,2X25/80 REBAIXADA ST; B21 6 246 - BROCA Ø1,2X25/100 REBAIXADA ST; B21 6 247 - BROCA Ø1,2X25/120 REBAIXADA ST; B21 6 248 - BROCA Ø1,2X25/150 REBAIXADA ST; B21 6 249 - BROCA Ø1,2X30/80 REBAIXADA ST; B21 6 250 - BROCA Ø1,2X30/100 REBAIXADA ST; B21 6 251 - BROCA Ø1,2X30/120 REBAIXADA ST; B21 6 252 - BROCA Ø1,2X30/150 REBAIXADA ST; B21 6 253 - BROCA Ø1,2X40/100 REBAIXADA ST; B21 6 254 - BROCA Ø1,2X40/120 REBAIXADA ST; B21 6 255 - BROCA Ø1,2X40/150 REBAIXADA ST; B21 6 256 - BROCA Ø1,5 ST; B21 6 257 - BROCA Ø1,5X15/40 ST; B21 6 258 - BROCA Ø1,5X15/50 ST; B21 6 259 - BROCA Ø1,5X15/60 ST; B21 6 260 - BROCA Ø1,5X15/80 ST; B21 6 261 - BROCA Ø1,5X15/100 ST; B21 6 262 - BROCA Ø1,5X15/120 ST; B21 6 263 - BROCA Ø1,5X15/150 ST; B21 6 264 - BROCA Ø1,5X15/180 ST; B21 6 265 - BROCA Ø1,5X20/50 ST; B21 6 266 - BROCA Ø1,5X20/60 ST; B21 6 267 - BROCA Ø1,5X20/80 ST; B21 6 268 - BROCA Ø1,5X20/100 ST; B21 6 269 - BROCA Ø1,5X20/120 ST; B21 6 270 - BROCA Ø1,5X20/150 ST; B21 6 271 - BROCA Ø1,5X20/180 ST; B21 6 272 - BROCA Ø1,5X25/60 ST; B21 6 273 - BROCA Ø1,5X25/80 ST; B21 6 274 - BROCA Ø1,5X25/100 ST; B21 6 275 - BROCA Ø1,5X25/120 ST; B21 6 276 - BROCA Ø1,5X25/150 ST; B21

6 277 - BROCA Ø1,5X25/180 ST; B21 6 278 - BROCA Ø1,5X30/80 ST; B21 6 279 - BROCA Ø1,5X30/100 ST; B21 6 280 - BROCA Ø1,5X30/120 ST; B21 6 281 - BROCA Ø1,5X30/150 ST; B21 6 282 - BROCA Ø1,5X30/180 ST; B21 6 283 - BROCA Ø1,5X40/100 ST; B21 6 284 - BROCA Ø1,5X40/120 ST; B21 6 285 - BROCA Ø1,5X40/150 ST; B21 6 286 - BROCA Ø1,5X40/180 ST; B21 6 287 - BROCA Ø1,5X50/100 ST; B21 6 288 - BROCA Ø1,5X50/120 ST; B21 6 289 - BROCA Ø1,5X50/150 ST; B21 6 290 - BROCA Ø1,5X50/180 ST; B21 6 291 - BROCA Ø1,5 REBAIXADA ST; B21 6 292 - BROCA Ø1,5X15/40 REBAIXADA ST; B21 6 293 - BROCA Ø1,5X15/50 REBAIXADA ST; B21 6 294 - BROCA Ø1,5X15/60 REBAIXADA ST; B21 6 295 - BROCA Ø1,5X15/80 REBAIXADA ST; B21 6 296 - BROCA Ø1,5X15/100 REBAIXADA ST; B21 6 297 - BROCA Ø1,5X15/120 REBAIXADA ST; B21 6 298 - BROCA Ø1,5X15/150 REBAIXADA ST; B21 6 299 - BROCA Ø1,5X15/180 REBAIXADA ST; B21 6 300 - BROCA Ø1,5X20/50 REBAIXADA ST; B21 6 301 - BROCA Ø1,5X20/60 REBAIXADA ST; B21 6 302 - BROCA Ø1,5X20/80 REBAIXADA ST; B21 6 303 - BROCA Ø1,5X20/100 REBAIXADA ST; B21 6 304 - BROCA Ø1,5X20/120 REBAIXADA ST; B21 6 305 - BROCA Ø1,5X20/150 REBAIXADA ST; B21 6 306 - BROCA Ø1,5X20/180 REBAIXADA ST; B21 6 307 - BROCA Ø1,5X25/60 REBAIXADA ST; B21 6 308 - BROCA Ø1,5X25/80 REBAIXADA ST; B21 6 309 - BROCA Ø1,5X25/100 REBAIXADA ST; B21 6 310 - BROCA Ø1,5X25/120 REBAIXADA ST; B21 6 311 - BROCA Ø1,5X25/150 REBAIXADA ST; B21 6 312 - BROCA Ø1,5X25/180 REBAIXADA ST; B21 6 313 - BROCA Ø1,5X30/80 REBAIXADA ST; B21 6 314 - BROCA Ø1,5X30/100 REBAIXADA ST; B21 6 315 - BROCA Ø1,5X30/120 REBAIXADA ST; B21 6 316 - BROCA Ø1,5X30/150 REBAIXADA ST; B21 6 317 - BROCA Ø1,5X30/180 REBAIXADA ST; B21 6 318 - BROCA Ø1,5X40/100 REBAIXADA ST; B21 6 319 - BROCA Ø1,5X40/120 REBAIXADA ST; B21 6 320 - BROCA Ø1,5X40/150 REBAIXADA ST; B21 6 321 - BROCA Ø1,5X40/180 REBAIXADA ST; B21 6 322 - BROCA Ø1,5X50/100 REBAIXADA ST; B21 6 323 - BROCA Ø1,5X50/120 REBAIXADA ST; B21 6 324 - BROCA Ø1,5X50/150 REBAIXADA ST; B21 6 325 - BROCA Ø1,5X50/180 REBAIXADA ST; B21 6 326 - BROCA Ø1,6 ST; B21 6 327 - BROCA Ø1,6X15/40 ST; B21 6 328 - BROCA Ø1,6X15/50 ST; B21 6 329 - BROCA Ø1,6X15/60 ST; B21 6 330 - BROCA Ø1,6X15/80 ST; B21 6 331 - BROCA Ø1,6X15/100 ST; B21 6 332 - BROCA Ø1,6X15/120 ST; B21 6 333 - BROCA Ø1,6X15/150 ST; B21 6 334 - BROCA Ø1,6X15/180 ST; B21 6 335 - BROCA Ø1,6X20/50 ST; B21 6 336 - BROCA Ø1,6X20/60 ST; B21 6 337 - BROCA Ø1,6X20/80 ST; B21 6 338 - BROCA Ø1,6X20/100 ST; B21 6 339 - BROCA Ø1,6X20/120 ST; B21 6 340 - BROCA Ø1,6X20/150 ST; B21 6 341 - BROCA Ø1,6X20/180 ST; B21 6 342 - BROCA Ø1,6X25/60 ST; B21 6 343 - BROCA Ø1,6X25/80 ST; B21 6 344 - BROCA Ø1,6X25/100 ST; B21 6 345 - BROCA Ø1,6X25/120 ST; B21 6 346 - BROCA Ø1,6X25/150 ST; B21 6 347 - BROCA Ø1,6X25/180 ST; B21 6 348 - BROCA Ø1,6X30/80 ST; B21 6 349 - BROCA Ø1,6X30/100 ST; B21 6 350 - BROCA Ø1,6X30/120 ST; B21 6 351 - BROCA Ø1,6X30/150 ST; B21 6 352 - BROCA Ø1,6X30/180 ST; B21 6 353 - BROCA Ø1,6X40/100 ST; B21 6 354 - BROCA Ø1,6X40/120 ST; B21 6 355 - BROCA Ø1,6X40/150 ST; B21 6 356 - BROCA Ø1,6X40/180 ST; B21 6 357 - BROCA Ø1,6X50/100 ST; B21 6 358 - BROCA Ø1,6X50/120 ST; B21 6 359 - BROCA Ø1,6X50/150 ST; B21 6 360 - BROCA Ø1,6X50/180 ST; B21 6 361 - BROCA Ø1,6 REBAIXADA ST; B21 6 362 - BROCA Ø1,6X15/40 REBAIXADA ST; B21 6 363 - BROCA Ø1,6X15/50 REBAIXADA ST; B21 6 364 - BROCA Ø1,6X15/60 REBAIXADA ST; B21 6 365 - BROCA Ø1,6X15/80 REBAIXADA ST; B21 6 366 - BROCA Ø1,6X15/100 REBAIXADA ST; B21 6 367 - BROCA Ø1,6X15/120 REBAIXADA ST; B21 6 368 - BROCA Ø1,6X15/150 REBAIXADA ST; B21 6 369 - BROCA Ø1,6X15/180 REBAIXADA ST; B21 6 370 - BROCA Ø1,6X20/50 REBAIXADA ST; B21 6 371 - BROCA Ø1,6X20/60 REBAIXADA ST; B21 6 372 - BROCA Ø1,6X20/80 REBAIXADA ST; B21 6 373 - BROCA Ø1,6X20/100 REBAIXADA ST; B21 6 374 - BROCA Ø1,6X20/120 REBAIXADA ST; B21 6 375 - BROCA Ø1,6X20/150 REBAIXADA ST; B21 6 376 - BROCA Ø1,6X20/180 REBAIXADA ST; B21 6 377 - BROCA Ø1,6X25/60 REBAIXADA ST; B21 6 378 - BROCA Ø1,6X25/80 REBAIXADA ST; B21 6 379 - BROCA Ø1,6X25/100 REBAIXADA ST; B21 6 380 - BROCA Ø1,6X25/120 REBAIXADA ST; B21 6 381 - BROCA Ø1,6X25/150 REBAIXADA ST; B21 6 382 - BROCA Ø1,6X25/180 REBAIXADA ST; B21 6 383 - BROCA Ø1,6X30/80 REBAIXADA ST; B21 6 384 - BROCA Ø1,6X30/100 REBAIXADA ST; B21 6 385 - BROCA Ø1,6X30/120 REBAIXADA ST; B21 6 386 - BROCA Ø1,6X30/150 REBAIXADA ST; B21 6 387 - BROCA Ø1,6X30/180 REBAIXADA ST; B21 6 388 - BROCA Ø1,6X40/100 REBAIXADA ST; B21 6 389 - BROCA Ø1,6X40/120 REBAIXADA ST; B21 6 390 - BROCA Ø1,6X40/150 REBAIXADA ST; B21 6 391 - BROCA Ø1,6X40/180 REBAIXADA ST; B21 6 392 - BROCA Ø1,6X50/100 REBAIXADA ST; B21 6 393 - BROCA Ø1,6X50/120 REBAIXADA ST; B21 6 394 - BROCA Ø1,6X50/150 REBAIXADA ST; B21 6 395 - BROCA Ø1,6X50/180 REBAIXADA ST; B21 6 396 - BROCA Ø1,8 ST; B21 6 397 - BROCA Ø1,8X15/60 ST; B21 6 398 - BROCA Ø1,8X15/80 ST; B21 6 399 - BROCA Ø1,8X15/100 ST; B21 6 400 - BROCA Ø1,8X15/120 ST; B21 6 401 - BROCA Ø1,8X15/150 ST; B21 6 402 - BROCA Ø1,8X20/50 ST; B21 6 403 - BROCA Ø1,8X20/60 ST; B21 6 404 - BROCA Ø1,8X20/80 ST; B21 6 405 - BROCA Ø1,8X20/100 ST; B21 6 406 - BROCA Ø1,8X20/120 ST; B21 6 407 - BROCA Ø1,8X20/150 ST; B21 6 408 - BROCA Ø1,8X25/60 ST; B21 6 409 - BROCA Ø1,8X25/80 ST; B21 6 410 - BROCA Ø1,8X25/100 ST; B21 6 411 - BROCA Ø1,8X25/120 ST; B21 6 412 - BROCA Ø1,8X25/150 ST; B21 6 413 - BROCA Ø1,8X25/180 ST; B21 6 414 - BROCA Ø1,8X25/200 ST; B21 6 415 - BROCA Ø1,8X30/80 ST; B21 6 416 - BROCA Ø1,8X30/100 ST; B21 6 417 - BROCA Ø1,8X30/120 ST; B21 6 418 - BROCA Ø1,8X30/150 ST; B21 6 419 - BROCA Ø1,8X30/180 ST; B21 6 420 - BROCA Ø1,8X30/200 ST; B21 6 421 - BROCA Ø1,8X40/100 ST; B21 6 422 - BROCA Ø1,8X40/120 ST; B21 6 423 - BROCA Ø1,8X40/150 ST; B21 6 424 - BROCA Ø1,8X40/180 ST; B21 6 425 - BROCA Ø1,8X40/200 ST; B21 6 426 - BROCA Ø1,8X40/220 ST; B21 6 427 - BROCA Ø1,8X50/100 ST; B21 6 428 - BROCA Ø1,8X50/120 ST; B21 6 429 - BROCA Ø1,8X50/150 ST; B21 6 430 - BROCA Ø1,8X50/180 ST; B21 6 431 - BROCA Ø1,8X50/200 ST; B21 6 432 - BROCA Ø1,8X50/220 ST; B21 6 433 - BROCA Ø1,8 REBAIXADA ST; B21 6 434 - BROCA Ø1,8X15/60 REBAIXADA ST; B21 6 435 - BROCA Ø1,8X15/80 REBAIXADA ST; B21 6 436 - BROCA Ø1,8X15/100 REBAIXADA ST; B21 6 437 - BROCA Ø1,8X15/120 REBAIXADA ST; B21 6 438 - BROCA Ø1,8X15/150 REBAIXADA ST; B21 6 439 - BROCA Ø1,8X20/50 REBAIXADA ST; B21 6 440 - BROCA Ø1,8X20/60 REBAIXADA ST; B21 6 441 - BROCA Ø1,8X20/80 REBAIXADA ST; B21 6 442 - BROCA Ø1,8X20/100 REBAIXADA ST; B21 6 443 - BROCA Ø1,8X20/120 REBAIXADA ST; B21 6 444 - BROCA Ø1,8X20/150 REBAIXADA ST; B21 6 445 - BROCA Ø1,8X25/60 REBAIXADA ST; B21 6 446 - BROCA Ø1,8X25/80 REBAIXADA ST; B21 6 447 - BROCA Ø1,8X25/100 REBAIXADA ST; B21 6 448 - BROCA Ø1,8X25/120 REBAIXADA ST; B21 6 449 - BROCA Ø1,8X25/150 REBAIXADA ST; B21 6 450 - BROCA Ø1,8X25/180 REBAIXADA ST; B21 6 451 - BROCA Ø1,8X25/200 REBAIXADA ST; B21 6 452 - BROCA Ø1,8X30/80 REBAIXADA ST; B21 6 453 - BROCA Ø1,8X30/100 REBAIXADA ST; B21 6 454 - BROCA Ø1,8X30/120 REBAIXADA ST; B21 6 455 - BROCA Ø1,8X30/150 REBAIXADA ST; B21 6 456 - BROCA Ø1,8X30/180 REBAIXADA ST; B21 6 457 - BROCA Ø1,8X30/200 REBAIXADA ST; B21 6 458 - BROCA Ø1,8X40/100 REBAIXADA ST; B21 6 459 - BROCA Ø1,8X40/120 REBAIXADA ST; B21 6 460 - BROCA Ø1,8X40/150 REBAIXADA ST; B21 6 461 - BROCA Ø1,8X40/180 REBAIXADA ST; B21 6 462 - BROCA Ø1,8X40/200 REBAIXADA ST; B21 6 463 - BROCA Ø1,8X40/220 REBAIXADA ST; B21 6 464 - BROCA Ø1,8X50/100 REBAIXADA ST; B21 6 465 - BROCA Ø1,8X50/120 REBAIXADA ST; B21 6 466 - BROCA Ø1,8X50/150 REBAIXADA ST; B21 6 467 - BROCA Ø1,8X50/180 REBAIXADA ST; B21 6 468 - BROCA Ø1,8X50/200 REBAIXADA ST; B21 6 469 - BROCA

Ø1,8X50/220 REBAIXADA ST; B21 6 470 - BROCA Ø2,0 ST; B21 6 471 - BROCA Ø2,0X15/60 ST; B21 6 472 - BROCA Ø2,0X15/80 ST; B21 6 473 - BROCA Ø2,0X15/100 ST; B21 6 474 - BROCA Ø2,0X15/120 ST; B21 6 475 - BROCA Ø2,0X15/150 ST; B21 6 476 - BROCA Ø2,0X20/60 ST; B21 6 477 - BROCA Ø2,0X20/80 ST; B21 6 478 - BROCA Ø2,0X20/100 ST; B21 6 479 - BROCA Ø2,0X20/120 ST; B21 6 480 - BROCA Ø2,0X20/150 ST; B21 6 481 - BROCA Ø2,0X25/80 ST; B21 6 482 - BROCA Ø2,0X25/100 ST; B21 6 483 - BROCA Ø2,0X25/120 ST; B21 6 484 - BROCA Ø2,0X25/150 ST; B21 6 485 - BROCA Ø2,0X25/180 ST; B21 6 486 - BROCA Ø2,0X25/200 ST; B21 6 487 - BROCA Ø2,0X30/80 ST; B21 6 488 - BROCA Ø2,0X30/100 ST; B21 6 489 - BROCA Ø2,0X30/120 ST; B21 6 490 - BROCA Ø2,0X30/150 ST; B21 6 491 - BROCA Ø2,0X30/180 ST; B21 6 492 - BROCA Ø2,0X30/200 ST; B21 6 493 - BROCA Ø2,0X40/100 ST; B21 6 494 - BROCA Ø2,0X40/120 ST; B21 6 495 - BROCA Ø2,0X40/150 ST; B21 6 496 - BROCA Ø2,0X40/180 ST; B21 6 497 - BROCA Ø2,0X40/200 ST; B21 6 498 - BROCA Ø2,0X40/220 ST; B21 6 499 - BROCA Ø2,0X40/250 ST; B21 6 500 - BROCA Ø2,0X50/100 ST; B21 6 501 - BROCA Ø2,0X50/120 ST; B21 6 502 - BROCA Ø2,0X50/150 ST; B21 6 503 - BROCA Ø2,0X50/180 ST; B21 6 504 - BROCA Ø2,0X50/200 ST; B21 6 505 - BROCA Ø2,0X50/220 ST; B21 6 506 - BROCA Ø2,0X50/250 ST; B21 6 507 - BROCA Ø2,0 REBAIXADA ST; B21 6 508 - BROCA Ø2,0X15/60 REBAIXADA ST; B21 6 509 - BROCA Ø2,0X15/80 REBAIXADA ST; B21 6 510 - BROCA Ø2,0X15/100 REBAIXADA ST; B21 6 511 - BROCA Ø2,0X15/120 REBAIXADA ST; B21 6 512 - BROCA Ø2,0X15/150 REBAIXADA ST; B21 6 513 - BROCA Ø2,0X20/60 REBAIXADA ST; B21 6 514 - BROCA Ø2,0X20/80 REBAIXADA ST; B21 6 515 - BROCA Ø2,0X20/100 REBAIXADA ST; B21 6 516 - BROCA Ø2,0X20/120 REBAIXADA ST; B21 6 517 - BROCA Ø2,0X20/150 REBAIXADA ST; B21 6 518 - BROCA Ø2,0X25/80 REBAIXADA ST; B21 6 519 - BROCA Ø2,0X25/100 REBAIXADA ST; B21 6 520 - BROCA Ø2,0X25/120 REBAIXADA ST; B21 6 521 - BROCA Ø2,0X25/150 REBAIXADA ST; B21 6 522 - BROCA Ø2,0X25/180 REBAIXADA ST; B21 6 523 - BROCA Ø2,0X25/200 REBAIXADA ST; B21 6 524 - BROCA Ø2,0X30/80 REBAIXADA ST; B21 6 525 - BROCA Ø2,0X30/100 REBAIXADA ST; B21 6 526 - BROCA Ø2,0X30/120 REBAIXADA ST; B21 6 527 - BROCA Ø2,0X30/150 REBAIXADA ST; B21 6 528 - BROCA Ø2,0X30/180 REBAIXADA ST; B21 6 529 - BROCA Ø2,0X30/200 REBAIXADA ST; B21 6 530 - BROCA Ø2,0X40/100 REBAIXADA ST; B21 6 531 - BROCA Ø2,0X40/120 REBAIXADA ST; B21 6 532 - BROCA Ø2,0X40/150 REBAIXADA ST; B21 6 533 - BROCA Ø2,0X40/180 REBAIXADA ST; B21 6 534 - BROCA Ø2,0X40/200 REBAIXADA ST; B21 6 535 - BROCA Ø2,0X40/220 REBAIXADA ST; B21 6 536 - BROCA Ø2,0X40/250 REBAIXADA ST; B21 6 537 - BROCA Ø2,0X50/100 REBAIXADA ST; B21 6 538 - BROCA Ø2,0X50/120 REBAIXADA ST; B21 6 539 - BROCA Ø2,0X50/150 REBAIXADA ST; B21 6 540 - BROCA Ø2,0X50/180 REBAIXADA ST; B21 6 541 - BROCA Ø2,0X50/200 REBAIXADA ST; B21 6 542 - BROCA Ø2,0X50/220 REBAIXADA ST; B21 6 543 - BROCA Ø2,0X50/250 REBAIXADA ST; B21 6 544 - BROCA Ø2,2 ST; B21 6 545 - BROCA Ø2,2X15/60 ST; B21 6 546 - BROCA Ø2,2X15/80 ST; B21 6 547 - BROCA Ø2,2X15/100 ST; B21 6 548 - BROCA Ø2,2X15/120 ST; B21 6 549 - BROCA Ø2,2X15/150 ST; B21 6 550 - BROCA Ø2,2X20/60 ST; B21 6 551 - BROCA Ø2,2X20/80 ST; B21 6 552 - BROCA Ø2,2X20/100 ST; B21 6 553 - BROCA Ø2,2X20/120 ST; B21 6 554 - BROCA Ø2,2X20/150 ST; B21 6 555 - BROCA Ø2,2X25/80 ST; B21 6 556 - BROCA Ø2,2X25/100 ST; B21 6 557 - BROCA Ø2,2X25/120 ST; B21 6 558 - BROCA Ø2,2X25/150 ST; B21 6 559 - BROCA Ø2,2X25/180 ST; B21 6 560 - BROCA Ø2,2X25/200 ST; B21 6 561 - BROCA Ø2,2X30/80 ST; B21 6 562 - BROCA Ø2,2X30/100 ST; B21 6 563 - BROCA Ø2,2X30/120 ST; B21 6 564 - BROCA Ø2,2X30/150 ST; B21 6 565 - BROCA Ø2,2X30/180 ST; B21 6 566 - BROCA Ø2,2X30/200 ST; B21 6 567 - BROCA Ø2,2X40/100 ST; B21 6 568 - BROCA Ø2,2X40/120 ST; B21 6 569 - BROCA Ø2,2X40/150 ST; B21 6 570 - BROCA Ø2,2X40/180 ST; B21 6 571 - BROCA Ø2,2X40/200 ST; B21 6 572 - BROCA Ø2,2X40/220 ST; B21 6 573 - BROCA Ø2,2X40/250 ST; B21 6 574 - BROCA Ø2,2X50/100 ST; B21 6 575 - BROCA Ø2,2X50/120 ST; B21 6 576 - BROCA Ø2,2X50/150 ST; B21 6 577 - BROCA Ø2,2X50/180 ST; B21 6 578 - BROCA Ø2,2X50/200 ST; B21 6 579 - BROCA Ø2,2X50/220 ST; B21 6 580 - BROCA Ø2,2X50/250 ST; B21 6 581 - BROCA Ø2,2 REBAIXADA ST; B21 6 582 - BROCA Ø2,2X15/60 REBAIXADA ST; B21 6 583 - BROCA Ø2,2X15/80 REBAIXADA ST; B21 6 584 - BROCA Ø2,2X15/100 REBAIXADA ST; B21 6 585 - BROCA Ø2,2X15/120 REBAIXADA ST; B21 6 586 - BROCA Ø2,2X15/150 REBAIXADA ST; B21 6 587 - BROCA Ø2,2X20/60 REBAIXADA ST; B21 6 588 - BROCA Ø2,2X20/80 REBAIXADA ST; B21 6 589 - BROCA Ø2,2X20/100 REBAIXADA ST; B21 6 590 - BROCA Ø2,2X20/120 REBAIXADA ST; B21 6 591 - BROCA Ø2,2X20/150 REBAIXADA ST; B21 6 592 - BROCA Ø2,2X25/80 REBAIXADA ST; B21 6 593 - BROCA Ø2,2X25/100 REBAIXADA ST; B21 6 594 - BROCA Ø2,2X25/120 REBAIXADA ST; B21 6 595 - BROCA Ø2,2X25/150 REBAIXADA ST; B21 6 596 - BROCA Ø2,2X25/180 REBAIXADA ST; B21 6 597 - BROCA Ø2,2X25/200 REBAIXADA ST; B21 6 598 - BROCA Ø2,2X30/80 REBAIXADA ST; B21 6 599 - BROCA Ø2,2X30/100 REBAIXADA ST; B21 6 600 - BROCA Ø2,2X30/120 REBAIXADA ST; B21 6 601 - BROCA Ø2,2X30/150 REBAIXADA ST; B21 6 602 - BROCA Ø2,2X30/180 REBAIXADA ST; B21 6 603 - BROCA Ø2,2X30/200 REBAIXADA ST; B21 6 604 - BROCA Ø2,2X40/100 REBAIXADA ST; B21 6 605 - BROCA Ø2,2X40/120 REBAIXADA ST; B21 6 606 - BROCA Ø2,2X40/150 REBAIXADA ST; B21 6 607 - BROCA Ø2,2X40/180 REBAIXADA ST; B21 6 608 - BROCA Ø2,2X40/200 REBAIXADA ST; B21 6 609 - BROCA Ø2,2X40/220 REBAIXADA ST; B21 6 610 - BROCA Ø2,2X40/250 REBAIXADA ST; B21 6 611 - BROCA Ø2,2X50/100 REBAIXADA ST; B21 6 612 - BROCA Ø2,2X50/120 REBAIXADA ST; B21 6 613 - BROCA Ø2,2X50/150 REBAIXADA ST; B21 6 614 - BROCA Ø2,2X50/180 REBAIXADA ST; B21 6 615 - BROCA Ø2,2X50/200 REBAIXADA ST; B21 6 616 - BROCA Ø2,2X50/220 REBAIXADA ST; B21 6 617 - BROCA Ø2,2X50/250 REBAIXADA ST; B21 6 618 - BROCA Ø2,5 ST; B21 6 619 - BROCA Ø2,5X15/60 ST; B21 6 620 - BROCA Ø2,5X15/80 ST; B21 6 621 - BROCA Ø2,5X15/100 ST; B21 6 622 - BROCA Ø2,5X15/120 ST; B21 6 623 - BROCA Ø2,5X15/150 ST; B21 6 624 - BROCA Ø2,5X20/60 ST; B21 6 625 - BROCA Ø2,5X20/80 ST; B21 6 626 - BROCA Ø2,5X20/100 ST; B21 6 627 - BROCA Ø2,5X20/120 ST; B21 6 628 - BROCA Ø2,5X20/150 ST; B21 6 629 - BROCA Ø2,5X25/80 ST; B21 6 630 - BROCA Ø2,5X25/100 ST; B21 6 631 - BROCA Ø2,5X25/120 ST; B21 6 632 - BROCA Ø2,5X25/150 ST; B21 6 633 - BROCA Ø2,5X25/180 ST; B21 6 634 - BROCA Ø2,5X25/200 ST; B21 6 635 - BROCA Ø2,5X30/80 ST; B21 6 636 - BROCA Ø2,5X30/100 ST; B21 6 637 - BROCA Ø2,5X30/120 ST; B21 6 638 - BROCA Ø2,5X30/150 ST; B21 6 639 - BROCA Ø2,5X30/180 ST; B21 6 640 - BROCA Ø2,5X30/200 ST; B21 6 641 - BROCA Ø2,5X40/100 ST; B21 6 642 - BROCA Ø2,5X40/120 ST; B21 6 643 - BROCA Ø2,5X40/150 ST; B21 6 644 - BROCA Ø2,5X40/180 ST; B21 6 645 - BROCA Ø2,5X40/200 ST; B21 6 646 - BROCA Ø2,5X40/220 ST; B21 6 647 - BROCA Ø2,5X40/250 ST; B21 6 648 - BROCA Ø2,5X40/300 ST; B21 6 649 - BROCA Ø2,5X50/100 ST; B21 6 650 - BROCA Ø2,5X50/120 ST; B21 6 651 - BROCA Ø2,5X50/150 ST; B21 6 652 - BROCA Ø2,5X50/180 ST; B21 6 653 - BROCA Ø2,5X50/200 ST; B21 6 654 - BROCA Ø2,5X50/220 ST; B21 6 655 - BROCA Ø2,5X50/250 ST; B21 6 656 - BROCA Ø2,5X50/300 ST; B21 6 657 - BROCA Ø2,5 REBAIXADA ST; B21 6 658 - BROCA Ø2,5X15/60 REBAIXADA ST; B21 6 659 - BROCA Ø2,5X15/80 REBAIXADA ST; B21 6 660 - BROCA Ø2,5X15/100 REBAIXADA ST; B21 6 661 - BROCA Ø2,5X15/120 REBAIXADA ST; B21 6 662 - BROCA Ø2,5X15/150 REBAIXADA ST; B21 6 663 - BROCA Ø2,5X20/60 REBAIXADA ST; B21 6 664 - BROCA Ø2,5X20/80 REBAIXADA ST; B21 6 665 - BROCA Ø2,5X20/100 REBAIXADA ST; B21 6 666 - BROCA Ø2,5X20/120 REBAIXADA ST; B21 6 667 - BROCA Ø2,5X20/150 REBAIXADA ST; B21 6 668 - BROCA Ø2,5X25/80 REBAIXADA ST; B21 6 669 - BROCA

Ø2,5X25/100 REBAIXADA ST; B21 6 670 - BROCA Ø2,5X25/120 REBAIXADA ST; B21 6 671 - BROCA Ø2,5X25/150 REBAIXADA ST; B21 6 672 - BROCA Ø2,5X25/180 REBAIXADA ST; B21 6 673 - BROCA Ø2,5X25/200 REBAIXADA ST; B21 6 674 - BROCA Ø2,5X30/80 REBAIXADA ST; B21 6 675 - BROCA Ø2,5X30/100 REBAIXADA ST; B21 6 676 - BROCA Ø2,5X30/120 REBAIXADA ST; B21 6 677 - BROCA Ø2,5X30/150 REBAIXADA ST; B21 6 678 - BROCA Ø2,5X30/180 REBAIXADA ST; B21 6 679 - BROCA Ø2,5X30/200 REBAIXADA ST; B21 6 680 - BROCA Ø2,5X40/100 REBAIXADA ST; B21 6 681 - BROCA Ø2,5X40/120 REBAIXADA ST; B21 6 682 - BROCA Ø2,5X40/150 REBAIXADA ST; B21 6 683 - BROCA Ø2,5X40/180 REBAIXADA ST; B21 6 684 - BROCA Ø2,5X40/200 REBAIXADA ST; B21 6 685 - BROCA Ø2,5X40/220 REBAIXADA ST; B21 6 686 - BROCA Ø2,5X40/250 REBAIXADA ST; B21 6 687 - BROCA Ø2,5X40/300 REBAIXADA ST; B21 6 688 - BROCA Ø2,5X50/100 REBAIXADA ST; B21 6 689 - BROCA Ø2,5X50/120 REBAIXADA ST; B21 6 690 - BROCA Ø2,5X50/150 REBAIXADA ST; B21 6 691 - BROCA Ø2,5X50/180 REBAIXADA ST; B21 6 692 - BROCA Ø2,5X50/200 REBAIXADA ST; B21 6 693 - BROCA Ø2,5X50/220 REBAIXADA ST; B21 6 694 - BROCA Ø2,5X50/250 REBAIXADA ST; B21 6 695 - BROCA Ø2,5X50/300 REBAIXADA ST; B21 6 696 - BROCA Ø3,0 ST; B21 6 697 - BROCA Ø3,0X15/60 ST; B21 6 698 - BROCA Ø3,0X15/80 ST; B21 6 699 - BROCA Ø3,0X15/100 ST; B21 6 700 - BROCA Ø3,0X15/120 ST; B21 6 701 - BROCA Ø3,0X15/150 ST; B21 6 702 - BROCA Ø3,0X20/60 ST; B21 6 703 - BROCA Ø3,0X20/80 ST; B21 6 704 - BROCA Ø3,0X20/100 ST; B21 6 705 - BROCA Ø3,0X20/120 ST; B21 6 706 - BROCA Ø3,0X20/150 ST; B21 6 707 - BROCA Ø3,0X25/80 ST; B21 6 708 - BROCA Ø3,0X25/100 ST; B21 6 709 - BROCA Ø3,0X25/120 ST; B21 6 710 - BROCA Ø3,0X25/150 ST; B21 6 711 - BROCA Ø3,0X25/180 ST; B21 6 712 - BROCA Ø3,0X25/200 ST; B21 6 713 - BROCA Ø3,0X30/80 ST; B21 6 714 - BROCA Ø3,0X30/100 ST; B21 6 715 - BROCA Ø3,0X30/120 ST; B21 6 716 - BROCA Ø3,0X30/150 ST; B21 6 717 - BROCA Ø3,0X30/180 ST; B21 6 718 - BROCA Ø3,0X30/200 ST; B21 6 719 - BROCA Ø3,0X30/220 ST; B21 6 720 - BROCA Ø3,0X30/250 ST; B21 6 721 - BROCA Ø3,0X40/100 ST; B21 6 722 - BROCA Ø3,0X40/120 ST; B21 6 723 - BROCA Ø3,0X40/150 ST; B21 6 724 - BROCA Ø3,0X40/180 ST; B21 6 725 - BROCA Ø3,0X40/200 ST; B21 6 726 - BROCA Ø3,0X40/220 ST; B21 6 727 - BROCA Ø3,0X40/250 ST; B21 6 728 - BROCA Ø3,0X40/300 ST; B21 6 729 - BROCA Ø3,0X40/350 ST; B21 6 730 - BROCA Ø3,0X50/100 ST; B21 6 731 - BROCA Ø3,0X50/120 ST; B21 6 732 - BROCA Ø3,0X50/150 ST; B21 6 733 - BROCA Ø3,0X50/180 ST; B21 6 734 - BROCA Ø3,0X50/200 ST; B21 6 735 - BROCA Ø3,0X50/220 ST; B21 6 736 - BROCA Ø3,0X50/250 ST; B21 6 737 - BROCA Ø3,0X50/300 ST; B21 6 738 - BROCA Ø3,0X50/350 ST; B21 6 739 - BROCA Ø3,0X70/200 ST; B21 6 740 - BROCA Ø3,0X70/220 ST; B21 6 741 - BROCA Ø3,0X70/250 ST; B21 6 742 - BROCA Ø3,0X70/300 ST; B21 6 743 - BROCA Ø3,0X70/350 ST; B21 6 744 - BROCA Ø3,0 REBAIXADA ST; B21 6 745 - BROCA Ø3,0X15/60 REBAIXADA ST; B21 6 746 - BROCA Ø3,0X15/80 REBAIXADA ST; B21 6 747 - BROCA Ø3,0X15/100 REBAIXADA ST; B21 6 748 - BROCA Ø3,0X15/120 REBAIXADA ST; B21 6 749 - BROCA Ø3,0X15/150 REBAIXADA ST; B21 6 750 - BROCA Ø3,0X20/60 REBAIXADA ST; B21 6 751 - BROCA Ø3,0X20/80 REBAIXADA ST; B21 6 752 - BROCA Ø3,0X20/100 REBAIXADA ST; B21 6 753 - BROCA Ø3,0X20/120 REBAIXADA ST; B21 6 754 - BROCA Ø3,0X20/150 REBAIXADA ST; B21 6 755 - BROCA Ø3,0X25/80 REBAIXADA ST; B21 6 756 - BROCA Ø3,0X25/100 REBAIXADA ST; B21 6 757 - BROCA Ø3,0X25/120 REBAIXADA ST; B21 6 758 - BROCA Ø3,0X25/150 REBAIXADA ST; B21 6 759 - BROCA Ø3,0X25/180 REBAIXADA ST; B21 6 760 - BROCA Ø3,0X25/200 REBAIXADA ST; B21 6 761 - BROCA Ø3,0X30/80 REBAIXADA ST; B21 6 762 - BROCA Ø3,0X30/100 REBAIXADA ST; B21 6 763 - BROCA Ø3,0X30/120 REBAIXADA ST; B21 6 764 - BROCA Ø3,0X30/150 REBAIXADA ST; B21 6 765 - BROCA Ø3,0X30/180 REBAIXADA ST; B21 6 766 - BROCA Ø3,0X30/200 REBAIXADA ST; B21 6 767 - BROCA Ø3,0X30/220 REBAIXADA ST; B21 6 768 - BROCA Ø3,0X30/250 REBAIXADA ST; B21 6 769 - BROCA Ø3,0X40/100 REBAIXADA ST; B21 6 770 - BROCA Ø3,0X40/120 REBAIXADA ST; B21 6 771 - BROCA Ø3,0X40/150 REBAIXADA ST; B21 6 772 - BROCA Ø3,0X40/180 REBAIXADA ST; B21 6 773 - BROCA Ø3,0X40/200 REBAIXADA ST; B21 6 774 - BROCA Ø3,0X40/220 REBAIXADA ST; B21 6 775 - BROCA Ø3,0X40/250 REBAIXADA ST; B21 6 776 - BROCA Ø3,0X40/300 REBAIXADA ST; B21 6 777 - BROCA Ø3,0X40/350 REBAIXADA ST; B21 6 778 - BROCA Ø3,0X50/100 REBAIXADA ST; B21 6 779 - BROCA Ø3,0X50/120 REBAIXADA ST; B21 6 780 - BROCA Ø3,0X50/150 REBAIXADA ST; B21 6 781 - BROCA Ø3,0X50/180 REBAIXADA ST; B21 6 782 - BROCA Ø3,0X50/200 REBAIXADA ST; B21 6 783 - BROCA Ø3,0X50/220 REBAIXADA ST; B21 6 784 - BROCA Ø3,0X50/250 REBAIXADA ST; B21 6 785 - BROCA Ø3,0X50/300 REBAIXADA ST; B21 6 786 - BROCA Ø3,0X50/350 REBAIXADA ST; B21 6 787 - BROCA Ø3,0X70/200 REBAIXADA ST; B21 6 788 - BROCA Ø3,0X70/220 REBAIXADA ST; B21 6 789 - BROCA Ø3,0X70/250 REBAIXADA ST; B21 6 790 - BROCA Ø3,0X70/300 REBAIXADA ST; B21 6 791 - BROCA Ø3,0X70/350 REBAIXADA ST; B21 6 792 - BROCA Ø3,2 ST; B21 6 793 - BROCA Ø3,2X15/60 ST; B21 6 794 - BROCA Ø3,2X15/80 ST; B21 6 795 - BROCA Ø3,2X15/100 ST; B21 6 796 - BROCA Ø3,2X15/120 ST; B21 6 797 - BROCA Ø3,2X15/150 ST; B21 6 798 - BROCA Ø3,2X20/60 ST; B21 6 799 - BROCA Ø3,2X20/80 ST; B21 6 800 - BROCA Ø3,2X20/100 ST; B21 6 801 - BROCA Ø3,2X20/120 ST; B21 6 802 - BROCA Ø3,2X20/150 ST; B21 6 803 - BROCA Ø3,2X25/80 ST; B21 6 804 - BROCA Ø3,2X25/100 ST; B21 6 805 - BROCA Ø3,2X25/120 ST; B21 6 806 - BROCA Ø3,2X25/150 ST; B21 6 807 - BROCA Ø3,2X25/180 ST; B21 6 808 - BROCA Ø3,2X25/200 ST; B21 6 809 - BROCA Ø3,2X30/80 ST; B21 6 810 - BROCA Ø3,2X30/100 ST; B21 6 811 - BROCA Ø3,2X30/120 ST; B21 6 812 - BROCA Ø3,2X30/150 ST; B21 6 813 - BROCA Ø3,2X30/180 ST; B21 6 814 - BROCA Ø3,2X30/200 ST; B21 6 815 - BROCA Ø3,2X30/220 ST; B21 6 816 - BROCA Ø3,2X30/250 ST; B21 6 817 - BROCA Ø3,2X40/100 ST; B21 6 818 - BROCA Ø3,2X40/120 ST; B21 6 819 - BROCA Ø3,2X40/150 ST; B21 6 820 - BROCA Ø3,2X40/180 ST; B21 6 821 - BROCA Ø3,2X40/200 ST; B21 6 822 - BROCA Ø3,2X40

REBAIXADA ST; B21 6 865 - BROCA Ø3,2X40/100 REBAIXADA ST; B21 6 866 - BROCA Ø3,2X40/120 REBAIXADA ST; B21 6 867 - BROCA Ø3,2X40/150 REBAIXADA ST; B21 6 868 - BROCA Ø3,2X40/180 REBAIXADA ST; B21 6 869 - BROCA Ø3,2X40/200 REBAIXADA ST; B21 6 870 - BROCA Ø3,2X40/220 REBAIXADA ST; B21 6 871 - BROCA Ø3,2X40/250 REBAIXADA ST; B21 6 872 - BROCA Ø3,2X40/300 REBAIXADA ST; B21 6 873 - BROCA Ø3,2X40/350 REBAIXADA ST; B21 6 874 - BROCA Ø3,2X50/100 REBAIXADA ST; B21 6 875 - BROCA Ø3,2X50/120 REBAIXADA ST; B21 6 876 - BROCA Ø3,2X50/150 REBAIXADA ST; B21 6 877 - BROCA Ø3,2X50/180 REBAIXADA ST; B21 6 878 - BROCA Ø3,2X50/200 REBAIXADA ST; B21 6 879 - BROCA Ø3,2X50/220 REBAIXADA ST; B21 6 880 - BROCA Ø3,2X50/250 REBAIXADA ST; B21 6 881 - BROCA Ø3,2X50/300 REBAIXADA ST; B21 6 882 - BROCA Ø3,2X50/350 REBAIXADA ST; B21 6 883 - BROCA Ø3,2X70/200 REBAIXADA ST; B21 6 884 - BROCA Ø3,2X70/220 REBAIXADA ST; B21 6 885 - BROCA Ø3,2X70/250 REBAIXADA ST; B21 6 886 - BROCA Ø3,2X70/300 REBAIXADA ST; B21 6 887 - BROCA Ø3,2X70/350 REBAIXADA ST; B21 6 888 - BROCA Ø3,5 ST; B21 6 889 - BROCA Ø3,5X15/80 ST; B21 6 890 - BROCA Ø3,5X15/100 ST; B21 6 891 - BROCA Ø3,5X15/120 ST; B21 6 892 - BROCA Ø3,5X15/150 ST; B21 6 893 - BROCA Ø3,5X20/80 ST; B21 6 894 - BROCA Ø3,5X20/100 ST; B21 6 895 - BROCA Ø3,5X20/120 ST; B21 6 896 - BROCA Ø3,5X20/150 ST; B21 6 897 - BROCA Ø3,5X25/100 ST; B21 6 898 - BROCA Ø3,5X25/120 ST; B21 6 899 - BROCA Ø3,5X25/150 ST; B21 6 900 - BROCA Ø3,5X25/180 ST; B21 6 901 - BROCA Ø3,5X25/200 ST; B21 6 902 - BROCA Ø3,5X30/100 ST; B21 6 903 - BROCA Ø3,5X30/120 ST; B21 6 904 - BROCA Ø3,5X30/150 ST; B21 6 905 - BROCA Ø3,5X30/180 ST; B21 6 906 - BROCA Ø3,5X30/200 ST; B21 6 907 - BROCA Ø3,5X30/220 ST; B21 6 908 - BROCA Ø3,5X30/250 ST; B21 6 909 - BROCA Ø3,5X40/100 ST; B21 6 910 - BROCA Ø3,5X40/120 ST; B21 6 911 - BROCA Ø3,5X40/150 ST; B21 6 912 - BROCA Ø3,5X40/180 ST; B21 6 913 - BROCA Ø3,5X40/200 ST; B21 6 914 - BROCA Ø3,5X40/220 ST; B21 6 915 - BROCA Ø3,5X40/250 ST; B21 6 916 - BROCA Ø3,5X40/300 ST; B21 6 917 - BROCA Ø3,5X40/350 ST; B21 6 918 - BROCA Ø3,5X40/400 ST; B21 6 919 - BROCA Ø3,5X50/100 ST; B21 6 920 - BROCA Ø3,5X50/120 ST; B21 6 921 - BROCA Ø3,5X50/150 ST; B21 6 922 - BROCA Ø3,5X50/180 ST; B21 6 923 - BROCA Ø3,5X50/200 ST; B21 6 924 - BROCA Ø3,5X50/220 ST; B21 6 925 - BROCA Ø3,5X50/250 ST; B21 6 926 - BROCA Ø3,5X50/300 ST; B21 6 927 - BROCA Ø3,5X50/350 ST; B21 6 928 - BROCA Ø3,5X50/400 ST; B21 6 929 - BROCA Ø3,5X70/200 ST; B21 6 930 - BROCA Ø3,5X70/220 ST; B21 6 931 - BROCA Ø3,5X70/250 ST; B21 6 932 - BROCA Ø3,5X70/300 ST; B21 6 933 - BROCA Ø3,5X70/350 ST; B21 6 934 - BROCA Ø3,5X70/400 ST; B21 6 935 - BROCA Ø3,5 REBAIXADA ST; B21 6 936 - BROCA Ø3,5X15/80 REBAIXADA ST; B21 6 937 - BROCA Ø3,5X15/100 REBAIXADA ST; B21 6 938 - BROCA Ø3,5X15/120 REBAIXADA ST; B21 6 939 - BROCA Ø3,5X15/150 REBAIXADA ST; B21 6 940 - BROCA Ø3,5X20/80 REBAIXADA ST; B21 6 941 - BROCA Ø3,5X20/100 REBAIXADA ST; B21 6 942 - BROCA Ø3,5X20/120 REBAIXADA ST; B21 6 943 - BROCA Ø3,5X20/150 REBAIXADA ST; B21 6 944 - BROCA Ø3,5X25/100 REBAIXADA ST; B21 6 945 - BROCA Ø3,5X25/120 REBAIXADA ST; B21 6 946 - BROCA Ø3,5X25/150 REBAIXADA ST; B21 6 947 - BROCA Ø3,5X25/180 REBAIXADA ST; B21 6 948 - BROCA Ø3,5X25/200 REBAIXADA ST; B21 6 949 - BROCA Ø3,5X30/100 REBAIXADA ST; B21 6 950 - BROCA Ø3,5X30/120 REBAIXADA ST; B21 6 951 - BROCA Ø3,5X30/150 REBAIXADA ST; B21 6 952 - BROCA Ø3,5X30/180 REBAIXADA ST; B21 6 953 - BROCA Ø3,5X30/200 REBAIXADA ST; B21 6 954 - BROCA Ø3,5X30/220 REBAIXADA ST; B21 6 955 - BROCA Ø3,5X30/250 REBAIXADA ST; B21 6 956 - BROCA Ø3,5X40/100 REBAIXADA ST; B21 6 957 - BROCA Ø3,5X40/120 REBAIXADA ST; B21 6 958 - BROCA Ø3,5X40/150 REBAIXADA ST; B21 6 959 - BROCA Ø3,5X40/180 REBAIXADA ST; B21 6 960 - BROCA Ø3,5X40/200 REBAIXADA ST; B21 6 961 - BROCA Ø3,5X40/220 REBAIXADA ST; B21 6 962 - BROCA Ø3,5X40/250 REBAIXADA ST; B21 6 963 - BROCA Ø3,5X40/300 REBAIXADA ST; B21 6 964 - BROCA Ø3,5X40/350 REBAIXADA ST; B21 6 965 - BROCA Ø3,5X40/400 REBAIXADA ST; B21 6 966 - BROCA Ø3,5X50/100 REBAIXADA ST; B21 6 967 - BROCA Ø3,5X50/120 REBAIXADA ST; B21 6 968 - BROCA Ø3,5X50/150 REBAIXADA ST; B21 6 969 - BROCA Ø3,5X50/180 REBAIXADA ST; B21 6 970 - BROCA Ø3,5X50/200 REBAIXADA ST; B21 6 971 - BROCA Ø3,5X50/220 REBAIXADA ST; B21 6 972 - BROCA Ø3,5X50/250 REBAIXADA ST; B21 6 973 - BROCA Ø3,5X50/300 REBAIXADA ST; B21 6 974 - BROCA Ø3,5X50/350 REBAIXADA ST; B21 6 975 - BROCA Ø3,5X50/400 REBAIXADA ST; B21 6 976 - BROCA Ø3,5X70/200 REBAIXADA ST; B21 6 977 - BROCA Ø3,5X70/220 REBAIXADA ST; B21 6 978 - BROCA Ø3,5X70/250 REBAIXADA ST; B21 6 979 - BROCA Ø3,5X70/300 REBAIXADA ST; B21 6 980 - BROCA Ø3,5X70/350 REBAIXADA ST; B21 6 981 - BROCA Ø3,5X70/400 REBAIXADA ST; B21 7 100 - BROCA Ø3,8 ST; B21 7 101 - BROCA Ø3,8X20/100 ST; B21 7 102 - BROCA Ø3,8X20/120 ST; B21 7 103 - BROCA Ø3,8X20/150 ST; B21 7 104 - BROCA Ø3,8X25/100 ST; B21 7 105 - BROCA Ø3,8X25/120 ST; B21 7 106 - BROCA Ø3,8X25/150 ST; B21 7 107 - BROCA Ø3,8X25/180 ST; B21 7 108 - BROCA Ø3,8X25/200 ST; B21 7 109 - BROCA Ø3,8X30/100 ST; B21 7 110 - BROCA Ø3,8X30/120 ST; B21 7 111 - BROCA Ø3,8X30/150 ST; B21 7 112 - BROCA Ø3,8X30/180 ST; B21 7 113 - BROCA Ø3,8X30/200 ST; B21 7 114 - BROCA Ø3,8X30/220 ST; B21 7 115 - BROCA Ø3,8X30/250 ST; B21 7 116 - BROCA Ø3,8X40/100 ST; B21 7 117 - BROCA Ø3,8X40/120 ST; B21 7 118 - BROCA Ø3,8X40/150 ST; B21 7 119 - BROCA Ø3,8X40/180 ST; B21 7 120 - BROCA Ø3,8X40/200 ST; B21 7 121 - BROCA Ø3,8X40/220 ST; B21 7 122 - BROCA Ø3,8X40/250 ST; B21 7 123 - BROCA Ø3,8X40/300 ST; B21 7 124 - BROCA Ø3,8X40/350 ST; B21 7 125 - BROCA Ø3,8X40/400 ST; B21 7 126 - BROCA Ø3,8X50/100 ST; B21 7 127 - BROCA Ø3,8X50/120 ST; B21 7 128 - BROCA Ø3,8X50/150 ST; B21 7 129 - BROCA Ø3,8X50/180 ST; B21 7 130 - BROCA Ø3,8X50/200 ST; B21 7 131 - BROCA Ø3,8X50/220 ST; B21 7 132 - BROCA Ø3,8X50/250 ST; B21 7 133 - BROCA Ø3,8X50/300 ST; B21 7 134 - BROCA Ø3,8X50/350 ST; B21 7 135 - BROCA Ø3,8X50/400 ST; B21 7 136 - BROCA Ø3,8X70/200 ST; B21 7 137 - BROCA Ø3,8X70/220 ST; B21 7 138 - BROCA Ø3,8X70/250 ST; B21 7 139 - BROCA Ø3,8X70/300 ST; B21 7 140 - BROCA Ø3,8X70/350 ST; B21 7 141 - BROCA Ø3,8X70/400 ST; B21 7 142 - BROCA Ø3,8 GRADUADA ST; B21 7 143 - BROCA Ø3,8X25/200 GRADUADA ST; B21 7 144 - BROCA Ø3,8X30/200 GRADUADA ST; B21 7 145 - BROCA Ø3,8X30/220 GRADUADA ST; B21 7 146 - BROCA Ø3,8X30/250 GRADUADA ST; B21 7 147 - BROCA Ø3,8X40/200 GRADUADA ST; B21 7 148 - BROCA Ø3,8X40/220 GRADUADA ST; B21 7 149 - BROCA Ø3,8X40/250 GRADUADA ST; B21 7 150 - BROCA Ø3,8X40/300 GRADUADA ST; B21 7 151 - BROCA Ø3,8X40/350 GRADUADA ST; B21 7 152 - BROCA Ø3,8X40/400 GRADUADA ST; B21 7 153 - BROCA Ø3,8X50/200 GRADUADA ST; B21 7 154 - BROCA Ø3,8X50/220 GRADUADA ST; B21 7 155 - BROCA Ø3,8X50/250 GRADUADA ST; B21 7 156 - BROCA Ø3,8X50/300 GRADUADA ST; B21 7 157 - BROCA Ø3,8X50/350 GRADUADA ST; B21 7 158 - BROCA Ø3,8X50/400 GRADUADA ST; B21 7 159 - BROCA Ø3,8X70/200 GRADUADA ST; B21 7 160 - BROCA Ø3,8X70/220 GRADUADA ST; B21 7 161 - BROCA Ø3,8X70/250 GRADUADA ST; B21 7 162 - BROCA Ø3,8X70/300 GRADUADA ST; B21 7 163 - BROCA Ø3,8X70/350 GRADUADA ST; B21 7 164 - BROCA Ø3,8X70/400 GRADUADA ST; B21 7 165 - BROCA Ø3,8 REBAIXADA ST; B21 7 166 - BROCA Ø3,8X20/100 REBAIXADA ST; B21 7 167 - BROCA Ø3,8X20/120 REBAIXADA ST; B21 7 168 - BROCA Ø3,8X20/150 REBAIXADA ST; B21 7 169 - BROCA Ø3,8X25/100 REBAIXADA ST; B21 7 170 - BROCA Ø3,8X25/120 REBAIXADA ST; B21 7 171 - BROCA Ø3,8X25/150 REBAIXADA ST; B21 7 172 - BROCA Ø3,8X25/180 REBAIXADA ST; B21 7 173 - BROCA Ø3,8X25/200 REBAIXADA ST; B21 7 174 - BROCA Ø3,8X30/100 REBAIXADA

ST; B21 7 175 - BROCA Ø3,8X30/120 REBAIXADA ST; B21 7 176 - BROCA Ø3,8X30/150 REBAIXADA ST; B21 7 177 - BROCA Ø3,8X30/180 REBAIXADA ST; B21 7 178 - BROCA Ø3,8X30/200 REBAIXADA ST; B21 7 179 - BROCA Ø3,8X30/220 REBAIXADA ST; B21 7 180 - BROCA Ø3,8X30/250 REBAIXADA ST; B21 7 181 - BROCA Ø3,8X40/100 REBAIXADA ST; B21 7 182 - BROCA Ø3,8X40/120 REBAIXADA ST; B21 7 183 - BROCA Ø3,8X40/150 REBAIXADA ST; B21 7 184 - BROCA Ø3,8X40/180 REBAIXADA ST; B21 7 185 - BROCA Ø3,8X40/200 REBAIXADA ST; B21 7 186 - BROCA Ø3,8X40/220 REBAIXADA ST; B21 7 187 - BROCA Ø3,8X40/250 REBAIXADA ST; B21 7 188 - BROCA Ø3,8X40/300 REBAIXADA ST; B21 7 189 - BROCA Ø3,8X40/350 REBAIXADA ST; B21 7 190 - BROCA Ø3,8X40/400 REBAIXADA ST; B21 7 191 - BROCA Ø3,8X50/100 REBAIXADA ST; B21 7 192 - BROCA Ø3,8X50/120 REBAIXADA ST; B21 7 193 - BROCA Ø3,8X50/150 REBAIXADA ST; B21 7 194 - BROCA Ø3,8X50/180 REBAIXADA ST; B21 7 195 - BROCA Ø3,8X50/200 REBAIXADA ST; B21 7 196 - BROCA Ø3,8X50/220 REBAIXADA ST; B21 7 197 - BROCA Ø3,8X50/250 REBAIXADA ST; B21 7 198 - BROCA Ø3,8X50/300 REBAIXADA ST; B21 7 199 - BROCA Ø3,8X50/350 REBAIXADA ST; B21 7 200 - BROCA Ø3,8X50/400 REBAIXADA ST; B21 7 201 - BROCA Ø3,8X70/200 REBAIXADA ST; B21 7 202 - BROCA Ø3,8X70/220 REBAIXADA ST; B21 7 203 - BROCA Ø3,8X70/250 REBAIXADA ST; B21 7 204 - BROCA Ø3,8X70/300 REBAIXADA ST; B21 7 205 - BROCA Ø3,8X70/350 REBAIXADA ST; B21 7 206 - BROCA Ø3,8X70/400 REBAIXADA ST; B21 7 207 - BROCA Ø3,8 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 208 - BROCA Ø3,8X25/200 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 209 - BROCA Ø3,8X30/200 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 210 - BROCA Ø3,8X30/220 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 211 - BROCA Ø3,8X30/250 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 212 - BROCA Ø3,8X40/200 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 213 - BROCA Ø3,8X40/220 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 214 - BROCA Ø3,8X40/250 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 215 - BROCA Ø3,8X40/300 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 216 - BROCA Ø3,8X40/350 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 217 - BROCA Ø3,8X40/400 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 218 - BROCA Ø3,8X50/200 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 219 - BROCA Ø3,8X50/220 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 220 - BROCA Ø3,8X50/250 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 221 - BROCA Ø3,8X50/300 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 222 - BROCA Ø3,8X50/350 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 223 - BROCA Ø3,8X50/400 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 224 - BROCA Ø3,8X70/200 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 225 - BROCA Ø3,8X70/220 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 226 - BROCA Ø3,8X70/250 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 227 - BROCA Ø3,8X70/300 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 228 - BROCA Ø3,8X70/350 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 229 - BROCA Ø3,8X70/400 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 230 - BROCA Ø4,0 ST; B21 7 231 - BROCA Ø4,0X20/100 ST; B21 7 232 - BROCA Ø4,0X20/120 ST; B21 7 233 - BROCA Ø4,0X20/150 ST; B21 7 234 - BROCA Ø4,0X25/100 ST; B21 7 235 - BROCA Ø4,0X25/120 ST; B21 7 236 - BROCA Ø4,0X25/150 ST; B21 7 237 - BROCA Ø4,0X25/180 ST; B21 7 238 - BROCA Ø4,0X25/200 ST; B21 7 239 - BROCA Ø4,0X30/100 ST; B21 7 240 - BROCA Ø4,0X30/120 ST; B21 7 241 - BROCA Ø4,0X30/150 ST; B21 7 242 - BROCA Ø4,0X30/180 ST; B21 7 243 - BROCA Ø4,0X30/200 ST; B21 7 244 - BROCA Ø4,0X30/220 ST; B21 7 245 - BROCA Ø4,0X30/250 ST; B21 7 246 - BROCA Ø4,0X40/100 ST; B21 7 247 - BROCA Ø4,0X40/120 ST; B21 7 248 - BROCA Ø4,0X40/150 ST; B21 7 249 - BROCA Ø4,0X40/180 ST; B21 7 250 - BROCA Ø4,0X40/200 ST; B21 7 251 - BROCA Ø4,0X40/220 ST; B21 7 252 - BROCA Ø4,0X40/250 ST; B21 7 253 - BROCA Ø4,0X40/300 ST; B21 7 254 - BROCA Ø4,0X40/350 ST; B21 7 255 - BROCA Ø4,0X40/400 ST; B21 7 256 - BROCA Ø4,0X50/100 ST; B21 7 257 - BROCA Ø4,0X50/120 ST; B21 7 258 - BROCA Ø4,0X50/150 ST; B21 7 259 - BROCA Ø4,0X50/180 ST; B21 7 260 - BROCA Ø4,0X50/200 ST; B21 7 261 - BROCA Ø4,0X50/220 ST; B21 7 262 - BROCA Ø4,0X50/250 ST; B21 7 263 - BROCA Ø4,0X50/300 ST; B21 7 264 - BROCA Ø4,0X50/350 ST; B21 7 265 - BROCA Ø4,0X50/400 ST; B21 7 266 - BROCA Ø4,0X70/200 ST; B21 7 267 - BROCA Ø4,0X70/220 ST; B21 7 268 - BROCA Ø4,0X70/250 ST; B21 7 269 - BROCA Ø4,0X70/300 ST; B21 7 270 - BROCA Ø4,0X70/350 ST; B21 7 271 - BROCA Ø4,0X70/400 ST; B21 7 272 - BROCA Ø4,0 GRADUADA ST; B21 7 273 - BROCA Ø4,0X25/200 GRADUADA ST; B21 7 274 - BROCA Ø4,0X30/200 GRADUADA ST; B21 7 275 - BROCA Ø4,0X30/220 GRADUADA ST; B21 7 276 - BROCA Ø4,0X30/250 GRADUADA ST; B21 7 277 - BROCA Ø4,0X40/200 GRADUADA ST; B21 7 278 - BROCA Ø4,0X40/220 GRADUADA ST; B21 7 279 - BROCA Ø4,0X40/250 GRADUADA ST; B21 7 280 - BROCA Ø4,0X40/300 GRADUADA ST; B21 7 281 - BROCA Ø4,0X40/350 GRADUADA ST; B21 7 282 - BROCA Ø4,0X40/400 GRADUADA ST; B21 7 283 - BROCA Ø4,0X50/200 GRADUADA ST; B21 7 284 - BROCA Ø4,0X50/220 GRADUADA ST; B21 7 285 - BROCA Ø4,0X50/250 GRADUADA ST; B21 7 286 - BROCA Ø4,0X50/300 GRADUADA ST; B21 7 287 - BROCA Ø4,0X50/350 GRADUADA ST; B21 7 288 - BROCA Ø4,0X50/400 GRADUADA ST; B21 7 289 - BROCA Ø4,0X70/200 GRADUADA ST; B21 7 290 - BROCA Ø4,0X70/220 GRADUADA ST; B21 7 291 - BROCA Ø4,0X70/250 GRADUADA ST; B21 7 292 - BROCA Ø4,0X70/300 GRADUADA ST; B21 7 293 - BROCA Ø4,0X70/350 GRADUADA ST; B21 7 294 - BROCA Ø4,0X70/400 GRADUADA ST; B21 7 295 - BROCA Ø4,0 REBAIXADA ST; B21 7 296 - BROCA Ø4,0X20/100 REBAIXADA ST; B21 7 297 - BROCA Ø4,0X20/120 REBAIXADA ST; B21 7 298 - BROCA Ø4,0X20/150 REBAIXADA ST; B21 7 299 - BROCA Ø4,0X25/100 REBAIXADA ST; B21 7 300 - BROCA Ø4,0X25/120 REBAIXADA ST; B21 7 301 - BROCA Ø4,0X25/150 REBAIXADA ST; B21 7 302 - BROCA Ø4,0X25/180 REBAIXADA ST; B21 7 303 - BROCA Ø4,0X25/200 REBAIXADA ST; B21 7 304 - BROCA Ø4,0X30/100 REBAIXADA ST; B21 7 305 - BROCA Ø4,0X30/120 REBAIXADA ST; B21 7 306 - BROCA Ø4,0X30/150 REBAIXADA ST; B21 7 307 - BROCA Ø4,0X30/180 REBAIXADA ST; B21 7 308 - BROCA Ø4,0X30/200 REBAIXADA ST; B21 7 309 - BROCA Ø4,0X30/220 REBAIXADA ST; B21 7 310 - BROCA Ø4,0X30/250 REBAIXADA ST; B21 7 311 - BROCA Ø4,0X40/100 REBAIXADA ST; B21 7 312 - BROCA Ø4,0X40/120 REBAIXADA ST; B21 7 313 - BROCA Ø4,0X40/150 REBAIXADA ST; B21 7 314 - BROCA Ø4,0X40/180 REBAIXADA ST; B21 7 315 - BROCA Ø4,0X40/200 REBAIXADA ST; B21 7 316 - BROCA Ø4,0X40/220 REBAIXADA ST; B21 7 317 - BROCA Ø4,0X40/250 REBAIXADA ST; B21 7 318 - BROCA Ø4,0X40/300 REBAIXADA ST; B21 7 319 - BROCA Ø4,0X40/350 REBAIXADA ST; B21 7 320 - BROCA Ø4,0X40/400 REBAIXADA ST; B21 7 321 - BROCA Ø4,0X50/100 REBAIXADA ST; B21 7 322 - BROCA Ø4,0X50/120 REBAIXADA ST; B21 7 323 - BROCA Ø4,0X50/150 REBAIXADA ST; B21 7 324 - BROCA Ø4,0X50/180 REBAIXADA ST; B21 7 325 - BROCA Ø4,0X50/200 REBAIXADA ST; B21 7 326 - BROCA Ø4,0X50/220 REBAIXADA ST; B21 7 327 - BROCA Ø4,0X50/250 REBAIXADA ST; B21 7 328 - BROCA Ø4,0X50/300 REBAIXADA ST; B21 7 329 - BROCA Ø4,0X50/350 REBAIXADA ST; B21 7 330 - BROCA Ø4,0X50/400 REBAIXADA ST; B21 7 331 - BROCA Ø4,0X70/200 REBAIXADA ST; B21 7 332 - BROCA Ø4,0X70/220 REBAIXADA ST; B21 7 333 - BROCA Ø4,0X70/250 REBAIXADA ST; B21 7 334 - BROCA Ø4,0X70/300 REBAIXADA ST; B21 7 335 - BROCA Ø4,0X70/350 REBAIXADA ST; B21 7 336 - BROCA Ø4,0X70/400 REBAIXADA ST; B21 7 337 - BROCA Ø4,0 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 338 - BROCA Ø4,0X25/200 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 339 - BROCA Ø4,0X30/200 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 340 - BROCA Ø4,0X30/220 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 341 - BROCA Ø4,0X30/250 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 342 - BROCA Ø4,0X40/200 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 343 - BROCA Ø4,0X40/220 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 344 - BROCA Ø4,0X40/250 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 345 - BROCA Ø4,0X40/300

GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 346 - BROCA Ø4,0X40/350 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 347 - BROCA Ø4,0X40/400 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 348 - BROCA Ø4,0X50/200 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 349 - BROCA Ø4,0X50/220 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 350 - BROCA Ø4,0X50/250 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 351 - BROCA Ø4,0X50/300 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 352 - BROCA Ø4,0X50/350 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 353 - BROCA Ø4,0X50/400 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 354 - BROCA Ø4,0X70/200 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 355 - BROCA Ø4,0X70/220 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 356 - BROCA Ø4,0X70/250 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 357 - BROCA Ø4,0X70/300 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 358 - BROCA Ø4,0X70/350 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 359 - BROCA Ø4,0X70/400 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 360 - BROCA Ø4,5 ST; B21 7 361 - BROCA Ø4,5X25/100 ST; B21 7 362 - BROCA Ø4,5X25/120 ST; B21 7 363 - BROCA Ø4,5X25/150 ST; B21 7 364 - BROCA Ø4,5X25/180 ST; B21 7 365 - BROCA Ø4,5X25/200 ST; B21 7 366 - BROCA Ø4,5X30/100 ST; B21 7 367 - BROCA Ø4,5X30/120 ST; B21 7 368 - BROCA Ø4,5X30/150 ST; B21 7 369 - BROCA Ø4,5X30/180 ST; B21 7 370 - BROCA Ø4,5X30/200 ST; B21 7 371 - BROCA Ø4,5X30/220 ST; B21 7 372 - BROCA Ø4,5X30/250 ST; B21 7 373 - BROCA Ø4,5X40/100 ST; B21 7 374 - BROCA Ø4,5X40/120 ST; B21 7 375 - BROCA Ø4,5X40/150 ST; B21 7 376 - BROCA Ø4,5X40/180 ST; B21 7 377 - BROCA Ø4,5X40/200 ST; B21 7 378 - BROCA Ø4,5X40/220 ST; B21 7 379 - BROCA Ø4,5X40/250 ST; B21 7 380 - BROCA Ø4,5X40/300 ST; B21 7 381 - BROCA Ø4,5X40/350 ST; B21 7 382 - BROCA Ø4,5X40/400 ST; B21 7 383 - BROCA Ø4,5X50/100 ST; B21 7 384 - BROCA Ø4,5X50/120 ST; B21 7 385 - BROCA Ø4,5X50/150 ST; B21 7 386 - BROCA Ø4,5X50/180 ST; B21 7 387 - BROCA Ø4,5X50/200 ST; B21 7 388 - BROCA Ø4,5X50/220 ST; B21 7 389 - BROCA Ø4,5X50/250 ST; B21 7 390 - BROCA Ø4,5X50/300 ST; B21 7 391 - BROCA Ø4,5X50/350 ST; B21 7 392 - BROCA Ø4,5X50/400 ST; B21 7 393 - BROCA Ø4,5X70/200 ST; B21 7 394 - BROCA Ø4,5X70/220 ST; B21 7 395 - BROCA Ø4,5X70/250 ST; B21 7 396 - BROCA Ø4,5X70/300 ST; B21 7 397 - BROCA Ø4,5X70/350 ST; B21 7 398 - BROCA Ø4,5X70/400 ST; B21 7 399 - BROCA Ø4,5 GRADUADA ST; B21 7 400 - BROCA Ø4,5X25/200 GRADUADA ST; B21 7 401 - BROCA Ø4,5X30/200 GRADUADA ST; B21 7 402 - BROCA Ø4,5X30/220 GRADUADA ST; B21 7 403 - BROCA Ø4,5X30/250 GRADUADA ST; B21 7 404 - BROCA Ø4,5X40/200 GRADUADA ST; B21 7 405 - BROCA Ø4,5X40/220 GRADUADA ST; B21 7 406 - BROCA Ø4,5X40/250 GRADUADA ST; B21 7 407 - BROCA Ø4,5X40/300 GRADUADA ST; B21 7 408 - BROCA Ø4,5X40/350 GRADUADA ST; B21 7 409 - BROCA Ø4,5X40/400 GRADUADA ST; B21 7 410 - BROCA Ø4,5X50/200 GRADUADA ST; B21 7 411 - BROCA Ø4,5X50/220 GRADUADA ST; B21 7 412 - BROCA Ø4,5X50/250 GRADUADA ST; B21 7 413 - BROCA Ø4,5X50/300 GRADUADA ST; B21 7 414 - BROCA Ø4,5X50/350 GRADUADA ST; B21 7 415 - BROCA Ø4,5X50/400 GRADUADA ST; B21 7 416 - BROCA Ø4,5X70/200 GRADUADA ST; B21 7 417 - BROCA Ø4,5X70/220 GRADUADA ST; B21 7 418 - BROCA Ø4,5X70/250 GRADUADA ST; B21 7 419 - BROCA Ø4,5X70/300 GRADUADA ST; B21 7 420 - BROCA Ø4,5X70/350 GRADUADA ST; B21 7 421 - BROCA Ø4,5X70/400 GRADUADA ST; B21 7 422 - BROCA Ø4,5 REBAIXADA ST; B21 7 423 - BROCA Ø4,5X25/100 REBAIXADA ST; B21 7 424 - BROCA Ø4,5X25/120 REBAIXADA ST; B21 7 425 - BROCA Ø4,5X25/150 REBAIXADA ST; B21 7 426 - BROCA Ø4,5X25/180 REBAIXADA ST; B21 7 427 - BROCA Ø4,5X25/200 REBAIXADA ST; B21 7 428 - BROCA Ø4,5X30/100 REBAIXADA ST; B21 7 429 - BROCA Ø4,5X30/120 REBAIXADA ST; B21 7 430 - BROCA Ø4,5X30/150 REBAIXADA ST; B21 7 431 - BROCA Ø4,5X30/180 REBAIXADA ST; B21 7 432 - BROCA Ø4,5X30/200 REBAIXADA ST; B21 7 433 - BROCA Ø4,5X30/220 REBAIXADA ST; B21 7 434 - BROCA Ø4,5X30/250 REBAIXADA ST; B21 7 435 - BROCA Ø4,5X40/100 REBAIXADA ST; B21 7 436 - BROCA Ø4,5X40/120 REBAIXADA ST; B21 7 437 - BROCA Ø4,5X40/150 REBAIXADA ST; B21 7 438 - BROCA Ø4,5X40/180 REBAIXADA ST; B21 7 439 - BROCA Ø4,5X40/200 REBAIXADA ST; B21 7 440 - BROCA Ø4,5X40/220 REBAIXADA ST; B21 7 441 - BROCA Ø4,5X40/250 REBAIXADA ST; B21 7 442 - BROCA Ø4,5X40/300 REBAIXADA ST; B21 7 443 - BROCA Ø4,5X40/350 REBAIXADA ST; B21 7 444 - BROCA Ø4,5X40/400 REBAIXADA ST; B21 7 445 - BROCA Ø4,5X50/100 REBAIXADA ST; B21 7 446 - BROCA Ø4,5X50/120 REBAIXADA ST; B21 7 447 - BROCA Ø4,5X50/150 REBAIXADA ST; B21 7 448 - BROCA Ø4,5X50/180 REBAIXADA ST; B21 7 449 - BROCA Ø4,5X50/200 REBAIXADA ST; B21 7 450 - BROCA Ø4,5X50/220 REBAIXADA ST; B21 7 451 - BROCA Ø4,5X50/250 REBAIXADA ST; B21 7 452 - BROCA Ø4,5X50/300 REBAIXADA ST; B21 7 453 - BROCA Ø4,5X50/350 REBAIXADA ST; B21 7 454 - BROCA Ø4,5X50/400 REBAIXADA ST; B21 7 455 - BROCA Ø4,5X70/200 REBAIXADA ST; B21 7 456 - BROCA Ø4,5X70/220 REBAIXADA ST; B21 7 457 - BROCA Ø4,5X70/250 REBAIXADA ST; B21 7 458 - BROCA Ø4,5X70/300 REBAIXADA ST; B21 7 459 - BROCA Ø4,5X70/350 REBAIXADA ST; B21 7 460 - BROCA Ø4,5X70/400 REBAIXADA ST; B21 7 461 - BROCA Ø4,5 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 462 - BROCA Ø4,5X25/200 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 463 - BROCA Ø4,5X30/200 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 464 - BROCA Ø4,5X30/220 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 465 - BROCA Ø4,5X30/250 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 466 - BROCA Ø4,5X40/200 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 467 - BROCA Ø4,5X40/220 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 468 - BROCA Ø4,5X40/250 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 469 - BROCA Ø4,5X40/300 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 470 - BROCA Ø4,5X40/350 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 471 - BROCA Ø4,5X40/400 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 472 - BROCA Ø4,5X50/200 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 473 - BROCA Ø4,5X50/220 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 474 - BROCA Ø4,5X50/250 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 475 - BROCA Ø4,5X50/300 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 476 - BROCA Ø4,5X50/350 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 477 - BROCA Ø4,5X50/400 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 478 - BROCA Ø4,5X70/200 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 479 - BROCA Ø4,5X70/220 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 480 - BROCA Ø4,5X70/250 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 481 - BROCA Ø4,5X70/300 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 482 - BROCA Ø4,5X70/350 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 7 483 - BROCA Ø4,5X70/400 GRADUADA REBAIXADA ST; B21 8 100 - BROCA Ø3,0 RC; B21 8 101 - BROCA Ø3,0X15/150 RC; B21 8 102 - BROCA Ø3,0X15/180 RC; B21 8 103 - BROCA Ø3,0X15/200 RC; B21 8 104 - BROCA Ø3,0X15/250 RC; B21 8 105 - BROCA Ø3,0X20/150 RC; B21 8 106 - BROCA Ø3,0X20/180 RC; B21 8 107 - BROCA Ø3,0X20/200 RC; B21 8 108 - BROCA Ø3,0X20/250 RC; B21 8 109 - BROCA Ø3,0X25/150 RC; B21 8 110 - BROCA Ø3,0X25/180 RC; B21 8 111 - BROCA Ø3,0X25/200 RC; B21 8 112 - BROCA Ø3,0X25/250 RC; B21 8 113 - BROCA Ø3,0X25/300 RC; B21 8 114 - BROCA Ø3,0X30/150 RC; B21 8 115 - BROCA Ø3,0X30/180 RC; B21 8 116 - BROCA Ø3,0X30/200 RC; B21 8 117 - BROCA Ø3,0X30/250 RC; B21 8 118 - BROCA Ø3,0X30/300 RC; B21 8 119 - BROCA Ø3,0X40/150 RC; B21 8 120 - BROCA Ø3,0X40/180 RC; B21 8 121 - BROCA Ø3,0X40/200 RC; B21 8 122 - BROCA Ø3,0X40/250 RC; B21 8 123 - BROCA Ø3,0X40/300 RC; B21 8 124 - BROCA Ø3,0X40/350 RC; B21 8 125 - BROCA Ø3,0X40/400 RC; B21 8 126 - BROCA Ø3,0X50/150 RC; B21 8 127 - BROCA Ø3,0X50/180 RC; B21 8 128 - BROCA Ø3,0X50/200 RC; B21 8 129 - BROCA Ø3,0X50/250 RC; B21 8 130 - BROCA Ø3,0X50/300 RC; B21 8 131 - BROCA Ø3,0X50/350 RC; B21 8 132 - BROCA Ø3,0X50/400 RC; B21 8 133 - BROCA Ø3,0X50/450 RC; B21 8 134 - BROCA Ø3,0X70/200 RC; B21 8 135 - BROCA Ø3,0X70/250 RC; B21 8 136 - BROCA Ø3,0X70/300 RC; B21 8 137 - BROCA Ø3,0X70/350 RC; B21 8 138 - BROCA Ø3,0X70/400 RC; B21 8 139 - BROCA Ø3,0X70/450 RC;

B21 8 140 - BROCA Ø3,0 GRADUADA RC; B21 8 141 - BROCA Ø3,0X15/200 GRADUADA RC; B21 8 142 - BROCA Ø3,0X15/250 GRADUADA RC; B21 8 143 - BROCA Ø3,0X20/200 GRADUADA RC; B21 8 144 - BROCA Ø3,0X20/250 GRADUADA RC; B21 8 145 - BROCA Ø3,0X25/200 GRADUADA RC; B21 8 146 - BROCA Ø3,0X25/250 GRADUADA RC; B21 8 147 - BROCA Ø3,0X25/300 GRADUADA RC; B21 8 148 - BROCA Ø3,0X30/200 GRADUADA RC; B21 8 149 - BROCA Ø3,0X30/250 GRADUADA RC; B21 8 150 - BROCA Ø3,0X30/300 GRADUADA RC; B21 8 151 - BROCA Ø3,0X40/200 GRADUADA RC; B21 8 152 - BROCA Ø3,0X40/250 GRADUADA RC; B21 8 153 - BROCA Ø3,0X40/300 GRADUADA RC; B21 8 154 - BROCA Ø3,0X40/350 GRADUADA RC; B21 8 155 - BROCA Ø3,0X40/400 GRADUADA RC; B21 8 156 - BROCA Ø3,0X50/200 GRADUADA RC; B21 8 157 - BROCA Ø3,0X50/250 GRADUADA RC; B21 8 158 - BROCA Ø3,0X50/300 GRADUADA RC; B21 8 159 - BROCA Ø3,0X50/350 GRADUADA RC; B21 8 160 - BROCA Ø3,0X50/400 GRADUADA RC; B21 8 161 - BROCA Ø3,0X50/450 GRADUADA RC; B21 8 162 - BROCA Ø3,0X70/200 GRADUADA RC; B21 8 163 - BROCA Ø3,0X70/250 GRADUADA RC; B21 8 164 - BROCA Ø3,0X70/300 GRADUADA RC; B21 8 165 - BROCA Ø3,0X70/350 GRADUADA RC; B21 8 166 - BROCA Ø3,0X70/400 GRADUADA RC; B21 8 167 - BROCA Ø3,0X70/450 GRADUADA RC; B21 8 168 - BROCA Ø3,2 RC; B21 8 169 - BROCA Ø3,2X15/150 RC; B21 8 170 - BROCA Ø3,2X15/180 RC; B21 8 171 - BROCA Ø3,2X15/200 RC; B21 8 172 - BROCA Ø3,2X15/250 RC; B21 8 173 - BROCA Ø3,2X20/150 RC; B21 8 174 - BROCA Ø3,2X20/180 RC; B21 8 175 - BROCA Ø3,2X20/200 RC; B21 8 176 - BROCA Ø3,2X20/250 RC; B21 8 177 - BROCA Ø3,2X25/150 RC; B21 8 178 - BROCA Ø3,2X25/180 RC; B21 8 179 - BROCA Ø3,2X25/200 RC; B21 8 180 - BROCA Ø3,2X25/250 RC; B21 8 181 - BROCA Ø3,2X25/300 RC; B21 8 182 - BROCA Ø3,2X30/150 RC; B21 8 183 - BROCA Ø3,2X30/180 RC; B21 8 184 - BROCA Ø3,2X30/200 RC; B21 8 185 - BROCA Ø3,2X30/250 RC; B21 8 186 - BROCA Ø3,2X30/300 RC; B21 8 187 - BROCA Ø3,2X40/150 RC; B21 8 188 - BROCA Ø3,2X40/180 RC; B21 8 189 - BROCA Ø3,2X40/200 RC; B21 8 190 - BROCA Ø3,2X40/250 RC; B21 8 191 - BROCA Ø3,2X40/300 RC; B21 8 192 - BROCA Ø3,2X40/350 RC; B21 8 193 - BROCA Ø3,2X40/400 RC; B21 8 194 - BROCA Ø3,2X50/150 RC; B21 8 195 - BROCA Ø3,2X50/180 RC; B21 8 196 - BROCA Ø3,2X50/200 RC; B21 8 197 - BROCA Ø3,2X50/250 RC; B21 8 198 - BROCA Ø3,2X50/300 RC; B21 8 199 - BROCA Ø3,2X50/350 RC; B21 8 200 - BROCA Ø3,2X50/400 RC; B21 8 201 - BROCA Ø3,2X50/450 RC; B21 8 202 - BROCA Ø3,2X70/200 RC; B21 8 203 - BROCA Ø3,2X70/250 RC; B21 8 204 - BROCA Ø3,2X70/300 RC; B21 8 205 - BROCA Ø3,2X70/350 RC; B21 8 206 - BROCA Ø3,2X70/400 RC; B21 8 207 - BROCA Ø3,2X70/450 RC; B21 8 208 - BROCA Ø3,2 GRADUADA RC; B21 8 209 - BROCA Ø3,2X15/200 GRADUADA RC; B21 8 210 - BROCA Ø3,2X15/250 GRADUADA RC; B21 8 211 - BROCA Ø3,2X20/200 GRADUADA RC; B21 8 212 - BROCA Ø3,2X20/250 GRADUADA RC; B21 8 213 - BROCA Ø3,2X25/200 GRADUADA RC; B21 8 214 - BROCA Ø3,2X25/250 GRADUADA RC; B21 8 215 - BROCA Ø3,2X25/300 GRADUADA RC; B21 8 216 - BROCA Ø3,2X30/200 GRADUADA RC; B21 8 217 - BROCA Ø3,2X30/250 GRADUADA RC; B21 8 218 - BROCA Ø3,2X30/300 GRADUADA RC; B21 8 219 - BROCA Ø3,2X40/200 GRADUADA RC; B21 8 220 - BROCA Ø3,2X40/250 GRADUADA RC; B21 8 221 - BROCA Ø3,2X40/300 GRADUADA RC; B21 8 222 - BROCA Ø3,2X40/350 GRADUADA RC; B21 8 223 - BROCA Ø3,2X40/400 GRADUADA RC; B21 8 224 - BROCA Ø3,2X50/200 GRADUADA RC; B21 8 225 - BROCA Ø3,2X50/250 GRADUADA RC; B21 8 226 - BROCA Ø3,2X50/300 GRADUADA RC; B21 8 227 - BROCA Ø3,2X50/350 GRADUADA RC; B21 8 228 - BROCA Ø3,2X50/400 GRADUADA RC; B21 8 229 - BROCA Ø3,2X50/450 GRADUADA RC; B21 8 230 - BROCA Ø3,2X70/200 GRADUADA RC; B21 8 231 - BROCA Ø3,2X70/250 GRADUADA RC; B21 8 232 - BROCA Ø3,2X70/300 GRADUADA RC; B21 8 233 - BROCA Ø3,2X70/350 GRADUADA RC; B21 8 234 - BROCA Ø3,2X70/400 GRADUADA RC; B21 8 235 - BROCA Ø3,2X70/450 GRADUADA RC; B21 8 236 - BROCA Ø3,5 RC; B21 8 237 - BROCA Ø3,5X15/150 RC; B21 8 238 - BROCA Ø3,5X15/180 RC; B21 8 239 - BROCA Ø3,5X15/200 RC; B21 8 240 - BROCA Ø3,5X15/250 RC; B21 8 241 - BROCA Ø3,5X20/150 RC; B21 8 242 - BROCA Ø3,5X20/180 RC; B21 8 243 - BROCA Ø3,5X20/200 RC; B21 8 244 - BROCA Ø3,5X20/250 RC; B21 8 245 - BROCA Ø3,5X25/150 RC; B21 8 246 - BROCA Ø3,5X25/180 RC; B21 8 247 - BROCA Ø3,5X25/200 RC; B21 8 248 - BROCA Ø3,5X25/250 RC; B21 8 249 - BROCA Ø3,5X25/300 RC; B21 8 250 - BROCA Ø3,5X30/150 RC; B21 8 251 - BROCA Ø3,5X30/180 RC; B21 8 252 - BROCA Ø3,5X30/200 RC; B21 8 253 - BROCA Ø3,5X30/250 RC; B21 8 254 - BROCA Ø3,5X30/300 RC; B21 8 255 - BROCA Ø3,5X40/150 RC; B21 8 256 - BROCA Ø3,5X40/180 RC; B21 8 257 - BROCA Ø3,5X40/200 RC; B21 8 258 - BROCA Ø3,5X40/250 RC; B21 8 259 - BROCA Ø3,5X40/300 RC; B21 8 260 - BROCA Ø3,5X40/350 RC; B21 8 261 - BROCA Ø3,5X40/400 RC; B21 8 262 - BROCA Ø3,5X50/150 RC; B21 8 263 - BROCA Ø3,5X50/180 RC; B21 8 264 - BROCA Ø3,5X50/200 RC; B21 8 265 - BROCA Ø3,5X50/250 RC; B21 8 266 - BROCA Ø3,5X50/300 RC; B21 8 267 - BROCA Ø3,5X50/350 RC; B21 8 268 - BROCA Ø3,5X50/400 RC; B21 8 269 - BROCA Ø3,5X50/450 RC; B21 8 270 - BROCA Ø3,5X70/200 RC; B21 8 271 - BROCA Ø3,5X70/250 RC; B21 8 272 - BROCA Ø3,5X70/300 RC; B21 8 273 - BROCA Ø3,5X70/350 RC; B21 8 274 - BROCA Ø3,5X70/400 RC; B21 8 275 - BROCA Ø3,5X70/450 RC; B21 8 276 - BROCA Ø3,5 GRADUADA RC; B21 8 277 - BROCA Ø3,5X15/200 GRADUADA RC; B21 8 278 - BROCA Ø3,5X15/250 GRADUADA RC; B21 8 279 - BROCA Ø3,5X20/200 GRADUADA RC; B21 8 280 - BROCA Ø3,5X20/250 GRADUADA RC; B21 8 281 - BROCA Ø3,5X25/200 GRADUADA RC; B21 8 282 - BROCA Ø3,5X25/250 GRADUADA RC; B21 8 283 - BROCA Ø3,5X25/300 GRADUADA RC; B21 8 284 - BROCA Ø3,5X30/200 GRADUADA RC; B21 8 285 - BROCA Ø3,5X30/250 GRADUADA RC; B21 8 286 - BROCA Ø3,5X30/300 GRADUADA RC; B21 8 287 - BROCA Ø3,5X40/200 GRADUADA RC; B21 8 288 - BROCA Ø3,5X40/250 GRADUADA RC; B21 8 289 - BROCA Ø3,5X40/300 GRADUADA RC; B21 8 290 - BROCA Ø3,5X40/350 GRADUADA RC; B21 8 291 - BROCA Ø3,5X40/400 GRADUADA RC; B21 8 292 - BROCA Ø3,5X50/200 GRADUADA RC; B21 8 293 - BROCA Ø3,5X50/250 GRADUADA RC; B21 8 294 - BROCA Ø3,5X50/300 GRADUADA RC; B21 8 295 - BROCA Ø3,5X50/350 GRADUADA RC; B21 8 296 - BROCA Ø3,5X50/400 GRADUADA RC; B21 8 297 - BROCA Ø3,5X50/450 GRADUADA RC; B21 8 298 - BROCA Ø3,5X70/200 GRADUADA RC; B21 8 299 - BROCA Ø3,5X70/250 GRADUADA RC; B21 8 300 - BROCA Ø3,5X70/300 GRADUADA RC; B21 8 301 - BROCA Ø3,5X70/350 GRADUADA RC; B21 8 302 - BROCA Ø3,5X70/400 GRADUADA RC; B21 8 303 - BROCA Ø3,5X70/450 GRADUADA RC; B21 9 100 - BROCA Ø3,3 TR; B21 9 101 - BROCA Ø3,3X15/60 TR; B21 9 102 - BROCA Ø3,3X15/80 TR; B21 9 103 - BROCA Ø3,3X15/100 TR; B21 9 104 - BROCA Ø3,3X15/120 TR; B21 9 105 - BROCA Ø3,3X15/150 TR; B21 9 106 - BROCA Ø3,3X20/60 TR; B21 9 107 - BROCA Ø3,3X20/80 TR; B21 9 108 - BROCA Ø3,3X20/100 TR; B21 9 109 - BROCA Ø3,3X20/120 TR; B21 9 110 - BROCA Ø3,3X20/150 TR; B21 9 111 - BROCA Ø3,3X25/80 TR; B21 9 112 - BROCA Ø3,3X25/100 TR; B21 9 113 - BROCA Ø3,3X25/120 TR; B21 9 114 - BROCA Ø3,3X25/150 TR; B21 9 115 - BROCA Ø3,3X25/180 TR; B21 9 116 - BROCA Ø3,3X25/200 TR; B21 9 117 - BROCA Ø3,3X30/80 TR; B21 9 118 - BROCA Ø3,3X30/100 TR; B21 9 119 - BROCA Ø3,3X30/120 TR; B21 9 120 - BROCA Ø3,3X30/150 TR; B21 9 121 - BROCA Ø3,3X30/180 TR; B21 9 122 - BROCA Ø3,3X30/200 TR; B21 9 123 - BROCA Ø3,3X30/220 TR; B21 9 124 - BROCA Ø3,3X30/250 TR; B21 9 125 - BROCA Ø3,3X40/100 TR; B21 9 126 - BROCA Ø3,3X40/120 TR; B21 9 127 - BROCA Ø3,3X40/150 TR; B21 9 128 - BROCA Ø3,3X40/180 TR; B21 9 129 - BROCA Ø3,3X40/200 TR; B21 9 130 - BROCA Ø3,3X40/220 TR;

B21 9 131 - BROCA Ø3,3X40/250 TR; B21 9 132 - BROCA Ø3,3X40/300 TR; B21 9 133 - BROCA Ø3,3X40/350 TR; B21 9 134 - BROCA Ø3,3X50/100 TR; B21 9 135 - BROCA Ø3,3X50/120 TR; B21 9 136 - BROCA Ø3,3X50/150 TR; B21 9 137 - BROCA Ø3,3X50/180 TR; B21 9 138 - BROCA Ø3,3X50/200 TR; B21 9 139 - BROCA Ø3,3X50/220 TR; B21 9 140 - BROCA Ø3,3X50/250 TR; B21 9 141 - BROCA Ø3,3X50/300 TR; B21 9 142 - BROCA Ø3,3X50/350 TR; B21 9 143 - BROCA Ø3,3X70/200 TR; B21 9 144 - BROCA Ø3,3X70/220 TR; B21 9 145 - BROCA Ø3,3X70/250 TR; B21 9 146 - BROCA Ø3,3X70/300 TR; B21 9 147 - BROCA Ø3,3X70/350 TR; B21 9 148 - BROCA Ø3,3 REBAIXADA TR; B21 9 149 - BROCA Ø3,3X15/60 REBAIXADA TR; B21 9 150 - BROCA Ø3,3X15/80 REBAIXADA TR; B21 9 151 - BROCA Ø3,3X15/100 REBAIXADA TR; B21 9 152 - BROCA Ø3,3X15/120 REBAIXADA TR; B21 9 153 - BROCA Ø3,3X15/150 REBAIXADA TR; B21 9 154 - BROCA Ø3,3X20/60 REBAIXADA TR; B21 9 155 - BROCA Ø3,3X20/80 REBAIXADA TR; B21 9 156 - BROCA Ø3,3X20/100 REBAIXADA TR; B21 9 157 - BROCA Ø3,3X20/120 REBAIXADA TR; B21 9 158 - BROCA Ø3,3X20/150 REBAIXADA TR; B21 9 159 - BROCA Ø3,3X25/80 REBAIXADA TR; B21 9 160 - BROCA Ø3,3X25/100 REBAIXADA TR; B21 9 161 - BROCA Ø3,3X25/120 REBAIXADA TR; B21 9 162 - BROCA Ø3,3X25/150 REBAIXADA TR; B21 9 163 - BROCA Ø3,3X25/180 REBAIXADA TR; B21 9 164 - BROCA Ø3,3X25/200 REBAIXADA TR; B21 9 165 - BROCA Ø3,3X30/80 REBAIXADA TR; B21 9 166 - BROCA Ø3,3X30/100 REBAIXADA TR; B21 9 167 - BROCA Ø3,3X30/120 REBAIXADA TR; B21 9 168 - BROCA Ø3,3X30/150 REBAIXADA TR; B21 9 169 - BROCA Ø3,3X30/180 REBAIXADA TR; B21 9 170 - BROCA Ø3,3X30/200 REBAIXADA TR; B21 9 171 - BROCA Ø3,3X30/220 REBAIXADA TR; B21 9 172 - BROCA Ø3,3X30/250 REBAIXADA TR; B21 9 173 - BROCA Ø3,3X40/100 REBAIXADA TR; B21 9 174 - BROCA Ø3,3X40/120 REBAIXADA TR; B21 9 175 - BROCA Ø3,3X40/150 REBAIXADA TR; B21 9 176 - BROCA Ø3,3X40/180 REBAIXADA TR; B21 9 177 - BROCA Ø3,3X40/200 REBAIXADA TR; B21 9 178 - BROCA Ø3,3X40/220 REBAIXADA TR; B21 9 179 - BROCA Ø3,3X40/250 REBAIXADA TR; B21 9 180 - BROCA Ø3,3X40/300 REBAIXADA TR; B21 9 181 - BROCA Ø3,3X40/350 REBAIXADA TR; B21 9 182 - BROCA Ø3,3X50/100 REBAIXADA TR; B21 9 183 - BROCA Ø3,3X50/120 REBAIXADA TR; B21 9 184 - BROCA Ø3,3X50/150 REBAIXADA TR; B21 9 185 - BROCA Ø3,3X50/180 REBAIXADA TR; B21 9 186 - BROCA Ø3,3X50/200 REBAIXADA TR; B21 9 187 - BROCA Ø3,3X50/220 REBAIXADA TR; B21 9 188 - BROCA Ø3,3X50/250 REBAIXADA TR; B21 9 189 - BROCA Ø3,3X50/300 REBAIXADA TR; B21 9 190 - BROCA Ø3,3X50/350 REBAIXADA TR; B21 9 191 - BROCA Ø3,3X70/200 REBAIXADA TR; B21 9 192 - BROCA Ø3,3X70/220 REBAIXADA TR; B21 9 193 - BROCA Ø3,3X70/250 REBAIXADA TR; B21 9 194 - BROCA Ø3,3X70/300 REBAIXADA TR; B21 9 195 - BROCA Ø3,3X70/350 REBAIXADA TR; B21 9 200 - BROCA Ø3,3 ST; B21 9 201 - BROCA Ø3,3X15/60 ST; B21 9 202 - BROCA Ø3,3X15/80 ST; B21 9 203 - BROCA Ø3,3X15/100 ST; B21 9 204 - BROCA Ø3,3X15/120 ST; B21 9 205 - BROCA Ø3,3X15/150 ST; B21 9 206 - BROCA Ø3,3X20/60 ST; B21 9 207 - BROCA Ø3,3X20/80 ST; B21 9 208 - BROCA Ø3,3X20/100 ST; B21 9 209 - BROCA Ø3,3X20/120 ST; B21 9 210 - BROCA Ø3,3X20/150 ST; B21 9 211 - BROCA Ø3,3X25/80 ST; B21 9 212 - BROCA Ø3,3X25/100 ST; B21 9 213 - BROCA Ø3,3X25/120 ST; B21 9 214 - BROCA Ø3,3X25/150 ST; B21 9 215 - BROCA Ø3,3X25/180 ST; B21 9 216 - BROCA Ø3,3X25/200 ST; B21 9 217 - BROCA Ø3,3X30/80 ST; B21 9 218 - BROCA Ø3,3X30/100 ST; B21 9 219 - BROCA Ø3,3X30/120 ST; B21 9 220 - BROCA Ø3,3X30/150 ST; B21 9 221 - BROCA Ø3,3X30/180 ST; B21 9 222 - BROCA Ø3,3X30/200 ST; B21 9 223 - BROCA Ø3,3X30/220 ST; B21 9 224 - BROCA Ø3,3X30/250 ST; B21 9 225 - BROCA Ø3,3X40/100 ST; B21 9 226 - BROCA Ø3,3X40/120 ST; B21 9 227 - BROCA Ø3,3X40/150 ST; B21 9 228 - BROCA Ø3,3X40/180 ST; B21 9 229 - BROCA Ø3,3X40/200 ST; B21 9 230 - BROCA Ø3,3X40/220 ST; B21 9 231 - BROCA Ø3,3X40/250 ST; B21 9 232 - BROCA Ø3,3X40/300 ST; B21 9 233 - BROCA Ø3,3X40/350 ST; B21 9 234 - BROCA Ø3,3X50/100 ST; B21 9 235 - BROCA Ø3,3X50/120 ST; B21 9 236 - BROCA Ø3,3X50/150 ST; B21 9 237 - BROCA Ø3,3X50/180 ST; B21 9 238 - BROCA Ø3,3X50/200 ST; B21 9 239 - BROCA Ø3,3X50/220 ST; B21 9 240 - BROCA Ø3,3X50/250 ST; B21 9 241 - BROCA Ø3,3X50/300 ST; B21 9 242 - BROCA Ø3,3X50/350 ST; B21 9 243 - BROCA Ø3,3X70/200 ST; B21 9 244 - BROCA Ø3,3X70/220 ST; B21 9 245 - BROCA Ø3,3X70/250 ST; B21 9 246 - BROCA Ø3,3X70/300 ST; B21 9 247 - BROCA Ø3,3X70/350 ST; B21 9 248 - BROCA Ø3,3 REBAIXADA ST; B21 9 249 - BROCA Ø3,3X15/60 REBAIXADA ST; B21 9 250 - BROCA Ø3,3X15/80 REBAIXADA ST; B21 9 251 - BROCA Ø3,3X15/100 REBAIXADA ST; B21 9 252 - BROCA Ø3,3X15/120 REBAIXADA ST; B21 9 253 - BROCA Ø3,3X15/150 REBAIXADA ST; B21 9 254 - BROCA Ø3,3X20/60 REBAIXADA ST; B21 9 255 - BROCA Ø3,3X20/80 REBAIXADA ST; B21 9 256 - BROCA Ø3,3X20/100 REBAIXADA ST; B21 9 257 - BROCA Ø3,3X20/120 REBAIXADA ST; B21 9 258 - BROCA Ø3,3X20/150 REBAIXADA ST; B21 9 259 - BROCA Ø3,3X25/80 REBAIXADA ST; B21 9 260 - BROCA Ø3,3X25/100 REBAIXADA ST; B21 9 261 - BROCA Ø3,3X25/120 REBAIXADA ST; B21 9 262 - BROCA Ø3,3X25/150 REBAIXADA ST; B21 9 263 - BROCA Ø3,3X25/180 REBAIXADA ST; B21 9 264 - BROCA Ø3,3X25/200 REBAIXADA ST; B21 9 265 - BROCA Ø3,3X30/80 REBAIXADA ST; B21 9 266 - BROCA Ø3,3X30/100 REBAIXADA ST; B21 9 267 - BROCA Ø3,3X30/120 REBAIXADA ST; B21 9 268 - BROCA Ø3,3X30/150 REBAIXADA ST; B21 9 269 - BROCA Ø3,3X30/180 REBAIXADA ST; B21 9 270 - BROCA Ø3,3X30/200 REBAIXADA ST; B21 9 271 - BROCA Ø3,3X30/220 REBAIXADA ST; B21 9 272 - BROCA Ø3,3X30/250 REBAIXADA ST; B21 9 273 - BROCA Ø3,3X40/100 REBAIXADA ST; B21 9 274 - BROCA Ø3,3X40/120 REBAIXADA ST; B21 9 275 - BROCA Ø3,3X40/150 REBAIXADA ST; B21 9 276 - BROCA Ø3,3X40/180 REBAIXADA ST; B21 9 277 - BROCA Ø3,3X40/200 REBAIXADA ST; B21 9 278 - BROCA Ø3,3X40/220 REBAIXADA ST; B21 9 279 - BROCA Ø3,3X40/250 REBAIXADA ST; B21 9 280 - BROCA Ø3,3X40/300 REBAIXADA ST; B21 9 281 - BROCA Ø3,3X40/350 REBAIXADA ST; B21 9 282 - BROCA Ø3,3X50/100 REBAIXADA ST; B21 9 283 - BROCA Ø3,3X50/120 REBAIXADA ST; B21 9 284 - BROCA Ø3,3X50/150 REBAIXADA ST; B21 9 285 - BROCA Ø3,3X50/180 REBAIXADA ST; B21 9 286 - BROCA Ø3,3X50/200 REBAIXADA ST; B21 9 287 - BROCA Ø3,3X50/220 REBAIXADA ST; B21 9 288 - BROCA Ø3,3X50/250 REBAIXADA ST; B21 9 289 - BROCA Ø3,3X50/300 REBAIXADA ST; B21 9 290 - BROCA Ø3,3X50/350 REBAIXADA ST; B21 9 291 - BROCA Ø3,3X70/200 REBAIXADA ST; B21 9 292 - BROCA Ø3,3X70/220 REBAIXADA ST; B21 9 293 - BROCA Ø3,3X70/250 REBAIXADA ST; B21 9 294 - BROCA Ø3,3X70/300 REBAIXADA ST; B21 9 295 - BROCA Ø3,3X70/350 REBAIXADA ST; B51 0 100 - BROCA ANTERIOR Ø6,5; B51 0 102 - BROCA ANTERIOR Ø9,5; B51 0 110 - BROCA C/ STOP Ø1,3X4MM - LAMINOPASTIA; B51 0 112 - BROCA C/ STOP Ø1,3X6MM - LAMINOPASTIA; B51 0 114 - BROCA C/ STOP Ø1,3X8MM - LAMINOPASTIA; B51 0 116 - BROCA C/ STOP Ø1,3X10MM - LAMINOPASTIA; B51 0 118 - BROCA C/ STOP Ø1,3X12MM - LAMINOPASTIA; B51 0 130 - BROCA C/ STOP Ø2,0X4MM - LAMINOPASTIA; B51 0 132 - BROCA C/ STOP Ø2,0X6MM - LAMINOPASTIA; B51 0 134 - BROCA C/ STOP Ø2,0X8MM - LAMINOPASTIA; B51 0 136 - BROCA C/ STOP Ø2,0X10MM - LAMINOPASTIA; B51 0 138 - BROCA C/ STOP Ø2,0X12MM - LAMINOPASTIA; B51 0 150 - BROCA COM STOP; B51 0 152 - BROCA COM STOP Ø3,2; B51 0 154 - BROCA COM STOP Ø3,5; B51 0 156 - BROCA COM STOP Ø9,0; B51 0 158 - BROCA COM STOP Ø10,0; B51 0 160 - BROCA COM STOP Ø11,0; B51 0 162 - BROCA COM STOP PARA QUADRIL; B51 0 164 - BROCA COM STOP Ø4,0 RÁDIO; B51 0 166 - BROCA COM STOP Ø6,0 RÁDIO; B51 0 168 - BROCA COM STOP Ø8,0 RÁDIO; B51 0 170 - BROCA COM STOP Ø9,5 TR; B51 0 198 - BROCA FLEXIVEL Ø3,0; B51 0 200 - BROCA FLEXIVEL Ø3,2; B51 0 202 - BROCA FLEXIVEL Ø3,5; B51 0 204 - BROCA

FLEXIVEL Ø3,8; B51 0 206 - BROCA FLEXIVEL Ø4,0; B51 0 208 - BROCA FLEXIVEL Ø4,5; B51 0 209 - BROCA FLEXIVEL Ø3,0X30; B51 0 210 - BROCA FLEXIVEL Ø3,2X30; B51 0 212 - BROCA FLEXIVEL Ø3,5X30; B51 0 214 - BROCA FLEXIVEL Ø3,8X30; B51 0 216 - BROCA FLEXIVEL Ø4,0X30; B51 0 218 - BROCA FLEXIVEL Ø4,5X30; B51 0 219 - BROCA FLEXIVEL Ø3,0X40; B51 0 220 - BROCA FLEXIVEL Ø3,2X40; B51 0 222 - BROCA FLEXIVEL Ø3,5X40; B51 0 224 - BROCA FLEXIVEL Ø3,8X40; B51 0 226 - BROCA FLEXIVEL Ø4,0X40; B51 0 228 - BROCA FLEXIVEL Ø4,5X40; B51 0 229 - BROCA FLEXIVEL Ø3,0 ST; B51 0 230 - BROCA FLEXIVEL Ø3,2 ST; B51 0 232 - BROCA FLEXIVEL Ø3,5 ST; B51 0 234 - BROCA FLEXIVEL Ø3,8 ST; B51 0 236 - BROCA FLEXIVEL Ø4,0 ST; B51 0 238 - BROCA FLEXIVEL Ø4,5 ST; B51 0 239 - BROCA FLEXIVEL Ø3,0X30 ST; B51 0 240 - BROCA FLEXIVEL Ø3,2X30 ST; B51 0 242 - BROCA FLEXIVEL Ø3,5X30 ST; B51 0 244 - BROCA FLEXIVEL Ø3,8X30 ST; B51 0 246 - BROCA FLEXIVEL Ø4,0X30 ST; B51 0 248 - BROCA FLEXIVEL Ø4,5X30 ST; B51 0 249 - BROCA FLEXIVEL Ø3,0X40 ST; B51 0 250 - BROCA FLEXIVEL Ø3,2X40 ST; B51 0 252 - BROCA FLEXIVEL Ø3,5X40 ST; B51 0 254 - BROCA FLEXIVEL Ø3,8X40 ST; B51 0 256 - BROCA FLEXIVEL Ø4,0X40 ST; B51 0 258 - BROCA FLEXIVEL Ø4,5X40 ST; B51 0 259 - BROCA FLEXIVEL Ø3,0 TR; B51 0 260 - BROCA FLEXIVEL Ø3,2 TR; B51 0 262 - BROCA FLEXIVEL Ø3,5 TR; B51 0 264 - BROCA FLEXIVEL Ø3,8 TR; B51 0 266 - BROCA FLEXIVEL Ø4,0 TR; B51 0 268 - BROCA FLEXIVEL Ø4,5 TR; B51 0 269 - BROCA FLEXIVEL Ø3,0X30 TR; B51 0 270 - BROCA FLEXIVEL Ø3,2X30 TR; B51 0 272 - BROCA FLEXIVEL Ø3,5X30 TR; B51 0 274 - BROCA FLEXIVEL Ø3,8X30 TR; B51 0 276 - BROCA FLEXIVEL Ø4,0X30 TR; B51 0 278 - BROCA FLEXIVEL Ø4,5X30 TR; B51 0 279 - BROCA FLEXIVEL Ø3,0X40 TR; B51 0 280 - BROCA FLEXIVEL Ø3,2X40 TR; B51 0 282 - BROCA FLEXIVEL Ø3,5X40 TR; B51 0 284 - BROCA FLEXIVEL Ø3,8X40 TR; B51 0 286 - BROCA FLEXIVEL Ø4,0X40 TR; B51 0 288 - BROCA FLEXIVEL Ø4,5X40 TR; B51 0 290 - BROCA FLEXIVEL Ø3,2 SJ; B51 0 292 - BROCA FLEXIVEL Ø3,5 SJ; B51 0 294 - BROCA FLEXIVEL Ø3,8 SJ; B51 0 296 - BROCA FLEXIVEL Ø4,0 SJ; B51 0 298 - BROCA FLEXIVEL Ø4,5 SJ; B51 0 300 - BROCA FLEXIVEL Ø3,2X30 SJ; B51 0 302 - BROCA FLEXIVEL Ø3,5X30 SJ; B51 0 304 - BROCA FLEXIVEL Ø3,8X30 SJ; B51 0 306 - BROCA FLEXIVEL Ø4,0X30 SJ; B51 0 308 - BROCA FLEXIVEL Ø4,5X30 SJ; B51 0 310 - BROCA FLEXIVEL Ø3,2X40 SJ; B51 0 312 - BROCA FLEXIVEL Ø3,5X40 SJ; B51 0 314 - BROCA FLEXIVEL Ø3,8X40 SJ; B51 0 316 - BROCA FLEXIVEL Ø4,0X40 SJ; B51 0 318 - BROCA FLEXIVEL Ø4,5X40 SJ; B51 0 330 - BROCA Ø3,0X25 C/ ENGATE P/ CABO FLEXIVEL; B51 0 332 - BROCA Ø3,2X25 C/ ENGATE P/ CABO FLEXIVEL; B51 0 334 - BROCA Ø3,5X25 C/ ENGATE P/ CABO FLEXIVEL; B51 0 336 - BROCA Ø3,8X25 C/ ENGATE P/ CABO FLEXIVEL; B51 0 338 - BROCA Ø4,0X25 C/ ENGATE P/ CABO FLEXIVEL; B51 0 340 - BROCA Ø4,5X25 C/ ENGATE P/ CABO FLEXIVEL; B51 0 342 - BROCA Ø3,0X40 C/ ENGATE P/ CABO FLEXIVEL; B51 0 344 - BROCA Ø3,2X40 C/ ENGATE P/ CABO FLEXIVEL; B51 0 346 - BROCA Ø3,5X40 C/ ENGATE P/ CABO FLEXIVEL; B51 0 348 - BROCA Ø3,8X40 C/ ENGATE P/ CABO FLEXIVEL; B51 0 350 - BROCA Ø4,0X40 C/ ENGATE P/ CABO FLEXIVEL; B51 0 352 - BROCA Ø4,5X40 C/ ENGATE P/ CABO FLEXIVEL; B51 0 400 - BROCA CANULADA Ø5; B51 0 402 - BROCA CANULADA Ø5,5; B51 0 404 - BROCA CANULADA Ø5X210; B51 0 406 - BROCA CANULADA Ø5,5X210; B51 0 408 - BROCA CANULADA Ø5X240; B51 0 410 - BROCA CANULADA Ø5,5X240; B51 0 412 - BROCA CANULADA Ø6; B51 0 414 - BROCA CANULADA Ø7; B51 0 416 - BROCA CANULADA Ø8; B51 0 418 - BROCA CANULADA Ø9; B51 0 420 - BROCA CANULADA Ø10; B51 0 422 - BROCA CANULADA Ø11; B51 0 424 - BROCA CANULADA Ø6X140; B51 0 426 - BROCA CANULADA Ø7X140; B51 0 428 - BROCA CANULADA Ø8X140; B51 0 430 - BROCA CANULADA Ø9X140; B51 0 432 - BROCA CANULADA Ø10X140; B51 0 434 - BROCA CANULADA Ø11X140; B51 0 436 - BROCA CANULADA Ø6X180; B51 0 438 - BROCA CANULADA Ø7X180; B51 0 440 - BROCA CANULADA Ø8X180; B51 0 442 - BROCA CANULADA Ø9X180; B51 0 444 - BROCA CANULADA Ø10X180; B51 0 446 - BROCA CANULADA Ø11X180; B51 0 448 - BROCA CANULADA Ø6X200; B51 0 450 - BROCA CANULADA Ø7X200; B51 0 452 - BROCA CANULADA Ø8X200; B51 0 454 - BROCA CANULADA Ø9X200; B51 0 456 - BROCA CANULADA Ø10X200; B51 0 458 - BROCA CANULADA Ø11X200; B51 0 500 - BROCA Ø16,8 JOELHO; B51 0 502 - BROCA Ø18,0 JOELHO; B51 0 504 - BROCA Ø16,8 GRADUADA JOELHO REVISÃO; B51 0 506 - BROCA Ø18,0 GRADUADA JOELHO REVISÃO; B51 0 508 - BROCA ESCALONADA JOELHO; B51 0 510 - BROCA ESCALONADA JOELHO REVISÃO; B51 0 512 - BROCA PATELAR Ø10; B51 0 514 - BROCA PATELAR Ø11; B51 0 516 - BROCA PATELAR - GUIA 3 FUROS; B51 0 518 - BROCA PATELAR Ø10 SJ; B51 0 520 - BROCA PATELAR Ø11 SJ; B51 0 522 - BROCA PATELAR - GUIA 3 FUROS SJ; B51 0 524 - BROCA P/ JOELHO COMPARTIMENTAL Ø7,0MM; B51 0 526 - BROCA P/ JOELHO COMPARTIMENTAL Ø8,0MM; B51 0 550 - BROCA INICIAL; B51 0 552 - BROCA INICIAL TR; B51 0 554 - BROCA INICIAL SJ; B51 0 556 - BROCA PARA PLACA ANGULADA; B51 0 560 - BROCA UMERAL Ø6; B51 0 562 - BROCA UMERAL Ø7; B51 0 564 - BROCA UMERAL Ø8; B51 0 566 - BROCA UMERAL Ø9; B51 0 568 - BROCA UMERAL Ø10; B51 0 570 - BROCA UMERAL Ø11; B51 0 572 - BROCA UMERAL Ø12; B51 0 574 - BROCA UMERAL Ø13; B51 0 600 - BROCA Ø2,5X35/380; B51 0 602 - BROCA Ø2,7X45/230; B51 0 604 - BROCA Ø3,5X30/200 REBAIXADA; B51 0 606 - BROCA Ø3,5X30/230 REBAIXADA; B51 0 608 - BROCA Ø3,5X70/240 TR; B51 0 610 - BROCA Ø4,0X45/365 GRADUADA REBAIXADA; B51 0 612 - BROCA Ø4,5 ESCALONADA; B51 0 614 - BROCA Ø4,5X50/238 REBAIXADA; B51 0 616 - BROCA Ø5,0X40/200 REBAIXADA; B51 0 618 - BROCA Ø6,5/10 ESCALONADA GRADUADA; B51 0 620 - BROCA Ø7,0/10,0 ESCALONADA GRADUADA; B51 0 700 - BROCA CANULADA Ø6X205 TR; B51 0 702 - BROCA Ø4,0X60/180 GRADUADA TR; B51 0 704 - BROCA Ø4,0X60/367 GRADUADA TR; B51 0 706 - BROCA Ø4,8X60/180 GRADUADA TR; B51 0 708 - BROCA Ø4,8X60/367 GRADUADA TR; B51 0 800 - BROCA Ø3,2X145 - 3-CORTES HBT-TI, ST; B51 0 803 - BROCA Ø4,2X145 - 3-CORTES HBT-TI, ST; B51 0 806 - BROCA Ø3,8X145 - 3-CORTES HBT-TI, ST; B51 0 810 - BROCA Ø3,2X145 - 3-CORTES RADIOTRASPARENTE HBT-TI; B51 0 813 - BROCA Ø4,2X145 - 3-CORTES RADIOTRASPARENTE HBT-TI; B51 0 816 - BROCA Ø3,8X145 - 3-CORTES RADIOTRASPARENTE HBT-TI; B51 0 820 - BROCA Ø3,8 GRADUADA HBT-TI; B51 0 823 - BROCA Ø3,2 GRADUADA HBT-TI; B51 0 826 - BROCA Ø4,2 GRADUADA HBT-TI; B51 0 830 - BROCA Ø4,2 GRADUADA HBPL; B51 0 833 - BROCA ESCALONADA FEMORAL Ø6,4/Ø10 GAMMA NAIL - SK; B51 0 836 - BROCA CANULADA Ø12X190,0 HBT-TI; B51 0 900 - BROCA P/ CRANIOPLASTIA SPINE; B51 1 100 - BROCA Ø3,0 SJ; B51 1 101 - BROCA Ø3,0X15/60 SJ; B51 1 102 - BROCA Ø3,0X15/80 SJ; B51 1 103 - BROCA Ø3,0X15/100 SJ; B51 1 104 - BROCA Ø3,0X15/120 SJ; B51 1 105 - BROCA Ø3,0X15/150 SJ; B51 1 106 - BROCA Ø3,0X20/60 SJ; B51 1 107 - BROCA Ø3,0X20/80 SJ; B51 1 108 - BROCA Ø3,0X20/100 SJ; B51 1 109 - BROCA Ø3,0X20/120 SJ; B51 1 110 - BROCA Ø3,0X20/150 SJ; B51 1 111 - BROCA Ø3,0X25/80 SJ; B51 1 112 - BROCA Ø3,0X25/100 SJ; B51 1 113 - BROCA Ø3,0X25/120 SJ; B51 1 114 - BROCA Ø3,0X25/150 SJ; B51 1 115 - BROCA Ø3,0X25/180 SJ; B51 1 116 - BROCA Ø3,0X25/200 SJ; B51 1 117 - BROCA Ø3,0X30/80 SJ; B51 1 118 - BROCA Ø3,0X30/100 SJ; B51 1 119 - BROCA Ø3,0X30/120 SJ; B51 1 120 - BROCA Ø3,0X30/150 SJ; B51 1 121 - BROCA Ø3,0X30/180 SJ; B51 1 122 - BROCA Ø3,0X30/200 SJ; B51 1 123 - BROCA Ø3,0X30/220 SJ; B51 1 124 - BROCA Ø3,0X30/250 SJ; B51 1 125 - BROCA Ø3,0X40/100 SJ; B51 1 126 - BROCA Ø3,0X40/120 SJ; B51 1 127 - BROCA Ø3,0X40/150 SJ; B51 1 128 - BROCA Ø3,0X40/180 SJ; B51 1 129 - BROCA Ø3,0X40/200 SJ; B51 1 130 - BROCA Ø3,0X40/220 SJ; B51 1 131 - BROCA Ø3,0X40/250 SJ; B51 1 132 - BROCA Ø3,0X40/300 SJ; B51 1 133 - BROCA Ø3,0X40/350 SJ; B51 1 134 - BROCA

Ø3,0X50/100 SJ; B51 1 135 - BROCA Ø3,0X50/120 SJ; B51 1 136 - BROCA Ø3,0X50/150 SJ; B51 1 137 - BROCA Ø3,0X50/180 SJ; B51 1 138 - BROCA Ø3,0X50/200 SJ; B51 1 139 - BROCA Ø3,0X50/220 SJ; B51 1 140 - BROCA Ø3,0X50/250 SJ; B51 1 141 - BROCA Ø3,0X50/300 SJ; B51 1 142 - BROCA Ø3,0X50/350 SJ; B51 1 143 - BROCA Ø3,0X70/200 SJ; B51 1 144 - BROCA Ø3,0X70/220 SJ; B51 1 145 - BROCA Ø3,0X70/250 SJ; B51 1 146 - BROCA Ø3,0X70/300 SJ; B51 1 147 - BROCA Ø3,0X70/350 SJ; B51 1 148 - BROCA Ø3,0 REBAIXADA SJ; B51 1 149 - BROCA Ø3,0X15/60 REBAIXADA SJ; B51 1 150 - BROCA Ø3,0X15/80 REBAIXADA SJ; B51 1 151 - BROCA Ø3,0X15/100 REBAIXADA SJ; B51 1 152 - BROCA Ø3,0X15/120 REBAIXADA SJ; B51 1 153 - BROCA Ø3,0X15/150 REBAIXADA SJ; B51 1 154 - BROCA Ø3,0X20/60 REBAIXADA SJ; B51 1 155 - BROCA Ø3,0X20/80 REBAIXADA SJ; B51 1 156 - BROCA Ø3,0X20/100 REBAIXADA SJ; B51 1 157 - BROCA Ø3,0X20/120 REBAIXADA SJ; B51 1 158 - BROCA Ø3,0X20/150 REBAIXADA SJ; B51 1 159 - BROCA Ø3,0X25/80 REBAIXADA SJ; B51 1 160 - BROCA Ø3,0X25/100 REBAIXADA SJ; B51 1 161 - BROCA Ø3,0X25/120 REBAIXADA SJ; B51 1 162 - BROCA Ø3,0X25/150 REBAIXADA SJ; B51 1 163 - BROCA Ø3,0X25/180 REBAIXADA SJ; B51 1 164 - BROCA Ø3,0X25/200 REBAIXADA SJ; B51 1 165 - BROCA Ø3,0X30/80 REBAIXADA SJ; B51 1 166 - BROCA Ø3,0X30/100 REBAIXADA SJ; B51 1 167 - BROCA Ø3,0X30/120 REBAIXADA SJ; B51 1 168 - BROCA Ø3,0X30/150 REBAIXADA SJ; B51 1 169 - BROCA Ø3,0X30/180 REBAIXADA SJ; B51 1 170 - BROCA Ø3,0X30/200 REBAIXADA SJ; B51 1 171 - BROCA Ø3,0X30/220 REBAIXADA SJ; B51 1 172 - BROCA Ø3,0X30/250 REBAIXADA SJ; B51 1 173 - BROCA Ø3,0X40/100 REBAIXADA SJ; B51 1 174 - BROCA Ø3,0X40/120 REBAIXADA SJ; B51 1 175 - BROCA Ø3,0X40/150 REBAIXADA SJ; B51 1 176 - BROCA Ø3,0X40/180 REBAIXADA SJ; B51 1 177 - BROCA Ø3,0X40/200 REBAIXADA SJ; B51 1 178 - BROCA Ø3,0X40/220 REBAIXADA SJ; B51 1 179 - BROCA Ø3,0X40/250 REBAIXADA SJ; B51 1 180 - BROCA Ø3,0X40/300 REBAIXADA SJ; B51 1 181 - BROCA Ø3,0X40/350 REBAIXADA SJ; B51 1 182 - BROCA Ø3,0X50/100 REBAIXADA SJ; B51 1 183 - BROCA Ø3,0X50/120 REBAIXADA SJ; B51 1 184 - BROCA Ø3,0X50/150 REBAIXADA SJ; B51 1 185 - BROCA Ø3,0X50/180 REBAIXADA SJ; B51 1 186 - BROCA Ø3,0X50/200 REBAIXADA SJ; B51 1 187 - BROCA Ø3,0X50/220 REBAIXADA SJ; B51 1 188 - BROCA Ø3,0X50/250 REBAIXADA SJ; B51 1 189 - BROCA Ø3,0X50/300 REBAIXADA SJ; B51 1 190 - BROCA Ø3,0X50/350 REBAIXADA SJ; B51 1 191 - BROCA Ø3,0X70/200 REBAIXADA SJ; B51 1 192 - BROCA Ø3,0X70/220 REBAIXADA SJ; B51 1 193 - BROCA Ø3,0X70/250 REBAIXADA SJ; B51 1 194 - BROCA Ø3,0X70/300 REBAIXADA SJ; B51 1 195 - BROCA Ø3,0X70/350 REBAIXADA SJ; B51 1 196 - BROCA Ø3,2 SJ; B51 1 197 - BROCA Ø3,2X15/60 SJ; B51 1 198 - BROCA Ø3,2X15/80 SJ; B51 1 199 - BROCA Ø3,2X15/100 SJ; B51 200 - BROCA Ø3,2X15/120 SJ; B51 201 - BROCA Ø3,2X15/150 SJ; B51 202 - BROCA Ø3,2X20/60 SJ; B51 203 - BROCA Ø3,2X20/80 SJ; B51 204 - BROCA Ø3,2X20/100 SJ; B51 205 - BROCA Ø3,2X20/120 SJ; B51 206 - BROCA Ø3,2X20/150 SJ; B51 207 - BROCA Ø3,2X25/80 SJ; B51 208 - BROCA Ø3,2X25/100 SJ; B51 209 - BROCA Ø3,2X25/120 SJ; B51 210 - BROCA Ø3,2X25/150 SJ; B51 211 - BROCA Ø3,2X25/180 SJ; B51 212 - BROCA Ø3,2X25/200 SJ; B51 213 - BROCA Ø3,2X30/80 SJ; B51 214 - BROCA Ø3,2X30/100 SJ; B51 215 - BROCA Ø3,2X30/120 SJ; B51 216 - BROCA Ø3,2X30/150 SJ; B51 217 - BROCA Ø3,2X30/180 SJ; B51 218 - BROCA Ø3,2X30/200 SJ; B51 219 - BROCA Ø3,2X30/220 SJ; B51 220 - BROCA Ø3,2X30/250 SJ; B51 221 - BROCA Ø3,2X40/100 SJ; B51 222 - BROCA Ø3,2X40/120 SJ; B51 223 - BROCA Ø3,2X40/150 SJ; B51 224 - BROCA Ø3,2X40/180 SJ; B51 225 - BROCA Ø3,2X40/200 SJ; B51 226 - BROCA Ø3,2X40/220 SJ; B51 227 - BROCA Ø3,2X40/250 SJ; B51 228 - BROCA Ø3,2X40/300 SJ; B51 229 - BROCA Ø3,2X40/350 SJ; B51 230 - BROCA Ø3,2X50/100 SJ; B51 231 - BROCA Ø3,2X50/120 SJ; B51 232 - BROCA Ø3,2X50/150 SJ; B51 233 - BROCA Ø3,2X50/180 SJ; B51 234 - BROCA Ø3,2X50/200 SJ; B51 235 - BROCA Ø3,2X50/220 SJ; B51 236 - BROCA Ø3,2X50/250 SJ; B51 237 - BROCA Ø3,2X50/300 SJ; B51 238 - BROCA Ø3,2X50/350 SJ; B51 239 - BROCA Ø3,2X70/200 SJ; B51 240 - BROCA Ø3,2X70/220 SJ; B51 241 - BROCA Ø3,2X70/250 SJ; B51 242 - BROCA Ø3,2X70/300 SJ; B51 243 - BROCA Ø3,2X70/350 SJ; B51 244 - BROCA Ø3,2 REBAIXADA SJ; B51 245 - BROCA Ø3,2X15/60 REBAIXADA SJ; B51 246 - BROCA Ø3,2X15/80 REBAIXADA SJ; B51 247 - BROCA Ø3,2X15/100 REBAIXADA SJ; B51 248 - BROCA Ø3,2X15/120 REBAIXADA SJ; B51 249 - BROCA Ø3,2X15/150 REBAIXADA SJ; B51 250 - BROCA Ø3,2X20/60 REBAIXADA SJ; B51 251 - BROCA Ø3,2X20/80 REBAIXADA SJ; B51 252 - BROCA Ø3,2X20/100 REBAIXADA SJ; B51 253 - BROCA Ø3,2X20/120 REBAIXADA SJ; B51 254 - BROCA Ø3,2X20/150 REBAIXADA SJ; B51 255 - BROCA Ø3,2X25/80 REBAIXADA SJ; B51 256 - BROCA Ø3,2X25/100 REBAIXADA SJ; B51 257 - BROCA Ø3,2X25/120 REBAIXADA SJ; B51 258 - BROCA Ø3,2X25/150 REBAIXADA SJ; B51 259 - BROCA Ø3,2X25/180 REBAIXADA SJ; B51 260 - BROCA Ø3,2X25/200 REBAIXADA SJ; B51 261 - BROCA Ø3,2X30/80 REBAIXADA SJ; B51 262 - BROCA Ø3,2X30/100 REBAIXADA SJ; B51 263 - BROCA Ø3,2X30/120 REBAIXADA SJ; B51 264 - BROCA Ø3,2X30/150 REBAIXADA SJ; B51 265 - BROCA Ø3,2X30/180 REBAIXADA SJ; B51 266 - BROCA Ø3,2X30/200 REBAIXADA SJ; B51 267 - BROCA Ø3,2X30/220 REBAIXADA SJ; B51 268 - BROCA Ø3,2X30/250 REBAIXADA SJ; B51 269 - BROCA Ø3,2X40/100 REBAIXADA SJ; B51 270 - BROCA Ø3,2X40/120 REBAIXADA SJ; B51 271 - BROCA Ø3,2X40/150 REBAIXADA SJ; B51 272 - BROCA Ø3,2X40/180 REBAIXADA SJ; B51 273 - BROCA Ø3,2X40/200 REBAIXADA SJ; B51 274 - BROCA Ø3,2X40/220 REBAIXADA SJ; B51 275 - BROCA Ø3,2X40/250 REBAIXADA SJ; B51 276 - BROCA Ø3,2X40/300 REBAIXADA SJ; B51 277 - BROCA Ø3,2X40/350 REBAIXADA SJ; B51 278 - BROCA Ø3,2X50/100 REBAIXADA SJ; B51 279 - BROCA Ø3,2X50/120 REBAIXADA SJ; B51 280 - BROCA Ø3,2X50/150 REBAIXADA SJ; B51 281 - BROCA Ø3,2X50/180 REBAIXADA SJ; B51 282 - BROCA Ø3,2X50/200 REBAIXADA SJ; B51 283 - BROCA Ø3,2X50/220 REBAIXADA SJ; B51 284 - BROCA Ø3,2X50/250 REBAIXADA SJ; B51 285 - BROCA Ø3,2X50/300 REBAIXADA SJ; B51 286 - BROCA Ø3,2X50/350 REBAIXADA SJ; B51 287 - BROCA Ø3,2X70/200 REBAIXADA SJ; B51 288 - BROCA Ø3,2X70/220 REBAIXADA SJ; B51 289 - BROCA Ø3,2X70/250 REBAIXADA SJ; B51 290 - BROCA Ø3,2X70/300 REBAIXADA SJ; B51 291 - BROCA Ø3,2X70/350 REBAIXADA SJ; B51 292 - BROCA Ø3,5 SJ; B51 293 - BROCA Ø3,5X15/80 SJ; B51 294 - BROCA Ø3,5X15/100 SJ; B51 295 - BROCA Ø3,5X15/120 SJ; B51 296 - BROCA Ø3,5X15/150 SJ; B51 297 - BROCA Ø3,5X20/80 SJ; B51 298 - BROCA Ø3,5X20/100 SJ; B51 299 - BROCA Ø3,5X20/120 SJ; B51 300 - BROCA Ø3,5X20/150 SJ; B51 301 - BROCA Ø3,5X25/100 SJ; B51 302 - BROCA Ø3,5X25/120 SJ; B51 303 - BROCA Ø3,5X25/150 SJ; B51 304 - BROCA Ø3,5X25/180 SJ; B51 305 - BROCA Ø3,5X25/200 SJ; B51 306 - BROCA Ø3,5X30/100 SJ; B51 307 - BROCA Ø3,5X30/120 SJ; B51 308 - BROCA Ø3,5X30/150 SJ; B51 309 - BROCA Ø3,5X30/180 SJ; B51 310 - BROCA Ø3,5X30/200 SJ; B51 311 - BROCA Ø3,5X30/220 SJ; B51 312 - BROCA Ø3,5X30/250 SJ; B51 313 - BROCA Ø3,5X40/100 SJ; B51 314 - BROCA Ø3,5X40/120 SJ; B51 315 - BROCA Ø3,5X40/150 SJ; B51 316 - BROCA Ø3,5X40/180 SJ; B51 317 - BROCA Ø3,5X40/200 SJ; B51 318 - BROCA Ø3,5X40/220 SJ; B51 319 - BROCA Ø3,5X40/250 SJ; B51 320 - BROCA Ø3,5X40/300 SJ; B51 321 - BROCA Ø3,5X40/350 SJ; B51 322 - BROCA Ø3,5X40/400 SJ; B51 323 - BROCA Ø3,5X50/100 SJ; B51 324 - BROCA Ø3,5X50/120 SJ; B51 325 - BROCA Ø3,5X50/150 SJ; B51 326 - BROCA Ø3,5X50/180 SJ; B51 327 - BROCA

Ø3,5X50/200 SJ; B51 1 328 - BROCA Ø3,5X50/220 SJ; B51 1 329 - BROCA Ø3,5X50/250 SJ; B51 1 330 - BROCA Ø3,5X50/300 SJ; B51 1 331 - BROCA Ø3,5X50/350 SJ; B51 1 332 - BROCA Ø3,5X50/400 SJ; B51 1 333 - BROCA Ø3,5X70/200 SJ; B51 1 334 - BROCA Ø3,5X70/220 SJ; B51 1 335 - BROCA Ø3,5X70/250 SJ; B51 1 336 - BROCA Ø3,5X70/300 SJ; B51 1 337 - BROCA Ø3,5X70/350 SJ; B51 1 338 - BROCA Ø3,5X70/400 SJ; B51 1 339 - BROCA Ø3,5 GRADUADA SJ; B51 1 340 - BROCA Ø3,5X25/200 GRADUADA SJ; B51 1 341 - BROCA Ø3,5X30/200 GRADUADA SJ; B51 1 342 - BROCA Ø3,5X30/220 GRADUADA SJ; B51 1 343 - BROCA Ø3,5X30/250 GRADUADA SJ; B51 1 344 - BROCA Ø3,5X40/200 GRADUADA SJ; B51 1 345 - BROCA Ø3,5X40/220 GRADUADA SJ; B51 1 346 - BROCA Ø3,5X40/250 GRADUADA SJ; B51 1 347 - BROCA Ø3,5X40/300 GRADUADA SJ; B51 1 348 - BROCA Ø3,5X40/350 GRADUADA SJ; B51 1 349 - BROCA Ø3,5X40/400 GRADUADA SJ; B51 1 350 - BROCA Ø3,5X50/200 GRADUADA SJ; B51 1 351 - BROCA Ø3,5X50/220 GRADUADA SJ; B51 1 352 - BROCA Ø3,5X50/250 GRADUADA SJ; B51 1 353 - BROCA Ø3,5X50/300 GRADUADA SJ; B51 1 354 - BROCA Ø3,5X50/350 GRADUADA SJ; B51 1 355 - BROCA Ø3,5X50/400 GRADUADA SJ; B51 1 356 - BROCA Ø3,5X70/200 GRADUADA SJ; B51 1 357 - BROCA Ø3,5X70/220 GRADUADA SJ; B51 1 358 - BROCA Ø3,5X70/250 GRADUADA SJ; B51 1 359 - BROCA Ø3,5X70/300 GRADUADA SJ; B51 1 360 - BROCA Ø3,5X70/350 GRADUADA SJ; B51 1 361 - BROCA Ø3,5X70/400 GRADUADA SJ; B51 1 362 - BROCA Ø3,5 REBAIXADA SJ; B51 1 363 - BROCA Ø3,5X15/80 REBAIXADA SJ; B51 1 364 - BROCA Ø3,5X15/100 REBAIXADA SJ; B51 1 365 - BROCA Ø3,5X15/120 REBAIXADA SJ; B51 1 366 - BROCA Ø3,5X15/150 REBAIXADA SJ; B51 1 367 - BROCA Ø3,5X20/80 REBAIXADA SJ; B51 1 368 - BROCA Ø3,5X20/100 REBAIXADA SJ; B51 1 369 - BROCA Ø3,5X20/120 REBAIXADA SJ; B51 1 370 - BROCA Ø3,5X20/150 REBAIXADA SJ; B51 1 371 - BROCA Ø3,5X25/100 REBAIXADA SJ; B51 1 372 - BROCA Ø3,5X25/120 REBAIXADA SJ; B51 1 373 - BROCA Ø3,5X25/150 REBAIXADA SJ; B51 1 374 - BROCA Ø3,5X25/180 REBAIXADA SJ; B51 1 375 - BROCA Ø3,5X25/200 REBAIXADA SJ; B51 1 376 - BROCA Ø3,5X30/100 REBAIXADA SJ; B51 1 377 - BROCA Ø3,5X30/120 REBAIXADA SJ; B51 1 378 - BROCA Ø3,5X30/150 REBAIXADA SJ; B51 1 379 - BROCA Ø3,5X30/180 REBAIXADA SJ; B51 1 380 - BROCA Ø3,5X30/200 REBAIXADA SJ; B51 1 381 - BROCA Ø3,5X30/220 REBAIXADA SJ; B51 1 382 - BROCA Ø3,5X30/250 REBAIXADA SJ; B51 1 383 - BROCA Ø3,5X40/100 REBAIXADA SJ; B51 1 384 - BROCA Ø3,5X40/120 REBAIXADA SJ; B51 1 385 - BROCA Ø3,5X40/150 REBAIXADA SJ; B51 1 386 - BROCA Ø3,5X40/180 REBAIXADA SJ; B51 1 387 - BROCA Ø3,5X40/200 REBAIXADA SJ; B51 1 388 - BROCA Ø3,5X40/220 REBAIXADA SJ; B51 1 389 - BROCA Ø3,5X40/250 REBAIXADA SJ; B51 1 390 - BROCA Ø3,5X40/300 REBAIXADA SJ; B51 1 391 - BROCA Ø3,5X40/350 REBAIXADA SJ; B51 1 392 - BROCA Ø3,5X40/400 REBAIXADA SJ; B51 1 393 - BROCA Ø3,5X50/100 REBAIXADA SJ; B51 1 394 - BROCA Ø3,5X50/120 REBAIXADA SJ; B51 1 395 - BROCA Ø3,5X50/150 REBAIXADA SJ; B51 1 396 - BROCA Ø3,5X50/180 REBAIXADA SJ; B51 1 397 - BROCA Ø3,5X50/200 REBAIXADA SJ; B51 1 398 - BROCA Ø3,5X50/220 REBAIXADA SJ; B51 1 399 - BROCA Ø3,5X50/250 REBAIXADA SJ; B51 1 400 - BROCA Ø3,5X50/300 REBAIXADA SJ; B51 1 401 - BROCA Ø3,5X50/350 REBAIXADA SJ; B51 1 402 - BROCA Ø3,5X50/400 REBAIXADA SJ; B51 1 403 - BROCA Ø3,5X70/200 REBAIXADA SJ; B51 1 404 - BROCA Ø3,5X70/220 REBAIXADA SJ; B51 1 405 - BROCA Ø3,5X70/250 REBAIXADA SJ; B51 1 406 - BROCA Ø3,5X70/300 REBAIXADA SJ; B51 1 407 - BROCA Ø3,5X70/350 REBAIXADA SJ; B51 1 408 - BROCA Ø3,5X70/400 REBAIXADA SJ; B51 1 409 - BROCA Ø3,5 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 410 - BROCA Ø3,5X25/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 411 - BROCA Ø3,5X30/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 412 - BROCA Ø3,5X30/220 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 413 - BROCA Ø3,5X30/250 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 414 - BROCA Ø3,5X40/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 415 - BROCA Ø3,5X40/220 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 416 - BROCA Ø3,5X40/250 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 417 - BROCA Ø3,5X40/300 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 418 - BROCA Ø3,5X40/350 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 419 - BROCA Ø3,5X40/400 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 420 - BROCA Ø3,5X50/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 421 - BROCA Ø3,5X50/220 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 422 - BROCA Ø3,5X50/250 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 423 - BROCA Ø3,5X50/300 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 424 - BROCA Ø3,5X50/350 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 425 - BROCA Ø3,5X50/400 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 426 - BROCA Ø3,5X70/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 427 - BROCA Ø3,5X70/220 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 428 - BROCA Ø3,5X70/250 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 429 - BROCA Ø3,5X70/300 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 430 - BROCA Ø3,5X70/350 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 431 - BROCA Ø3,5X70/400 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 432 - BROCA Ø3,8 SJ; B51 1 433 - BROCA Ø3,8X20/100 SJ; B51 1 434 - BROCA Ø3,8X20/120 SJ; B51 1 435 - BROCA Ø3,8X20/150 SJ; B51 1 436 - BROCA Ø3,8X25/100 SJ; B51 1 437 - BROCA Ø3,8X25/120 SJ; B51 1 438 - BROCA Ø3,8X25/150 SJ; B51 1 439 - BROCA Ø3,8X25/180 SJ; B51 1 440 - BROCA Ø3,8X25/200 SJ; B51 1 441 - BROCA Ø3,8X30/100 SJ; B51 1 442 - BROCA Ø3,8X30/120 SJ; B51 1 443 - BROCA Ø3,8X30/150 SJ; B51 1 444 - BROCA Ø3,8X30/180 SJ; B51 1 445 - BROCA Ø3,8X30/200 SJ; B51 1 446 - BROCA Ø3,8X30/220 SJ; B51 1 447 - BROCA Ø3,8X30/250 SJ; B51 1 448 - BROCA Ø3,8X40/100 SJ; B51 1 449 - BROCA Ø3,8X40/120 SJ; B51 1 450 - BROCA Ø3,8X40/150 SJ; B51 1 451 - BROCA Ø3,8X40/180 SJ; B51 1 452 - BROCA Ø3,8X40/200 SJ; B51 1 453 - BROCA Ø3,8X40/220 SJ; B51 1 454 - BROCA Ø3,8X40/250 SJ; B51 1 455 - BROCA Ø3,8X40/300 SJ; B51 1 456 - BROCA Ø3,8X40/350 SJ; B51 1 457 - BROCA Ø3,8X40/400 SJ; B51 1 458 - BROCA Ø3,8X50/100 SJ; B51 1 459 - BROCA Ø3,8X50/120 SJ; B51 1 460 - BROCA Ø3,8X50/150 SJ; B51 1 461 - BROCA Ø3,8X50/180 SJ; B51 1 462 - BROCA Ø3,8X50/200 SJ; B51 1 463 - BROCA Ø3,8X50/220 SJ; B51 1 464 - BROCA Ø3,8X50/250 SJ; B51 1 465 - BROCA Ø3,8X50/300 SJ; B51 1 466 - BROCA Ø3,8X50/350 SJ; B51 1 467 - BROCA Ø3,8X50/400 SJ; B51 1 468 - BROCA Ø3,8X70/200 SJ; B51 1 469 - BROCA Ø3,8X70/220 SJ; B51 1 470 - BROCA Ø3,8X70/250 SJ; B51 1 471 - BROCA Ø3,8X70/300 SJ; B51 1 472 - BROCA Ø3,8X70/350 SJ; B51 1 473 - BROCA Ø3,8X70/400 SJ; B51 1 474 - BROCA Ø3,8 GRADUADA SJ; B51 1 475 - BROCA Ø3,8X25/200 GRADUADA SJ; B51 1 476 - BROCA Ø3,8X30/200 GRADUADA SJ; B51 1 477 - BROCA Ø3,8X30/220 GRADUADA SJ; B51 1 478 - BROCA Ø3,8X30/250 GRADUADA SJ; B51 1 479 - BROCA Ø3,8X40/200 GRADUADA SJ; B51 1 480 - BROCA Ø3,8X40/220 GRADUADA SJ; B51 1 481 - BROCA Ø3,8X40/250 GRADUADA SJ; B51 1 482 - BROCA Ø3,8X40/300 GRADUADA SJ; B51 1 483 - BROCA Ø3,8X40/350 GRADUADA SJ; B51 1 484 - BROCA Ø3,8X40/400 GRADUADA SJ; B51 1 485 - BROCA Ø3,8X50/200 GRADUADA SJ; B51 1 486 - BROCA Ø3,8X50/220 GRADUADA SJ; B51 1 487 - BROCA Ø3,8X50/250 GRADUADA SJ; B51 1 488 - BROCA Ø3,8X50/300 GRADUADA SJ; B51 1 489 - BROCA Ø3,8X50/350 GRADUADA SJ; B51 1 490 - BROCA Ø3,8X50/400 GRADUADA SJ; B51 1 491 - BROCA Ø3,8X70/200 GRADUADA SJ; B51 1 492 - BROCA Ø3,8X70/220 GRADUADA SJ; B51 1 493 - BROCA Ø3,8X70/250 GRADUADA SJ; B51 1 494 - BROCA Ø3,8X70/300 GRADUADA SJ; B51 1 495 - BROCA Ø3,8X70/350 GRADUADA SJ; B51 1 496 - BROCA Ø3,8X70/400 GRADUADA SJ; B51 1 497 - BROCA Ø3,8 REBAIXADA SJ; B51 1 498 - BROCA Ø3,8X20/100 REBAIXADA SJ; B51 1 499 - BROCA Ø3,8X20/120 REBAIXADA SJ; B51 1 500 - BROCA Ø3,8X20/150 REBAIXADA SJ; B51 1 501 - BROCA Ø3,8X25/100 REBAIXADA SJ;

B51 1 502 - BROCA Ø3,8X25/120 REBAIXADA SJ; B51 1 503 - BROCA Ø3,8X25/150 REBAIXADA SJ; B51 1 504 - BROCA Ø3,8X25/180 REBAIXADA SJ; B51 1 505 - BROCA Ø3,8X25/200 REBAIXADA SJ; B51 1 506 - BROCA Ø3,8X30/100 REBAIXADA SJ; B51 1 507 - BROCA Ø3,8X30/120 REBAIXADA SJ; B51 1 508 - BROCA Ø3,8X30/150 REBAIXADA SJ; B51 1 509 - BROCA Ø3,8X30/180 REBAIXADA SJ; B51 1 510 - BROCA Ø3,8X30/200 REBAIXADA SJ; B51 1 511 - BROCA Ø3,8X30/220 REBAIXADA SJ; B51 1 512 - BROCA Ø3,8X30/250 REBAIXADA SJ; B51 1 513 - BROCA Ø3,8X40/100 REBAIXADA SJ; B51 1 514 - BROCA Ø3,8X40/120 REBAIXADA SJ; B51 1 515 - BROCA Ø3,8X40/150 REBAIXADA SJ; B51 1 516 - BROCA Ø3,8X40/180 REBAIXADA SJ; B51 1 517 - BROCA Ø3,8X40/200 REBAIXADA SJ; B51 1 518 - BROCA Ø3,8X40/220 REBAIXADA SJ; B51 1 519 - BROCA Ø3,8X40/250 REBAIXADA SJ; B51 1 520 - BROCA Ø3,8X40/300 REBAIXADA SJ; B51 1 521 - BROCA Ø3,8X40/350 REBAIXADA SJ; B51 1 522 - BROCA Ø3,8X40/400 REBAIXADA SJ; B51 1 523 - BROCA Ø3,8X50/100 REBAIXADA SJ; B51 1 524 - BROCA Ø3,8X50/120 REBAIXADA SJ; B51 1 525 - BROCA Ø3,8X50/150 REBAIXADA SJ; B51 1 526 - BROCA Ø3,8X50/180 REBAIXADA SJ; B51 1 527 - BROCA Ø3,8X50/200 REBAIXADA SJ; B51 1 528 - BROCA Ø3,8X50/220 REBAIXADA SJ; B51 1 529 - BROCA Ø3,8X50/250 REBAIXADA SJ; B51 1 530 - BROCA Ø3,8X50/300 REBAIXADA SJ; B51 1 531 - BROCA Ø3,8X50/350 REBAIXADA SJ; B51 1 532 - BROCA Ø3,8X50/400 REBAIXADA SJ; B51 1 533 - BROCA Ø3,8X70/200 REBAIXADA SJ; B51 1 534 - BROCA Ø3,8X70/220 REBAIXADA SJ; B51 1 535 - BROCA Ø3,8X70/250 REBAIXADA SJ; B51 1 536 - BROCA Ø3,8X70/300 REBAIXADA SJ; B51 1 537 - BROCA Ø3,8X70/350 REBAIXADA SJ; B51 1 538 - BROCA Ø3,8X70/400 REBAIXADA SJ; B51 1 539 - BROCA Ø3,8 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 540 - BROCA Ø3,8X25/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 541 - BROCA Ø3,8X30/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 542 - BROCA Ø3,8X30/220 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 543 - BROCA Ø3,8X30/250 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 544 - BROCA Ø3,8X40/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 545 - BROCA Ø3,8X40/220 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 546 - BROCA Ø3,8X40/250 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 547 - BROCA Ø3,8X40/300 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 548 - BROCA Ø3,8X40/350 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 549 - BROCA Ø3,8X40/400 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 550 - BROCA Ø3,8X50/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 551 - BROCA Ø3,8X50/220 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 552 - BROCA Ø3,8X50/250 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 553 - BROCA Ø3,8X50/300 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 554 - BROCA Ø3,8X50/350 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 555 - BROCA Ø3,8X50/400 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 556 - BROCA Ø3,8X70/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 557 - BROCA Ø3,8X70/220 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 558 - BROCA Ø3,8X70/250 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 559 - BROCA Ø3,8X70/300 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 560 - BROCA Ø3,8X70/350 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 561 - BROCA Ø3,8X70/400 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 562 - BROCA Ø4,0 SJ; B51 1 563 - BROCA Ø4,0X20/100 SJ; B51 1 564 - BROCA Ø4,0X20/120 SJ; B51 1 565 - BROCA Ø4,0X20/150 SJ; B51 1 566 - BROCA Ø4,0X25/100 SJ; B51 1 567 - BROCA Ø4,0X25/120 SJ; B51 1 568 - BROCA Ø4,0X25/150 SJ; B51 1 569 - BROCA Ø4,0X25/180 SJ; B51 1 570 - BROCA Ø4,0X25/200 SJ; B51 1 571 - BROCA Ø4,0X30/100 SJ; B51 1 572 - BROCA Ø4,0X30/120 SJ; B51 1 573 - BROCA Ø4,0X30/150 SJ; B51 1 574 - BROCA Ø4,0X30/180 SJ; B51 1 575 - BROCA Ø4,0X30/200 SJ; B51 1 576 - BROCA Ø4,0X30/220 SJ; B51 1 577 - BROCA Ø4,0X30/250 SJ; B51 1 578 - BROCA Ø4,0X40/100 SJ; B51 1 579 - BROCA Ø4,0X40/120 SJ; B51 1 580 - BROCA Ø4,0X40/150 SJ; B51 1 581 - BROCA Ø4,0X40/180 SJ; B51 1 582 - BROCA Ø4,0X40/200 SJ; B51 1 583 - BROCA Ø4,0X40/220 SJ; B51 1 584 - BROCA Ø4,0X40/250 SJ; B51 1 585 - BROCA Ø4,0X40/300 SJ; B51 1 586 - BROCA Ø4,0X40/350 SJ; B51 1 587 - BROCA Ø4,0X40/400 SJ; B51 1 588 - BROCA Ø4,0X50/100 SJ; B51 1 589 - BROCA Ø4,0X50/120 SJ; B51 1 590 - BROCA Ø4,0X50/150 SJ; B51 1 591 - BROCA Ø4,0X50/180 SJ; B51 1 592 - BROCA Ø4,0X50/200 SJ; B51 1 593 - BROCA Ø4,0X50/220 SJ; B51 1 594 - BROCA Ø4,0X50/250 SJ; B51 1 595 - BROCA Ø4,0X50/300 SJ; B51 1 596 - BROCA Ø4,0X50/350 SJ; B51 1 597 - BROCA Ø4,0X50/400 SJ; B51 1 598 - BROCA Ø4,0X70/200 SJ; B51 1 599 - BROCA Ø4,0X70/220 SJ; B51 1 600 - BROCA Ø4,0X70/250 SJ; B51 1 601 - BROCA Ø4,0X70/300 SJ; B51 1 602 - BROCA Ø4,0X70/350 SJ; B51 1 603 - BROCA Ø4,0X70/400 SJ; B51 1 604 - BROCA Ø4,0 GRADUADA SJ; B51 1 605 - BROCA Ø4,0X25/200 GRADUADA SJ; B51 1 606 - BROCA Ø4,0X30/200 GRADUADA SJ; B51 1 607 - BROCA Ø4,0X30/220 GRADUADA SJ; B51 1 608 - BROCA Ø4,0X30/250 GRADUADA SJ; B51 1 609 - BROCA Ø4,0X40/200 GRADUADA SJ; B51 1 610 - BROCA Ø4,0X40/220 GRADUADA SJ; B51 1 611 - BROCA Ø4,0X40/250 GRADUADA SJ; B51 1 612 - BROCA Ø4,0X40/300 GRADUADA SJ; B51 1 613 - BROCA Ø4,0X40/350 GRADUADA SJ; B51 1 614 - BROCA Ø4,0X40/400 GRADUADA SJ; B51 1 615 - BROCA Ø4,0X50/200 GRADUADA SJ; B51 1 616 - BROCA Ø4,0X50/220 GRADUADA SJ; B51 1 617 - BROCA Ø4,0X50/250 GRADUADA SJ; B51 1 618 - BROCA Ø4,0X50/300 GRADUADA SJ; B51 1 619 - BROCA Ø4,0X50/350 GRADUADA SJ; B51 1 620 - BROCA Ø4,0X50/400 GRADUADA SJ; B51 1 621 - BROCA Ø4,0X70/200 GRADUADA SJ; B51 1 622 - BROCA Ø4,0X70/220 GRADUADA SJ; B51 1 623 - BROCA Ø4,0X70/250 GRADUADA SJ; B51 1 624 - BROCA Ø4,0X70/300 GRADUADA SJ; B51 1 625 - BROCA Ø4,0X70/350 GRADUADA SJ; B51 1 626 - BROCA Ø4,0X70/400 GRADUADA SJ; B51 1 627 - BROCA Ø4,0 REBAIXADA SJ; B51 1 628 - BROCA Ø4,0X20/100 REBAIXADA SJ; B51 1 629 - BROCA Ø4,0X20/120 REBAIXADA SJ; B51 1 630 - BROCA Ø4,0X20/150 REBAIXADA SJ; B51 1 631 - BROCA Ø4,0X25/100 REBAIXADA SJ; B51 1 632 - BROCA Ø4,0X25/120 REBAIXADA SJ; B51 1 633 - BROCA Ø4,0X25/150 REBAIXADA SJ; B51 1 634 - BROCA Ø4,0X25/180 REBAIXADA SJ; B51 1 635 - BROCA Ø4,0X25/200 REBAIXADA SJ; B51 1 636 - BROCA Ø4,0X30/100 REBAIXADA SJ; B51 1 637 - BROCA Ø4,0X30/120 REBAIXADA SJ; B51 1 638 - BROCA Ø4,0X30/150 REBAIXADA SJ; B51 1 639 - BROCA Ø4,0X30/180 REBAIXADA SJ; B51 1 640 - BROCA Ø4,0X30/200 REBAIXADA SJ; B51 1 641 - BROCA Ø4,0X30/220 REBAIXADA SJ; B51 1 642 - BROCA Ø4,0X30/250 REBAIXADA SJ; B51 1 643 - BROCA Ø4,0X40/100 REBAIXADA SJ; B51 1 644 - BROCA Ø4,0X40/120 REBAIXADA SJ; B51 1 645 - BROCA Ø4,0X40/150 REBAIXADA SJ; B51 1 646 - BROCA Ø4,0X40/180 REBAIXADA SJ; B51 1 647 - BROCA Ø4,0X40/200 REBAIXADA SJ; B51 1 648 - BROCA Ø4,0X40/220 REBAIXADA SJ; B51 1 649 - BROCA Ø4,0X40/250 REBAIXADA SJ; B51 1 650 - BROCA Ø4,0X40/300 REBAIXADA SJ; B51 1 651 - BROCA Ø4,0X40/350 REBAIXADA SJ; B51 1 652 - BROCA Ø4,0X40/400 REBAIXADA SJ; B51 1 653 - BROCA Ø4,0X50/100 REBAIXADA SJ; B51 1 654 - BROCA Ø4,0X50/120 REBAIXADA SJ; B51 1 655 - BROCA Ø4,0X50/150 REBAIXADA SJ; B51 1 656 - BROCA Ø4,0X50/180 REBAIXADA SJ; B51 1 657 - BROCA Ø4,0X50/200 REBAIXADA SJ; B51 1 658 - BROCA Ø4,0X50/220 REBAIXADA SJ; B51 1 659 - BROCA Ø4,0X50/250 REBAIXADA SJ; B51 1 660 - BROCA Ø4,0X50/300 REBAIXADA SJ; B51 1 661 - BROCA Ø4,0X50/350 REBAIXADA SJ; B51 1 662 - BROCA Ø4,0X50/400 REBAIXADA SJ; B51 1 663 - BROCA Ø4,0X70/200 REBAIXADA SJ; B51 1 664 - BROCA Ø4,0X70/220 REBAIXADA SJ; B51 1 665 - BROCA Ø4,0X70/250 REBAIXADA SJ; B51 1 666 - BROCA Ø4,0X70/300 REBAIXADA SJ; B51 1 667 - BROCA Ø4,0X70/350 REBAIXADA SJ; B51 1 668 - BROCA Ø4,0X70/400 REBAIXADA SJ; B51 1 669 - BROCA Ø4,0 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 670 - BROCA Ø4,0X25/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 671 - BROCA Ø4,0X30/200 GRADUADA

REBAIXADA SJ; B51 1 672 - BROCA Ø4,0X30/220 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 673 - BROCA Ø4,0X30/250 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 674 - BROCA Ø4,0X40/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 675 - BROCA Ø4,0X40/220 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 676 - BROCA Ø4,0X40/250 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 677 - BROCA Ø4,0X40/300 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 678 - BROCA Ø4,0X40/350 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 679 - BROCA Ø4,0X40/400 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 680 - BROCA Ø4,0X50/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 681 - BROCA Ø4,0X50/220 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 682 - BROCA Ø4,0X50/250 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 683 - BROCA Ø4,0X50/300 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 684 - BROCA Ø4,0X50/350 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 685 - BROCA Ø4,0X50/400 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 686 - BROCA Ø4,0X70/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 687 - BROCA Ø4,0X70/220 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 688 - BROCA Ø4,0X70/250 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 689 - BROCA Ø4,0X70/300 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 690 - BROCA Ø4,0X70/350 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 691 - BROCA Ø4,0X70/400 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 692 - BROCA Ø4,5 SJ; B51 1 693 - BROCA Ø4,5X25/100 SJ; B51 1 694 - BROCA Ø4,5X25/120 SJ; B51 1 695 -
BROCA Ø4,5X25/150 SJ; B51 1 696 - BROCA Ø4,5X25/180 SJ; B51 1 697 - BROCA Ø4,5X25/200 SJ; B51 1 698 - BROCA Ø4,5X30/100
SJ; B51 1 699 - BROCA Ø4,5X30/120 SJ; B51 1 700 - BROCA Ø4,5X30/150 SJ; B51 1 701 - BROCA Ø4,5X30/180 SJ; B51 1 702 -
BROCA Ø4,5X30/200 SJ; B51 1 703 - BROCA Ø4,5X30/220 SJ; B51 1 704 - BROCA Ø4,5X30/250 SJ; B51 1 705 - BROCA Ø4,5X40/100
SJ; B51 1 706 - BROCA Ø4,5X40/120 SJ; B51 1 707 - BROCA Ø4,5X40/150 SJ; B51 1 708 - BROCA Ø4,5X40/180 SJ; B51 1 709 -
BROCA Ø4,5X40/200 SJ; B51 1 710 - BROCA Ø4,5X40/220 SJ; B51 1 711 - BROCA Ø4,5X40/250 SJ; B51 1 712 - BROCA Ø4,5X40/300
SJ; B51 1 713 - BROCA Ø4,5X40/350 SJ; B51 1 714 - BROCA Ø4,5X40/400 SJ; B51 1 715 - BROCA Ø4,5X50/100 SJ; B51 1 716 -
BROCA Ø4,5X50/120 SJ; B51 1 717 - BROCA Ø4,5X50/150 SJ; B51 1 718 - BROCA Ø4,5X50/180 SJ; B51 1 719 - BROCA Ø4,5X50/200
SJ; B51 1 720 - BROCA Ø4,5X50/220 SJ; B51 1 721 - BROCA Ø4,5X50/250 SJ; B51 1 722 - BROCA Ø4,5X50/300 SJ; B51 1 723 -
BROCA Ø4,5X50/350 SJ; B51 1 724 - BROCA Ø4,5X50/400 SJ; B51 1 725 - BROCA Ø4,5X70/200 SJ; B51 1 726 - BROCA Ø4,5X70/220
SJ; B51 1 727 - BROCA Ø4,5X70/250 SJ; B51 1 728 - BROCA Ø4,5X70/300 SJ; B51 1 729 - BROCA Ø4,5X70/350 SJ; B51 1 730 -
BROCA Ø4,5X70/400 SJ; B51 1 731 - BROCA Ø4,5 GRADUADA SJ; B51 1 732 - BROCA Ø4,5X25/200 GRADUADA SJ; B51 1 733 -
BROCA Ø4,5X30/200 GRADUADA SJ; B51 1 734 - BROCA Ø4,5X30/220 GRADUADA SJ; B51 1 735 - BROCA Ø4,5X30/250
GRADUADA SJ; B51 1 736 - BROCA Ø4,5X40/200 GRADUADA SJ; B51 1 737 - BROCA Ø4,5X40/220 GRADUADA SJ; B51 1 738 -
BROCA Ø4,5X40/250 GRADUADA SJ; B51 1 739 - BROCA Ø4,5X40/300 GRADUADA SJ; B51 1 740 - BROCA Ø4,5X40/350
GRADUADA SJ; B51 1 741 - BROCA Ø4,5X40/400 GRADUADA SJ; B51 1 742 - BROCA Ø4,5X50/200 GRADUADA SJ; B51 1 743 -
BROCA Ø4,5X50/220 GRADUADA SJ; B51 1 744 - BROCA Ø4,5X50/250 GRADUADA SJ; B51 1 745 - BROCA Ø4,5X50/300
GRADUADA SJ; B51 1 746 - BROCA Ø4,5X50/350 GRADUADA SJ; B51 1 747 - BROCA Ø4,5X50/400 GRADUADA SJ; B51 1 748 -
BROCA Ø4,5X70/200 GRADUADA SJ; B51 1 749 - BROCA Ø4,5X70/220 GRADUADA SJ; B51 1 750 - BROCA Ø4,5X70/250
GRADUADA SJ; B51 1 751 - BROCA Ø4,5X70/300 GRADUADA SJ; B51 1 752 - BROCA Ø4,5X70/350 GRADUADA SJ; B51 1 753 -
BROCA Ø4,5X70/400 GRADUADA SJ; B51 1 754 - BROCA Ø4,5 REBAIXADA SJ; B51 1 755 - BROCA Ø4,5X25/100 REBAIXADA SJ;
B51 1 756 - BROCA Ø4,5X25/120 REBAIXADA SJ; B51 1 757 - BROCA Ø4,5X25/150 REBAIXADA SJ; B51 1 758 - BROCA Ø4,5X25/180
REBAIXADA SJ; B51 1 759 - BROCA Ø4,5X25/200 REBAIXADA SJ; B51 1 760 - BROCA Ø4,5X30/100 REBAIXADA SJ; B51 1 761 -
BROCA Ø4,5X30/120 REBAIXADA SJ; B51 1 762 - BROCA Ø4,5X30/150 REBAIXADA SJ; B51 1 763 - BROCA Ø4,5X30/180
REBAIXADA SJ; B51 1 764 - BROCA Ø4,5X30/200 REBAIXADA SJ; B51 1 765 - BROCA Ø4,5X30/220 REBAIXADA SJ; B51 1 766 -
BROCA Ø4,5X30/250 REBAIXADA SJ; B51 1 767 - BROCA Ø4,5X40/100 REBAIXADA SJ; B51 1 768 - BROCA Ø4,5X40/120
REBAIXADA SJ; B51 1 769 - BROCA Ø4,5X40/150 REBAIXADA SJ; B51 1 770 - BROCA Ø4,5X40/180 REBAIXADA SJ; B51 1 771 -
BROCA Ø4,5X40/200 REBAIXADA SJ; B51 1 772 - BROCA Ø4,5X40/220 REBAIXADA SJ; B51 1 773 - BROCA Ø4,5X40/250
REBAIXADA SJ; B51 1 774 - BROCA Ø4,5X40/300 REBAIXADA SJ; B51 1 775 - BROCA Ø4,5X40/350 REBAIXADA SJ; B51 1 776 -
BROCA Ø4,5X40/400 REBAIXADA SJ; B51 1 777 - BROCA Ø4,5X50/100 REBAIXADA SJ; B51 1 778 - BROCA Ø4,5X50/120
REBAIXADA SJ; B51 1 779 - BROCA Ø4,5X50/150 REBAIXADA SJ; B51 1 780 - BROCA Ø4,5X50/180 REBAIXADA SJ; B51 1 781 -
BROCA Ø4,5X50/200 REBAIXADA SJ; B51 1 782 - BROCA Ø4,5X50/220 REBAIXADA SJ; B51 1 783 - BROCA Ø4,5X50/250
REBAIXADA SJ; B51 1 784 - BROCA Ø4,5X50/300 REBAIXADA SJ; B51 1 785 - BROCA Ø4,5X50/350 REBAIXADA SJ; B51 1 786 -
BROCA Ø4,5X50/400 REBAIXADA SJ; B51 1 787 - BROCA Ø4,5X70/200 REBAIXADA SJ; B51 1 788 - BROCA Ø4,5X70/220
REBAIXADA SJ; B51 1 789 - BROCA Ø4,5X70/250 REBAIXADA SJ; B51 1 790 - BROCA Ø4,5X70/300 REBAIXADA SJ; B51 1 791 -
BROCA Ø4,5X70/350 REBAIXADA SJ; B51 1 792 - BROCA Ø4,5X70/400 REBAIXADA SJ; B51 1 793 - BROCA Ø4,5 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 794 - BROCA Ø4,5X25/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 795 - BROCA Ø4,5X30/200 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 796 - BROCA Ø4,5X30/220 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 797 - BROCA Ø4,5X30/250 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 798 - BROCA Ø4,5X40/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 799 - BROCA Ø4,5X40/220 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 800 - BROCA Ø4,5X40/250 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 801 - BROCA Ø4,5X40/300 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 802 - BROCA Ø4,5X40/350 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 803 - BROCA Ø4,5X40/400 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 804 - BROCA Ø4,5X50/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 805 - BROCA Ø4,5X50/220 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 806 - BROCA Ø4,5X50/250 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 807 - BROCA Ø4,5X50/300 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 808 - BROCA Ø4,5X50/350 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 809 - BROCA Ø4,5X50/400 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 810 - BROCA Ø4,5X70/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 811 - BROCA Ø4,5X70/220 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 812 - BROCA Ø4,5X70/250 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 813 - BROCA Ø4,5X70/300 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 814 - BROCA Ø4,5X70/350 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 815 - BROCA Ø4,5X70/400 GRADUADA
REBAIXADA SJ; B51 1 816 - BROCA Ø4,8 SJ; B51 1 817 - BROCA Ø4,8X25/100 SJ; B51 1 818 - BROCA Ø4,8X25/120 SJ; B51 1 819 -
BROCA Ø4,8X25/150 SJ; B51 1 820 - BROCA Ø4,8X25/180 SJ; B51 1 821 - BROCA Ø4,8X25/200 SJ; B51 1 822 - BROCA Ø4,8X30/100
SJ; B51 1 823 - BROCA Ø4,8X30/120 SJ; B51 1 824 - BROCA Ø4,8X30/150 SJ; B51 1 825 - BROCA Ø4,8X30/180 SJ; B51 1 826 -
BROCA Ø4,8X30/200 SJ; B51 1 827 - BROCA Ø4,8X30/220 SJ; B51 1 828 - BROCA Ø4,8X30/250 SJ; B51 1 829 - BROCA Ø4,8X40/100
SJ; B51 1 830 - BROCA Ø4,8X40/120 SJ; B51 1 831 - BROCA Ø4,8X40/150 SJ; B51 1 832 - BROCA Ø4,8X40/180 SJ; B51 1 833 -
BROCA Ø4,8X40/200 SJ; B51 1 834 - BROCA Ø4,8X40/220 SJ; B51 1 835 - BROCA Ø4,8X40/250 SJ; B51 1 836 - BROCA Ø4,8X40/300
SJ; B51 1 837 - BROCA Ø4,8X40/350 SJ; B51 1 838 - BROCA Ø4,8X40/400 SJ; B51 1 839 - BROCA Ø4,8X50/100 SJ; B51 1 840 -
BROCA Ø4,8X50/120 SJ; B51 1 841 - BROCA Ø4,8X50/150 SJ; B51 1 842 - BROCA Ø4,8X50/180 SJ; B51 1 843 - BROCA Ø4,8X50/200

SJ; B51 1 844 - BROCA Ø4,8X50/220 SJ; B51 1 845 - BROCA Ø4,8X50/250 SJ; B51 1 846 - BROCA Ø4,8X50/300 SJ; B51 1 847 - BROCA Ø4,8X50/350 SJ; B51 1 848 - BROCA Ø4,8X50/400 SJ; B51 1 849 - BROCA Ø4,8X70/200 SJ; B51 1 850 - BROCA Ø4,8X70/220 SJ; B51 1 851 - BROCA Ø4,8X70/250 SJ; B51 1 852 - BROCA Ø4,8X70/300 SJ; B51 1 853 - BROCA Ø4,8X70/350 SJ; B51 1 854 - BROCA Ø4,8X70/400 SJ; B51 1 855 - BROCA Ø4,8 GRADUADA SJ; B51 1 856 - BROCA Ø4,8X25/200 GRADUADA SJ; B51 1 857 - BROCA Ø4,8X30/200 GRADUADA SJ; B51 1 858 - BROCA Ø4,8X30/220 GRADUADA SJ; B51 1 859 - BROCA Ø4,8X30/250 GRADUADA SJ; B51 1 860 - BROCA Ø4,8X40/200 GRADUADA SJ; B51 1 861 - BROCA Ø4,8X40/220 GRADUADA SJ; B51 1 862 - BROCA Ø4,8X40/250 GRADUADA SJ; B51 1 863 - BROCA Ø4,8X40/300 GRADUADA SJ; B51 1 864 - BROCA Ø4,8X40/350 GRADUADA SJ; B51 1 865 - BROCA Ø4,8X40/400 GRADUADA SJ; B51 1 866 - BROCA Ø4,8X50/200 GRADUADA SJ; B51 1 867 - BROCA Ø4,8X50/220 GRADUADA SJ; B51 1 868 - BROCA Ø4,8X50/250 GRADUADA SJ; B51 1 869 - BROCA Ø4,8X50/300 GRADUADA SJ; B51 1 870 - BROCA Ø4,8X50/350 GRADUADA SJ; B51 1 871 - BROCA Ø4,8X50/400 GRADUADA SJ; B51 1 872 - BROCA Ø4,8X70/200 GRADUADA SJ; B51 1 873 - BROCA Ø4,8X70/220 GRADUADA SJ; B51 1 874 - BROCA Ø4,8X70/250 GRADUADA SJ; B51 1 875 - BROCA Ø4,8X70/300 GRADUADA SJ; B51 1 876 - BROCA Ø4,8X70/350 GRADUADA SJ; B51 1 877 - BROCA Ø4,8X70/400 GRADUADA SJ; B51 1 878 - BROCA Ø4,8 REBAIXADA SJ; B51 1 879 - BROCA Ø4,8X25/100 REBAIXADA SJ; B51 1 880 - BROCA Ø4,8X25/120 REBAIXADA SJ; B51 1 881 - BROCA Ø4,8X25/150 REBAIXADA SJ; B51 1 882 - BROCA Ø4,8X25/180 REBAIXADA SJ; B51 1 883 - BROCA Ø4,8X25/200 REBAIXADA SJ; B51 1 884 - BROCA Ø4,8X30/100 REBAIXADA SJ; B51 1 885 - BROCA Ø4,8X30/120 REBAIXADA SJ; B51 1 886 - BROCA Ø4,8X30/150 REBAIXADA SJ; B51 1 887 - BROCA Ø4,8X30/180 REBAIXADA SJ; B51 1 888 - BROCA Ø4,8X30/200 REBAIXADA SJ; B51 1 889 - BROCA Ø4,8X30/220 REBAIXADA SJ; B51 1 890 - BROCA Ø4,8X30/250 REBAIXADA SJ; B51 1 891 - BROCA Ø4,8X40/100 REBAIXADA SJ; B51 1 892 - BROCA Ø4,8X40/120 REBAIXADA SJ; B51 1 893 - BROCA Ø4,8X40/150 REBAIXADA SJ; B51 1 894 - BROCA Ø4,8X40/180 REBAIXADA SJ; B51 1 895 - BROCA Ø4,8X40/200 REBAIXADA SJ; B51 1 896 - BROCA Ø4,8X40/220 REBAIXADA SJ; B51 1 897 - BROCA Ø4,8X40/250 REBAIXADA SJ; B51 1 898 - BROCA Ø4,8X40/300 REBAIXADA SJ; B51 1 899 - BROCA Ø4,8X40/350 REBAIXADA SJ; B51 1 900 - BROCA Ø4,8X40/400 REBAIXADA SJ; B51 1 901 - BROCA Ø4,8X50/100 REBAIXADA SJ; B51 1 902 - BROCA Ø4,8X50/120 REBAIXADA SJ; B51 1 903 - BROCA Ø4,8X50/150 REBAIXADA SJ; B51 1 904 - BROCA Ø4,8X50/180 REBAIXADA SJ; B51 1 905 - BROCA Ø4,8X50/200 REBAIXADA SJ; B51 1 906 - BROCA Ø4,8X50/220 REBAIXADA SJ; B51 1 907 - BROCA Ø4,8X50/250 REBAIXADA SJ; B51 1 908 - BROCA Ø4,8X50/300 REBAIXADA SJ; B51 1 909 - BROCA Ø4,8X50/350 REBAIXADA SJ; B51 1 910 - BROCA Ø4,8X50/400 REBAIXADA SJ; B51 1 911 - BROCA Ø4,8X70/200 REBAIXADA SJ; B51 1 912 - BROCA Ø4,8X70/220 REBAIXADA SJ; B51 1 913 - BROCA Ø4,8X70/250 REBAIXADA SJ; B51 1 914 - BROCA Ø4,8X70/300 REBAIXADA SJ; B51 1 915 - BROCA Ø4,8X70/350 REBAIXADA SJ; B51 1 916 - BROCA Ø4,8X70/400 REBAIXADA SJ; B51 1 917 - BROCA Ø4,8 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 918 - BROCA Ø4,8X25/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 919 - BROCA Ø4,8X30/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 920 - BROCA Ø4,8X30/220 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 921 - BROCA Ø4,8X30/250 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 922 - BROCA Ø4,8X40/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 923 - BROCA Ø4,8X40/220 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 924 - BROCA Ø4,8X40/250 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 925 - BROCA Ø4,8X40/300 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 926 - BROCA Ø4,8X40/350 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 927 - BROCA Ø4,8X40/400 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 928 - BROCA Ø4,8X50/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 929 - BROCA Ø4,8X50/220 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 930 - BROCA Ø4,8X50/250 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 931 - BROCA Ø4,8X50/300 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 932 - BROCA Ø4,8X50/350 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 933 - BROCA Ø4,8X50/400 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 934 - BROCA Ø4,8X70/200 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 935 - BROCA Ø4,8X70/220 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 936 - BROCA Ø4,8X70/250 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 937 - BROCA Ø4,8X70/300 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 938 - BROCA Ø4,8X70/350 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 939 - BROCA Ø4,8X70/400 GRADUADA REBAIXADA SJ; B51 1 940 - BROCA Ø5,0 SJ; B51 1 941 - BROCA Ø5,0X25/120 SJ; B51 1 942 - BROCA Ø5,0X25/150 SJ; B51 1 943 - BROCA Ø5,0X25/180 SJ; B51 1 944 - BROCA Ø5,0X25/200 SJ; B51 1 945 - BROCA Ø5,0X30/120 SJ; B51 1 946 - BROCA Ø5,0X30/150 SJ; B51 1 947 - BROCA Ø5,0X30/180 SJ; B51 1 948 - BROCA Ø5,0X30/200 SJ; B51 1 949 - BROCA Ø5,0X30/220 SJ; B51 1 950 - BROCA Ø5,0X30/250 SJ; B51 1 951 - BROCA Ø5,0X40/120 SJ; B51 1 952 - BROCA Ø5,0X40/150 SJ; B51 1 953 - BROCA Ø5,0X40/180 SJ; B51 1 954 - BROCA Ø5,0X40/200 SJ; B51 1 955 - BROCA Ø5,0X40/220 SJ; B51 1 956 - BROCA Ø5,0X40/250 SJ; B51 1 957 - BROCA Ø5,0X40/300 SJ; B51 1 958 - BROCA Ø5,0X40/350 SJ; B51 1 959 - BROCA Ø5,0X40/400 SJ; B51 1 960 - BROCA Ø5,0X50/120 SJ; B51 1 961 - BROCA Ø5,0X50/150 SJ; B51 1 962 - BROCA Ø5,0X50/180 SJ; B51 1 963 - BROCA Ø5,0X50/200 SJ; B51 1 964 - BROCA Ø5,0X50/220 SJ; B51 1 965 - BROCA Ø5,0X50/250 SJ; B51 1 966 - BROCA Ø5,0X50/300 SJ; B51 1 967 - BROCA Ø5,0X50/350 SJ; B51 1 968 - BROCA Ø5,0X50/400 SJ; B51 1 969 - BROCA Ø5,0X70/200 SJ; B51 1 970 - BROCA Ø5,0X70/220 SJ; B51 1 971 - BROCA Ø5,0X70/250 SJ; B51 1 972 - BROCA Ø5,0X70/300 SJ; B51 1 973 - BROCA Ø5,0X70/350 SJ; B51 1 974 - BROCA Ø5,0X70/400 SJ; B51 1 975 - BROCA Ø5,0 GRADUADA SJ; B51 1 976 - BROCA Ø5,0X25/200 GRADUADA SJ; B51 1 977 - BROCA Ø5,0X30/200 GRADUADA SJ; B51 1 978 - BROCA Ø5,0X30/220 GRADUADA SJ; B51 1 979 - BROCA Ø5,0X30/250 GRADUADA SJ; B51 1 980 - BROCA Ø5,0X40/200 GRADUADA SJ; B51 1 981 - BROCA Ø5,0X40/220 GRADUADA SJ; B51 1 982 - BROCA Ø5,0X40/250 GRADUADA SJ; B51 1 983 - BROCA Ø5,0X40/300 GRADUADA SJ; B51 1 984 - BROCA Ø5,0X40/350 GRADUADA SJ; B51 1 985 - BROCA Ø5,0X40/400 GRADUADA SJ; B51 1 986 - BROCA Ø5,0X50/200 GRADUADA SJ; B51 1 987 - BROCA Ø5,0X50/220 GRADUADA SJ; B51 1 988 - BROCA Ø5,0X50/250 GRADUADA SJ; B51 1 989 - BROCA Ø5,0X50/300 GRADUADA SJ; B51 1 990 - BROCA Ø5,0X50/350 GRADUADA SJ; B51 1 991 - BROCA Ø5,0X50/400 GRADUADA SJ; B51 1 992 - BROCA Ø5,0X70/200 GRADUADA SJ; B51 1 993 - BROCA Ø5,0X70/220 GRADUADA SJ; B51 1 994 - BROCA Ø5,0X70/250 GRADUADA SJ; B51 1 995 - BROCA Ø5,0X70/300 GRADUADA SJ; B51 1 996 - BROCA Ø5,0X70/350 GRADUADA SJ; B51 1 997 - BROCA Ø5,0X70/400 GRADUADA SJ; B51 2 100 - BROCA Ø5,5 SJ; B51 2 101 - BROCA Ø5,5X25/150 SJ; B51 2 102 - BROCA Ø5,5X25/180 SJ; B51 2 103 - BROCA Ø5,5X25/200 SJ; B51 2 104 - BROCA Ø5,5X30/150 SJ; B51 2 105 - BROCA Ø5,5X30/180 SJ; B51 2 106 - BROCA Ø5,5X30/200 SJ; B51 2 107 - BROCA Ø5,5X30/220 SJ; B51 2 108 - BROCA Ø5,5X30/250 SJ; B51 2 109 - BROCA Ø5,5X40/150 SJ; B51 2 110 - BROCA Ø5,5X40/180 SJ; B51 2 111 - BROCA Ø5,5X40/200 SJ; B51 2 112 - BROCA Ø5,5X40/220 SJ; B51 2 113 - BROCA Ø5,5X40/250 SJ; B51 2 114 - BROCA Ø5,5X40/300 SJ; B51 2 115 - BROCA Ø5,5X40/350 SJ; B51 2 116 - BROCA Ø5,5X40/400 SJ; B51 2 117 - BROCA Ø5,5X50/150 SJ; B51 2 118 - BROCA Ø5,5X50/180 SJ; B51 2 119 - BROCA Ø5,5X50/200 SJ; B51 2 120 - BROCA Ø5,5X50/220 SJ; B51 2 121 - BROCA Ø5,5X50/250 SJ; B51 2 122 - BROCA Ø5,5X50/300 SJ; B51 2 123 - BROCA Ø5,5X50/350 SJ; B51 2 124 -

[illegible]

Ø7,0X50/150 SJ; B51 2 319 - BROCA Ø7,0X50/180 SJ; B51 2 320 - BROCA Ø7,0X50/200 SJ; B51 2 321 - BROCA Ø7,0X50/220 SJ; B51 2 322 - BROCA Ø7,0X50/250 SJ; B51 2 323 - BROCA Ø7,0X50/300 SJ; B51 2 324 - BROCA Ø7,0X50/350 SJ; B51 2 325 - BROCA Ø7,0X50/400 SJ; B51 2 326 - BROCA Ø7,0X70/200 SJ; B51 2 327 - BROCA Ø7,0X70/220 SJ; B51 2 328 - BROCA Ø7,0X70/250 SJ; B51 2 329 - BROCA Ø7,0X70/300 SJ; B51 2 330 - BROCA Ø7,0X70/350 SJ; B51 2 331 - BROCA Ø7,0X70/400 SJ; B51 2 332 - BROCA Ø7,0 GRADUADA SJ; B51 2 333 - BROCA Ø7,0X30/200 GRADUADA SJ; B51 2 334 - BROCA Ø7,0X30/220 GRADUADA SJ; B51 2 335 - BROCA Ø7,0X30/250 GRADUADA SJ; B51 2 336 - BROCA Ø7,0X40/200 GRADUADA SJ; B51 2 337 - BROCA Ø7,0X40/220 GRADUADA SJ; B51 2 338 - BROCA Ø7,0X40/250 GRADUADA SJ; B51 2 339 - BROCA Ø7,0X40/300 GRADUADA SJ; B51 2 340 - BROCA Ø7,0X40/350 GRADUADA SJ; B51 2 341 - BROCA Ø7,0X40/400 GRADUADA SJ; B51 2 342 - BROCA Ø7,0X50/200 GRADUADA SJ; B51 2 343 - BROCA Ø7,0X50/220 GRADUADA SJ; B51 2 344 - BROCA Ø7,0X50/250 GRADUADA SJ; B51 2 345 - BROCA Ø7,0X50/300 GRADUADA SJ; B51 2 346 - BROCA Ø7,0X50/350 GRADUADA SJ; B51 2 347 - BROCA Ø7,0X50/400 GRADUADA SJ; B51 2 348 - BROCA Ø7,0X70/200 GRADUADA SJ; B51 2 349 - BROCA Ø7,0X70/220 GRADUADA SJ; B51 2 350 - BROCA Ø7,0X70/250 GRADUADA SJ; B51 2 351 - BROCA Ø7,0X70/300 GRADUADA SJ; B51 2 352 - BROCA Ø7,0X70/350 GRADUADA SJ; B51 2 353 - BROCA Ø7,0X70/400 GRADUADA SJ; B51 2 354 - BROCA Ø7,5 SJ; B51 2 355 - BROCA Ø7,5X30/150 SJ; B51 2 356 - BROCA Ø7,5X30/180 SJ; B51 2 357 - BROCA Ø7,5X30/200 SJ; B51 2 358 - BROCA Ø7,5X30/220 SJ; B51 2 359 - BROCA Ø7,5X30/250 SJ; B51 2 360 - BROCA Ø7,5X40/150 SJ; B51 2 361 - BROCA Ø7,5X40/180 SJ; B51 2 362 - BROCA Ø7,5X40/200 SJ; B51 2 363 - BROCA Ø7,5X40/220 SJ; B51 2 364 - BROCA Ø7,5X40/250 SJ; B51 2 365 - BROCA Ø7,5X40/300 SJ; B51 2 366 - BROCA Ø7,5X40/350 SJ; B51 2 367 - BROCA Ø7,5X40/400 SJ; B51 2 368 - BROCA Ø7,5X50/150 SJ; B51 2 369 - BROCA Ø7,5X50/180 SJ; B51 2 370 - BROCA Ø7,5X50/200 SJ; B51 2 371 - BROCA Ø7,5X50/220 SJ; B51 2 372 - BROCA Ø7,5X50/250 SJ; B51 2 373 - BROCA Ø7,5X50/300 SJ; B51 2 374 - BROCA Ø7,5X50/350 SJ; B51 2 375 - BROCA Ø7,5X50/400 SJ; B51 2 376 - BROCA Ø7,5X70/200 SJ; B51 2 377 - BROCA Ø7,5X70/220 SJ; B51 2 378 - BROCA Ø7,5X70/250 SJ; B51 2 379 - BROCA Ø7,5X70/300 SJ; B51 2 380 - BROCA Ø7,5X70/350 SJ; B51 2 381 - BROCA Ø7,5X70/400 SJ; B51 2 382 - BROCA Ø7,5 GRADUADA SJ; B51 2 383 - BROCA Ø7,5X30/200 GRADUADA SJ; B51 2 384 - BROCA Ø7,5X30/220 GRADUADA SJ; B51 2 385 - BROCA Ø7,5X30/250 GRADUADA SJ; B51 2 386 - BROCA Ø7,5X40/200 GRADUADA SJ; B51 2 387 - BROCA Ø7,5X40/220 GRADUADA SJ; B51 2 388 - BROCA Ø7,5X40/250 GRADUADA SJ; B51 2 389 - BROCA Ø7,5X40/300 GRADUADA SJ; B51 2 390 - BROCA Ø7,5X40/350 GRADUADA SJ; B51 2 391 - BROCA Ø7,5X40/400 GRADUADA SJ; B51 2 392 - BROCA Ø7,5X50/200 GRADUADA SJ; B51 2 393 - BROCA Ø7,5X50/220 GRADUADA SJ; B51 2 394 - BROCA Ø7,5X50/250 GRADUADA SJ; B51 2 395 - BROCA Ø7,5X50/300 GRADUADA SJ; B51 2 396 - BROCA Ø7,5X50/350 GRADUADA SJ; B51 2 397 - BROCA Ø7,5X50/400 GRADUADA SJ; B51 2 398 - BROCA Ø7,5X70/200 GRADUADA SJ; B51 2 399 - BROCA Ø7,5X70/220 GRADUADA SJ; B51 2 400 - BROCA Ø7,5X70/250 GRADUADA SJ; B51 2 401 - BROCA Ø7,5X70/300 GRADUADA SJ; B51 2 402 - BROCA Ø7,5X70/350 GRADUADA SJ; B51 2 403 - BROCA Ø7,5X70/400 GRADUADA SJ; B51 2 404 - BROCA Ø8,0 SJ; B51 2 405 - BROCA Ø8,0X30/150 SJ; B51 2 406 - BROCA Ø8,0X30/180 SJ; B51 2 407 - BROCA Ø8,0X30/200 SJ; B51 2 408 - BROCA Ø8,0X30/220 SJ; B51 2 409 - BROCA Ø8,0X30/250 SJ; B51 2 410 - BROCA Ø8,0X40/150 SJ; B51 2 411 - BROCA Ø8,0X40/180 SJ; B51 2 412 - BROCA Ø8,0X40/200 SJ; B51 2 413 - BROCA Ø8,0X40/220 SJ; B51 2 414 - BROCA Ø8,0X40/250 SJ; B51 2 415 - BROCA Ø8,0X40/300 SJ; B51 2 416 - BROCA Ø8,0X40/350 SJ; B51 2 417 - BROCA Ø8,0X40/400 SJ; B51 2 418 - BROCA Ø8,0X50/150 SJ; B51 2 419 - BROCA Ø8,0X50/180 SJ; B51 2 420 - BROCA Ø8,0X50/200 SJ; B51 2 421 - BROCA Ø8,0X50/220 SJ; B51 2 422 - BROCA Ø8,0X50/250 SJ; B51 2 423 - BROCA Ø8,0X50/300 SJ; B51 2 424 - BROCA Ø8,0X50/350 SJ; B51 2 425 - BROCA Ø8,0X50/400 SJ; B51 2 426 - BROCA Ø8,0X70/200 SJ; B51 2 427 - BROCA Ø8,0X70/220 SJ; B51 2 428 - BROCA Ø8,0X70/250 SJ; B51 2 429 - BROCA Ø8,0X70/300 SJ; B51 2 430 - BROCA Ø8,0X70/350 SJ; B51 2 431 - BROCA Ø8,0X70/400 SJ; B51 2 432 - BROCA Ø8,0 GRADUADA SJ; B51 2 433 - BROCA Ø8,0X30/200 GRADUADA SJ; B51 2 434 - BROCA Ø8,0X30/220 GRADUADA SJ; B51 2 435 - BROCA Ø8,0X30/250 GRADUADA SJ; B51 2 436 - BROCA Ø8,0X40/200 GRADUADA SJ; B51 2 437 - BROCA Ø8,0X40/220 GRADUADA SJ; B51 2 438 - BROCA Ø8,0X40/250 GRADUADA SJ; B51 2 439 - BROCA Ø8,0X40/300 GRADUADA SJ; B51 2 440 - BROCA Ø8,0X40/350 GRADUADA SJ; B51 2 441 - BROCA Ø8,0X40/400 GRADUADA SJ; B51 2 442 - BROCA Ø8,0X50/200 GRADUADA SJ; B51 2 443 - BROCA Ø8,0X50/220 GRADUADA SJ; B51 2 444 - BROCA Ø8,0X50/250 GRADUADA SJ; B51 2 445 - BROCA Ø8,0X50/300 GRADUADA SJ; B51 2 446 - BROCA Ø8,0X50/350 GRADUADA SJ; B51 2 447 - BROCA Ø8,0X50/400 GRADUADA SJ; B51 2 448 - BROCA Ø8,0X70/200 GRADUADA SJ; B51 2 449 - BROCA Ø8,0X70/220 GRADUADA SJ; B51 2 450 - BROCA Ø8,0X70/250 GRADUADA SJ; B51 2 451 - BROCA Ø8,0X70/300 GRADUADA SJ; B51 2 452 - BROCA Ø8,0X70/350 GRADUADA SJ; B51 2 453 - BROCA Ø8,0X70/400 GRADUADA SJ; B51 2 454 - BROCA Ø9,0 SJ; B51 2 455 - BROCA Ø9,0X30/150 SJ; B51 2 456 - BROCA Ø9,0X30/180 SJ; B51 2 457 - BROCA Ø9,0X30/200 SJ; B51 2 458 - BROCA Ø9,0X30/220 SJ; B51 2 459 - BROCA Ø9,0X30/250 SJ; B51 2 460 - BROCA Ø9,0X40/150 SJ; B51 2 461 - BROCA Ø9,0X40/180 SJ; B51 2 462 - BROCA Ø9,0X40/200 SJ; B51 2 463 - BROCA Ø9,0X40/220 SJ; B51 2 464 - BROCA Ø9,0X40/250 SJ; B51 2 465 - BROCA Ø9,0X40/300 SJ; B51 2 466 - BROCA Ø9,0X40/350 SJ; B51 2 467 - BROCA Ø9,0X40/400 SJ; B51 2 468 - BROCA Ø9,0X50/150 SJ; B51 2 469 - BROCA Ø9,0X50/180 SJ; B51 2 470 - BROCA Ø9,0X50/200 SJ; B51 2 471 - BROCA Ø9,0X50/220 SJ; B51 2 472 - BROCA Ø9,0X50/250 SJ; B51 2 473 - BROCA Ø9,0X50/300 SJ; B51 2 474 - BROCA Ø9,0X50/350 SJ; B51 2 475 - BROCA Ø9,0X50/400 SJ; B51 2 476 - BROCA Ø9,0X70/200 SJ; B51 2 477 - BROCA Ø9,0X70/220 SJ; B51 2 478 - BROCA Ø9,0X70/250 SJ; B51 2 479 - BROCA Ø9,0X70/300 SJ; B51 2 480 - BROCA Ø9,0X70/350 SJ; B51 2 481 - BROCA Ø9,0X70/400 SJ; B51 2 482 - BROCA Ø9,0 GRADUADA SJ; B51 2 483 - BROCA Ø9,0X30/200 GRADUADA SJ; B51 2 484 - BROCA Ø9,0X30/220 GRADUADA SJ; B51 2 485 - BROCA Ø9,0X30/250 GRADUADA SJ; B51 2 486 - BROCA Ø9,0X40/200 GRADUADA SJ; B51 2 487 - BROCA Ø9,0X40/220 GRADUADA SJ; B51 2 488 - BROCA Ø9,0X40/250 GRADUADA SJ; B51 2 489 - BROCA Ø9,0X40/300 GRADUADA SJ; B51 2 490 - BROCA Ø9,0X40/350 GRADUADA SJ; B51 2 491 - BROCA Ø9,0X40/400 GRADUADA SJ; B51 2 492 - BROCA Ø9,0X50/200 GRADUADA SJ; B51 2 493 - BROCA Ø9,0X50/220 GRADUADA SJ; B51 2 494 - BROCA Ø9,0X50/250 GRADUADA SJ; B51 2 495 - BROCA Ø9,0X50/300 GRADUADA SJ; B51 2 496 - BROCA Ø9,0X50/350 GRADUADA SJ; B51 2 497 - BROCA Ø9,0X50/400 GRADUADA SJ; B51 2 498 - BROCA Ø9,0X70/200 GRADUADA SJ; B51 2 499 - BROCA Ø9,0X70/220 GRADUADA SJ; B51 2 500 - BROCA Ø9,0X70/250 GRADUADA SJ; B51 2 501 - BROCA Ø9,0X70/300 GRADUADA SJ; B51 2 502 - BROCA Ø9,0X70/350 GRADUADA SJ; B51 2 503 - BROCA Ø9,0X70/400 GRADUADA SJ; B51 2 504 - BROCA Ø10,0 SJ; B51 2 505 - BROCA Ø10,0X30/200 SJ; B51 2 506 - BROCA Ø10,0X30/220 SJ; B51 2 507 - BROCA Ø10,0X30/250 SJ; B51 2 508 - BROCA Ø10,0X40/200 SJ; B51 2 509 - BROCA Ø10,0X40/220 SJ; B51 2 510 - BROCA Ø10,0X40/250 SJ; B51 2 511 - BROCA Ø10,0X40/300 SJ; B51 2 512 - BROCA

Ø10,0X40/350 SJ; B51 2 513 - BROCA Ø10,0X40/400 SJ; B51 2 514 - BROCA Ø10,0X50/200 SJ; B51 2 515 - BROCA Ø10,0X50/220 SJ; B51 2 516 - BROCA Ø10,0X50/250 SJ; B51 2 517 - BROCA Ø10,0X50/300 SJ; B51 2 518 - BROCA Ø10,0X50/350 SJ; B51 2 519 - BROCA Ø10,0X50/400 SJ; B51 2 520 - BROCA Ø10,0X70/200 SJ; B51 2 521 - BROCA Ø10,0X70/220 SJ; B51 2 522 - BROCA Ø10,0X70/250 SJ; B51 2 523 - BROCA Ø10,0X70/300 SJ; B51 2 524 - BROCA Ø10,0X70/350 SJ; B51 2 525 - BROCA Ø10,0X70/400 SJ; B51 2 526 - BROCA Ø10,0 GRADUADA SJ; B51 2 527 - BROCA Ø10,0X30/200 GRADUADA SJ; B51 2 528 - BROCA Ø10,0X30/220 GRADUADA SJ; B51 2 529 - BROCA Ø10,0X30/250 GRADUADA SJ; B51 2 530 - BROCA Ø10,0X40/200 GRADUADA SJ; B51 2 531 - BROCA Ø10,0X40/220 GRADUADA SJ; B51 2 532 - BROCA Ø10,0X40/250 GRADUADA SJ; B51 2 533 - BROCA Ø10,0X40/300 GRADUADA SJ; B51 2 534 - BROCA Ø10,0X40/350 GRADUADA SJ; B51 2 535 - BROCA Ø10,0X40/400 GRADUADA SJ; B51 2 536 - BROCA Ø10,0X50/200 GRADUADA SJ; B51 2 537 - BROCA Ø10,0X50/220 GRADUADA SJ; B51 2 538 - BROCA Ø10,0X50/250 GRADUADA SJ; B51 2 539 - BROCA Ø10,0X50/300 GRADUADA SJ; B51 2 540 - BROCA Ø10,0X50/350 GRADUADA SJ; B51 2 541 - BROCA Ø10,0X50/400 GRADUADA SJ; B51 2 542 - BROCA Ø10,0X70/200 GRADUADA SJ; B51 2 543 - BROCA Ø10,0X70/220 GRADUADA SJ; B51 2 544 - BROCA Ø10,0X70/250 GRADUADA SJ; B51 2 545 - BROCA Ø10,0X70/300 GRADUADA SJ; B51 2 546 - BROCA Ø10,0X70/350 GRADUADA SJ; B51 2 547 - BROCA Ø10,0X70/400 GRADUADA SJ; B51 2 548 - BROCA Ø11,0 SJ; B51 2 549 - BROCA Ø11,0X30/200 SJ; B51 2 550 - BROCA Ø11,0X30/220 SJ; B51 2 551 - BROCA Ø11,0X30/250 SJ; B51 2 552 - BROCA Ø11,0X40/200 SJ; B51 2 553 - BROCA Ø11,0X40/220 SJ; B51 2 554 - BROCA Ø11,0X40/250 SJ; B51 2 555 - BROCA Ø11,0X40/300 SJ; B51 2 556 - BROCA Ø11,0X40/350 SJ; B51 2 557 - BROCA Ø11,0X40/400 SJ; B51 2 558 - BROCA Ø11,0X50/200 SJ; B51 2 559 - BROCA Ø11,0X50/220 SJ; B51 2 560 - BROCA Ø11,0X50/250 SJ; B51 2 561 - BROCA Ø11,0X50/300 SJ; B51 2 562 - BROCA Ø11,0X50/350 SJ; B51 2 563 - BROCA Ø11,0X50/400 SJ; B51 2 564 - BROCA Ø11,0X70/200 SJ; B51 2 565 - BROCA Ø11,0X70/220 SJ; B51 2 566 - BROCA Ø11,0X70/250 SJ; B51 2 567 - BROCA Ø11,0X70/300 SJ; B51 2 568 - BROCA Ø11,0X70/350 SJ; B51 2 569 - BROCA Ø11,0X70/400 SJ; B51 2 570 - BROCA Ø11,0 GRADUADA SJ; B51 2 571 - BROCA Ø11,0X30/200 GRADUADA SJ; B51 2 572 - BROCA Ø11,0X30/220 GRADUADA SJ; B51 2 573 - BROCA Ø11,0X30/250 GRADUADA SJ; B51 2 574 - BROCA Ø11,0X40/200 GRADUADA SJ; B51 2 575 - BROCA Ø11,0X40/220 GRADUADA SJ; B51 2 576 - BROCA Ø11,0X40/250 GRADUADA SJ; B51 2 577 - BROCA Ø11,0X40/300 GRADUADA SJ; B51 2 578 - BROCA Ø11,0X40/350 GRADUADA SJ; B51 2 579 - BROCA Ø11,0X40/400 GRADUADA SJ; B51 2 580 - BROCA Ø11,0X50/200 GRADUADA SJ; B51 2 581 - BROCA Ø11,0X50/220 GRADUADA SJ; B51 2 582 - BROCA Ø11,0X50/250 GRADUADA SJ; B51 2 583 - BROCA Ø11,0X50/300 GRADUADA SJ; B51 2 584 - BROCA Ø11,0X50/350 GRADUADA SJ; B51 2 585 - BROCA Ø11,0X50/400 GRADUADA SJ; B51 2 586 - BROCA Ø11,0X70/200 GRADUADA SJ; B51 2 587 - BROCA Ø11,0X70/220 GRADUADA SJ; B51 2 588 - BROCA Ø11,0X70/250 GRADUADA SJ; B51 2 589 - BROCA Ø11,0X70/300 GRADUADA SJ; B51 2 590 - BROCA Ø11,0X70/350 GRADUADA SJ; B51 2 591 - BROCA Ø11,0X70/400 GRADUADA SJ; B51 3 350 - BROCA Ø1,3X20/110 TR; B51 3 355 - BROCA Ø1,5X40/100 TR; B51 3 360 - BROCA Ø1,5X40/110 TR; B51 3 365 - BROCA Ø1,8X40/125 TR; B51 3 370 - BROCA Ø2,0X40/100 TR; B51 3 375 - BROCA Ø2,4X40/100 TR; B51 3 400 - BROCA Ø1,7X40/110 GRADUADA TR, PEQUENOS FRAGMENTOS; B51 3 405 - BROCA Ø1,8X40/110 GRADUADA TR, PEQUENOS FRAGMENTOS; B51 3 410 - BROCA Ø2,0X40/110 GRADUADA TR, PEQUENOS FRAGMENTOS; B51 3 415 - BROCA Ø2,4X40/100 GRADUADA TR, PEQUENOS FRAGMENTOS; B51 3 420 - BROCA Ø2,5X40/100 GRADUADA TR, PEQUENOS FRAGMENTOS; B51 3 425 - BROCA Ø2,7X40/110 GRADUADA TR, PEQUENOS FRAGMENTOS; B51 3 430 - BROCA Ø2,8X40/110 GRADUADA TR, PEQUENOS FRAGMENTOS; B51 3 550 - BROCA Ø1,3X20/65 ST; B51 3 553 - BROCA Ø1,3X20/80 ST; B51 3 560 - BROCA Ø1,5X20/65 ST; B51 3 565 - BROCA Ø1,7X30/80 ST; B51 3 570 - BROCA Ø1,8X30/80 ST; B51 3 580 - BROCA Ø2,0X20/65 ST; B51 3 585 - BROCA Ø2,4X30/80 ST; B51 3 590 - BROCA Ø2,5X40/120 ST; B51 3 600 - BROCA Ø1,3X20/80 GRADUADA ST, PEQUENOS FRAGMENTOS; B51 3 610 - BROCA Ø1,7X30/120 GRADUADA ST, PEQUENOS FRAGMENTOS; B51 3 630 - BROCA Ø2,0X30/120 GRADUADA ST, PEQUENOS FRAGMENTOS; B51 3 650 - BROCA Ø2,8X30/120 GRADUADA ST, PEQUENOS FRAGMENTOS; B51 3 660 - BROCA Ø3,5X30/120 GRADUADA ST, PEQUENOS FRAGMENTOS; B51 3 700 - BROCA Ø2,2 CANULADA - PC Ø3,0; B51 3 705 - BROCA Ø2,3 CANULADA - PC Ø3,0; B51 3 710 - BROCA Ø2,5 CANULADA - PC Ø3,5; B51 3 715 - BROCA Ø2,7 CANULADA - PC Ø4,0; B51 3 720 - BROCA Ø3,2 CANULADA - PC Ø4,5; B51 3 725 - BROCA Ø3,5 CANULADA - PC Ø3,5; B51 3 730 - BROCA Ø4,5 CANULADA - PC Ø4,5; B51 3 735 - BROCA Ø5,0 CANULADA - PC Ø6,5/7,0/7,3; B51 3 750 - BROCA CANULADA - MINI HERBERT IOL; B51 3 755 - BROCA CANULADA CURTA - CÔNICO 3,0/2,2 IOL; B51 3 760 - BROCA CANULADA LONGA - CÔNICO 3,0/2,2 IOL; B51 3 800 - BROCA P/ ÂNCORA TI Ø1,9; B51 3 805 - BROCA P/ ÂNCORA TI Ø2,0; B51 3 810 - BROCA P/ ÂNCORA TI Ø2,7; B51 3 815 - BROCA P/ ÂNCORA TI Ø3,0; B51 3 820 - BROCA P/ ÂNCORA TI Ø3,5; B51 3 825 - BROCA P/ ÂNCORA TI Ø4,0; B51 3 830 - BROCA P/ ÂNCORA TI Ø4,5; B51 3 835 - BROCA P/ ÂNCORA TI Ø5,0; B51 3 840 - BROCA P/ ÂNCORA TI Ø5,5; B51 3 850 - BROCA LONGA P/ ÂNCORA TI Ø1,9; B51 3 855 - BROCA LONGA P/ ÂNCORA TI Ø2,0; B51 3 860 - BROCA LONGA P/ ÂNCORA TI Ø2,7; B51 3 865 - BROCA LONGA P/ ÂNCORA TI Ø3,0; B51 3 870 - BROCA LONGA P/ ÂNCORA TI Ø3,5; B51 3 875 - BROCA LONGA P/ ÂNCORA TI Ø4,0; B51 3 880 - BROCA LONGA P/ ÂNCORA TI Ø4,5; B51 3 885 - BROCA LONGA P/ ÂNCORA TI Ø5,0; B51 3 890 - BROCA LONGA P/ ÂNCORA TI Ø5,5; B51 3 900 - BROCA P/ ÂNCORA IMPACTADA PEEK Ø2,7; B51 3 910 - BROCA P/ ÂNCORA IMPACTADA PEEK Ø3,0; B51 3 920 - BROCA P/ ÂNCORA IMPACTADA PEEK Ø3,5; B51 3 950 - BROCA LONGA P/ ÂNCORA IMPACTADA PEEK Ø2,7; B51 3 955 - BROCA LONGA P/ ÂNCORA IMPACTADA PEEK Ø3,0; B51 3 960 - BROCA LONGA P/ ÂNCORA IMPACTADA PEEK Ø3,5; B51 3 970 - BROCA FLEXÍVEL P/ ÂNCORA JK Ø1,4/1,5 - GU; B51 3 972 - BROCA Ø1,8X300 C/ STOP P/ ÂNCORA DT - PM; B51 3 974 - BROCA P/ ÂNCORA PEEK PLK Ø2,8/3,3 - LV; B51 3 976 - BROCA P/ ÂNCORA JK Ø2,9 - GU; B51 3 978 - BROCA Ø3,0X300 P/ ÂNCORA PEEK KL/S3 Ø3,5 - PM; B51 3 980 - BROCA P/ ÂNCORA YK - LV; B51 3 982 - BROCA P/ ÂNCORA Ø3,5 - LG; B51 3 984 - BROCA P/ ÂNCORA EM MALHA 1,4 SK; B51 3 986 - BROCA P/ ÂNCORA EM MALHA 2,3 SK; 5181016-040 - BROCA CALIBRADA DIAM.4,0MM CURTA HBFT; 5181016-140 - BROCA CALIBRADA DIAM.4,0MM LONGA HBFT; 5181016-043 - BROCA CALIBRADA DIAM.4,3MM CURTA HBFT; 5181016-143 - BROCA CALIBRADA DIAM.4,3MM LONGA HBFT.

INSTRUÇÕES DE USO

As brocas devem ser utilizadas com Guias de Brocas (não integrante deste produto – possuem registro próprio na ANVISA), para que não ocorra a perda de alinhamento da perfuração, e haja proteção às partes moles adjacentes, caso contrário poderá ocorrer danos, como por exemplo, quebra do instrumental.

Os cuidados com este material são de responsabilidade de pessoal habilitado, os quais devem seguir normatizações e/ou demais regulamentos locais aplicáveis.

Os produtos, antes e após a esterilização, devem ser manipulados e armazenados com os devidos cuidados, somente por pessoas devidamente capacitadas, em ambientes adequados (centros de materiais e salas cirúrgicas) para que não ocorra dano ao material ou perda da esterilização, acarretando infecção ao paciente.

Os produtos somente devem ser utilizados por equipes cirúrgicas especializadas, com conhecimento e capacitação específica sobre as técnicas e procedimentos cirúrgicos ortopédicos, sendo de responsabilidade do cirurgião a escolha e o domínio da técnica a ser aplicada.

A correta seleção e posicionamento da broca são essenciais para otimizar o procedimento cirúrgico. Devem estar asseguradas as condições para que ocorra cirurgia altamente asséptica e que todos os instrumentais, estejam disponíveis antes do uso e na condição de estéreis.

INSTRUÇÃO DE USO DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO:

- ✓ Seleção do diâmetro e comprimento da broca mais adequada para o tipo de procedimento e técnica adotada;
- ✓ Encaixar e fixar a extremidade do engate da broca em um dos produtos mencionados no item Componentes Ancilares, não integrantes deste produto;
- ✓ Realizar incisão cirúrgica e inserir o guia de broca (componente ancilar e não integrante deste produto), confirmando seu posicionamento através do Raio-X ou intensificador de imagens;
- ✓ Para Brocas canuladas, inserir o fio guia através do guia de broca (componentes ancilares e não integrantes deste produto) até a profundidade e posicionamento adequado. Comprovar o posicionamento através de exame por imagem;
- ✓ Perfurar o canal com a broca através do fio guia. Checar o posicionamento através do exame por imagem.

MANUSEIO

O produto deve ser mantido em sua embalagem original até o momento de sua utilização, sendo que a abertura da embalagem para utilização cirúrgica e o manuseio do produto deverá ser realizado por pessoal habilitado para este procedimento.

A embalagem deve ser examinada antes do uso para assegurar a integridade do produto. Se a embalagem estiver violada ou danificada não deve ser utilizado e descartado em local apropriado.

Em caso de queda accidental, o produto deve ser inspecionado para verificar possíveis danos superficiais como trincas, quebras, amassados, que podem comprometer o desempenho do produto, constatado tal problema, o produto deve ser descartado, como indicado no item "Forma de Descarte do Instrumental".

A correta manipulação antes e durante a operação é determinante para o sucesso da cirurgia.

LIMPEZA

A limpeza é uma das etapas mais importantes antes da esterilização do produto.

Conforme norma NBR 11816 – Esterilização – Esterilizadores a vapor com vácuo, para produtos de saúde, toda água utilizada para lavagem, desinfecção e esterilização deve ser destilada, deionizada ou desmineralizada. Deve ser utilizada com sabão neutro ou detergente enzimático, para remoção da matéria orgânica do instrumental.

A limpeza deve ser iniciada imediatamente após o término do procedimento cirúrgico, para remoção de resíduos orgânicos (sangue, pus, gorduras), substâncias químicas (água oxigenada, álcool, éter, iodo etc.) e outras secreções.

Para limpeza do produto, armazenar os instrumentais utilizados em recipientes furados para serem imersos em água quente (temperatura de 40° a 45°C) e solução de fenol sintético ou solução enzimática em concentração, mantendo a solução em contato com o instrumental por no mínimo 3 minutos ou por tempo determinados pelo fabricante da solução. Após a retirada dos instrumentais da solução enzimática, deverão ser enxaguados diretamente em jatos de água desmineralizada ou destilada, para remoção de resíduos. Não ultrapassar 45°C, caso contrário pode causar a coagulação de proteínas contida no sangue e outras secreções, dificultando o processo de remoção de sujeiras presentes no instrumental. Em brocas canuladas injetar essa solução dentro do instrumental com uma seringa de 20ml, quantas vezes for necessária até que a solução sai limpa.

Em hipótese alguma, devem-se empregar palhas de aço ou outros produtos abrasivos, mesmo os saponáceos para remoção de sujidades remanescentes, em qualquer etapa do processo de limpeza, pois a utilização dos mesmos pode danificar a camada de proteção do instrumental recebida durante o processo de fabricação. Deve-se utilizar esponjas macias, para retirada de substâncias como tecidos orgânicos, secreções e substâncias químicas, friccionando a superfície externa de cada instrumental no mínimo 5 vezes, do sentido proximal para o distal. Repetir esse procedimento até a eliminação de sujeira visível, certificando-se de que todas as reentrâncias foram lavadas.

DESCONTAMINAÇÃO

Para descontaminação do produto, o instrumental deve ser imerso em solução desinfetante e água em temperatura ambiente (desinfecção química) ou em banho aquecido (desinfecção termoquímica). O tempo de imersão e temperatura da água durante a operação e a diluição do desinfetante empregado deve ser seguido conforme determinação do fabricante da solução.

O instrumental deve ser enxaguado abundantemente em jato de água desmineralizada ou destilada, recomenda-se que a água esteja aquecida (temperatura entre 30° e 40°C). Instrumentais canulados enxaguar a superfície interna injetando água desmineralizada ou destilada (aquecida à uma temperatura entre 30° e 40°C) sob pressão pelo menos 5 vezes. O enxágue final com água desmineralizada ou destilada sob pressão, certificando-se posteriormente a ausência de sujeira.

Recomendamos não misturar soluções diferentes e não utilizar hipoclorito de sódio em artigos metálicos.

Se o processo de limpeza for realizado em equipamentos termodesinfectores com o auxílio de substâncias desincrustantes, as orientações do fabricante destes devem ser adotadas.

Para secar os instrumentais utilizar panos que não liberem fibras ou partículas, dar preferência a tecidos absorventes ou com ar sob pressão. Secar os instrumentais separadamente.

Para instrumentais canulados, utilizar ar sob pressão, internamente para secagem dos mesmos.

É importante a inspeção do processo, ou seja, verificar a presença de sujeira sobre um pano branco, verificar a presença de sujeira a olho nu, analisando o instrumental do sentido proximal para o distal e verificar a presença de sujeira com o auxílio de uma lupa, analisando o instrumental do sentido proximal para o distal.

ESTERILIZAÇÃO

As Brocas são fornecidas na condição de produto Não Estéril.

Após a limpeza e descontaminação, os instrumentais devem ser acondicionados em recipiente apropriado para esterilização, como caixas cirúrgicas. O método indicado é a esterilização por calor úmido (autoclave). Os instrumentais devem ser manipulados e esterilizados adequadamente, conforme informações a seguir, de forma a evitar a contaminação e consequente infecção ao paciente.

É recomendado que os instrumentais sejam limpos, descontaminados e esterilizados imediatamente antes do procedimento cirúrgico, de forma a preservar intactos o acabamento da superfície, e convém que os mesmos sejam manuseados o mínimo possível quando nessas condições. Deve-se evitar a contaminação após a esterilização.

A esterilização deve ser realizada conforme parâmetros descritos na tabela abaixo:

Método	Ciclo	Temperatura	Tempo de Exposição
Calor Úmido (autoclave)	Pré-Vácuo Esterilização (Vácuo) Secagem	134° à 137°	10 minutos

O processo de esterilização deve atender a probabilidade teórica da presença de micro-organismos vitais de no máximo 1 sobre 10^{-6} (S.A.L. [Sterility Assurance Level] nível de garantia de esterilidade = 10^{-6}).

As condições do equipamento (autoclave) utilizado durante o processo de esterilização (programa de calibração, manutenção etc.), bem como a garantia da utilização de um processo de esterilização adequado e a comprovação da esterilidade do produto é responsabilidade do pessoal habilitado (central de material) do serviço de saúde.

NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS

Na ocorrência de qualquer evento adverso ou a necessidade de registrar queixa técnica, a SARTORI e a Anvisa devem ser notificadas por meio dos seguintes canais:

SARTORI: <https://sartori.ind.br>

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) através do telefone +55 (19) 3538-1910 ou pelo e-mail: info@sartori.ind.br

Sistema NOTIVISA (Anvisa): www.gov.br/anvisa

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Os produtos devem ser armazenados em suas embalagens originais em local seco, arejado e sem exposição à incidência de luz solar direta, à umidade ou a substâncias contaminantes.

Os produtos devem ser armazenados em prateleiras e nunca diretamente sobre o chão.

Condições inadequadas de manipulação e armazenamento, podem provocar danos como perda de informações do rótulo, danos mecânicos aos instrumentais, acarretando problemas ao paciente.

TRANSPORTE

O transporte do produto deve ser realizado de forma segura, para que não ocorra queda, atrito ou outro tipo de dano mecânico ao material, podendo acarretar falência precoce do instrumental.

O transporte deve ser realizado por empresa capacitada e pessoal devidamente treinado para execução desta etapa.

O produto deve ser devidamente identificado como material médico de uso hospitalar.

FORMA DE DESCARTE DO INSTRUMENTAL

Os instrumentais considerados inadequados ao uso devem ser descartados sob avaliação e orientação técnica. Recomenda-se que antes do descarte, o produto seja descaracterizado, para tal as peças podem ser cortadas, entortadas ou limadas.

Os métodos e procedimentos de descarte devem assegurar a completa descaracterização do mesmo, impedindo qualquer possibilidade de sua reutilização. A descaracterização do produto é de inteira responsabilidade da instituição hospitalar, assim como, os métodos e procedimentos de descarte utilizados. Entretanto, a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores recomenda que tais produtos sejam deformados mecanicamente. Em seguida, devem ser identificados de forma clara e visível, indicando a sua situação, ou seja, impróprio ao uso.

Devem ser descartados em locais apropriados, de forma a evitar a contaminação do meio ambiente e demais indivíduos. Recomenda-se a adoção dos regulamentos legais locais para descarte de produtos potencialmente contaminantes.

RECLAMAÇÃO E ATENDIMENTO AO CLIENTE

Todo cliente ou usuário que tiver dúvidas ou queira maiores esclarecimentos sobre os serviços e/ou produtos oferecidos, poderá entrar em contato com a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores através dos dados para contato contido nas instruções de uso e rótulos da embalagem do produto.

Para o envio de produtos utilizados ao fabricante para análise, o produto deve estar limpo e estéril. Devem ser utilizadas embalagens que mantenham a integridade física do produto. A embalagem deve conter todas as informações necessárias para a identificação do produto, bem como as condições de manuseio desses produtos, tais como métodos de limpeza e desinfecção utilizados, bem como descrição e número do lote do produto médico.

FABRICANTE / DETENTOR DA NOTIFICAÇÃO:

LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA.

Avenida Brasil, n.º 13500 - Distrito de Ajapi - Rio Claro - SP

CEP.: 13508-500 Tel.: (19) 3538-1910

CNPJ: 04.861.623/0001-00 Indústria Brasileira

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: (19) 3538-1910

e-mail: info@sartori.ind.br

Registro ANVISA n.º: 80083650035

Responsável Técnico: Sérgio R.A.de Oliveira

CREA/SP: 5070105936

Revisão 07 07/2025