

PRÓTESE

PARCIAL PARA CABEÇA DE RÁDIO



ÍNDICE

PRÓTESE PARCIAL PARA CABEÇA DE RÁDIO


Prótese Parcial para Cabeça de Rádio	03
Relação Instrumentais	05



ENTRE EM
CONTATO

 (19) 3538-1910
 WWW.SARTORI.IND.BR
 comercial@sartori.ind.br
 Av. Brasil, 13.500 – Bairro Ajapi
Rio Claro – SP
CEP: 13508-500

A Prótese Parcial para Cabeça de Rádio é um componente radial não modular monocomponente metálico. Sua extremidade é chanfrada para facilitar a inserção no canal medular. A cabeça da prótese é altamente polida para permitir um melhor desempenho da articulação. Este produto é destinado à artroplastia parcial da articulação, primária ou de revisão, desenvolvido para ser fixado ao canal medular radial através de cimento ósseo.

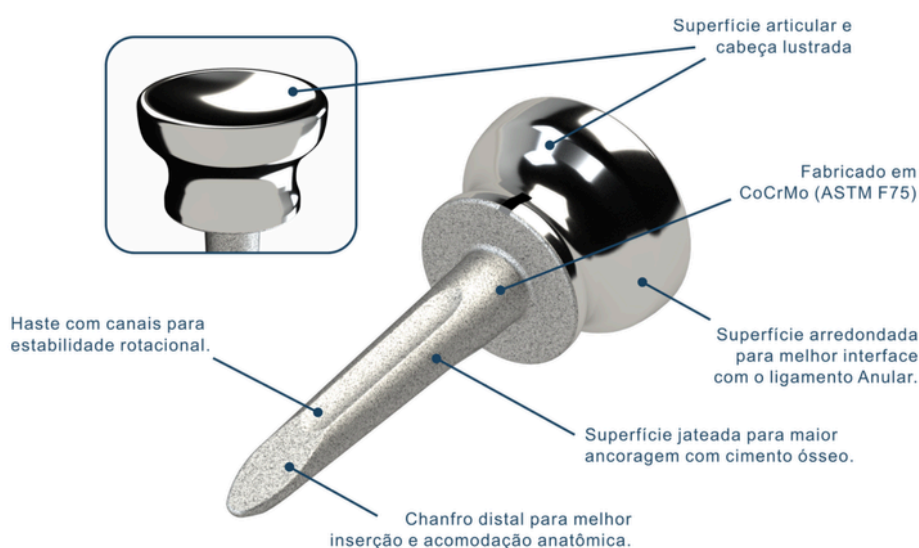

INDICAÇÃO E FINALIDADE

A Prótese Parcial para Cabeça de Rádio está indicada nos casos de fratura cominutiva da cabeça do rádio associada:

- Instabilidade do cotovelo;
- Ruptura do ligamento colateral medial;
- Lesão do ligamento colateral lateral ulnar;
- Monteggia equivalente com fratura do olécrano e rádio;
- Fratura extensa do coronóide
- Lesão de Essex-Lopresti (lesão da membrana interóssea rádio-ulnar e articulação rádio-ulnar distal).




CONTRAINDICAÇÕES

A seguir são listadas as contraindicações para a utilização dos implantes, ficando a cargo do cirurgião responsável, após um estudo minucioso do caso, a indicação do procedimento cirúrgico:

- Infecção ativa;
- Condição clínica pré-operatória desfavorável;
- Lesões neurológicas graves;
- Pacientes com sensibilidade a corpos estranhos, sendo que nestes casos testes deverão ser realizados;
- Pacientes que não querem ou estão impossibilitados de seguir as instruções pós-operatórias devido às condições que apresentam (mental ou física);
- Pacientes que fazem uso de substâncias entorpecentes, alcoólicas ou fumo;
- Pacientes com doença degenerativa avançada (por ex. osteoporose) e/ou outras afecções ósseas que possam comprometer a estabilidade da fixação e a vida útil do implante;
- Pacientes com estado geral comprometido e/ou imunodeprimidos impossibilitados de se submeter a um procedimento cirúrgico;
- Desordens metabólicas ou sistêmicas, ou tratamentos médicos que levam à deterioração progressiva dos ossos (terapias com corticóides).

ESPECIFICAÇÕES

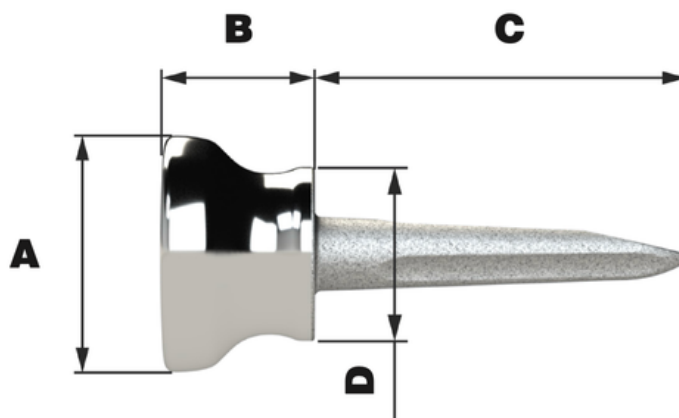




PRÓTESE PARCIAL PARA CABEÇA DE RÁDIO

CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	A	B	C	D
		DIÂMETRO DA CABEÇA	ALTURA DA CABEÇA	COMPRIMENTO DA HASTE	DIÂMETRO DE APOIO
0323019-009	PRÓT. PARCIAL P/ CABEÇA DE RÁDIO	19	9,0 mm	30,0 mm	14,0 mm
0323019-012	PRÓT. PARCIAL P/ CABEÇA DE RÁDIO	19	12,0 mm	30,0 mm	14,0 mm
0323019-015	PRÓT. PARCIAL P/ CABEÇA DE RÁDIO	19	15,0 mm	30,0 mm	14,0 mm
0323019-018	PRÓT. PARCIAL P/ CABEÇA DE RÁDIO	19	18,0 mm	30,0 mm	14,0 mm
0323019-021	PRÓT. PARCIAL P/ CABEÇA DE RÁDIO	19	21,0 mm	30,0 mm	14,0 mm

RELAÇÃO INSTRUMENTAIS



CÓDIGO	NOME DO PRODUTO
T20 3 409	APOIO 09,0 RÁDIO
T20 3 412	APOIO 12,0 RÁDIO
T20 3 415	APOIO 15,0 RÁDIO
T20 3 418	APOIO 18,0 RÁDIO
T20 3 421	APOIO 21,0 RÁDIO
E00 0 348	ESTOJO S188
T25 0 430	FRESA COM STOP 4RÁDIO
T56 0 681	GUIA P/PRÓTESE DE CABEÇA DE RÁDIO
T28 0 410	IMPACTOR DE CABEÇA RÁDIO
R37 0 310	RASPA FINAL - RÁDIO MB
R37 0 300	RASPA INICIAL - RÁDIO MB

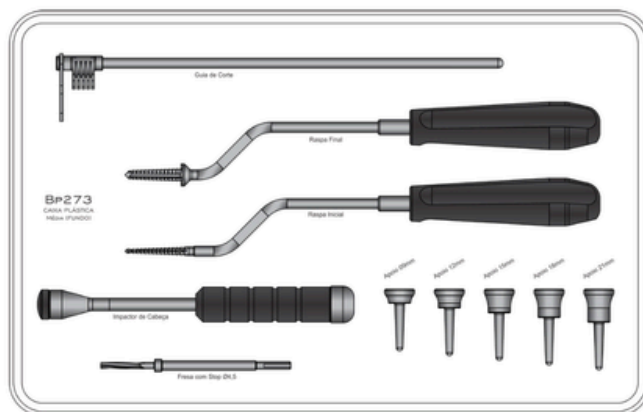


RÁDIO

Prótese parcial para cabeça de Rádio.

Partial prosthesis for Radial head.

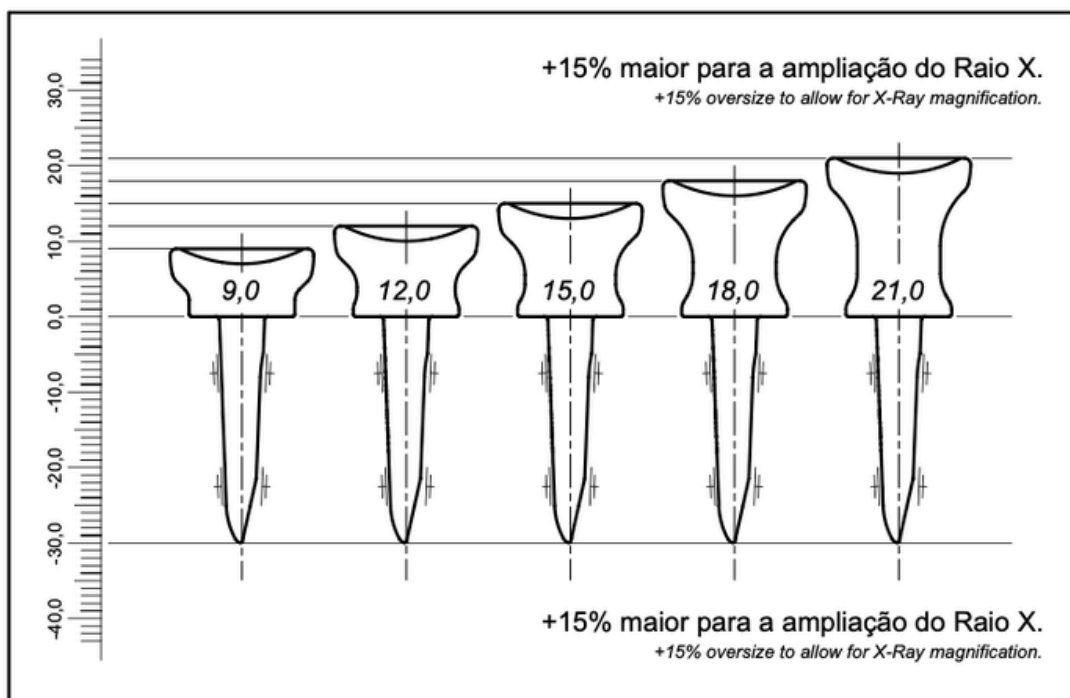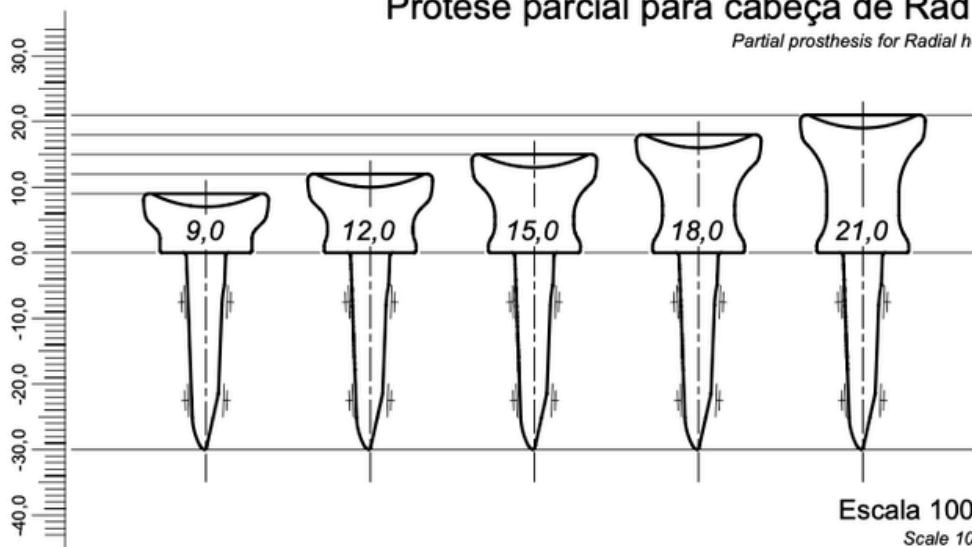

Indicador graduado do manto de cimento 0,5-1,0mm.
Graduated marker indicating cement mantle 0,5-1,0mm.

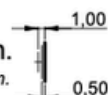



PRÓTESE

PARCIAL PARA CABEÇA DE RÁDIO



ENTRE EM
CONTATO

 (19) 3538-1910

 WWW.SARTORI.IND.BR

 comercial@sartori.ind.br

 Av. Brasil, 13.500 - Bairro Ajapi
Rio Claro - SP
CEP: 13508-500